


Inami Ophthalmic Instruments & Seminar Informations

# NEW PRODUCTS

## 2025 SUMMER

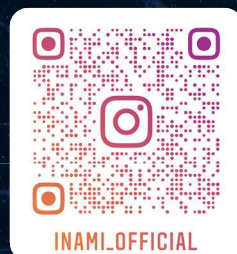

## 谷戸フックのディスポーザブル Version

TANITO MICRO HOOK  
TMH®  
Original-ed.

### ご考案者 谷戸 正樹 先生 コメント（島根大学医学部眼科学講座 教授）コメント

「眼内アプローチでトラベクトミーを行うための専用フックである。耳側・上方からのアプローチに適したストレートタイプと鼻側からのアプローチに適した左右向きのアングルドタイプがある。隅角プリズム観察下に、フック先端を、線維柱帯色素帯に沿って滑らせるようにシュレム氏管内に刺入する事で、そのままトラベクトミーに移行できる。フック先端が線維柱帯に透けて見える深さが適切である。シュレム氏管外壁の損傷を避けるために、フック先端の刺入が深すぎる場合に線維柱帯切開時の抵抗を感じる先端デザインとなっており、その場合には、やや浅い位置にフック先端を引いて、抵抗の無い深さでトラベクトミーを行う。」



### 谷戸氏 ab interno トラベクトミーマイクロフック ディスポ 直 5本入り

単回使用

DP-2215S 全長 126mm / 先端 φ0.2mm×0.4mm×35° 斜切り ￥125,000 JAN:4547451336280

材 先端 SUS / ハンドル：ABS 樹脂 薬 クラスⅡ JMDN 32772002 認 306ABBZX00006000 入 5

DP-2215L



DP-2215S



DP-2215R



### 谷戸氏 ab interno トラベクトミーマイクロフック ディスポ SET (S/L/R セット×5)

単回使用

DP-2215SET 全長 126mm / 先端 φ0.2mm×0.4mm×35° 斜切り ￥230,000 JAN:4547451336297

材 先端 SUS / ハンドル：ABS 樹脂 薬 クラスⅡ JMDN 32772002 認 306ABBZX00006000 入 S, L, R×5

## ピンポイントで癒着を乖離することが可能な GSL スパーテル

### ご考案者 森 和彦 先生（バプテスト眼科長岡山クリニック）コメント

「隅角癒着乖離術（GSL）用のスパーテルとしては、もっとも歴史のあるものです。それまでは、隅角癒着乖離針が用いられていましたが、先端形状が大きく太かったため、新たに開発しました。先端が薄い杓文字（しゃもじ）状であるため、ピンポイントで癒着を乖離することが可能です。また同様に、虹彩後癒着の解除にも用いることができます。モリゴニオレンズとの組み合わせにより、全周の隅角へのアプローチが容易になります。」



### 森氏ゴニオスパーテル

S-94 全長 103mm / 先端 1.0×0.6mm ￥28,000 JAN:4547451337904

材 SUS 薬 クラスⅠ JMDN 32754001 届 13B1X00048002528 入 1

## ツイスト構造が生み出すスムーズな操作性

SharpPoint™  
Ophthalmic Sutures



### トラベクトミー用ツイステッドスーチャー

J2626 全長 150mm / 糸部太さ U.S.P.6-0 ￥24,000 JAN:4547451337676

材 ポリプロピレン 薬 クラスⅡ JMDN 32870002 認 306ABBZX00005000 入 5



## 美しい断面、確かなベクトルで、確実な核分割

NEW

ご考案者 野口 三太郎 先生 コメント

(ASUCA アイクリニック 仙台マークワン (仙台市) / ツカザキ病院 眼科 (兵庫県 姫路市))

「白内障手術を確実に遂行できるよう、その操作ベクトルが直感的に伝わる設計となっています。  
水晶体の回旋運動を効率的に行えるよう、適切なバランスと形状に調整されています。  
また、水晶体の繊維走行に沿って分割が行えるため、断面が乱れず、美しく整った核分割が可能です。  
さらに、眼内レンズをフックのくびれ部分でしっかりと保持することで、前房内での回旋や前後方向への移動をスムーズに行えます。」



ED view



### マンティス・ディバイダー

**M-2288** 全長 102mm / 先端 1.50×0.60mm / 窪み部 先端よ 0.55mm 幅 0.40mm ￥48,000 JAN:4547451338420

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B100048002550 入 1

## 一瞬で ICL を正しい位置 (虹彩下水晶体前囊上) に挿入するために

ご考案者：三好眼科 院長 三好 輝行 先生 / 塚本 秀樹 先生

三好 輝行 先生 コメント (福山市 三好眼科) コメント

「従来のマニピュレーターにはノッチがなく、線状に荒く削られた裏面と ICL 表面の摩擦のみで ICL をマニピュレートしていたが、表面を滑る事が多く慣れるまで時間を要していた。  
新しいマニピュレーターには ICL の hole にノッチを挿入しても良いが、しなくても滑る事なく前囊を穿刺する事なく意図した部分に速やかに安全に ICL を挿入出来る。」



M-2285A



ED view



M-2285S



ED view



### ICL マニピュレーター 三好・塚本

**M-2285A** アンギュル 全長 104mm / 先端 0.7×1.0mm 突起φ0.15mm ￥56,000 JAN:4547451337928

**M-2285S** ストレート 全長 104mm / 先端 0.7×1.0mm 突起φ0.15mm ￥56,000 JAN:4547451337935

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048002529 入 1



MOVIE ①



MOVIE ②

## この一本で核分割から邪魔な虹彩下の観察まで

ご考案者 杉田 糾 先生 (名古屋市 眼科杉田病院) コメント

「重症小瞳孔症例での白内障手術では、各種虹彩リトラクターや虹彩切開での対応が必要なことも多い。しかし、そこまでではないものの、前囊裏の皮質の残りや IOL の収まり具合を見るのに虹彩が邪魔と感じる、軽度～中等度の散瞳不良症例に出会うことはしばしばある。本フックは、従来の分割フックと同様に核分割や核操作を行えるよう、先端サイズの増大を最低限に抑えながら、邪魔な虹彩を確実に、そして優しく押しのけられるよう、フック先端形状に工夫がこらされている。各種剪刀や用途別にフックをとりそろえることなく、この一本で核分割と虹彩押しのけによる視認性確保を行うことができ、様々なシチュエーションで術者ストレスの軽減・手術クオリティの向上に寄与できればと願っている。」



ED view





MOVIE



### 糾式 核分割・虹彩押しのけフック

**M-136S** 全長 102mm / 先端 1.0×0.63mm 窪み部幅 0.3mm ￥40,000 JAN:4547451337744

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048002527 入 1

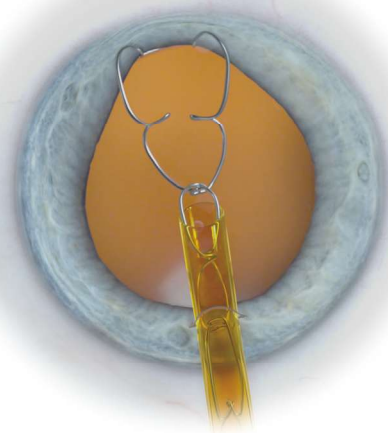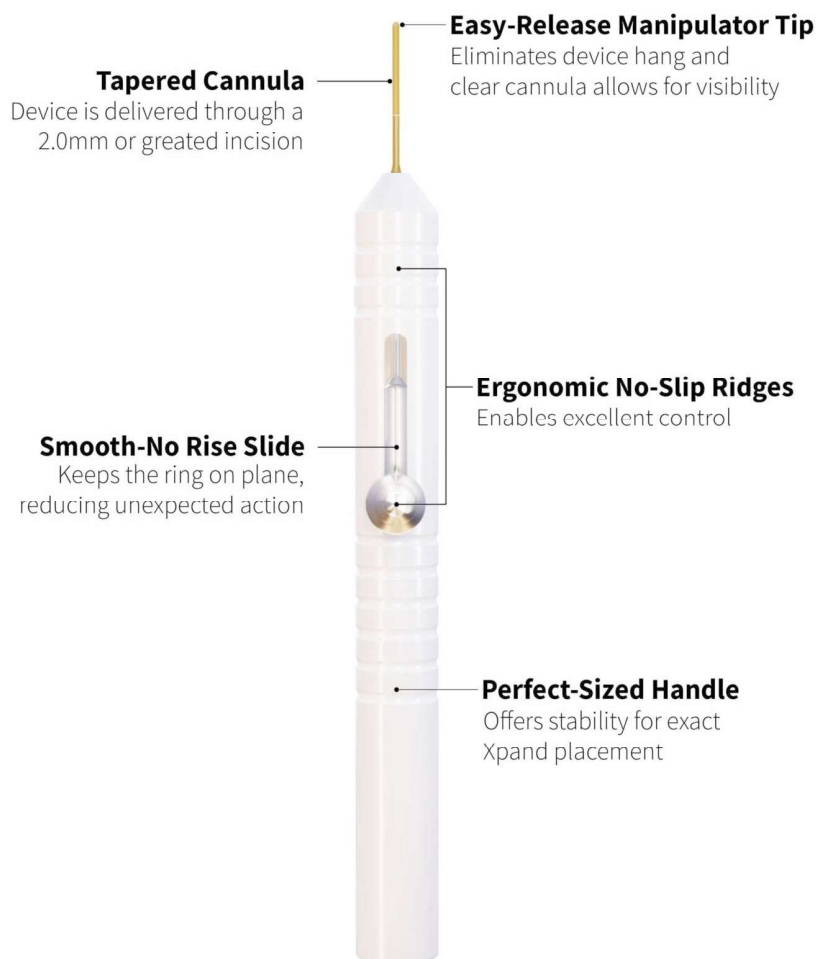

下記動画はX1（前モデル）であり、参考動画となります。  
操作方法は同等となります。



YOUTUBE CH



Ready-Loaded  
Iris Speculum



Ready-Loaded  
Iris Speculum  
for Iris-Capsule Capture

3回使用 × 4個入り（12回分）



Xpand2 虹彩リング（4個入り） 使用限度 3回 / 個

**DIA X2MU** 寸法：図参照 ￥120,000 JAN:4547451338093

材 T1 形状記憶合金 薬 クラス I JMDN 13381001 届 13B1X00048002442 入 4

### 【構成】

- ・ XpandNT2 虹彩リング（本体）
- ・ インジェクター
- ・ 滅菌用本体収納ケース
- ・ インジェクターを洗浄するためのチューブとルーアーロック



### 【素材】

リング部：ニチノール（チタン合金）ASTM F 2063-18  
インサーター（カニューレ管部）：樹脂  
インサーター（ハンドル部）：ポリオキシメチレン POMC

### 【使用方法】

本体収納ケースから、インジェクターに装填し、切開創より眼内に挿入し、虹彩に装着します。  
レンズ挿入後、レンズフックやインジェクターを利用して、簡単に切開創から取り外すことが可能です。

### 【滅菌用本体収納ケース】

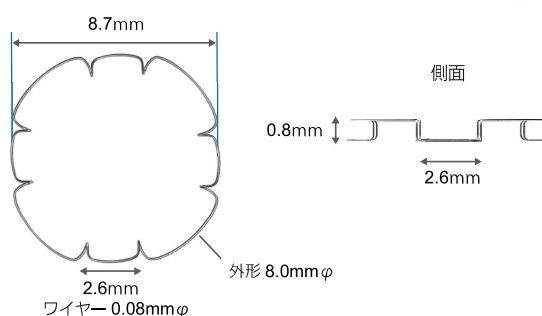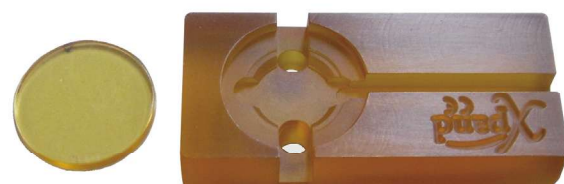

## クローバー形状で設置しやすい瞳孔拡張器

R3

### 【構造】

- ・クローバーリングはポリウレタン製で、アームと4つの虹彩フックとで出来ている。
- ・クローバーリングを上から見ると、アームに外に膨らむ部と内に凹む部とが交互にあり、内に凹む部に虹彩フックがある。
- ・最も凸の部の外径が 8.2 mm で、最も凹の部の内径が 6.2 mm である。
- ・クローバーリングを横から見ると、虹彩フックはやや低い位置にあり、アームは肩部がやや高く中央がやや低い位置にある。
- ・最も低い虹彩フックの下突起から最も高いアーム肩部までの高さは 0.72 mm である。



### 〈特徴1〉四つ葉のクローバー形状

アームに外に膨らむ部と内に凹む部とが交互にあり、内に凹む部に虹彩フックがある。この形状により、アームが容易に変形して虹彩フックが内方に動き易い。

### 〈特徴2〉アームを虹彩上に置きながら虹彩フックを瞳孔に設置

アームを虹彩の上に置いて、虹彩フックを内方に動かして虹彩フックの下突起を虹彩の下に挿入して瞳孔を拡張する。そのため、虹彩を大きく変形させずとも瞳孔に設置できる。また、虹彩上のアームと虹彩下の虹彩フックの下突起との間で虹彩を挟み込み、しっかりと虹彩を固定する。

### 〈特徴3〉セッシで挿入・回収を行う

インサーターを使わず、前囊セッシで挿入と回収を行う。初回を含め3回使用可能であり、コストパフォーマンスが良い。

### クローバーリング（セッシ挿入・回収タイプ）4 個入り

CR1 ￥48,000 JAN:4595644918041

使用限度 3 回 / 個

材 ポリウレタン 薬 クラス I JMDN 13381001 届 28B2X10033000004 入 4



詳細情報




YOUTUBE

## 簡単設置、強力排水の新しいドレーブ

### 【構造】

Germ Guard フィルムドレーブは、外枠と粘着フィルム部で構造され、粘着フィルム部の中央に中央切開がある。中央切開の両端に外眼角部、内眼角部を覆う耳側シートと鼻側シートがあり、更に耳側には排水シートがある。

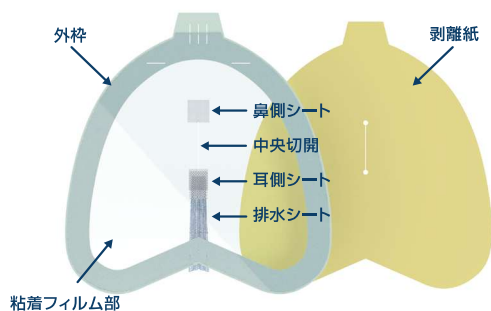

### 〈特徴1〉フィルム中央に切開が作ってある。

貼る前や貼ってからフィルムを切る操作がなく、手術時間が短縮する。

### 〈特徴2〉眼瞼の皮膚・睫毛がより完全にカバーされる。

従来のテガダームを 2 つに切って貼る方法では耳側・鼻側の皮膚が露出し易かったが、本ドレーブでは耳側・鼻側シートによって全周カバーされ易く、術後眼内炎の防止効果の向上が期待される。

### 〈特徴3〉強力に排水する。

テガダームを貼って切開する方法や奥目では水が溜まりやすかったが、本ドレーブでは耳側の排水シートによって強力に排水し、術中の視認性が向上する。

### Germ Guard フィルムドレーブ（50 枚入り）

FD1 ￥42,500/ 箱 (¥850/ 枚) JAN:4595644918027

単回使用

材 ポリウレタン 薬 クラス I JMDN 35531000 届 28B2X10033000002 入 50



詳細情報



YOUTUBE



## 培養ヒト角膜内皮移植に使用するシリコンニードル

R<sub>3</sub>

ご考案者：木下 茂 先生（京都府立医科大学 特任講座感覚器未来医療学 教授）



SDview



SK デスメ膜ポリッシャー 3本入 使用限度3回/本

M-2270A 全長40mm / シャフト24mm / シリコン部 先端φ0.7mm ￥99,000 JAN:4547451338208

材 SUS(先端シリコン) 薬 クラスⅠ JMDN 34899031 届 13B1X00048002510 入 3


YAMANE テクニックを可能にする極薄肉厚針

## スカーレットニードル eYe

管理医療機器 単回使用眼科手術用カニューレ  
クラスⅡ EOG滅菌済 再使用禁止




栃木精工株式会社  
TOCHIGI SEIKO Co., Ltd.

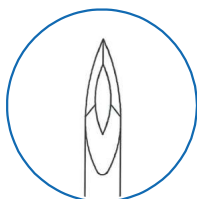

34G：ランセット

30G：ランセット

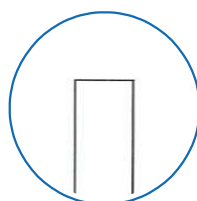

27G：ブラント

25G：ブラント



材 針管：ステンレス鋼 針基：ポリプロピレン 薬 クラスⅡ JMDN 34899032 認 306AGBZX00036000 入 100

| 商品No.  | 針基カラー        | 公称外径 |            | 有効長<br>(mm) | 肉厚            | ID min<br>(mm) | JANコード        |                | 最小流通<br>単位 | 価格      |
|--------|--------------|------|------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|---------|
|        |              | G    | OD<br>(mm) |             |               |                | GTIN-13       | GTIN-14        |            |         |
| 123501 | オレンジ         | 34G  | 0.18       | 8           | ETW<br>(極薄肉厚) | 0.105          | 4931325235012 | 14931325235019 | 100本       | ¥14,000 |
| 123502 | イエロー         | 30G  | 0.30       | 13          | ETW<br>(極薄肉厚) | 0.190          | 4931325235029 | 14931325235026 | 100本       | ¥10,000 |
| 123504 | ミディアム<br>グレー | 27G  | 0.40       | 22          | TW<br>(薄肉厚)   | 0.241          | 4931325235043 | 14931325235040 | 100本       | ¥10,000 |
| 123505 | オレンジ         | 25G  | 0.50       | 22          | TW<br>(薄肉厚)   | 0.292          | 4931325235050 | 14931325235057 | 100本       | ¥10,000 |

## フォルニックスまで洗浄できる眼内炎予防に必須のデバイス

ASCRS  
Los Angeles Film festival  
Instruments & device/IOLs  
1st Prize受賞

ご考案者 野口 三太郎 先生 コメント

(ASUCA アイクリニック 仙台マークワン (仙台市) / ツカザキ病院 眼科 (兵庫県 姫路市))

「術中に眼表面をイソジンやオゾン水で洗い流すことは眼内炎の予防に重要である。しかし、しっかり洗い流したにもかかわらず、すぐに眼表面が油膜などで汚染されることを経験する。結膜は深くフォルニックスで回転する。眼脂や睫毛などが迷入しやすく菌の増殖の場となりやすい。フォルニックスは15ミリほどあり、通常の眼洗では洗うことは不可能である。しかし、今回開発されたフォルニックスウォッシャーはフォルニックスまでも洗浄できるデバイスで術中の眼表面を可能な限り清潔に保つことができる。眼内炎予防には必須のデバイスになるに違いない。」



【付属品】  
M-2260-3 シリコンチューブ  
K-1972 ポリエステル洗眼瓶 250cc



〈アフターパーツ〉  
M-2260-3 シリコンチューブ  
(内径 4mm 外径 6mm) 50cm  
標準小売価格 ¥800  
※オートクレーブ可



〈アフターパーツ〉  
K-1972 ポリエステル洗眼瓶 250cc  
標準小売価格 ¥430  
※オートクレーブ不可 (EOG 滅菌推奨)



野口氏 Fornix ウォッシャー



M-2260 全長 13.2mm / 直径 19mm ¥95,000 JAN:4547451337560

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34630000 屈 13B1X00048002502 入 1

## あらゆる状況下で活躍するユーティリティを極めたボールチップ鉗子

ご考案者 鈴木 久晴 先生 コメント (善行すすき眼科 神奈川県藤沢市)

「ボールチップ鉗子は、先端を球状にすることによって、有鉤鉗子と無鉤鉗子の二つの性質をもっています。有鉤鉗子は鉤により鉗子を閉じていても不用意に結膜を傷つけて出血をきたしてしまうことがありますが、本鉗子はそのようなことを防ぐために設計されました。切開創作成時のカウンター、CCC 作成時の眼球固定、更に硝子体手術の時のトロカール抜去時の自己閉鎖の介助、そして周辺部処理時の圧迫などにも使えます。先端のボール部分は組織侵襲が少なく、固定やマッサージに有効です。更に、内側がサンドブラスト加工になっていることによって縫合にも使えます。広く汎用性がある鉗子です。」

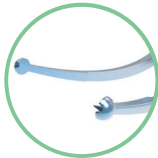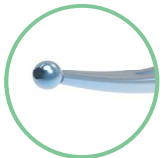

鈴木式ボールチップ鉗子

DS-004 全長 88mm / 鉤幅 0.15mm / 先端(球状時)φ0.8mm ¥62,000 JAN:4547451337010

材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002504 入 1



## 27G エンドグリップタイプの新スタンダード

専用  
シリンジ  
付属

ご考案者 大澤 俊介 先生 (三重県四日市市 MIE 眼科四日市) コメント

「従来のエンドグリップタイプの 27G ILM 鉗子ではきっかけは作りやすい反面、把持面積が小さいため ILM が裂けて把持が難しい傾向がありました。この鉗子はエンドグリップ部の把持面積を通常の 4 倍ほど大きくとっているため ILM が破れにくく、しっかりと把持することが可能な上に先端のエッジを巧みにわずかに面取りすることで感覚網膜を傷つけることなく膜剥離のきっかけ作りを行う事が可能です。高剛性なシャフト素材を使用することによって先端からのシャフト長は 31mm あるので強度近視眼にも対応できます。」



大澤氏ファイングリップ ILM 鉗子 27G

DS-901 全長 150mm / シャフト 31mm / 27G ¥240,000 JAN:4547451337423

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 10861001 屈 13B1X00048002487 入 1



## 先端を丸くしたらとても安全で便利なフックが出来上がりました



### 後藤式まんまるフック (G フック)

**M-2250** 全長 102mm / 先端 0.8×0.6mm ￥35,000 JAN:4547451337430

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 届 13B1X00048002511 入 1

### ご考案者 後藤 恒男 先生 コメント (山形県 東根市 後藤眼科)

フックの先端を直径 0.6 ミリの球体にしたので眼内への出し入れが容易で組織障害性も低下し多少虹彩や前囊、後囊に当たっても安全であり色々な場面で安心して眼内に挿入可能です。また通常のフックよりも安全性と操作性に優れ、囊内のより赤道部に近い所まで可動域が広がりが色々な操作がより効率的にできるようになりました。

#### 【眼球固定フック】

先ず CCC 作製時にこのフックをサイドポートから挿入することで眼が動く固視不良の患者さんでも眼球の動きを抑えてコントロールすることができ良好な徹照が得られます。

#### 【C C C マーカー】

フックの先端から 6 ミリのところにマーキングしてあるので CCC マーカーとしても使用適切な大きさの CCC が作製可能です。

#### 【核のローテーター】

可動域が広がったため回転のモーメントも大きくなり効率的に核を回転することが可能です。

#### 【後囊プロテクター】

丸い先端部分は後囊に対して安全な設計であり通常の操作では水晶体囊を損傷させる心配はないので核処理時に超音波チップの下に置くことでサージが起きても破囊を防ぐことができます。

#### 【核分割フック】

その他色々な場面で役に立ちますが、このフックの最大の特長は核分割フックとして用いることができることです。先端の丸いフックでどうやって分割するのか疑問に思われる先生もいらっしゃるでしょうが従来の分割手法とは異なり切る (chop) のではなく叩く (tap) ことで分割します。フェイコチョップ法ではなくフェイコタップ法です。正確には tap&break 法ということになりますが、その方法は超音波チップで固定した核片の下側 (後囊側) からフックの先端で叩いて二つに割るというもので、下から叩くことで後囊を保護しながら核分割するという一石二鳥の方法です。

かなり硬い核でも安全かつ確実に分割可能ですので動画にてご覧ください。

## 弱湾タイプの前囊鉗子でどんな症例にも対応可能！

専用  
シリンジ  
付属

### ご考案者 森井 香織 先生 (兵庫県 神戸市 森井眼科クリニック) コメント

「従来の前囊鉗子と比較して鉗子全体に弱湾になっています。

前房が浅・深症例や、眼瞼の形状など症例で、通常の前囊鉗子では前囊切開が難しい症例などで持ち手の位置を変えずに前囊切開が可能で、角膜がひずんだりせず、安全にかつ正確な前囊切開を行うことができます。

この鉗子も 1 本あれば、どんな症例にも対応可能です！」



### かおりの前囊鉗子

**MF-807** 全長 146mm / シャフト 29mm / 径 25G ￥225,000 JAN:4547451337331

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048002496 入 1



## double hook で上下からサポート、上へも下へも

### ご考案者 森井 香織 先生 (兵庫県 神戸市 森井眼科クリニック) コメント

逆レンズフックの進化版として、「かおりの double hook」が完成しました。

逆レンズフックは前房内の対象物の下に挿入し、フック先端を用いて上方、上斜め方向へのベクトルの動きを与え、把持・摘出・分割などの手術手技をアシストすることができます。

操作中に、下向き動きを行いたいときがあると思いますが、その際逆フックをシンスキーフックに持ちかえるのが少し手間ですし、操作のタイミングをのがすこともあり上下にフックを作成することを考えました。完成したのがこの「かおりの double hook」になります。

このフックは先端が上下に分かれており、逆フックの上向きベクトルとシンスキーフックの下向きベクトルが一つになったものです。

前房内の上下のベクトルを double hook 1 本でコントロールできます。術中にフックを持ち替えることなく、様々な眼内の状況に瞬時に対応でき、手術が安全に行えるお手伝いができると思います。

「double hook で上下からサポート、上へも下へも」ととても便利な器具ですのでよろしければ一度ご使用ください。



### 森井式眼内レンズフック “かおりの double hook”

**M-127CT** 全長 98mm / 先端 0.2×1.0mm ￥42,000 JAN:4547451336785



材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 届 13B1X00048002490 入 1

## MIGS に“T-hook” という新しい提案



M-2225

M-2225S

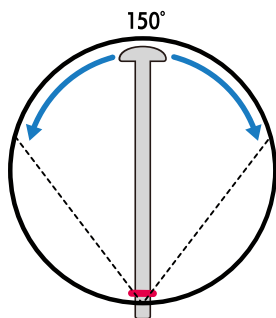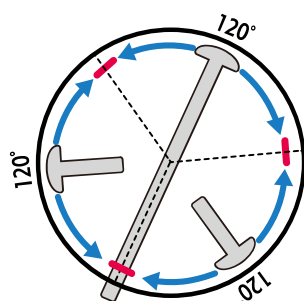

ご考案者 千原 智之・千原 悦夫 先生  
(京都府 宇治市 千原眼科医院) コメント

「千原氏 T-hook の先端は左右両方に刃があり粘弾性物質存在下に顕微鏡と隅角鏡 (Ahmed DVX Surgical Gonio lens, Hill Surgical Gonioprism など) で隅角を直接観察しながら線維柱帯を切開する緑内障流出路手術: MIGS(minimally invasive glaucoma surgery) で使われる器具です。

一回の眼内挿入で左右両方の線維柱帯を切開できます。また先端の強膜側は曲面になっておりシュレム管後方組織 (BELL) やヒンジバルブの損傷を最小限にするとともに、角膜刺入創近くの線維柱帯を切開する場合でもフックがシュレム管後壁に刺さったり出血するリスクを軽減するように工夫されています。

Ahmed DVX Surgical Gonio lens のようなダブルミラー隅角鏡を用いると患者の頭位を動かす必要なく線維柱帯切開が可能で、一か所の角膜切開からおよそ 120-150 度の切開を 1-2 分で完成することができます。もし 120 度おきに 3 か所の角膜切開を行うなら 360 度の線維柱帯切開を容易に行うことができます。」

参考文献: Chihara E, Chihara T. Development and application of new T-shaped internal trabeculotomy hook (T-hook). Clin Ophthalmol 2022; 16: 3919-3926 doi.org/10.2147/OPHTH.S392021

### 千原氏 T-hook

M-2225 全長 104mm / 先端 0.2×0.85×0.25mm ￥42,000 JAN:4547451336808

M-2225S 直 全長 101mm / 先端 0.2×0.85×0.25mm ￥42,000 JAN:4547451338062

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32761000 屈 13B1X00048002465 入 1



## MIGS に伴い、進化した GSL 用スパーテル

ご考案者 谷戸 正樹 先生 コメント (島根大学医学部眼科学講座 教授) コメント

「隅角癒着解離術を行うためのスパーテルです。スパーテル先端で周辺虹彩前癒着を押し下げようとして使用します。スパーテル先端は、従来の隅着癒着解離用器具と異なり、線で癒着を剥離できるようイチョウ葉型にデザインされています。また、スパーテル先端は適度な面積を有し、虹彩にめり込み難い構造になっています。」



### 谷戸氏 GSL 用スパーテル

S-89 全長 114mm / 先端 0.05×0.9mm ￥28,000 JAN:4547451336792

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32754001 屈 13B1X00048002473 入 1



## かつてない視認性を可能にした画期的な隅角観察器具

ご考案者 森 茂 先生 コメント (長崎県 諫早市 森眼科内科医院) コメント

「低侵襲緑内障手術 (MIGS) や緑内障手術等に用いる新しい隅角観察器具です。操作性 (スパーテルに類似した使いやすさ)、視認性 (血液等の付着、混入が少ない)、安定性 (前房安定性がよく、角膜の変形が少ない) に優れた器具です。角度によって毛様体も観察でき、眼内レンズ縫着の際、穿刺部の針先の観察が可能です。」

また、虹彩脱の整復にも使用でき、この器具 1 つで 3 通りの使い方が出来ます。切開創は 2.2mm から挿入可能です。



### 森式 MIGS ミラースパーテル



M-2240 全長 130mm / 先端 6.2×2.0mm ￥45,000 JAN:4547451337102

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32754001 屈 13B1X00048002480 入 1



## よりの確な CCC を行うためのマーカーとして

CCC の大きさを決める際の、鑷子のカーブの部分に1mm 刻みでマーキングが入っていることにより、より適切な大きさでの CCC 作成が可能です。

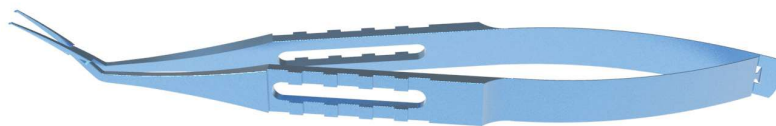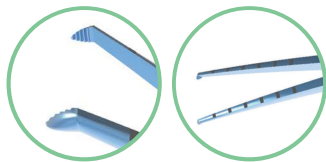

### 稲村氏 カプシュロレクシス鑷子 ファイン チタニウム スケール

DS-1612FB 全長 103mm / 先端 0.45mm ¥88,000 JAN:4547451336921

材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001354 入 1




EDview

## 後囊にも気を配る優れもの

### ご考案者 埴本 幸 先生（水戸市 はねもと眼科）コメント

「このラウンドディバイダーは、後囊への配慮を忘れない優れた核分割器具です。通常の分割器具とは異なり、核を削った溝の底に細い器具先端部を挿入して適切に力をかける動作が、先端のドラム型の壁面で行えるようになりました。先端部をドラム型球体にし、屈曲部を長くすることで、順方向とクロス方向の分割の両方に対応しやすくなりました。先端が球体であるため、後囊へのダメージを気にせずに核の分割が可能です。これにより、より安全で確実な分割手技が可能になります。このラウンドディバイダーは、難症例を含めた白内障手術の新たな可能性を開きます。」

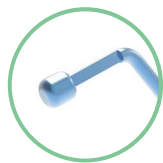

### 埴本氏ラウンドディバイダー

DS-016 全長 101mm / 先端 0.5×0.5mm ¥43,000 JAN:4547451336815

材 Ti 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048002492 入 1



EDview

## きっかけから、初動までワンアクションで行える優れもの

専用  
シリンジ  
付属

中心からアプローチしやすいように、先端部が縦方向の動作をする CCC 鑷子です。より中心を的確に捉えやすい形状となっているので、CCC のきっかけを作りつつ、そのまま把持をして展開に持っていけるというメリットがあります。先端のワイヤー部分もきっかけが作成しやすいよう、カットしているのも特徴です。



### 森氏 CCC 鑷子 25G

DS-2024 全長 135mm / シャフト 16.5mm / 先端φ0.2 x 0.8mm / 径 25G ¥175,000 JAN:4547451336822

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002466 入 1



EDview

## 池田氏 CCC 鑷子は遂に 25G の新ステージへ

専用  
シリンジ  
付属

Quick  
Service

PICK  
UP

CCC 鑷子の定番、池田氏 CCC 鑷子の 25G モデル。先端部が極小になったことに加え、甲の部分の角を丸めることにより、サイドポートでの引っ掛かりがなくスムーズな出し入れが可能になりました。またノングレイン加工を施すことにより、反射防止効果と組織をしっかり把持できるようになっております。より低侵襲なアプローチが可能な CCC 鑷子のハイエンドモデルです。



### 池田氏 マイクロカプシュロレクシス鑷子 S-Model 25G

DS-2023 全長 117mm / シャフト 15.5mm / 径 25G ¥195,000 JAN:4547451335719

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002409 入 1



EDview

バージョン2に進化し、性能が更に向上したレンズグラバー。  
眼内レンズをワンアクションで摘出。  
ICL セッティングにも最適。



ご考案者 野口 三太郎 先生 コメント

(ASUCA アイクリニック 仙台マークワン (仙台市) / ツカザキ病院 眼科 (兵庫県 姫路市))

「眼内レンズは眼内分割の後に小切開から摘出が基本であった。しかし、レンズグラバーを用いると、丸ごと小切開からワンアクションにて摘出可能となった。切開創の拡大もごくわずかである。特に摘出操作が困難な親水性レンズ、シリコンレンズが摘出しやすくなったのは術者にとって福音である。バージョン2に進化したレンズグラバーは、設計強度を上げることで、把持力をあげたため、ワンアクションレンズ摘出率が向上し、鑷子の被損率も低下させることが出来た。

また、これまで困難であったシリコンレンズの摘出が分割無しにワンアクションで摘出可能になり、ロングバージョンにおいては、バックマン型鑷子のように ICL を簡単、安全にカートリッジに装填することが可能になった。」

DS-2022S



DS-2022L



野口氏 IOL 把持鑷子 19G Lens Grabber II



DS-2022S ショート 全長 137mm / シャフト 17.5mm / 径 19G ￥200,000 JAN:4547451336341

DS-2022L ロング 全長 159mm / シャフト 40.0mm / 径 19G ￥200,000 JAN:4547451336396

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048002452 入 1



従来のレンズ鑷子

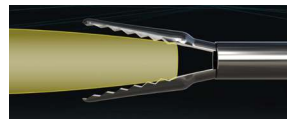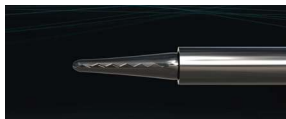

■ 2.2mm 切開にてワンアクション摘出可能

Alcon : SN60WF プラットフォーム (アクリソフワンピース)  
Alcon : SY60WF プラットフォーム (クラレオワンピース)  
J&J : DCB00V プラットフォーム (テクニクスワンピース)  
HOYA : XY1 (Vivinox)  
BVI : PODEYE  
NIDEK : SZ-1  
NIDEK : NP2.3  
STAAR : KSSP  
KOWA : YP2.2  
STAAR : ICL  
Eye Lens : IPCL  
KOWA : AN6MA

■ 分割にて摘出可能

Santen : W60R  
Santen : NX60 (X60)  
Santen : NX60 (X70)  
HOYA : 335  
Santen : レンティスコンフォート

レンズグラバー



## Patient characteristics and postoperative results.

| Case No. | Age | R or L | Surgery Methods                    | Extraction IOL | Extraction IOL Power | Fixed IOL     | IOL Power | Axial Length | K1   | K2   | Pre-op Endothelial Cell | Post-op Endothelial Cell | Pre-Wound Size (mm) | Post-Wound Size (mm) |
|----------|-----|--------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|------|------|-------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| 1        | 79  | R      | IOL exchange                       | MINIWELL TORIC | 21                   | NX-60         | 19        | 23.1         | 7.47 | 6.98 | 3018                    | 2531                     | 2.1                 | 2.3                  |
| 2        | 51  | R      | IOL exchange                       | unknown        | unknown              | NX-60         | 18        | 24.93        | 8.58 | 7.29 | 2234                    | 1853                     | 2.1                 | 2.2                  |
| 3        | 64  | R      | 27GVit + IOL intrascleral fixation | ZLB00          | 15                   | NX-60         | 16        | 25.9         | 7.92 | 7.78 | 2330                    | 2190                     | 2.2                 | 2.4                  |
| 4        | 77  | R      | 27GVit + IOL intrascleral fixation | ZCB00          | 18                   | NX-60         | 18        | 25.2         | 7.35 | 7.21 | 2440                    | 2150                     | 2.2                 | 2.4                  |
| 5        | 65  | L      | 27GVit + IOL intrascleral fixation | ZXR00V         | 15                   | NX-60         | 16        | 25.85        | 7.89 | 7.79 | 2564                    | 2220                     | 2.3                 | 2.4                  |
| 6        | 83  | R      | 27GVit + IOL intrascleral fixation | SN60WF         | unknown              | NX-60         | 15.5      | 25.96        | 8    | 7.63 | 2450                    | 2160                     | 2.2                 | 2.3                  |
| 7        | 56  | R      | IOL exchange                       | DIB00V         | 15                   | LS-313 MF15T2 | 13        | 26.99        | 8.01 | 7.83 | 3157                    | 2838                     | 2.3                 | 2.4                  |
| 8        | 56  | L      | IOL exchange                       | DIB00V         | 16                   | LS-313 MF15T1 | 14.5      | 26.89        | 8.12 | 7.96 | 2940                    | 2670                     | 2.1                 | 2.3                  |
| 9        | 78  | R      | IOL exchange                       | LS-313 MF15    | 24                   | NX-60         | 25        | 21.27        | 7.16 | 7.05 | 2956                    | 2626                     | 2.1                 | 2.3                  |
| 10       | 52  | L      | 27GVit + IOL exchange              | DIB00V         | 24                   | NX-60         | 24.5      | 22.55        | 7.89 | 7.6  | 1436                    | 1350                     | 2.1                 | 2.3                  |

MINIWELL TORIC (SIFI MedTech, Catania, Italy), ZLB00 (Johnson & Johnson Vision, Inc., Irvine, CA, USA), ZCB00 (Johnson & Johnson Vision, Inc., Irvine, CA, USA), ZXR00V (Johnson & Johnson Vision, Inc., Irvine, CA, USA), DIB00V (Johnson & Johnson Vision, Inc., Irvine, CA, USA), LS-313 MF15, LS-313 MF1T1 and T2 (Santen, Osaka, Japan), NX-60 (Santen, Osaka, Japan).

Noguchi S, Yamada T, Tanaka H. Direct intraocular lens extraction using a newly developed lens-grabbing forceps. J Clin Med. 2024;13(10):2938

# 新たな MIGS 用フック。より広く・より薄く切開

滅菌  
トレー  
付属  
M-2220SS

PICK  
UP

Best  
Seller

TANITO MICRO HOOK  
TMH®  
庄司 ed.

で考案者 庄司 拓平 先生 コメント  
(埼玉県川越市 小江戸眼科内科 / 埼玉医科大学病院 眼科)

「大好評だった谷戸氏 ab interno トラベクトミーマイクロフックの進化版。オリジナルの谷戸フックの基本コンセプトを継承しつつ、オリジナル版と比べ切開幅を約 25% 拡大し、古典的な外方アプローチで用いるロートームと同じ切開幅が確保できるようになりました。また、屈曲部をスリム化することにより、シュレム氏管外壁損傷を防ぎ、安全な切開を可能にしました。さらには、耳側切開用のアングルタイプでは屈曲部までの長さを長くすることにより、切開時の視認性が向上しました。」



M-2220S



M-2220L



M-2220R



## ✓ オリジナルとの比較

Original-ed.


庄司 ed.



25%拡大!




スリム化

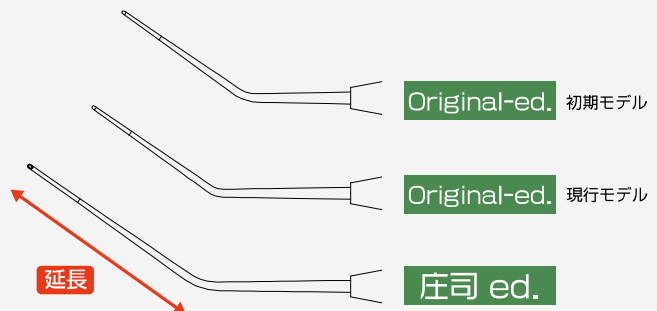

Original-ed. 初期モデル

Original-ed. 現行モデル

庄司 ed.

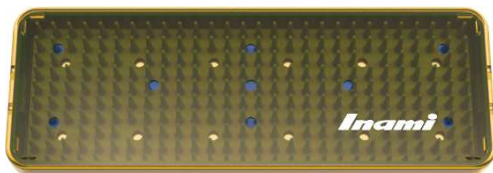

M-2220SS 3 本セットは滅菌トレー付き

M-2700A 滅菌トレー 3 本用 (参考価格 28,000 円)

谷戸氏 ab interno  
トラベクトミーマイクロフック  
庄司 ed.



MOVIE

|          |        |          |           |                   |
|----------|--------|----------|-----------|-------------------|
| M-2220S  | 直      | 全長 101mm | ¥ 38,000  | JAN:4547451335337 |
| M-2220L  | 左      | 全長 105mm | ¥ 38,000  | JAN:4547451335344 |
| M-2220R  | 右      | 全長 105mm | ¥ 38,000  | JAN:4547451335351 |
| M-2220SS | 3 種セット |          | ¥ 111,000 |                   |

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32761000 屈 13B1X00048002397 入 1

TANITO MICRO HOOK  
TMH®  
Original-ed.



MOVIE

谷戸氏 ab interno  
トラベクトミーマイクロフック

Best  
Seller

|          |        |          |           |                   |
|----------|--------|----------|-----------|-------------------|
| M-2215S  | 直      | 全長 101mm | ¥ 36,000  | JAN:4547451332404 |
| M-2215L  | 左      | 全長 100mm | ¥ 36,000  | JAN:4547451332398 |
| M-2215R  | 右      | 全長 100mm | ¥ 36,000  | JAN:4547451332381 |
| M-2215SS | 3 種セット |          | ¥ 105,000 |                   |

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32761000 屈 13B1X00048002217 入 1

## ご考案者 小林 顕 先生 コメント（金沢大学附属病院 病院臨床准教授）

「DMEK の際に移植するデスメ膜内皮ドナー（DMEK ドナー）は厚さ約 20  $\mu$ m の大変に脆弱な組織であるため、その操作には細心の注意を要する。DMEK では前房内で葉巻状に丸まった DMEK ドナーを展開した後、空気を用いて角膜裏面に接着させるが、DMEK ドナーの展開に時間を要することが多い。本鑷子を用いることにより、この最も難易度の高い操作が、容易に、再現性をもって、しかも短時間に行うことが可能となる。丸まった DMEK グラフトの前房内での向きに合わせて、本鑷子を用いて DMEK グラフト周辺部を把持し、角膜上からマッサージを行い、DMEK グラフトの展開を完了させる。なお、DMEK 鑷子先端の把持部内側に、つかんだ組織をしつかりと把持できるようにタングステン加工をしてあるため操作性が極めて良好であり、DMEK グラフトの展開をストレスなく行うことが可能でありお勧めの器具である。」



## 小林氏 DMEK 鑷子 SIDE 25G

**DS-2060** 全長 135mm / シャフト 16mm / 径 25G ¥200,000 JAN:4547451336600

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002453 入 1





## 優しく HOLD、しっかり圧出、究極の Painless 設計

PICK  
UPBest  
Seller

## ご考案者 有田 玲子 先生（埼玉県 さいたま市 伊藤医院）コメント

「マイボーム腺開口部のタビオカサイン、Plugging を解除することは、マイボーム腺機能不全（Meibomian Gland Dysfunction, MGD）治療の第一歩です。毎日 MGD の患者さんばかりを集中的に診療している私が、患者さんの痛みを最大限に軽減するための先端部設計にこだわり、日本人の眼瞼厚にフィットし、力を入れなくても把持するだけで閉塞解除とマイボーム腺圧出ができるようなハンドル設計を施しました。ぜひ、一度、手に取ってお試しください (^O^)/」

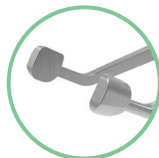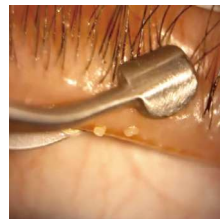

## 有田式マイボーム腺圧出鑷子

**M-2073** 全長 100mm / 先端 3.2mm ¥40,000 JAN:4547451335306

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002378 入 1

## IPL 治療時に眼球をしっかり保護できるアイシールド

## ご考案者 福岡 詩麻 先生（さいたま市 大宮はまだ眼科 西口分院）コメント

「Intense Pulsed Light (IPL) 治療を眼瞼に行う際に、IPL の光と熱から眼球を保護するためのアイシールドです。眼瞼と角膜の間に挿入することで、角膜全体をカバーし、マイボーム腺とその周囲の血管に安全にしっかりと IPL の光が届けることができます。眼瞼結膜と角膜や球結膜に滑らかに接触し、眼瞼の形を自然に保てるような形状にすること、施術後にスムーズに取り出せるように鑷子で把持するつまみ部分の設計にこだわりました。マイボーム腺機能不全（MGD）や霰粒腫に対する IPL 治療用で、2 個セットになっています。」

## 福岡式 IPL 用アイシールド（2 個入り）

**S-250** 全長 21mm×18.5mm ¥50,000 JAN:4547451338086

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70944000 屈 13B1X00048002533 入 2





## SI-302S

標準小売 3,580,000 円 (税抜)

【構成】

SI-301 アイドラ / 光学台 / 架台部 / 顎台 / ベース / 専用 PC

【SI-301】製造販売届出番号 13B1X00048002315

- ✓ 非侵襲検査で患者様の負担を軽減
- ✓ 層別評価でドライアイのタイプの見極めが可能
- ✓ IPL や点眼、温電法などの治療後の経過観察に最適
- ✓ 定量評価で患者様への分かりやすいインフォーム

## FUNCTIONS



### AUTO INTERFEROMETRY

光干渉により涙液油層厚 (LLT) を自動測定



### TEAR MENISCUS

涙液メニスカスの深さを自動測定



### NIBUT WITH MAP AND GRAPH

非侵襲にて BUT を自動計測



### MEIBOGRAPHY

マイボーム腺を高解像度赤外線撮影



### BLEPHARITIS

ブラッキングや血管拡張を高倍率撮影




### BLINK QUALITY

不完全瞬目を測定することで瞬きを評価



### MRD-1 NEW

瞼裂幅を測定し、眼瞼下垂の程度を定量化

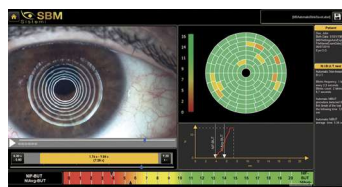

IPL [ Intense Pulsed Light ]

# AQUA CEL

- ✓ ムラのない安定したパルス出力を実現
- ✓ 安心温度センサー+強力冷却機能搭載
- ✓ トーニングモード・フォトシャワー搭載



治療目的に応じた多彩なフィルター搭載

※一部オプションフィルター



操作性と耐久性に富んだハンドピース

標準小売 5,400,000 円 (税抜)

医療機器認証番号: 303ADBZX00049000

製造元 **Jeisys**

製造販売元

**TECHNOPIA**

販売元

**Inami**



# Jeisys



## Mybo shampoo

Lidhygiene for My beauty operation.

### TeaTree 1.0

眼科医が本気で監修した **1.0%**  
**ティーツリーオイル** 配合の  
プレミアムなリッドハイジーン用シャンプー。



低刺激

泡  
タイプ

Tea  
Tree  
1.0%

ライム  
エキス



洗い方動画



リッドハイジーンの効果

洗顔や歯磨きと同じように、目やまぶたのトラブルを予防するために毎日の生活にとり入れたいのが、目もとの洗浄（リッドハイジーン）。目もとやまつ毛は、空気中を浮遊するホコリや花粉がついたり、メイクや皮脂汚れなどの汚れが溜まりやすい場所です。まつ毛の根元の汚れをしっかりと落とす『リッドハイジーン』を習慣にして、トラブル知らずな目もとを目指しましょう。

### マイボシャンプー® TeaTree1.0

注文コード：MS-TT1.0-12

税込価格：26,400 円（1 箱：12 本入り）※1 本あたり 2,200 円

内容量：50ml 種類別名称：洗顔料

【監修】 有田 玲子 医師（LIME研究会代表・伊藤医院 副院長）  
松本 玲 医師（医療法人社団医新会 レイククリニック 院長）  
高橋 研一 医師（医療法人 高橋眼科 院長）

# IPL EYE MASK

50 袋  
2枚入り



- ・目元への IPL 照射に最適化したサイズ設計
- ・高い遮光性（強力な光と UV をブロック）
- ・保湿、美容成分たっぷりのハイドロゲルタイプ
- ・目元美容パッチとしてハリのある目元へ！
- ・シトラスの香りで癒し効果！
- ・使い捨てタイプで清潔！

商品コード：JI-100-3

IPL EYE MASK (2 個入 /50 袋)

標準小売 ¥ 22,000 (税抜)



# クラスBオートクレーブ **W&H Lara MED**

## 時間短縮をAIで実現する、唯一の滅菌器。



### Lara MED

#### 医科用クラスBオートクレーブ AI(人工知能)搭載の高性能モデル

W&HのクラスBオートクレーブ Lara MED は、標準的なBサイクルに加え、緊急時に未包装の医療機器を迅速滅菌可能な、「ファストサイクル」プログラムも搭載。高い時間短縮機能等により、地域医療の持続可能性を支えます。

#### 人手不足対策の一助

W&Hの医科用(小型卓上蒸気滅菌器)のフラッグシップモデル、クラスBオートクレーブ LaraMED(ララメド)。LaraMEDにより、医師や看護師等の医療従事者が、各種業務時間短縮を享受可能です。

AI(人工知能)で滅菌サイクル時間等を自動短縮。医療従事者は、任意のスタートボタンを押すだけです(ドアもオートロック)。後は、AIで短時間かつ完全乾燥した器材を取り出すだけ。患者様との時間の確保等、本来業務に集中できる一助となります。

またもし被滅菌物(器材)が軽ければ、AIでさらに時間短縮を自動実施。被滅菌物(器材)の重量等の各種指標を、リアルタイムで自動計測しています。

また、LaraMEDを導入する事で、全滅菌サイクルの記録も自動保存されます。



#### 主な特徴

##### 完全乾燥、わずか39分。

(\*クラスB滅菌(134℃)。ハンドピース等の包装中空物を、2kg滅菌時)

##### 緊急時のファストサイクルも、わずか約20分。

(未包装医療機器(例:ハンドピース)を2kg滅菌時)

##### 全滅菌サイクル情報を自動記録。

(大容量8GB USBメモリ付属)

##### 操作も簡単。判断時間も大幅短縮。

(直感的なカラータッチスクリーン)

##### AI(人工知能)搭載。滅菌サイクル時間等を自動短縮。

(被滅菌物が軽ければ、更に自動時間短縮)

##### 22Lの大型チャンバー。業務時間を短縮。

(最大積載量約10%UP (17Lの従来機比))



販売名：W&Hmed ステリライザー

一般的名称：小型未包装品用高圧蒸気滅菌器（クラスⅡ）

認証番号：302ALBZIO0003000

認証取得者：W&H Sterilization s.r.l.

選任外国製造医療機器等製造販売業者：AJMD株式会社

## 低温プラズマ滅菌システム

### ラインナップ・仕様

クリニックから総合病院の中央材料室まで、さまざまなニーズに対応

省スペースモデルから大容量モデルまで、ニーズに合わせて選べる豊富なラインナップ。  
用途に合わせて、複数のサイズを組み合わせご利用いただくことも可能です。



RENO-S20

18.1L




RENO-S30

34L

## RENO低温プラズマ滅菌システムの滅菌方法

滅菌に作用するDBDプラズマ※と、過酸化水素を分解するためのコロナプラズマを採用。

※誘電体バリア放電プラズマ

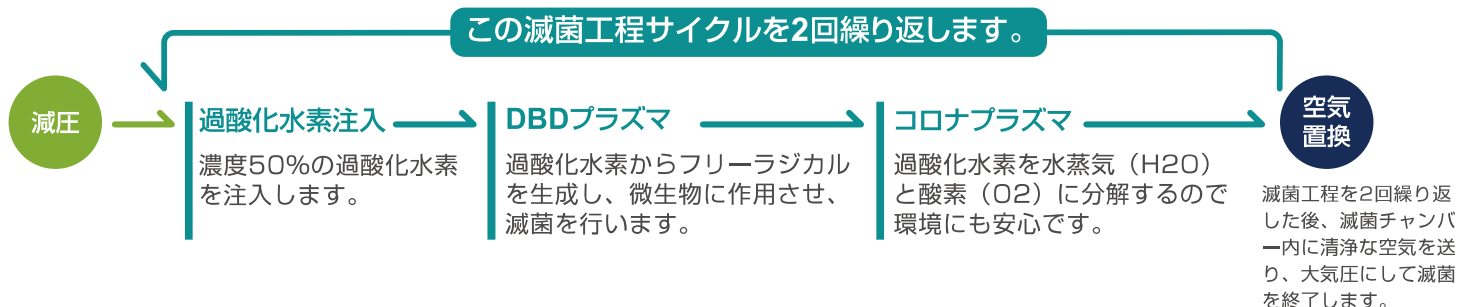

販売名：RENO低温プラズマ滅菌システム  
一般的名称：プラズマガス滅菌器（クラスⅡ）  
認証番号：224AFBZX00161000  
製造販売元：メディア株式会社



座長  
**徳田 芳浩**  
先生  
井上眼科病院 副院長



座長  
**八重 康夫**  
先生  
八重眼科医院 院長

「白内障手術は、装置・器具の進歩開発と相まって日進月歩の状態です。しかしながら難症例は、今なお一定頻度存在し、その的確な対処には術者の日々の研鑽が不可欠です。

今回、難症例への対処に極めて豊富な経験を持つ3人の先生方に、お勧めのデバイスの有効的な使い方に関して講演していただく機会を得ました。きっと明日からの診療・手術に役立つものと確信いたします。是非多くの先生方のご参加をお待ちしております。」



## 分割君が本名です ～おしゃもじ型フック活用術～

**徳田 芳浩** 先生  
井上眼科病院 副院長



## 切開法による小瞳孔対策

**森山 涼** 先生  
森山眼科クリニック 院長



## レンズグラバー法の最新知見 ～国際的に広く受け入れられる事になった理由～

**野口 三太郎** 先生  
ASUCA アイクリニック 仙台マークワン 主任執刀医  
ツカザキ病院 眼科 医長

# 白内障手術難症例 スペシャリストの 一押しデバイス の活用方法

Sat.  
**6/21**  
7:45-8:45

モーニングセミナー2

福岡国際会館  
第6会場  
4F 413+414

## Versus

## ICL手術のレジェンドが語るこれからのICL

オーガナイザー



鈴木 久晴 先生

善行すずき眼科  
院長

野口 三太郎 先生

ASUCA アイクリニック  
仙台マークワン  
主任執刀医

清水 公也 先生

山王病院アイセンター  
センター長  
国際医療福祉大学  
臨床医学研究センター 教授

古賀 貴久 先生

眼科こがクリニック  
院長

五十嵐 章史 先生

代官山アイクリニック  
院長

ICL手術は白内障手術と同様に、現代の眼科医療において不可欠なツールへと進化しています。白内障手術と同じく、ICL手術もその術式やデバイスが絶え間なく改良され、より安全で確実な治療法として確立されてきました。私たち眼科医は「巨人の肩の上に立つ小人」であり、先人たちの積み重ねてきた業績の上に今日の医療があります。そしてICL手術における「巨人」、まさにレジェンドと呼ぶべき存在が清水公也先生です。清水先生の臨床的視点と洞察力は、世界の誰よりも深く、常に医療の未来を見据えています。

このセミナーでは、日々の臨床で直面する疑問や課題について、清水先生に直接お伺いできる貴重な機会となります。教科書には載っていない実践的なコツや、症例に対する考え方、さらには最新の知見まで、清水先生の生の声でお聞きいただける特別なセッションです。

ICL手術の技術を磨き、患者さんにより良い医療を提供したいと考える眼科医の皆様にとって、見逃せないセミナーとなることでしょう。ぜひご参加ください。



Webinar開催  
*Invitation*

7/5 [SAT] 19時-20時

ZOOM事前登録制

<https://bit.ly/43erBV1>

[実名登録制]



協賛



株式会社 イ ナ ミ

ASUCA EYE CLINIC  
SENDAI MARK ONE

—ASUCA アイクリニック 仙台マークワン—



Chair : Prof. Masaki Tanito  
Shimane University, JAPAN

# Uniting Continents in Glaucoma Care TMH' s Global Impact with Support from XpandNT

HAWAII CONVENTION CENTER

JUNE 26, 2025

17:30~18:30

**ROOM312**

Micro-invasive Glaucoma Angle Surgery  
*Goniotomy for Implant Free*

**Dr. Henry Shen-Lih Chen**

Chang Gung Memorial Hospital, TAIWAN



MIGS is not expensive.

*Experience with Micro Hook Shoji Edition Tailored for American Patients*

**Prof. Sasan Moghimi**

University of California, San Diego, USA



T-hook: Advancing Trabeculotomy with Superior Safety,  
Precision, and Surgical Control.

*Complemented by XpandNT: Providing Consistent and Secure  
Pupil Expansion for Small Pupils and Pseudoexfoliation Syndrome*

**Dr. Tomoyuki Chihara**

Chihara Eye Clinic, JAPAN



TANITO MICRO HOOK  
TMH<sup>®</sup>



Invented by Prof. Masaki Tanito - Advancing MIGS Worldwide.

本セミナーは後日アーカイブ配信を予定しています。視聴には公式サイトお問い合わせページにて会員登録が必要です。

お問い合わせタイトル \*

セミナー動画の視聴リクエスト



<https://bit.ly/3SiJ202>

WGC 2025 IN HONOLULU, HAWAII, USA  
Sponsored Afternoon Symposium