




Inami

A passion for a nice view

Ophthalmic Surgical Instruments Catalogue 30th Edition
www.inami.co.jp

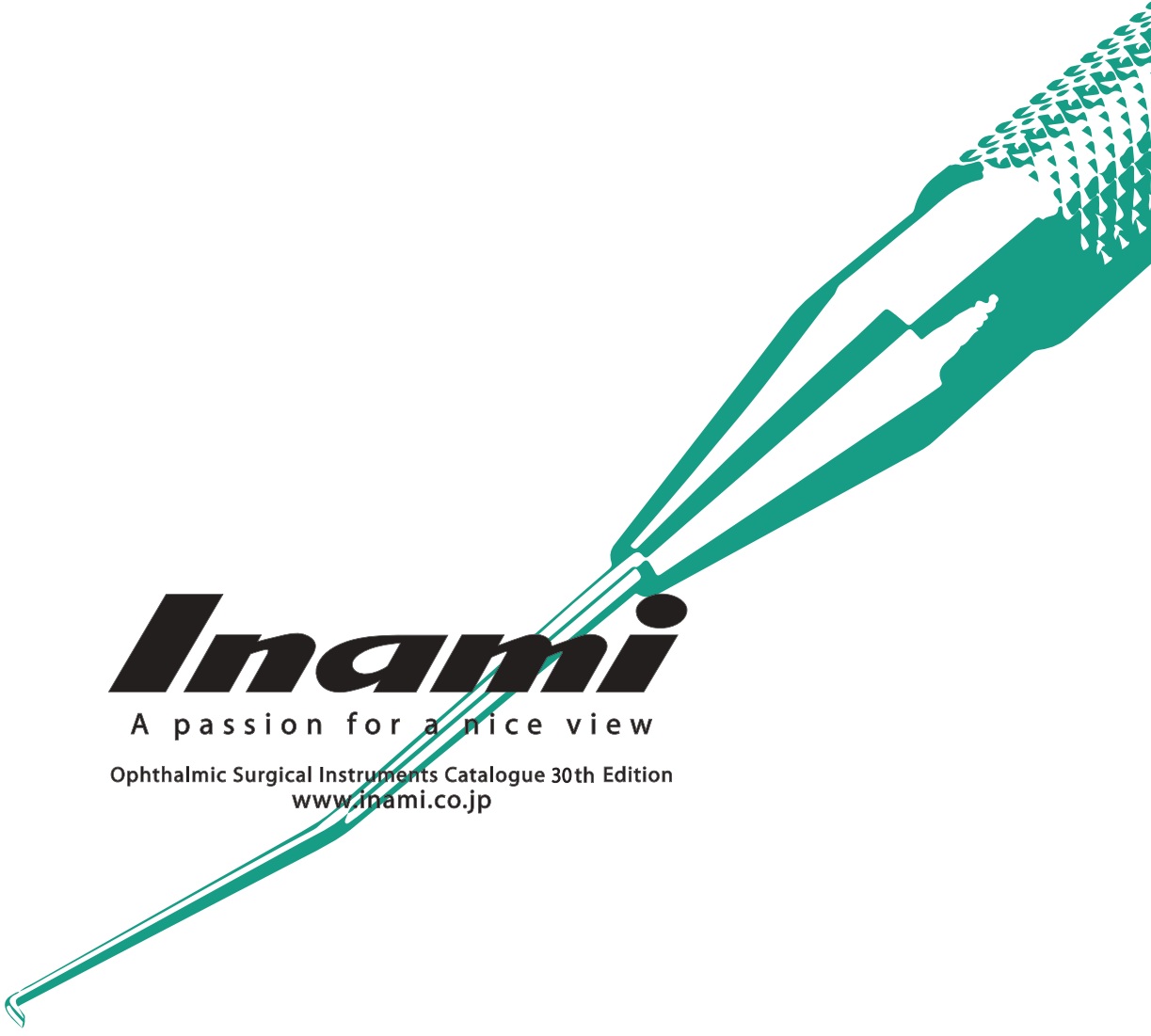

原材料：ヒラメキ

私たちは、ドクターのアイデアを
経験と技術力でカタチにする
プロフェッショナルです。

www.inami.co.jp



イ ナ ミ だ か ら で き る こ と 。

本カタログの特長

製品の「分かりやすさ」を追求し、イナミ手術器具総合カタログがアップデートされました。



製品情報の「分かりやすさ」

製品の基本仕様、参考価格に加え、ご要望の多い、「JANコード」「薬事クラス分類」「JMDN分類」を掲載しました。

※製品によっては掲載されていない場合がございます。



製品イメージの「分かりやすさ」

「製品実寸イメージ」「先端拡大イメージ」掲載に加え、製品が「手に取るわかるように分かる」をテーマに、新たにwebと連動した「3Dview」「Movie再生」機能を搭載しました。



3DviewのQRコードをスキャンすることで、マウスや指で器具画像を自在に回転できる3Dビュー機能呼び出すことができます。



Movie再生のQRコードをスキャンすることで、該当の器具が使用されている手術動画を再生できます。



アイコン Icon



ベストセラー



注目商品



クイックサービス



オートクレープ不可



単回使用



回数指定リユース品



シリンジ付属



滅菌トレー付属

詳細カテゴリー Detailed Category

最も細分化されたカテゴリーをアルファベットと数字の組み合わせコードにて表示しています。


製品カテゴリーガイド Category Guide

ページをめくりながら直感的に目的のカテゴリーにたどり着けるガイドです。


器具先端サイズ情報 Tip size Information

本文中の器具先端サイズ情報は、以下の箇所について説明しています。


有鉤鑷子

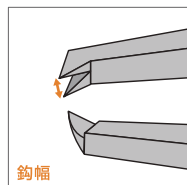

P-H型有鉤鑷子

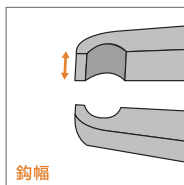

開瞼器

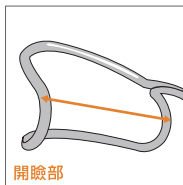

製品詳細情報 Product Information

製品コード	寸法や仕様など	税別参考価格	JANコード
S-200S	全長 85mm / 測定範囲 0-20mm / 目盛間隔 1mm	¥ 33,000	JAN:4547451043270
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 35788000	屈 13B1X00048001205
主な素材	クラス分類	JMDN分類	製造販売届出番号
			入数 1

受 受注生産製品 取寄 お取寄せ製品



汎用器具カテゴリー

A-G

A

鑷子

B

剪刀

C

開瞼器

D

持針器

E

カニューラ・ニードル

F

スパーテル

G

その他

特定用途カテゴリー

H-M

H

白内障

I

屈折矯正

J

網膜硝子体

K

緑内障

L

角膜

M

外眼部

その他

N-Q

N

関連用品

O

サージカルナイフ

P

ディスプレイザブル

Q

症例別パッケージ (AtoZ)

目次 Category Index

特集

本カタログの特長	2
手術器具のお取り扱いについて	6
クラスBオートクレーブ「INC-Clave」	14
症例別パッケージ「A to Z」	167
吸水スポンジ「M.Q.A.」	168
吸水スポンジ「M.Q.A.スティック スタウト」	169
眼内レンズ摘出の新定番「レンズグラバー」	170
MIGSシリーズ「TMH」「T-hook」	171
小瞳孔シリーズ「APX」「Xpand」	172

術式別模擬眼シュミレーター「SimulEye」	173
ドライアイ・MGD関連用品	174
マイクロフェザースリットナイフ<リブ&アール>	176
マイクロフェザーナイフハンドルガイド	177
Wet&Dry自動システム「キャタップ・ソリフィス」	178
修理品の新品交換「クイックサービス」と2週間修理	180
イナミショールームのご案内	181
手術器具カスタムメイドガイド	182
The Human Eye 目の構造	183

A 鑷子 Forceps

A-01	前方突出型有鉤鑷子	16
A-02	直角型有鉤鑷子	18
A-03	虹彩鑷子(直角型有鉤鑷子)	20
A-04	P-H型有鉤鑷子	21
A-05	無鉤鑷子	22
A-06	コリプリー型鑷子	27
A-07	睫毛鑷子	29
A-08	眼球固定鑷子	33
A-09	止血鉗子	34

特定用途 navi

H-05	CCC・チストーム折曲用鑷子	71
H-08	核分割鑷子	79
H-10	眼内レンズ鑷子	83
J-01	硝子体鑷子(23G・25G)	88
J-02	トロカールカニューラ用鑷子	94
J-05	強膜プラグ鑷子	100
J-07	輪状締結用鑷子	104
K-02	トラベクトミーブローベ保持用鑷子	109
L-03	DMEK・DSEK用鑷子	114
M-01	おたま鑷子	116
M-02	霰粒腫・マイボーム腺圧出鑷子	117
M-08	斜視鑷子	128
M-10	DCR・眼窩形成術用鑷子	131
P-03	吸水スポンジ把持用鑷子	159

B 剪刀 Scissors

B-01	マイクロ剪刀	35
B-02	眼科用剪刀・抜糸用剪刀	38

特定用途 navi

H-01	ECCE/ICCE(娩出用切開創作成剪刀)	65
H-04	サイドポート虹彩剪刀・ダブルCCC剪刀	68
H-10	眼内レンズ剪刀	84
L-02	角膜剪刀(PKP・DALK・切片切除)	103
M-03	カレーシス剪刀	121

C 開瞼器 Speculums

C-01	リーバーマン開瞼器	40
C-02	ネジ止め式開瞼器	42
C-03	ワイヤー(バネ式)開瞼器	43
C-04	テンポラルアプローチ(耳側切開)用開瞼器	45
C-05	未熟児用開瞼器	46
C-06	吸引付開瞼器	47

D 持針器 Needle Holder

D-01	持針器	49
------	-----	----

E カニューラ ニードル

E-01	洗浄針・点滴針	54
E-02	注入針	55
E-03	テノン嚢下針	56
E-04	球後針	57
E-05	涙管洗浄針	58
E-06	ハンドピース	60

特定用途 navi

H-06	ハイドロカニューラ	73
H-09	I/A・皮質吸引・後嚢研磨・前房メインテナー	80
J-04	インフュージョンニードル	99
K-01	隅角癒着解離針	106

F スパーテル Spatulas

F-01	汎用スパーテル	61
------	---------	----

特定用途 navi

J-07	経強膜術用スパーテル	104
K-01	GSLスパーテル	106
L-03	角膜用スパーテル	115
M-04	翼状片スパーテル	122

G その他 Other

G-01	カリパー・クレンメ・縫合針	62
G-02	替刃パンチ(ホルダー)	63

H 白内障手術

Cataract surgery



H-01	ECCE/ICCE(輪匙・核娩出・眼球固定)	64
H-02	ECCE/ICCE(娩出用切開創作成剪刀)	65
H-03	瞳孔拡張	66
H-04	サイドポート虹彩剪刀・ダブルCCC剪刀	68
H-05	前囊切開(CCCマーカー・CCC鑷子・チストーム)	69
H-06	ハイドロ用カニューラ	73
H-07	核分割(D&C法・Phaco chop法)	74
H-08	核分割(プレチョップ法・その他)	78
H-09	I/Aカニューラ・皮質吸引・後囊研磨・前房メインテナー	80
H-10	眼内レンズ鑷子・眼内レンズ剪刀	83
H-11	眼内レンズフック	85

I 屈折矯正手術

Refractive surgery



I-01	ICL	87
------	-----	----

J 網膜硝子体手術

Vitreo-retinal surgery



J-01	硝子体鑷子・剪刀(M I V S)	88
J-02	トロカールシステム	91
J-03	網膜ブラシ・硝子体ピック	96
J-04	バックフラッシュ・インフュージョン	97
J-05	強膜プラグ・強膜プラグ鑷子	100
J-06	眼球圧迫器・未熟児鉤	101
J-07	経強膜術用器具(バックリング・凝固術)	104
J-08	眼内異物除去(マグネット)	105

K 緑内障手術

Glaucoma surgery



K-01	隅角癒着乖離	106
K-02	トラベクトロミー・トラベクレクトミー	107

L 角膜手術

Corneal surgery



L-01	角膜リング	111
L-02	角膜剪刀(PKP・DALK・切片切除)	112
L-03	DMEK・DSEK・DALK用手術器具	114

M 外眼部

M-01	異物除去(おたま鑷子・異物針・匙・ドリル)	116
M-02	霰粒腫・マイボーム腺用脂質除去(鋭匙・鑷子)	118
M-03	結膜弛緩症(マーカー・剪刀)	121
M-04	翼状片(スパーテル・ゴルフ刀)	122
M-05	挟瞼器・角板	123
M-06	眼瞼下垂(鑷子・クランプ)	125
M-07	開瞼鉤・開創器・釣針鉤	126
M-08	斜視(斜視鉤・眼筋クランプ)	128
M-09	涙道(涙管拡張針・プジー)	129
M-10	DCR・眼窩形成術	131

N 関連用品

Related items



N-01	滅菌トレー	133
N-02	洗浄液・洗浄器・保護キャップ	134
N-03	洗顔瓶・受水器	137
N-04	眼内圧降下器(ホナンバルーン)	138

O サージカルナイフ

Surgical Knife



O-01	ダイヤモンドナイフ	139
O-02	スリットナイフ	141
O-03	ストレートナイフ・クレセントナイフ	145
O-04	インプラントナイフ・クリアコーニアナイフ	147
O-05	MVRナイフ・スペシャルティナイフ・ハンドル	149

P ディスポーザブル

Disposable




P-01	ディスポーザブルカニューラ・ニードル	153
P-02	シリンジ	157
P-03	吸水スポンジ	158
P-04	WET&DRY 自動システム	160
P-05	眼帯・マーキングペン	161

Q A to Z

Surgical Package



スタートセット	162
霰粒腫セット	163
眼瞼下垂セット	163
翼状片セット	164
結膜弛緩症セット	164
白内障D&C法セット	165
白内障フェイコチョップ法セット	165
白内障プレチョップ法セット	166
硝子体25Gセット	166

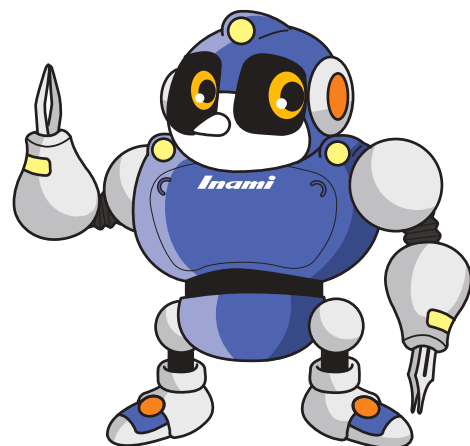

手術器具のお取扱いについて



眼科用マイクロサージャリー器具は小さく、複雑な構造を持つ物が多いことが特徴です。非常にデリケートな製品であるため、外科等の他科で用いられる器具と同等に扱われると破損の原因となりますので、より繊細なお取り扱いをお願い致します。

器具をご使用になる前に、ここに記載されている注意事項を必ずお読みください。

⚠ 使用上の注意

ご使用前にチェックと洗浄を

すべての器具は出荷前に入念に検査され、梱包されて出荷致しておりますが、輸送中に取扱いの不注意から破損する場合がありますので、到着次第十分にチェックを行って下さい。万一お届けした器具に異常がありましたら、ご使用は避け、直ちに当社までご連絡ください。

またお手元に届いてから初めて使用される際は、必ず一度洗浄してからご使用ください。

器具の保管について

マイクロサージャリー器具は、シリコンマットを敷いたトレイにて保管することをお勧めします。先端がデリケートな器具は保護チューブを装着してください。チューブは出荷時に付属しています。

ロック機能(止め)のついた器具は、ロックを開放した状態で保管してください。ロック状態で長期保管すると、ハンドルテンションが変わるなどの不具合が発生し、器具が傷むことがあります。スプリング式のハンドルを持つ器具や、ILM鑷子等のようなパイプシャフト式の器具も同様で、ハンドル部やシャフトにストレスがかからない状態で保管してください。

また錆びている器具、材質の劣化の見られる器具がある場合は、別に保管してください。

使用目的・方法は守ってください

マイクロサージャリー器具は微細な先端部を有するものが多く、それぞれの用途に合わせた強度で作られているため、使用目的は厳密に限定されています。本来の用途以外で使用されますと、器具が破損する危険性があります。形状が類似しているからという理由で他の目的に使用しますと、器具の強度の限界を超える力が加わり、曲がったり、折れたりする可能性がありますのでご注意ください。

✕ 誤った使用例

- M-136N永原式フェコチョッパーをM-127Cシンスキー氏IOLポジショニング用フックの代用とする。
- M-136分割君(徳田式核分割フック)をM-128Cレンズ用プッシュアンドプル鉤の代用とする。
- 虹彩鑷子を、強角膜鑷子の代用にしたり、9-0、10-0用の結紮鑷子で4-0、5-0などの太い縫合糸の結紮を行ったりする。
- 角膜縫合用デリケート持針器を、ディスポ針を曲げるペンチの代用とするなど。

使用頻度の過多

ディスポーザブル製品の使用回数は1度のみです。洗浄・滅菌処理を行ったとしても再度使用しないでください。

再滅菌、再使用のできるリユーザブルの器具においても、多頻度の洗浄・再滅菌による加熱冷却が、通常からストレスのかかっている止め金部分やヒンジ部分のひび割れ・弾力性の劣化を誘発します。

消毒剤使用に関する注意

塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるのでなるべく使用を避けてください。このように材質を腐食させるような物質に接触した器具は、特に念入りに洗浄・乾燥させる必要があります。

同一箇所の二度曲げ禁止

スパーテルやブジーなどを曲げて使用した場合、完全にもとの状態に戻すことは不可能です。例えばS-185・S-185R涙管ブジーはJIST2169の規格により、直径10mmの丸棒に沿って180度曲げても折れません。しかし一度折り曲げたものをもとに戻しますと完全な直線には復元せず、曲げ戻しをした部分に小さな膨らみができます。この部分には強度のストレスが加えられ、弾力性もなくなり硬化していますので、簡単に折れてしまいます。危険ですのでご使用にならないでください。

再使用する場合は表面に傷等がないか、表面が円滑であるかを、顕微鏡で必ず確認してください。

器具にダメージを与えてしまった場合

床に落としたり衝撃を与えたりした器具は、メーカーのチェックを受けて損傷のないことが判明するまで使用しないでください。一見問題がないように見えても、デリケートな器具の異常は専門の技術者でなければ発見が困難です。

使用後の注意


付着している血液・体液・組織・薬品等が乾燥しないよう、使用後は直ちに洗浄液等に浸漬してください。

正しい洗浄・滅菌の方法で処理してください

眼科用器具はその形状や素材、用途によってそれぞれ適した洗浄・滅菌方法があり、誤った洗浄・滅菌は、破損等の原因となります。器具をより長く安全にお使いいただけるよう、器具のメーカーが推奨する洗浄・滅菌の方法にて処理を行うようお願い致します。次にイナミが推奨する洗浄・滅菌方法をご紹介します。

理想的な洗浄・滅菌

基本手順

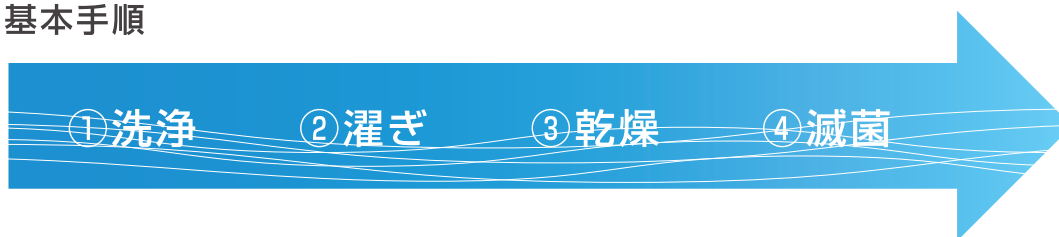

器具は使用後直ちに洗浄し、純水で濯ぎを行います。完全に乾燥させた後、各器具に適した方法で滅菌を行ってください。洗浄・乾燥後は、汚れが完全に除去されていること、及び器具の作動チェックを行うようにしてください。

！注意

カニューラ・ニードル・パイプシャフト型器具の処理

カニューラ・ニードル・パイプシャフト型器具(ILM鑷子等)のように細い管空形状を有する器具は、次の操作を行うようにしてください。

【強制通水】→[洗浄前][濯ぎ後]: より高い洗浄効果が得られます。特にパイプシャフト型の器具は、付属の専用注射器で通水し予備洗浄を行うようにしてください。

【強制通気】→[乾燥前]: 乾燥の促進。パイプ内の水分を完全に除去する。

洗浄

眼科用マイクロサージャリー用器具は、なるべく機械的な洗浄（こすり洗いや一般的な超音波洗浄器の使用等）は避け、化学的な洗浄を行うようお願い致します。ワイヤーブラシ、金属研磨剤等は洗浄に使用しないで下さい。基本的には洗浄液への浸漬洗浄が適しています。

浸漬洗浄（しんせきせんじょう）

洗浄液へ漬けることで、頑固な汚れや目に見えずに残った汚れを浮かすことができます。

デリケートに扱わなければならない器具や手の届かない部分があるような器具に適した洗浄方法です。

浸漬洗浄する際の注意

器具先端・ヒンジ・ロック（止め）・関節式ジョイント部位等は開いた状態で洗浄液に浸して下さい。（剪刀、持針器、止血鉗子、スプリングハンドル式鑷子等）

また、浸漬中は器具が重ならないようにして下さい。洗浄液が行き届かず汚れが落ちない部分が発生してしまいます。

超音波洗浄器を使う場合

通常の超音波洗浄器は目に見えないダメージを器具に与えてしまいます。先端がデリケートなフック等は、器具を手に持った状態で先端のみ洗浄液に漬け、短時間処理されるようお願いいたします。

また洗浄液は常に新しいものを使用するよう心掛けてください。洗浄液中の汚れは器具に傷を与え、性能の低下につながります。（例：剪刀の切れ味低下など）

落ちにくい汚れの洗浄

流水での予備洗浄→洗浄液へ浸漬→本洗浄の手順で行なうと、より効果的です。器具に付着した血液、体液等の除去は、イナミクリンPへの浸漬が効果的です。

器具の汚れ具合を把握し、効率の良い除染手順を選択してください。

濯ぎ

洗浄の仕上げには純水による濯ぎを行う必要があります。

手術器具の洗浄には塩類等の不純物を完全に除去した純水が理想的です。水道水は飲料水にするために主に塩素系の消毒液を含有しています。水道水を洗浄に用いた場合、水の中に含有される塩素により金属の腐食が発生します。またミネラルなど微量の不純物が付着して残り、シミやサビの原因となります。（※反射防止のためのノングレア表面処理・サテン仕上げの製品にはシミの付着が避けられません。）老朽化した水道管を通ってきた水に含まれるサビの粒子も、器具に付着するとサビや腐食の原因になります。

乾燥

洗浄後は、速やかかつ完全に乾燥させてください。水分が残っているとサビや滅菌効果低下の原因となります。器具の乾燥に際しては、糸屑のでない柔らかい織布、当社M.Q.A.、柔らかいブラシ、空気ガンを使用しての乾燥が効果的です。（繊維で引っかけて器具に損傷を与えることがあるため、デリケートな先端部の拭き取りにはガーゼ、脱脂綿等の繊維質のものは使用しないでください。）

剪刀のヒンジ部位のように金属が重なっている部分は水分が残りやすいため、器具先端を開き、ヒンジ部位を開放した状態で乾燥させてください。パイプ形状の器具も通気等を行ない、積極的に乾燥を行ってください。

滅菌

！注意

各器具に適した滅菌方法を選択してください。

器具の素材や形状によっては、滅菌効果が十分に得られない可能性があります。

以下をご参考に、各医療機関様の方針に従った滅菌処理を行ってください。

◆ステンレス製・チタン製等のイナミ鋼製手術器具（一部シリコンを使用した製品を含む）は、基本的にオートクレーブ（高圧蒸気滅菌）が可能です。（素材は添付文書に記載されています）

◆長い管空を有するパイプシャフト形状の器具は、EOG滅菌ではガスが十分に管空内に達しない場合も想定されるため、オートクレーブでの滅菌を推奨致します。カニューラ・ニードル程度の長さの器具であれば、EOG滅菌でも効果が得られると考えられます。

◆カニューラ・ニードル・パイプシャフト型器具のプラズマ滅菌での滅菌効果は検証していません。チタン製品はプラズマ滅菌で若干退色する場合がありますが、品質には問題ありません。

	高圧蒸気滅菌	EOG滅菌	プラズマ滅菌
鑷子・剪刀・持針器・開瞼器	○	○	○
カニューラ・ニードル・フック	○	○	△
パイプシャフト	○	△	△
チタン製品	○	○	△

○…可能

△…お勧めできない

これからの滅菌は
クラスB基準の

INC Clave

クラスBオートクレーブ

製品の詳細は14-15ページで紹介しています。

滅菌前にしっかりと除染

器具の表面に汚れ・蛋白質等が付着したまま滅菌を行わないようにして下さい。洗浄の不完全さを滅菌でカバーしようとしないでください。

器具は完全に乾燥させてください

器具に水分が残ったまま高圧蒸気滅菌処理を行いますと、サビが発生する原因となります。またEOG滅菌では滅菌効果が低下します。

ロック（止め）は外してください

ロック（止め）付器具に高圧蒸気滅菌を行う場合は、金属膨張による破損を防止する為に、ロックをはずした状態で滅菌処理を行ってください。

先端の保護

有鉤鑷子やパイプシャフト系の器具などは先端が非常にデリケートなため、滅菌の際はシリコンチューブ等にて先端を保護し、シリコンマット式滅菌トレーや専用ケースに入れて滅菌処理をされるようお願い致します。

付属の保護キャップについて

ご購入いただいた際、当社鑷子類等に付属している先端保護用のチューブはシリコン製であり、オートクレーブ（高圧蒸気滅菌）やガス滅菌が可能です。

日々の滅菌精度を可視化するバッチ・モニタリングシステム(BMS)。

バッチ・モニタリング・システム(BMS)

滅菌器内の蒸気浸透は、滅菌器のコンディション・蒸気の質・滅菌物の積載量などの影響を受け、滅菌する度に変化します。

その変化による滅菌不良の可能性を検知するためには、滅菌毎に確認をするバッチ・モニタリング・システム(BMS)が必要となります。コンパクトPCDは、その変化の影響を特に受けて滅菌不良となるリスクの高い内腔器材や複雑な器材のもっとも蒸気浸透が難しい内部レベルにおけるバッチ・モニタリングを実現します。

国際規格ISO・欧州規格ENへの適合

コンパクトPCDは、化学的インジケータの国際規格EN ISO 11140-1のタイプ2(特定の試験のためのインジケータ)に適合した製品です。


また、コンパクトPCDホワイトは、欧州規格EN 13060に規定されている滅菌器の蒸気浸透試験に用いるインジケータです。



即時判定&判りやすい判定

BIと異なり、培養が必要ないため、即時判定することが可能です。滅菌後すぐに専用インジケータを取り出して、空気除去および蒸気浸透に起因する滅菌不良の可能性を、変色状況より判定することができます。

※ (BI) バイオロジカル・インジケータ

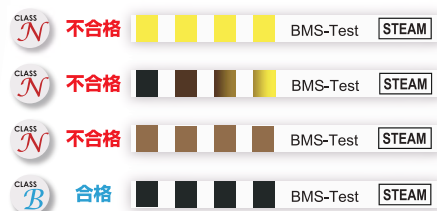

使用から記録までを簡単に

簡単な操作で専用インジケータをコンパクトPCD内にセットでき、滅菌器内のもっとも滅菌しにくい場所に設置します。なお、本体サイズは長さ約18cm×直径約3.5cmと文字通りコンパクトですので設置スペースの確保が容易です。

専用インジケータ自体もコンパクトであり、裏面がシールで、記録しやすく設計されています。



BMS用コンパクトPCDホワイト
(眼科用)

BM-300 51,000円

※インジケータ100回付属



BMS用コンパクトPCDインジケータ

300250 (250回分) 45,000円

300500 (500回分) 87,000円



資料


ジョンソンエンドジョンソンメディカル株式会社と協力し、当社製品を100回の滅菌試験にかけ(ステラッド®100NX™)、以下の結果を得ました。

製品	コード	材質	滅菌後の状況
持針器	KI-42	SUS 420 J2	器具表面に色の変化はある(全体的に色が褪せる、ハンドルの内側が青や金色に変化)が、器具の性能に影響なし。
鑷子	KI-22	SUS 420 J2	同上
有鉤鑷子	S-310	SUS 420 J2	部分的に変色あり、器具の性能には影響なし。
剪刀	M-54RC	SUS 420 J2	外観、器具の性能(刃の切れ味)とも影響なし。
ヴァナス剪刀	S-615A	SUS 420 J2	部分的に変色あり、器具の性能には影響なし。
クント氏挟験器	S-485	SUS 420 J2	柄の溝の部分に変色あり、器具の性能には影響なし。
Mフック	M-1101	SUS 304	表面に若干変色あり、器具の性能には影響なし。
鑷子	MB-012	チタン合金	同上
IOL鑷子	MB-040	チタン合金	同上
角板(製造中止品) 製造中止	S-247A	プラスチック	表面がザラつき、不適当。
滅菌ケース	M-218	プラスチック	外観、品質に影響なし。
手術用コンタクトレンズ 製造中止	M-596	枠:アルミニウム レンズ:石英	表面のメッキが剥がれる。レンズ接着剤が変化し、反射が出て、観察困難につき不適当。レンズのガラス材そのものには影響なし。
接続用コード	22-1202	外側:シリコン 内側:電線	外観、品質に影響なし。
消毒用キャップ	-	シリコン	同上

※ 金属製角板(S-247B)は製造しております。

形状別器具洗浄・滅菌方法まとめ

鋼製小物全般（鑷子・剪刀・持針器・開瞼器・フック等）

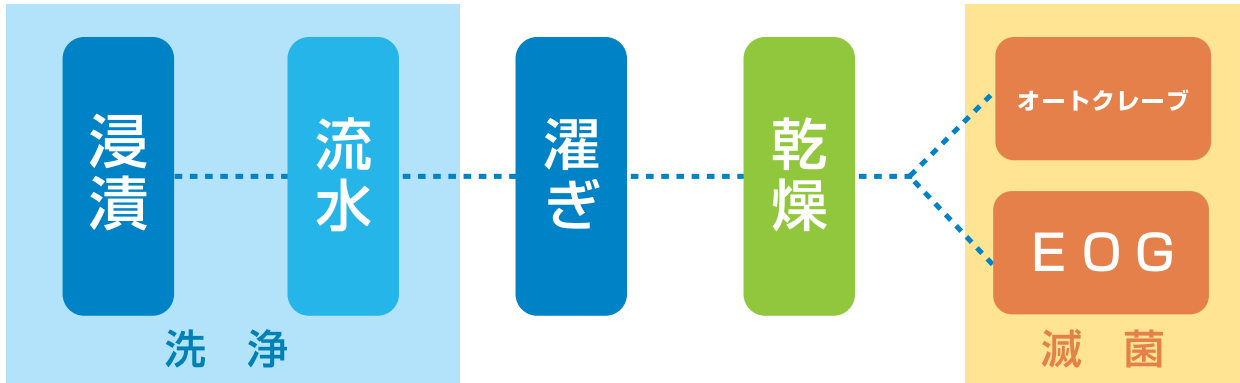


注意： 滅菌の際には洗浄した器具を完全に乾燥させた後に行ってください。（水分が付着しているとオートクレーブ滅菌の場合、サビが発生し、EOG滅菌の場合、EOGが水に溶けて滅菌効果を失わせたり生体内に吸収されることがあります）

眼科用手術器具の滅菌

弊社器具には、ご購入いただいた際に先端保護用のチューブを付属している製品がございます。これらのチューブはシリコン製であり、高圧蒸気滅菌やガス滅菌することが可能です。

ロック付き（止付）器具の場合は、金属膨張による破損防止のためにロックを外してください。

管空状の器具（カニューラ・ニードル等）

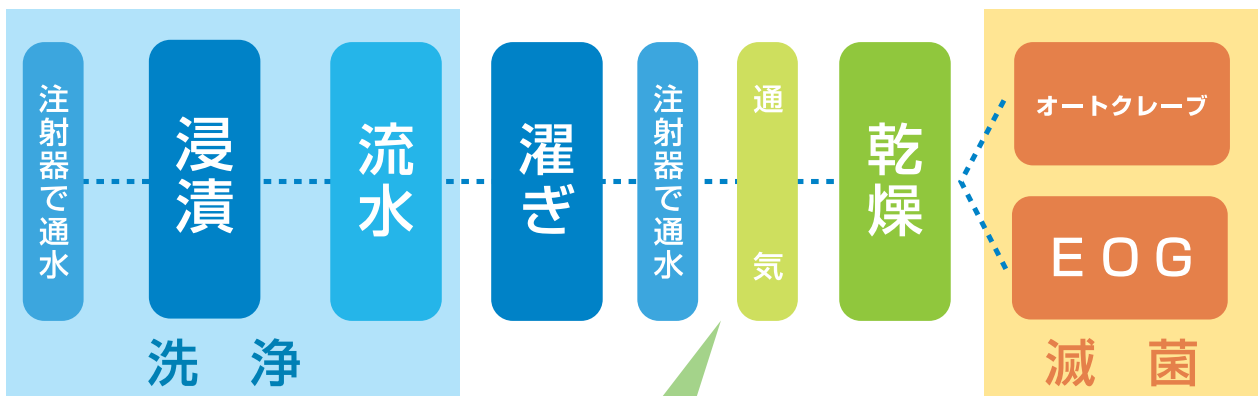

管空状器具の洗浄

これらの器具は手術中に付着した組織や薬液などによる詰まりを防ぐために、使用後は乾燥しないうちに通水を行ってください。イナミクリーンを通していただくとより効果的です。


無水アルコール処理

通水の後、注射器によって無水アルコールを通していただくと、その後の水分除去がより行いやすくなります。

滅菌前後の水分除去

洗浄後、水分が残っていると、サビや滅菌効果低下の原因となります。オートクレーブによる滅菌処理の場合、滅菌後の十分な乾燥が可能なよう器具の配置などにご注意ください。

パイプシャフト型の器具(河合氏CCC鑷子など)

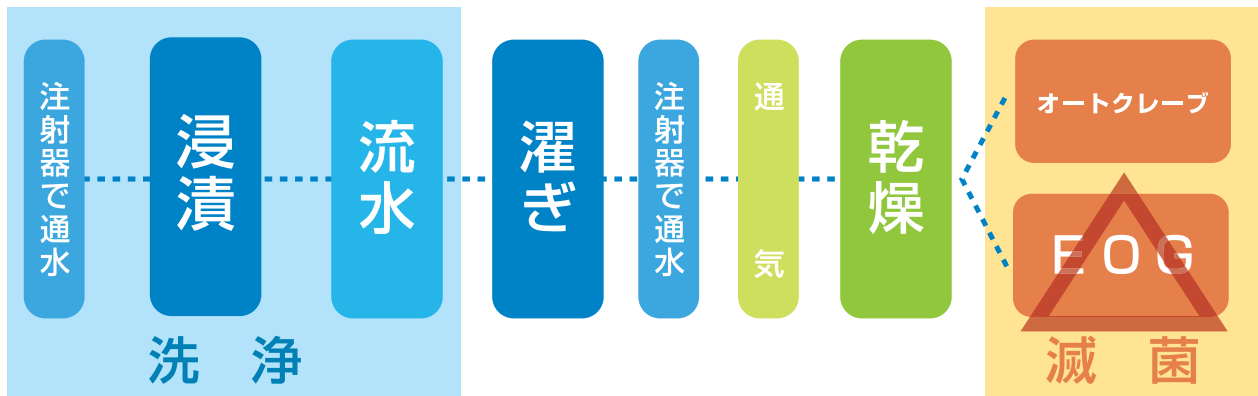

専用器具による通水

パイプシャフト構造を有する器具はメンテナンスを怠ると、手術中に付着した生体組織や粘弾性物質等がパイプ内で固まり、稼動不良の原因となります。使用後はすぐに、付属の洗浄用注射器、もしくは専用器具を用いて、器具先端から1～数回程度通水を行ってください。

◆ 通水の仕方 ①

注射器のシリコンチューブ部位に器具の先端を根元まで挿入し、洗浄液等を数回通して汚れを押し流してください。

◆ 通水の仕方 ②

当社のMV-900を使用して下さい。詳細は136ページで紹介しています。



MV-900



シリンジを使った通水の様子

パイプシャフト器具のEOG滅菌

器具の構造上、ガスが管腔内に十分に達しない可能性があり、また滅菌後のエアレーションが難しいため、これらの器具には、ガス滅菌はお勧めできません。



器具の劣化 サビ(腐食)・シミ・熱ヤケ・ひび割れ

サビ(腐食)

金属製器具を使用する限り、常にサビ(腐食)に対する防御策を講じる必要があります。剪刀のヒンジ部分、ハンドルの滑り止めの筋、鑷子のかしめ加工及びバネ溶接部分、遮蔽されて見えない部分等に多発する傾向があります。洗浄・清掃・乾燥処理を念入りをお願い致します。

サビは体液、血液等といった有機物の付着と混同されることがあります。これらはメーカーの専門チェックを受けないと正確には判定できない場合がありますのでメーカーに送ってチェックを受けることをお勧め致します。

【よくあるサビの原因】

- ◆ 水分に含まれる塩素、ミネラル、老朽化した水道管からのサビの粒子等
- ◆ 液体またはガス状の薬品との反応(ハロゲンイオンの付着)
- ◆ 濃い酸性溶液への長時間の漬け込み→薬品の使用時間は最低限とし、消毒後はしっかりと水洗。
- ◆ 汚れた消毒剤への漬け込み
- ◆ 空気中の湿気
- ◆ 僅かなヒビからの腐食→ヒビ割れの内部は研磨されていないため錆びやすい。
- ◆ 異なる成分の金属製品との接触放置 → 水分がある状態では腐食を誘発します。
- ◆ 摩擦→剪刀のヒンジ等繰り返し摩擦される部位は、表面皮膜が剥がれてサビが発生することがあります。

イナミクリーンLの使用で、軽度のサビを除去することができます。またご購入後に、まずイナミクリーンLへの浸漬処理をしていただくことで、サビの発生を軽減させることができます。(製作の過程で器具表面に残存する酸化物を除去できるため)

シミ

金属表面に色のついた輪状のシミが現れることがあります。これらは水に含まれるミネラル・重金属イオン等が金属表面に付着し、オートクレーブ滅菌の影響により化学変化をおこして変色したものです。

サビと間違われることがありますが、侵食を伴うサビ(腐食)とは異なり異物が表面に付着しているだけです。多くの場合除去が可能です。

【シミの種類】

- ◆ 薄い色の輪状のシミ→水に含まれるミネラル・重金属イオン等が原因。洗浄・滅菌には純水を使用して下さい。
- ◆ 白いシミ→ある種の洗浄剤に含まれるリン酸塩により発生することがあります。
- ◆ 茶褐色の付着物→器具の金属表面に黄色がかった茶色から褐色の付着物が現れることがあります。
これらは洗浄剤の残存成分が滅菌の過程で化学変化してシミとなったもので、洗浄中に手の届きにくい部位に多く発生します。誤って錆びと思われる場合もありますが、表面を強く摩擦するか洗浄剤の使用により痕跡を残さず除去できます。

シミの状態が軽度であればイナミクリーンRに浸せば除去できます。

金属表面の強い摩擦…クリーナーを用いる場合は研磨剤を含まないものを使用して下さい。研磨の際は器具に余計な力を加えないよう注意してください。

熱ヤケ

高圧蒸気滅菌で空焚きをしてしまった等の場合、熱により金属表面が黒褐色に変色してしまいます。

この変色はイナミクリーンRでもとに戻すことが可能です。

しかし熱によって金属の「焼入れ」がもとに戻り、強度が劣化する可能性がありますので、ご注意ください。

ストレスによるひび割れ

外部からの衝撃や機械的加圧、瞬間的な極端な温度差等でひび割れを起こす可能性があります。

ロック付きの器具は、特に注意が必要です。洗浄・滅菌の際はロックをはずし、ストレスフリーな状態での処理をお願い致します。

＋手術器具のメンテナンスに関して

当社の鋼製手術器具類は基本的には修理は可能ですが、鑷子の鉤の破損・摩耗・著しい噛み合わせ不良、核分割フック類の著しい曲りなど、修理を施すことにより、原型をとどめられない場合等、修理が不可能な場合もありますので、ご承知おきください。

ヨーロッパ基準に準じた、 ハイレベルな滅菌を提供します。

医療先進国であるヨーロッパの基準 EN13060のクラスB規格を満たしたオートクレーブです。減圧によって残留空気を排出し真空状態となったチャンバー内部に飽和蒸気を充満させることで、従来のオートクレーブでは滅菌が難しいとされる中空製品や、多孔性材料(包装品・ガーゼ・ドレープ)の内部まで確実に滅菌します。

高度な感染管理システムのご提案

洗浄～消毒～乾燥を1台で行うINC Washerとの併用で、施設内での高度な感染管理システムを構築することが可能です。

INC Washer
ウォッシャーディスインフェクター



INC Clave
クラスBオートクレーブ



↑ **使用・汚染器具の発生** ↓

これからの滅菌は クラスB基準の **INC Clave**

クラスBオートクレーブ



製品コード IH-300

製品名 クラスBオートクレーブ INC Clave

A-01 前方突出型有鉤鑷子

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼病


関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイボード

AtoZ

Quick Service Best Seller

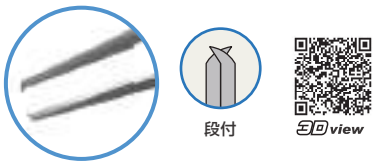

マイクロ角膜縫合鑷子 C 型
ウルトラファイン 0.12mm

M-5R 全長 85mm / 鉤幅 0.12mm ￥54,000 JAN:4547451042198
材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001205 入 1



マイクロ有鉤鑷子の代名詞的アイテム。

発売以来、絶大な人気を誇るベストセラー。マイクロサージャリーの最も基本的な器具として愛用されています。

Quick Service PICK UP



縫合鑷子 前方突出型 (80 度) 段付

DS-003 全長 90mm / 鉤幅 0.12mm ￥62,000 JAN:4547451320890
材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001660 入 1



使い易さを徹底的に追求した定番スタイルのチタニウムモデル。

長年の経験と研究により先端の爪の角度を改良。前方突出の「つまみ易さ」と直角型の「がっちりした把持力」を両立しました。先端は、鉤のサイズ、角度にこだわり、タングステンカーバイド加工を施しております。また、操作感を追求し、滑り止めハンドル機構の採用や、吸いつくような把持感を生み出す最適なテンションを採用しております。

Quick Service Best Seller

MB-012 MB-012




縫合鑷子 前方突出型有鉤 段付

MB-012 全長 88mm / 鉤幅 0.12mm ￥62,000 JAN:4547451045571
MB-012F 全長 88mm / 鉤幅 0.10mm ￥62,000 JAN:4547451045588
材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001258 入 1



ソフトなテンションとタングステンの把持力がコラボ。

ソフトなテンションと、微細な鉤が組織に対するダメージを軽減しつつ、タングステンによるしっかりとした把持を可能とした、絶妙な使い勝手が魅力です。

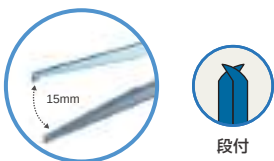

フラッパー縫合鑷子
前方突出型 有鉤 0.1mm 段付

DS-012FFL 全長 90mm / 鉤幅 0.10mm ￥69,000 JAN:4547451320654
材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000858 入 1



人気のフラッパー（15 mmの開き）を採用。

MB-012F をベースとした、人気のフラッパーシリーズ。把持する際、まるで指でつまんでいるかのようなフィーリングが得られます。

Quick
Service


マイクロ角膜縫合鑷子 C 型 エクストラデリケート 0.15mm

M-4R 全長 85mm / 鉤幅 0.15mm ￥46,000 JAN:4547451042037

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001205 入 1

スタンダードなマイクロサージャリー用有鉤鑷子。

マイクロサージャリーに適したデリケートな前方突出型有鉤鑷子。鉤幅は 0.15mm となっております。

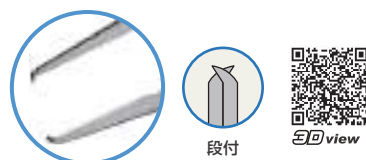Quick
ServiceBest
SellerS-388
S-387

カストロヴィーホー氏角膜縫合鑷子

S-388 ウルトラファイン 全長 105mm / 鉤幅 0.12mm ￥54,000 JAN:4547451043881

S-387 エクストラデリケート 全長 105mm / 鉤幅 0.35mm ￥50,000 JAN:4547451043874

S-386 デリケート 全長 105mm / 鉤幅 0.40mm ￥40,000 JAN:4547451043867

受 **S-385** - 全長 105mm / 鉤幅 0.45mm ￥40,000 JAN:4547451043850

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001204 入 1

ロングハンドルの定番。

ロングハンドルが好みの方、または手の大きな方から絶大な人気を誇ります。先端はマイクロタイプから各サイズとり揃えております。S-388 の先端 0.12mm マイクロタイプは発売以来のベストセラー商品です。

memo

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイ

AtoZ

Quick Service



縫合鑷子 直角型有鉤 段付


MB-011	全長 88mm / 鉤幅 0.12mm	¥ 60,000	JAN:4547451045557
MB-011F	全長 88mm / 鉤幅 0.10mm	¥ 62,000	JAN:4547451045564

材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001258 入 1



ソフトなテンションとタングステンの把持力がコラボ。

ソフトなテンションと、微細な鉤が組織に対するダメージを軽減しつつ、タングステンによるしっかりとした把持を可能とした、絶妙な使い勝手が魅力です。

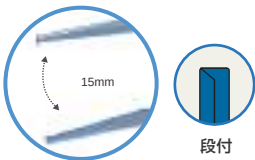

フラッパー縫合鑷子 直角型有鉤 0.1mm 段付

受 DS-011FFL 全長 90mm / 鉤幅 0.10mm ¥ 66,000 JAN:4547451320647

材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000857 入 1




人気のフラッパー（15 mmの開き）を採用。

MB-011Fをベースとした、人気のフラッパーシリーズ。把持する際、まるで指でつまんでいるかのようなフィーリングが得られます。

Quick Service

Best Seller

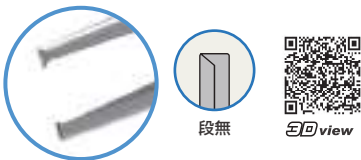

三島式角膜鑷子 オリジナルモデル


S-9B 全長 76mm / 鉤幅 0.12mm ¥ 51,000 JAN:4547451320834

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001058 入 1



把持部と先端の近接設計により微細なコントロールを実現。

マイクロ直角型有鉤鑷子の定番。把持部と先端の距離が近接していることで、より繊細な作業が可能です。鉤幅も使いやすい0.12mm設計となっております。

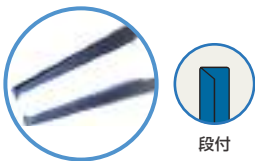

上野式マイクロ有鉤鑷子 段付 チタニウム

DS-20R 全長 80mm / 鉤幅 0.12mm ¥ 64,800 JAN:4547451320838


材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000846 入 1



あらゆる手術の微細な操作をこなす万能タイプ。

グリップ位置と把持部が近接したことで操作性が飛躍的に向上しました。また軽量のチタニウム素材を採用したことで、術者の手の動きをそのまま反映する操作性を実現しました。更に先端タングステンカーバイド加工が組織・糸をより確実に把持します。

PICK UP

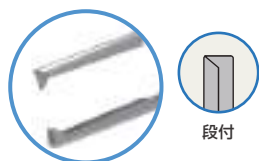

段付




三島式有鉤鑷子

S-9D 全長 100mm / 鉤幅 0.15mm ￥30,000 JAN:4547451312987

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000656 入 1

マイクロ直角型有鉤鑷子の廉価モデル。

コストパフォーマンスに優れたマイクロタイプ。段付きの設計で結紮もスムーズにこなすことが可能です。

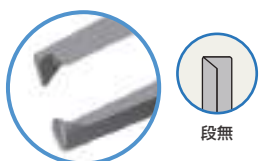

段無



ビショップ・ハーモン氏薄片組織鑷子 有鉤


S-350A - 全長 85mm / 鉤幅 0.35mm ￥30,000 JAN:4547451043775

S-351A デリケート型 全長 85mm / 鉤幅 0.25mm ￥30,000 JAN:4547451043799

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001201(S-350A) 13B1X00048001202(S-351A) 入 1

指のポジショニングが便利な丸窓ハンドルを採用。

ハンドルに丸窓を3箇所用意する事により、グリップ時の指のポジショニングを常に一定に保つことが可能です。

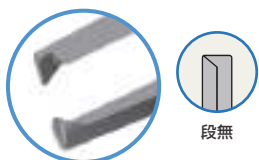

段無




ドイツ型有鉤鑷子

S-316 全長 100mm / 鉤幅 0.40mm ￥13,200 JAN:4547451043713

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001278 入 1

診察室・外来処置での使用を目的に設計された定番タイプ。

診察室や外来処置において、ユーティリティーに使用することを目的に開発されました。

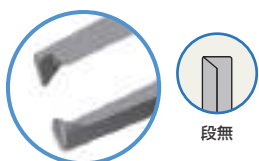

段無



view



有鉤鑷子 直

S-310A 全長 110mm / 鉤幅 0.50mm ￥9,500 JAN:4547451327295

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001895 入 1

診察室や外来処置でマルチに活躍する定番モデル。

診察室や外来処置において、ユーティリティーに使用することを目的に開発されました。

Quick Service

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼病


関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

Quick
Service

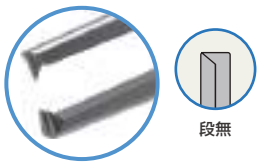


ボン大学式虹彩鑷子 直

S-410 全長 73mm / 鉤幅 0.12mm ￥41,000 JAN:4547451043898
材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001290 入 1

虹彩操作に最適な設計を施した定番モデル。

先端は虹彩をつかみやすく、傷つけにくい微細な直角型有鉤を採用。また小振りなフォルムとスリムなシャフトによる柔軟なしなりが、虹彩に余計な負荷を与えずに安全かつ優れた操作性を実現します。

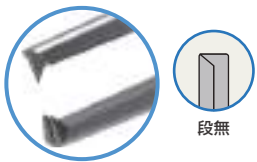


ボン大学式虹彩鑷子 曲

S-411 全長 73mm / 鉤幅 0.12mm ￥44,000 JAN:4547451041394
材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001290 入 1

定番虹彩鑷子の曲タイプ。

定番虹彩鑷子 S-410 の曲ユーザーモデル。直ユーザーにおいても角度的に操作が困難な状況などスポット的な使用にも適しております。

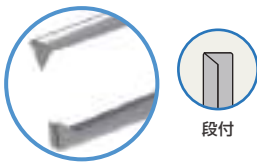


ボン大学式 虹彩鑷子 直 段付

M-20R 全長 76mm / 鉤幅 0.12mm ￥50,000 JAN:4547451041740
材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X0004800119 入 1

ユーティリティーな使用が可能な段付き虹彩鑷子。

虹彩鑷子の定番形状（S-410）にプラットホームをプラスしました。把持の際に面と面が合わさる特長により得られる安定した把持力が魅力です。結膜・強膜の把持や結紮などのユーティリティーな使用も可能です。

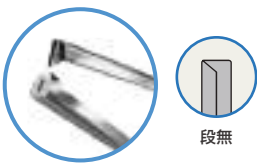

ギル氏虹彩鑷子

S-413 全長 76mm / 鉤幅 0.12mm ￥28,000 JAN:4547451034834
材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048000119 入 1

視認性としなりに優れた曲タイプ。

スリムな湾曲シャフトが、虹彩操作時の視認性と最適なしなりを生み出します。曲ユーザーやコリプリアタイプのハンドルをお好みの方にお勧めです。また、角度的に直では操作が困難な状況下や、より視認性が要求される状況などスポット的な使用にも適しております。





段付

縫合鑷子 直 P-H 型 0.3mm 段付


MB-013 全長 88mm / 鉤幅 0.30mm ￥55,000 JAN:4547451045595

材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001258 入 1

組織のダメージを最小限に抑える技術を惜しみなく搭載。

組織をホールドする感覚でつまめる P-H 型の特性に、優しいテンション、タングステンカーバイド加工、段付き加工をプラスしました。組織へのダメージを更に軽減しつつ、より確実な把持を実現しました。結紮もこなせる汎用性も魅力です。

Quick Service

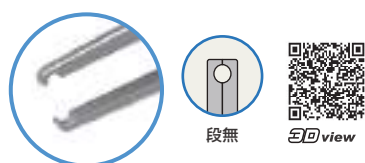

段無



SD view

三島式角膜鑷子 P-H 型


S-9C 全長 80mm / 鉤幅 0.40mm ￥30,000 JAN:4547451312932

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000442 入 1

結膜を優しくホールドするようにつまめる P-H 型の定番。

先端で結膜をホールドするように把持できる P-H 型の初期モデル。組織のダメージを最小限に抑えることが可能です。

Quick Service

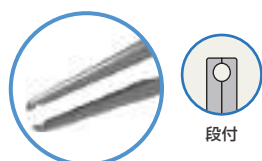

段付

マイクロ角膜・縫合鑷子 P-H 型

M-3R 全長 83mm / 鉤幅 0.40mm ￥32,000 JAN:4547451312918

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000439 入 1

段付き P-H 型の定番。

段付設計により、把持の際に、面と面が合わさるため、先端のかみ合わせと把持力が安定しました。また、プラットフォームを利用し、結紮も行うことが可能です。指のポジション用丸窓式ハンドルも人気です。

Quick Service

memo

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連
用品


サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

Quick
Service

Best
Seller

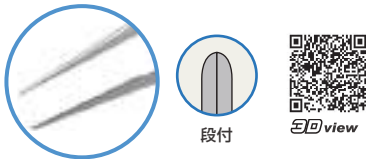

段付




view



面がほぼ同時に閉じて、糸や組織が滑らない絶対推奨の無鉤鑷子。

通常の鑷子は、把持の際先端から徐々に閉鎖していく機構となっておりますが、M-1Rは把持面が同時に近い感覚で閉じるように設計されております。これにより把持面全体にほぼ均一な力が作用するため、結紮糸をどの面で捉えても、より滑らずに安定した操作が可能です。また、この特性により、結膜などの組織を把持する際も、優しく、確実な把持を実現します。圧倒的なユーザーを誇る人気の商品です。

Best
Seller

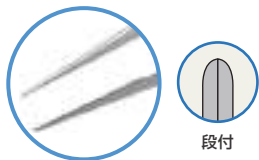

段付



絶対推奨のベストセラー M-1R ワイドハンドル。

絶対推奨のベストセラー M-1R のワイドハンドル。手の大きな方やワイドハンドルユーザーから絶大な人気を誇ります。

Quick
Service

Best
Seller



段付



view



使いやすいファインで定番の無鉤鑷子。

先端から徐々に閉鎖していく通常タイプの無鉤鑷子。段付き設計のため、安定した結紮が可能です。また組織をつまむようなアプローチにもファインな操作性を発揮します。

Quick
Service

Best
Seller



段付



view



タングステン加工の把持力が自慢のチタニウムの定番無鉤鑷子。

使いやすい段付きタイプ。先端にはイナミ独自のタングステンカーバイド加工を施しており、糸や組織が面に吸いつくような把持を実現することに成功しました。また、チタニウム製による軽量化と、軽めに設定したテンションが術者の疲労を軽減するとともに、手元での微細な操作を可能とします。

結紮鑷子 直 0.3mm 段付

MB-010	全長 88mm / 先端 0.30mm	¥ 54,000	JAN:4547451045540
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 16209001	届 13B1X00048001164 入 1

PICK
UP

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障


角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

23

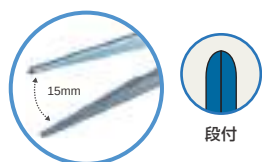

段付

フラッパー結紮鑷子 段付


DS-010FL 全長 90mm / 先端 0.30mm ￥56,000 JAN:4547451320630

材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000856 入 1



指でつまむようなアプローチが人気のフラッパーモデル。

先端の開きが把持の際にまるで指でつまんでいるかのようなアプローチを実現します。先端には、イナミ独自のタングステンカーバイド加工による把持力を有し、更に「フイーリング」という視点を追加した一歩上の使い心地を目指した上位モデルです。

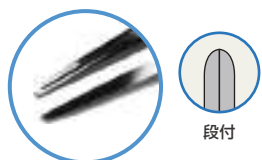

段付

チュービンゲン型結紮鑷子 直 無鉤

M-19R - 全長 100mm / 先端 0.60mm ￥30,000 JAN:4547451041719


受 M-19RD ファインチップ 全長 100mm / 先端 0.30mm ￥36,000 JAN:4547451041726

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001163 入 1



ミドルサイズのハンドルを採用。先端は選べる 2 サイズ。

マイクロ鑷子のスタンダードサイズより若干大きめのミドルサイズを採用しました。通常タイプでは若干小さいと感じる方には最適なサイズとなっております。先端は、太めの糸でもしっかりと握める 0.6mm モデルと、汎用性の高い 0.3mm モデルの 2 タイプからお選びいただけます。

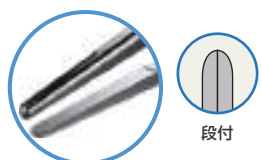Quick
Service

段付

マイクロ結紮鑷子

M-170R エクストラデリケート 全長 85mm / 先端 0.35mm ￥30,000 JAN:4547451041573


M-171R ウルトラファイン 全長 85mm / 先端 0.30mm ￥37,400 JAN:4547451041580

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001162 入 1



ベストセラー M-5R、M-4R の無鉤タイプ。

前方突出型有鉤鑷子のベストセラー M-5R、M-4R の無鉤タイプ。M-170R は M-4 R を、M-171R は M-5R を基準にしております。

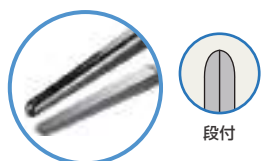

段付

ソーブ型結紮鑷子

M-165R 全長 105mm / 先端 0.30mm ￥28,000 JAN:4547451312963

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000108 入 1



コストパフォーマンスに優れたマイクロ無鉤鑷子。

マイクロ無鉤鑷子のロングハンドルユーザーモデル。ややスレンダーな形状をしております。コストパフォーマンスにも優れた商品です。

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼薬

関連用品


サージカルナイフ

ディスプレイ

AtoZ

Quick Service

PICK UP

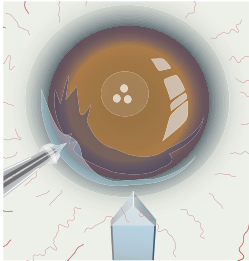


突起付ジュエラー鑷子

M-2190 全長 110mm / 先端 0.2mm / 突起部 (閉じた状態) 2.0×1.3mm
¥ 30,000 JAN:4547451325109

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001770 入 1

経結膜・強角膜一面切開法から眼球固定まで、ユーティリティーな活用が魅力。

経結膜・強角膜一面切開法において、先端のふくらみを利用し、サイドポートからの粘性物質の流出を防ぎ、前房圧を保つ役割を果たします。また、眼球固定など、ユーティリティーに活躍する非常に利便性の高い鑷子となっております。

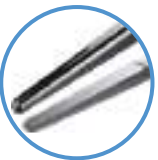

段付



カストロヴィーホー型結紮鑷子

S-381 全長 108mm / 先端 0.30mm ¥ 36,000 JAN:4547451326304

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001832 入 1

定番カストロハンドルタイプの無鉤がご要望に応えラインナップ。

大きなハンドルで定番のカストロハンドル鑷子に無鉤タイプがラインナップ。カストロハンドルユーザーのニーズにお応えした待望の商品です。



段付



ED view



河合氏万能鑷子

M-1631 全長 107mm / 先端 0.3mm ¥ 51,000 JAN:4547451333593

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002311 入 1

先端部にアングルがついてるので、顕微鏡下での視認性に優れており、鑷子全体に厚みを持たせた製品になっているため、先端が細くても把持力が高く、太い糸から細い糸まで安定した操作が可能です。また結膜や強膜の把持、トロカールの把持などにも使え用途が幅広くユーティリティーな鑷子となっているのが特徴です。



段付



結紮・縫合用鑷子 直


KI-9 全長 93mm / 先端 0.50mm ¥ 24,000 JAN:4547451312888

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001521 入 1

段付きで使いやすいシンプルで伝統の湖崎ハンドル。

シンプルで伝統の湖崎ハンドルにプラットフォームを搭載しました。太い針もしっかりと握めるやや幅広い先端サイズを採用しております。

Quick Service

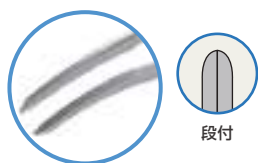

段付

結紮・縫合用鑷子 曲

KI-8 全長 87mm / 鉤幅 0.50mm ￥25,000 JAN:4547451312871

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001521 入 1



KI-9 の曲タイプ。

シンプルで伝統の湖崎ハンドルの曲ユーザーモデル。太い針もしっかりと掴めるやや幅広い先端サイズを採用しております。



段無

三島式結膜鑷子


S-9A 全長 80mm / 先端 0.65mm ￥32,000 JAN:4547451312925

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001203 入 1



優しくも、しっかりとした結膜の把持が可能なセレーション鑷子。

先端にデザインされた浅いセレーションが、結膜を優しく、且つしっかりと把持することが可能です。

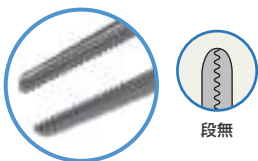

段無

ビショップ・ハーモン氏薄片組織鑷子 無鉤

S-350B - 全長 87mm / 先端 0.85mm ￥30,000 JAN:4547451043782

S-351B デリケート型 全長 87mm / 先端 0.50mm ￥30,000 JAN:4547451043805

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001201(S-350B) 入 1
13B1X00048001202(S-351B)



ユーティリティーに使用できるセレーションタイプ。

先端の幅広セレーションが、組織や消耗品の把持など、ユーティリティーに活用することが可能です。また指のポジショニングが便利な丸窓式のハンドルも特長です。

memo

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼病


関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

Quick
Service Best
Seller

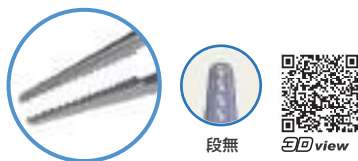


ソープ氏角膜異物鑷子

S-331 全長 108mm / 先端 0.50mm ￥20,000 JAN:4547451049432
材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001478 入 1

ユーティリティーに使用できる高性能マイクロセレーション鑷子。

マイクロな高性能セレーション鑷子。組織の把持はもちろん、異物除去や、霰粒腫の残渣除去に至るまで、幅広く活用できる汎用性が魅力です。ハンドルはロングサイズでありながら、グリップ位置は先端に近接しているため、手元での細かい操作も可能です。

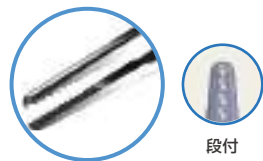


ソープ氏角膜異物鑷子 段付

S-332 全長 100mm / 先端 0.50mm ￥20,900 JAN:4547451043270
材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000289 入 1

人気の S-331 をベースに開発された段付きセレーション鑷子。

S-331 をベースにより結紮を便利に行うことなどを目的に段付きとして開発されました。ハンドルはミドルサイズを採用しております。

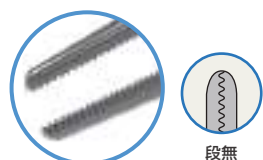


ドイツ型無鉤鑷子

S-317 全長 98mm / 先端 1.00mm ￥16,000 JAN:4547451043270
材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001279 入 1

診察室・外来処置での使用を目的に設計された定番タイプ。

診察室や外来処置においてユーティリティーに使用することを目的に開発されました。

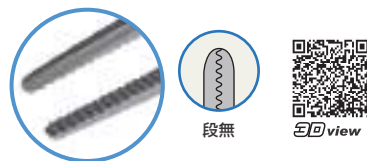


無鉤鑷子 直

S-313A 全長 110mm / 先端 1.00mm ￥9,000 JAN:4547451327301
材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001896 入 1

診察室や外来処置でマルチに活躍する定番モデル。

診察室や外来処置においてユーティリティーに使用することを目的に開発されました。

Quick
Service

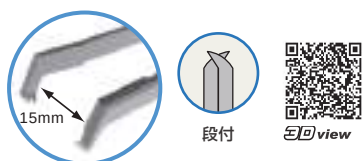Best
Seller

段付



view




かつてないフィット感と指先のようなフィーリングを実現。

先端の開きをやや広めの 15mm に設定しました。コリブリ型独特のハンドル形状との相乗効果により、手にびったりと吸い付くようなかつてないフィット感と安定感を実現しました。また、15mm の開きから生まれるテンションとアプローチは、まるで指先のような操作性を体感することが可能です。先端の鉤は、あらゆる組織の把持が容易になるよう、高精度のくちばし型デザインとなっております。

フラッパーマイクロコリブリ鑷子

M-177CN 全長 76mm / 鉤幅 0.12mm ￥72,000 JAN:4547451320289

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001931 入 1

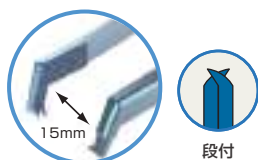PICK
UP

段付

フラッパーマイクロコリブリ鑷子
チタニウム

DS-177CN 全長 76mm / 鉤幅 0.30mm ￥89,000 JAN:4547451320661

材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001659 入 1

M-177CN のハイグレードモデル。

かつてないフィット感とまるで指先のようなフィーリングを実現する M-177CN にチタニウムによる軽量化と、イナミ独自のタンクステン加工による把持力がプラスされました。最高の操作性を実現するハイグレード鑷子です。

Quick
ServiceBest
Seller

段付



コリブリ鑷子 角膜結膜縫合用

M-180A 全長 74mm / 鉤幅 0.12mm ￥55,000 JAN:4547451334668

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002349 入 1

フィット感が魅力の人気のコリブリ鑷子定番モデル。

先端は段付きで、マイクロサージャリーに適した 0.12mm の前方突出型を採用。また、ハンドルはグリップ時のフィット感を高める窓式を採用しております。コリブリ型ユーザーからは定番モデルとして愛用されております。



段付

コリブリ・トラウトマン鑷子
エクストラデリケート 0.12mm 段付

M-177A 全長 78mm / 鉤幅 0.12mm ￥46,000 JAN:4547451041627

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001289 入 1

汎用性の高い段付きのシンプルで使いやすいコリブリ鑷子。

シンプルなコリブリ鑷子。マイクロサージャリーに適した 0.12mm の前方突出型を採用しております。段付きのため、結紮も便利に行えます。

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスポーザブル
- AtoZ



view



段付



河合氏角膜縫合鑷子 0.12mm コリブリ型

M-1630A 全長 107mm / 鉤幅 0.12mm ￥55,000 JAN:4547451333586

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002310 入 1

先端部にアングルがついてるので、顕微鏡下の視認性に優れており、鑷子全体に厚みを持たせた製品になっているため、先端が細くても把持力が高く、太い糸から細い糸まで安定した操作が可能です。また結膜や強膜の把持、トロカールの把持などにも使え用途が幅広くユーティリティな鑷子となっているのが特徴です。



段付



コリブリ鑷子
エクストラデリケート 0.25mm 段付

M-1750A 全長 78mm / 鉤幅 0.25mm ￥41,800 JAN:4547451041603

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001287 入 1

汎用性の高いやや幅広の直角型有鉤コリブリ鑷子。

シンプルなコリブリ鑷子。先端はやや幅広の直角型有鉤を採用しております。段付きのため、結紮も便利に行えます。

memo

PICK
UP



3D view



まぶたに優しく押し当て根元から確実に睫毛抜去できる決定版。 その名も「まつげのQ太郎」

先端に設けたセレーションが、涙液を逃がしつつ、睫毛をしっかりと挟みこむため、滑りやすい細い睫毛も、滑らずに簡単に抜去することが可能です。
また、こだわりの丸みを帯びた先端をまぶたに優しく押し当てることで、根元から確実に抜去することも可能です。
術者にも患者さまにおいても、ストレスの無い抜去をサポートする睫毛鑷子の決定版です。

ご考案者 田島 康弘 先生（埼玉県 吉川市 たじま眼科・形成外科）コメント

「逆さ睫毛が抜けなくて、イライラしていませんか？あなたのイライラ解消します！スリットから見える逆さまつげは毛が3本。掴んで抜けば、ドロンバとなります。新発想の睫毛抜きです。一度に複数の睫毛を掴めます。先端に睫毛を挟んでも切れ難いギザを先端方向に取り付けました。（固定概念を打ち破ります。）眉間や指の細い毛を挟んでみてください。このギザの良さが実感できます。

【使用方法】

本体の滑り止め部分を持ちます。睫毛に対して横並行に使用し、いつものように引っ張り抜きます。

【特徴】

- ① 先端に丸みをもたせる事により、頬に押し付けても痛みがでません。
- ② 先端を下にして立てても、ギザは先端までありませんので、長期使用でも噛み合わせが悪くなりやすいです。
- ③ 一度に複数の睫毛が抜けます。

是非、霰粒腫ピンセット（おともくん）と共に外来診療にお役立てください。」

睫毛鑷子 まつげのQ太郎

M-2211 全長 103.0mm / 先端 4.5mm ￥40,000 JAN:4547451328520

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001965 入 1



3D view



Quick
Service

Best
Seller

S-325

圧倒的な人気を誇る睫毛鑷子の代名詞的商品。

発売以来圧倒的な人気を誇るバナ式の睫毛鑷子。テンポラルアプローチスタイルでの把持に適した形状をしているため、操作時の視認性にも優れ、患者さまの余計な不安感も軽減することが可能です。把持の際は面でびったりと捉えるため、軽い力でもノンスリップの把持が可能であり、抜去時の痛みも最小限に抑えることが可能です。

ボーブル氏睫毛鑷子

S-325 - 全長 100mm / 先端 0.5mm ￥45,000 JAN:4547451043744

S-325F ミクロファイン 全長 100mm / 先端 0.3mm ￥50,000 JAN:4547451048367

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001196 入 1



Quick
Service

ボーブル氏睫毛鑷子 チタニウム

DS-325TC 全長 110mm / 先端 0.5mm ￥66,000 JAN:4547451320845

材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048000952 入 1

大人気ボーブル氏睫毛鑷子のハイエンドモデル。

圧倒的な人気を誇る S-325 ボーブル氏睫毛鑷子のチタニウムモデル。テンポラルアプローチスタイルの使い勝手は勿論、先端にはイナミ独自のタングステンカーバイド加工が施されており、よりノンスリップな睫毛抜去を実現することに成功しました。患者さまの負担もより軽減され、ハイエンドモデルとしての性能を発揮いたします。

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ



view



ボーブル氏睫毛鑷子ツイストヒンジ

S-325TH 全長 100mm / 先端 0.5mm ￥36,000 JAN:4547451312819

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001501 入 1

低価格とタフネスが魅力のボーブル氏睫毛鑷子。

先端開閉部根元のヒンジ部にひねりを加え、ツイスト型にデザインしました。このツイストヒンジは、長期間継続的に使用した際に懸念されるヒンジ部の緩みによる先端のズレなどのかみ合わせ不良を予防する優れた耐久性を発揮いたします。



ゴルペン結紮・睫毛鑷子

DS-008GO 全長 78mm / 先端 0.5mm ￥44,000 JAN:4547451325185

材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000971 入 1

小さな動作で微細な操作も簡単にこなすスマートな睫毛鑷子。

操作時の手ブレを防止するため、器具の開きを最小限に抑え、最小の動作での把持が出来るよう設計しました。また、イナミオリジナルのタングステンカーバイド加工により、より一層滑らない先端も実現しております。素早くそして微細な操作性、力強さを併せ持つ、ゴールドのチタニウムボディの存在感に負けないスマートな睫毛鑷子です。

Quick
Service

コストパフォーマンスが魅力のシンプルで使いやすい睫毛鑷子。

ご考案者 小林 茂樹 先生（仙台市 青葉区 小林眼科医院）コメント

「昭和初期にトラコーマ治療に使用された越智式魚皮結膜擦過器に発想を得て、把持部内面全体にタングステンカーバイド加工を施すとともに把持部全体が同時に閉じることに、脂肪や涙液による滑りを解消し、細く、短い睫毛もストレスなく、容易に除去可能とした。また、結紮や抜糸に対しても有効にした。」

小林氏結紮・睫毛鑷子

M-008 全長 85mm / 先端 0.6mm ￥30,000 JAN:4547451043751

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001771 入 1



バラッカー氏睫毛鑷子

S-327 全長 105mm / 先端 0.6mm ￥26,000 JAN:4547451043751

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001059 入 1

使いやすくシンプルで低価格な睫毛鑷子。

先端はテンポラルアプローチスタイルで、面で把持することが可能な理想的な睫毛鑷子。シンプルな操作性が人気のコストパフォーマンスモデルです。

Quick Service



ドルフィン型 マイクロ睫毛鉗子

M-1615 全長 105mm / 先端 0.5mm ￥26,000 JAN:4547451320128

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000455 入 1



指のポジショニングが便利なシンプルな睫毛鉗子。

先端はテンポラルアプローチスタイルで面で把持することが可能な理想的な睫毛鉗子。ハンドルは指のポジショニングが便利な丸窓式を採用しております。

Quick Service

Best Seller



ED view

結膜用・縫合鉗子

KI-21 スタンダード 全長 100mm / 先端 0.5mm ￥25,000 JAN:4547451041177

KI-22 デリケート 全長 100mm / 先端 0.3mm ￥26,000 JAN:4547451041184

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001281 入 1



伝統的な湖崎ハンドル式のロングセラー睫毛鉗子。

シンプルで伝統的な湖崎ハンドル式の睫毛鉗子。睫毛除去以外にも結膜把持などユーティリティーに活躍します。発売以来根強い人気を誇るロングセラーモデルです。

Quick Service

Best Seller



ED view

K.I. 式スリットランプ用 ノングレア睫毛鉗子


KI-13 全長 93mm / 先端 0.8mm ￥23,000 JAN:4547451034612

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001959 入 1

微細なオペレーションを実現するマイクロピックタイプ。

先端はピックスタイルの睫毛鉗子としては非常に微細なサイズ設計となっております。よりピンポイントの微細なオペレーションが可能となります。ハンドルは、グリップ時の指に吸いつくようなフィット感を重視したデザインを採用しております。

Quick Service

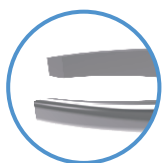

グラドゥル氏睫毛鉗子

S-324 全長 97mm / 先端 1.5mm ￥33,000 JAN:4547451034612

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000402 入 1



軽い力でしっかりと把持できるピックスタイルの睫毛鉗子。

バネ式、ピックタイプの睫毛鉗子。軽い力で強い把持力を生む構造となっております。やや正面から、指でつまみにいくようなアプローチのスタイルです。

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜


外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

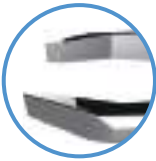

3D view



小川氏睫毛鑷子

S-320 全長 97mm / 先端 2.0mm ￥8,000 JAN:4547451043737
材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000158 入 1

指先でつまむ感覚で操作できる睫毛鑷子。

指先操作を表現する睫毛鑷子。折り曲げ型の構造によって生まれる独特のテンションとピック型の先端により、まさに指先でつまむかのようなフィーリングで操作することが可能です。

memo

Quick Service

鑷子

剪刀

開眼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイザブル

AtoZ



view



眼球固定鑷子 直

S-360S 止付 全長 110mm ￥32,000 JAN:4547451043829

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001282 入 1

眼球固定はもちろん、給水スポンジなどの固定にも最適。

3本の爪でしっかりと固定することが可能なユーティリティー固定鑷子。給水スポンジなどの消耗品の固定用としても便利な汎用性の高いベストセラー商品です。



view



眼球固定鑷子 曲

S-360C 止付 全長 110mm ￥33,000 JAN:4547451043812

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001282 入 1

S-360Sの曲ユーザーモデル。

ユーティリティー固定鑷子として人気の高いS-360Sの曲ユーザーモデルです。



グレフェー氏固定鑷子

S-361 止付 全長 110mm ￥25,000 JAN:4547451043836

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001283 入 1

幅広の先端と細かいセレーションで確実に固定。

先端は幅広で細かい爪で把持する構造となっております。

Quick Service

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイザブル

AtoZ

memo

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル



マイクロ止血鉗子

MH-108 無鉤 直 全長 125mm ￥13,200 JAN:4547451042709

材 SUS 薬 クラス I JMDN 10861001 屈 13B1X00048001135 入 1

幅広く活躍する便利な万能鉗子。

診察室や手術室において、あらゆる用途にて活用できる万能鉗子。




マイクロ止血鉗子 小

MH-108D 無鉤 直 全長 98mm ￥13,500 JAN:4547451042716

材 SUS 薬 クラス I JMDN 10861001 屈 13B1X00048001135 入 1

小回りの利く小サイズ万能鉗子。


小サイズの万能鉗子。小回りが利いて便利です。

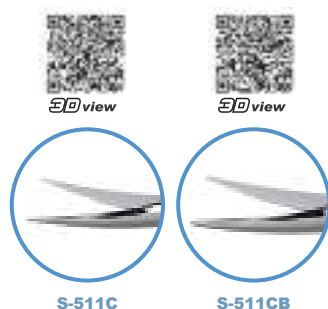

スプリングハンドル式剪刀 反

S-511C	鋭	全長 105mm / 刃先 8mm	¥46,000	JAN:4547451044055
S-511CB	鈍	全長 105mm / 刃先 8mm	¥46,000	JAN:4547451327059

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 届 13B1X00048001319 入 1

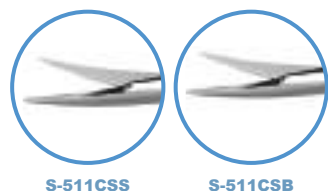

スプリングハンドル式剪刀 反 ショート

S-511CSS	鋭	全長 102mm / 刃先 7mm	¥47,000	JAN:4547451327066
S-511CSB	鈍	全長 102mm / 刃先 7mm	¥47,000	JAN:4547451327073

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 届 13B1X00048001885 入 1



スプリングハンドル式剪刀 直

S-511S	鋭	全長 105mm / 刃先 8mm	¥44,000	JAN:4547451324062
---------------	---	-------------------	---------	-------------------

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 届 13B1X00048001319 入 1



マイクロウエストコット剪刀 反 鈍

M-520	鈍	全長 100mm / 刃先 5mm	¥38,000	JAN:4547451320166
--------------	---	-------------------	---------	-------------------

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 届 13B1X00048001566 入 1

Quick Service Best Seller



ベストセラーのユーティリティーマイクロ剪刀。

汎用性の高さと使い勝手の良さで圧倒的な人気を誇るマイクロ剪刀の代名詞的商品。組織の切開から、抜糸、ドレープや給水スポンジ、ガーゼなどの消耗品の切開まで、マイクロサージャリーにおいてなくてはならない存在です。鋭と鈍の2種類からお選びいただけます。

Best Seller



マイクロ手術における最適なバランスにて設計された剪刀。

現在のマイクロ手術において、あらゆる組織の切開をより微細に確実に操作できるよう、刃先のサイズを研究しました。S-511Cの汎用性は保ちつつ、より細かい操作性に特化したマイクロ剪刀です。

Quick Service



ベストセラー S-511C の直タイプ。

ベストセラー S-511Cの直タイプ。汎用性の高さと使い勝手の良さで人気を誇ります。組織の切開から、抜糸、ドレープや給水スポンジ、ガーゼなどの消耗品の切開まで、マイクロサージャリーにおいてなくてはならない存在です。

Quick Service



腱切除にも適した肉厚刃先のスタンダード剪刀。

コストパフォーマンスに優れた汎用性の高いスタンダード剪刀。肉厚に設計された刃先が腱切除においても安定した切れ味と操作性を発揮致します。先端は周囲の組織に対して安全な鈍先タイプを採用しております。

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部分

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

Quick
Service

Best
Seller



マイクロサージャリー剪刀 反 鋭

M-54RC 鋭 全長 100mm / 刃先 5mm ￥52,000 JAN:4547451042075

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048001298 入 1

シャープな強湾曲刃が特長のマイクロ剪刀。

シャープな強湾曲刃が特長のマイクロ剪刀。顕微鏡下における視認性に優れるとともに、より微細なオペレーションを可能にします。



深水式マルチ剪刀

受 **M-2191** 全長 104mm / 刃先 5mm / 把持面 2mm ￥48,000 JAN:4547451325147

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048001772 入 1

1人2役で助手要らずの剪刀・鑷子が複合したハイブリット商品。

先端に剪刀と鑷子2つの要素を併せ持つ複合型器具。糸を切る(剪刀)、結紮する(鑷子)などの作業をこの1本でこなせるため、非常に効率的です。助手無しの手術においては特に重宝します。



湖崎氏マイクロサージャリー用二段剪刀

KI-50 鋭 全長 110mm / 刃先 5mm ￥47,000 JAN:4547451036333

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048001504 入 1

薄い刃と厚い刃を併せ持つハイブリット商品。

一本で薄い組織と厚い組織の両方を切ることができます。刃の先端は薄くなっており、結膜・虹彩などのデリケートな組織や糸の切断に適しています。刃の根部は切断力が強く、角膜・強膜などを容易に切断することが可能です。



ウェッケル剪刀 デリケート型

S-613 鈍 全長 96mm / 刃先 7mm ￥48,000 JAN:4547451044192

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048001309 入 1

よりファインな虹彩切除が可能な鈍先・アングル剪刀。

脱出した虹彩の切除に便利な剪刀。安全面を考慮し鈍先となっております。ファインな刃先がより繊細なオペレーションを可能とします。

Quick
Service

Quick
Service

Quick Service Best Seller
M-50R M-50R



永田氏マイクロサージャリー用デリケート剪刀

M-50R	-	鋭	全長 80mm / 刃先 6mm	¥ 50,000	JAN:4547451037453
受 M-50RF	ファイン	鋭	全長 80mm / 刃先 6mm	¥ 55,000	JAN:4547451313168
材 SUS	薬 クラス I	JMDN	35327001	届 13B1X00048000133(M-50R)	入 1
				13B1X00048000569(M-50RF)	



シュレム氏管切開に最適化された通常モデルと小切開創からの内眼部切開に適したスリムヒンジタイプ。

M-50R の刃先とヒンジ部は、線維柱帯切開術（トラベクトミー）におけるシュレム氏管切開時の安全性と操作性を研究しデザインされました。ファインタイプの M-50RF は、小切開創からもよりスムーズな内眼部操作が可能となるように、ヒンジ部を更にスリムにしております。

Quick Service Best Seller



EDview

ヴァナス氏水晶嚢切開剪刀 反

S-615C						鋭	全長 79mm / 刃先 3mm		¥ 36,000	JAN:4547451320180	
材	SUS	薬	クラス I	JMDN	35327001	届	13B1X00048001502	入	1		



小切開創対応の操作性に優れたベストセラーマイクロ剪刀。

前眼部の眼内組織用のマイクロサージャリー剪刀です。微細な部位の切除に使用できます。スリムヒンジ設計のため、小切開創からのアプローチが可能です。水晶嚢切開の他に虹彩、結膜、強膜の切開にもご使用いただけます。またヒンジ部のくびれを切開創に固定することによって、創の拡大を防ぐことが期待できます。

Quick Service



ヴァナス氏水晶嚢切開剪刀 直

S-615S	鋭	全長 79mm / 刃先 3mm	¥ 34,000	JAN:4547451320203
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 35327001	届 13B1X00048001502	入 1



小切開創対応の直型マイクロ剪刀。

ベストセラーの S-615C の直刃タイプ。

Quick Service



西氏エンドカプスラー剪刀 反

受	M-167C	鋭	全長 86mm / 刃先 7mm	¥ 38,500	JAN:4547451031864
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 35327001	届 13B1X00048000129
					入 1



CCC のきっかけづくりに適した刃先が特長の小切開創対応剪刀。

小切開創対応の内眼部切開に適したスリムヒンジ型マイクロ剪刀です。先端は水晶嚢切開時のきっかけづくりが容易となるよう、刃先端部にビック感覚で使用できる反りを加えております。

鑷子

剪刀

開眼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイ

AtoZ

Quick Service Best Seller



S-510CS



S-510CB



view



反剪刀

S-510CS 鋭 全長 110mm / 刃先 21mm ￥9,000 JAN:4547451048770

S-510CB 鈍 全長 110mm / 刃先 21mm ￥9,000 JAN:4547451048763


材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 届 13B1X00048000159 入 1

コストパフォーマンスに優れたシンプルで使いやすい反剪刀。


コストパフォーマンスに優れた板状ヒンジ構造のシンプルな反剪刀。あらゆる用途にお使いいただける汎用性が魅力です。先端が鋭タイプと鈍タイプの 2 種類からお選びいただけます。

Quick Service Best Seller

S-510SS

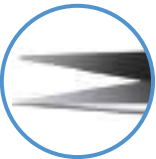

S-510SS

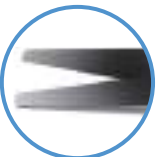

S-510SB



view



直剪刀


S-510SS 鋭 全長 110mm / 刃先 21mm ￥9,000 JAN:4547451048794

S-510SB 鈍 全長 110mm / 刃先 21mm ￥9,000 JAN:4547451048787

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 届 13B1X00048000160 入 1

コストパフォーマンスに優れたシンプルで使いやすい直剪刀。

コストパフォーマンスに優れた板状ヒンジ構造のシンプルな直剪刀。あらゆる用途にお使いいただける汎用性が魅力です。先端が鋭タイプと鈍タイプの 2 種類からお選びいただけます。

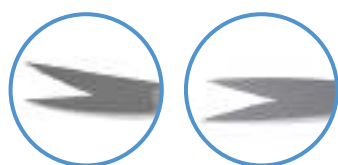Quick
Service
M-59RC

M-59RC

M-59RS

ボン大学式デリケート剪刀

M-59RC 反・鋭 全長 90mm / 刃先 8mm ￥19,000 JAN:4547451042174

M-59RS 直・鋭 全長 90mm / 刃先 8mm ￥17,600 JAN:4547451042181

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048001304 入 1



小回りの効くコンパクトサイズのマイクロ剪刀。

マイクロサージャリー用剪刀として全体的に小型化されております。直と反タイプからお選びいただけます。



視神経剪刀 ストロングカーブ（強湾曲）

S-515C 鈍 全長 115mm / 刃先 21mm ￥35,000 JAN:4547451044093

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048001270 入 1

眼球のカーブに沿うように設計された刃で視神経切断がスムーズ。

先端のカーブは、眼球のカーブに沿うようにデザインされました。そのため、眼球摘出術の際に、視神経切断がよりスムーズに行うことが可能です。



S-520S

S-520B

ウエストコット氏腱切除剪刀 反

受 **S-520S** 鋭 全長 110mm / 刃先 10mm ￥53,000 JAN:4547451044116

受 **S-520B** 鈍 全長 110mm / 刃先 10mm ￥53,000 JAN:4547451044109

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048001107 入 1



腱切除に最適化された肉厚で切断力のある剪刀。

先端は細くデザインされていますが刃は肉厚なため強い切断力があり、眼筋の切断などに適しています。また刃の峰にあたる部分は丸みを帯びた形状になっています。先端は鋭と鈍の2種類からお選びいただけます。鈍先は眼球と眼筋の間に刃を挿入する際に安全です。

鑷子

剪刀

開眼器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイボード

AtoZ

40


患者さまと術者の視点に基づいた「マイクロ開瞼器シリーズ」

コンパクトで軽量、そして平行開瞼を追及したマイクロ開瞼器シリーズ。患者様においてはより優しく、術者においてはよりスムーズで安定的な術野の確保が可能となりました。

オープンリング型では、弛緩した皮膚などをしっかりと固定することが可能なため、手術野を確保するのに非常に有用です。また、12 時方向からの手術操作にも妨げにならないデザインとなっております。

マイクロ開瞼器 オープンリング型 小

要	M-901S	両眼用	開瞼部 10mm	¥ 38,500	JAN:4547451325154
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 35349001	屈 13B1X00048001777 入 1

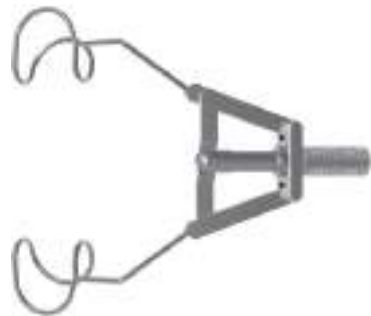

患者さまと術者の視点に基づいた「マイクロ開瞼器シリーズ」

コンパクトで軽量、そして平行開瞼を追及したマイクロ開瞼器シリーズ。患者様においてはより優しく、術者においてはよりスムーズで安定的な術野の確保が可能となりました。

オープンリング型では、弛緩した皮膚などをしっかりと固定することが可能なため、手術野を確保するのに非常に有用です。また、12 時方向からの手術操作にも妨げにならないデザインとなっております。

マイクロ開瞼器 オープンリング型

M-901	両眼用	開瞼部 14mm	¥ 42,000	JAN:4547451327080
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 35349001 屈 13B1X00048001777 入 1



PICK UP


患者さまと術者の視点に基づいた「マイクロ開瞼器シリーズ」

コンパクトで軽量、そして平行開瞼を追及したマイクロ開瞼器シリーズ。患者様においてはより優しく、術者においてはよりスムーズで安定的な術野の確保が可能となりました。

オープンワイヤー型は、2点支持のワイヤータイプであるため、12 時方向の手術操作に最も妨げにならないデザインとなっております。

マイクロ開瞼器 オープンワイヤー型

M-905	両眼用	開瞼部 13mm	¥ 40,000	JAN:4547451327097
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 35349001 屈 13B1X00048001777 入 1

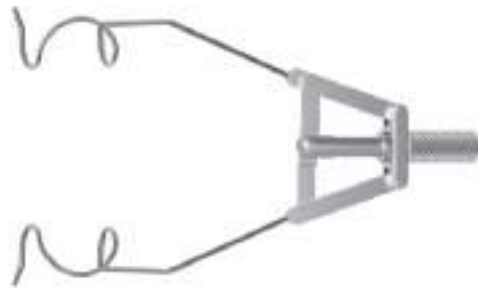

PICK UP

患者さまと術者の視点に基づいた「マイクロ開瞼器シリーズ」

コンパクトで軽量、そして平行開瞼を追及したマイクロ開瞼器シリーズ。患者様においてはより優しく、術者においてはよりスムーズで安定的な術野の確保が可能となりました。

プレート型は、睫毛や弛緩した皮膚などをしっかりと巻きこむことが可能です。眼瞼縁と手術野の接触がプレートで遮蔽されるため、感染予防効果も期待できます。硝子体注射や外眼部の外来小手術等にお勧めです。

マイクロ開瞼器 プレート型

M-910	両眼用	開瞼部 13.5mm	¥ 42,000	JAN:4547451327103
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 35349001 屈 13B1X00048001777 入 1



PICK UP

開瞼力と広い術野の確保が可能なプレートタイプ。

スライディング方式で開閉し、横のネジで任意に開瞼幅を調節できます。開瞼力が強く術野を広く確保できるのが特長です。斜視手術や強膜内陷術などの眼球深部の手術には特に有用と評価されております。

開瞼部は、プレートタイプで、睫毛や弛緩した皮膚などをしっかりと巻きこむことが可能です。眼瞼縁と手術野の接触がプレートで遮蔽されるため、感染予防効果も期待できます。外眼部の外来小手術等にお勧めです。

バンガーター氏開瞼器 大

S-813R	右眼用	開瞼部 14mm	¥ 24,000	JAN:4547451035671
S-813L	左眼用	開瞼部 14mm	¥ 24,000	JAN:4547451035664

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35349001 屈 13B1X00048001682 入 1



Best Seller

小児や狭い眼瞼幅に適した小サイズプレートタイプ。

S-813 の小サイズ。

バンガーター氏開瞼器 小

S-814R	右眼用	開瞼部 11mm	¥ 24,000	JAN:4547451035695
S-814L	左眼用	開瞼部 11mm	¥ 24,000	JAN:4547451035688

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35349001 屈 13B1X00048001682 入 1



顕微鏡下での反射防止効果で良好な視界を確保。

スライディング方式で開閉し、横のネジで任意に開瞼幅を調節できます。開瞼力が強く術野を広く確保できるのが特長です。斜視手術や強膜内陷術などの眼球深部の手術には特に有用と評価されております。

開瞼部は、睫毛や弛緩した皮膚などもしっかりと巻きこめるプレートタイプを採用し、顕微鏡下でも良好な視界を確保できるよう反射防止処理を施しております。

開瞼器 ノングレア 大

KI-60	右眼用	開瞼部 14mm	¥ 25,000	JAN:4547451030164
KI-61	左眼用	開瞼部 14mm	¥ 25,000	JAN:4547451030171

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35349001 屈 13B1X00048001490 入 1



開瞼力と広い術野の確保が可能なオープンワイヤータイプ。


スライディング方式で開閉し、横のネジで任意に開瞼幅を調節できます。開瞼力が強く術野を広く確保できるのが特長です。斜視手術や強膜内陷術などの眼球深部の手術には特に有用と評価されております。

開瞼部は、オープンワイヤー型で、特に 12 時方向での引っかかりが少なく、スムーズなオペレーションが可能です。

バンガーター氏開瞼器 オープン型 大

M-813R	右眼用	開瞼部 14mm	¥ 26,000	JAN:4547451032960
M-813L	左眼用	開瞼部 14mm	¥ 26,000	JAN:4547451032953

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35349001 屈 13B1X00048001682 入 1

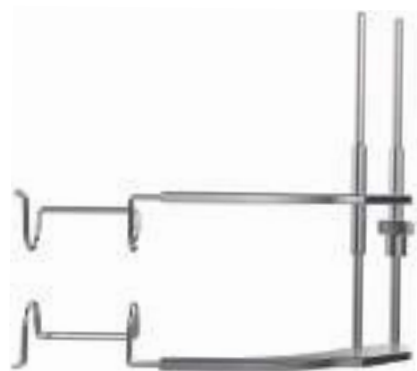

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

小児や狭い瞼幅に適した
小サイズオープンワイヤータイプ。

M-813 の小サイズ。

バンガーター氏開瞼器 オープン型 小

M-814R	右眼用	開瞼部 10.5mm	¥ 26,000	JAN:4547451032984
M-814L	左眼用	開瞼部 10.5mm	¥ 26,000	JAN:4547451032977
材 SUS 薬	クラス I	JMDN 35349001	届 13B1X00048001682	入 1




細目の患者さまへの装着が簡単、スムーズ。

細目の患者さまへの着用がスムーズに行えることを目的に開発した商品です。着用前に、上下の開瞼部が重なり合うまでクローズさせることが可能です。そのため、細目の方にも無理せず簡単に装着ができるため、患者さまの不安やストレスを少しでも軽減させることが可能です。

バンガーター氏開瞼器細目用 大

M-813NR	右眼用	開瞼部 14mm	¥ 31,000	JAN:4547451045366
M-813NL	左眼用	開瞼部 14mm	¥ 31,000	JAN:4547451045359
材 SUS 薬	クラス I	JMDN 35349001	届 13B1X00048001682	入 1

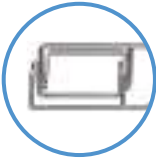


細目の患者さまへの装着が簡単、スムーズ。

M-813N の小サイズ。

バンガーター氏開瞼器細目用 小

M-814NR	右眼用	開瞼部 10mm	¥ 31,000	JAN:4547451045380
M-814NL	左眼用	開瞼部 10mm	¥ 31,000	JAN:4547451045373
材 SUS 薬	クラス I	JMDN 35349001	届 13B1X00048001682	入 1

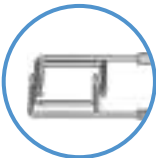

memo


Best
Seller

軽量でシンプルな開瞼器。

軽量で、眼球への圧迫も少ないスプリングで開閉するタイプの開瞼器です。使いやすく汎用性の高さも特長です。開瞼部はクロースドタイプで、ワイヤー形状は非常にシンプルなデザインとなっております。



SD view

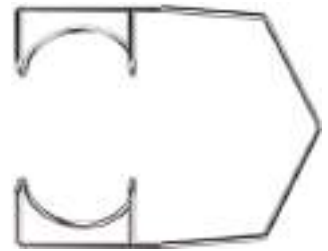

バラッケー氏開瞼器 小

M-135 両眼用 開瞼部 13mm ￥6,000 JAN:4547451041436

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35349001 屈 13B1X00048000597 入 1


長時間着用にも安定した
開瞼力を発揮する強度ワイヤータイプ。

軽量で、眼球への圧迫も少ないスプリングで開閉するタイプの開瞼器です。使いやすく汎用性の高さも特長です。開瞼部はクロースドタイプで、ワイヤー形状は非常にシンプルなデザインとなっております。硝子体手術などの長時間着用する場合に、安定した開瞼力を発揮するよう、通常のバネ式開瞼器と比較し、太いワイヤーを採用しております。

大島式開瞼器 硝子体手術用

受 **M-135S** 両眼用 開瞼部 16.5mm ￥10,000 JAN:4547451031321

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35349001 屈 13B1X00048000153 入 1

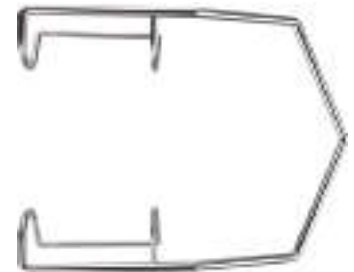長時間着用にも安定した
開瞼力を発揮する強度ワイヤーの小タイプ。

M-135Sの小タイプ。

大島式開瞼器 硝子体手術用 小

M-135SS 両眼用 開瞼部 13.5mm ￥6,000 JAN:4547451031338

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35349001 屈 13B1X00048000153 入 1

開瞼抵抗に対応する
小児などに適した強度ワイヤータイプ。

軽量で、眼球への圧迫も少ないスプリングで開閉するタイプの開瞼器です。使いやすく汎用性の高さも特長です。開瞼部はクロースドタイプで、ワイヤー形状は非常にシンプルなデザインとなっております。ワイヤーにひねりを加えることにより、強度を高めております。小児や未熟児などの手術において、開瞼に抵抗する場合などに優れたパフォーマンスを発揮します。



SD view



武田氏開瞼器

M-135T 両眼用 開瞼部 9mm ￥6,000 JAN:4547451031345

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35349001 屈 13B1X00048000237 入 1

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼病
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスプレイザブル
- AtoZ

フェイコ操作がスムーズなオープンワイヤータイプ。

軽量で、眼球への圧迫も少ないスプリングで開閉するタイプの開瞼器です。使いやすいと汎用性の高さも特長です。開瞼部はオープンワイヤータイプで、12時方向からの操作において全く影響されない形状となっております。



ワイヤー開瞼器 オープン型

M-135A	両眼用	開瞼部 12mm	¥ 6,000	JAN:4547451031208
材 SUS	薬	クラス I	JMDN 35349001	届 13B1X00048001524 入 1

スタンダードなバネ式プレートタイプ。

バネ式プレートタイプの開瞼器。睫毛や不潔部位を広範囲にプレートでカバーします。また、通常のバネ式開瞼器と比較しやや太めのワイヤーを採用しているため、ややハードなテンションの開瞼力を生み出します。外来小手術はもちろん、外来における硝子体注射の開瞼にも最適です。



ワイヤー開瞼器 プレート型

M-135W	両眼用	開瞼部 13.5mm	¥ 9,500	JAN:4547451327226
材 SUS	薬	クラス I	JMDN 35349001	届 13B1X00048001891 入 1

ベストセラーのストッパー付き
スライディング開瞼器。

スライディング方式で開瞼幅を調整でき、やや強めの開瞼力が特長です。開瞼部はオープンリングタイプで、弛緩した皮膚などをしっかりと固定することが可能なため、手術野を確保するのに非常に有用です。また、12時方向からの手術操作にも妨げにならないデザインとなっております。開瞼操作時の器具の分離などの防止や、開瞼力を維持するためのストッパーを設けております。

バラッケー氏スライディング開瞼器
オープンリング型 ストッパー付き

M-2021	両眼用	開瞼部 14.5mm	¥ 16,500	JAN:4547451032083
材 SUS	薬	クラス I	JMDN 35349001	届 13B1X00048001507 入 1

Quick Service

Best Seller



memo

耳側アプローチは勿論、12 時方向からも便利。

着用時はアーム部が鼻側になり、耳側がオープンとなるタイプです。軽量で、眼球への圧迫も少ないスプリングでの開閉式で使いやすい汎用性の高さが特長です。
開瞼部はオープンワイヤータイプで、12 時方向からの操作において影響されない形状となっております。

永原式テンポラルアプローチ開瞼器 オープン型

受 **M-236A** 両眼用 開瞼部 13mm ￥8,400 JAN:4547451032144
材 SUS 薬 クラス I JMDN 35349001 届 13B1X00048000308 入 1

クローズワイヤータイプの耳側切開用開瞼器。

着用時はアーム部が鼻側になり、耳側がオープンとなるタイプです。軽量で、眼球への圧迫も少ないスプリングでの開閉式で使いやすい汎用性の高さが特長です。
開瞼部はクローズタイプとなっております。

永原式テンポラルアプローチ開瞼器 クローズ型



受 **M-236B** 両眼用 開瞼部 13mm ￥9,600 JAN:4547451032151
材 SUS 薬 クラス I JMDN 35349001 届 13B1X00048000309 入 1

プレートタイプの耳側切開用開瞼器。

着用時はアーム部が鼻側になり、耳側がオープンとなるタイプです。軽量で、眼球への圧迫も少ないスプリングでの開閉式で使いやすい汎用性の高さが特長です。
開瞼部はプレートタイプで、眼瞼縁と手術野の接触がプレートで遮蔽されるため、感染予防効果が期待できると同時に、視認性も優れております。

永原式テンポラルアプローチ開瞼器 プレート型

受 **M-236C** 両眼用 開瞼部 13.5mm ￥10,800 JAN:4547451032168
材 SUS 薬 クラス I JMDN 35349001 届 13B1X00048000310 入 1

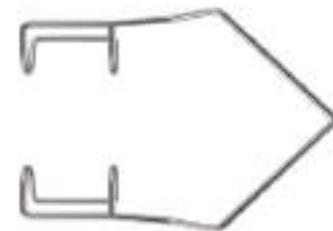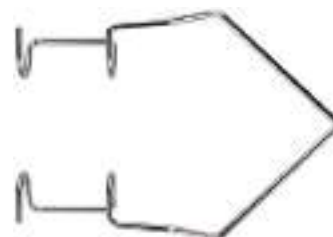

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ーラ

スパ
ー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品


サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

テンポラルアプローチ（耳側切開）用開瞼器

耳側切開時などテンポラルアプローチにて操作を行う際に、アーム部が操作の妨げにならないように耳側をオープンにするための開瞼器です。そのため、アーム部が通常の開瞼器とは異なり逆側に反りかえっており、着用時はアーム部が鼻側に固定されることになります。

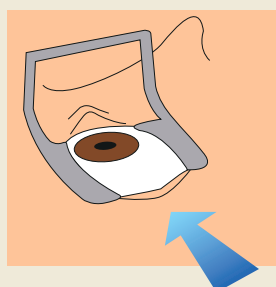

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼病
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスポーザブル
- AtoZ

左右でサイズの異なる未熟児用開瞼器。

未熟児検査など瞬目抵抗力を高めるため、開瞼力の強いスライドネジ固定タイプを採用しました。
開瞼鉤のサイズは右眼用と左眼用で異なるサイズを採用しております。非常に小型設計のため、反転させて使用することも可能ですので、両眼用として使用できます。

千葉大式未熟児用開瞼器

M-130R	右眼用	開瞼部 8mm	¥ 22,000	JAN:4547451031123
M-130L	左眼用	開瞼部 6mm	¥ 22,000	JAN:4547451031116
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 35349001	屈 13B1X00048000098	入 1



Best Seller

左右でサイズの異なる未熟児用開瞼器。

未熟児検査など瞬目抵抗力を高めるため、開瞼力の強いスライドネジ固定タイプを採用しました。
開瞼鉤のサイズは右眼用と左眼用で異なるサイズを採用しております。非常に小型設計のため、反転させて使用することも可能ですので、両眼用として使用できます。

江口氏未熟児用開瞼器

M-130AR	右眼用	開瞼部 7.5mm	¥ 22,000	JAN:4547451031109
M-130AL	左眼用	開瞼部 10mm	¥ 22,000	JAN:4547451031093
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 35349001	屈 13B1X00048000182	入 1



瞬目抵抗が強く、ストレスフリーな未熟児用開瞼器。

未熟児の開瞼中のストレスを少しでも軽減するため、軽量・コンパクト設計のワイヤー式を採用しました。また、通常タイプより太めのワイヤーを使用することにより、未熟児検査など瞬目抵抗力を高めております。

未熟児用ワイヤー開瞼器 8mm

M-751	両眼用	開瞼部 8mm	¥ 6,500	JAN:4547451032847
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 35349001	屈 13B1X00048000223	入 1




瞬目抵抗が強く、ストレスフリーな未熟児用開瞼器。

未熟児の開瞼中のストレスを少しでも軽減するため、軽量・コンパクト設計のワイヤー式を採用しました。また、通常タイプより太めのワイヤーを使用することにより、未熟児検査など瞬目抵抗力を高めております。

未熟児用ワイヤー開瞼器 6mm

M-752	両眼用	開瞼部 6mm	¥ 6,500	JAN:4547451032854
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 35349001	屈 13B1X00048000223	入 1



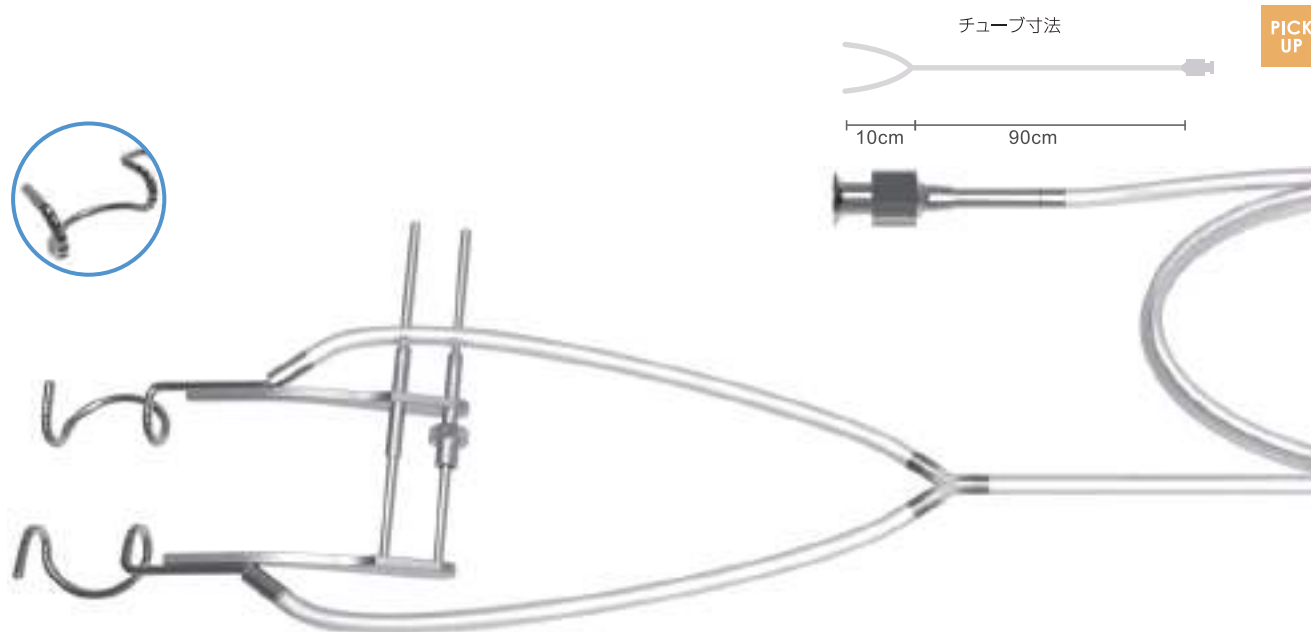

PICK UP

清水努氏 横スリット式吸引付開瞼器 バンガーター型

M-2900R	右眼用	開瞼部 14.5mm	¥ 72,000	JAN:4547451327127
M-2900L	左眼用	開瞼部 14.5mm	¥ 72,000	JAN:4547451327134

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35349001 届 13B1X00048001775 入 1


交換用パーツ

B-01-1	吸引開瞼器用チューブのみ (Y 字型)	¥ 3,600	JAN:4547451337218
B-02-1	吸引開瞼器用ロック基のみ	¥ 3,600	JAN:4547451337225

薬 クラス I JMDN 35349001 届 13B1X00048001886 入 1

結膜の吸引を最小限に抑える横スリット吸引孔付開瞼器。

ご考案者 清水 努 先生 コメント
「白内障手術時、結膜を従来品よりかなり吸わなくなり、結膜へのダメージを最小限に抑えることができます。」

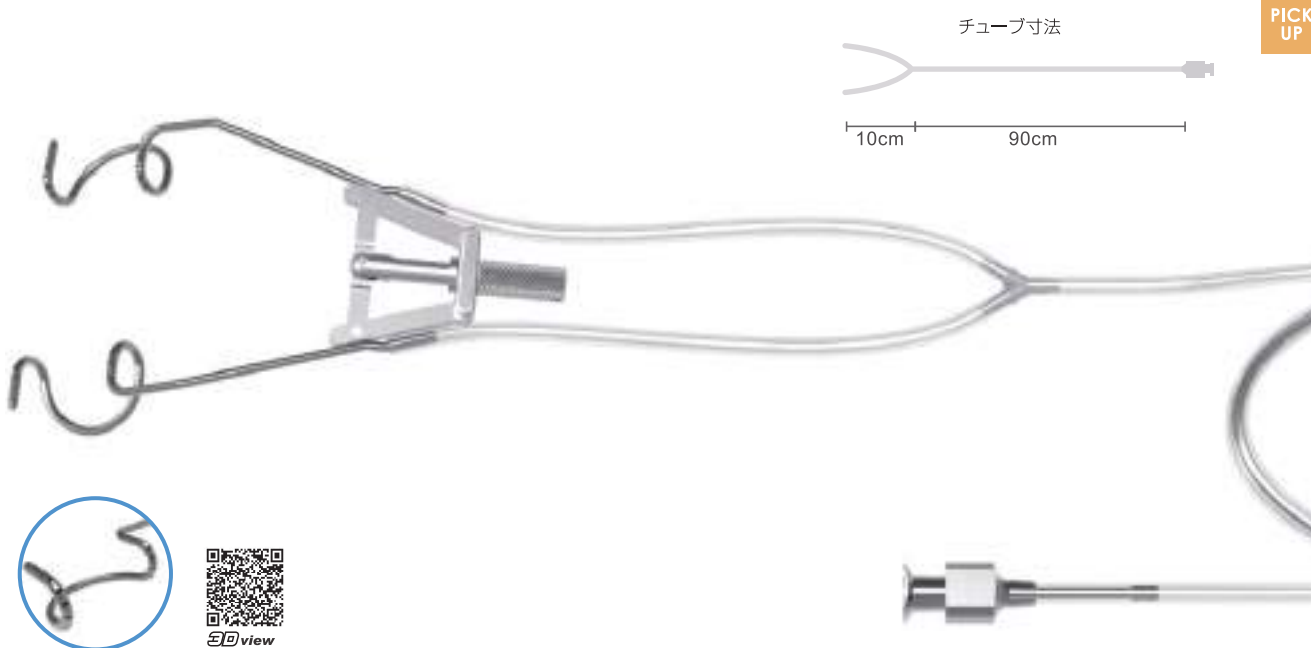

PICK UP

マイクロ開瞼器 横スリットタイプ 吸引付

M-951	両眼用	開瞼部 14.5mm	¥ 75,000	JAN:4547451327110
--------------	-----	------------	----------	-------------------

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35349001 届 13B1X00048001886 入 1

交換用パーツ

B-01-1	吸引開瞼器用チューブのみ (Y 字型)	¥ 3,600	JAN:4547451337218
B-02-1	吸引開瞼器用ロック基のみ	¥ 3,600	JAN:4547451337225

薬 クラス I JMDN 35349001 届 13B1X00048001886 入 1

結膜の吸引を最小限に抑える横スリット吸引孔付マイクロ開瞼器。

清水 努 先生ご考案の結膜の吸引を最小限に抑える横スリット吸引孔タイプを、人気の「マイクロ開瞼器」に採用いたしました。

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイ

AtoZ

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他

- 白内障
- 屈折矯正

- 網膜硝子体

- 緑内障

- 角膜


- 外眼部分

- 関連用品

- サージカルナイフ

- ディスプレイ

- AtoZ

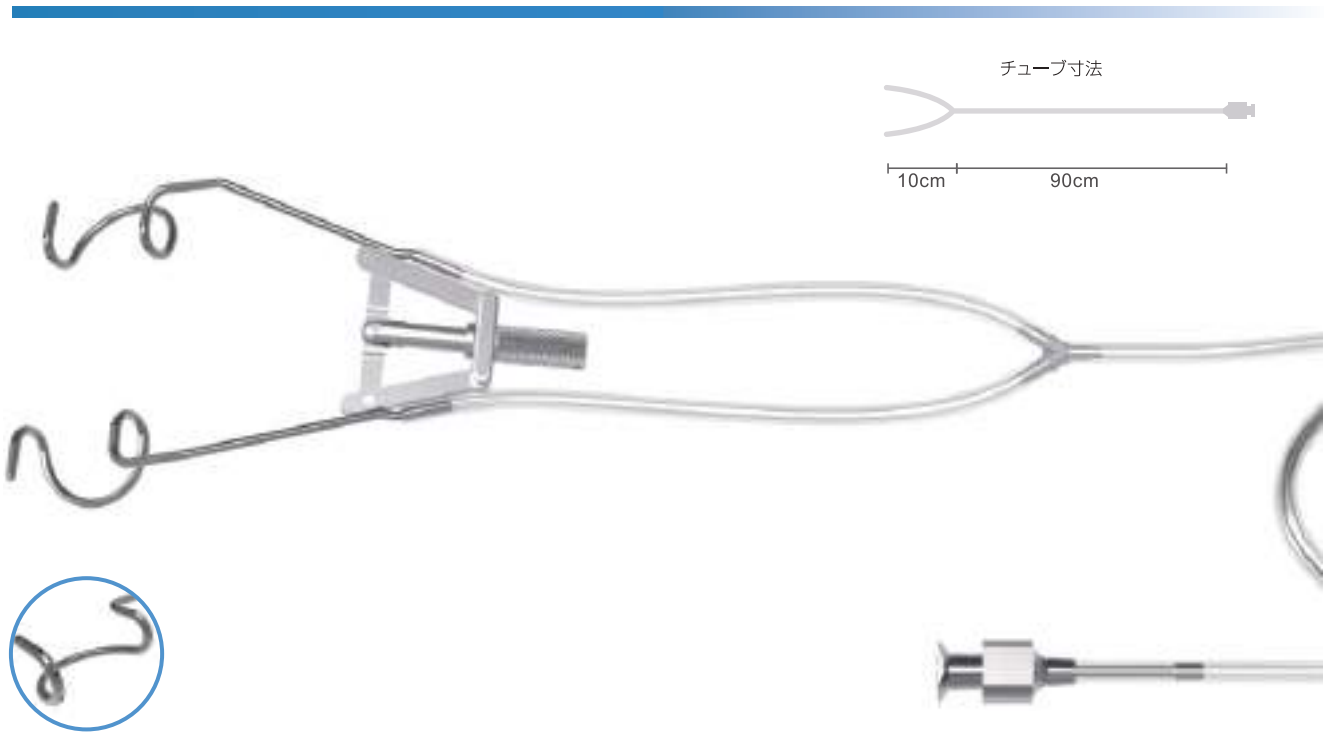

マイクロ開瞼器 吸引付

M-950	両眼用	開瞼部 14.5mm	¥ 66,000	JAN:4547451325161
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 35349001	届 13B1X00048001886	入 1

交換用パーツ

B-01-1	吸引開瞼器用チューブのみ（Y 字型）	¥ 3,600	JAN:4547451337218
B-02-1	吸引開瞼器用ロック基のみ	¥ 3,600	JAN:4547451337225
薬 クラス I	JMDN 35349001	届 13B1X00048001886	入 1

人気の「マイクロ開瞼器シリーズ」の吸引付き。

調節機能付きのネジ式タイプでありながら、軽量・コンパクトを徹底的に追及したハイブリットな開瞼器「マイクロ開瞼器シリーズ」の吸引付きタイプです。強い開瞼力と患者眼へのストレス軽減、そして術中の操作の妨げにならないコンパクト設計が魅力です。開瞼鉤に設けた 3 点の吸引ポートは、灌流液などを効率良く吸引し、常に視認性の良い手術をサポートします。



吸引付平行開瞼器

M-3000	両眼用	開瞼部 13.5mm	¥ 86,000	JAN:4547451321569
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 35349001	届 13B1X00048001353	入 1

交換用パーツ

B-01-1	吸引開瞼器用チューブのみ（Y 字型）	¥ 3,600	JAN:4547451337218
B-02-1	吸引開瞼器用ロック基のみ	¥ 3,600	JAN:4547451337225
薬 クラス I	JMDN 35349001	届 13B1X00048001886	入 1

スリットタイプの吸引孔が効率良い吸引を実現。

開瞼部が調節できるリーバermanタイプの吸引付き。開瞼鉤は 12 時方向からの操作や弛緩した皮膚などもしっかりと固定できるオープンリングタイプを採用しております。スリットタイプの吸引孔が灌流液などをスムーズに吸引し、常に視認性の良い手術をサポートします。



view

Quick
Service Best
Seller

湖崎氏マイクロサージャリー用持針器

KI-45 止付 全長 105mm / 先端 6mm ￥64,800 JAN:4547451041207

KI-46 止無 全長 105mm / 先端 6mm ￥60,000 JAN:4547451041214

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 届 13B1X00048001143 入 1

ロングセラーのマイクロ持針器定番モデル。

発売以来多くのユーザーから愛用されるマイクロ持針器の定番モデル。先端は 8-0 ～ 11-0 などの細めの縫合糸、針に適したファインタイプとなっております。また、小振りのフォルムがマイクロサージャリーでの微細なコントロールを可能にします。



逆マチ式持針器 Höfner

M-2062 止付 全長 104mm / 先端 6mm ￥62,000 JAN:4547451320012

受 M-2062N 止無 全長 104mm / 先端 6mm ￥59,000 JAN:4547451320272

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 届 13B1X00048000577(M-2062)
13B1X00048000668(M-2062N) 入 1

結紮時の引っかかりを解消するボックスヒンジ（逆マチ）モデル。

従来型では、一针縫合の結び作成時、持針器先端上の糸の輪から鑷子などで糸の片側を引き抜く際に、ヒンジ部に糸が絡まり、切れてしまうというリスクがありました。当モデルでは、ヒンジ部をボックスヒンジ（逆マチ）タイプに改良し、糸の引っかかりのリスクの解消に成功し、スムーズでストレスのない縫合作業を行うことが可能です。



マイクロ持針器 スパイラルピーク 止無

受 M-2078 止無 全長 102mm / 先端 7mm ￥80,000 JAN:4547451042029

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 届 13B1X00048001330 入 1

細い針から太い針まで、オールマイティなハイエンドモデル。

ヒンジ部にひねりを加えたツイスト構造にすることで、耐久性の強化に成功しました。ファインな先端は、顕微鏡下での視認性と細い針の把持、操作性に優れております。また、太めの針を把持した際にも、高強度ヒンジ構造によりしっかりと把持することが可能です。耐久性があり、マルチに活躍する 1 本です。

バラッカー氏持針器 止付 ストロングカーブ

S-725A 止付 全長 130mm / 先端 7mm ￥50,000 JAN:4547451044215

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 届 13B1X00048001145 入 1

奥目に便利な強湾先端モデル。

患者眼が奥目の場合、通常の曲タイプを使用していると、持針器の角度が保てないことや、針が垂直に保てないなどのケースが報告されております。当モデルでは、先端が強めのカーブ形状をしており、奥目の場合もスムーズに縫合することが可能です。



鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼薬

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ



上野式マイクロ持針器 止無

受	IM-2087N	止無	全長 119mm / 先端 7mm	¥ 72,000	JAN:4547451321583
材	Ti	薬	クラス I	JMDN 12726010	届 13B1X00048001242 入 1

微細な操作性を重視した万能持針器。

微細な先端が顕微鏡下における視認性と、8-0 ～ 11-0 などの細めの縫合糸、針の把持、操作に優れております。また先端には独自のタングステンカーバイド加工を施しており、ファインな糸をより優しく滑らずに把持することが可能です。板ハンドルは、不快なく握れるように部分的にやや丸みを持たせております。

Quick
Service

M-73



慈大式マイクロサージャリー持針器 ライトカーブ ノングレア

M-73	止付	全長 110mm / 先端 7mm	¥ 62,000	JAN:4547451042587
M-74	止無	全長 110mm / 先端 7mm	¥ 60,000	JAN:4547451042631
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 12726010 届 13B1X00048001153 入 1

先端が弱湾曲のマイクロサージャリー用持針器。

先端が通常の曲タイプと比べ、やや弱湾曲のマイクロサージャリー用持針器です。8-0 ～ 11-0 の細い縫合糸、針の把持、操作に優れた微細な先端サイズとなっております。



新潟大学マイクロショート持針器 止無 逆マチ式

M-301R	止無	全長 98mm / 先端 8mm	¥ 45,000	JAN:4547451320142
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 12726010 届 13B1X00048001153 入 1

結紮時の引っかかりを解消するボックスヒンジ（逆マチ）モデル。

結紮の際に、ヒンジ部での糸の引っかかりのリスクを解消したボックスヒンジ（逆マチ）モデル。板ハンドル構造のため、ラウンドハンドルではやや操作しにくいというユーザーに適しております。またショートハンドルにより小回りの利く操作性も特長です。



バラッケー氏持針器 ショートモデル

M-739R	止付	全長 100mm / 先端 8mm	¥ 61,000	JAN:4547451042624
M-738R	止無	全長 102mm / 先端 8mm	¥ 56,000	JAN:4547451042617
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 12726010 届 13B1X00048001333 入 1

操作性のよいバランスのとれた持針器。

小回りの効くやや小振りなハンドルと、ファインな先端は、マイクロサージャリーに適したバランスのとれた形状となっております。

Quick
Service

S-727



バラッケー氏持針器 ファインチップモデル 曲

S-727 止付 全長 120mm / 先端 9mm ￥52,000 JAN:4547451044222

S-728 止無 全長 120mm / 先端 9mm ￥46,000 JAN:4547451044239

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 届 13B1X00048001148 入 1

スリムなファインチップが特長のマルチな持針器。

先端は9mmとややミドルなサイズでありながら、スリムなファインチップ形状となっているため、顕微鏡下での視認性や、8-0～11-0などの細めの縫合糸、針にも適しております。ハンドルもやや長めとなっているため、用途を選ばずマルチにご使用いただけます。



view

Quick
ServiceBest
Seller

バラッケー氏角膜持針器

KI-41 止付 全長 130mm / 先端 9mm ￥52,000 JAN:4547451041191

KI-42 止無 全長 130mm / 先端 9mm ￥46,000 JAN:4547451321927

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 届 13B1X00048001142 入 1

スタンダードなマイクロサージャリー用持針器。

ロングハンドルでありながら先端は8-0～11-0などの細めの縫合糸、針に適したファインタイプとなっております。ボディ全体に反射防止加工を施しております。



view

Quick
ServiceBest
Seller

S-725

バラッケー氏角膜縫合用持針器


S-725 止付 全長 127mm / 先端 9mm ￥52,000 JAN:4547451044208

S-726 止無 全長 127mm / 先端 9mm ￥46,000 JAN:4547451321934

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 届 13B1X00048001146(S-725)
13B1X00048001147(S-726) 入 1

スタンダードなマイクロサージャリー用持針器。

ロングハンドルでありながら先端は8-0～11-0などの細めの縫合糸、針に適したファインタイプとなっております。KI-41やKI-42とは異なり先端のみにノングレア加工(反射防止)を施しております。

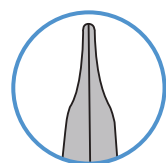Quick
ServiceBest
Seller

バラッケー氏マイクロ持針器 止無

BM-560 止無 全長 116mm / 先端 9mm ￥44,000 JAN:4547451040446

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 届 13B1X00048001140 入 1

マルチに使用できるミドルサイズ持針器。

先端9mm、全長116mmといずれも持針器のサイズとしては中間サイズとなっているため、用途を選ばずマルチに使用することが可能です。先端はファインでありながらこしが強く、やわらかな操作性と強さを兼ね備えております。



鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ー
ラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

PICK
UP



デリケート型持針器 曲 12mm

MB-030 止付 全長 124mm / 先端 12mm ￥78,000 JAN:4547451045656

MB-029 止無 全長 124mm / 先端 12mm ￥74,000 JAN:4547451045649

材 Ti 薬 クラス I JMDN 12726010 屈 13B1X00048001136 入 1

先端タングステンカーバイド加工によるノンスリップ縫合。

先端に独自のタングステンカーバイド加工を施しており、縫合糸を滑らずに把持することが可能です。またスリムチップのため、顕微鏡下での視認性や 8-0 ～ 11-0 の細い針、糸の把持、操作性に優れております。チタニウムによる軽量化も特長です。

Quick
Service

Best
Seller




カストロヴィーホー氏持針器 曲

S-730 止付 全長 140mm / 先端 10mm ￥52,000 JAN:4547451044260

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 屈 13B1X00048001150 入 1

太めの針、糸の操作に便利な大型持針器。

外眼部手術やバックリングなど、4-0 ～ 7-0 などの太めの針や糸を使用する際にも便利な大型持針器のスタンダードモデル。先端のみノングレア加工を施しております。

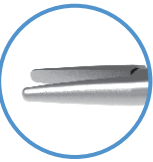

Quick
Service

カストロヴィーホー氏持針器 直

S-729 止付 全長 137mm / 先端 10mm ￥50,000 JAN:4547451044246

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 屈 13B1X00048001150 入 1

バックリング術などに便利な大型持針器の直モデル。

大きなハンドルと先端は、主に 4-0 ～ 7-0 などの太めの針や糸を使用する際にも便利な構造となっております。先端は特に眼球深部のバックリング術などで使いやすい直タイプを採用しております。先端のみノングレア加工を施しております。

memo

PICK
UP



SDview



後藤式剪刀付持針器

M-1901A 止無 全長 133mm / 先端 3.5mm / 刃 4mm ￥65,000 JAN:4547451334231

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 屈 13B1X00048002334 入 1

糸を切る、縫うをこの一本でこなすハイブリット製品。
先端部が把持する部分と糸を切る部分に分かれているため、縫合時に器具を持ち替える必要がなく、この一本で行うことが可能です。先端は汎用性のある 5-0 ～ 7-0 に適したサイズとなっており、結膜や眼瞼皮膚の縫合、外眼部手術に最適です。



マイクロ剪刀付持針器 止付 曲

受 M-1900 止付 全長 139mm / 先端 3mm / 刃 2mm ￥65,000 JAN:4547451031932

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 屈 13B1X00048001494 入 1

剪刀と持針器の機能を兼ね備えるハイブリットアイテム。
縫合操作中、剪刀に持ち替える煩わしさから開放されるよう縫合針把持部の手前が剪刀となっております。

memo

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼薬

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

灌流用のバルブ。

灌流用の針を取り付けて使用します。



ED view



ビショップ・ハーモン氏前房洗淨器

S-213SH 全長 68mm ￥13,000 JAN:4547451043300

材 シリコン 薬 クラス I JMDN 34630000 届 13B1X00048001341 入 1

デリケートで灌流量に優れた扁平先端タイプ。

ややロングで、デリケートに設計されております。創口より挿入しやすいよう先端が扁平となっております。



ED view



フラット洗淨針 アングル型

S-205 全長 42.5mm / シャフト 26.5mm / 先端 1.2mm / 径 19G ￥9,000 JAN:4547451034124

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 届 13B1X00048001512 入 1

より容易な挿入と3つのポートからの
効率良い灌流が魅力。

先端は、創口より挿入しやすいよう扁平となっております。また、ポートを3つ設けることにより効率良くストレスのない洗浄、還流が可能となっております。



ED view



佐藤式前房洗淨針

S-211 全長 46mm / シャフト 30mm / 先端 1.5mm / 径 18G ￥11,000 JAN:4547451034179

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 届 13B1X00048001513 入 1

スタンダードな前房洗淨針。

最もスタンダードな前房洗淨針。発売以来根強い人気を誇ります。



ED view



前房洗淨針 18G

S-212A 全長 45.5mm / シャフト 30mm / 先端 1.5mm / 径 18G ￥11,000 JAN:4547451034186

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 届 13B1X00048001571 入 1

Best
Seller

Best
Seller

ベストセラーで使いやすい注入用カニューラ。
結膜下や内眼部など、多目的で使いやすい注入用カニューラ。30G の
細針による圧力により粘性物質滞留中においてもストレスなく注入が
可能です。



SDview



30G 針 アングル型 鈍

M-88C 全長 30mm / シャフト 14mm / 径 30G ￥6,000 JAN:4547451033035

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 屈 13B1X00048001528 入 1

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

チン小帯の溶解用カニューラ。
水晶体摘出時など、チン小帯との離断を行う際に使用します。



SDview



キモトリブシン注入針二段式

S-216 全長 47mm / シャフト 31mm / 先端 1.85mm / 径 25G ￥10,000 JAN:4547451034261

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 屈 13B1X00048000087 入 1

ベストセラーの空気置換用カニューラ。
発売以来根強い人気を誇る使いやすい扁平加工の空気置換用カニューラ。



SDview



ザウター氏空気注入針 直

M-32ES 全長 40mm / シャフト 24mm / 径 27G ￥6,500 JAN:4547451032267

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 屈 13B1X00048000185 入 1

ベストセラーの空気置換用カニューラ。
発売以来根強い人気を誇る使いやすい扁平加工の空気置換用カニ
ューラ。M-32ES の曲タイプです。



SDview



ザウター氏空気注入針 曲

M-32EC 全長 38mm / シャフト 22mm / 径 27G ￥7,000 JAN:4547451032250

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 屈 13B1X00048000185 入 1

Best
Seller

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

Best
Seller

スムーズな薬液注入が可能な 3 ポートタイプ。

先端と側面ニヶ所の計三ヶ所に開口部があるため、テノン嚢下に針を挿入した際、先端開口部が組織にふさがれた場合でも薬液を注入することが可能です。



ED view



近江氏テノン嚢下注入針 3 ポート 24G

M-1508 全長 37mm / シャフト 21mm / 径 24G ￥12,000 JAN:4547451031659

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 届 13B1X00048001537 入 1

テノン嚢下への薬液注入に最適化されたカニューラ

薬液を注入する際に注入ポートの一つがふさがってしまった場合に他のポートを補助的に使用できることなどを目的として、三つ穴式となっています。また、先端が鈍先のため、組織をより傷つけにくくなっております。24G と 25G の二種類からお選びいただけます。



ED view



テノン嚢下注入針 3 ポート

M-2056-24 全長 42mm / シャフト 26mm / 径 24G ￥15,000 JAN:4547451320043

M-2056-25 全長 42mm / シャフト 26mm / 径 25G ￥15,000 JAN:4547451320050


材 SUS 薬 クラス I JMDN 30890000 届 13B1X00048000955 入 1

ピンポイントでテノン嚢下へアプローチ。

絶妙に設計されたシャフトの長さ、カーブにより、テノン嚢下のピンポイントに素早く、容易にアプローチすることが可能です。また、コストパフォーマンスにも優れております。



ED view

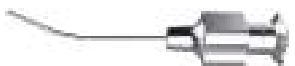

深作式ピンポイント注入針

M-838 全長 37.5mm / シャフト 21.5mm / 径 24G ￥6,000 JAN:4547451032991

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 届 13B1X00048001491 入 1

memo


Best
Seller

Best
Seller

鑷子

経結膜球後注射用アイテム。

球後注射を、経皮ではなく、経結膜にて行うために開発された製品です。先端は鈍針で安全に強膜上を押し進めることが可能です。また薬液注入用ポートは側面のため、挿入時により詰まらないように工夫されております。

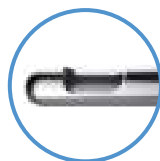

ED view



剪刀

開瞼器

持針器

永田氏経結膜球後針 25G

M-1512 全長 42mm / シャフト 26mm / 径 25G ￥12,000 JAN:4547451031666

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 届 13B1X00048001506 入 1

Best
Sellerカニ
ーラ

安全設計の鋭針が特徴の球後針。

スタンダードな球後針。先端は血管などを損傷しないよう、鋭針ながら、やや鈍先に設計されております。

スパー
テル

その他

アトキンスン氏球後注射針 直

S-217AS 12 本入 全長 51.5mm / シャフト 35.5mm / 径 23G ￥20,000 JAN:4547451034285

S-217AS-4 4 本入 全長 51.5mm / シャフト 35.5mm / 径 23G ￥6,700 JAN:4547451334958

材 SUS 薬 クラス I JMDN 30890000 届 13B1X00048001483

Best
Seller屈折
矯正網膜
硝子体

安全設計の鋭針が特徴のベストセラー球後針。

スタンダードな球後針。先端は血管などを損傷しないよう、鋭針ながら、やや鈍先に設計されております。



ED view



緑内障

角膜

アトキンスン氏球後注射針 曲

S-217AC 12 本入 全長 45mm / シャフト 29mm / 径 23G ￥21,000 JAN:4547451034278

S-217AC-4 4 本入 全長 45mm / シャフト 29mm / 径 23G ￥7,000 JAN:4547451334941

材 SUS 薬 クラス I JMDN 30890000 届 13B1X00048001483

Best
Seller

外眼部

関連
用品

シャープな鋭針のスタンダード球後針。

スタンダードな球後針。先端は非常にシャープな鋭針となっております。



ED view

サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

小川氏眼球摘出用球後注射針 曲

S-217C 12 本入 全長 51mm / シャフト 35mm / 径 23G ￥21,000 JAN:4547451034308

S-217C-4 4 本入 全長 51mm / シャフト 35mm / 径 23G ￥7,000 JAN:4547451334965

材 SUS 薬 クラス I JMDN 30890000 届 13B1X00048001482

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

テーパード構造によりファインで安定した操作性を実現。

スタンダードな涙管洗浄針。先端は 27G とファインでありながら、シャフトの剛性を高めるため、根元に太いパイプを用いることにより耐久性と剛性を高めております。直と曲の 2 タイプからお選びいただけます。

中村式涙管洗浄用二段針 直

S-218S	12 本入	全長 50mm / シャフト 37mm / 径 27G	¥ 20,000	JAN:4547451034353
S-218S-4	4 本入	全長 50mm / シャフト 37mm / 径 27G	¥ 6,700	JAN:4547451335009

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 屈 13B1X00048001119



テーパード構造によりファインで安定した操作性を実現。

スタンダードな涙管洗浄針。先端は 27G とファインでありながら、シャフトの剛性を高めるため、根元に太いパイプを用いることにより耐久性と剛性を高めております。直と曲の 2 タイプからお選びいただけます。

中村式涙管洗浄用二段針 曲

S-218C	12 本入	全長 49mm / シャフト 33mm / 径 27G	¥ 21,000	JAN:4547451034346
S-218C-4	4 本入	全長 49mm / シャフト 33mm / 径 27G	¥ 7,000	JAN:4547451334996

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 屈 13B1X00048001119



SD view



Best Seller

直・先端ポートタイプのスタンダードな涙管洗浄針。

スタンダードな涙管洗浄針。直と曲の 2 タイプからお選びいただけます。



中村式涙管洗浄用一段針 直

S-218AS	12 本入	全長 53mm / シャフト 37mm / 径 23G	¥ 20,000	JAN:4547451034339
S-218AS-4	4 本入	全長 53mm / シャフト 37mm / 径 23G	¥ 6,700	JAN:4547451334989

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 屈 13B1X00048001120

曲・先端ポートタイプのスタンダードな涙管洗浄針

スタンダードな涙管洗浄針。直と曲の 2 タイプからお選びいただけます。



SD view



Best Seller



中村式涙管洗浄用一段針 曲

S-218AC	12 本入	全長 49mm / シャフト 33mm / 径 23G	¥ 21,000	JAN:4547451034322
S-218AC-4	4 本入	全長 49mm / シャフト 33mm / 径 23G	¥ 7,000	JAN:4547451334972

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 屈 13B1X00048001120

側面ポートタイプの涙管洗浄針。

先端は、鈍先で挿入のしやすさと鼻側の涙嚢に対して安全を考慮しております。ポートは側面となっているため、洗浄水は鼻涙管に向かってしっかりと放出されます。

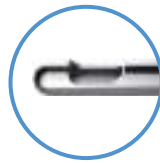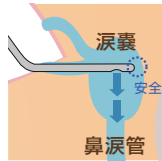


涙管洗浄針 45° アングル型 23G

M-88G 全長 38mm / シャフト 22mm / 径 23G ￥6,000 JAN:4547451033073

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 届 13B1X00048001492 入 1

涙管洗浄とブジーの一人二役のハイブリットアイテム。

先端は鈍先で、側面ポートタイプとなっており、涙嚢より鼻涙管へしっかりと洗浄水が放出されます。更にロングの針を立てて鈍先で鼻涙管へ挿入することでブジーと同様の作業が安全に行うことが可能です。その際、加圧通水しながらの穿破が可能です。

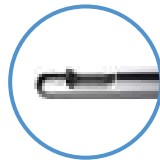

バンガーター氏ブジー型涙管洗浄針

S-215-21 全長 76mm / シャフト 60mm / 径 21G ￥6,000 JAN:4547451034247

S-215-23 全長 76mm / シャフト 60mm / 径 23G ￥6,000 JAN:4547451034254

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 届 13B1X00048001574 入 1




view

PICK
UP

涙道への挿入長を確認できる乳幼児用
目安付きブジー型洗浄針。

ご考案者 五嶋 摩理 先生
(東京女子医科大学東医療センター 眼科)コメント

「針先が鈍で涙道粘膜を傷つけにくく、側面に通水孔があり、加圧通水しながらの穿破が可能です。先端より 10mm から 15mm の間が無光沢になっており、挿入長の目安になります。種々の長さを選択できます。従来の乳児用ブジー型洗浄針に比べ短いため、針先を進めながらの通水が行いやすく、腰が強いのので折れにくく、深く挿入し過ぎる危険性が少なくなります。また、より細いブジーに比べて仮道をきたしにくい上、涙点拡張もほとんど必要ありません。生後 6 ヶ月未満では 30mm、生後 6 ヶ月以上では 34mm がお勧めです。」

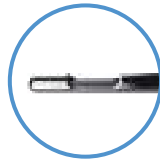

M-2058-34



M-2058-32



M-2058-30

五嶋式ブジー型涙管洗浄針

M-2058-34 全長 50mm / シャフト 34mm / 径 25G A 10mm / B 5mm / C 19mm ￥11,000 JAN:4547451313151

M-2058-32 全長 48mm / シャフト 32mm / 径 25G A 10mm / B 5mm / C 17mm ￥11,000 JAN:4547451313144

M-2058-30 全長 46mm / シャフト 30mm / 径 25G A 10mm / B 5mm / C 15mm ￥11,000 JAN:4547451313137

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 届 13B1X00048000554 入 1



鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ



フルートハンドピース

吸引用ハンドピースのスタンダードタイプ。

M-569	吸引用	全長 80mm	¥ 22,000	JAN:4547451326694
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 35384000	届 13B1X00048001857	入 1

memo

Best Seller

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイザブル

AtoZ

スパーテル

S-170A	全長 129mm / シャフト 35mm / 先端幅 1.0mm	¥ 9,500	JAN:4547451033660
S-170B	全長 129mm / シャフト 35mm / 先端幅 1.5mm	¥ 9,500	JAN:4547451033677
S-170C	全長 129mm / シャフト 35mm / 先端幅 2.0mm	¥ 9,500	JAN:4547451033684

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32754001 屈 13B1X00048000384 入 1

スパーテルのスタンダードモデル。

汎用性のあるスタンダードなスパーテル。シャフトはしなりのある弱湾形状となっております。3種類のサイズからお選びいただけます。

水晶体皮質用軟質スパーテル

M-126	全長 100mm / シャフト 30mm / 先端幅 0.5mm	¥ 15,000	JAN:4547451031000
--------------	----------------------------------	----------	-------------------

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32754001 屈 13B1X00048000255 入 1

水晶体皮質の剥離に便利なスパーテル。

水晶体皮質の剥離が容易に行えるよう、適度なしなりのある操作性、またスパーテルの角度を調節できるよう軟質シャフトとなっております。先端幅も極細なため、ピンポイントのオペレーションが可能です。ハンドルは、器具の回転操作と小回りの効く操作性を重視し、ラウンドハンドル、ショートサイズに設計しております。

目盛付スパーテル

S-171	全長 129mm / シャフト 35mm / 先端幅 2.0mm	¥ 15,000	JAN:4547451033714
--------------	----------------------------------	----------	-------------------

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32754001 屈 13B1X00048000385 入 1

目盛が便利なスパーテル。

目盛り付きのため、長さや深さなど、計測しながらの操作が可能です。

ニードルスパーテル アングル型

M-126A	全長 110mm / シャフト 26mm / 先端幅 0.3mm	¥ 20,000	JAN:4547451031017
---------------	----------------------------------	----------	-------------------

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32754001 屈 13B1X00048000097 入 1

虹彩後癒着剥離や水晶体核の脱臼などに便利。

先端が針先に近い極細幅（0.3mm）となっており、シャフトは長めのアングル型となっております。特に、虹彩後癒着剥離などに有効なデザインであるとともに、ECCEのダブルフック法による核の脱臼時に核分割フック（M-136等）と併用しての使用などにも活躍します。

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

ベストセラーの定番カリパー。
切開創の幅や、ポートの位置など、マルチに活
躍する定番カリパーです。



ED view

カストロヴィーホー氏カリパー 直

S-200S 全長 85mm / 測定範囲 0-20mm / 目盛間隔 1mm ￥40,000 JAN:4547451043270

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35788000 屈 13B1X00048001154 入 1

ワンハンドでスムーズに操作が行えるスリムタイプ。

厚さが 1.5mm の超薄型カリパー。ワンハンドでの操作が可能なように、
調節用ハンドルを、目盛部の内側に取り付けました。さらに目盛間隔が
0.5mm となっているため、より細かい測定が可能です。

スリムタイプカリパー

受 M-2200 全長 87mm / 測定範囲 0-20mm / 目盛間隔 0.5mm ￥38,500 JAN:4547451320302

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35788000 屈 13B1X00048001331 入 1

クレンメ

S-475L 大 全長 47mm ￥8,000 JAN:4547451043935

S-475S 小 全長 36mm ￥8,000 JAN:4547451043942

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35801000 屈 13B1X00048001220 入 1

縫合針（10 本入）


S-640A No.1 9mm ￥11,000 JAN:4547451035190

S-640B No.2 10mm ￥10,800 JAN:4547451035206

S-640C No.3 13mm ￥9,600 JAN:4547451035237

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32763000 屈 13B1X00048000014 入 10

Quick
Service Best
Seller

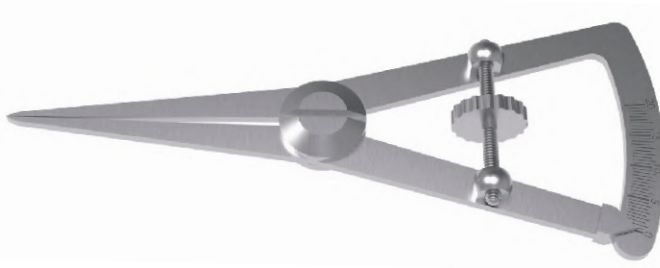

Best
Seller



S-475L



S-475S

円滑な手術をサポートする必需品

点滴の速度と量の調整や、制御系の固定など、手術のサポートアイテムです。

No.1



三角形

No.2



三角形

No.3



逆三角形

眼科処置に最適な縫合針。

眼球のカーブや、縫合操作など総合的に研究した結果生まれた眼科処置用縫合針とな
っております。3 種類のサイズよりお選びいただけます。

Quick
Service Best
Seller

マイクロサージャリー用替刃パンチ 直

M-40RS 全長 96mm / 先端 9mm ￥48,000 JAN:4547451041962

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32764001 屈 13B1X00048001169 入 1

ベストセラーの定番替刃パンチ。（バネありタイプ）

発売以来ベストセラーを誇る替刃パンチの定番商品です。マイクロサージャリーに最適な刃を意のままにデザインすることが可能です。バネありタイプのため、刃の把持が容易に行えます。

Quick
Service

マイクロサージャリー用替刃パンチ 直

M-41R 全長 119mm / 先端 17mm ￥48,000 JAN:4547451041986

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32764001 屈 13B1X00048001169 入 1

大きめの刃のデザインが容易なノンスリップ替刃パンチ。

ラージサイズの先端のため、大きめの刃のデザインに適しております。先端の片側にはセレーションが施してあり、刃を滑らずにしっかりと把持することが可能です。また、ロングハンドルのため、軽い力で刃を割ることも可能になっております。

Quick
Service Best
Seller

view



国友氏替刃パンチ

S-28 全長 105mm / 先端 11mm ￥40,000 JAN:4547451043676

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32764001 屈 13B1X00048000760 入 1

ワンハンドで固定解除が可能な替刃パンチ。（バネありタイプ）

ハンドルの固定解除をワンハンドで行うことが可能なため、操作性に優れております。先端は小サイズのため、マイクロサージャリーに適したサイズに替刃を割ることが可能です。バネありタイプのため、刃の把持が容易に行えます。

フェザー眼科用カミソリ 100 枚入

M-150G 全長 10×56mm / 刃厚 0.1mm ￥5,000 JAN:4902470066097

材 C 薬 クラス II JMDN 32764002 認 219AABZX00216000 入 100

マイクロサージャリーの必須カミソリ。

外眼手術、麦粒腫、内眼反症顔面形成術、白内障手術その他マイクロサージャリーの必需品です。刃はカーボン製となっております。



鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

H-01 ECCE/ICCE（輪匙・核娩出・眼球固定）

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ



核娩出用輪匙 逆溝付

M-658 全長 135mm / 先端 3mm ￥20,000 JAN:4547451032823

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70942000 届 13B1X00048000322 入 1

小切開 ECCE をよりスムーズ・確実に行えるデリケート輪匙。
小切開の水晶体囊外摘出術用に開発されたデリケート輪匙。スレンダーな先端は、娩出時に滑らないよう逆溝式となっております。また、シャフトから先端にかけて弱湾形状となっているため、核をしっかりとすくい取りつつみこむような感覚でスムーズにオペレーションが行えます。



逆溝付デリケート輪匙

M-121A 全長 134mm / 先端 4mm ￥20,000 JAN:4547451030942

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70942000 届 13B1X00048000249 入 1

小切開 ECCE に対応する逆溝ノンスリップ輪匙。
小切開の水晶体囊外摘出術用に開発されたデリケート輪匙。先端は、娩出時に滑らないよう逆溝式となっております。また、シャフトから先端にかけて弱湾形状となっているため、核をしっかりとすくい取りつつみこむような感覚でスムーズにオペレーションが行えます。



輪匙及び金属匙

S-174A 全長 145mm / 匙 4mm 輪 5mm ￥28,000 JAN:4547451030386

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32772001 届 13B1X00048000232 入 1

輪状と梔状の両頭タイプ。
古くから親しまれているクラシックモデル。輪状と梔状の先端を状況に応じて使い分けることが可能です。



イリゲーション輪匙

M-100 全長 50mm / 先端先端 6.0mmx8.5mm ￥18,000 JAN:4547451030386

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70942000 届 13B1X00048000148 入 1

viscoexpression による核の圧出が可能な灌流輪匙。
粘弾性物質のシリンジに接続して使用いたします。粘弾性物質を注入しながらの娩出用として使用が可能です。

Quick
Service



トラウトマン氏マイクロ角膜剪刀

M-57RL	左	全長 97mm / 刃先 5mm	¥ 62,000	JAN:4547451042105
M-57RR	右	全長 97mm / 刃先 5mm	¥ 62,000	JAN:4547451042112

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048001299 入 1

水晶体娩出用の切開創の作成が容易な専用剪刀。

ECCE や ICCE の水晶体娩出用切開創作成の専用剪刀です。刃先は角膜輪部のカーブに沿った形状となっておりますので、簡単かつ美しい切開創の作成が可能です。左用・右用のペアで使用いたします。

memo

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスパーザブル
- AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイ

AtoZ

IFIS、小瞳孔、カプセルサポートにおいて革新的な機能とデザイン。

専用
シリンジ
付属


R2

下記動画はX1（前モデル）であり、参考動画となります。
操作方法は同等となります。

YOUTUBE CH

Ready-Loaded
Iris Speculum

Ready-Loaded
Iris Speculum
for Iris-Capsule Capture

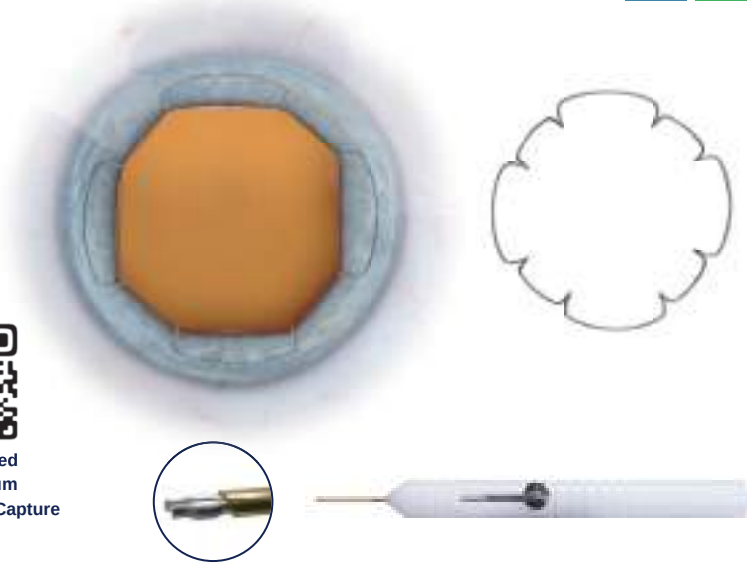

Xpand2 虹彩リング

マルチユース：使用限度 2 回

DIAX2-MUINS	寸法：図参照	¥ 100,000	JAN:4547451336440
材	Ti 形状記憶合金	薬	クラス I
JMDN	13381001	届	13B1X00048002442
入	1		

【構成品】

- ・ XpandNT2 虹彩リング（本体）
- ・ インジェクター
- ・ 滅菌用本体収納ケース
- ・ インジェクターを洗浄するためのチューブとルアーロック


【素材】

リング部：ニチノール（チタン合金）ASTM F 2063-18
インサーター（カニューレ管部）：樹脂
インサーター（ハンドル部）：ポリオキシメチレン POMC

【使用方法】

本体収納ケースから、インジェクターに装填し、切開創より眼内に挿入し、虹彩に装着します。
レンズ挿入後、レンズフックやインジェクターを利用して、簡単に切開創から取り外すことが可能です。

【滅菌用本体収納ケース】

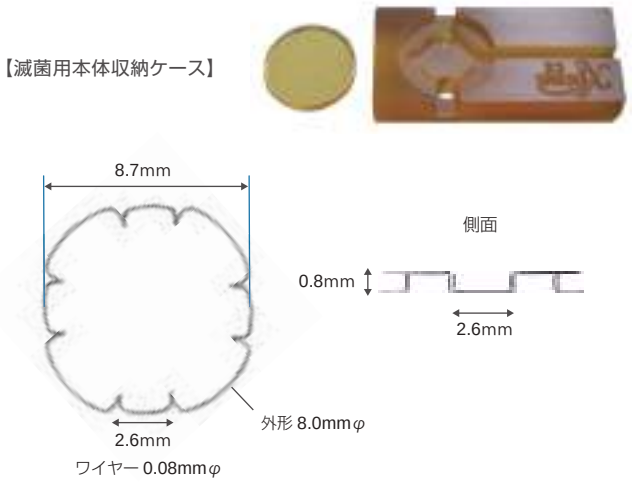

Expanding Your Vision

小瞳孔や術中虹彩緊張低下症候群（IFIS）に対して、効果的に瞳孔を拡張することができるデバイスで、術者に安全かつ快適な手術環境を提供します。
瞳孔を適切なサイズに維持するための着脱操作を速やかに容易に行うことができ、眼内での操作を必要としません。

実用的で安全かつ効率的なデバイス

- ・ 速やかに容易に着脱操作可能
- ・ 術者の必要に応じ、方形または台形の形状が選択可能
- ・ 眼内操作不要
- ・ 手術時にデバイスが邪魔にならない
- ・ 容易に操作方法をマスター
- ・ ワンサイズ、スプリング調整式

単回使用

虹彩エキスパンダー（3 セット入）

APX200	¥ 125,000	JAN:4547451335900
--------	-----------	-------------------

材	アモルファスナイオン、ニチノール
薬	クラス II
JMDN	13381002
認	304AGBZX00022000
入	3 セット

【1 セット構成品】

- 虹彩エキスパンダー×2
- エキスパンダー用鉗子×2
- エキスパンダーベース×1
- プリスターケース×1





MOVIE



3D view



3D view




2本のフックで瞳孔拡張操作を安全、確実にコントロール。

ご考案者 留守 良太 先生
(和歌山県橋本市トメモリ眼科・形成外科) コメント

「小瞳孔やIFISなどの症例では手術中に瞳孔拡張操作が必要となります。無理な操作を行うと、瞳孔縁や虹彩、隅角が損傷され、前房出血を起こす可能性があります。このような状況を予防し、スムーズな挿入を行うための①トメ1フック、②トメ2プッシュフックです。ビデオのように二つのフックを使用することで組織損傷を防ぎ、術後炎症を低減する事が可能です。

①はインジェクターから外したり虹彩に装着する操作に使用できます。先端は丸く加工され虹彩、水晶体前囊の損傷を防ぎます。核処理や、眼内レンズの位置調整にも使用可能です。

②は12時部の挿入に使用します。押し込む操作ではリングが滑らず位置をコントロールでき、装着後は器具を真っ直ぐ引き抜くと虹彩に損傷を与えず自然に外れる設計となっています。基本操作は2本のフックを用いて電車の屋根にある菱形のパンダグラフを縮めるように操作します。瞳孔の状態によっては②のみで挿入が可能です。」

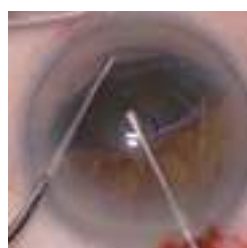

トメ 1 (tome1) フック

M-127T 全長 97mm / 先端 0.15X1.05mm ￥30,000 JAN:4547451334842

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048002359 入 1

トメ 2 (tome2) プッシュフック

M-128T 全長 109mm / 先端 0.9×1.5mm ￥30,000 JAN:4547451334873

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048002358 入 1

memo

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

68

専用
シリンジ
付属Quick
ServiceBest
Seller

E-D view

MOVIE

八重剪刀®

DS-088 全長 137mm / 刃先 2mm / 径 23G ￥176,000 JAN:4547451320869

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048002479 入 1

圧倒的な支持を誇る「縦に切れる」剪刀。

刃先はシャープな切れ味を有し、前房内でシャフトを回転させることなく垂直に開閉します。操作性に優れ、虹彩・前囊・硝子体など様々な切開に活躍する 1 本です。



E-D view

MOVIE

八重剪刀®ショートハンドル

DS-088SH 全長 119mm / 刃先 2mm / 径 23G ￥176,000 JAN:4547451332060

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048002479 入 1

圧倒的な支持を誇る「八重剪刀®」の
ショートハンドルモデル

刃先はシャープな切れ味を有し、前房内でシャフトを回転させることなく垂直に開閉します。操作性に優れ、虹彩・前囊・硝子体など様々な切開に活躍する 1 本です。ショートハンドルにより更に操作性が安定しました。



E-D view

河合氏虹彩剪刀テーパード 23/25G

MF-806 全長 145mm / 刃先 1.5mm / 径 23/25G ￥185,000 JAN:4547451320074


材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048000575 入 1

12 時 6 時方向付近の虹彩切除に便利。

サイドポートからの虹彩切開を容易にしてくれるマイクロ剪刀です。23Gと25Gのテーパードシャフトとファインな先端により操作性が良く、刃先部分が長くその湾曲が大きいので小瞳孔の瞳孔縁を切開しやすくなっています。

専用
シリンジ
付属滅菌
トレイ
付属

memo

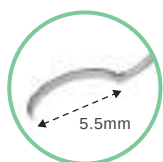


PICK UP

鈴木式 CCC マーカー

M-2177-5.5 全長 145mm / 先端 5.5mm ￥45,000 JAN:4547451321705

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048001356 入 1


※先端は CCC のサイズを示しております。

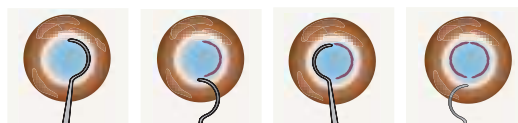

ご考案者 鈴木 久晴 先生 (日本医科大学武蔵小杉病院 眼科) コメント


「今までの CCC マーカーは角膜へのマーキングが一般的であり、角膜形状や前房深度に影響を受けました。鈴木式 CCC マーカーは水晶体へ直接マーキングすることにより、より眼内レンズと CCC の大きさをイメージしやすくなります。挿入時には切開創の端に沿うようにすると出し入れが容易です。また、圧痕だけでもある程度跡がつきますが、染色する場合には、前房内貯留性が高い粘弾性物質を使用し、マーカーの接触面にピオクタニンを塗布し、ある程度乾かしてから使用することをお勧めします。」

(例) 左右のサイドポートより挿入

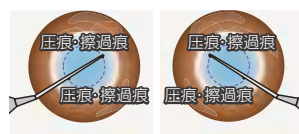


左右のサイドポートから挿入し、ポイントする。
(左右各1回の作業で4点のポイントが作成されます)

(例) 複数点マーキングを行う場合

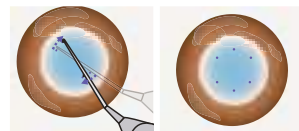

左右のサイドポートや強角膜切開創から円周に任意の数をポイントしていく。

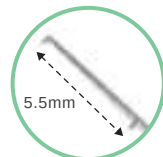

水晶体嚢上に CCC の目安をポイントマーキング。

ご考案者 加藤 宗彦 先生 (岩手県 盛岡市 加藤アイクリニック) コメント

「サイドポートおよび強角膜切開創などから挿入が可能です。直径 5.5mm の前嚢切開を目標として、水晶体前嚢に圧痕あるいは擦過痕によるマーキングを行います。前房への挿入部位および角度を変えることにより、任意の数のマーキングを行うことができます。お好みの粘弾性物質で、前房を深くしすぎないように満たし、優しく前嚢表面を擦過すると楽にマーキングができます。トリバンプルーなどで前嚢を染色したのちに行うと、より視認性が増します。」

加藤式 CCC マーカー

受 M-2197-5.5 全長 97mm / 先端 5.5mm ￥30,000 JAN:4547451326359

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048001839 入 1

※先端は CCC のサイズを示しております。



三好氏・藤本氏 CCC マーカー

受 M-2106 全長 115mm / 先端：内側 5.5mm / 外側 12×11mm ￥55,000 JAN:4547451321538

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048001351 入 1

※先端は CCC のサイズを示しております。

角膜上に容易に作成可能な CCC マーカー。

角膜の傾斜に合わせたマーキングをより容易にさせるため、マーカーの外側リングが若干楕円形に設計されました。さらに、内側のマーキング用リングを、外側リング中央から 1mm 患者の鼻側に取り付けることにより、水晶体中心部を目標とした角膜へのマーキングをより容易に行うことが可能となります。



ED view

チストーム用鑷子 ツイストヒンジ

M-1902THI 全長 100mm / 先端 10mm ￥30,000 JAN:4547451327356

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35079001 屈 13B1X00048001893 入 1

チストームの作成に便利な 1 本。

ヒンジ部がツイスト (捻り) 構造となっているため、剛性、耐久性ともに優れております。チストームの作成に便利なアイテムです。



鑷子

剪刀

開眼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

専用
シリンジ
付属Quick
ServicePICK
UP池田氏マイクロカプシュロレクシス鑷子
S-Model 25G

E view

DS-2023 全長 117mm / シャフト 15.5mm / 径 25G ￥195,000 JAN:4547451335719

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002409 入 1

池田氏 CCC 鑷子は遂に 25G の新ステージへ。

CCC 鑷子の定番、池田氏 CCC 鑷子の 25G モデル。先端部が極小になったことに加え、甲の部分の角を丸めることにより、サイドポートでの引っ掛けりがなくスムーズな出し入れが可能になりました。またノングレイド加工を施すことにより、反射防止効果と組織をしっかりと把持できるようになっております。より低侵襲なアプローチが可能な CCC 鑷子のハイエンドモデルです。

専用
シリンジ
付属Quick
ServicePICK
UP池田氏マイクロカプシュロレクシス鑷子
S-Model 23G

E view

DS-2021 全長 118mm / シャフト 16.5mm / 径 23G ￥160,000 JAN:4547451334529

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002388 入 1

操作性抜群の池田氏 CCC 鑷子のスタンダードモデル。

CCC 鑷子の定番、池田氏 CCC 鑷子のスタンダードモデルを、更にグレードアップしました。先端部の開閉幅を大きくすること、及びノングレイド加工することによる反射防止効果で視認性が向上しております。

また、ショートハンドルとショートシャフトの組み合わせにより、抜群の取り回しの良さとコシの強さによるブレのない安定した操作性を実現しました。

専用
シリンジ
付属Quick
ServicePICK
UP池田氏マイクロカプシュロレクシス鑷子
BEAK 23G ショートハンドル

E view

DS-2020 全長 118mm / シャフト 16mm / 径 23G ￥170,000 JAN:4547451334675

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002348 入 1

操作性抜群の池田氏 CCC 鑷子の BEAK モデル。

先端部の開閉幅を大きくすること、及び先端部内側を大きく弧状に削ることにより視認性と操作性の向上を図っております。更に先端部の爪は極小の逆エッジになっており、きっかけを作り、そのまま把持ができるので、効率よく CCC を行うことが可能です。また、ショートハンドルとショートシャフトの組み合わせにより、抜群の取り回しの良さとコシの強さによるブレのない安定した操作性を実現しました。

専用
シリンジ
付属

森氏 CCC 鑷子 25G



E view

DS-2024 全長 135mm / シャフト 16.5mm / 先端φ0.2 x 0.8mm / 径 25G ￥175,000 JAN:4547451336822

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002466 入 1

きっかけから、初動までワンアクションで行える優れもの。

中心からアプローチしやすいように、先端部が縦方向の動作をする CCC 鑷子です。より中心を的確に捉えやすい形状となっているので、CCC のきっかけを作りつつ、そのまま把持をして展開に持っていけるというメリットがあります。先端のワイヤー部分もきっかけが作成しやすいよう、カットしているのも特徴です。

専用
シリンジ
付属Quick
Service

鑷子

剪刀

開眼器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

71

23G マイクロカプシュロレクシス鑷子
ショートタイプ

view

DS-50102 全長 136mm / シャフト 17mm / 径 23G ￥160,000 JAN:4547451320791

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001228 入 1

高機能・低価格のスタンダード CCC 鑷子。

先端の開口を広げ、水晶体囊の把持をより容易にしています。また、特別にデザインされたプラットフォームが、安全確実な「水晶体囊の把持及び、引き裂き操作」を可能にします。コストパフォーマンスに優れた高機能 CCC 鑷子です。ショートタイプでは、ショートシャフトにおけるコシの強さによるブレのない安定した操作性と、把持部と先端部が近接していることによる操作性が魅力です。

専用
シリンジ
付属

23G マイクロカプシュロレクシス鑷子



view

DS-50101 全長 146mm / シャフト 27mm / 径 23G ￥160,000 JAN:4547451320784

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001228 入 1

高機能・低価格のスタンダード CCC 鑷子。

先端の開口を広げ、水晶体囊の把持をより容易にしています。また、特別にデザインされたプラットフォームが、安全確実な「水晶体囊の把持及び、引き裂き操作」を可能にします。コストパフォーマンスに優れた高機能 CCC 鑷子です。ロングタイプでは、ハンドルで小さな円を描く動作で、大きな円を描くことが可能です。手元を安定させて CCC が行えるため、美しい CCC の作成が可能となります。

減価
トレイ
付属専用
シリンジ
付属Quick
ServiceBest
Seller

河合氏 CCC 鑷子テーパード 23/25G



view

MF-801 全長 146mm / シャフト 29mm / 径 23/25G ￥185,000 JAN:4547451045861

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000213 入 1

25G の繊細さと 23G の強さが融合した操作性に優れた鑷子。

前房水の漏れを最小にするため微小なサイドポートから CCC 操作が可能なウルトラフライン CCC 鑷子です。シャフト及び先端は反射防止処理済み。ノンスリップセレーションタイプの先端部は 25G でデリケートに仕上げられ、根元は 23G で安定性を保ちます。



view

稲村氏 カプシュロレクシス鑷子
ファイン チタニウム スケール

DS-1612FB 全長 103mm / 先端 0.45mm ￥88,000 JAN:4547451336921

材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001354 入 1



よりの確な CCC を行うためのマーカーとして。

CCC の大きさを決める際の、鑷子のカーブの部分に 1mm 刻みでマーキングが入っていることにより、より適切な大きさでの CCC 作成が可能です。

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

Quick
Service

Best
Seller



3D view



稲村氏 カプシュロレクシス鑷子 ファイン チタニウム

DS-1612F	全長 103mm / 先端 0.45mm	¥ 84,000	JAN:4547451321590
材 Ti	薬 クラス I	JMDN 16209001	届 13B1X00048001354 入 1

ファインな先端とチタニウムボディが魅力の定番 CCC 鑷子。

定番の稲村氏カプシュロレクシス鑷子の先端がよりファインに、そしてチタニウムボディの軽量化により、操作性が飛躍的に向上しました。ハイクオリティーながらコストパフォーマンスにも優れております。



Best
Seller

稲村氏 カプシュロレクシス鑷子 VI

M-1612	全長 110mm	¥ 75,000	JAN:4547451041528
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 16209001	届 13B1X00048001219 入 1

前房密閉性に優れた CCC 鑷子の定番。

前房密閉性に優れたデザインで、CCC術中の粘弾性物質の漏れを少なくしました。非常に精密な鑷子先端部の形状により、安全で、確実なCCCが可能です。デザインコンセプトから、素材に強度、弾力性にすぐれたステンレススチールを採用しました。



Quick
Service

西・ユトラータ氏 サーキュラーカプシュロレクシス用鑷子

M-167R	全長 84mm	¥ 52,000	JAN:4547451041569
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 16209001	届 13B1X00048001259 入 1

ショートハンドル、ストッパー付き CCC 鑷子。

虹彩を挟むことのないよう、ストッパー機能付きとなっております。ストッパーは、強めに把持した際に起こりやすい先端の開きを防止する役割も担っております。ハンドルはスタンダード鑷子と同等のデザイン（長さやハンドル形状など）となっているため、使い慣れた操作感で CCC を行うことが可能です。



Quick
Service

ユトラータ氏 サーキュラーカプシュロレクシス用鑷子

M-167RA	全長 104mm	¥ 55,000	JAN:4547451041569
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 16209001	届 13B1X00048001260 入 1

虹彩の挟み防止ストッパー付き CCC 鑷子。

虹彩を挟むことのないよう、ストッパー機能付きとなっております。ストッパーは、強めに把持した際に起こりやすい先端の開きを防止する役割も担っております。

使いやすさと安全性を追求した定番タイプ。

使いやすさと安全性、そしてコストパフォーマンスを追求しました。
45°の扁平×23G の設計で、効率良く、また水晶体線維に対してもより安全に作業が行えます。



ハイドロカニューラ 23G

M-1524 全長 40mm / シャフト 22mm / 先端 0.7mm / 径 23G (特殊パイプ) ￥9,000 JAN:4547451326328

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 屈 13B1X00048001833 入 1

かゆいところに手の届く便利なカニューラ。

先端が 2 段階のアングル式となっております。後嚢付近までアプローチする事が可能で、ハイドロが行き届かなかった場合などリカバリーすることも可能です。



SDview



太田式ハイドロダイセクションカニューラ 27G

M-1530 全長 38mm / シャフト 22mm / 径 27G ￥12,000 JAN:4547451031741

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 屈 13B1X00048001269 入 1

memo

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスパーザブル

AtoZ

H-07 核分割 (D&C 法・Phaco chop 法)

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

Best
Seller



view



分割君（徳田式核分割フック）

M-136 全長 104mm / 先端 0.6×1.0mm ￥36,000 JAN:4547451031352

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048001530 入 1

圧倒的ユーザーを誇る核分割フックのベストセラー。

発売以来多くのユーザーを誇る核分割フックのベストセラー。溝掘り分割法において、抜群の操作性を誇り、素早さ・確実性・安全性の三拍子揃った核分割フックの代名詞的商品です。



view



核分割スパーテル Kバージョン

M-136K 全長 104mm / 先端 0.5×1.5mm ￥36,000 JAN:4547451031413

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048001532 入 1

ベストセラー「分割君」のセミロングモデル。

ベストセラー商品「分割君」のバリエーションモデルとして開発されました。M-136 分割君に比べ、先端がセミロングサイズとなっております。



view



ベストセラー「分割君」のロングモデル。

ベストセラー商品「分割君」のバリエーションモデルとして開発されました。M-136 分割君に比べ、先端がロングサイズとなっております。

ご考案者 藤川 王哉 先生（福岡県 遠賀郡 いまこが眼科）コメント

「先端部に特徴があり、今まで分割君では短い感じ、フェイコチョッパーでは尖った感じと考える方はこれが最適です。サイドポートの挿入は裏返しに入れますが、慣れればより上手く核分割ができ、後囊との空間距離を保つことが出来ます。実は発売20年になるロングセラーなのです。」

核分割スパーテル ロングバージョン

M-136L 全長 104mm / 先端 0.6×1.85mm ￥38,000 JAN:4547451031420

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048001533 入 1



view



PICK
UP

福山・吉富式

核分割コブラシャフトスパーテル

M-1160 全長 104mm / 先端 0.6×1.0mm ￥40,000 JAN:4547451036463

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048001486 入 1



MOVIE

角膜内皮を核片の衝突から守るアイデア商品。

超音波白内障手術で分割または破砕された水晶体核片の角膜内皮への衝突による角膜内皮障害を起因とする合併症（術後の角膜浮腫、混濁、硬い核の角膜内皮への衝突が著しい場合に起因する水泡性角膜症等）の防止を目的として開発されました。核乳化吸引中、角膜内皮に向かって浮上してくる形状が不規則な核片を押さえながら操作ができるように設計されたコブラの形状に似た二本の並んだシャフトを備えた innovative な製品です。

Best
Seller

view

永原式フェコチョッパー

M-136N 全長 100mm / 先端 0.3×1.0mm ￥36,000 JAN:4547451031444

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048000099 入 1



「フェイコチョップ法」のベストセラーアイテム。

フェイコチョップ法と共に歩み続けてきた、発売以来多くのユーザーを誇るベストセラーアイテムです。



永原式フェコチョッパー™左利き術者用

受 M-136NL 全長 100mm / 先端 0.3×1.0mm ￥36,000 JAN:4547451031451

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048000099 入 1



永原式フェコチョッパーの左利き術者用モデル。

左利き術者用に、M-136N とはチョッパー部分が反対側についております。



view

コブラシャフトフェコチョッパー

受 M-1160N 全長 103mm / 先端 0.3×1.0mm ￥40,000 JAN:4547451032637

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048000203 入 1



角膜内皮をガードするコブラシャフトのフェコチョッパー。

破砕された水晶体核片の角膜内皮への衝突による角膜内皮障害を起因とする合併症の防止を目的に開発されたコブラシャフトスパーテルのフェコチョッパーモデルです。



view

二刀流チョッパー
(加藤式核分割チョッパー)

M-2212 全長 104mm / 先端 1.0×0.7mm ￥42,000 JAN:4547451032657

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X000480001966 入 1



MOVIE



状況に応じて D&C とチョップを使い分けられる二刀流。

先端部の片側（側面）に設けられたエッジにより水晶体核のチョップが可能です。エッジと反対側の核分割部は、ディバイド&コンカー法での核分割に適した形状となっております。チョッパー・核分割フック兼用可能なハイブリッドな1本です。

ご考案者 加藤 浩晃 先生

(京都府立医科大学附属病院 眼科 / 京都市 左京区 バプテスト眼科クリニック) コメント

「特に US 時に分割君でチョップをしていたり、分割君とフェイコチョッパーの2本を使用されている場合は、この1本で今よりも手術がスムーズになります。」

鑷子

剪刀

開眼器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

PICK
UP関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

H-07 核分割 (D&C 法・Phaco chop 法)

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

PICK
UP



3D view



MOVIE

中京式スパーテル

M-1112 全長 110mm / 先端 0.5×0.9mm ￥36,000 JAN:4547451030621

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048001485 入 1

分割手法を問わず使用できるオールマイティーな 1 本。

溝掘り分割法、フェイコチョップ法、どちらの方法にも対応できるようにデザインされており、やわらかい核から硬い核まですべての症例に対応できます。先端は草刈鎌形状になっております。刃の部分は若干屈曲しており、水晶体溝の側面に刃が面として接触しやすく、分割しやすくなっています。水晶体嚢に直接触れない刃の内側部分は研磨されており、硬い核でも切開が可能で、フェイコチョップ法が容易にできます。核の回転や分割では、鉛筆を指の中で転がすようにスパーテルを回転させること、フェイコチョップ法では、刃の切れる方向に鉋を振り下ろすように切開し、その後スパーテルを回転させ分割することが操作のポイントです。

PICK
UP



3D view



MOVIE

M フック核分割用フック


M-1101 全長 117mm / 先端 0.5×1.0mm ￥40,000 JAN:4547451030560

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048001505 入 1

PICK
UP



3D view

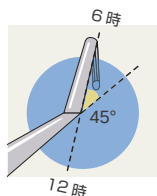


三好氏チョッパー

M-2105 全長 101mm / 先端 0.2×1.0mm ￥40,000 JAN:4547451321521

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048001350 入 1

絶妙なアングルによる中心部へのチョップコントロールが魅力。

フック先端部に 45°の傾斜を持たせたご存知三好チョッパー。この絶妙なアングルと先端の切断部デザインにより、6 時の赤道部から核中心部へ、反れずに真っすぐと美しい核分割が行えます。特に硬い核において優れたパフォーマンスを発揮します。

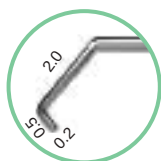

3D view



MOVIE

海谷式マルチフック

M-2170 全長 118mm / 先端 0.2×0.5mm ￥38,000 JAN:4547451322467

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048001511 入 1

核分割とマニピュレーションをこなすマルチな 1 本。

先端部を扁平に近い形にすることにより、内側での水晶体核のチョップが可能となります。さらに、チョップ後のマニピュレーション等も行ないやすい形状となっております。

ご考案者 海谷 忠良 先生 (浜松市 中区 海谷眼科) コメント

「多数の手術経験を重ねることで、0.1mm 単位までこだわった長さや角度にデザインしてみました。膨化した白内障に沿うような曲がり角度により、核分割が容易に可能となります。術中操作の可動域が少なく済むことで、安全性と挿入部の組織損傷を出来るだけ抑えることが可能です。」



ラウンドディバイダー

DS-016 全長 101mm / 先端 0.5×0.5mm ￥43,000 JAN:4547451336815


材 Ti 薬 クラス I JMDN 32767000 届 13B1X00048002472 入 1

view



後囊にも気を配る優れたもの。

先端部を球体によって、後囊へのダメージを気にせずに核の分割が可能です。

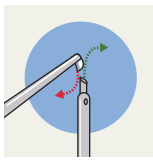深作式スナップアンドスプリットフック
核分割用

M-1100 全長 110mm / 先端 0.4×0.65mm ￥38,000 JAN:4547451030553

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 届 13B1X00048001522 入 1

「スナップアンドスプリット法」による安全な核分割を実現。

ご考案者 深作 秀春 先生 (横浜市 西区 深作眼科) コメント

「スナップアンドスプリット法やフェイコチップ法にて、安全に核を分割するフックです。先端が小さいために安全性と操作性に優れます。核分割時に後囊破囊が起こらず、核の回転や保持がしやすく、フック先を横にして超音波乳化吸引術中の後囊保護にも活躍します。また、フックの操作性が良いことで、フェムトセカンド LASIK フラップを起こす際に使うなど、多くの眼科手術時に使用できます。

スナップアンドスプリット法は、フェイコチップを中心部に吸引固定し、図のようにフックを刺入させ、お互いを矢印の方向にスナップさせます。これはY字型に伸びる水晶体線維の構造を利用したものであり、無理なくスムーズに分割する事が可能です。核中心部付近の狭い動作範囲で行えるため、チン小帯に対しても負担が軽減されます。」

memo

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ



マイクロプレチョッパー

DS-502 全長 120mm / 先端 1.5×3.5mm ￥150,000 JAN:4547451332480

材 Ti 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048002228 入 1

チタン製の「安全・快適」を追求したマイクロプレチョッパー。

先端の形状を小型、ブレード状にすることで、穿刺時の摩擦抵抗が大幅に軽減され、核の硬度に関わらずスムーズな穿刺が可能になりました。チタニウム製のため、軽量であり操作性にも優れております。



ブレードプレチョッパー

MA-001 全長 125mm / 先端 1.2×2.5mm ￥145,000 JAN:4547451327165

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048002043 入 1

「安全・快適」を追求したブレードプレチョッパー。

先端の形状を小型、ブレード状にすることで、穿刺時の摩擦抵抗が大幅に軽減され、核の硬度に関わらずスムーズな穿刺が可能になりました。



核サスティーナ

受 M-2199 全長 105mm / 先端 0.4×1.6mm ￥34,000 JAN:4547451327172

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048001887 入 1

より安全なプレチョップをサポートするサスティーナ。

核の側面をしっかりと支えられるよう、先端は緻密に計算された弱湾曲のヘラ状の面となっておりま。核の硬度が高い場合など、プレチョップをより安全に行うことが可能です。

memo



小切開核分割用鑷子 スプリングハンドル


受 **M-650** 全長 100mm / 先端 1.0×1.3mm ￥46,000 JAN:4547451032779

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001217 入 1



一手法にて核を破碎する分割鑷子。

核分割を一手法にて行う専用の器具。核を十分に浮かせた状態で、静かに溝を掘り、そこから鑷子の開く力で核を分割させます。左右均等の力で核の分割が可能のため、水晶体嚢およびチン小帯への負担軽減が期待できます。またサイドポートを作成する必要がないという利点もあります。

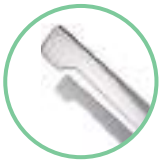

小切開核分割用鑷子 クロスアクションハンドル

受 **M-651** 全長 100mm / 先端 1.0×1.3mm ￥46,200 JAN:4547451032786

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001217 入 1



一手法にて核を破碎する分割鑷子。(クロスアクションタイプ)

核分割を一手法にて行う専用の器具。核を十分に浮かせた状態で、静かに溝を掘り、そこから鑷子の開く力で核を分割させます。左右均等の力で核の分割が可能のため、水晶体嚢およびチン小帯への負担軽減が期待できます。またサイドポートを作成する必要がないという利点もあります。

memo

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障


角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼薬
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスポーザブル

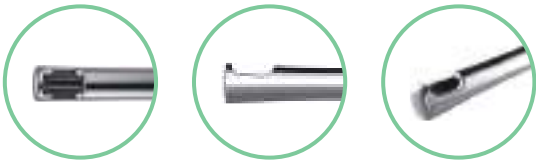

FLACS におけるゼロフェイコをサポートする I/A チップ。

ご考案者 柴 琢也 先生 コメント(東京慈恵会医科大学 眼科)
「FLACS は、レーザーを用いて水晶体を細分化することによって、その後の超音波発振を軽減させることが可能ですが、その分より吸引圧を上げる必要があります。超音波チップを用いると吸引口が後嚢側に近いため後嚢破損のリスクがあり、従来の I/A チップを用いると吸引口が小さく超音波発振がないため水晶体の吸引除去を行うには非力です。これらを解決すべく本チップを開発しました。FLACS におけるゼロフェイコを行うために有用なツールです。」

柴式 FLACS I/A チップ



受 A-011 全長 22.6 / シャフト 16mm / 内径 0.55 外径 0.85mmφ ￥200,000 JAN:4547451332718
材 SUS 薬 クラス I JMDN 38749000 屈 13B1X00048002246 入 1

Best Seller



シムコ吸引灌流カニューラ オリジナルモデル 23G

M-104 全長 35mm / 先端 19mm / 径 23G ￥30,000 JAN:4547451030454
材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899021 屈 13B1X00048001267 入 1
● 特殊 23G バイブ : 内径 0.42mm (通常 0.3mm)

コストパフォーマンスに優れたマニュアル対応 I/A 針。
吸引と灌流を 1 本で行うことが可能です。I/A をマニュアル操作し、自在にコントロール出来る点が特長です。先端は 12 時方向および創口下 (前嚢側の皮質) の皮質除去が便利に行えます。操作性とコストパフォーマンスに優れたベストセラー商品です。

【交換用パーツ】

M-104-1	針のみ	￥26,000	JAN:4547451030461
M-104-2	交換用コネクタ	￥4,200	JAN:4547451030478
M-104-3	交換用チューブ 長さ 30cm	￥600	JAN:4547451030485

材 SUS(M-104-1、M-104-2)、シリコン(M-104-3)
薬 クラス I JMDN 34899021 屈 13B1X00048001267 入 1



PICK UP

ポリッシャー機能を兼ね備える必需吸引針。

バイマニュアル法による残留皮質吸引時の吸引効率をUPさせることを目的に、吸引ポートを最先端部から、より近い位置に設けました。また、より安全な操作を目的に、最先端部の形状は鈍になっております。さらには、最先端部に簡易的なコーティングを施しておりますので、後嚢の研磨が可能となります。



松島式皮質吸引針 23G

受 M-2176 全長 31mm / シャフト 15mm / 径 23G ￥18,000 JAN:4547451321682
材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 屈 13B1X00048001457 入 1

PICK
UP

高い吸引力が魅力の皮質吸引針。

特殊パイプを使用しているため、通常の23Gより強い吸引が可能です。12時方向の皮質吸引も便利に行えます。川野式前房灌流カニューラ（M-91）との併用をお勧めいたします。



川野式上方皮質吸引針 吸引ポート 0.3mm

M-91A 全長 30mm / シャフト 14mm / 径 23G ￥8,760 JAN:4547451033127

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 届 13B1X00048000176 入 1

● 特殊 23G パイプ：内径 0.42mm（通常 0.3mm）

高い灌流量が魅力の前房灌流カニューラ。

特殊パイプを使用しているため、通常の23Gより強い灌流が可能です。川野式上方皮質吸引針（M-91A）の強い吸引力に対応しております。



川野式前房灌流カニューラ 23G

M-91 全長 33.5mm / シャフト 17.5mm / 径 23G ￥8,000 JAN:4547451033110

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 届 13B1X00048000187 入 1

● 特殊 23G パイプ：内径 0.42mm（通常 0.3mm）



前房メインテナー 23G

M-151 全長 8mm / シャフト 4mm / 径 23G ￥11,000 JAN:4547451327189

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899021 届 13B1X00048001897 入 1

インフュージョンニードル用シリコンチューブ 30cm1.4x2.5（交換用）

M-570-3 全長 30cm 1.4×2.5 ￥720 JAN:4547451323884

材 シリコン 薬 クラス I JMDN 34899021 届 13B1X00048001245 入 1

前房メインテナーのスタンダードモデル。

スタンダードな前房メインテナー。抜け防止構造となっているため、縫着の必要がなく便利です。



EID view



前囊下残留皮質をワイパーのごとくこそぎ取る優れたもの。

ご考案者 堀井 崇弘 先生（静岡市静岡市立静岡病院眼科）コメント

「白内障手術時の残留上皮細胞や残留皮質は、術後の後発白内障、前囊混濁、前囊収縮の一因であり、それらが視機能低下をもたらし、さらに眼底検査、眼底治療を困難にします。この前囊下ワイパーは、サイドポートより挿入でき、全周の前囊下残留皮質をこそぎ取ることで、よりきれいな白内障術後となります。手順は、I/A 終了後、囊内に粘弾性物質を満たしてから、この前囊下ワイパーで前囊下残留皮質を除去し、眼内レンズを挿入後 I/A にて前房洗浄すれば、ほとんど手間はかかりません。」



MOVIE

前囊下ワイパー

M-2023 全長 116mm / 先端 1.8×0.65mm ￥38,000 JAN:4547451330639

材 SUS 薬 クラス I JMDN 11701001 届 13B1X00048002104 入 1

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

ダイヤモンド バイマニュアル 灌流チップ

受	B1-21-02T	全長 38mm / 5mm Dual Ports / 径 21G	¥ 67,000	JAN:4547451336006
材	Ti	薬	クラス I	JMDN 34899031 届 13B1X00048002426 入 1



バイマニュアルハンドピース 灌流チップ用チタン Blue

受	B1-00	全長 97mm	¥ 55,000	JAN:4547451336020
材	Ti	薬	クラス I	JMDN 35384000 届 13B1X00048002427 入 1



ダイヤモンド バイマニュアル 吸引チップ

受	B2-23-01T	全長 38mm / 3mm Single Ports / 径 23G	¥ 67,000	JAN:4547451336013
材	Ti	薬	クラス I	JMDN 34899031 届 13B1X00048002426 入 1



バイマニュアルハンドピース 灌流チップ用チタン Gold

受	B2-00	全長 97mm	¥ 55,000	JAN:4547451336037
材	Ti	薬	クラス I	JMDN 35384000 届 13B1X00048002427 入 1



memo

専用
シリッジ
付属

Quick
Service

PICK
UP


DS-2022S



DS-2022L



バージョン2に進化し、性能が更に向上したレンズグラバー。
眼内レンズをワンアクションで摘出。
ICL セッティングにも最適。

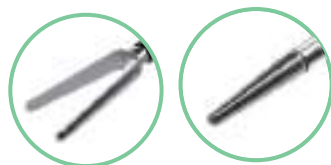

親水性レンズ
摘出

アクリル
摘出

view

MOVIE

MOVIE

野口氏 IOL 把持鑷子 19G Lens Grabber II

DS-2022S ショート 全長 137mm / シャフト 17.5mm / 径 19G ￥200,000 JAN:4547451336341

DS-2022L ロング 全長 159mm / シャフト 40.0mm / 径 19G ￥200,000 JAN:4547451336396

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002452 入 1

ご考案者 野口 三太郎 先生 コメント

(仙台市 ASUCA アイクリニック 仙台マークワン / 兵庫県 姫路市 ツカザキ病院 眼科)

「眼内レンズは眼内分割の後に小切開から摘出が基本であった。しかし、レンズグラバーを用いると、丸ごと小切開からワンアクションにて摘出可能となった。切開創の拡大もごくわずかである。特に摘出操作が困難な親水性レンズ、シリコンレンズが摘出しやすくなったのは術者にとって福音である。バージョン2に進化したレンズグラバーは、設計強度を上げることで、把持力をあげたため、ワンアクションレンズ摘出率が向上し、鑷子の被損率も低下させることが出来た。

また、これまで困難であったシリコンレンズの摘出が分割無しにワンアクションで摘出可能になり、ロングバージョンにおいては、バックマン型鑷子のように ICL を簡単、安全にカートリッジに装填することが可能になった。」

従来のレンズ鑷子




レンズグラバー



シェパード氏眼内レンズ鑷子

M-11R 全長 115mm ￥52,000 JAN:4547451041399

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000600 入 1

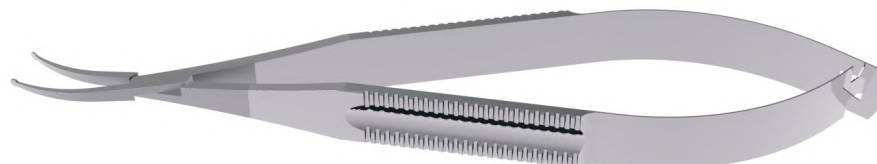

眼内レンズの摘出にも優れたレンズ鑷子。

先端の円形状によりホールド性を高め、均一の圧力でレンズを保持することが可能。近年ではレンズを摘出する際にも、面で捉えて取り出すことができるので、短時間で安全なレンズの摘出を可能にしています。

鑷子

剪刀

開眼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

H-10 眼内レンズ鑷子・眼内レンズ剪刀

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

PICK
UP



眼内レンズ鑷子 ギャスキンスフト型

M-161R ソフト用 全長 102mm ￥50,000 JAN:4547451327196

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001888 入 1

フォールダブルレンズ挿入鑷子の理想形。

フォールダブル眼内レンズを優しくホールドするよう鑷子面が湾曲となっております。また、先端は眼内レンズを傷つけることのないよう、鏡面仕上げ、角丸形状に設計しております。

Quick
Service

Best
Seller



SD view



眼内レンズ前嚢用鑷子 ギャスキン型

M-160R ハード用 全長 107mm ￥50,000 JAN:4547451041504

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048000599 入 1

ハードレンズ挿入鑷子の定番モデル。

発売以来、人気を誇る眼内レンズ挿入鑷子。主にハードレンズ用として開発された商品です。一手法における核分割鑷子としても活用することが可能です。



フォークナー氏 I.O.L. 挿入用鑷子

M-1601 ソフト用 全長 107mm ￥58,000 JAN:4547451041481

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001292 入 1

フォールダブルレンズを傷つけない鏡面加工・角丸の挿入鑷子。

先端部は鏡面加工および角丸加工しているため、ソフトレンズを傷つけません。

PICK
UP



IOL カッター チタニウム

DS-10708 全長 90mm / 刃先 5.5mm ￥84,000 JAN:4547451320821

材 Ti 薬 クラス I JMDN 35327001 届 13B1X00048001661 入 1

「滑らず・安全に・確実に」眼内レンズ切断剪刀の理想形。

IOL の入替や手術時におけるトラブルの際、IOL を眼外へ取り出すために、IOL を切断する剪刀です。刃には滑らずしっかりと切断するためのギザ加工が施してあります。また前房内の粘弾性物質の漏れを少なくするため薄刃を採用し、さらに水晶体嚢や虹彩などを傷つけないように先端は鈍になっています。

Best Seller



view

シンスキー氏型 眼内レンズポジショニング用フック

M-127C	曲	全長 99mm / 先端 0.2×0.5mm	¥ 24,000	JAN:4547451031024
M-127S	直	全長 101mm / 先端 0.2×0.5mm	¥ 24,000	JAN:4547451031031
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 32767000 屈 13B1X00048001261 入 1



眼内レンズフックのベストセラー。

IOL コントロール用のスタンダードなフックです。眼内レンズの回転、前後等の操作が行えます。直タイプとアングルタイプの 2 タイプからお選びいただけます。

Best Seller



view

眼内レンズ用プッシュアンドブルック

M-128C	曲	全長 109mm / 先端 0.7×0.7mm	¥ 26,000	JAN:4547451031048
M-128HC	30° 曲	全長 108mm / 先端 0.7×0.7mm	¥ 26,000	JAN:4547451326298
M-128S	直	全長 109mm / 先端 0.7×0.7mm	¥ 26,000	JAN:4547451031079
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 32767000 屈 13B1X00048000334 (M-128C,M-128S) 入 1 13B1X00048001831 (M-128HC)



スタンダードな溝タイプの眼内レンズフック。

先端の溝を利用して IOL コントロールを行うスタンダードなフックです。その他に、虹彩レトラクター、核分割にも使用が可能です。3 種類のシャフトのタイプからお選びいただけます。



view

眼内レンズ用プッシュアンドブルック 深溝式

M-128E	曲	全長 109mm / 先端 0.75×0.7mm	¥ 26,000	JAN:4547451031062
M-128D	直	全長 109mm / 先端 0.75×0.7mm	¥ 26,000	JAN:4547451031055
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 32767000 屈 13B1X00048001558 入 1



深溝タイプの眼内レンズフック。

よりしっかりと IOL を引っ掛けてコントロールができるよう、先端が深溝タイプとなっております。その他に、虹彩レトラクター、核分割にも使用が可能です。直タイプとアングルタイプの 2 タイプからお選びいただけます。

鑷子

剪刀

開眼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
ーテル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ



森井式眼内レンズフック “かおりの逆フック”

M-127CR 全長 98mm / 先端 0.2×0.5mm ￥30,000 JAN:4547451320029

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048000576 入 1

眼内レンズ摘出に最適な 1 本

ご考案者 森井 香織 先生（兵庫県 明石市 あさざり病院 眼科）コメント

「眼内レンズを摘出する必要があるような症例では、眼内レンズを虹彩上に引き上げる際に前房内操作が大きく、虹彩や角膜内皮に障害をあたえるきらいがあります。レンズフックは眼内レンズを回転させながら垂直下方向に操作していきますので、レンズは必ず下方向に押し込まれ、逆の上方向への動きを行おうとすると乱雑になります。この器具は、レンズフックの先端を逆方向に曲げることで、これまでの器具にはなかった前房内垂直上方向への動きをスムーズに行うことが可能です。眼内レンズ支持部に逆レンズフック先端をあて回転させると、自然にフックが眼内レンズ後面にまわり、眼内レンズが水晶体嚢から虹彩上に出てきます。また、眼内レンズ縫着時のレンズコントロールも容易にでき、白内障手術時の眼内レンズのトラブルにも、レンズフックと逆レンズフックを左右サイドポートから同時に使用することで、簡単に対応でき、便利です。」

Dual Chop テクニック

超硬い核の分割に救世主。



大内 雅之 先生（京都市 大内雅之アイクリニック）コメント

「なんとか割って処理できるか」・・・ところが、始めてみるとどうしても割れない核。時に遭遇します。硬くてチップが打ち込めなかったり、上半分だけが割れて、底の方が割れずに残ったり、分割不全には様々なパターンがあります。一度不完全な分割に陥った核は、超音波チップとフックを用いたまま水平平面上で分割動作を繰り返しても、分割操作の力が、ますます伝わりにくい形になっているので、全く異なった力を加えてやる必要があります。

核片の下に粘弾性物質を敷き、後嚢との間にスペースを作ったら、その空間で、核の下に逆レンズフックを潜り込ませます。先端は上を向いているので、後嚢とは屈曲部のみが接するため、破損の危険無く挿入出来ます。そして核を少し持ち上げたら、もう一方の手に持ったフェイスチョッパーを、こちらは核の上面から突き刺し、二本の器具で挟み撃ちするように核にめり込ませてゆきます。この時点で、多くの核は割れていますが、割れていないときは、このまま二本の器具を左右、または前後に動かすと良いでしょう。どんなに硬いタンパク質の塊も、尖った金属で挟めば、切れてくれます。逆レンズフックを使った、「Dual Chop 法」、皆様の難症例対策に、最終手段としてご用意ください。」



チタニウムレンズフック

DS-015 全長 108mm / 先端 0.4mm ￥40,000 JAN:4547451321231

材 Ti 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048001071 入 1

360 度コントロールが魅力の高機能レンズフック。

レンズ操作部の先端が球状のため、眼内レンズや組織を押し下げる際のダメージ軽減や、眼内レンズのポジショニング等における 360 度全ての方向への操作が可能な高機能レンズフックです。



ノーホールレンズ用フック

M-134 全長 108mm / 先端 1mm ￥28,000 JAN:4547451041239

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048001262 入 1

先端の分岐された異なるフックでお好みの操作を実現。

先端の分岐された異なるフックを使いわけることにより、IOL を自在にコントロールすることが可能です。また、湾曲側を虹彩レトラクターとして使用することも可能です。

PICK
UP



DIA ICL ローディング鉗子

受 **F24999** 全長 116mm / 把持面 15mm ￥118,000 JAN:4547451336983
材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048002463 入 1




DIA ICL バキュームカニュラ

受 **CW1146** 全長 131mm / 先端 1mmφ (内径 0.42×0.28mm) ￥120,000 JAN:4547451336976
材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 34899031 届 13B1X00048002462 入 1



MOVIE

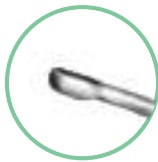

DIA Battle ICL マニピュレーター

受 **M06836** 全長 119mm / 先端 1.2mm(長)×0.7mm(幅)×0.6mm(厚) ￥56,000 JAN:4547451336952
材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 届 13B1X00048002460 入 1

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ュラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

memo

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

88



家鴨嘴型鑷子 細み

DS-900 全長 147mm / シャフト 28mm / 径 27G ￥240,000 JAN:4547451332657

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002240 入 1

“つかめる” “やぶれない” を両立した 27G 鑷子。

ご考案者 岡田 和久 先生（大分市 おかだ眼科）コメント

「既存の ILM27G 鑷子はゲージ数が小さい鑷子に比べ把持部の面積が小さくなってしまったため、しっかり把持できない（すぐに破れてしまう）ことが多く、操作に注意を払う必要がありました。この鑷子は網膜の接触部の面積を大きく、形状をなだらかにすることにより、把持力を増加させ、さらに ILM が破れにくくなっています。また、先端を鋭角にすることで“きっかけ”づくりが可能です。」

専用
シリンジ
付属

家鴨嘴型 ILM 鑷子


DS-800 全長 151.8mm / シャフト 34.6mm / 径 25G ￥230,000 JAN:4547451329084

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002002 入 1

ILM をしっかりと把持することが可能な家鴨嘴型の ILM 鑷子。

ご考案者 岡田 和久 先生（大分市 おかだ眼科）コメント

「既存の 25G ILM 鑷子は、ILM に接する面積が小さく把持力が弱く、また把持した ILM が破れやすかった。この鑷子は ILM を把持する面を大きくし、丸みをもたすことで破れにくくしています。把持力が増しているため網膜を把持すると危険ですので注意を。」

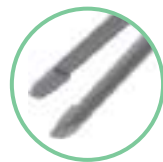専用
シリンジ
付属PICK
UP

両手法にて安全に効率よく膜処理を行うための眼内鉗子。

ご考案者 高須 逸平 先生（岡山市 北区 高須眼科）コメント

「MIVS を用いて複雑な網膜剥離（PVR）を手術するスペシャリスト向けの眼内鉗子です。両手法を用いる際に、カッターとこの鉗子、もしくは両手にこの鉗子をもって、安全に効率よく膜処理をするために考案しました。」

特徴

- ① 25G reusable forceps : MIVS 対応かつ経済的
- ② チタン製：高剛性で、難症例やハードな使用に耐える
- ③ 大きく平坦なプラットフォーム：柔らかい膜が干切れになりにくい
- ④ 尖った部分がなく、表裏がない head design：剥離網膜に対して安全
- ⑤ 0.2 mm の間隙のある大きなヘッド：剥離網膜を押さえやすい
- ⑥ 2 本使用（bimanual use）により、片方で膜を把持し、他方で網膜を押さえる。開いた間隙から strand を引き出す。
- ⑦ 小児、若年者症例にも適応。


複雑な網膜剥離症例に対する両手法

【鉗子とカッターを用いた硝子体切除】

- ・鉗子で剥離網膜を押さえつつ、カッターで硝子体を切除する。
- ・開いた鉗子の間や、サイドからはみ出してくる硝子体を切除する。
- ・鉗子で剥離網膜を押さえつつ、カッター吸引で PVD を進める。

【鉗子と鉗子を用いた膜処理】

- ・片方の鉗子で剥離網膜を押さえながら、他方の鉗子で近くの膜をはがす。
- ・両方の鉗子ではがしつつある膜を把持し、中から外方向にテンションをかけて、膜を分割剥離する。
- ・両方の鉗子を用いて、交互に引っ張って subretinal strand を抜き出す。」

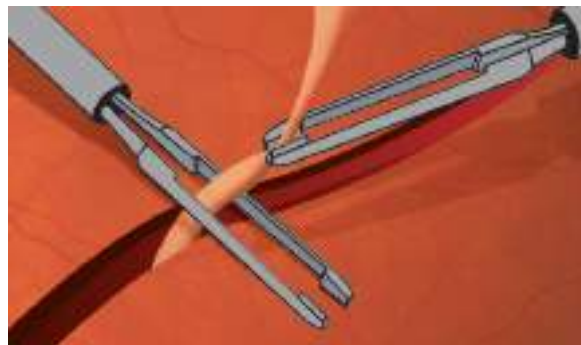

増殖膜剥離鉗子 25G “メンブレンストリッパー W”

DS-029 全長 151.5mm / シャフト 32.5mm / 径 25G ￥242,000 JAN:4547451329282

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 10861001 屈 13B1X00048002033 入 1

専用
シリンジ
付属PICK
UP

森井式 ILM 鉗子 25G

“かおりのノンセレーション”



ED view



MOVIE



MOVIE

MV-091 全長 148.5mm / シャフト 31.7mm / 径 25G ￥240,000 JAN:4547451329275

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002016 入 1

初心者でも安全に ILM 剥離が可能なノンセレーション鉗子。

先端部が無鉤・扁平にデザインされた新しいタイプの ILM 鉗子です。

ご考案者 森井 香織 先生（兵庫県 明石市 あさざり病院 眼科）コメント

「他の ILM 鉗子とは異なり、先端が無鉤にしていますが、先端に特殊なサンドブラストコーティングが施されており、ILM のみを簡単に把持することが可能です。鉗子の先端が、把持によっても位置が変わらないため（ひっこまないということ）、目標 ILM の把持を確実にしています。また、シャフト（先端部含む）が 31.7mm と長いので、長眼軸眼にも対応できます。無鉤であることで他の組織を傷めるリスクも低く、初心者にも安全に ILM 剥離を行うことができる鉗子であると考えます。」

PICK
UPロストラル ILM 鉗子 25G
ロングタイプ

ED view

DS-805 全長 156mm / シャフト 37.5mm / 径 25G ￥260,000 JAN:4547451331308

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002146 入 1

長眼軸にも対応可能な 25G ILM 鉗子。

シャフトを長くデザインしているため、長眼軸の場合においてもより処置がしやすくなっております。また先端にはサンドブラスト加工を施しているため、ILM を滑らずしっかりと把持することが可能です。

専用
シリンジ
付属PICK
UP

ILM 鉗子ファイングリップ 25G



ED view

DS-028 全長 151.0mm / シャフト 32.0mm / 径 25G ￥231,000 JAN:4547451320425

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 10861001 屈 13B1X00048000795 入 1

ファインなピックと視認性が魅力の ILM 鉗子の定番モデル。

エッカードタイプのファインな先端サンドブラスト加工が容易に ILM 剥離のきっかけをつくり、つまむように組織をしっかりと把持することが可能です。動作中の視認性にも優れた定番モデルです。

専用
シリンジ
付属PICK
UP

ILM 鉗子ピックエンド 25G



ED view

DS-802 全長 151mm / シャフト 32.5mm / 径 25G ￥230,000 JAN:4547451320432

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 10861001 屈 13B1X00048000796 入 1

使いやすい ILM 鉗子の定番モデル。

チップの先端を眼球の曲面に合わせることで、より安全で精細な ILM の繊細なきっかけづくり及び把持を実現します。

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部


関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

専用
シリンジ
付属

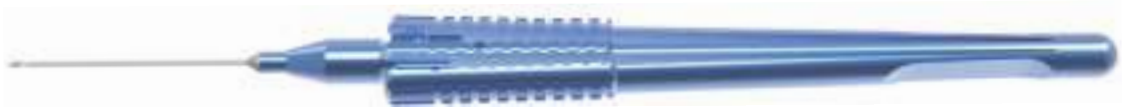

ロストラル ILM 鑷子 23G

DS-001 全長 148mm / シャフト 29mm / 径 23G ￥200,000 JAN:4547451320357

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000807 入 1

使いやすい ILM 鑷子の定番モデル。

チップの先端を眼球の曲面に合わせることで、より安全で繊細な ILM のきっかけづくり及び把持を実現します。また、ブロックパターン of のハンドルの採用により、グリップ力が向上しております。



ファイングリップ ILM 鑷子 23G

MV-071 全長 149.5mm / シャフト 32.5mm / 径 23G ￥190,000 JAN:4547451320395


材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000803 入 1

ファインなピックと視認性が魅力の ILM 鑷子の定番モデル。

エッカードタイプのファインな先端サンドブラスト加工が容易に I L M 剥離のきっかけをつくり、つまむように組織をしっかりと把持することが可能です。動作中の視認性にも優れた定番モデルです。

memo

専用
シリンジ
付属

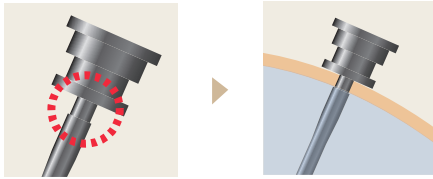

抜け防止加工（適度な窪み）

トロカールカニューラ 27G


受 **TR-078** 全長 5.9mm / 径 27G ￥27,500 JAN:4547451327868

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12989001 届 13B1X00048001928 入 1

トロカールカニューラ 27G 用インサーター

受 **TR-078-ISB** 2ステップ用 全長 45mm ￥15,400 JAN:4547451327851

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12989001 届 13B1X00048001928 入 1

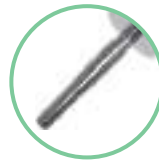

TR-078



4mm

TR-078-ISB



専用インサーター（2ステップ用）

27G 極小切開硝子体手術に対応するトロカールカニューラ。

27G 硝子体手術の際に、器具の出し入れ用のガイドとしてポートに留置して使用します。左図のように装着時の抜け防止加工を施しているため、安定した操作を行うことが可能です。



堀尾・田中式テーパーードトロカール 23/25G

TR-077N 全長 5.8mm / 径 23/25G ￥27,000 JAN:4547451323303

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12989001 届 13B1X00048001480 入 1

堀尾・田中式テーパーードトロカール用インサーター

TR-077N-ISB 23/25G 用 全長 45mm ￥15,400 JAN:4547451323310

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12989001 届 13B1X00048001648 入 1

TR-077N



4mm

TR-077N-ISB



専用インサーター（2ステップ用）

クロージャーバルブの装着が可能な 25G トロカール。

当社 TR-077 テーパーードトロカールのニードル部分を 4mm とし、先端部をより挿入抵抗の少ない形状にモディファイさせ、6本のラインを設ける事により抜け防止に有効な形状となりました。

ご考案者 堀尾 直市 先生（岐阜市 岐阜ほりお眼科）コメント

「クロージャーバルブの装着により術中の眼圧が安定し、挿入部の形状はすり鉢状なので、器具の挿入が容易です。カニューラ根部の滑り止めを加え、強膜創口を变形することなく、トロカールが抜ける危険性が少なくなりました。カニューラの長さは 4mm で、成人の硝子体手術にも使用できます。」

東京女子医科大学式
テーパーードトロカール 23/25G

受 **TR-007** 全長 4.8mm / 径 23/25G ￥22,000 JAN:4547451320548

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12989001 届 13B1X00048001481 入 1



3mm

1 ポート硝子体手術が可能な 25G トロカール。

当社 TR-006 クロージャーバルブ（別売）の装着が可能であり、25G 硝子体手術器具のクロージャーバルブを通しての眼内への挿入が可能となります。また、インフュージョンニードルのチューブに、本器具を装着することにより、瞼裂の狭い新生児などの one-port 硝子体手術が可能となります。

ご考案者 田中 住美 先生（名古屋市 中村区 アイケア名古屋）コメント

「23G Closure Valve が装着可能な 25G 硝子体手術用の TrocarCannula です。通常の 25G Trocar Cannula と異なり、器具の挿入部分がすり鉢状の形状をしていますので、Closure Valve を通しても容易に 25G 硝子体手術器具を挿入することができます。Closure Valve の装着により、器具の抜去時の眼圧の変動を抑制することが可能です。」



トロカールカニューラ

TR-007 全長 6mm / 径 23G ￥17,600 JAN:4547451320548

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12989001 届 13B1X00048001365 入 1



4mm

23G 小切開硝子体手術用トロカール。

23G 硝子体手術の際に、器具の出し入れ用のガイドとしてポートに留置して使用します。筒の部分に抜け防止の加工を施しております。

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイポータル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

クロージャールバルブ

TR-006	全長 3.4mm	¥ 3,600	JAN:4547451320531
材	シリコン	薬	クラス I
	JMDN	12989001	届
	13B1X00048001365	入	1

トロカールカニユーラに被せて使用する必需品。

小切開硝子体手術の際に、トロカールカニユーラに被せて使用する必需品です。眼内液の漏れを防ぐための弁の役割を果たします。シリコン製のため器具の出し入れが容易に行えます。

プラントインサーター

TR-004	2ステップ用	全長 45mm	¥ 15,400	JAN:4547451320500
材	SUS	薬	クラス I	JMDN
	12989001	届	13B1X00048001365	入
				1

2ステップアプローチのインサーター。

23G トロカールをポートに装着する際に、ガイドとして使用いたします。

トロカール用インフュージョンカニユーラ。

インサートタイプのインフュージョンカニユーラ。ポートの差し替えが容易に行えます。

インサートインフュージョンカニユーラ 23G

TR-010	先端 6mm / チューブ 300mm	¥ 14,300	JAN:4547451320883
材	SUS、シリコン	薬	クラス I
	JMDN	12989001	届
	13B1X00048001365	入	1

トロカール用インフュージョンカニユーラ。

インサートタイプのインフュージョンカニユーラ。ポートの差し替えが容易に行えます。

インサートインフュージョンカニユーラ 25G


TR-071	先端 6mm / チューブ 300mm	¥ 15,000	JAN:4547451329091
材	SUS、シリコン	薬	クラス I
	JMDN	34899021	届
	13B1X00048001999	入	1

インフュージョンカニユーラ専用チューブ。

TR-008 インフュージョンカニユーラと接続して使用します。

インフュージョンライン

TR-005	全長 29.5mm	¥ 2,400	JAN:4547451320517
材	シリコン	薬	クラス I
	JMDN	12989001	届
	13B1X00048001364	入	1

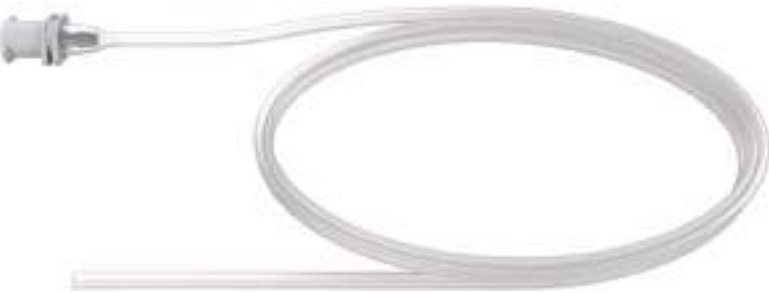



インフュージョンカニューラ

TR-008 23G 用 全長 7mm ￥15,400 JAN:4547451320555

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12989001 届 13B1X00048001364 入 1

23G トロカール用インフュージョンカニューラ。

TR-005 インフュージョンラインと接続して使用します。



堀尾式半月型プレッシャープレート

TR-073 全長 83.5mm ￥69,120 JAN:4547451329114

材 SUS 薬 クラス I JMDN 13381001 届 13B1X00048002001 入 1

あらゆる課題を解決する半月型プレッシャープレート。

ご考案者 堀尾 直市 先生（岐阜市 岐阜ほりお眼科）コメント

「形状を半月型にすることによって、瞼裂が小さい人にも容易に使用できます。眼球保持も良好で、結膜と強膜の圧迫がしっかりと行なえるため、2ステップ法でも創口を見失うことなくトロカールの挿入が行なえます。3.5mmの半円状なので、輪部からの距離が容易に測定できます。また、プレートの先端部分で刺入すれば、輪部から4mmになります。」



プレッシャープレート ダブルサーキュラーセレーション付

TR-003N 全長 83.5mm ￥69,000 JAN:4547451320524

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12989001 届 13B1X00048001365 入 1

結膜隆起を防いで的確な挿入をサポート。


ダブルサーキュラーセレーションの内刃が内径部の結膜隆起を防ぎ、的確な挿入を可能にします。

トロカール関連商品収納滅菌ケース。
トロカール関連商品を収納することが可能な滅菌ケースです。

滅菌ケース

TR-009 サイズ 166×72mm ￥22,000 JAN:4547451320562

薬 クラス I JMDN 12989001 届 13B1X00048001365 入 1

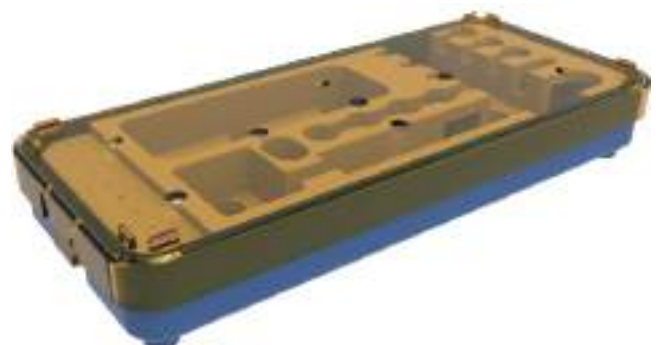

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイ

AtoZ



トロカールを自在にしっかり保持できる優れもの。

ご考案者 堀尾 直市 先生（岐阜市 岐阜ほりお眼科）コメント

「先端の鉤が4つあるため、トロカールの側面からカラー部分を挟み込むようにしっかりと保持できます。また、クロージャールバルブの上からでも、カニユーラの円形部分を上下から挟み込むことができます。しっかりとした保持力により、抜去したトロカールが滑ったり、飛んだりすることがありません。また、鉤の先端が通常より大きいので、創口が閉じにくいときは、先端で抑えて閉鎖を計ることが可能です。」

堀尾式トロカール鑷子

受	TR-072	全長 110mm	¥41,800	JAN:4547451329107
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 16209001
届	13B1X00048002000	入	1	



トロカールカニユーラをぴったり把持する専用鑷子。

先端の湾曲はトロカールカニユーラをぴったり把持することが可能です。スムーズなオペレーションをサポートします。

トロカールカニユーラ用フォーセップス

TR-002		全長 87.5mm		¥ 46,200		JAN:4547451320494			
材	Ti	薬	クラス I	JMDN	12989001	届	13B1X00048001365	入	1

memo



25G トロカールセット

セットコード	セット価格	セット内容	入数
TR-070	¥ 210,000	TR-072 堀尾式トロカール鑷子	1
		TR-073 堀尾式半月型プレッシャープレート	1
		TR-077N 堀尾・田中式テーパーードトロカール 23/25G	3
		TR-077N-ISB 堀尾・田中式テーパーードトロカール用インサーター	3
		TR-006 クロージャーバルブ	3
		TR-071 インサートインフュージョンカニューラ 25G (ライン付)	1
		TR-009 滅菌ケース	1

薬 クラス I 入 1

術中のポートの差し替えが可能な
25G トローカルセット。

25G 小切開硝子体手術時に器具の出し入れを行うためのガイドセットです。インフュージョンカニューラがインサート用であるため、カニューラのポートの差し替えが容易に行えます。



23G トロカールセット 2

セットコード	セット価格	セット内容	入数
TR-001N	¥ 189,000	TR-002 トロカールカニューラ用フォーセップス	1
		TR-003N プレッシャープレート ダブルサーキュラーセレーション付	1
		TR-004 プラントインサーター	3
		TR-006 クロージャーバルブ	3
		TR-007 トロカールカニューラ	3
		TR-010 インサートインフュージョンカニューラ 23G (ライン付)	1
		TR-009 滅菌ケース	1

薬 クラス I JMDN 12989001 届 13B1X00048001365 入 1 JAN:4547451321460

術中のポートの差し替えが可能な
23G トローカルセット。

23G 小切開硝子体手術時に器具の出し入れを行うためのガイドセットです。インフュージョンカニューラがインサート用であるため、カニューラのポートの差し替えが容易に行えます。

鑷子

剪刀

開眼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

単

Best
Seller

RB-40-2



岡田氏網膜ブラシ ビットスウィーパー

25G	受 RB-700H-25N	専用ハンドル	108mm	¥82,000	JAN:4547451321606
	RB-40-2	替ブラシ	15mm / 全長 95mm	¥12,100	JAN:4946585278761
23G	受 RB-700H-23N	専用ハンドル	108mm	¥86,400	JAN:4547451321170
	RB-40-2	替ブラシ	15mm / 全長 95mm	¥12,100	JAN:4946585278761
材 SUS 薬 クラス I JMDN 34880000 届 13B1X00048001229(RB-700H-25N) 入 1 13B1X00048001229(RB-700H-23N) 12B1X00005000012(RB-40-2)					

より安全に硝子体皮質を除去できるイノベーションアイテム。

硝子体手術において、カッターで硝子体切除後、可視化した残存硝子体を掃くように除去することができます。レバー部の操作により、ブラシの長さを無段階に調節することが可能です。このため、ブラシのコシの強さを自在に変えることができ、網膜に対する影響を最小限に抑えられます。トロカール挿入時は、ブラシをシャフトに収納することで、ブラシのけばだちの防止、そしてストレスのない挿入操作を行うことが可能です。



竹内式メンブレインピック

受	M-579-25	25G	全長 117mm	¥36,300	JAN:4547451321200
	M-579-23	23G	全長 117mm	¥38,000	JAN:4547451321194
材 SUS 薬 クラス I JMDN 32754001 届 13B1X00048001227 入 1					

きっかりづくりに有用な硝子体ピック。

内境界膜剥離、網膜下増殖の手術に有用なピックです。小切開硝子体手術におけるトロカール対応の 23G、25G 用をラインナップしております。

memo

R3

PICK
UP

鑷子

剪刀

開眼器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

97



エクストルージョンタイプ

バリエーション豊かなバックフラッシュハンドピース。

眼内液や血液の確実な受動または能動吸引が可能です。また、先端のシリコンチップが、網膜を安全に擦過し、残存硝子体皮質を効率的に除去します。その他には後部硝子体剥離のきっかけづくりにも活用できます。3回までのリユースが可能なコストパフォーマンスに優れている点も魅力です。

バックフラッシュハンドピース ハンドル付きセット

M-562A-27B	27G	全長 145mm / 先端 1mm	¥ 50,000	JAN:4547451327899
M-562A-25B	25G	全長 141mm / 先端 1mm	¥ 48,000	JAN:4547451321798
M-562A-23B	23G	全長 141mm / 先端 1mm	¥ 48,000	JAN:4547451321781
材 SUS 薬 クラス I JMDN 38749000 届 13B1X00048001448 入 1				

バックフラッシュハンドピース ハンドル付きセット
エクストルージョンタイプ

M-562C-27B	27G	全長 145mm / 先端 1mm	¥ 52,000	JAN:4547451327882
M-562C-25B	25G	全長 141mm / 先端 1mm	¥ 50,000	JAN:4547451321811
M-562C-23B	23G	全長 141mm / 先端 1mm	¥ 50,000	JAN:4547451321804
材 SUS 薬 クラス I JMDN 38749000 届 13B1X00048001448 入 1				



M-562AH

M-562CH

【交換用バックフラッシュハンドピース 本体】

M-562AH	全長 105mm	¥ 33,000	JAN:4547451032458
材 SUS 薬 クラス I JMDN 38749000 届 13B1X00048001448 入 1			

【交換用バックフラッシュハンドピース エクストルージョン本体】

M-562CH	全長 105mm	¥ 33,000	JAN:4547451032489
材 SUS 薬 クラス I JMDN 38749000 届 13B1X00048001448 入 1			

【交換用ニードル】

R3



ブラッシュニードル 3 本入（交換用）

M-562E-27B	27G	全長 49mm / 先端 1mm	¥ 33,000	JAN:4547451327875
M-562E-25B	25G	全長 49mm / 先端 1mm	¥ 29,700	JAN:4547451321835
M-562E-23B	23G	全長 49mm / 先端 1mm	¥ 29,700	JAN:4547451321828
材 SUS、シリコン 薬 クラス I JMDN 38749000 届 13B1X00048001448 入 3				

【交換用シリコンパーツ】



M-562B

M-562D

シリコンパーツ 5 ケ入（交換用）

M-562B	-	全長 35mm	¥ 8,160	JAN:4547451032465
M-562D	エクストルージョン用	全長 150mm	¥ 11,000	JAN:4547451032496
材 シリコン 薬 クラス I JMDN 38749000 届 13B1X00048001448 入 5				

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

R3

PICK
UP




硝子体手術の広角観察システムに対応するバックフラッシュ。

網膜・硝子体手術における広角眼底観察装置のアダプター部分への接触を防ぐことなどを目的に、ハンドルと先端部の接続部が、ペンシル形（円錐状）に設計されました。また、強度近視眼に対する操作を行ないやすくすることなどを目的に、先端部のブラッシュニードルは従来タイプより長くなっております。

ペンシル形（円錐状）の接続部は、従来タイプの接続部（円柱状）に比べ、より先端部へ向けて長くなっております。ペンシル形接続部の先端から吸引・バックフラッシュ用ポートへの距離を従来タイプと同一にするために、シリコンパーツ（M-550D）の先端側（装着部）をカットすることにより、吸引・バックフラッシュ用ポートの位置を、従来品より先端部へ近付けました。

喜多式バックフラッシュハンドピース
エクストルージョン ハンドル付きセット

M-550A-25B	25G	全長 151mm / 先端 0.8mm	¥ 50,000	JAN:4547451325802
M-550A-23B	23G	全長 151mm / 先端 0.8mm	¥ 50,000	JAN:4547451325291
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 38749000	届 13B1X00048001776	入 1

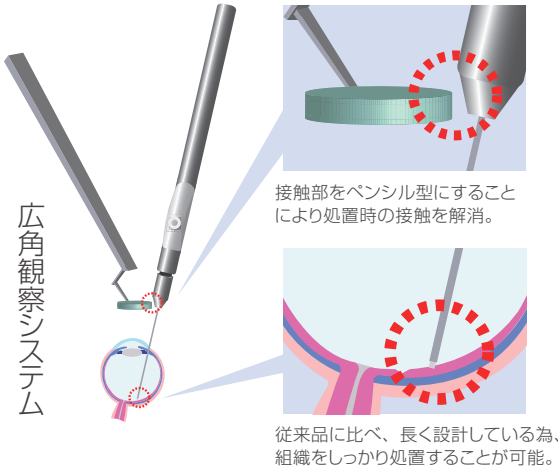

【交換用 喜多式バックフラッシュハンドピース 本体】

M-550AH	全長 109mm	¥ 35,200	JAN:4547451325833
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 38749000	届 13B1X00048001776

【交換用ニードル】

R3

【交換用シリコンパーツ】



喜多式ブラッシュニードル 3 本入（交換用）


M-550E-25B	25G	全長 53mm / 先端 0.8mm	¥ 33,000	JAN:4547451325819
M-550E-23B	23G	全長 53mm / 先端 0.8mm	¥ 33,000	JAN:4547451325307
材 SUS、シリコン	薬 クラス I	JMDN 38749000	届 13B1X00048001776	入 3

シリコンパーツ 5 ケ入（交換用）


M-550D	エクストルージョンタイプ	全長 146mm	¥ 11,000	JAN:4547451325314
材 シリコン	薬 クラス I	JMDN 38749000	届 13B1X00048001776	入 5

R3


PICK UP

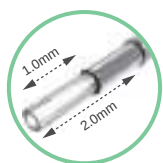

眼内挿入時

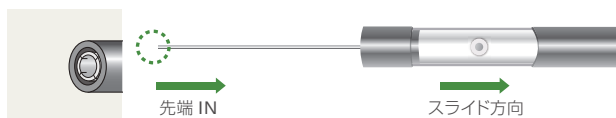

操作時

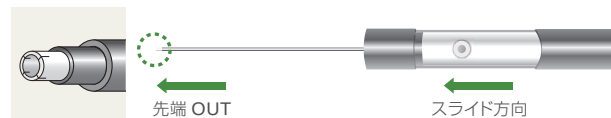

スライド式バックフラッシュニードル エクストルージョン

M-555 25G 全長 132mm / 先端 1mm ¥52,000 JAN:4547451327202

材 SUS 薬 クラス I JMDN 38749000 届 13B1X00048001889 入 1

先端が IN/OUT 可能なバックフラッシュ。

先端のシリコンブラシを挿入時にパイプ内に収納できるため、安全、そしてスムーズに操作することが可能です。眼内液や血液の確実な受動または能動吸引が可能です。また、先端のシリコンチップが、網膜を安全に擦過し、残存硝子体皮質を効率的に除去します。その他には後部硝子体剥離のきっかけづくりにも活用できます。3 回までのリユースが可能なコストパフォーマンスに優れている点も魅力です。



インフュージョンニードル

M-571 20G 先端 4mm ¥12,100 JAN:4547451037514

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899021 届 13B1X00048001245 入 1

【交換用 インフュージョンニードル用シリコンチューブ】

M-570-3 全長 30cm 内 1.4mm×外 2.5mm ¥720 JAN:4547451323884

材 シリコン 薬 クラス I JMDN 34899021 届 13B1X00048001245 入 1

スタンダードな灌流用ニードル。

強膜ポートに達着固定して使用する灌流用ニードル。



ソフトテーパードニードル (6 本入)

M-563S 20G 全長 53mm / シャフト 35mm ¥25,000 JAN:4547451032533

材 SUS、シリコン 薬 クラス I JMDN 34899031 届 13B1X00048000177 入 6

組織に対する安全面を考慮したシリコンチップ。

網膜下液の吸引などに使用します。先端がシリコンチップになっているため、網膜に対して安全に操作することが可能です。

R3



鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜


外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイザブル

AtoZ

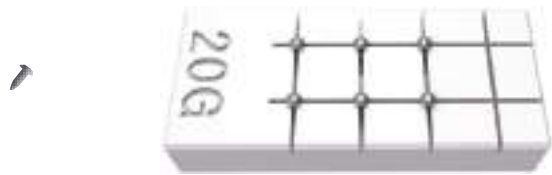

チタニウム製強膜プラグ（6 ケ入）

M-575A	20G	全長 3.55mm	¥ 25,000	JAN:4547451313793
材	Ti	薬	クラス I	JMDN 70945000
届	13B1X00048000370	入	6	

強膜ポートの一時的遮蔽に使用する必需品。
使用していない強膜ポートを一時的に遮蔽するために使用する強膜プラグ。




Best Seller

プラグフォーセップス

M-560		全長 110mm		¥ 40,000		JAN:4547451042099			
材	SUS	薬	クラス I	JMDN	16209001	届	13B1X00048000427	入	1

強膜プラグを確実に把持する専用鑷子。
器具の挿入口を一時的に遮蔽するプラグの着脱に便利な鑷子です。プラグを確実につかむために鑷子の先端にはプラグの頭部に合致する凹面がつけられています。

memo

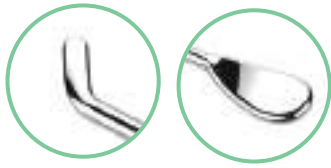

ワイドビューイングシステムに干渉せず、あらゆる場面で使い分けられる両頭圧迫器。



米田式眼球圧迫器

M-141Y 全長 122mm / 先端 3×8.2mm / 6×10.5mm / ￥32,000 JAN:4547451336327

材 SUS 薬 クラス I JMDN 33804000 屈 13B1X00048002438 入 1

ご考案者 米田 一仁 先生（昴会アイセーター / さくら眼科グループ）コメント

「曲がりの方は、斜視鉤やプラグ鉤のように圧迫器の持ち手の回旋による圧迫が可能のため、ワイドビューイングシステムと干渉せず圧迫が可能です。また、表面を可能な限りスムーズにしたため、結膜上を滑るように移動出来、一度の圧迫で広い範囲をインデント可能です。面になっている方は、一ヶ所の圧迫で広い範囲を視認したい場合に有効であり、裂孔の光凝固や汎網膜光凝固を眼内レーザーで行う時に有効です。」



小切開硝子体手術対応の課題解決型 360° ローラー圧迫器。

ご考案者 服部 隆幸 先生（駿河台日本大学病院 眼科）コメント

「硝子体手術は 25G・23G システムの導入で、より一層の低侵襲化が進んでいます。しかしながら、実際の手技は 20G システムと何ら変わることがなく、特に眼球圧迫下での周辺硝子体切除は、wide viewing システムの有無にかかわらず重要な手技です。眼球圧迫に用いる圧迫器具に共通する欠点として、『ビットとよばれる医源性結膜裂傷を生じる』『術野を移動する際に、スムーズに移動できない』などが挙げられます。このような問題点を解決するために、先端部に 360 度回転可能な滑車を取り付け、その滑車部分を結膜や強膜上で転がしながら、眼球の圧迫を行うことが可能な器具を開発しました。特に 25G・23G システムでの硝子体手術においては、結膜を切開せず、直接結膜上から眼球の圧迫を行うため、ローラー効果により、結膜へのビットを回避する点において大変有効です。また、圧迫したまま術野の移動が可能であり、周辺硝子体の処理時間の短縮に貢献するだけでなく、移動時の眼圧変動を最小限にすることが可能になることから、硝子体の創口への陥頓に起因する合併症を防止することに繋がります。」

服部式滑車型眼球圧迫器 極小

受 **M-2061SS** 全長 109mm / 滑車 2mmφ / 6.5mm ￥50,000 JAN:4547451321217

材 SUS 薬 クラス I JMDN 33804000 屈 13B1X00048000555 入 1



状況に応じて使い分けられる万能圧迫器。

ご考案者 上村 昭典 先生（鹿児島市立病院 眼科）コメント

「強膜圧迫によく使われている斜視鉤と強膜プラグ鉤の中間の形を採用し、柄の部分と先端部に 120 度の角度をつけた単純な構造です。先端部は均一の丸みを帯びた棒状としました。結膜上あるいは部分的結膜切開創から結膜下に潜り込ませて使用することで、結膜全周切開することなくほぼ 360 度の眼底周辺部、赤道部の圧迫・観察が可能です。また先端部を子午線方向に向けると後極部に近い部分まで圧迫できます。先端は小型なため、小さい眼球、瞼裂のせまい例、あるいは小切開硝子体手術用として使用できます。小切開硝子体手術では結膜上からの使用が基本ですが、必要に応じて小さな結膜切開創から結膜下に潜り込ませ、下方や鼻側道部の圧迫が可能です。先端部が丸みを帯びた形状のため結膜下での移動も容易で、眼球周辺部赤道部を連続的に圧迫できます。」

上村式眼球圧迫器 小

M-2067S 全長 101mm / 径 1.5mmφ ￥35,000 JAN:4547451320265

材 SUS 薬 クラス I JMDN 33804000 屈 13B1X00048000706 入 1

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜


外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイ

AtoZ

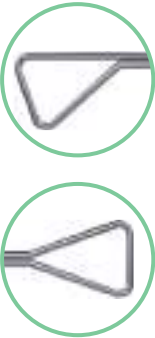

小切開硝子体手術におけるスムーズな圧迫を実現。

三角状の圧迫子を両端に取り付け、片方は直型のため、真直ぐに圧迫が可能であり、反対側には 20 度の傾斜の付いた同サイズの圧迫子を取り付け、圧迫部位により両頭を使い分けることにより、小切開硝子体手術におけるスムーズな圧迫を行うことを目的に開発されました。

ご考案者 柴 宏治 先生（大阪市 旭区 柴眼科医院）コメント

「小切開硝子体手術（MIVS）を行う際、従来の 20G による硝子体手術と同じ手術操作を行う上で、もっとも術者が手術操作を行い辛く感じる操作のひとつに強膜圧迫操作があると思います。強膜圧迫は圧迫子が結膜上から強膜を圧迫する際に、結膜と圧迫子の接触面積が大きければ大きいほど圧迫を行い辛く感じるものと思われます。そこで、新しく開発した MIVS 用強膜圧迫子は、結膜をできるだけ巻き込まずに、また、強度を持たせ、視認性をよくするためにワイヤーループの形状を採用しました。20 度の角度がついた側の形状は、上方または下方を圧迫する際に圧迫しやすいように設計されています。三角の底辺または頂点部分を結膜円蓋部に滑り込ませることにより、結膜嚢の小さい圧迫困難症例に対してもスムーズな圧迫操作が可能です。」

柴式 MIVS 用強膜圧迫子

受	M-2081	全長 128mm / 先端 0.5mm φ / 5mm	¥ 35,000	JAN:4547451321163
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 33804000 届 13B1X00048001077 入 1



大島式眼球圧迫器

M-141L	大	全長 135mm 円柱 5.5mm 球 3mm	¥ 28,000	JAN:4547451320104
M-141P	未熟児用	全長 120mm 円柱 4.5mm 球 2mm	¥ 25,000	JAN:4547451320098
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 33804000 届 13B1X00048001559 入 1

両頭、滑りどめ加工の眼球圧迫器。

先端に滑りどめの加工が施してある両頭の眼球圧迫器。面による圧迫と点による圧迫を、用途、状況により使い分けることが可能です。2 種類のサイズよりお選びいただけます。

Best Seller



田野氏眼球圧迫器

M-141T	全長 105mm 左側 12.4mm×4mm 右側 3mm×7mm			¥ 28,000	JAN:4547451320111
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 33804000 届 13B1X00048000356	入 1

綿棒の形状が使いやすいベストセラーの眼球圧迫器。

ベストセラーの両頭眼球圧迫器。片側は綿棒形状、滑り止め加工で操作性に優れております。面による圧迫と点による圧迫を、用途、状況により使い分けることが可能です。

memo



安藤氏眼球圧迫器

M-141	全長 147mm 円柱 5.5mm 球 3mm	¥ 30,000	JAN:4547451320197
材	SUS 薬 クラス I JMDN 33804000 屈 13B1X00048001318 入 1		

ロングサイズの両頭圧迫器。

クラシックでロングサイズの眼球圧迫器。面による圧迫と点による圧迫を、用途、状況により使い分けることが可能です。



五十嵐氏未熟児鉤

M-1135	大 全長 78mm / 先端 7×7.5mm	¥ 20,000	JAN:4547451030867
M-1136	小 全長 78mm / 先端 5×5.5mm	¥ 20,000	JAN:4547451030874
材	SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048001484 入 1		

安全でスムーズな操作が可能なショートタイプ未熟児鉤。

未熟児の眼底検査を行う際、未熟児の眼球を操作し、固定するために使用します。鉤を押し込んだ方向に、眼球が回転するため、眼底周辺まで容易に観察することが可能です。シャフトの角度と長さは、器具の柄の部分で、顔面などに衝突してしまうことがないように設計しております。



SD view



未熟児鉤

M-112	全長 120mm / 先端 7.5×8mm	¥ 17,000	JAN:4547451320159
材	SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048000343 入 1		

未熟児鉤のスタンダード。

未熟児の眼底検査を行う際、未熟児の眼球を操作し、固定するために使用します。鉤を押し込んだ方向に、眼球が回転するため、眼底周辺まで容易に観察することが可能です。

memo

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイ

AtoZ

104



デシャン

KI-80A	右	全長 131mm	¥ 20,000	JAN:4547451030256
KI-80B	左	全長 131mm	¥ 20,000	JAN:4547451030263
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 32767000 届 13B1X00048001581 入 1

スムーズな通糸が可能な穴あき鉤。

眼筋にひっかけ、先端の穴を利用して眼筋の裏にスムーズに通糸することが可能です。



マイヤー・シュビッケラート氏ロカリゼーター

M-115R	全長 125mm	¥ 20,000	JAN:4547451041382						
材	SUS	薬	クラス I	JMDN	32767000	届	13B1X00048001420	入	1

網膜裂孔部位を圧迫、マーキングする必需品。

裂孔位置と推測される部位に、強膜面から先端の球を利用して圧迫します。隆起部位と裂孔部の位置関係が確認された際に、先端の突起を利用し、マーキングすることが可能です。網膜下液の廃液にも使用できます。



view



PICK UP

術野の展開と液体の除去を同時に 1 本で行える優れモノ。

裂孔原性網膜剥離に対する強膜バックリング術において、良好な術野の視認性を得るために、術野の展開、術野に貯留する液体の除去などを適切に行なう必要があり、この術野の展開と液体の除去（吸引）を別々の作業として従来は行なわれていたが、本器具は、術野の展開に用いるスパーテルに吸引機能を付加し、術野の展開と液体の吸引を片手で同時に行なえることを目的として開発されました。把持部にある調節ポートを指で開閉操作することにより、吸引機能を調節・停止できるように設計されています。調節ポートから指を離してフルオープンにすれば、瞬時に吸引を停止させることが可能となります。




シリコンスリーブへの挿入を容易にこなす優れモノ。

ご考案者 深水 真 先生（千葉県 流山市 千葉愛友会記念病院 眼科）コメント

「バックリングは勿論、硝子体手術においてももしばしば輪状締結術を追加する機会がありますが、その際バンドの両端をシリコンスリーブに挿入するのに難渋した経験は誰しもお持ちではないでしょうか。このプラグ鑷子の根元の太い部分までスリーブに挿入し、鑷子を開くことでスリーブが長方形に開き、術者一人でも容易にバンドを挿入することが可能です。」

深水式エンサークリング・プラグ鑷子

M-2198		全長 109mm	¥ 48,000	JAN:4547451327219	
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 16209001	届 13B1X00048001890
				入	1

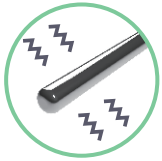

臼井式眼内マグネット 25G

M-582 全長 119mm / 磁石部：先端 2mm ￥42,000 JAN:4547451333418

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35495000 届 13B1X00048002430 入 1

眼内異物を簡単吸着・除去。

先端にマグネットを内蔵しており、眼内異物を簡単に吸着・除去することが可能です。

memo

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ



谷戸氏 GSL 用スパーテル


S-89 全長 114mm / 先端 0.05X0.9mm ￥28,000 JAN:4547451336792

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32754001 屈 13B1X00048002473 入 1


MIGS に伴い、進化した GSL 用スパーテル。

ご考案者 谷戸 正樹 先生 コメント（島根大学医学部眼科学講座 教授）

「隅角癒着解離術を行うためのスパーテルです。スパーテル先端で周辺虹彩前癒着を押し下げるようにして使用します。スパーテル先端は、従来の隅着癒着解離用器具と異なり、線で癒着を剥離できるようにチョウ葉型にデザインされています。また、スパーテル先端は適度な面積を有し、虹彩にめり込み難い構造になっています。」

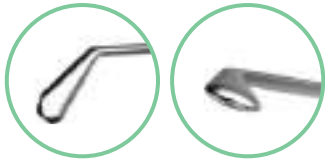

S-87R

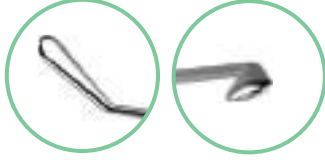

S-87L



上野式極細癒着解離針

S-87R 右 全長 114mm ￥23,000 JAN:4547451035787

S-87L 左 全長 114mm ￥23,000 JAN:4547451035770

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32754001 屈 13B1X00048000456 入 1

左右の解離針でスムーズで丁寧な隅角癒着解離を実現。

隅角癒着解離術（GSL）に使用します。作成した小切開創から挿入可能とするため極細かつ挿入角度が調整できるよう設計しております。小穿孔創から対側の虹彩周辺部まで針先をすすめ、PAS(周辺虹彩前癒着) の先端を丁寧に押し広げ、先端のエッジでスムーズな癒着解離を行うことが可能です。

灌流付きで隅角を押し広げつつ広範囲を解離。

粘弾性物質のシリンジを接続し、前房内へ挿入させます。隅角プリズムを利用しつつ、広範囲（ 左側解離：1 時から 5 時程度、右側解離：7 時から 11 時 ）の隅角の癒着を解離することが可能です。また、出血や前房が浅くなることなどが発生した際には粘弾性物質や還流液を注入し、隅角を押し広げることが可能です。22G と 25G タイプがあり、それぞれ右側解離、左側解離用を用意しております。

永田氏隅角癒着解離針 アングル型

M-580C 左 22G 全長 47mm ￥8,000 JAN:4547451032656

M-580D 右 22G 全長 47mm ￥8,000 JAN:4547451032663

M-580E 右 25G 全長 47mm ￥8,000 JAN:4547451032670

M-580F 左 25G 全長 47mm ￥8,000 JAN:4547451032687

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 屈 13B1X00048000291 入 1



M-580D
M-580E



M-580C
M-580F



TANITO MICRO HOOK
TMH®
Original-ed.

滅菌
トレー
付属

Best
Seller

M-2215SS

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

107



M-2215S



M-2215L



M-2215R



谷戸氏 ab interno
トラベクトロミーマイクロフック



M-2215S	直	全長 101mm	¥ 36,000	JAN:4547451332404
M-2215L	左	全長 100mm	¥ 36,000	JAN:4547451332398
M-2215R	右	全長 100mm	¥ 36,000	JAN:4547451332381
M-2215SS	3 種セット		¥ 105,000	

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32761000 届 13B1X00048002217 入 1

トラベクトロミーを眼内アプローチで行う専用フック。

ご考案者 谷戸 正樹 先生 コメント（島根大学医学部眼科学講座 教授）


「眼内アプローチでトラベクトロミーを行うための専用フックである。耳側・上方からのアプローチに適したストレートタイプと鼻側からのアプローチに適した左右向きのアングルタイプがある。隅角プリズム観察下に、フック先端を、線維柱帯色素帯に沿って滑らせるようにシュレム氏管内に刺入する事で、そのままトラベクトロミーに移行できる。フック先端が線維柱帯に透けて見える深さが適切である。シュレム氏管外壁の損傷を避けるために、フック先端の刺入が深すぎる場合に線維柱帯切開時の抵抗を感じる先端デザインとなっており、その場合には、やや浅い位置にフック先端を引いて、抵抗の無い深さでトラベクトロミーを行う。」



M-2215SS 3 本セットは滅菌トレー付き

M-2700A

滅菌トレー 3 本用（参考価格 28,000 円）

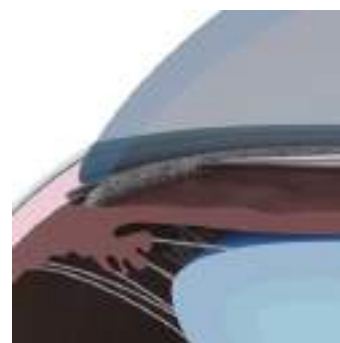

memo

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他

- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障

- 角膜
- 外眼部

- 関連用品

- サージカルナイフ

- ディスプレイ

- AtoZ


TANITO MICRO HOOK
TMH[®]
庄司 ed.

滅菌
トレー
付属


PICK
UP

Best
Seller

M-2220SS

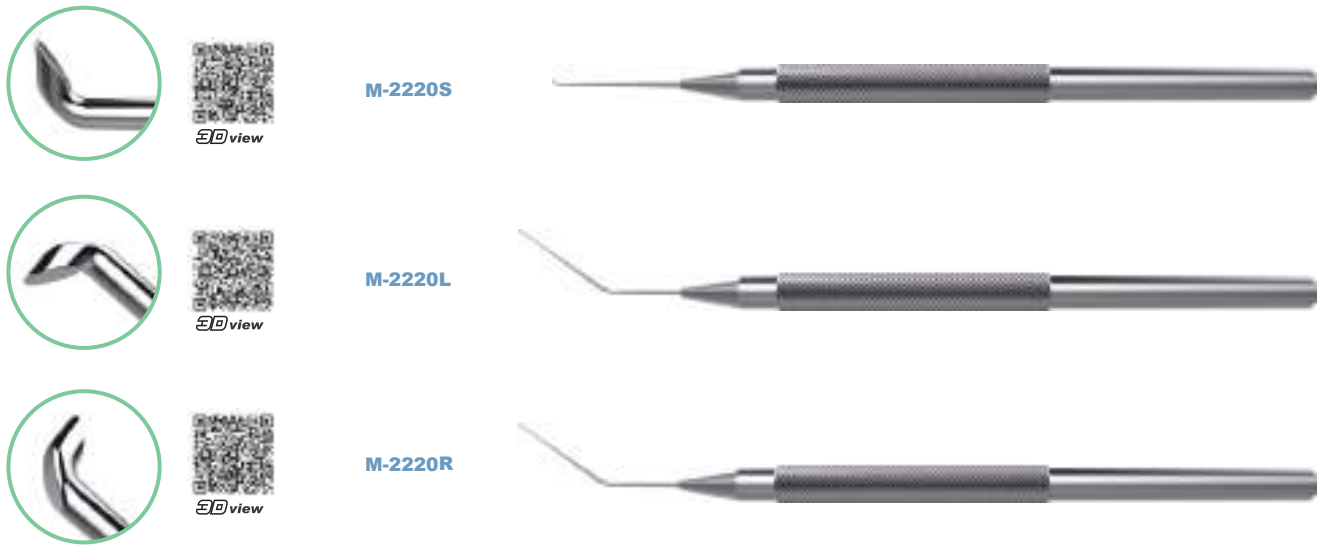

オリジナルとの比較

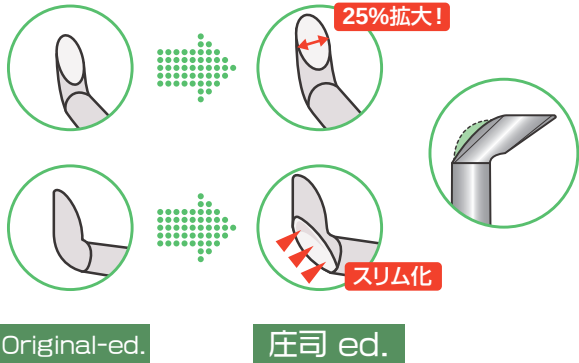

新たな MIGS 用フック。より広く・より薄く切開。

ご考案者 庄司 拓平 先生 コメント
(埼玉県川越市 小江戸眼科内科 / 埼玉医科大学病院 眼科)

「大好評だった谷戸氏 ab interno トラベクトロミーマイクロフックの進化版。オリジナルの谷戸フックの基本コンセプトを継承しつつ、オリジナル版と比べ切開幅を約 25% 拡大し、古典的な外方アプローチで用いるロトームと同じ切開幅が確保できるようになりました。また、屈曲部をスリム化することにより、シュレム氏管外壁損傷を防ぎ、安全な切開を可能にしました。さらには、耳側切開用のアングルドタイプでは屈曲部までの長さを長くすることにより、切開時の視認性が向上しました。」



M-2220SS 3 本セットは滅菌トレー付き
M-2700A 滅菌トレー 3 本用 (参考価格 28,000 円)


谷戸氏 ab interno
トラベクトロミーマイクロフック
庄司 ed.



M-2220S	直	全長 101mm	¥ 38,000	JAN:4547451335337
M-2220L	左	全長 105mm	¥ 38,000	JAN:4547451335344
M-2220R	右	全長 105mm	¥ 38,000	JAN:4547451335351
M-2220SS	3 種セット		¥ 111,000	

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32761000 屈 13B1X00048002397 入 1

memo

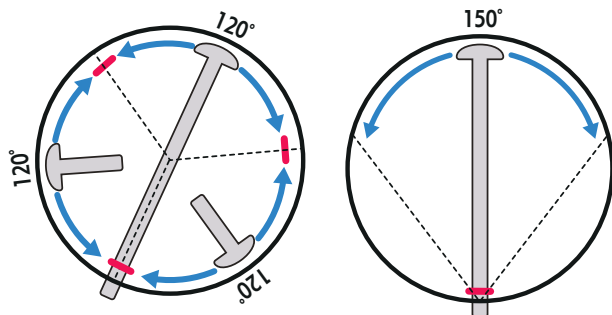

千原氏 T-hook

M-2225 全長 104mm / 先端 0.2×0.85×0.25mm ¥42,000 JAN:4547451336808

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32761000 届 13B1X00048002465 入 1



view



M-80A-13



M-80A-15



M-80A-17

永田氏トラベクトミーブローベ (2ヶ入)

M-80A-13 13mm 曲率 6.5R / 径 0.24mmφ ¥22,000 JAN:4547451032861


M-80A-15 15mm 曲率 7.5R / 径 0.24mmφ ¥22,000 JAN:4547451032878

M-80A-17 17mm 曲率 8.5R / 径 0.24mmφ ¥22,000 JAN:4547451032885

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32761000 届 13B1X00048001161 入 2

3種類の曲率から選べるトラベクトミーブローベ。

トラベクトミーにおけるシュレム管内壁切開に使用します。強膜フラップを作成し、シュレム管内壁を露出後、左右それぞれの角膜輪部に沿わせ、シュレム管に平行に挿入させ、回転させます。3種類の異なる曲率より適切なタイプを選択することが可能です。アーム部に曲率の違いを示すライン付きとなっているため、識別に便利です。

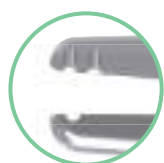

深作氏トラベクトミーブローベ保持用鑷子

M-183 全長 86mm / 先端 0.4mm ¥28,000 JAN:4547451312895

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001218 入 1

確実なシュレム氏管内壁切開を実現するブローベ把持鑷子。

2種類のノッチによりブローベを把持し、シュレム氏管への挿入を容易に行うことができます。ブローベの先端を正確にシュレム氏管へ挿入するために、二段目の半円型ノッチでしっかりと把持することができます。ブローベ先端がシュレム氏管に挿入されたら、無理な力を加えずにシュレム氏管のカーブに沿って挿入していくことができるように、先端の円形ノッチで把持します。円形ノッチはブローベのワイヤーより太く、保持した状態で自由に角度が変わりますので無理な力が加わらず安全です。

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ



木村式緑内障癒着剥離剪刀 鈍 “濾過胞再建剪刀” 曲




MOVIE

型 **M-2055C** 全長 137mm / 刃先 3mm / 径 20G ￥170,000 JAN:4547451320005
材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048001276 入 1

安全性と機能性を兼ね備える濾過胞再建の新しい形。

ご考案者 木村 泰朗 先生（順天堂大学医学部附属順天堂医院 眼科）コメント

「トラベクレクトミー後の、瘢痕癒着に対して、ニードリングが濾過胞再建術の一手技として施術されています。しかし、ニードリングでは横の動きに対しては鈍であり、癒着剥離は困難です。また先端が鋭利なため容易に結膜穿孔を起こし易く、実際の手技としては難しい。それを克服するために、結膜の創部を小さくし、かつ周囲の組織を不必要に傷付けないように鈍先の小剪刀を細長い頸部の先に取り付けるようにデザインしてみました。それが濾過胞再建剪刀です。」

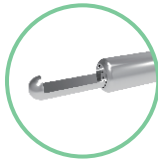


ケリー氏デスメ膜パンチ

K-1805 全長 130mm ￥85,000 JAN:4547451041672
材 SUS 薬 クラス I JMDN 35285001 屈 13B1X00048001171 入 1

強角膜切除部の調節や強膜窓の作成にも使える必須パンチ。

トラベクレクトミーの強角膜切除の際に、切除部の大きさをパンチの回数で調整することが可能な便利なアイテムです。また、トラベクトロミー後における強膜窓の作成にも非常に有効なアイテムです。

memo

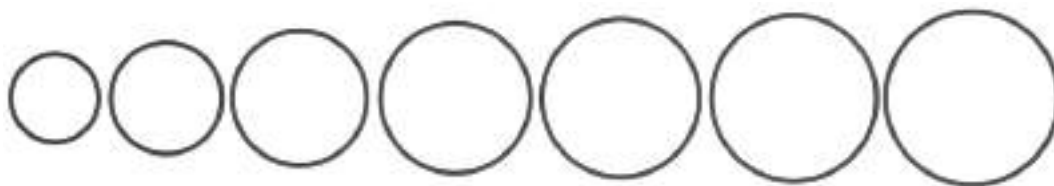

眼球固定用フリーリングリング

S-180-12	12mmφ	¥ 1,440	JAN:4547451033745
S-180-15	15mmφ	¥ 1,440	JAN:4547451033752
S-180-18	18mmφ	¥ 1,440	JAN:4547451033769
S-180-20	20mmφ	¥ 1,440	JAN:4547451033776
S-180-21	21mmφ	¥ 1,440	JAN:4547451033783
S-180-22	22mmφ	¥ 1,440	JAN:4547451033790
S-180-23	23mmφ	¥ 1,440	JAN:4547451033806
S-180SS	全サイズセット	¥ 8,400	



材 SUS 薬 クラス I JMDN 32758000 届 13B1X00048001538 入 1

縫着リングのスタンダード。

角膜移植手術時、縫着して使用します。7種類セットおよび単品販売も致しております。



5D view

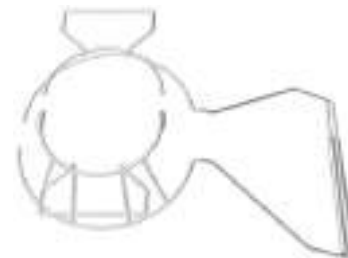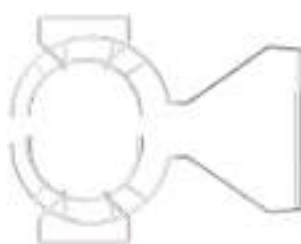

狭瞼裂にも使用できるダブルリングと開瞼器のハイブリッド。

ご考案者 川北 哲也 先生（慶應義塾大学 眼科）コメント

「ダブルリング開瞼器は、術中の眼球形状の維持（とくに無水晶体眼や硝子体術後）、角膜のセンタリングの維持（球後麻酔が不完全でも）、硝子体圧の低下などさまざまな効果があるため、角膜移植時によく使用しています。しかし日本人は瞼裂が狭くリングが入りづらいことがあるので狭瞼裂用ダブルリング開瞼器を開発しました。この開瞼器は上下のパーツに分かれて結膜囊に入れることができ、狭瞼裂の患者さんにも使用する事ができます。」

狭瞼裂用ダブルリング開瞼器

受 M-2022 外径 21.5mmφ / 内径 14mmφ ¥ 41,800 JAN:4547451330264

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35349001 届 13B1X00048002080 入 1

memo

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスプレイ

PICK UP



3D view

M-2070



3D view

M-2070CL



3D view

M-2070CR



榛村式 DALK 剪刀



MOVIE



MOVIE

受	M-2070	直	全長 104mm / 刃先 3.5mm	¥81,000	JAN:4547451320319
受	M-2070CL	曲 / 左	全長 100mm / 刃先 3.5mm	¥81,000	JAN:4547451321545
受	M-2070CR	曲 / 右	全長 100mm / 刃先 3.5mm	¥81,000	JAN:4547451321552
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 35327001	屈 13B1X00048000654(M-2070) 13B1X00048001322(M-2070CL,CR)
					入 1

デスメ膜を保護しながら切開が行える DALK 用剪刀。

深層角膜移植術において、デスメ膜をより安全に露出させることが可能となるよう設計されました。部位による使い分けが可能となるよう、曲タイプ（左右）と直タイプがございます。

ご考案者 榛村 重人 先生（慶應義塾大学病院 眼科）コメント

「DALK 剪刀は初心者でも安全にデスメ膜を露出するために開発した器具です。Viscodissection や Big Bubble 法など、DALK のあらゆる手技で利用できます。剪刀の底辺がスパーテル状になっているため、デスメ膜を傷つける危険性が通常の剪刀より少ないです。前田式 DLK スパーテルとセットで使用することをお勧めします。」



S-552L



S-552R



カッチン氏角膜移植用剪刀

受	S-552L	左	全長 96mm / 刃先 3.5mm	¥58,000	JAN:4547451035091
受	S-552R	右	全長 96mm / 刃先 3.5mm	¥58,000	JAN:4547451035107
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 35327001	屈 13B1X00048000104
					入 1

虹彩を考慮した下刃で安全でスムーズな角膜切開を実現。

PKP 用の角膜移植用剪刀です。角膜のカーブに沿った曲率にて設計しております。また、前房内に挿入する下刃は、虹彩に引っかからないよう多少の丸味を持たせております。


Quick Service



三島式角膜剪刀 鈍

S-9H 全長 99mm / 刃先 7.5mm ￥64,000 JAN:4547451044321

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048001680 入 1

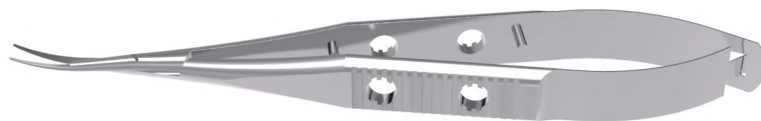

汎用性の高い角膜移植用剪刀。

角膜移植剪刀の用途のみならず、結膜・虹彩切開にも使用できます。



3D view



角膜切片切除用剪刀（HAYATE 式）



MOVIE

M-2213 全長 112mm / 刃先 9mm ￥73,000 JAN:4547451328919

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048001992 入 1



ドナー眼からフリーハンドで必要最低限の移植用切片を作成。

ご考案者 中川 迅 先生（東京医科大学病院 眼科）コメント

「ドナー眼球に対しては DSAEK graft 作成のため、強角膜片は輪部からある一定の距離（3.5mm）が必要とされる。この剪刀は角膜輪部から一定に 3.5mm 幅で切除できるガイドを有しており、ストレスなく強角膜片作成を可能とする。またドナー眼から直接的に、強角膜片として摘出する事も可能である。」

memo

鑷子

剪刀

開眼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイ

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

114

専用
シリンジ
付属



小林氏 DMEK 鑷子 SIDE 25G



view MOVIE

DS-2060 全長 135mm / シャフト 16mm / 径 25G ¥200,000 JAN:4547451336600

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048002453 入 1

DMEK が容易に、再現性をもって、短時間で。

ご考案者 小林 顕 先生 コメント (金沢大学附属病院 病院臨床准教授)

「DMEK の際に移植するデスメ膜内皮ドナー (DMEK ドナー) は厚さ約 20 μ m の大変に脆弱な組織であるため、その操作には細心の注意を要する。DMEK では前房内で葉巻状に丸まった DMEK ドナーを展開した後に、空気を用いて角膜裏面に接着させるが、DMEK ドナーの展開に時間を要することが多い。本鑷子を用いることにより、この最も難易度の高い操作が、容易に、再現性をもって、しかも短時間に行うことが可能となる。丸まった DMEK グラフトの前房内での向きに合わせて、本鑷子を用いて DMEK グラフト周辺部を把持し、角膜上からマッサージを行い、DMEK グラフトの展開を完了させる。なお、DMEK 鑷子先端の把持部内側に、つかんだ組織をしっかりと把持できるようにタングステン加工をしてあるため操作性が極めて良好であり、DMEK グラフトの展開をストレスなく行うことが可能でありお勧めの器具である。」



DSEK 引き込み法における最良のパートナー。

角膜内皮移植術 DSEK において、ドナーの角膜内皮を折りたたまずに、耳側から反対側へのスライドでしっかりと把持しながらのホストへの移植を可能とする鑷子です。先端部分のカーブが、左眼の場合は患者さんのおでこ越しに、右眼の場合は患者さんの鼻越しに術者が操作しやすいような角度となっていることや、ハンドルの動きに対し先端部分が垂直に作動することなどから、大変操作性に優れています。また先端把持部は角膜内皮を滑らずにしっかりと把持できるようにセレーションが施されており、ドナーの角膜内皮を折りたたまずにホストへ移植することにより、内皮細胞が傷つきにくくなります。

ご考案者 島崎 潤 先生 (東京歯科大学 市川総合病院 眼科) コメント

「DSEK では、ドナーディスクをいかに侵襲少なく前房内に入れることができるかが最も重要です。ディスクを折りたたんで入れる『taco fold 法』に比べ、鑷子による『引き込み法』はより安定した結果が得られるため、近年盛んに行われています。このテクニックに用いる鑷子には、以下の性能が求められます。

1. 小さなサイドポートから挿入可能
2. 操作中に角膜形状や前房深度に与える影響が少ない
3. しっかりとドナーディスクを把持できる
4. 挿入後はスムーズにリリースできる

本鑷子は、ディスク挿入対側のどの部位からも使用可能で、シャフトの太さが操作中変わらないので、安全にドナーディスクの引き込みができます。また、先端に凹凸があってしっかりとディスクを把持できる一方、鉤がついていないのでリリースもスムーズに行うことができるという利点があります。」

島崎式 DSEK 用鑷子



MOVIE

受 M-2066 全長 133mm / シャフト 18mm / 径 22G ¥180,000 JAN:4547451320241

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001277 入 1

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部


関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイザブル

AtoZ

115

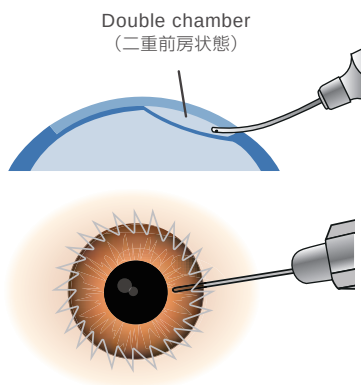

大本式 DALK カニユーラ

受 **M-2188** 全長 30mm / 先端 0.7mm / 径 23G ￥14,000 JAN:4547451323419

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 届 13B1X00048001655 入 1



二重前房状態の修復がより容易に行える DALK カニユーラ。

深層角膜移植術において、二重前房状態を修復させるべく、縫合部の隙間からのアプローチによる吸引が可能となるように設計されました。操作性等も考慮し、針部は曲型となっております。

ご考案者 大本 雅弘 先生（東京歯科大学 市川総合病院 眼科）コメント

「先端が丸く、ポートが側面にあるため、デスメ膜を傷つけることなく、層間に残留した粘弾性物質や血腫を、容易に洗浄・吸引除去することができます。24 針連続縫合の隙間から、移植片とデスメ膜の層間に容易に挿入できるので、術中、術後における二重前房の整復には非常に有効です。」



前田式 DLK スパーテル

受 **M-1150** 全長 111mm ￥20,000 JAN:4547451030881

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32754001 届 13B1X00048000345 入 1



DLK に便利な分層スパーテル。

深層角膜移植分層術の際、角膜実質を安全に剥離することが可能です。

memo

M-01 異物除去（おたま鑷子・異物針・匙・ドリル）

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼薬


関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

116

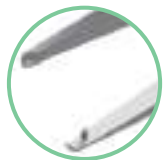

ED view

高橋氏おたま型小異物鑷子“すくい取り”

M-2015 全長 86mm / 先端 0.4mm 匙φ0.7mm ￥36,000 JAN:4547451313304
材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048000166 入 1



「おたま」ですくい取るような操作感でベストセラー。

角膜異物、結膜異物、結膜結石に特に有用で、鉄片異物の場合は、周囲の錆も含めて一動作で簡単にすくい取ることが可能です。異物除去の際に見失うなどのトラブルや、煩雑な錆取りの作業の必要性もなくなるため、素早い処置が可能となります。患者さまにおいても、処置時間が短縮することにより負担が一層軽減されると同時に、異物針のように鋭利な形状をしていないため、不安を軽減することが可能です。

ご考案者 高橋 大介 先生（青森県 弘前市 たかはし眼科）コメント

「開いた形は二本の異物針、閉じた形はオタマ状になっていて、柔らかな組織の異物をあたかも手ですくい取るように除去できます。角膜上皮の鉄粉異物、結膜上皮の結膜結石などに有用で、周囲のさびも含めて、一動作ですくい取ることができ、翼状片の残存組織などを把持するのも容易です。異物を取るとき一度でもイライラしたことのある方には特にお勧めです。」



鉄片異物錆取用鋭匙

S-111 全長 125mm / 先端 0.7×0.5mm ￥15,000 JAN:4547451033431
材 SUS 薬 クラス I JMDN 32772001 届 13B1X00048001174 入 1

微細な錆取りが可能な極小鋭匙。

極小の匙が微細な周囲の錆を丁寧に除去することを可能にします。



ED view


両頭角膜鋭匙

S-116L 大 #3 全長 124mm / 先端幅 3.5 / 3.0mm ￥26,000 JAN:4547451042983
S-116M 中 #2 全長 124mm / 先端幅 3.0 / 2.3mm ￥26,000 JAN:4547451042990
S-116S 小 #1 全長 124mm / 先端幅 2.3 / 1.5mm ￥26,000 JAN:4547451043003
S-116X 極小 #0 全長 124mm / 先端幅 1.5 / 1.3mm ￥26,000 JAN:4547451043010
材 SUS 薬 クラス I JMDN 32772001 届 13B1X00048001177 入 1

状況に応じて使い分けことが可能な両頭鋭匙。

匙を利用して異物除去後の錆を掻き出すように除去することが可能です。掻き出しに便利のように先端部をやや曲形状にしております。また、サイズの異なる両頭となっているため、状況に応じて使い分けことが可能です。4種類のサイズよりお選びいただけます。

Best
Seller

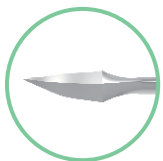

ED view

片柄異物針

S-21S 全長 125mm / 先端 1.7mm ￥9,600 JAN:4547451034377
材 SUS 薬 クラス I JMDN 16025000 届 13B1X00048001576 入 1


シンプルで使いやすいロングセラーの異物針。

表層異物をはじき出すように除去することが可能です。

Quick
Service

Best
Seller

Quick Service

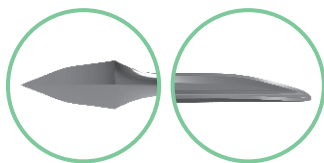

両頭異物針


S-21D 全長 120mm / 針幅 1.7mm / のみ幅 1.3mm ￥13,000 JAN:4547451034360

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16025000 屈 13B1X00048001577 入 1

異物除去と錆取りを 1 本で行える両頭タイプ。

針側では表層異物をはじき出すように使用し、のみ側では周囲の錆除去に使用いたします。

Quick Service

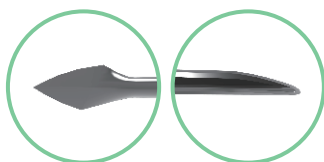

千種式両頭異物針

S-22 全長 116mm / 針幅 0.8mm / のみ幅 1mm ￥11,000 JAN:4547451034384

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16025000 屈 13B1X00048001578 入 1

より微細な異物除去が行えるマイクロタイプの両頭異物針。

針部は、より細かな異物除去を可能とするようマイクロサイズに設計しております。のみ側では周囲の錆除去に使用いたします。

オート
クレープ
不可 Quick
Service Best
Seller
S-226H S-226H


ハンド式マイクロモーターチャック（本体のみ）

S-226H 本体のみ 全長 125mm ￥49,500 JAN:4547451048244

材 SUS 薬 クラス II JMDN 32812000 承 16300BZZ00223000 入 1

ハンド式マイクロモーターチャック カッター 6 本入

S-226C 全長 37mm / 先端 青 0.8・黄 0.7・橙 0.6mm ￥20,000 JAN:4547451048220

材 SUS 薬 クラス II JMDN 32812000 承 16300BZZ00223000 入 6

振動やブレのない安定的な錆除去用の電動ドリル。

電動回転式のドリル。鉄片異物除去後の錆びを除去する際に使用します。振動やドリルのブレがなく、ドリル先端もマイクロサイズなため、角膜を損傷せず錆びを除去することができます。状況に応じて 3 種類の異なるドリルから最適なタイプを選択することが可能です。

鑷子

剪刀

開眼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイ

AtoZ

PICK UP Best Seller



ED view



有田式マイボーム腺圧出鑷子

M-2073 全長 100mm / 先端 3.2mm ￥40,000 JAN:4547451335306


材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002378 入 1

優しく HOLD、しっかり圧出、究極の Painless 設計。


ご考案者 有田 玲子 先生（埼玉県 さいたま市 伊藤医院）コメント

「マイボーム腺開口部のタピオカサイン、Plugging を解除することは、マイボーム腺機能不全（Meibomian Gland Dysfunction, MGD）治療の第一歩です。毎日 MGD の患者さんばかりを集中的に診療している私が、患者さんの痛みを最大限に軽減するための先端部設計にこだわり、日本人の眼瞼厚にフィットし、力を入れなくても把持するだけで閉塞解除とマイバム圧出ができるようなハンドル設計を施しました。ぜひ、一度、手に取ってお試しください (^O^)/」

Best Seller

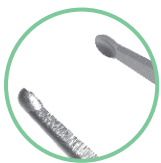




ED view

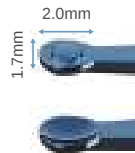

ED view



【使用イメージ】鋭匙などで内容物を摘出した後に残る残渣を、挟み込むように把持し、確実に取り除いていきます。

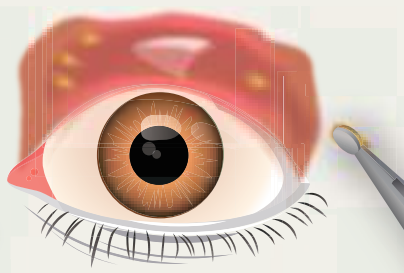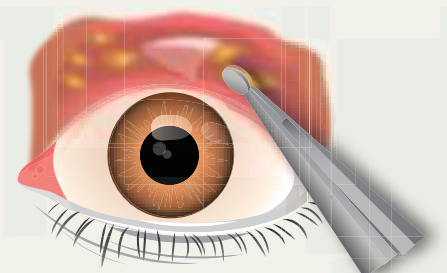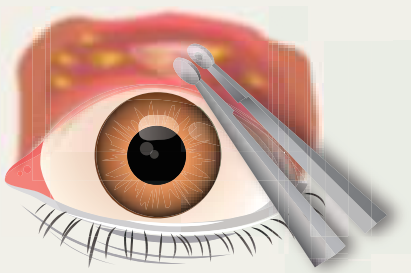

霰粒腫切開術用鑷子 おとも君 小

M-2187S 全長 106mm / 先端 1.7×2mm ￥38,000 JAN:4547451323402

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001654 入 1

霰粒腫切開術用鑷子 おとも君 小 チタニウム

M-2187S-T 全長 106mm / 先端 1.7×2mm ￥48,000 JAN:4547451329800

材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002059 入 1



MOVIE



霰粒腫切開に必需品（簡単・確実・再発防止）

ご考案者 田島 康弘 先生（埼玉県 吉川市 たじま眼科・形成外科）コメント

「霰粒腫切開時に、脂質漏出後に内容物が残存します。この組織を鋭匙、ソーブや他のピンセットで把持して摘出することは難しいです。確実に摘出しないと再発のリスクが高くなります。このピンセットは、先端部 1.7mm×2.0mm の鋭匙（小）にぼち付きの蓋を付けた形状となっています。内容物を確実に挟み込んで摘出し、退治致します。また、先端部がしっかりしていますのでマイボーム腺の圧迫も可能です。霰粒腫切開のおともに、心強い味方です。」

Quick
Service Best
Seller

ED view

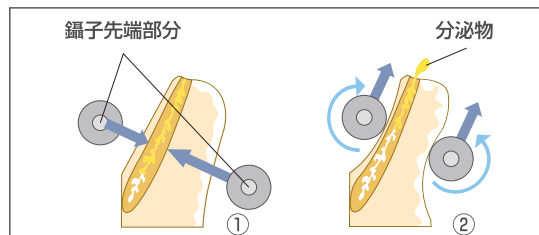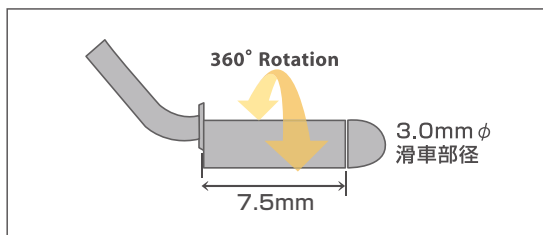

獨協医大式 滑車型マイボーム腺鑷子

M-2071 全長 97mm / 滑車径 3mmφ / 先端 7.5mm ￥60,000 JAN:4547451321002

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001011 入 1

マイボーム腺は「絞り出す」という発想で簡単かつ痛みも軽減。

マイボーム腺の圧迫やマッサージの際、患者眼へのストレスを軽減させること等を目的に、鑷子の先端部に、360度回転可能な2つの滑車を取り付けました。滑車で眼瞼を前面・後面から挟み、手前に転がしながら分泌物を絞り出す新発想により、これまでの課題であった圧迫時の痛みを大幅に軽減する事に成功しました。



ED view

吉富式マイボーム腺鉗子
ワイドハンドル

M-2072 全長 87mm / 先端 2.9mm ￥42,000 JAN:4547451333777

材 SUS 薬 クラス I JMDN 10861001 屈 13B1X00048002309 入 1

操作性と痛みの軽減を追求したマイボーム腺圧迫鉗子。

マイボーム腺が詰まっている際に、本製品によって瞼を前面と後面から挟みマイボーム腺を圧迫して内容物を排出させます。先端部は面で圧迫できるよう工夫されており、通常のピンセットで挟みこむよりも、患者への痛みを軽減させることが可能で、持ち手も握りやすく力の加減がしやすいワイドハンドルとなっております。



霰粒腫用丸型鋭匙

S-112 大 全長 127mm / 先端幅 3.0mm ￥20,000 JAN:4547451042938

S-112A 中 全長 127mm / 先端幅 2.5mm ￥20,000 JAN:4547451042945

S-113 小 全長 127mm / 先端幅 2.0mm ￥20,000 JAN:4547451042952

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32772001 屈 13B1X00048001173 入 1

3種類のサイズから選べるスタンダードな霰粒腫用鋭匙。

霰粒腫用にカップが薄く、削り残しがないようにカップの淵のエッジが内側からつけられています。

memo

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ



フィンク氏霰粒腫用ギザ付鋭匙

S-114 全長 124mm / 先端 2mm ￥23,000 JAN:4547451042969
材 SUS 薬 クラス I JMDN 32772001 屈 13B1X00048001175 入 1

内容物をしっかりと掻き出せるギザ付き鋭匙。
壁面を擦過するように内容物を掻き出すことが可能です。



スキール氏霰粒腫用ギザ付鋭匙

S-115A 全長 125mm / 先端 2mm ￥25,000 JAN:4547451327233
材 SUS 薬 クラス I JMDN 32772001 屈 13B1X00048001892 入 1

細かいギザでしつこい内容物を優しく、しっかりと除去。
壁面のしつこい肉芽種や残渣を擦過するように掻き出すことが可能です。ギザが細かい
ため、傷や瞼板の強度に対するリスクが軽減しております。

memo

PICK
UP

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

121



SD view




横井氏カレーススマーカー エボリューション

M-1405A 全長 132mm ￥75,000 JAN:4547451323426

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 届 13B1X00048001657 入 1

3ブロック切除法（横井法）必須の専用マーカー。

前モデル（M-1405）に比べて、子午線方向の左右各2本のラインの間隔が狭くなっています。弛緩した下方結膜を3つのブロックに分けて結膜切除を行う際に、一般に、耳側結膜の弛緩の範囲が広いため、より広い範囲を耳側に割り当て、かつ、それを左右眼で選択できるよう、左右に各2本のラインを設けています。実際の使用では、鼻側から1本目と3本目のラインを選択することで3つのブロックを作ることができます。また、マーキング用インクの塗布がより容易になるように、塗布面をより平滑に仕上げました。

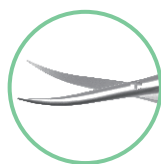

横井氏カレースス剪刀 エボリューション

M-1406A 全長 108mm / 刃長 12mm ￥60,000 JAN:4547451323433

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 届 13B1X00048001658 入 1

3ブロック切除法（横井法）必須の専用剪刀。

切断力をより強くするために、前モデル（M-1406）の刃の表裏をフラット形状と致しました。さらに刃の最先端部分に厚みを加えました。結膜下の組織のしごき出しが容易で、硬い線維組織（CPF：capsulopalpebral fascia）でも切除しやすい設計となっております。

ご考案者 横井 則彦 先生（京都府立医科大学附属病院 眼科）コメント

「結膜は、ルーズな組織であるため、切開や切除を行うと、創縁のいずれの部位同士がもともと対応していたかが分かりづらくなります。カレーススマーカーは、結膜弛緩症に対して3ブロック切除法（横井法）を行う際の道しるべとして役立ちます。

本マーカーは、弧状の体部と4本の子午線方向の足からなりませんが、実際の使用にあたっては、まず、下方の弛緩結膜の表面を周辺に向けてマイクロスポンジで軽く擦るようにして、弛緩結膜を周辺に寄せ集め、下方の球結膜表面に弛緩のない状態を作っておいてから、半側ずつ、押し付けるようにしてマーキングします。

弧状の結膜切開を終えた後、出血や弛緩のために創縁同士の対応を見失っても、足のラインをマーキングの直後の状態に合わせ直すことで、切開前の結膜の状態を再現することができます。

そして、次に各ブロックで結膜切除を行った後、輪部側の創縁の足のマークに向けて通針することで、的確な縫合を行うことができます。エボリューションタイプでは、長年の手術経験によって、最適の足の位置が決まると共に、塗布面が平滑になり、インクが塗りやすくなりました。すなわち、本マーカーをもって、カレーススマーカーは、最終完成版となりました。

カレースス剪刀は、カレーススマーカーの弧状の湾曲部と同様の曲率をもった部分と直線状の先端部分からなるため、これ一本で、弧状の切開と子午線方向の切開を行うことができる便利な剪刀です。

結膜弛緩症に対する3ブロック切除法（横井法）においては、傷んだテノン組織や、弛緩した硬いCPF（capsulopalpebral fascia、円蓋部挙上型結膜弛緩症の場合）をしごき出して切除する、結膜下組織の切除ステップが重要ですが、エボリューションタイプでは、剪刀の腰が強くなり、それが、容易にできるようになりました。本改良をもって、本剪刀も最終完成版となりました。」

M-04 翼状片（スパーテル・ゴルフ刀）

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ


ディス
ポー
ザブル

AtoZ

122



ED view

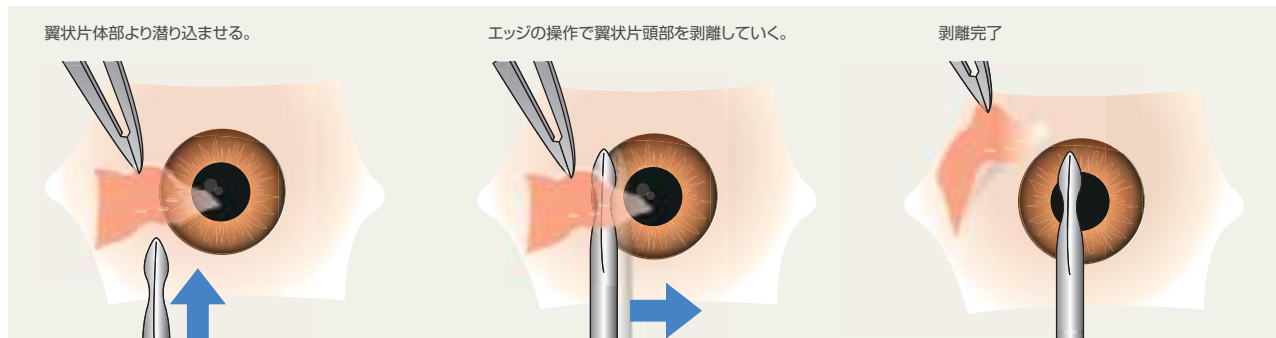

前田式翼状片スパーテル



受 M-1104 全長 110mm / 先端 1.5×0.1mm ￥26,000 JAN:4547451036395

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32754001 届 13B1X00048000204 入 1

翼状片を安全に容易に剥離する高性能スパーテル。

翼状片周囲の角膜上皮を除去後、体部に切開を入れ、翼状片下に本製品を挿入します。大きな鑷子でむしるように引き上げながら、癒着の強い頭部に向かって横の動きで鈍的に剥離する事が可能です。スパーテルの独特の形状は、翼状片の剥離をスムーズかつ安全に行えるよう、先端をやや鈍先に、そして側面は窪みをつけたエッジとなっており、増殖組織をひっかけるようスムーズに切断することが可能です。



ゴルフ刀

S-76 全長 117mm / 先端Φ1.8X0.3mm ￥15,400 JAN:4547451035572

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32764001 届 13B1X00048000409 入 1

安全性と切断力を兼ね備えるゴルフ刀。

角膜の保護と切断力を兼ね備えたやや鈍的なゴルフ刀。翼状片手術などで特にパフォーマンスを発揮いたします。リユースのため、コストパフォーマンスに優れております。

memo

3種類のサイズから選べるネジ止め式挟瞼器。

眼瞼処置などに有効となるように、眼球に沿ってカーブしています。ネジ式のため、挟瞼の強度を調節することが可能です。また、操作性にも優れ、ワンアクションで素早く調節できます。大・中・小の3サイズからお選びいただけます。

デマル氏挟瞼器					
S-490RL	大	全長 95mm / 先端幅 31×19mm	¥ 28,000	JAN:4547451044024	
S-490RM	中	全長 90mm / 先端幅 26×16mm	¥ 28,000	JAN:4547451044031	
S-490RS	小	全長 88mm / 先端幅 20×13mm	¥ 28,000	JAN:4547451044048	
材	SUS	薬	クラス I	JMDN	35801000
届	13B1X00048000873	入	1		



- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル

クント氏挟瞼器					
S-485L	大	全長 116mm / 先端幅 28×23mm	¥ 19,000	JAN:4547451034933	
S-485M	中	全長 112mm / 先端幅 25×20mm	¥ 19,000	JAN:4547451034940	
S-485S	小	全長 109mm / 先端幅 21×16mm	¥ 19,000	JAN:4547451034957	
材	SUS	薬	クラス I	JMDN	35801000
届	13B1X00048000137	入	1		

眼瞼の翻転にも適した汎用性の高いクロスアクション挟瞼器。

クロスアクションタイプなため、ネジを締める手間がありません。挟瞼部はカーブ形状ではなく、平面タイプなため、眼瞼を翻転させる手術にも適しており、霰粒腫などでは重宝します。大・中・小の3サイズからお選びいただけます。



- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜

下眼瞼挟瞼器					
M-2019L	大	全長 114mm / 幅 35×21mm	¥ 25,000	JAN:4547451327264	
材	SUS	薬	クラス I	JMDN	35801000
届	13B1X00048001894	入	1		

下眼瞼全域をカバーする便利な挟瞼器。

ご考案者 中内 一揚 先生（兵庫医科大学病院 眼科）コメント

「今までの挟瞼器より、更に横長形状で下眼瞼全域をカバーできます。これにより、内眦から外眦まで一度で切開することが可能です。Jones 手術や Hotz 手術を行うのに適しています。」



- 外眼部分
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスプレイザブル
- AtoZ

鑷子

剪刀

開眼器

持針器

カニユ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼
部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

124

杉田式挟眼器
“上眼瞼手術用角膜プロテクター”



MOVIE

受 M-2051 全長 40mm / 幅 24×15mm ￥42,900 JAN:4547451037248

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35801000 届 13B1X00048001514 入 1



PICK
UP

炭酸ガスレーザーメス用挟眼器。

ご考案者 杉田 達 先生（東京都 葛飾区 杉田眼科）コメント

「炭酸ガスレーザーメスでは、従来の角膜保護用の金属コンタクトレンズで眼を保護すると、角膜糜爛や軟膏で、術後視力が一時的に低下するきらいがありました。この器具は、上眼瞼にクリップ状に挟んで簡便に固定することで、このような不快を生ぜずに、眼球保護が可能です。また、従来の挟眼器は助手が柄を保持していましたが、時として、柄の重さで眼瞼から外れたり、眼瞼に負荷がかかりやすいのが欠点でした。本器は助手に保持してもらう必要がなく、金属メスでの上眼瞼皮膚弛緩症や腫瘍の手術時にも簡便に使用できます。」

デマル氏霰粒腫用挟眼器クロスアクション

S-489 全長 95mm / 幅 14×11mm ￥30,000 JAN:4547451044017

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35801000 届 13B1X00048001300 入 1



霰粒腫に最適なクロスアクション挟眼器。

挟眼面はフラットになっており、眼瞼の回転に適しております。またクロスアクション式のため、霰粒腫の処置中など、挟眼部の変更が素早く行えます。

エーゲル氏角板金属

S-247B 全長 111mm / 幅 22mm・19mm ￥6,600 JAN:4547451043669

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70944000 届 13B1X00048001493 入 1




シンプルな眼球保護用角板。

眼球の保護用に使用します。サイズの違う両端を状況に応じて使い分けことが可能です。



M-2216R

M-2216L

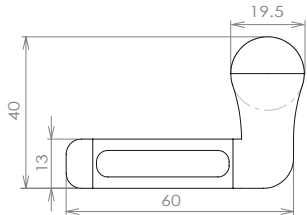

SD view

後藤氏固定式角板

M-2216R 右眼用 size: 図参照 ￥15,000 JAN:4547451333500


M-2216L 左眼用 size: 図参照 ￥15,000 JAN:4547451333494

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70944000 届 13B1X00048002299 入 1

この角板、曲げて置くと安定します。

ご考案者 後藤 浩 先生（東京医科大学病院 眼科）コメント

「眼瞼や結膜の手術時に最も注意すべき合併症は、麻酔時の注射針や術中のメスによる角膜や強膜の穿孔である。この事故を未然に防ぐための器具として以前から角板があるが、従来のシンプル形状では術者が一人でこれを把持して注射等の操作を行うには難があった。今回考案された固定式角板は、可変部を頬骨の形状に合わせて湾曲させることによって顔（瞼）部に留置できるように工夫されているため、助手の手を煩わせることなく確実に角板先端部を結膜円蓋部に挿入、固定することが可能となっており、より安定性、安全性の高い製品となっている。」

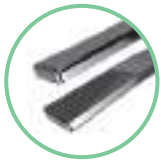

「経結膜的ミュラー筋タッキング用瞼板固定鑷子」

ご考案者 小林 真 先生（秋田県 北秋田市 小林眼科医院）コメント

「経結膜的ミュラー筋タッキング通糸法（Trans conjunctival Müller muscle tucking：TCMT）では、瞼板を終始確実に把持し続けることが手術手技全体において重要であるが、これまで専用の瞼板固定鑷子が無く、ペアン鉗子や眼筋固定鑷子等を代用せざるを得なかった。いずれの代用器具もサイズがまちまちで顕微鏡下での操作がしづらかったり、把持部の瞼結膜を挫減させ、術後疼痛や異物感の原因となっていた。本法専用のこの瞼板固定鑷子は、瞼板を確実に把持し二重翻転を容易にする他、3.0mm幅の鑷子先端部分を瞼板通糸のガイドマークとすることにより、安定したタッキングを可能とする。」

小林式 TCMT 用鑷子



M-2218 全長 110mm / 先端 3.0mm ￥52,000 JAN:4547451333784

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002308 入 1



YouTube 新前橋かしま眼科形成外科クリニックの YOUTUBE チャンネルを見る



パターマン氏眼筋クランプ

S-495 全長 96mm / 先端 3mm×25mm / 突起 0.9mmφ×1.1mm ￥46,200 JAN:4547451332893

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35801000 屈 13B1X00048002257 入 1

眼瞼下垂手術に便利な眼筋クランプ

操作性の良い鑷子タイプの眼筋クランプ。先端には片側 3 つの突起と穴があり、把持した際に嵌合します。
結膜ミュラー筋切除術 MMCR（Müller's muscle-conjunctival resection）が可能です。

memo

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイザブル

AtoZ

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他

- 白内障
- 屈折矯正

- 網膜硝子体

- 緑内障

- 角膜

- 外眼部分

- 関連用品

- サージカルナイフ

- ディスポーザブル

- AtoZ



デマル氏開瞼鉤

S-845RL	大	全長 142mm / 先端幅 17mm	¥ 13,000	JAN:4547451044284
S-845RM	中	全長 142mm / 先端幅 14mm	¥ 13,000	JAN:4547451044291
S-845RS	小	全長 142mm / 先端幅 11mm	¥ 13,000	JAN:4547451044307
S-845RE	未熟児用	全長 142mm / 先端幅 8mm	¥ 13,000	JAN:4547451044277



材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048001375 入 1

4 種類のサイズで様々な切開創に対応。

一時的な開瞼や、切開部位の開口保持、眼瞼下垂手術時の術野の確保、または外傷性により開瞼が困難な場合など、様々な状況下で使用します。開瞼鉤は眼科のみならず、形成外科、美容外科においても使用されております。4 種類の鉤幅をラインナップしており、様々な切開創に対応できます。

平爪タイプのスライド式開瞼鉤。

DCR 鼻外法など、眼窩形成術時などに創口の拡張と固定に使用いたします。開創部は平鉤タイプとなっております。創口のサイズに合わせて、2 種類からお選びいただけます。

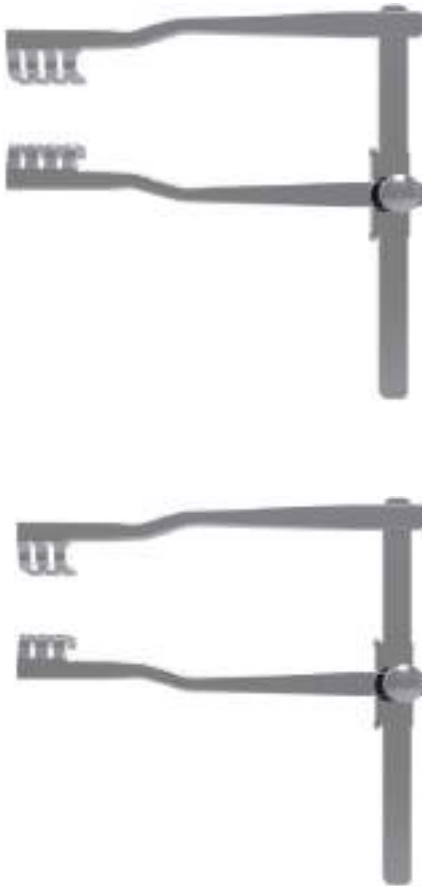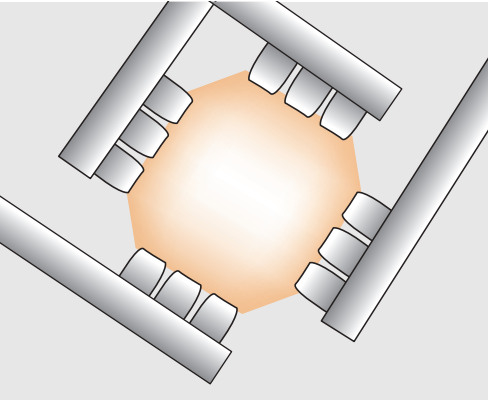

栗原式開創器 II

M-2012	四本平鉤	鉤幅 9.5mm	¥ 65,000	JAN:4547451032052
M-2013	三本平鉤	鉤幅 6.5mm	¥ 65,000	JAN:4547451032069

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70943000 屈 13B1X00048001565 入 1

PICK UP



後藤・中村式 2 爪釣針鉤型開創器

M-2101L	大	幅 14.5mm	¥ 42,000	JAN:4547451321477
M-2101M	中	幅 13.5mm	¥ 42,000	JAN:4547451321484
M-2101S	小	幅 11.5mm	¥ 42,000	JAN:4547451321491

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70943000 届 13B1X00048001324 入 1

局面に応じた理想的な開創を自在に実現するマストアイテム。
当社『中村氏 釣針型開創鉤』をモディファイした 2 本の鉤に、特殊スプリングと特殊クレンメを取り付け、眼瞼下垂手術をはじめ、眼形成術において皮膚切開創を開いた状態で固定することが可能となるよう設計されました。
ご考案者 後藤 浩 先生（東京医科大学病院 眼科）コメント
「中村氏 釣針鉤の特性と利便性を生かした眼付属器手術、特に眼瞼下垂手術の際の開創に便利なグッズです。ひとつで幅広の開創が可能です。また、従来の釣針鉤使用時に必要であった牽引用の糸や固定用の鉗子はもう要りません。」

Best Seller



中村氏釣針型開創鉤（2 本組）

S-184L	大	幅 15mm	¥ 12,000	JAN:4547451033929
S-184M	中	幅 12.5mm	¥ 12,000	JAN:4547451033936
S-184S	小	幅 10mm	¥ 12,000	JAN:4547451033943

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 届 13B1X00048000984 入 2

コストパフォーマンスに優れた利便性の高い開創鉤。
牽引の調節が便利なベーシックな開創鉤です。通糸後、鉗子などを用いて任意の方向、深さにて開創することが可能です。2 ケットで 3 種類のサイズよりお選びいただけます。

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスプレイ

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼病
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスプレイザブル



斜視鉤

S-152	大	全長 143mm	¥ 8,000	JAN:4547451047414
S-151	中	全長 139mm	¥ 8,000	JAN:4547451047407
S-150	小	全長 135mm	¥ 8,000	JAN:4547451047391
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 32767000	届 13B1X00048000294	入 1

斜視鉤のスタンダード。

先端が平たく、丸いため、外眼筋にかけやすく、そして安全です。また滑って外れにくくなっております。3種類のサイズよりお選びいただけます。



畑氏斜視鑷子

S-480R	右	全長 97mm	¥ 44,000	JAN:4547451044000
S-480L	左	全長 97mm	¥ 44,000	JAN:4547451043997
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 16209001	届 13B1X00048001295	入 1

鑷子タイプの眼筋クランプ。

斜視手術の際に、外眼筋を本製品で固定し、眼筋の短縮や、付着部をすらす作業を行います。右用、左用がございます。




ベレンス氏眼筋クランプ

受	S-472	全長 90mm	¥ 69,000	JAN:4547451034872
材	SUS	薬 クラス I	JMDN 35801000	届 13B1X00048000665
				入 1

通糸孔のついた便利な眼筋クランプ。

斜視手術の際に、外眼筋を本製品で固定し、眼筋の短縮や、付着部をすらす作業を行います。短縮後の縫合が便利なよう、眼筋を挟んだ際に縫合針を通す孔を設けております。

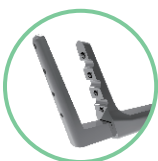

近江・ベレンス氏眼筋クランプ 小児用 II 型

受	S-472-2	全長 65mm	¥ 72,000	JAN:4547451034896
材	SUS	薬 クラス I	JMDN 35801000	届 13B1X00048000273
				入 1

繊細な処置や小児の手術にも対応する小型眼筋クランプ。

より繊細な処置や小児などの斜視手術に対応するよう、全体的に小型化しておりますが、縫合針を通す孔は大きく設計されています。

専用
シリンジ
付属

SD view



MOVIE

涙点を自在にコントロール。

ご考案者 三村 真士 先生（大阪医科大学病院 眼科）コメント

「涙小管を損傷することなく、涙点形成ができる涙点拡張用パンチです。涙点閉塞の症例でも容易に拡張できます。涙点形成術から涙道内視鏡などの太い器具の挿入時にいたるまで、切除する回数を調整することで涙点の大きさを自由にコントロールできます。」

三村氏涙点形成パンチ 23G

DS-301 全長 134mm / シャフト 15mm / 23G ￥175,000 JAN:4547451333463

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 35285001 届 13B1X00048002296 入 1

灌流と拡張を兼ね備えたイノベティブな一本。

ご考案者 藤本 雅大 先生 コメント

「本製品は涙管通水検査と涙道内薬液注入・涙点拡張の連続操作を可能としたものである。

洗浄針の全長が短く、支える手の固定も容易であり、初心者にも扱いやすい。患者さんが座った状態での通水検査も容易な形状と言える。

利用する場面としては、通常の仰臥位での通水検査はもちろんのこと、座った状態での通水検査、涙道内視鏡検査や涙道手術前の涙道内薬液注入から涙点拡張の連続操作、また一時的に涙点拡張をして涙点狭窄がどの程度導涙機能に影響を及ぼしていたかを調べることができる。

使用法は、用途に応じて生理食塩水もしくは、薬液等を充填した 2.5ml シリンジに PDI ニードルをつける。ガーゼをあて、瞼縁に対して垂直に涙点へと挿入する。上涙点アプローチであれば耳上側に、下涙点アプローチであれば耳下側に指で牽引をかけた状態で、PDI ニードルを瞼縁に対して水平に倒し、涙小管水平部へと PDI ニードルの先を少し進めた状態で、通水を行う。涙点拡張を行う場合は、逆流した薬液等を拭き、再度牽引をかけた状態で行う。

涙点拡張の際に問題になるのは涙小管水平部における仮道形成であるが、薬液等で涙小管管腔を灌流して拡張した後に、連続して先端形状が鈍の PDI ニードルで涙点を拡張するため、仮道形成の可能性が低くなる。

下涙点から通水検査を行った場合の結果の解釈の例を挙げる。通水不能か下涙点のみから逆流がある場合は下涙小管閉塞であり、上涙点からの逆流がある場合は総涙小管以降の閉塞となる。逆流までのタイムラグ、逆流内容物によって、総涙小管閉塞か鼻涙管閉塞かを判断する。確定診断のためにはさらに涙道内視鏡検査を行うこととなる。」



MOVIE




SD view

PDI ニードル

M-2217 全長 30mm / シャフト 14mm / Φ0.6mm-Φ2.0mm ￥30,000 JAN:4547451334170

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 届 13B1X00048002330 入 1

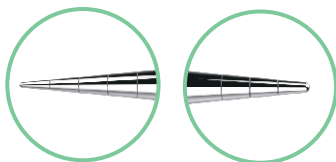

目盛り位置:1.0mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm

先端0.5mmφ



目盛り位置:2.5mm 2.0mm 1.5mm

先端1.0mmφ

安全・正確な手術をサポートするガイド付き拡張針。

ご考案者 松村 望 先生

（横浜市 横浜相鉄ビル眼科医院 / 神奈川県立こども医療センター眼科）コメント

「涙道内視鏡手術や涙管チューブ挿入術などの経涙小管操作の際に、安全かつ正確な涙点拡張は、術者のストレスを軽減し、手術成功の鍵を握ります。本拡張針には以下の特徴があります。

- ① 直径 0.5 mm から 2.5 mm まで、0.5 mm 単位のゲージを参考に、正確で過不足のない涙点拡張が可能。
- ② 鋭端・鈍端ともに先端が研磨されて丸みがあり、涙小管内を傷つけにくい。
- ③ 従来品より短距離の挿入で涙点拡張が可能のため、大きな目の拡張が必要な場合や、涙小管閉塞で奥まで拡張針を挿入しづらい場合なども、より安全に涙点拡張が可能。
- ④ 涙点ならびに直径 0.5 ～ 2.5 mm の小孔の、内径の計測ゲージとして使用可能（涙点プラグのサイズ測定など）。

鋭端の最初の目盛り（直径 1 mm）まで涙点を拡張すれば、涙道内視鏡（直径 0.9 mm）は挿入できます。それより大きな拡張は、鈍端も利用できます。ご自身の術式や使用する器具に合わせて、ベストサイズの安定した涙点拡張が可能です。涙道手術の教育にも最適です。」

松村・大高式涙道手術用拡張針

S-189 全長 117mm / 円錐部 20mm / 17mm ￥22,000 JAN:4547451334552

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35010000 届 13B1X00048002338 入 1

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイザブル

AtoZ

129

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ボー
ザブル

AtoZ

Quick
Service

Best
Seller



ウィルダー氏涙管拡張針

S-186RL	太 #3	全長 109mm / 先端 0.6mm	¥ 6,000	JAN:4547451043218
S-186RM	中 #2	全長 109mm / 先端 0.4mm	¥ 6,000	JAN:4547451043201
S-186RS	細 #1	全長 109mm / 先端 0.3mm	¥ 6,000	JAN:4547451043195
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 35010000 届 13B1X00048001181 入 1

3 段階のアプローチで無理なく拡張。

涙小管を切開せずに、拡張させる目的で使⽤します。3 種類のサイズよりお選びいただけます。ファインな細いタイプで徐々に拡張した後に、太いタイプで充分に拡張させます。

Quick
Service

Best
Seller



幼児用拡張針

S-186S		全長 80mm / 先端 0.5mm		¥ 6,000	JAN:4547451043225	
材	SUS	薬	クラス I	JMDN	35010000	届 13B1X00048001182
						入 1

デリケートな幼児用涙点拡張針。

幼児の涙点拡張が容易に行えるように先端部がデリケートになっております。



SD view

ボーマン氏涙管消息子

S-185A	0-01 (0.45/0.50)	全長 130mm	¥ 3,000	JAN:4547451033950
S-185B	02-03 (0.55/0.60)	全長 130mm	¥ 3,000	JAN:4547451033967
S-185C	04-05 (0.65/0.70)	全長 130mm	¥ 3,000	JAN:4547451033974
S-185D	06-07 (0.75/0.80)	全長 130mm	¥ 3,000	JAN:4547451033981
S-185E	08-09 (0.90/1.00)	全長 130mm	¥ 3,000	JAN:4547451033998
S-185F	1-2 (1.10/1.20)	全長 130mm	¥ 3,000	JAN:4547451034001
S-185G	3-4 (1.30/1.40)	全長 130mm	¥ 3,000	JAN:4547451034018
S-185H	5-6 (1.50/1.60)	全長 130mm	¥ 3,000	JAN:4547451034025
S-185S	全サイズセット	全長 130mm	¥ 22,000	
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 35251000 届 13B1X00048001500 入 1

Best
Seller



コストパフォーマンスに優れた涙管ブジー。

涙管に通して閉塞部位の解除や診断に用います。全 8 種類からお選びいただけます。また、全 8 種類セットもございます。




三宅式ブジー

M-1125	0-01 (0.45/0.50)	全長 140mm	¥ 11,550	JAN:4547451030706
M-1126	02-03 (0.55/0.60)	全長 140mm	¥ 11,550	JAN:4547451030713
M-1127	04-05 (0.65/0.70)	全長 140mm	¥ 11,550	JAN:4547451030720
M-1128	06-07 (0.75/0.80)	全長 140mm	¥ 11,550	JAN:4547451030737
M-1129	08-09 (0.90/1.00)	全長 140mm	¥ 11,550	JAN:4547451030744
M-1124	全サイズセット	全長 140mm	¥ 51,700	
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 35251000 届 13B1X00048001488 入 1

器具の操作性に優れたラウンドハンドルタイプ。

涙管に通して閉塞部位の解除や診断に用います。ラウンドハンドルのため、器具の回転操作が容易に行えます。全 5 種類からお選びいただけます。また、全 5 種類セットもございます。

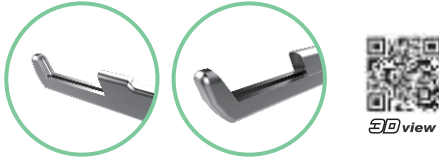

よりパワフルな骨削開を可能とするケリソンロンジャー。

ご考案者 目黒 泰彦 先生 コメント (仙台市 仙台南みだの眼科クリニック)

「DCR 鼻内法のポイントとして、骨窓を大きく作成し涙嚢を広く展開する事が重要とされています。今回、よりパワフルな骨削開を目的としたケリソンロンジャーを開発しました。従来の彫骨器に比べ先端の開口部が大きく強靱な構造をしているのが特徴で、上顎骨の効率的な削開に有用です。骨窓の大部分をケリソンで作成することが可能であり、手術時間の大幅な短縮が望めます。またノミによる骨亀裂や、ドリルによる涙嚢穿孔といった副損傷のリスクを最小限に低減させることも期待できるでしょう。使用のコツとして、中鼻甲介下端に近い低位の涙骨上顎骨縫合 (maxillary line) に先端部を滑り込ませ、外上方に向かい骨窓を拡大してゆく方法を推奨します。本製品が DCR の効率化・低侵襲化の一助となる事を願ってやみません。」



目黒式 DCR ケリソンロンジャー (直) Hercules

受 M-1820 全長 265mm / 可動部 200・216mm / 先端幅 3.5mm 120° オープン価格 JAN:4547451335467

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32853000 屈 13B1X00048002389 入 1



50% 縮小表示



福島医大式オルビタ用腫瘍把持鑷子

受 M-2103 全長 166mm / 先端 3mmφ ￥60,000 JAN:4547451321514

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001349 入 1

眼窩形成術における狭くて深い術野に最適な 1 本。

眼窩形成術において、手術中の視認性と操作性等を考慮し、バイオネット型に設計致しました。また、腫瘍等をよりデリケートにかつ、しっかりと把持出来るよう、先端部がセレーション加工・リング状となっています。

ご考案者 古田 実 先生 (福島県立医科大学附属病院 眼科) コメント

「眼窩の手術は顕微鏡下にて行われることが推奨されていますが、狭くて深い術野に対する適切な器具を得ようとすれば、脳神経外科のカタログから選ぶしかありませんでした。しかしワーキング・レンジが合わない器具や 把持力が弱い器具しか選択肢にない場合もあり、ストレスを感じておりました。今回考案したオルビタ用腫瘍把持鑷子は、以下の点に留意して製作していただきました。

- ① ワーキング・レンジが 40mm であること。
- ② バイオネット型で、重量バランスがよいこと。
- ③ 鋼材の硬性が高く、把持力が強いこと。
- ④ 先端の滑り止め用の溝が精密にかみあうこと。

特に眼窩深部病変などの難治症例にお役立てください。」

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部


関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

132

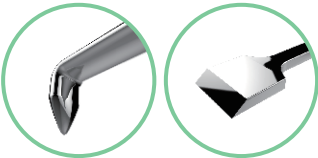

中内式骨膜剥離子

受	M-2018	全長 162mm / 先端 3mm・6mm	¥ 27,000	JAN:4547451324287
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 70952000
届	13B1X00048001713	入	1	

より安全に骨窓アプローチが行えるL字型剥離子。

ご考案者 中内 一揚 先生（兵庫医科大学病院 眼科）コメント

「DCR 鼻外法において、安全な骨窓アプローチができるL字型骨膜剥離子です。先端はやや鈍になっており、鼻粘膜を損傷せずに、涙嚢窩の縫合線に差し込み、骨窓を作成することができます。ロンジャー、ドリルと組み合わせることで、さらに安全な骨窓作成が可能です。対側は皮切部直下を上顎骨のカーブに沿って骨膜剥離が行なえるような大きさの剥離子に仕上げられています。」



スケペンス・フリーマン型レトラクター

S-120D	全長 135mm	¥ 14,300	JAN:4547451033493
材	SUS	薬	クラス I
JMDN	32767000	届	13B1X00048000376
入	1		

折り曲げ可能で眼球摘出時にも便利。

任意に折り曲げて使用することが可能です。先端が開いているため、視認性が良いのが特徴です。眼球展開用として視神経切断時のガイドとしての活用や、溝から口カリセーターでマーキングや、直筋をかけるなど用途はさまざまです。



鈍



S-123B



鋭



S-124B

S-124S

アクセンフェルド氏涙嚢摘出鉤

S-123B	2爪 鈍	全長 142mm / 先端幅 5mm	¥ 26,000	JAN:4547451335979
S-123S	2爪 鋭	全長 142mm / 先端幅 4mm	¥ 26,000	JAN:4547451335962
S-124B	3爪 鈍	全長 142mm / 先端幅 7.5mm	¥ 26,000	JAN:4547451335993
S-124S	3爪 鋭	全長 142mm / 先端幅 7.5mm	¥ 26,000	JAN:4547451335986
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 70943000
届	13B1X00048002429	入	1	

DCR 鼻外法では欠かせない鉤。

先端部が2爪の鉤は、特に局所的な部位の視野確保に便利です。3爪の鉤は、広く組織を手繰り寄せる時に便利です。



S-123B view




S-123S view




S-124B view




S-124S view

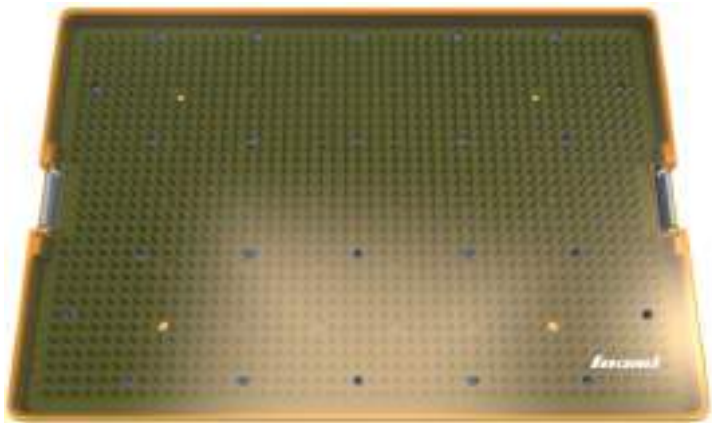


M-1500A 20本用

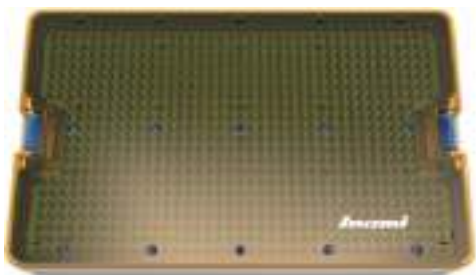

M-6120A 10本×2段タイプ

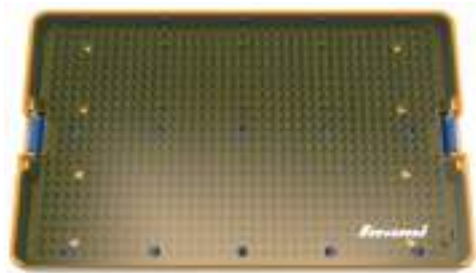

M-6100A 10本用

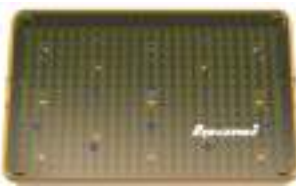

M-4600A 5本用



M-2600A 1～3本用



M-2700A 1～3本用



M-2501A 1本用（スロット）



M-2571A 1本用（スロット）

滅菌トレー

M-1300A	ミニタイプ	マット	68×38×19	¥ 12,000	JAN:4547451327271
M-2572A	1～2本用	スロット	190×64×19	¥ 28,000	JAN:4547451045052
M-2571A	1本用	スロット	190×64×19	¥ 28,000	JAN:4547451336846
M-2501A	1本用	スロット	152×64×19	¥ 25,000	JAN:4547451336853
M-2700A	1～3本用	マット	190×64×19	¥ 28,000	JAN:4547451045069
M-2600A	1～3本用	マット	152×64×19	¥ 25,000	JAN:4547451336839
M-4600A	5本用	マット	165×100×19	¥ 20,000	JAN:4547451327288
M-6100A	10本用	マット	254×152×19	¥ 35,970	JAN:4547451037798
M-6120A	10本×2段タイプ	マット	254×152×38	¥ 60,000	JAN:4547451037804
M-1500A	20本用	マット	381×254×19	¥ 78,000	JAN:4547451036753

薬 非該当 入 1



M-2572A 1～2本用（スロット）



M-1300A ミニタイプ

使い勝手の良いバリエーション豊かな滅菌トレーの定番。

軽量かつ耐久性に優れ、手術器具の保護力に優れており、滅菌や保管などに最適です。また、バリエーションに富んだサイズを取り揃えており、形状や術式セットに適した保管が可能です。

鑷子

剪刀

開險器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスポーザブル
- AtoZ

ステンレス本来の輝きを戻す錆び除去剤。

ステンレス製手術器具の錆除去に使用いたします。

- 通常の錆：原液～5倍希釈液で30分～2時間浸漬後、しっかりと水洗い。
- 軽い錆：20～30倍希釈液で1～2時間浸漬後、しっかりと水洗い。

イナミクリーン L（錆び除去剤）

AC-102	250ml	¥740	JAN:4547451260035
--------	-------	------	-------------------

薬 非該当 入 1



オートクレーブによる熱ヤケを除去。

オートクレーブによる熱ヤケ除去に使用いたします。瞬間除去剤となっておりますので、浸漬時間はほとんどかかりません。

- 瞬間除去：原液 10～20秒程度浸漬後、しっかりと水洗い。
- 軽い熱ヤケの器材：20倍希釈液に約5分間浸漬後、しっかりと水洗い。
- ひどい熱ヤケの器材：原液で約30秒浸漬後、しっかりと水洗い。

イナミクリーン R（熱ヤケ瞬間除去剤）

AC-202	250ml	¥740	JAN:4547451260080
--------	-------	------	-------------------

薬 非該当 入 1



新品購入時の油落とし専用剤でベタツキ、変色防止。

本品は、新品機材等に付着する防錆油を除去するための添加タイプの中性洗浄剤です。

- ① 浸漬槽にアルカリ洗浄剤 0.5 % を作製し、さらにイナミクリーン OR を 2～5% になるように添加します。（その時白く濁りますが問題ありません。）
- ② 洗浄液温度を 50～80℃に保ち、器材を 1～2 時間浸漬し、流水下で十分にすすぎます。ロック部分に油が残しやすいので、ロック部は特にしっかりとすすいでください。
- ③ その後、潤滑防錆剤で防錆処理を行い、その後エアージェンなどで水をよく切ってください
- ④ 乾燥器で十分に乾燥してください。
- ⑤ ロック部などに残渣があれば再度②から洗浄し直してください。

イナミクリーン OR（油膜除去用洗浄剤）

AC-402	250ml	¥1,230	JAN:4547451326625
--------	-------	--------	-------------------

薬 非該当 入 1



病棟・外来の再生器材の返納前に

臨床現場での一次処理廃止に向けて、どうしても問題視された「汚染物の凝固」が解消されます。専門セクション（中央滅菌材料室）までの、返納器材を密閉容器等に入れて、汚染部位にまんべんなくスプレーして下さい。後の洗浄作業が効率よく進行します。

- 器材表面のウェット状態を、長時間保ち、長時間の放置による汚れの固着を防止します。
- 金属の腐食を抑え、器材を保護します。
- 血液、蛋白質、脂肪を湿潤し、後の除去作業を容易にします。
- 無泡性のため、溶液が付着した器材も、そのままウォッシャーディスポインフエクタにセット可能です。

イナミクリーン S （器具用タンパク凝固防止剤）6 本入

要 AC-302	500ml	¥14,800	JAN:4547451333289
----------	-------	---------	-------------------

薬 非該当 入 6



凝固血液や血性蛋白をしっかり除去。

使用後の手術器具の洗浄に最適な洗浄液。乾燥凝固した血液は勿論、血性蛋白もしっかりと除去することが可能な、高濃度の蛋白分解酵素による中性洗剤です。

- 通常の汚れ：4倍程度希釈して5分～30分浸漬後、しっかりと水洗い。
- ひどい汚れ：原液に5分～30分浸漬後、しっかりと水洗い。

イナミクリーン P（洗浄剤 高力価酵素配合）

AC-301 4kg ￥14,800 JAN:4547451260097

薬 非該当 入 1



レビテックス専用無泡性酵素配合洗浄剤。

当社製超音波ディスインフェクターレビテックス専用の洗浄剤。レビテックスのパフォーマンスを最大限に引き出し、感染症のリスクを最小限に抑える役割を果たします。

アスカピュア 4本入（洗浄剤）

AC-L150 弱アルカリ酵素洗剤 4kg ￥66,400 JAN:4560305889039

薬 非該当 入 4



鑷子

剪刀

開險器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼病
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスプレイザブル
- AtoZ



使用手順

① 洗浄器のキャップを取り外します。



② パイプシャフト器具専用保護キャップをしっかりと押し込みます。



③ パイプシャフト器具を挿入し、保護キャップにしっかりとめ込みます。



④ 洗浄器本体を器具の上に被せるように取り付けます。



⑤ シリンジに蒸留水、または洗浄液を満した後、洗浄器に接続し、通水洗浄します。洗浄後は空のシリンジで空気を送り、洗浄器内部の水分を除去します。

パイプシャフト用洗浄器

MV-900	140mm	¥ 40,000	JAN:4547451324546
--------	-------	----------	-------------------

材 SUS 薬 非該当 入 1

パイプシャフト器具専用の通水洗浄器。

硝子体器具やサイドポート鑷子に代表されるパイプシャフト（管空状）器具専用の通水洗浄器。使用後、速やかに本製品にて通水洗浄することで、その後の通常の洗浄滅菌工程が更に効果的になります。

硝子体器具保護キャップ

VC-004	白	¥ 1,680
VC-005	ロング (DS-2022 用)	¥ 1,920

薬 非該当 入 1



VC-004

VC-005

微細な先端を保護するパイプシャフト器具専用保護キャップ。

硝子体器具やサイドポート鑷子に代表されるパイプシャフト（管空状）器具専用の保護キャップ。保護キャップを装着した状態で洗浄、滅菌が行えます。微細な器具の先端保護に必需品です。

オート
クレープ
不可



K-1971



K-1972

ポリエステル洗眼瓶

K-1971	100cc	¥ 360	JAN:4560242630015
K-1972	250cc	¥ 430	JAN:4560242632538

薬 非該当 入 1



朝顔型受水器

K-2061	¥ 4,800	JAN:4547451022459
--------	---------	-------------------

材 真鍮にニッケルメッキ 薬 非該当 入 1

memo

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューラ
- スパーテル
- その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイ

AtoZ



ホナンバルーン			
HB2055	¥ 268,000	JAN:4547451321385	
薬	クラス I	JMDN 33804000	届 13B1X00048000685 入 1

理想的な眼圧を実現する眼内圧降下器。

内眼手術前に眼内圧を下げてソフトアイにするため、眼球マッサージを行うことがありますが、マッサージが強くても弱くても目的とする眼圧降下が得られない場合があります。そのため、マッサージには熟練を要すると言われております。

ホナンバルーンは、術前に決定した圧力をコンスタントに眼球に加えることにより（40mmHg で 10 分間、或いは 30mmhg で 10 ～ 30 分間）、理想的な眼圧降下が可能です。正しく患者眼にセットするだけで熟練を要しません。




交換部品			
受	HB150	ベローズ	¥ 70,000 JAN:4547451321439
	HB210	ヘッドバンド	¥ 60,000 JAN:4547451321446
	HB300	ラバーチュービング	¥ 6,500 JAN:4547451321422
薬	クラス I	JMDN 33804000	届 13B1X00048000685 入 1

Diamatrix の E-Series ウィリアムソン・トラペゾイドのダイヤモンドナイフは、最高級のブレードデザインです。Charles H Williamson 医師との協力のもと開発されたウィリアムソン・トラペゾイドは、同社の偏心のあるベベルアップデザインが持つあらゆる利点を楽しむことができます。

Eシリーズ ウィリアムソン トラペゾイド 曲

受	N04880	1.2/1.5mm	¥ 570,000	JAN:4547451336044
受	N04885	1.5/1.8mm	¥ 570,000	JAN:4547451336051
受	N04860	1.9/2.2mm	¥ 570,000	JAN:4547451336068
受	N04870	1.9/2.5mm	¥ 570,000	JAN:4547451336075
受	N04854	2.4/2.7mm	¥ 660,000	JAN:4547451336082
受	N04850	2.5/2.9mm	¥ 660,000	JAN:4547451336099
受	N04830	2.7/3.0mm	¥ 660,000	JAN:4547451336105
受	N04820	2.7/3.2mm	¥ 660,000	JAN:4547451336112

薬 クラス I JMDN 32764001 屈 13B1X00048002425 入 1

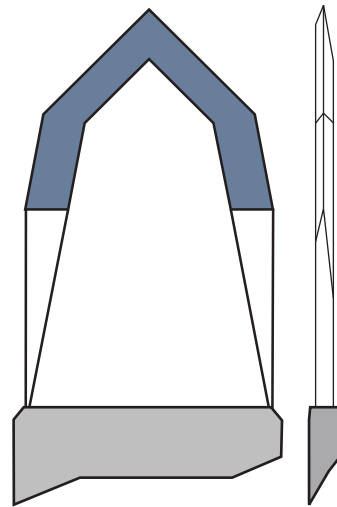

Premium Handles, 100% Titanium, Lifetime Warranty




角度付き、完全伸張 & 格納

ネバダ州ラスベガスの John Shepherd 博士 (M.D) との協力のもと設計された弊社独自のデザインのブレードでは、非切断パラレルサイドに移行する鋭利なショルダーが使用されています。この鋭利なショルダーにより偶発的な拡大を回避できるため、究極の操作感を実現します。

シェパード MAC Ult.Control 曲

受	N04500	2.2mm	¥ 570,000	JAN:4547451336129
受	N04505	2.4mm	¥ 570,000	JAN:4547451336136
受	N04510	2.5mm	¥ 660,000	JAN:4547451336143
受	N04520	2.65mm	¥ 660,000	JAN:4547451336150
受	N04570	2.8mm	¥ 660,000	JAN:4547451336167
受	N04590	3.0mm	¥ 660,000	JAN:4547451336174
受	N04560	3.2mm	¥ 660,000	JAN:4547451336181

薬 クラス I JMDN 32764001 屈 13B1X00048002425 入 1

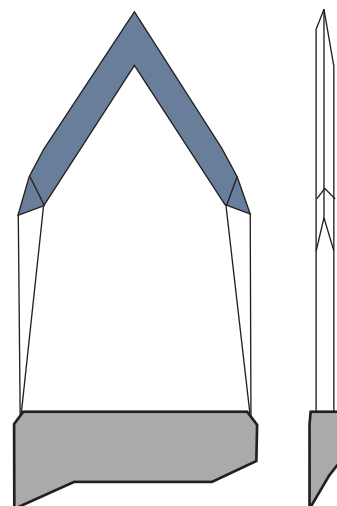

Premium Handles, 100% Titanium, Lifetime Warranty



角度付き、完全伸張 & 格納

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル


AtoZ

なめらかな強膜弁を作製できるようにデザインされた Diamatrix クレセントナイフには、さまざまなブレード幅があり、弊社の 100% チタン製プレミアムハンドルに装着して使用します。


クレセントダイヤモンドナイフ 曲

受	N04581	1.0mm	¥ 680,000	JAN:4547451336235
受	N04580	1.5mm	¥ 680,000	JAN:4547451336242
受	N04585	2.0mm	¥ 680,000	JAN:4547451336259

薬 クラス I JMDN 32764001 屈 13B1X00048002425 入 1

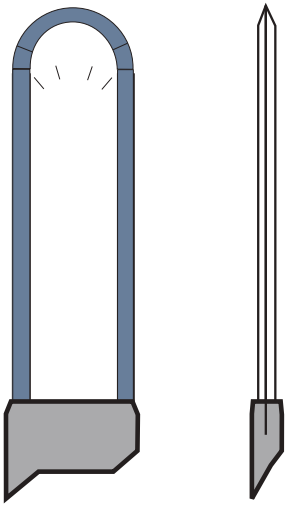


20° Tri-Facet

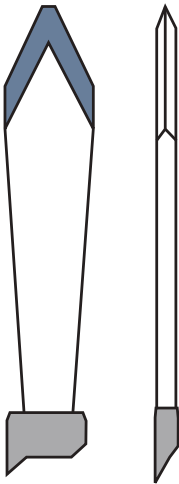


Standard Tri-Facet



Lance

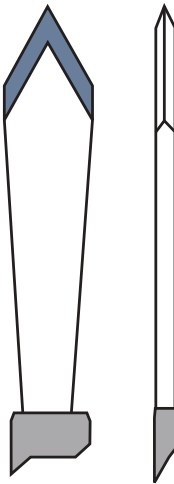

Stat III

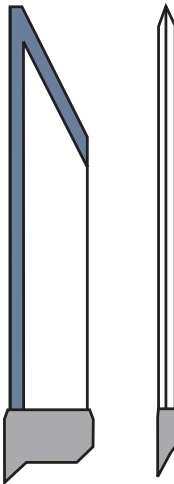

LRI&Groove Std ハンドル

受	L07420	20° Tri-Facet 1.0mm	¥ 220,000	JAN:4547451336198
受	L07410	Std Tri-Facet 1.0mm	¥ 220,000	JAN:4547451336204
受	L07350	Lance 1.0mm	¥ 220,000	JAN:4547451336211
受	L07430	Stat III 1.0mm	¥ 220,000	JAN:4547451336228

薬 クラス I JMDN 32764001 屈 13B1X00048002425 入 1

Diamatrix LRI ダイヤモンドブレードとハンドルは、LRI などの乱視矯正手術できれいな切開を実現可能である、さまざまな種類を提供します。

memo



美しい切開創の作成が可能なスタンダードなスリットナイフ。

白内障手術において、強角膜の穿刺切開に使用いたします。ベベルアップとダブルベベルの各サイズからお選びいただけます。また、替刃タイプは専用ハンドルに接続し、使用後は替刃のみを交換して使用いたします。



替刃

スリットナイフ アングル型（6 本入）					
	72-2561	2.50mm	ベベルアップ	¥ 16,000	JAN:4547451310358
取寄	72-2661	2.65mm	ベベルアップ	¥ 16,000	JAN:4547451310471
	72-2761	2.75mm	ベベルアップ	¥ 16,000	JAN:4547451310556
	72-2861	2.85mm	ベベルアップ	¥ 14,500	JAN:4547451310693
	72-2961	3.00mm	ベベルアップ	¥ 14,500	JAN:4547451310891
	72-3261	3.20mm	ベベルアップ	¥ 14,500	JAN:4547451311140
取寄	72-2531	2.50mm	ダブルベベル	¥ 16,000	JAN:4547451310334
	72-2831	2.80mm	ダブルベベル	¥ 16,000	JAN:4547451310655
取寄	72-2931	3.00mm	ダブルベベル	¥ 16,000	JAN:4547451310877
取寄	72-3231	3.20mm	ダブルベベル	¥ 16,000	JAN:4547451311126
薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00033000 入 6					


替刃（6 本入）					
取寄	72-2862	2.8mm	ベベルアップ	¥ 14,800	JAN:4547451310716
薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00106000 入 6					



スリットナイフ パラレルサイド アングル型（6 本入）					
取寄	72-2912	3.00mm	ベベルアップ	¥ 16,000	JAN:4547451310839
薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00033000 入 6					

強角膜穿刺切開が容易に行えるパラレル（平行）タイプ。

両サイドの刃の付け根部を平行に加工したスリットナイフ。この加工により真っすぐに穿孔し、真っすぐに引くためのガイドの役割を果たします。そのため、器具を引く際に切開創を崩してしまうなどのリスクが軽減されます。

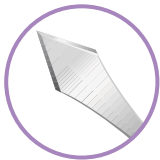

スリットナイフ 直型（6 本入）					
取寄	72-2801	2.85mm	シングルベベル	¥ 13,000	JAN:4547451310631
取寄	72-2901	3.00mm	シングルベベル	¥ 13,000	JAN:4547451310778
薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00033000 入 6					

アングルのない直タイプのスリットナイフ。

白内障手術において、強角膜の穿刺切開に使用いたします。先端はアングルのない直タイプとなっております。

memo

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カン
ニュー
ーラ

スパ
ーテ
ル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サー
ジ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル



AtoZ

鑷子
剪刀
開瞼器
持針器
カニューーラ
スパーテル
その他
白内障
屈折矯正
網膜硝子体
緑内障
角膜
外眼
関連用品

穿刺抵抗を軽減する矢じり型のアール刃

両サイドを薄く加工したリップ形状

断面図

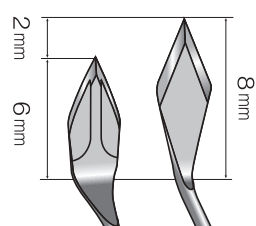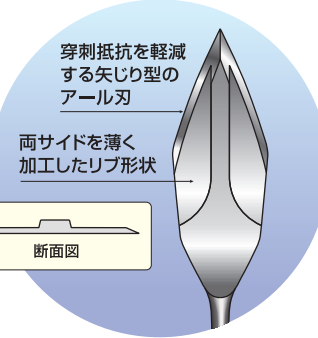

リップ&アール 従来品

マイクロフェザースリットナイフ<リップ & アール>は、独自に設計したリップ形状と矢じり型の刃先が穿刺抵抗を軽減し、今までにないスムーズな切開が可能となります。

刃先からベント位置までの距離を 8mm から 6mm に変更し、ナイフの操作性が向上しました。



マイクロフェザースリットナイフ<リップ & アール> (5 本入) ▶155ページ フェザーハンドル詳細

刃幅	アングル	ベベル	アルミニウムハンドル	替刃タイプ	プラスチックハンドル	セーフシールドタイプ
1.40mm	曲	ベベルアップ	—	—	P-0614RC ￥9,000	—
1.60mm	曲	ベベルアップ	—	—	P-0616RC ￥9,000	—
1.80mm	曲	ベベルアップ	—	—	P-0618RC ￥9,000	—
2.00mm	曲	ベベルアップ	—	—	P-0620RC ￥9,000	—
2.20mm	曲	ベベルアップ	—	—	P-0622RC ￥9,000	—
2.40mm	曲	ベベルアップ	—	—	P-0624RC ￥9,000	—
2.75mm	曲	ベベルアップ	—	—	P-06275RC ￥9,000	—
2.80mm	曲	ベベルアップ	—	—	P-0628RC ￥9,000	—
3.00mm	曲	ベベルアップ	—	—	P-0630RC ￥9,000	—



薬 認 クラスⅡ JMDN 32764002 入 5
219AABZX00178000 (プラスチック) / 219AABZX00083000 (アルミニウム) ,220AABZX00155000 (セーフシールド) / 219AABZX00177000 (替刃)



強膜トンネル切開

角膜切開

耳側強膜切開

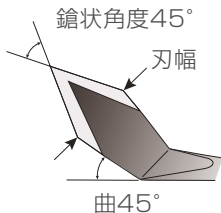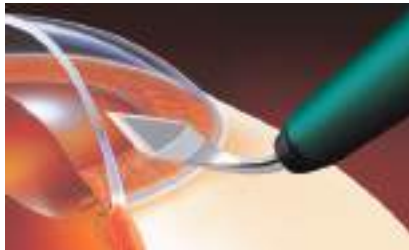

超精密刃付技術と特殊刃付加工により誕生した最新スリットナイフ


フェザーが永年刃物の製造に培った超精密刃付け技術と、最新の特殊刃先加工を集結させたスリットナイフです。線材から形成された刃先は、これまでのスリットナイフより切味が格段に向上し、白内障手術における強角膜への穿刺切開時に抵抗感の低い、安定した切味を発揮します。プラスチックハンドルと刃先をカバーするセーフシールドタイプの 2 種類をご用意しています。



スリットナイフ 06 シリーズ (5 本入) ▶155ページ フェザーハンドル詳細

刃幅	アングル	ベベル	アルミニウムハンドル	替刃タイプ	プラスチックハンドル	セーフシールドタイプ
1.40mm	曲	ベベルアップ	—	—	P-0614BUC ￥9,000	PSS-0614BUC ￥10,000
1.60mm	曲	ベベルアップ	—	—	P-0616BUC ￥9,000	PSS-0616BUC ￥10,000
1.80mm	曲	ベベルアップ	—	—	P-0618BUC ￥9,000	PSS-0618BUC ￥10,000
2.00mm	曲	ベベルアップ	—	—	P-0620BUC ￥9,000	PSS-0620BUC ￥10,000
2.20mm	曲	ベベルアップ	—	—	P-0622BUC ￥9,000	PSS-0622BUC ￥10,000
2.40mm	曲	ベベルアップ	—	—	P-0624BUC ￥9,000	PSS-0624BUC ￥10,000
2.75mm	曲	ベベルアップ	—	—	P-06275BUC ￥9,000	PSS-06275BUC ￥10,000
2.80mm	曲	ベベルアップ	—	—	P-0628BUC ￥9,000	PSS-0628BUC ￥10,000
3.00mm	曲	ベベルアップ	—	—	P-0630BUC ￥9,000	PSS-0630BUC ￥10,000
3.20mm	曲	ベベルアップ	—	—	P-0632BUC ￥9,000	PSS-0632BUC ￥10,000


薬 認 クラスⅡ JMDN 32764002 入 5
219AABZX00178000 (プラスチック) / 219AABZX00083000 (アルミニウム) ,220AABZX00155000 (セーフシールド) / 219AABZX00177000 (替刃)

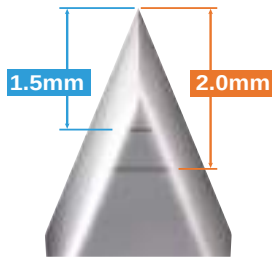

2つのラインが、より正確な切開をサポート。

サイドポート 1.5mm

1.5mm ラインまで水平方向に角膜へ穿刺することで、刃先が確認できない場合でも前房内へ確実に刺入することができ、外方弁に比べ内方弁が狭いサイドポート創口になります。

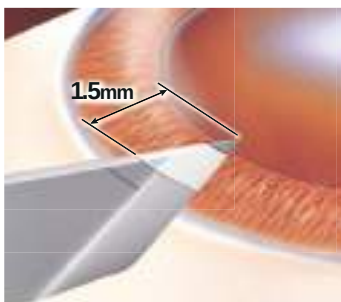


やや広めの外方弁は、チョッパー等の操作性を高め、角膜への負担を軽減します。また、タイトな内方弁は、皮質の詰まりやリークを抑制します。

外方弁は約 1.3mm 幅であり、惹起乱視への影響は極めて少ないと考えられます。



角膜切開 1.5mm 2.0mm

角膜径等の状態に応じた長さのトンネルにするため 1.5mm から 2.0mm ラインを目安に前房へ穿孔します。

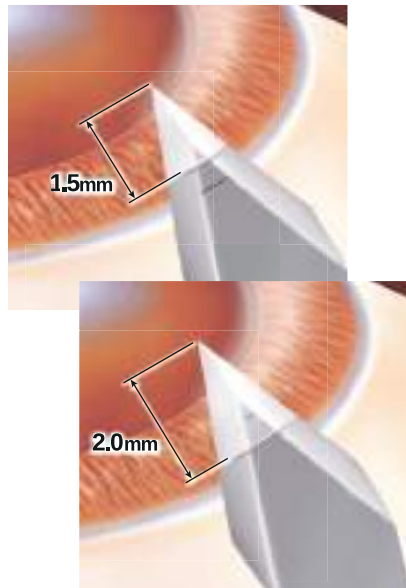

強角膜切開 2.0mm

2.0mm ラインを目安に前房へ穿孔します。

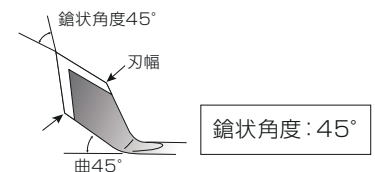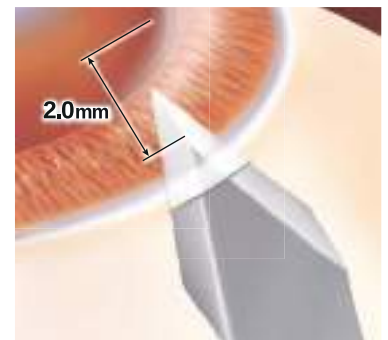

スリットナイフ 06 シリーズ ライン入り (5 本入)


▶155ページ フェザーハンドル詳細



刃幅	アングル	ベベル	アルミニウムハンドル	替刃タイプ	プラスチックハンドル	セーフシールドタイプ
2.20mm	曲	ベベルアップ	—	—	P-0622BUCL ¥9,000	—
2.40mm	曲	ベベルアップ	—	—	P-0624BUCL ¥9,000	—

薬 クラスⅡ JMDN 32764002 入 5

認 219AABZX00178000 (プラスチック) / 219AABZX00083000 (アルミニウム) ,220AABZX00155000 (セーフシールド) / 219AABZX00177000 (替刃)

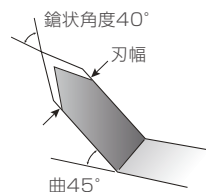

刃厚:0.25mm
鎗状角度:40°

片面 2 段刃付けされた鋭利な刃先は、角膜穿刺時の抵抗が小さく、最良の極小切開創口が作製できます。

マイクロスリットナイフ 極小切開鎗状刀 (5 本入)

▶155ページ フェザーハンドル詳細



刃幅	アングル	ベベル	アルミニウムハンドル	替刃タイプ	プラスチックハンドル	セーフシールドタイプ
1.00mm	直	片面刃付	No.7610 ¥12,500	K-7610 ¥10,000	P-7610 ¥8,000	PSS-7610 ¥10,000
1.00mm	曲	ベベルアップ	—	—	P-7610BU ¥9,000	—

薬 クラスⅡ JMDN 32764002 入 5

認 219AABZX00178000 (プラスチック) / 219AABZX00083000 (アルミニウム) ,220AABZX00155000 (セーフシールド) / 219AABZX00177000 (替刃)

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜


外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

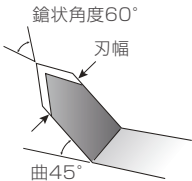

刃厚:0.25mm
鎗状角度:60°


白内障手術における強角膜穿刺切開用。バイベベル、ベベルアップの刃先は術者のあらゆる要求にお応えします。



スリットナイフ 強角膜鎗状刀 (5 本入) ▶ 155ページ フェザーハンドル詳細


刃幅	アングル	ベベル	アルミニウムハンドル		替刃タイプ		プラスチックハンドル		セーフシールドタイプ	
2.50mm	曲	バイベベル	—	—	—	—	P-7625B	¥ 9,000	—	—
2.75mm	曲	ベベルアップ	—	—	—	—	P-76275BU	¥ 9,000	—	—
2.80mm	曲	バイベベル	No. 7628B	¥ 15,000	K-7628B	¥ 12,500	P-7628B	¥ 9,000	—	—
3.00mm	曲	バイベベル	No. 7630B	¥ 15,000	K-7630B	¥ 12,500	P-7630B	¥ 9,000	—	—
3.00mm	曲	ベベルアップ	No. 7630BU	¥ 15,000	K-7630BU	¥ 12,500	P-7630BU	¥ 9,000	—	—
3.00mm	直	バイベベル	—	—	K-7630	¥ 10,000	—	—	—	—
3.20mm	曲	バイベベル	No. 7632B	¥ 15,000	K-7632B	¥ 12,500	P-7632B	¥ 9,000	—	—

薬 Ⅱ クラス JMDN 32764002 入 5
認 219AABZX00178000 (プラスチック) / 219AABZX00083000 (アルミニウム) ,220AABZX00155000 (セーフシールド) / 219AABZX00177000 (替刃)

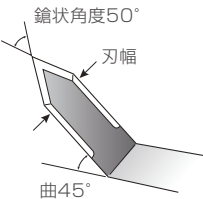

刃厚:0.15mm
鎗状角度:50°

〈刃先断面図〉

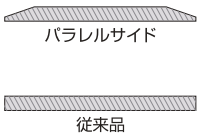

スリットナイフパラレルサイドは、ナイフ側面を加工する事により強角膜への穿刺性能が高くなりました。



スリットナイフパラレルサイド (5 本入) ▶ 155ページ フェザーハンドル詳細

刃幅	アングル	ベベル	アルミニウムハンドル		替刃タイプ		プラスチックハンドル		セーフシールドタイプ	
2.20mm	曲	ベベルアップ	—	—	—	—	P-7622BUPS	¥ 9,000	—	—
2.40mm	曲	ベベルアップ	No.7624BUPS	¥ 15,000	—	—	P-7624BUPS	¥ 9,000	—	—

薬 Ⅱ クラス JMDN 32764002 入 5
認 219AABZX00178000 (プラスチック) / 219AABZX00083000 (アルミニウム) ,220AABZX00155000 (セーフシールド) / 219AABZX00177000 (替刃)

memo



精密な強角膜穿刺が行える最適なスタブナイフ。

白内障手術において、強角膜の半層切開や穿刺に使用します。精密で強度のある鋭利な刃が美しく容易なスタブ切開創を作成します。

替刃



スタブナイフ 直型 (6 本入)

72-1501	15°	シングルベベル	¥ 5,800	JAN:4547451310174
72-2201	22.5°	シングルベベル	¥ 5,800	JAN:4547451310297
72-3001	30°	シングルベベル	¥ 6,500	JAN:4547451310952
取寄 72-4501	45°	シングルベベル	¥ 6,500	JAN:4547451311300

薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00033000 入 6

替刃 (6 本入)

72-1502	15°	シングルベベル	¥ 4,700	JAN:4547451310198
取寄 72-2202	22.5°	シングルベベル	¥ 4,700	JAN:4547451310310
取寄 72-3002	30°	シングルベベル	¥ 4,700	JAN:4547451310976
取寄 72-4502	45°	シングルベベル	¥ 4,700	JAN:4547451311324

薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00106000 入 6



強角膜トンネルフラップ作成用の直型剥離刀。

強角膜トンネル切開や剥離刀として使用します。先端は直タイプとなっております。

替刃



クレセントナイフ 直型 (6 本入)

74-1000	2.00mm	シングルベベル	¥ 14,800	JAN:4547451311409
---------	--------	---------	----------	-------------------

薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00033000 入 6

替刃 (6 本入)

74-5000	2.00mm	シングルベベル	¥ 19,200	JAN:4547451311546
---------	--------	---------	----------	-------------------

薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00106000 入 6



シャープな刃先で精密な強角膜トンネルフラップを実現。

強角膜トンネル切開や剥離刀として使用します。3種類のベベルからお選びいただけます。

替刃



クレセントナイフ アングル型 (6 本入)

74-1010	2.00mm	ベベルアップ	¥ 21,200	JAN:4547451311423
取寄 74-1031	2.00mm	ダブルベベル	¥ 22,100	JAN:4547451311461

薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00033000 入 6

替刃 (6 本入)

取寄 74-5062	2.00mm	ベベルアップ	¥ 19,200	JAN:4547451311560
------------	--------	--------	----------	-------------------

薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00106000 入 6



ミニクレセントナイフ アングル型 (6 本入)

74-6910	1.27mm	ダブルベベル	¥ 24,000	JAN:4547451311584
---------	--------	--------	----------	-------------------

薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00033000 入 6

より微細なフラップの作成に最適なマイクロモデル。

強膜弁の作成や癒着剥離、濾過法再建などあらゆる用途に使用します。より微細なフラップの作成に最適なマイクロタイプの剥離刀です。

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部



関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル

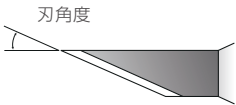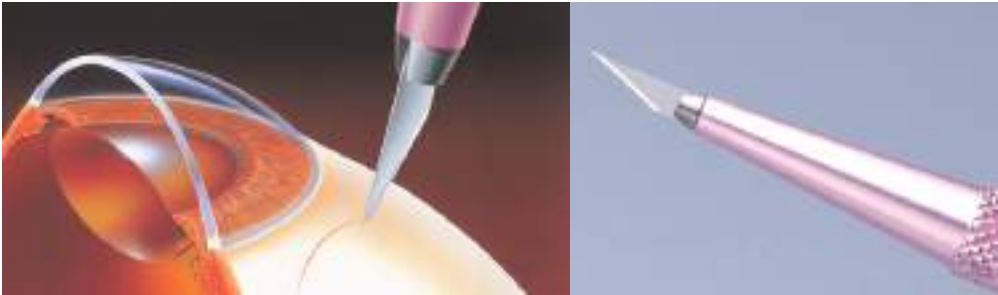

ミクロン単位に超精密刃付けされたストレートな刃先は強膜・角膜の半層切開や穿刺切開等に最適です。



ストレートナイフ 直線刀 (5 本入) ▶155ページ フェザーハンドル詳細



刃の形状	刃の角度	アルミニウムハンドル		替刃タイプ		プラスチックハンドル		セーフシールドタイプ	
	0°	No.700	¥ 6,000	K-700	¥ 3,000	P-700	¥ 3,600		
	15°	No.715	¥ 6,000	K-715	¥ 3,000	P-715	¥ 3,600	PSS-715	¥ 4,000
	22.5°	No.722	¥ 6,000	K-722	¥ 3,000	P-722	¥ 3,600	PSS-722	¥ 4,000
	30°	No.730	¥ 6,000	K-730	¥ 3,000	P-730	¥ 3,600		
	45°	No.745	¥ 6,000	K-745	¥ 3,000	P-745	¥ 3,600		

薬 認 クラスⅡ JMDN 32764002 入 5
219AABZX00178000 (プラスチック) / 219AABZX00083000 (アルミニウム) ,220AABZX00155000 (セーフシールド) / 219AABZX00177000 (替刃)

- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜

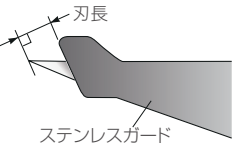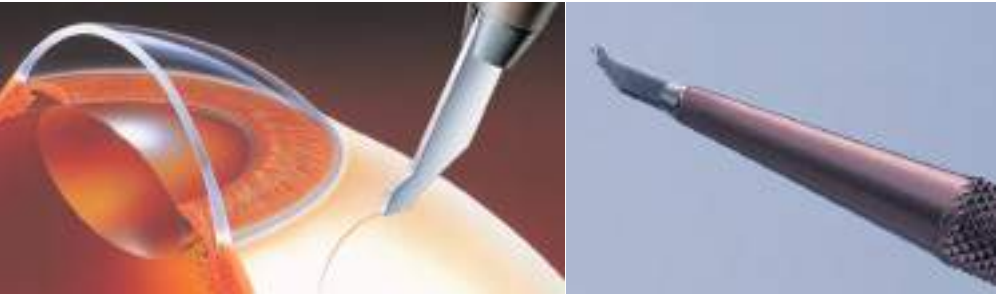

30°のストレートナイフの片側にセットされた0.25mm厚のステンレスガードにより、常に一定の深さの強膜・角膜切開が可能です。ガードはメスの片側にセットされているため切開時の術野を妨げません。


ガードナイフ (5 本入) ▶155ページ フェザーハンドル詳細



刃長	アルミニウムハンドル		替刃タイプ		プラスチックハンドル		セーフシールドタイプ	
0.25mm	No.7325G	¥ 14,000	—	—	—	—	—	—
0.30mm	No.7330G	¥ 14,000	—	—	—	—	—	—
0.35mm	No.7335G	¥ 14,000	—	—	—	—	—	—
0.40mm	No.7340G	¥ 14,000	—	—	—	—	—	—
0.55mm	No.7355G	¥ 14,000	—	—	—	—	—	—

薬 認 クラスⅡ JMDN 32764002 入 5
219AABZX00178000 (プラスチック) / 219AABZX00083000 (アルミニウム) ,220AABZX00155000 (セーフシールド) / 219AABZX00177000 (替刃)

- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ

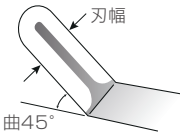

直線とラウンドで構成されたシャープな刃先は強膜トンネルフラップ作製に最適です。又、術者の要求に応えるようバイベベル、ベベルアップ、ベベルダウンを揃えてあります。

クレセントナイフ 剥離刀 (5 本入) ▶155ページ フェザーハンドル詳細



刃幅	アングル	ベベル	アルミニウムハンドル		替刃タイプ		プラスチックハンドル		セーフシールドタイプ	
2.20mm	曲	バイベベル	No.7922B	¥ 22,500	—	—	—	—	—	—
2.60mm	曲	バイベベル	No.7926B	¥ 22,500	K-7926B	¥ 20,000	P-7926B	¥ 13,000	PSS-7926B	¥ 14,500
2.60mm	曲	ベベルアップ	No.7926BU	¥ 22,500	K-7926BU	¥ 20,000	P-7926BU	¥ 13,000	PSS-7926BU	¥ 14,500

薬 認 クラスⅡ JMDN 32764002 入 5
219AABZX00178000 (プラスチック) / 219AABZX00083000 (アルミニウム) ,220AABZX00155000 (セーフシールド) / 219AABZX00177000 (替刃)




パイロットチップ インプラントナイフ
アングル型 (6 本入)

取寄	76-5361	3.20mm	ベベルアップ	¥ 22,140	JAN:4547451311928
取寄	76-5161	5.20mm	ベベルアップ	¥ 22,140	JAN:4547451311867
取寄	76-5561	5.50mm	ベベルアップ	¥ 22,140	JAN:4547451311942
薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00033000 入 6					

レンズ挿入時の切開創拡大が容易なガイド付きナイフ。

ナイフの先端をスリットナイフの切開創に容易にガイドできるように刃先を鈍にしてあります。刃先を切開創内に進入させて眼内レンズ挿入用の正確な切開口に広げることが可能です。

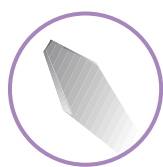

インプラントナイフ アングル型 (6 本入)

取寄	76-4061	4.00mm	ベベルアップ	¥ 15,990	JAN:4547451311829
取寄	76-5261	5.20mm	ベベルアップ	¥ 15,990	JAN:4547451311904
薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00033000 入 6					

レンズ挿入時の切開創拡大用のスタンダードナイフ。

スタンダードなインプラントナイフ。刃先を切開創内に進入させて眼内レンズ挿入用の正確な切開口に広げることが可能です。



クリアトラップ台形クリアコーニア /
移植ナイフ アングル型 目盛付き (6 本入)

取寄	75-2824	2.85-3.20mm	ダブルベベル	¥ 22,140	JAN:4547451310518
取寄	75-2826	2.85-3.75mm	ダブルベベル	¥ 22,140	JAN:4547451310594
薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00033000 入 6					

レンズ挿入時の切開創拡大にも使える角膜切開ナイフ。

2 段階の刃を持つナイフ。先端では角膜切開、強角膜切開用として機能し、2 段目の刃ではレンズ挿入時の切開創拡大用としての活用が可能です。



クリアコーニアナイフ アングル型 (6 本入)

取寄	72-2663	2.65mm	ダブルベベル	¥ 22,100	JAN:4547451310518
取寄	72-2763	2.75mm	ダブルベベル	¥ 22,100	JAN:4547451310594
	72-2863	2.85mm	ダブルベベル	¥ 22,100	JAN:4547451310730
取寄	72-3061	3.00mm	ダブルベベル	¥ 22,100	JAN:4547451311010
薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00033000 入 6					

目盛付きが便利な角膜切開用ナイフ。

角膜切開用として使用します。先端には切り込みの深さを確認するために設けられた 1.5mm、1.75mm、2.0mm の目盛がマーキングされております。より正確な切開創の作成を可能にします。

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜



外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

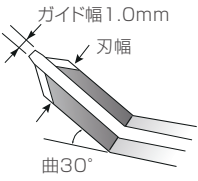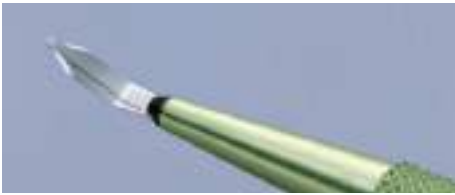

刃先先端に1.0mm幅のステンレスガイドがあるため、最初の極小切開創口とズレることなく平行に創口を広げることができます。



ガイド付インプラントナイフ（5 本入）

▶155ページ フェザーハンドル詳細



刃幅	アングル	ペベル	アルミニウムハンドル	替刃タイプ	プラスチックハンドル	セーフシールドタイプ
2.40mm	曲	ペベルアップ	No.7624BG	—	—	—

薬 219AABZX00178000（プラスチック） / 219AABZX00083000（アルミニウム）,220AABZX00155000（セーフシールド） / 219AABZX00177000（替刃）

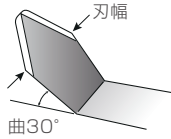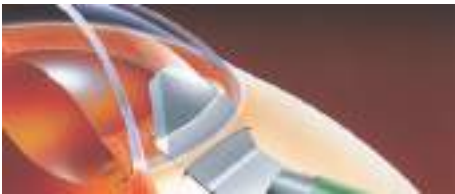

眼内レンズ挿入時の切開創口拡大用ナイフです。先端が台形になっておりますので安全に操作できます。



インプラントナイフ（5 本入）

▶155ページ フェザーハンドル詳細

刃幅	アングル	ペベル	アルミニウムハンドル	替刃タイプ	プラスチックハンドル	セーフシールドタイプ
3.50mm	曲	ペベルアップ	No.7635BR	—	—	—
3.90mm	曲	ペベルアップ	—	—	P-7639BR	—
4.10mm	曲	ペベルアップ	No.7641BR	—	P-7641BR	PSS-7641BR
5.10mm	曲	ペベルアップ	—	—	P-7651BR	—
5.70mm	曲	ペベルアップ	No.7657BR	K-7657BR	P-7657BR	—

薬 219AABZX00178000（プラスチック） / 219AABZX00083000（アルミニウム）,220AABZX00155000（セーフシールド） / 219AABZX00177000（替刃）

memo



クリアポートナイフ アングル型 (6 本入)

取寄	78-2310	23G	0.8mm	¥14,760	JAN:4547451320609
薬	クラス II	JMDN	32764002	認	221ABBZX00033000 入 6

幾何学デザインがこれまでにない美しいポート作成を実現。

幾何学を通じてデザインされた先端が、これまでにない美しいポートの作成を約束します。出し入れする器具のフィット感が向上、そして自己癒着も促進いたします。



直型



アングル型

ビットナイフ (6 本入)

	71-1901	19G	1.0mm	直型	¥11,700	JAN:4547451310013
	71-2001	20G	0.9mm	直型	¥11,700	JAN:4547451310037
取寄	71-2301	23G	0.6mm	直型	¥11,700	JAN:4547451321651
	71-2501	25G	0.5mm	直型	¥11,700	JAN:4547451321637
取寄	71-2061	20G	0.9mm	アングル型	¥13,500	JAN:4547451310051
薬	クラス II	JMDN	32764002	認	221ABBZX00033000 入 6	

サイドポートや強膜ポート作成に最適。

穿刺用として使用します。白内障手術におけるサイドポートや、硝子体手術における強膜ポートの作成に最適です。



スプーンブレードナイフ アングル型 (6 本入)

	74-2261	2.2mm	ダブルベベル	¥ 22,100	JAN:4547451311485
取寄	74-3061	3.0mm	ダブルベベル	¥ 22,100	JAN:4547451311508
薬	クラス II	JMDN	32764002	認	221ABBZX00033000 入 6

術者の意図する方向へ切開できる汎用性の高い剥離刀。

320°の薄刃がついた円刃刀です。術者の意図する方向に切開が可能となっております。主に強膜弁の作成時などにパフォーマンスを発揮します。

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイナイフ

AtoZ

150



ニードルブレード 直型 (6 本入)

取寄 **78-6810** 4mm シングルベベル ¥19,700 JAN:4547451312048
薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00033000 入 6

サイドポート作成にも使用できる汎用性の高いナイフ。

様々な切開創の作成が可能な汎用性の高いナイフ。先端を穿刺すれば繊細なサイドポートの作成も容易に行えます。



替刃

スクレラルナイフ 直型 (6 本入)

78-5700 直型 シングルベベル ¥14,800 JAN:4547451312004
薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00106000 入 6

翼状片切除や強膜フラップ作成に最適なゴルフ刀。

ゴルフ刀の用途として使用します。翼状片の切除や緑内障における強膜フラップ作成などにパフォーマンスを発揮いたします。替刃タイプなため、使用の際には専用ハンドルとの接続が必要です。




替刃

ラメラナイフ アングル型 (6 本入)

78-6600 2.3mm ベベルアップ ¥14,800 JAN:4547451312024
薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00106000 入 6

角膜表層の剥離に最適な剥離刀。

角膜移植手術 (DLK) 時の角膜表層の剥離に最適です。替刃タイプなため、使用の際には専用ハンドルとの接続が必要です。

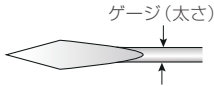

白内障手術のサイドポート作製、硝子体手術の強膜穿刺切開等に最適です。


MVR ナイフ (5 本入)

▶155ページ フェザーハンドル詳細



径	アングル	ベベル	アルミニウムハンドル		替刃タイプ		プラスチックハンドル		セーフシールドタイプ	
19G	直	バイベベル	—	—	—	—	P-7519	¥8,100	—	—
20G	直	バイベベル	—	—	—	—	P-7520	¥8,100	—	—
20G	曲 30°	バイベベル	No.7520B	¥13,500	—	—	—	—	—	—
23G	直	バイベベル	—	—	—	—	P-7523	¥8,100	—	—
23G	曲 30°	バイベベル	—	—	—	—	P-7523B	¥9,100	—	—

薬 クラスⅡ JMDN 32764002 入 5
認 219AABZX00178000 (プラスチック) / 219AABZX00083000 (アルミニウム) ,220AABZX00155000 (セーフシールド) / 219AABZX00177000 (替刃)

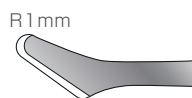

角膜の切開、緑内障手術の強膜フラップ作製等に最適です。

ゴルフ刀 (5 本入)



▶155ページ フェザーハンドル詳細



ベベル	アルミニウムハンドル	替刃タイプ	プラスチックハンドル	セーフシールドタイプ
バイベベル	No.780	K-780	—	—

薬 Ⅱ クラスⅡ JMDN 32764002 入 5

認 219AABZX00178000 (プラスチック) / 219AABZX00083000 (アルミニウム) ,220AABZX00155000 (セーフシールド) / 219AABZX00177000 (替刃)

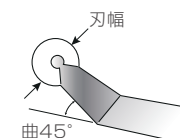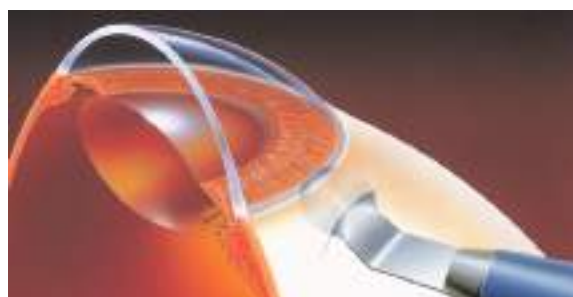

円形の中心から両面刃付けされたシャープなラウンド刃先は強膜トンネルフラップ作製に最適です。

ラウンドナイフ 円状刀 (5 本入)




▶155ページ フェザーハンドル詳細



刃幅	アングル	ベベル	アルミニウムハンドル	替刃タイプ	プラスチックハンドル	セーフシールドタイプ
2.2mm	曲	バイベベル	No.7722B	—	—	—
2.6mm	曲	バイベベル	No.7726B	K-7726B	P-7726B	—
3.0mm	曲	バイベベル	No.7730B	K-7730B	P-7730B	—
3.0mm	直	バイベベル	No.7730	K-7730	—	—

薬 Ⅱ クラスⅡ JMDN 32764002 入 5

認 219AABZX00178000 (プラスチック) / 219AABZX00083000 (アルミニウム) ,220AABZX00155000 (セーフシールド) / 219AABZX00177000 (替刃)

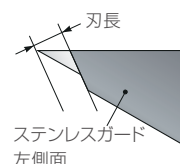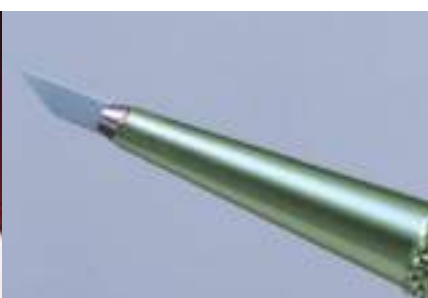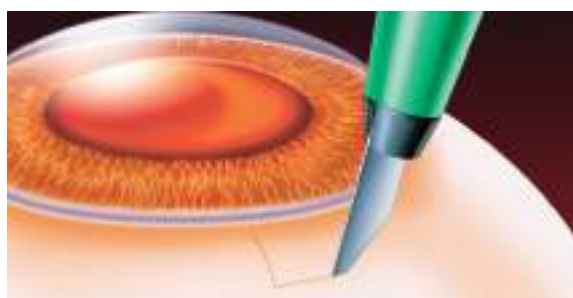

30度のストレートナイフの片側にセットされた0.10mm厚のステンレスガードにより、常に一定の深さの強膜半層切開が可能です。

緑内障ナイフ (5 本入)

▶155ページ フェザーハンドル詳細



刃長	アルミニウムハンドル	替刃タイプ	プラスチックハンドル	セーフシールドタイプ
0.2mm	No.6320G	—	—	—
0.3mm	No.6330G	—	—	—

薬 Ⅱ クラスⅡ JMDN 32764002 入 5

認 219AABZX00178000 (プラスチック) / 219AABZX00083000 (アルミニウム) ,220AABZX00155000 (セーフシールド) / 219AABZX00177000 (替刃)

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜


外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディスポー
ザブル

AtoZ

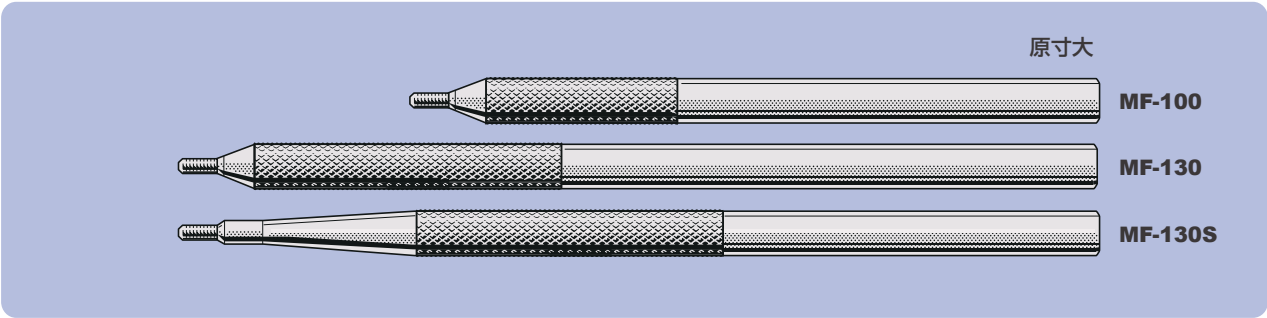

フェザー微細手術用替刃メスハンドル

(替刃タイプ専用ハンドル / チタン合金製)

MF-100	全長 100mm	¥ 10,000	JAN:4902470066998
MF-130	全長 130mm	¥ 12,000	JAN:4902470067018
MF-130S	全長 130mm	¥ 12,000	JAN:4902470067032

薬 クラスⅠ JMDN 12235000 届 21B2X10001062004 入 1

軽量で扱いやすく、耐久性に優れたフェザー専用替刃ハンドル。

省スペース・省資源に対応した替刃タイプには、3種類の専用ハンドルが必要となります。替刃とハンドルの組み合わせにより、術者の様々なリクエストにお答えします。



替刃専用ハンドル

92-9003	全長 160mm	¥ 5,500	JAN:4547451312109
---------	----------	---------	-------------------

薬 クラスⅠ JMDN 12235000 届 13B1X00048000047 入 1

替刃専用ハンドル。

替刃用ディスポーザブルナイフ専用のハンドルです。
(※フェザー社ナイフには対応しておりません。)

メスのベベル

メスの刃先形状には、両面刃付け、片面刃付けがあります。両面刃付けされたメスをバイベベル、片面刃付け面を上側にして曲げたメスをベベルアップ、下側にして曲げたメスをベベルダウンと呼びます。ベベルの位置により刃先の直進性が異なります。

刃先の側面図

バイベベル	ベベルアップ	ベベルダウン


ベストセラーの粘弾性物質注入針。

主に粘弾性物質の注入用として使用します。また、空気や薬液の注入、吸引など幅広い用途にご使用いただけます。

ニプロディスポーザブル オプタルミック針（ビスコ針 / 100 本入）

00-223	直	25G	シャフト 22mm	¥ 20,000	JAN:4987458002236
00-222	直	27G	シャフト 22mm	¥ 14,000	JAN:4987458002229
00-224	直	30G	シャフト 22mm	¥ 20,000	JAN:4987458002243
00-226	曲	27G	シャフト 22mm	¥ 14,000	JAN:4987458002267

薬 クラスⅡ JMDN 70200000 添 20200BZZ00793000 入 100

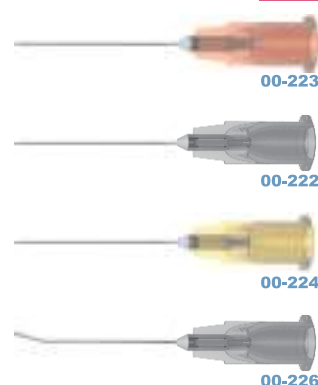

硝子体腔のあらゆる操作が便利。

眼底までアクセス可能な 25G の鈍針。硝子体腔へのガス・薬液の注入や吸引排出が便利に行えます。

ニプロディスポーザブル オプタルミック針（100 本入）

取寄 **00-427** 直 25G シャフト 35mm ¥ 36,000 JAN:4987458004278

薬 クラスⅡ JMDN 70200000 添 20200BZZ00793000 入 100



多様性のある柔軟管。

硝子体手術におけるタンポナーデでの使用や術中の角膜散水ドリッパーとしても有用な針です。

ニプロディスポーザブル オプタルミック針 20Gx40 柔軟管

取寄 **00-225** 直 20G シャフト 40mm ¥ 25,000 JAN:4987458002250

薬 クラスⅡ JMDN 70200000 添 20200BZZ00793000 入 100



ベストセラーの眼内注射針。


術中や術後における前房や硝子体腔、結膜下への薬液やガスの注射に最適なベストセラーの注射針です。32G モデルは、外径が 0.23mmφ であり、極小の刺入創口を作成できます。

ニプロディスポーザブル 眼内注射針（100 本入）

00-221 直 30G シャフト 19mm ¥ 15,000 JAN:4987458002212

取寄 **00-426** 直 32G シャフト 13mm ¥ 19,200 JAN:4987458004261

薬 クラスⅡ JMDN 70200000 認 20200BZZ00792000 入 100

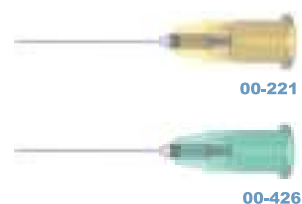

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

テノン嚢下麻酔に最適な 1 本。

サイドポートから抵抗が少なく滑らかに刺入できます。注入のポートは幅広となっており、テノン嚢下麻酔に最適な一本です。2 サイズからお選びいただけます。



00-414



00-411

ニプロディスポーザブル
サイドポート針（テノン麻酔針 / 50 本入）

取寄	00-414	曲	25G	シャフト 28mm	¥ 43,500	JAN:4987458004148
取寄	00-411	曲	27G	シャフト 28mm	¥ 43,500	JAN:4987458004117
薬	クラス II	JMDN	70200000	承認	20200BZZ00793A01	入 50

操作性、安全性に優れた球後麻酔針。

先端は視神経損傷、眼球穿孔、あるいは球後出血を防止するためにシングルカット面となっております。また、異組織に到達した時の抵抗感を感じ取り易くするため、適度の鈍先となっております。



00-231



00-229

ニプロディスポーザブル球後麻酔針（100 本入）

00-231	曲	23G	シャフト 44mm	¥ 39,500	JAN:4987458002311		
00-229	直	23G	シャフト 38mm	¥ 15,000	JAN:4987458002298		
薬	クラスⅡ	JMDN	70200000	認	2020BZZ01227000	入	100

汎用性の高いサイドポート針。

様々な用途に使用できる汎用性の高いカニューラ。前房や硝子体腔への注入や吸引、涙道の洗浄や造影剤の注入等にも使用可能です。



ニプロディスポーザブル
サイドポート針（50 本入）

取寄	00-228	直	25G	シャフト 28mm	¥ 37,500	JAN:4987458002281
薬	クラス II	JMDN	70200000	承認	20200BZZ00793A01	入 50

使いやすい 25G ハイドロ針。

扁平×25G の設計で、効率良く、また水晶体線維に対してもより安全に作業が行えます。漏れの少ない強い水流で一気に脱臼することが可能です。



ニプロディスポーザブル
ハイドロダイセクション針（100 本入）

00-227	アングル	25G	シャフト 22mm	¥ 25,000	JAN:4987458002274	
薬	クラス II	JMDN	70200000	承認	2020BZZ00793000	入 100

CCC をより容易に行えるチストーム。

鋭利かつ精巧な先端が、前囊のぎっかけづくりから CCC 完成までをより容易に行えるようサポートします。



ニプロディスポーザブルチストーム（40 本入）

00-233 アングル 25G シャフト 19mm ￥17,400 JAN:4987458002335

薬 クラスⅡ JMDN 32764002 済 21900BZX00312000 入 40

ポリッシャーとしても便利な眼内レンズムーバー。

IOL を傷から守り、挿入、ポジショニングに使用します。後囊研磨（ポリッシャー）としてもご使用いただけます。



ニプロディスポーザブル 眼内レンズムーバー（40 本入）

00-234 アングル 27G シャフト 19mm ￥27,600 JAN:4987458002342

薬 クラスⅡ JMDN 35314002 済 21900BZX00311000 入 40

使いやすい 27G 涙洗針。

27G を採用した涙道通水検査に使用する一般的な涙洗針。



ニプロディスポーザブル涙洗針（100 本入）

00-232 曲 27G シャフト 22mm ￥18,000 JAN:4987458002328

薬 クラスⅡ JMDN 70200000 済 20200BZZ00793000 入 100

流出抵抗の高い傍シュレム管内皮網を擦過する非穿孔性器具。

流出路再建術に使用するやすり状に表面加工した 30G 鈍針で、シュレム管の走行に近い湾曲形状となっております。シュレム管内へ挿入後、傍シュレム管内皮網を擦過いたします。終了直後に粘弾性物質を管内へ注入する事で、房水静脈からの血液の逆流を最小限に留め、流出路機能を保全再生します。

【使用方法と術中の注意点】

線維柱帯切開術の手順で深層強膜弁切除後、トラベクトームの代わりにメッシュワークシェーバーを粘弾性物質の注射筒に接続した状態でシュレム管内へ挿入。先端が 4 分の 1 周ほど入ったところで先端をシュレム管の入り口まで引き戻し、また入れるという動作を 5 回前後繰り返し、傍シュレム管内皮網を擦過する。術中の眼圧は 10 ～ 20mmHg に保つ。眼圧が上がっているとシュレム管が潰れて入れにくい。Descemet window に小さな穿孔が出来た場合、一気に広がることもある。術中に眼圧が低くなると、房水静脈から血液が逆流して、trabecular meshwork を通って前房内に入ってくるので、眼圧が下がり過ぎないように注意。擦過と同時に粘弾性物質を注入すると trabecular meshwork を通過して、粘弾性物質が前房内に出てくる様子が観察できる。粘弾性物質はシュレム管の拡張と血液の逆流防止に有効である。これまでの臨床経過から、再建した流出路（trabecular meshwork、シュレム管や Collector channel）は長期に機能していると考えられる。



ニプロディスポーザブル 30G メッシュワークシェーバー針（50 本入）

00-404 曲 30G シャフト 16mm ￥125,000 JAN:4987458004049

薬 クラスⅡ JMDN 11701002 済 22500BZX00074000 入 50

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

前房水を1人で、簡単かつ一瞬で定量採液。

30G×4mmの鋭針で、ストローを押しつぶし前房穿刺いたします。指で押し潰していたストローを開放することで、房水を約120μlを採液することが可能です。硝子体腔からの際液や薬液の注入も可能です。



ニプロディスポーザブル房水ピペット（100 本入）

取価	00-235	直	30G	シャフト 4mm	¥ 72,000	JAN:4987458002359
薬	クラスⅡ	JMDN	34899012	承	21900BZX01267000	入 100

memo

細身の形状にすることで、注入時の抵抗を低減させることに成功しました。
また、大きくデザインされたグリップ部は、操作性に優れ、コンスタントに安定した注入を可能にします。

抗 VEGF 薬に適したシリンジのご提案

抗 VEGF 薬を 30G 等の細径注射針を用いて注入する際に針に圧がかかってしまう為、ルアータイプシリンジでは薬液注入時に“針が抜けてしまう”恐れがございます。

- ① ロックタイプである為、針の抜けのリスクを低減し、より安全に使用できます。
- ② フランジ部を大きく設計し、握りやすい形状である為、注入コントロールがし易い。
- ③ 内筒部のデッドスペースを減らし、薬剤の無駄を省け経済的です。



センシテックシリンジ 1mL ロックタイプ (20 本入)



取寄 19545 ￥13,650 JAN:4996404195458

薬 クラスⅠ JMDN 13929001 届 13B1X00085000098 入 100



従来のガスケット構造



新型ガスケット構造

memo

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイザブル

AtoZ

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他

- 白内障
- 屈折矯正

- 網膜硝子体

- 緑内障

- 角膜

- 外眼部

- 関連用品

- サージカルナイフ

- ディスプレイ

- AtoZ

Best Seller




吸水前 吸水後

吸水率は自重の約 20 倍

17.0mm

取り出しやすさと個数の管理が向上した新パッケージ

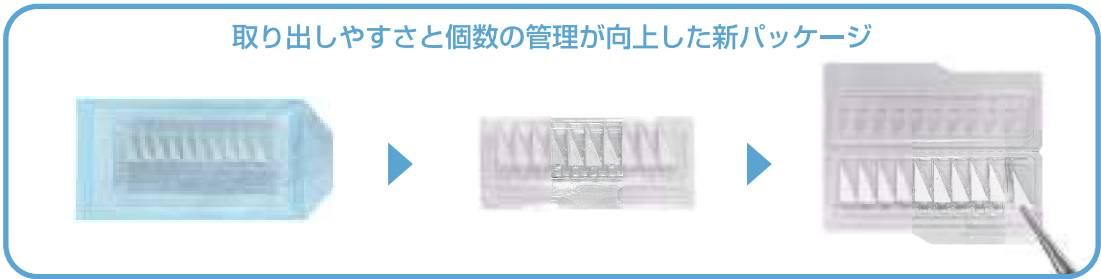

吸水スポンジ M.Q.A.

S-5B	小箱	入数 250 ケ (10 個入 × 25 袋)	¥7,600	JAN:4547451336990
------	----	-------------------------	--------	-------------------

薬 クラス I JMDN 10175000 13B1X00048002089 入 10 個入り × 25 袋

販売代理店への出荷は 6 箱 (S-5B×6) 単位となります。

※製品素材の特性上、小さな黒点が入っている場合がございますが、製品の品質に問題はありません。

吸水スポンジの代名詞とも評価される実力の M.Q.A.。

処置中の体液や水分などを吸収し、術野を確保するために使用します。M.Q.A. は適度な柔軟性を誇るファインチップ形状となっており、使用中の視認性やピンポイントの操作性に優れております。

また、自重の約 20 倍の吸収力と瞬間的な吸水スピードは、術者のオペレーションを最大限にサポートいたします。

発売以来、多くのユーザーから愛用され続けるベストセラー商品です。

Best Seller



吸水前 吸水後

吸水率は自重の約 20 倍

17.0mm

85.0mm

M.Q.A.スティック スタウト

S-88STS	小箱	入数 100 ケ (5 本入 × 20 袋)	¥6,500	JAN:4547451325581
---------	----	------------------------	--------	-------------------

薬 クラス I JMDN 10175000 13B1X00048001700 入 100

販売代理店への出荷は 6 箱 (S-88STS×6) 単位となります。

※製品素材の特性上、小さな黒点が入っている場合がございますが、製品の品質に問題はありません。

更に力強くなったスティックタイプで操作性、安定性が飛躍。

M.Q.A. のスティックタイプ。鑷子などで把持して使用する必要がなく開封後速やかに使用することが可能です。スティックはあらゆる M.Q.A. の使用シーンを想定した最適な剛性になっており、吸水などのオペレーションはもちろん、眼球展開などの使用の際にも安定かつ優れたパフォーマンスを発揮いたします。

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ



M.Q.A.ホルダー クロスアクション

M-1616 102mm ¥20,000 JAN:4547451031819

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048000361 入 1

M.Q.A. の把持に最適な専用鑷子。

M.Q.A. を把持して操作する専用の鑷子。クロスアクションタイプのため、把持状態が保たれ、スムーズなオペレーションが可能となります。

Quick Service



M.Q.A.ホルダー及び娩出用モンジロー

M-140 145mm ¥12,000 JAN:4547451031482

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 届 13B1X00048000263 入 1

M.Q.A. 把持と強膜圧迫が行える両頭モデル。

水晶体娩出に際して後方より強膜を圧迫して補助するのが娩出鉤部。反対側は M.Q.A. を挟めるようになっています。



M.Q.A.ホルダー

S-3H 126mm ¥2,500 JAN:4547451034735

材 SUS 薬 クラス I JMDN 10861001 届 13B1X00048000508 入 1

シンプルな M.Q.A. ホルダー。

非常にシンプルな M.Q.A. を把持操作する専用のホルダー。

memo

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイ

AtoZ

160

Best Seller

片手操作で簡単に角膜頂点への点眼が可能

最小限の点線で清明な術野を確保します。
センタリングの確認が容易です。

安定した点眼タイミング

術者の水掛け指示が減り、ストレスが軽減されます。
手術助手は、水掛け以外の作業に集中できます。

フリーサイズ

各社顕微鏡に付属品なく装着が可能です。

シングルユース

常に清潔な状態で使用できます。
使用後のメンテナンスが不要です。



キャタップ

20703 (CA-01) ￥39,800 JAN:4996404207038
薬 クラスⅡ JMDN 34899032 認 218AABZX00058000 入 10


キャタップ固定用具

20702 (AP-01) ￥7,000 JAN:4996404207021
薬 非該当 入 5


取付けイメージ




水平回転

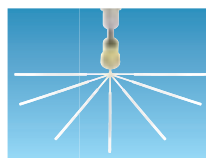

上下動

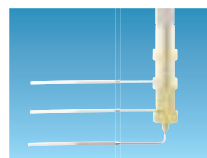

伸縮自在なノズル

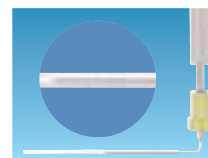

セッティング方法は本カタログの178ページでご確認下さい。

PICK UP

目尻に載せるだけで簡単に自動排水

簡単なセッティング

ソリフィスを載せるだけで排水が開始されます。

清明な術野の確保

U/S 時など創口から眼内還流液が大量漏出する際の
液面上昇を抑制し術野の清明性を保ちます。

創口の汚染防止


素早い排水で液体貯留を防ぐため、創口の汚染リスクを低減します。



MOVIE



ED view

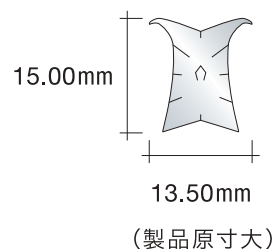





(製品原寸大)



ソリフィス


20711 15mm×13.5mm ￥9,620 JAN:4996404207113
薬 クラスⅠ JMDN 32572000 届 13B1X00085000090 入 20

角膜露出ライン

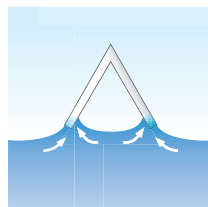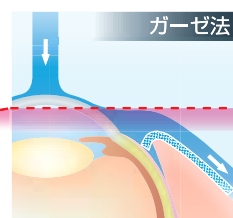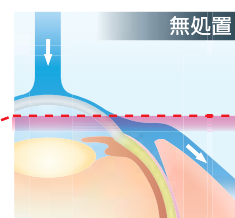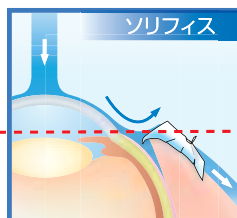

付着力

ソリフィス本体を水面に近付けると水が吸い付いてくる。

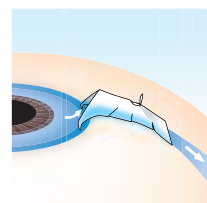

水路形成保持

一度出来た排水路は一滴でも水が接触すれば継続的に流れ続ける。

使用方法は本カタログの179ページでご確認下さい。



5D view

オート
クレープ
不可

Best
Seller



クリアアイシールド (50 ケ入)

G-701 72×55mm ￥11,000 JAN:4547451312666

薬 非該当 入 50

患者さまの術後の生活を守るクリアな視界と安全性。

クリアな視界を実現する透明度と、しっかりと眼を保護する強度にこだわりました。患者さまにリラックスした術後の期間を過ごしていただくことが可能です。また、金属アレルギーの方にも安心してお使いいただけます。



K-2772

K-2771

佐伯氏金属保護眼帯

K-2771 大 90×75mm ￥760 JAN:4547451321279


K-2772 小 70×60mm ￥760 JAN:4547451321286

薬 非該当 入 1

快適な装着感が魅力の定番眼帯。

アルミ製の保護眼帯。外部の埃や菌などの刺激や圧迫などからしっかりと眼球を保護致します。患者さまに快適に装着いただける独特の形状となっております。

単

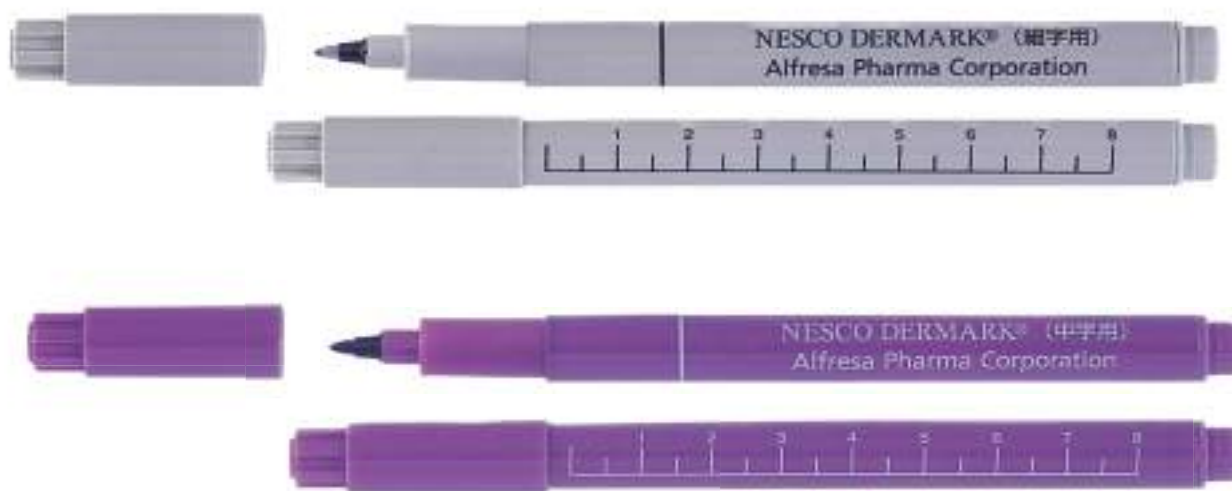

ネスコデルマーク (10 本入)

ND-1 細字 濃青 ペン先寸法 0.4mm ￥2,400 JAN:4987274250614

ND-2 中字 濃青 ペン先寸法 0.8mm ￥2,400 JAN:4987274546021

薬 非該当 入 10

しっかりとしたシャープなマーキングで手術を強力サポート。

- ・「皮膚にやさしい医療用マーカー」
- ・直接マーキングが可能です。定着性があり簡単に消えることがありません。
- ・ペン先形状の仕様により、カスレがなく、細い線もより書きやすくなっております。
- ・焼却してもダイオキシンを発生しないので、環境にも配慮されています。
- ・色：濃青
- ・仕様変更によりクリスタルバイオレット不使用となりました。

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜


外眼病

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

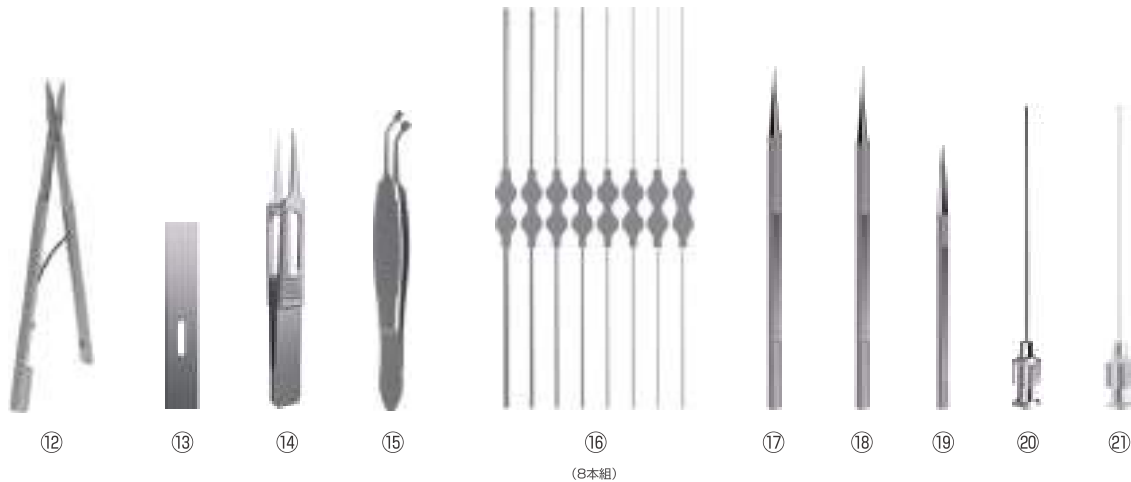

(8本組)

スターターセット

商品コード	商品名	単価	入数	総計
① K-1971	ポリエステル洗眼瓶 100cc	¥360	1	
② K-1972	ポリエステル洗眼瓶 250cc	¥430	1	
③ K-2061	朝顔受水器	¥4,800	2	
④ K-2771	佐伯氏金属保護眼帯 大	¥760	10	
⑤ K-2772	佐伯氏金属保護眼帯 小	¥760	10	
⑥ KI-21	結膜用・睫毛鑷子スタンダード	¥25,000	1	
⑦ S-310A	有鉤鑷子 直	¥9,500	1	
⑧ S-313A	無鉤鑷子 直	¥9,000	1	
⑨ S-325	ポーフル氏睫毛鑷子	¥45,000	1	
⑩ S-510CS	反剪刀 鋭	¥9,000	1	
⑪ S-510SS	直剪刀 鋭	¥9,000	1	
⑫ M-40RS	マイクロサージャリー用替刃/パンチ 直	¥48,000	1	
⑬ M-150G	フェザー眼科用カミソリ 100 枚入	¥5,000	1	
⑭ M-2015	高橋氏おたま型小異物鑷子 “すくい取り”	¥36,000	1	
⑮ M-2073	有田式マイボーム腺圧出鑷子	¥40,000	1	
⑯ S-185S	ポーマン氏涙管消息子 全サイズセット	¥22,000	1	
⑰ S-186RM	ヴィルター氏涙管拡張針 中	¥6,000	1	
⑱ S-186RS	ヴィルター氏涙管拡張針 細	¥6,000	1	
⑲ S-186S	幼児用拡張針	¥6,000	1	
⑳ S-215-21	バンガーター氏プジョー型涙管洗浄針 21G	¥6,000	1	
㉑ S-215-23	バンガーター氏プジョー型涙管洗浄針 23G	¥6,000	1	
㉒ S-218AC	中村式涙管洗浄用一段針 曲 (12 本入)	¥21,000	1	
㉓ S-218C	中村式涙管洗浄用二段針 曲 (12 本入)	¥21,000	1	
㉔ S-485M	クント氏挟瞼器 中	¥19,000	1	
㉕ S-845RM	デマル氏開瞼鉤 中	¥13,000	1	
㉖ S-845RS	デマル氏開瞼鉤 小	¥13,000	1	
㉗ M-6100A	滅菌トレー 器具 10 本用	¥35,970	2	

¥ 472,030



(12本入)

(12本入)



②7

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ


ディス
ポー
ザブル

AtoZ



霰粒腫セット

商品コード	商品名	単価	入数	総計
① DS-003	縫合鑷子 前方突出型 (80度) 段付	¥62,000	1	¥ 339,970
② M-1R	マイクロ結紮鑷子	¥38,000	1	
③ KI-21	結膜用・睫毛鑷子スタンダード	¥25,000	1	
④ S-511C	スプリングハンドル式剪刀 反 鋭	¥46,000	1	
⑤ M-738R	バラッケー氏持針器 ショートモデル 止無	¥56,000	1	
⑥ S-485M	クント氏挟瞼器 中	¥19,000	1	
⑦ M-2187S	霰粒腫切開術用鑷子 おとも君 小	¥38,000	1	
⑧ S-112A	霰粒腫用丸型鋭匙 中	¥20,000	1	
⑨ M-6100A	滅菌トレー 器具 10 本用	¥35,970	1	

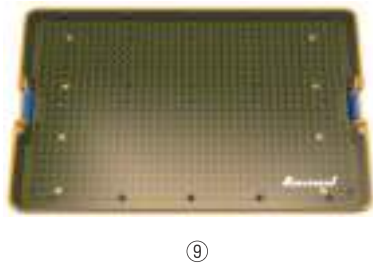


⑨



眼瞼下垂セット

商品コード	商品名	単価	入数	総計
① M-180A	コリブリ鑷子 角膜結膜縫合用	¥55,000	1	¥ 406,970
② M-1R	マイクロ結紮鑷子	¥38,000	1	
③ M-19R	チュービンゲン型結紮鑷子 直 無鉤	¥30,000	1	
④ S-510CS	反剪刀 鋭	¥9,000	1	
⑤ S-511C	スプリングハンドル式剪刀 反 鋭	¥46,000	1	
⑥ S-184M	中村氏鉗針型開創鉤 中 (2 本組)	¥12,000	1	
⑦ S-730	カストロヴィーホー氏持針器 曲	¥52,000	1	
⑧ S-200S	カストロヴィーホー氏カリバー 直	¥40,000	1	
⑨ S-247B	エーゲル氏角板金属	¥6,600	1	
⑩ M-2218	小林式 TCMT 用鑷子ガル氏角板金属	¥52,000	1	
⑪ S-490RM	デマル氏挟瞼器 中	¥28,000	1	
⑫ ND-2	ネスコデルマーク中字 (10 本入)	¥2,400	1	
⑬ M-6100A	滅菌トレー 器具 10 本用	¥35,970	1	

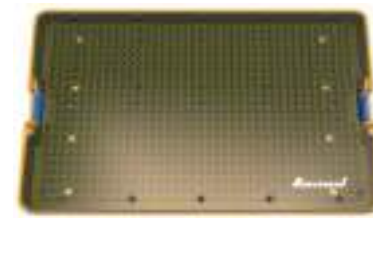

⑬

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部


関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイボード


AtoZ

翼状片セット・結膜弛緩症セット

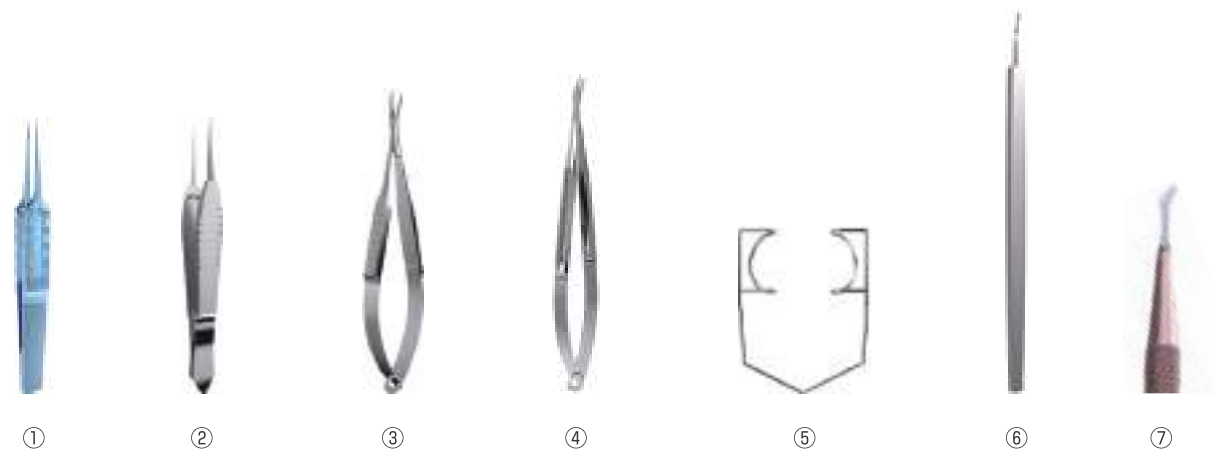

翼状片セット

	商品コード	商品名	単価	入数	総計
①	DS-003	縫合鑷子 前方突出型（80 度）段付	¥62,000	1	¥ 287,470
②	M-1R	マイクロ結紮鑷子	¥38,000	1	
③	S-511C	スプリングハンドル式剪刀 反 鋭	¥46,000	1	
④	M-738R	バラックー氏持針器 ショートモデル 止無	¥56,000	1	
⑤	M-135	バラックー氏開瞼器 小	¥6,000	1	
受 ⑥	M-1104	前田式翼状片スパーテル	¥26,000	1	
⑦	No.780	ゴルフ刀 アルミニウムハンドル	¥17,500	1	
⑧	M-6100A	滅菌トレー 器具 10 本用	¥35,970	1	

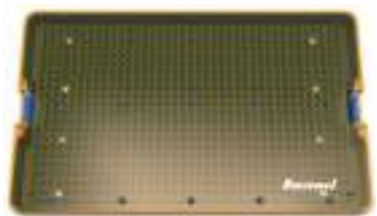


⑧



結膜弛緩症セット

	商品コード	商品名	単価	入数	総計
①	DS-003	縫合鑷子 前方突出型（80 度）段付	¥62,000	1	¥ 346,370
②	S-510CS	反剪刀 鋭	¥9,000	1	
③	KI-46	湖崎氏マイクロサージャリー用持針器 止無	¥60,000	1	
④	M-901	マイクロ開瞼器 オープンリング型	¥42,000	1	
⑤	M-1405A	横井氏カレースマーカー エボリューション	¥75,000	1	
受 ⑥	M-1406A	横井氏カレースマーカー エボリューション	¥60,000	1	
⑦	ND-2	ネスコデルマーク中字（10 本入）	¥2,400	1	
⑧	M-6100A	滅菌トレー 器具 10 本用	¥35,970	1	

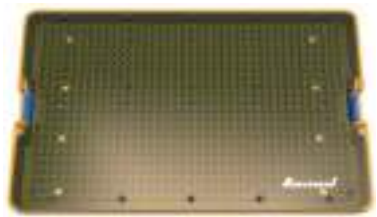

⑧




白内障 D&C セット

商品コード	商品名	単価	入数	総計
① DS-003	縫合鉗子 前方突出型 (80 度) 段付	¥62,000	1	¥ 613,970
② M-1R	マイクロ結紮鉗子	¥38,000	1	
③ S-511C	スプリングハンドル式剪刀 反 鋭	¥46,000	1	
④ M-2056-24	テノン囊下注入針 3 ポート 24G	¥15,000	1	
⑤ KI-46	湖崎氏マイクロサージャリー用持針器 止無	¥60,000	1	
⑥ M-901	マイクロ開瞼器 オープンリング型	¥42,000	1	
⑦ DS-1612F	稲村氏カプシュロレクシス鉗子 ファイン チタニウム	¥84,000	1	
⑧ DS-2021	池田氏マイクロカプシュロレクシス鉗子 S-Model 23G	¥160,000	1	
⑨ M-1524	ハイドロカニューラ 23G	¥9,000	1	
⑩ M-136	分割器 (徳田式核分割フック)	¥36,000	1	
⑪ M-128C	眼内レンズ用プッシュアンドフル鉤 曲	¥26,000	1	
⑫ M-6100A	滅菌トレー 器具 10 本用	¥35,970	1	




⑫

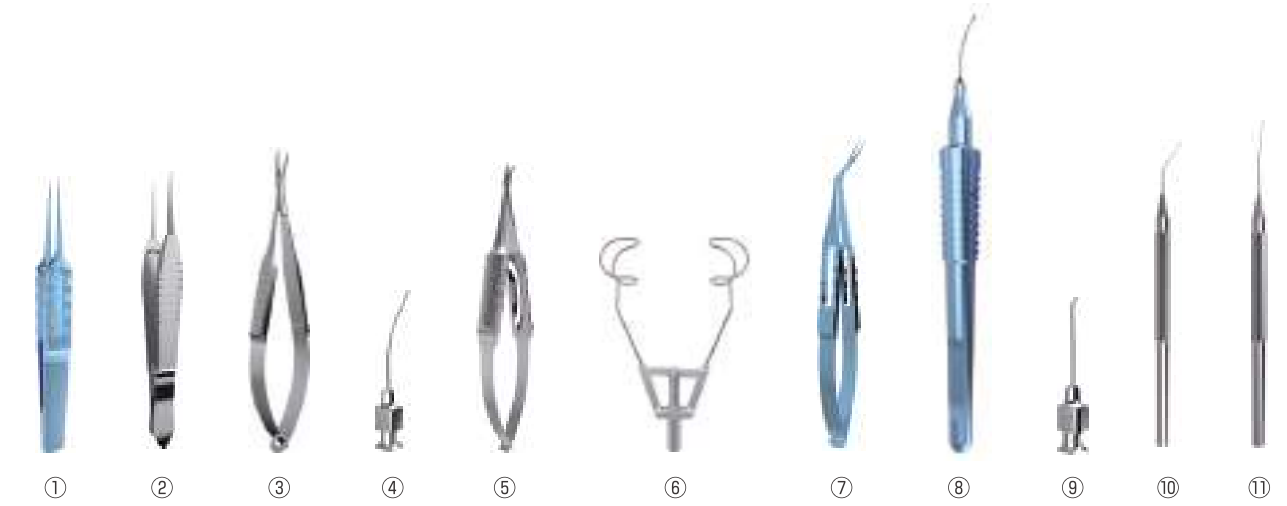

白内障 Phaco Chop 法セット

商品コード	商品名	単価	入数	総計
① DS-003	縫合鉗子 前方突出型 (80 度) 段付	¥62,000	1	¥ 613,970
② M-1R	マイクロ結紮鉗子	¥38,000	1	
③ S-511C	スプリングハンドル式剪刀 反 鋭	¥46,000	1	
④ M-2056-24	テノン囊下注入針 3 ポート 24G	¥15,000	1	
⑤ KI-46	湖崎氏マイクロサージャリー用持針器 止無	¥60,000	1	
⑥ M-901	マイクロ開瞼器 オープンリング型	¥42,000	1	
⑦ DS-1612F	稲村氏 カプシュロレクシス鉗子 ファイン チタニウム	¥84,000	1	
⑧ DS-2021	池田氏マイクロカプシュロレクシス鉗子 S-Model 23G	¥160,000	1	
⑨ M-1524	ハイドロカニューラ 23G	¥9,000	1	
⑩ M-136N	永原式フェコチョッパー	¥36,000	1	
⑪ M-128C	眼内レンズ用プッシュアンドフル鉤 曲	¥26,000	1	
⑫ M-6100A	滅菌トレー 器具 10 本用	¥35,970	1	

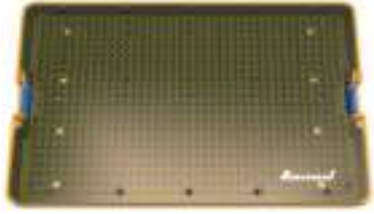

⑫

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイザブル

AtoZ

Q


白内障プレチョップ法セット・硝子体 25G セット

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスプレイ
- AtoZ



白内障プレチョップ法セット

商品コード	商品名	単価	入数	総計
① DS-003	縫合鑷子 前方突出型 (80 度) 段付	¥62,000	1	¥ 761,970
② M-1R	マイクロ結紮鑷子	¥38,000	1	
③ S-511C	スプリングハンドル式剪刀 反 鋭	¥46,000	1	
④ M-2056-24	テノン囊下注入針 3 ポート 24G	¥15,000	1	
⑤ KI-46	湖崎氏マイクロサージャリー用持針器 止無	¥60,000	1	
⑥ M-901	マイクロ開瞼器 オープンリング型	¥42,000	1	
⑦ DS-1612F	稲村氏 カプシュロレクシス鑷子 ファイン チタニウム	¥84,000	1	
⑧ DS-2021	池田氏マイクロカプシュロレクシス鑷子 S-Model 23G	¥160,000	1	
⑨ M-1524	ハイドロカニューラ 23G	¥9,000	1	
⑩ DS-502	マイクロプレチョッパー	¥150,000	1	
⑪ M-2199	核サスティーナ	¥34,000	1	
⑫ M-128C	眼内レンズ用プッシュアンドプル鉤 曲	¥26,000	1	
⑬ M-6100A	滅菌トレー 器具 10 本用	¥35,970	1	

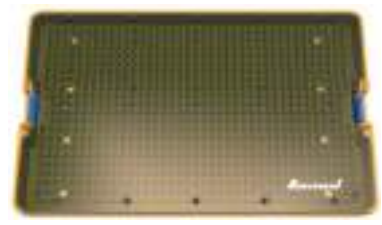

⑬



硝子体 25G セット

商品コード	商品名	単価	入数	総計
① DS-003	縫合鑷子 前方突出型 (80 度) 段付	¥62,000	1	¥ 1,225,370
② M-1R	マイクロ結紮鑷子	¥38,000	1	
③ S-511C	スプリングハンドル式剪刀 反 鋭	¥46,000	1	
④ MB-029	デリケート持針器 曲 12mm 止無	¥74,000	1	
⑤ M-2056-24	テノン囊下注入針 3 ポート 24G	¥15,000	1	
⑥ M-951	マイクロ開瞼器 横スリットタイプ 吸引付	¥75,000	1	
⑦ M-579-25	竹内式メンブレインピック 25G	¥36,300	1	
⑧ DS-028	ILM 鉗子ファイングリップ 25G	¥231,000	1	
⑨ DS-802	ILM 鉗子ピックエンド 25G	¥230,000	1	
⑩ M-550A-25B	喜多式バックフラッシュハンドピースエクストルージョンハンドル付セット 25G	¥50,000	1	
⑪ RB-700H-25N	岡田氏網膜ブラシビットスウィーパー 25G 専用ハンドル	¥82,000	1	
⑫ RB-40-2	岡田氏網膜ブラシビットスウィーパー 替ブラシ	¥12,100	1	
⑬ TR-070	25G トロカールセット	¥210,000	1	
⑭ M-2572A	滅菌トレー 器具 1 ~ 2 本用スロットタイプ	¥28,000	1	
⑮ M-6100A	滅菌トレー 器具 10 本用	¥35,970	1	



⑬



⑭



⑮

選ばれた器具たちが、つまっています。

AtoZ
Inami Surgical Package

a to z [エートゥー・ゼッド]

名 〔眼科〕 眼科治療における各症例の処置に最適な器具のパッケージ。
株式会社イナミが長年培ってきた経験を元に、同社のベストセラー器具より厳選されている。

スターターセット
霰粒種手術
眼瞼下垂手術
翼状片手術
結膜弛緩症手術

白内障D&C法
白内障フェイコチョップ法
白内障プレチョップ法
硝子体手術 25G

AtoZ
Inami Surgical Package

このシリーズの詳細は本カタログの162～166ページでご確認下さい。

吸水率

体重70kgなら、生ビール約2800杯分。[※]



イナミのM. Q. A. (Medical Quick Absorber)は、自重の約20倍の水を吸収可能。

これは体重70kgの人に例えるなら、生ビール中ジョッキ約2800杯分に相当します。

業界トップクラスの吸水率と品質を誇る「元祖眼科用吸水スポンジ」。

選ぶなら、やっぱりイナミのM. Q. A.。

※1杯500mlの水として換算

※イラストはイメージです

取り出しやすさと個数の管理が向上した新パッケージ



眼科用吸水スポンジ

M.Q.A.

原寸大
電子線滅菌済



S-5B

入数250ヶ(10個入×25袋)

この製品の詳細は本カタログの158ページでご確認下さい。

タフなスティック、登場。



この製品の詳細は本カタログの158ページでご確認下さい。

眼科用吸水スポンジ

M.Q.A. スティック

スポンジ

100本(5本入り×20パック) 電子線滅菌済



眼内レンズを ワンアクションで摘出。 ICL セッティングにも最適。

野口氏 IOL 把持鑷子 19G Lens Grabber II

DS-2022 DS-2022S



MOVIE

ご考案者 野口 三太郎 先生 コメント

(仙台市 ASUCA アイクリニック 仙台マークワン / 兵庫県 姫路市 ツカザキ病院 眼科)

「眼内レンズは眼内分割の後に小切開から摘出が基本であった。しかし、レンズグラバーを用いると、丸ごと小切開からワンアクションにて摘出可能となった。切開創の拡大もごくわずかである。特に摘出操作が困難な親水性レンズ、シリコンレンズが摘出しやすくなったのは術者にとって福音である。

バージョン2に進化したレンズグラバーは、設計強度を上げることで、把持力をあげたため、ワンアクションレンズ摘出率が向上し、鑷子の被損率も低下させることが出来た。

また、これまで困難であったシリコンレンズの摘出が分割無しにワンアクションで摘出可能になり、ロングバージョンにおいては、バックマン型鑷子のように ICL を簡単、安全にカートリッジに装填することが可能になった。」

従来のレンズ鑷子



レンズグラバー



この製品の詳細は本カタログの83ページでご確認下さい。



DIA X2-MUINS

Xpand2 虹彩リング

マルチコース：使用限度 2 回

*Elegant solution to
IFIS and small-pupil
management*

この製品の詳細は本カタログの66ページでご確認下さい。



APX^{OPHTHALMOLOGY}

Pupil Expanding Device

APX200

虹彩エキスパンダー



Expanding Your Vision

この製品の詳細は本カタログの66ページでご確認下さい。

inami micro lotomy hook series



TANITO MICRO HOOK
TMH®
庄司 ed.



TANITO MICRO HOOK
TMH®
Original-ed.



CHIHARA MICRO HOOK
T-hook
Original-ed.



Ophthalmic Surgical Training Models



セット



術式に応じた模擬眼トレーニングキット

※2023年9月現在のラインナップです。

- EYE-ACIOL1-SET：シミルアイ 前房 IOL 挿入用 (有水晶体) セット
- EYE-AP1-SET：シミルアイ IOL 挿入用 (無水晶体) セット
- EYE-CS1-SET：シミルアイ カプセルサポートセット
- EYE-ISIF1-SET：シミルアイ ISIF (虹彩縫合&IOL 固定) セット
- EYE-MM1-SET：シミルアイ MIGS セット
- EYE-SP1-SET：シミルアイ 小瞳孔セット
- EYE-SR10-SET：シミルアイ CCC 作成キット (前囊フィルム 10 枚付) セット

※レーザーモデル、硝子体手術モデル追加予定



- ✓ 非侵襲検査で患者様の負担を軽減
- ✓ 層別評価でドライアイのタイプの見極めが可能
- ✓ IPL や点眼、温電法などの治療後の経過観察に最適
- ✓ 定量評価で患者様への分かりやすいインフォーム

SI-302S

【構成品】

SI-301 アイドラ / 光学台 / 架台部 / 顎台 / ベース / 専用 PC

【SI-301】製造販売届出番号 13B1X00048002315

FUNCTIONS



AUTO INTERFEROMETRY

光干渉により涙液油層厚 (LLT) を自動測定



TEAR MENISCUS

涙液メニスカスの深さを自動測定



NIBUT WITH MAP AND GRAPH

非侵襲にて BUT を自動計測



MEIBOGRAPHY

マイボーム腺を高解像度赤外線撮影



BLEPHARITIS

ブラッキングや血管拡張を高倍率撮影




BLINK QUALITY

不完全瞬目を測定することで瞬きを評価



MRD-1 NEW

瞼裂幅を測定し、眼瞼下垂の程度を定量化

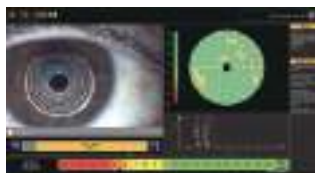

IPL [Intense Pulsed Light]

AQUA CEL

Jeisys

- ✓ ムラのない安定したパルス出力を実現
- ✓ 安心温度センサー内臓+強力冷却機能
- ✓ トーニングモード・フォトシャワー搭載



治療目的に応じた多彩なフィルター搭載



操作性と耐久性に富んだハンドピース

医療機器認証番号：303ADBZX00049000





Mybo shampoo

Lidhygiene for My beauty operation.

TeaTree 1.0

眼科医が本気で監修した **1.0%**
ティーツリーオイル 配合の
 プレミアムなリッドハイジーン用シャンプー。



低刺激 泡タイプ Tea Tree 1.0% ライムエキス



洗い方動画



リッドハイジーンの効果

洗顔や歯磨きと同じように、目やまぶたのトラブルを予防するために毎日の生活にとり入れたいのが、目もとの洗浄（リッドハイジーン）。目もとやまつ毛は、空気中を浮遊するホコリや花粉がついたり、メイクや皮脂汚れなどの汚れが溜まりやすい場所です。まつ毛の根元の汚れをしっかりと落とす「リッドハイジーン」を習慣にして、トラブル知らずな目もとを目指しましょう。

マイボシャンプー® TeaTree1.0

注文コード：MS-TT1.0-12（1箱：12本入り）

内容量：50ml 種類別名称：洗顔料

【監修】 有田 玲子 医師（LIME研究会代表・伊藤医院 副院長）
 松本 玲 医師（医療法人社団医新会 レイククリニック 院長）
 高橋 研一 医師（医療法人 高橋眼科 院長）

ピュア・ルイボス i

PURE ROOIBOS i



ルイボスエキスで潤いを。

ピュア・ルイボス i 10袋入

※1袋：60錠（30回分）

注文コード：PR-I-10



Made in Japan



サプリでカラダの内側からサポート！

「ピュア・ルイボス i」は、「うるおい」がコンセプトのサプリメント。

ルイボスから抽出された「エリオジクチオール-6-C-グルコシド（E6CG）」は涙や唾液などの分泌に深く関与しているムスカリンM3受容体を活性する成分として注目されています。

内容量：15g（250mg×60錠）※1袋あたり 1日1回2錠（目安）

【栄養成分表示（2粒0.5gあたり）】

エネルギー 1.925kcal、タンパク質 0.003g、脂質 0.012g、
 炭水化物 0.451g、食塩相当量 0.00306g

【原材料】

ルイボス抽出物（ルイボスエキス、デキストリン）（国内製造）、プロポリス抽出物（プロポリスエキス、還元でん粉糖化物）、ビルベリー果実抽出物、こんにゃく芋粉抽出物／セルロース、ステアリン酸カルシウム、二酸化ケイ素、サイクロデキストリン、加工デンプン

【製造所】アピ株式会社 池田工場 岐阜県揖斐郡池田町小牛743-1

【販売者】株式会社イナミ 東京都文京区本郷3丁目24番2号

【監修】 有田 玲子 医師（LIME研究会代表・伊藤医院 副院長）

新見 浩司 医師（医療法人社団医新会 新見眼科 理事長）

松本 玲 医師（医療法人社団医新会 レイククリニック 院長）

福岡 詩麻 医師（大宮はまだ眼科西口分院 院長）




マイクロフェザー スリットナイフ

〈リブ&アール〉

マイクロフェザースリットナイフ〈リブ&アール〉は
独自に設計したリブ形状と矢じり型の刃先が穿刺抵抗を軽減し、
今までにないスムーズな切開が可能となります。



刃先からペント位置までの距離を
8mmから6mmに変更し、ナイフの
操作性が向上しました。

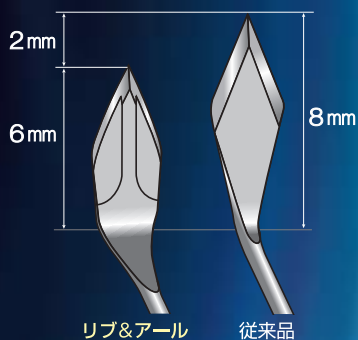

プラスチックハンドル（原寸大）

販売単位：1箱（5本入） 標準価格：¥9,000

刃 幅	品 番	JANコードナンバー
1.4 mm	P-0614RC	4 902470 148472
1.6 mm	P-0616RC	4 902470 148489
1.8 mm	P-0618RC	4 902470 148496
2.0 mm	P-0620RC	4 902470 148502
2.2 mm	P-0622RC	4 902470 148519

刃 幅	品 番	JANコードナンバー
2.4 mm	P-0624RC	4 902470 148526
2.75mm	P-06275RC	4 902470 148533
2.8 mm	P-0628RC	4 902470 148540
3.0 mm	P-0630RC	4 902470 148557

製造販売認証番号：219AABZX00178000／管理医療機器

■ ガンマ線滅菌済 ■ ベベルアップ ■ シングルユース




フェザー安全剃刀株式会社
メディカル部

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1丁目2番2号
TEL.03-3864-0917 FAX.03-3862-8040
ホームページ www.feather.co.jp/

●本製品は改良のため予告なく仕様を
変更する場合があります。

この製品の詳細は本カタログの142ページでご確認下さい。

マイクロフェザーナイフハンドルのご案内

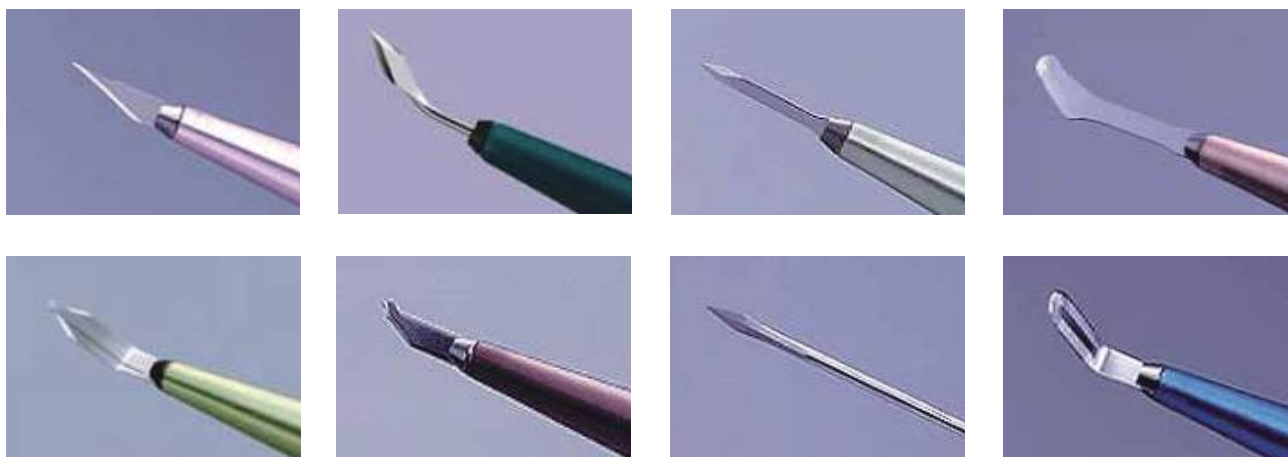

マイクロフェザーは、より多くの術者のリクエストにお応えするために、アルミニウムハンドルタイプ、替刃タイプ、プラスチックハンドルタイプ、セーフシールドタイプと4種類のハンドルをご用意しています。いずれのタイプもガンマ線滅菌されていますので、開封してすぐにご使用できます。
(4タイプ共、刃先は同じ品質であるため切味に差はありません。)

アルミニウムハンドル

アルミニウムハンドルは、適度な重量感と手に馴染むフィット感が得られます。カラーコード化されたハンドルは、その色により刃先形状が容易に識別できるようデザインされています。



替刃タイプ

替刃タイプは、耐久性に優れたチタン合金製ハンドルに装着してご使用いただけます。替刃部分のみのコンパクトなパッケージは、省スペース・省資源に対応しています。



プラスチックハンドル

プラスチックハンドルは、単回使用に適した経済的なタイプです。カラーコード化されたハンドルは、その色により刃先形状が容易に識別できるようデザインされています。



セーフシールドタイプ

セーフシールドタイプは、突き刺し防止と安全な廃棄が可能となった安全機構付きハンドルです。安全カバーは、片手での操作が容易に行える設計となっております。

MICRO FEATHER
SAFESHIELD DISPOSABLE
OPHTHALMIC SCALPEL
マイクロフェザーセーフシールドスカルペル

スリットナイフ／インプラントナイフ




ラウンドナイフ／クレセントナイフ



ストレートナイフ



標準的な手術顕微鏡へのセッティング例

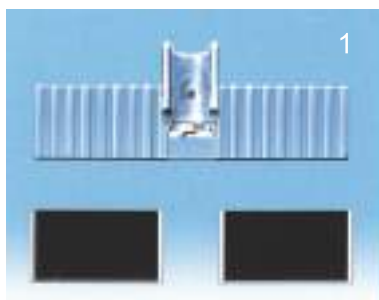

固定用具の裏面へ両面テープを貼付けます。



左右の羽部分を取付け位置の曲面に沿うように折り曲げます。



両面テープで固定用具を顕微鏡に貼付けます。



キャタップ本体と輸液セット先端ロックタイプ、三方活栓ロックタイプ(別売)をご用意ください。



点眼液のボトルと輸液セット、三方活栓、キャタップの順でしっかり接続します。



キャタップ本体を固定用具に下から滑り込ませて取付けます。



輸液ラインをアームに沿わせてセットします(補助具などを利用してセットします)。



ノズルを下に引き、高さを調節した後、保護カバーを取り外します。




ノズルのプロテクターを取り外した後、ノズルをレンズ下に回転させます。

清潔
操作



クレンメで点眼速度を調節しながらノズルを微回転・伸縮させて、角膜頂点へ滴下するようにアライメントします。調整が終わったら、三方活栓を閉じて準備完了。

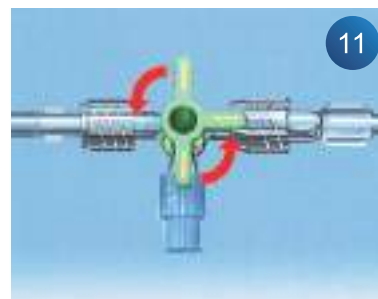

【手術終了】三方活栓を閉じます。
【手術開始】三方活栓を開きます。

※2件目からは三方活栓の開閉とノズルの簡単な微動だけで確実な“水かけ”が可能です。

ソリフィス®



コンパクトボディー


ソリフィス本体は
開瞼器枠内に収まる大きさです。




「3スリット」デザイン

3つのスリットを入れて、多様な目尻形状に
対応する立体デザインを採用しました。


腕部は、目尻の皮膚が持ち上がる瞼裂の狭い目や奥目の症例でも
しっかりと回り込む構造ですので、結膜底部の液体まで排液可能です。

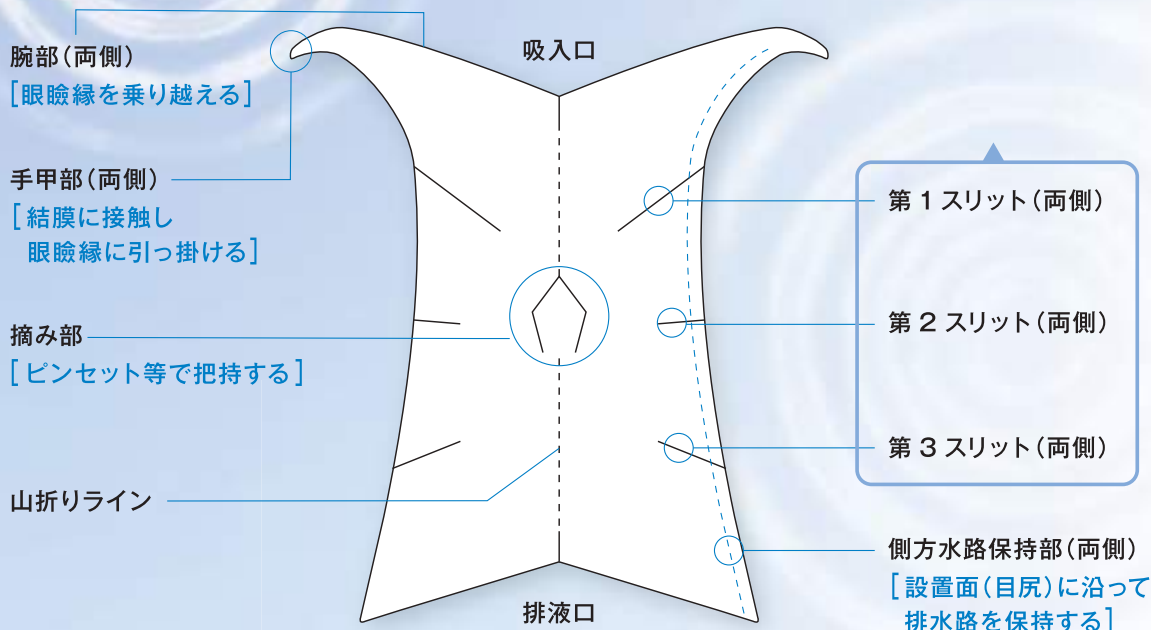


推奨形状の作り方

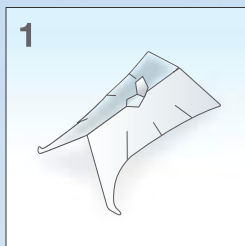


●摘み部を立てて折り
曲げる。

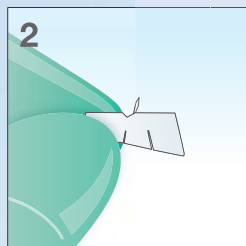


●腕部を瞼裂内に、手甲
部が結膜に触れるように
第一スリットを含めて前
方(腕部)を摘み、山折り
ラインを深くする。

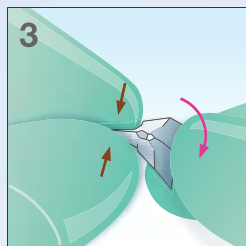

●設置面(目尻)の形状に
沿いやすくするため、後方
を開いて摘み、山折りライ
ンを湾曲させる。

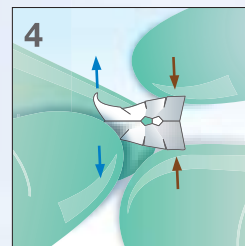

●山折りが深くなり過
ぎた前方(腕部)を広げ
浅くなり過ぎた後方を
軽く狭める。

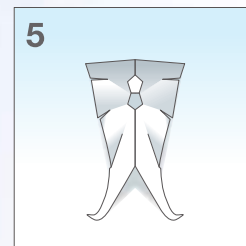


●推奨形状の完成。
第1～第2スリット間の
山折りが最も深くなっ
ている。


設置のコツ




●摘み部をピンセットで把持
し、本体裏面(排液面)を生
理食塩水などで濡らす。

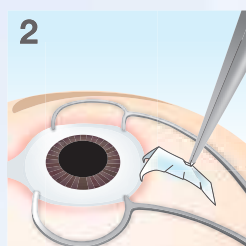


●手甲部が結膜に触れ、眼
瞼縁の引っ掛かりやすい位
置に設置する。
(この際、手甲部が結膜に触
れていることを確認してく
ださい)

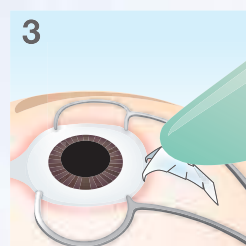

●設置後に山折りラインを
軽く押し付けて設置面の形
状に沿わせる。

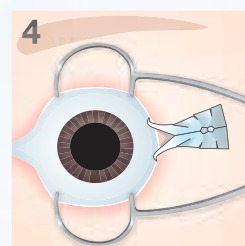

●やや上方偏移の斜め掛け
が最良の設置位置となるこ
とが多い。
(手甲部—腕部—側方水路保
持部が片側だけでも機能し
ていれば排液効果は得られ
ます)

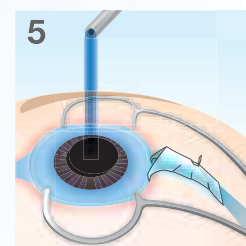

●設置後、やや多めの生理
食塩水などの水掛けを行
い側方水路形成を促す。

手術器具修理品の新品交換サービス

Quick Service

Quick
Service

当カタログではこのアイコンが目印です。

「直して使う」から「交換して使う」へ。

「クイックサービス」とは構成器具の修理品をお預かりした際、製品を1日でも早くお手元にお届けし、より安心してお使いいただくために修理を行う代わりに、対象商品の新品を特別価格（45% オフ）でご提供するプレミアムサービスです。

POINT1


修理のお待ち時間なし

POINT2

新品のクオリティ

クイックサービス適応例

先端かみ合わせ不良

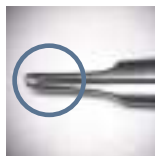


修理前



新品交換後

修理の流れ

イナミの手術器具修理は、通常修理とクイックサービスからお選びいただけます。

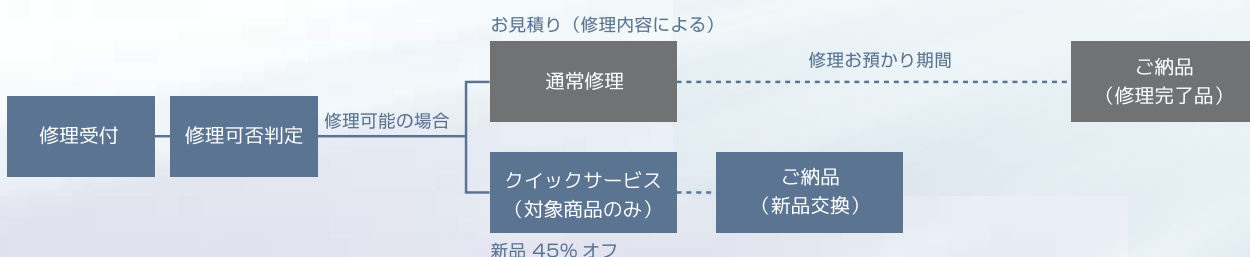

修理期間が2週間

High Speed Repair Service

弊社対象パイプシャフト器具の先端故障修理は
修理納期2週間で対応致します。
医療現場のご要望から生まれた新サービスです。

DS-2020	池田氏マイクロカブシュロレクシス鑷子BEAK 23G SH
DS-2021	池田氏マイクロカブシュロレクシス鑷子 S-Model 23G
DS-2023	池田氏マイクロカブシュロレクシス鑷子 S-Model 25G
DS-088	八重式剪刀
DS-088SH	八重式剪刀 ショートハンドル

2023年9月現在

※故障状況によっては、2週間修理に対応していない場合がございます。この場合は平均2ヶ月程の修理納期を頂いております。

Custom-made instruments

～ 妥協なきパフォーマンスのために ～

サージカルのシーンにおいて、ドクターの指たる手術器具。

高品質であることはもちろん、

それはドクターの思いに繋がっていきなくてはならない、私たちはそう考えます。


アイデアをカタチにするノウハウを持つイナミだからできるご提案。

カスタムメイドというもうひとつの選択肢が

さらに上のパフォーマンスの実現をお手伝いします。

■ カスタムメイド製品の分類と定義

セミオーダー

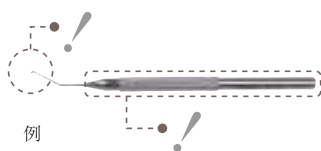

ご要望の仕様が、既製品の類似設計である場合など。
(例) ハンドルや先端のサイズや形状変更など。

フルオーダー



ご要望の仕様が、既製品の類似仕様ではなく、新規造形であること、または製造工程上の新技術を要する場合など。

■ オーダーの流れ

1. お問い合わせ	弊社もしくは販売業者様へお問い合わせ下さい。 お打合せ（ヒアリング）の日程調整をさせていただきます。
2. ヒアリング (仕様打合せ)	弊社営業担当が、ご希望の仕様等をヒアリングさせていただきます。
3. 設計図ご提出 ※概略図の場合あり	ヒアリング内容に基づき、設計図または概略図をご提出いたします。修正を要する場合は、後日修正図をご提出させていただきます。
4. お見積り	仕様に基づき、お見積りをご提出させていただきます。
5. 製作	仕様及びお見積りご承諾後、正式にご発注いただきましたら、製作工程に入ります。
6. ご納品	お納めさせていただいた製品をご確認いただきます。

※ 完成した製品の仕様が設計図と異なり、ご希望に沿わない場合、仕様を再確認させていただき、再度製作させていただきます。


※ 完成品確認後、事前にお打合せした仕様ではなく、仕様変更をご希望される場合は、一度ご検収いただき再度ご発注を頂きます。

※ オーダーの仕様が、知的所有権に触れる可能性がある場合、お受けしかねる場合がございます。 ※ オーダーの仕様が、安全性の保障や薬事法手続き上の諸問題がある場合、お受けしかねる場合がございます。 ※ お客様にご満足いただけるよう製作させていただきますが、様々な要因によりご希望に沿えかねる場合がございます。 ※ オーダーメイド製品は、弊社において製品化させていただく場合がございます。または後に類似品が製品化する場合もございます。 ※ オーダーメイド製品は、事例紹介などとして公開させていただく場合がございますが、個人情報についてはご許可なしに公開はいたしません。 ※ オーダーメイド製品は、他のお客様より同等の仕様のご要望（ご注文）を受けた場合、同一商品を製作販売する可能性があります。 ※ オーダーの仕様やクラス分類によっては、高額、長納期になる可能性があります。 ※ オーダーメイド製品の薬事申請登録用の名称については、弊社にて決定させていただきます。

ふれる。

くらべる。

ベストをえらぶ。

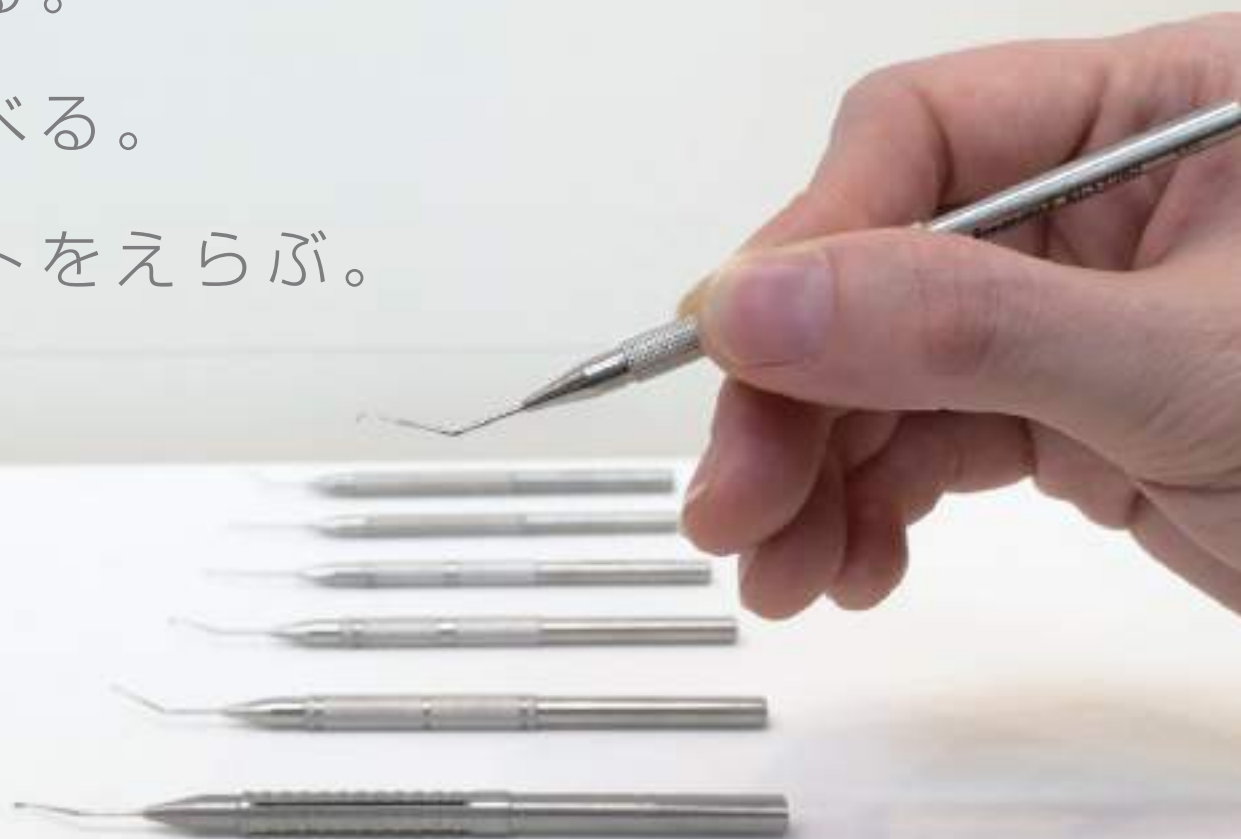

INAMI SHOWROOM

私たちが納得・満足の製品選びをお手伝いします。

えらべる
2タイプ

■本社ショールーム

東京本社ショールームにて製品をご覧いただけます。ご希望の製品に特化したレイアウトを事前にご用意することも可能です。

■移動式ショールーム

特製ポータブルケースにて、主要学会の展示と同等の規模の製品ラインナップをご指定の場所までデリバリーいたします。



展示製品

手術器具：約450種類におよぶカタログ掲載商品

光学検査器械：スリットランプ、顕微鏡、ゴールドマン型視野型、視力表、大型弱視鏡など

診療設備器械：スライディングテーブル、患者椅子、コクヨシステムユニットなど

ドライアイ・美容関連：IPL、idra、マイボシャンプー、サプリメントなど

ご利用にあたり

ショールームのご利用はご予約制にて承っております。


弊社営業担当、またはカスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせくださいませ。

TEL : 03-3814-1731

FAX : 03-3814-3334

Email : corpinfo@inami.co.jp

THE HUMAN EYE

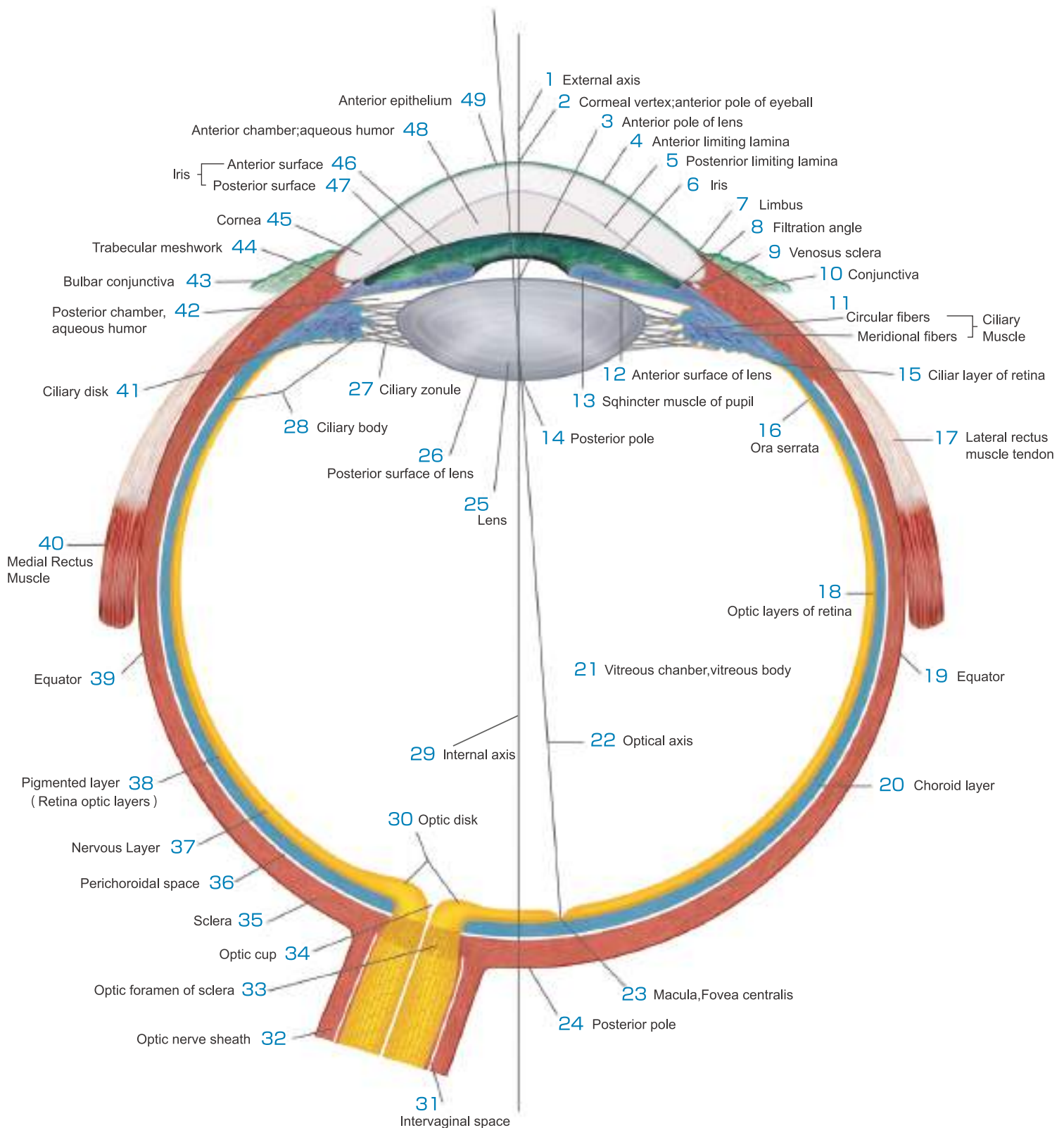

- | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1. 眼軸(外側) | 11. 毛様体筋 | 21. 硝子体 | 31. 鞘内腔 | 41. 毛様体輪 |
| 2. 角膜頂点 | 12. 水晶体前面 | 22. 光軸 | 32. 視神経鞘 | 42. 後房 |
| 3. 水晶体前極 | 13. 瞳孔括約筋 | 23. 中心窩 | 33. 強膜の視神経管 | 43. 球結膜 |
| 4. 角膜前境界板(ボーマン氏膜) | 14. 水晶体後極 | 24. 眼底後極部 | 34. 眼杯 | 44. 線維柱帯、小柱網 |
| 5. 角膜後境界板(デスメ膜) | 15. 網膜網様体層 | 25. 水晶体 | 35. 強膜 | 45. 角膜 |
| 6. 虹彩 | 16. 鋸状縁 | 26. 水晶体後面 | 36. 脈絡外隙 | 46. 虹彩前面 |
| 7. 角膜輪部 | 17. 外直筋、外側直筋 | 27. 毛様体小帯(チン氏帯) | 37. 神経層 | 47. 虹彩後面 |
| 8. 前房濾過隅角 | 18. 網膜 | 28. 毛様体 | 38. 網膜 | 48. 前房 |
| 9. シュレム氏管 | 19. 赤道 | 29. 眼軸(内側) | 39. 赤道 | 49. 前部角膜上皮 |
| 10. 結膜 | 20. 脈絡膜 | 30. 視神経乳頭、視神経円板 | 40. 内直筋、内側直筋 | |



索引

Index

Product Code

00-221	153	74-5000	145
00-222	153	74-5062	145
00-223	153	74-6910	145
00-224	153	75-2824	147
00-225	153	75-2826	147
00-226	153	76-4061	147
00-227	154	76-5161	147
00-228	154	76-5261	147
00-229	154	76-5361	147
00-231	154	76-5561	147
00-232	155	78-2310	149
00-233	155	78-5700	150
00-234	155	78-6600	150
00-235	156	78-6810	150
00-404	155	92-9003	152
00-411	154	A-011	80
00-414	154	AC-102	134
00-426	153	AC-202	134
00-427	153	AC-301	135
19545	157	AC-302	134
20702	160	AC-402	134
20703	160	AC-L150	135
20711	160	APX200	66
71-1901	149	B-01-1	48
71-2001	149	B-02-1	48
71-2061	149	B1-00	82
71-2301	149	B1-21-02T	82
71-2501	149	B2-00	82
72-1501	145	B2-23-01T	82
72-1502	145	BM-560	51
72-2201	145	CW1146	87
72-2202	145	DIAX2-MUINS	66
72-2531	141	DS-001	90
72-2561	141	DS-003	16
72-2661	141	DS-008GO	30
72-2663	147	DS-010FL	23
72-2761	141	DS-011FFL	18
72-2763	147	DS-012FFL	16
72-2801	141	DS-015	86
72-2831	141	DS-016	77
72-2861	141	DS-20R	18
72-2862	141	DS-028	89
72-2863	147	DS-029	88
72-2901	141	DS-088	68
72-2912	141	DS-088SH	68
72-2931	141	DS-177CN	27
72-2961	141	DS-301	129
72-3001	145	DS-325TC	29
72-3002	145	DS-502	78
72-3061	147	DS-800	88
72-3231	141	DS-802	89
72-3261	141	DS-805	89
72-4501	145	DS-900	88
72-4502	145	DS-1612F	72
74-1000	145	DS-1612FB	71
74-1010	145	DS-2020	70
74-1031	145	DS-2021	70
74-2261	149	DS-2022L	83
74-3061	149	DS-2022S	83

DS-2023	70	M-40RS	63
DS-2024	70	M-41R	63
DS-2060	114	M-50R	37
DS-10708	84	M-50RF	37
DS-50101	71	M-54RC	36
DS-50102	71	M-57RL	65
F24999	87	M-57RR	65
G-701	161	M-59RC	39
HB150	138	M-59RS	39
HB210	138	M-73	50
HB300	138	M-74	50
HB2055	138	M-80A-13	109
IM-2087N	50	M-80A-15	109
K-1971	137	M-80A-17	109
K-1972	137	M-88C	55
K-2061	137	M-88G	59
K-2771	161	M-91	81
K-2772	161	M-008	30
K-700	146	M-100	64
K-715	146	M-104	80
K-722	146	M-104-1	80
K-730	146	M-104-2	80
K-745	146	M-104-3	80
K-780	151	M-112	103
K-7610	143	M-115R	104
K-7628B	144	M-121A	64
K-7630	144	M-126	61
K-7630B	144	M-126A	61
K-7630BU	144	M-127C	85
K-7632B	144	M-127CR	86
K-7657BR	148	M-127S	85
K-7726B	151	M-127T	67
K-7730	151	M-128C	85
K-7730B	151	M-128D	85
K-7926B	146	M-128E	85
K-7926BU	146	M-128HC	85
KI-8	25	M-128S	85
KI-9	24	M-128T	67
KI-13	31	M-130AL	46
KI-21	31	M-130AR	46
KI-22	31	M-130L	46
KI-41	51	M-130R	46
KI-42	51	M-134	86
KI-45	49	M-135	43
KI-46	49	M-135A	44
KI-50	36	M-135S	43
KI-60	41	M-135SS	43
KI-61	41	M-135T	43
KI-80A	104	M-135W	44
KI-80B	104	M-136	74
L07350	140	M-136K	74
L07410	140	M-136L	74
L07420	140	M-136N	75
L07430	140	M-136NL	75
M-1R	22	M-140	159
M-1RW	22	M-141	103
M-2R	22	M-141L	102
M-3R	21	M-141P	102
M-4R	17	M-141T	102
M-5R	16	M-141Y	101
M-11R	83	M-151	81
M-19R	23	M-160R	84
M-19RD	23	M-161R	84
M-20R	20	M-165R	23
M-32EC	55	M-167C	37
M-32ES	55	M-167R	72

M-167RA.....	72	M-91A.....	81	M-2081.....	102	N04500.....	139
M-170R.....	23	M-950.....	48	M-2101L.....	127	N04505.....	139
M-171R.....	23	M-951.....	47	M-2101M.....	127	N04510.....	139
M-175A.....	28	M-1100.....	77	M-2101S.....	127	N04520.....	139
M-177A.....	27	M-1101.....	76	M-2103.....	131	N04560.....	139
M-177CN.....	27	M-1104.....	122	M-2105.....	76	N04570.....	139
M-180A.....	27	M-1112.....	76	M-2106.....	69	N04580.....	140
M-183.....	109	M-1124.....	130	M-2170.....	76	N04581.....	140
M-236A.....	45	M-1125.....	130	M-2176.....	80	N04585.....	140
M-236B.....	45	M-1126.....	130	M-2177-5.5.....	69	N04590.....	139
M-236C.....	45	M-1127.....	130	M-2187S.....	118	N04820.....	139
M-301R.....	50	M-1128.....	130	M-2187S-T.....	118	N04830.....	139
M-520.....	35	M-1129.....	130	M-2188.....	115	N04850.....	139
M-550A-23B.....	98	M-1135.....	103	M-2190.....	24	N04854.....	139
M-550A-25B.....	98	M-1136.....	103	M-2191.....	36	N04860.....	139
M-550AH.....	98	M-1150.....	115	M-2197-5.5.....	69	N04870.....	139
M-550D.....	98	M-1160.....	74	M-2198.....	104	N04880.....	139
M-550E-23B.....	98	M-1160N.....	75	M-2199.....	78	N04885.....	139
M-550E-25B.....	98	M-1300A.....	133	M-2200.....	62	ND-1.....	161
M-555.....	99	M-1405A.....	121	M-2211.....	29	ND-2.....	161
M-560.....	100	M-1406A.....	121	M-2212.....	75	No.700.....	146
M-562A-23B.....	97	M-1500A.....	133	M-2213.....	113	No.715.....	146
M-562A-25B.....	97	M-1508.....	56	M-2215L.....	107	No.722.....	146
M-562A-27B.....	97	M-150G.....	63	M-2215R.....	107	No.730.....	146
M-562AH.....	97	M-1512.....	57	M-2215S.....	107	No.745.....	146
M-562B.....	97	M-1524.....	73	M-2215SS.....	107	No.780.....	151
M-562C-23B.....	97	M-1530.....	73	M-2216L.....	124	No.6320G.....	151
M-562C-25B.....	97	M-1601.....	84	M-2216R.....	124	No.6330G.....	151
M-562C-27B.....	97	M-1612.....	72	M-2217.....	129	No.7325G.....	146
M-562CH.....	97	M-1615.....	31	M-2218.....	125	No.7330G.....	146
M-562D.....	97	M-1616.....	159	M-2220L.....	108	No.7335G.....	146
M-562E-23B.....	97	M-1630A.....	28	M-2220R.....	108	No.7340G.....	146
M-562E-25B.....	97	M-1631.....	24	M-2220S.....	108	No.7355G.....	146
M-562E-27B.....	97	M-1805.....	110	M-2220SS.....	108	No.7520B.....	150
M-563S.....	99	M-1820.....	131	M-2225.....	109	No.7610.....	143
M-569.....	60	M-1900.....	53	M-2501A.....	133	No.7624BG.....	148
M-570-3.....	81	M-1901A.....	53	M-2571A.....	133	No.7624BUPS.....	144
M-571.....	99	M-1902THJ.....	69	M-2572A.....	133	No.7628B.....	144
M-575A.....	100	M-2012.....	126	M-2600A.....	133	No.7630B.....	144
M-579-23.....	96	M-2013.....	126	M-2700A.....	133	No.7630BU.....	144
M-579-25.....	96	M-2015.....	116	M-2900L.....	47	No.7632B.....	144
M-580C.....	106	M-2018.....	132	M-2900R.....	47	No.7635BR.....	148
M-580D.....	106	M-2019L.....	123	M-3000.....	48	No.7641BR.....	148
M-580E.....	106	M-2021.....	44	M-4600A.....	133	No.7657BR.....	148
M-580F.....	106	M-2022.....	111	M-6100A.....	133	No.7722B.....	151
M-582.....	105	M-2023.....	81	M-6120A.....	133	No.7726B.....	151
M-650.....	79	M-2051.....	124	M06836.....	87	No.7730.....	151
M-651.....	79	M-2055C.....	110	MA-001.....	78	No.7730B.....	151
M-658.....	64	M-2056-24.....	56	MB-010.....	22	No.7922B.....	146
M-738R.....	50	M-2056-25.....	56	MB-011.....	18	No.7926B.....	146
M-739R.....	50	M-2057.....	104	MB-011F.....	18	No.7926BU.....	146
M-751.....	46	M-2058-30.....	59	MB-012.....	16	P-0614BUC.....	142
M-752.....	46	M-2058-32.....	59	MB-012F.....	16	P-0614RC.....	142
M-813L.....	41	M-2058-34.....	59	MB-013.....	21	P-0616BUC.....	142
M-813NL.....	42	M-2061SS.....	101	MB-029.....	52	P-0616RC.....	142
M-813NR.....	42	M-2062.....	49	MB-030.....	52	P-0618BUC.....	142
M-813R.....	41	M-2062N.....	49	MF-100.....	152	P-0618RC.....	142
M-814L.....	42	M-2066.....	114	MF-130.....	152	P-0620BUC.....	142
M-814NL.....	42	M-2067S.....	101	MF-130S.....	152	P-0620RC.....	142
M-814NR.....	42	M-2070.....	112	MF-801.....	71	P-0622BUC.....	142
M-814R.....	42	M-2070CL.....	112	MF-806.....	68	P-0622BUCL.....	143
M-838.....	56	M-2070CR.....	112	MH-108.....	34	P-0622RC.....	142
M-901.....	40	M-2071.....	119	MH-108D.....	34	P-0624BUC.....	142
M-901S.....	40	M-2072.....	119	MV-071.....	90	P-0624BUCL.....	143
M-905.....	40	M-2073.....	118	MV-091.....	89	P-0624RC.....	142
M-910.....	40	M-2078.....	49	MV-900.....	136	P-06275BUC.....	142

P-06275RC.....	142	S-88STS.....	158	S-218AS.....	58	S-615S.....	37
P-0628BUC.....	142	S-89.....	106	S-218AS-4.....	58	S-640A.....	62
P-0628RC.....	142	S-111.....	116	S-218C.....	58	S-640B.....	62
P-0630BUC.....	142	S-112.....	119	S-218C-4.....	58	S-640C.....	62
P-0630RC.....	142	S-112A.....	119	S-218S.....	58	S-725.....	51
P-0632BUC.....	142	S-113.....	119	S-218S-4.....	58	S-725A.....	49
P-700.....	146	S-114.....	120	S-226C.....	117	S-726.....	51
P-715.....	146	S-115A.....	120	S-226H.....	117	S-727.....	51
P-722.....	146	S-116L.....	116	S-247B.....	124	S-728.....	51
P-730.....	146	S-116M.....	116	S-310A.....	19	S-729.....	52
P-745.....	146	S-116S.....	116	S-313A.....	26	S-730.....	52
P-7519.....	150	S-116X.....	116	S-316.....	19	S-813L.....	41
P-7520.....	150	S-120D.....	132	S-317.....	26	S-813R.....	41
P-7523.....	150	S-123B.....	132	S-320.....	32	S-814L.....	41
P-7523B.....	150	S-123S.....	132	S-324.....	31	S-814R.....	41
P-7610.....	143	S-124B.....	132	S-325.....	29	S-845RE.....	126
P-7610BU.....	143	S-124S.....	132	S-325F.....	29	S-845RL.....	126
P-7622BUPS.....	144	S-150.....	128	S-325TH.....	30	S-845RM.....	126
P-7624BUPS.....	144	S-151.....	128	S-327.....	30	S-845RS.....	126
P-7625B.....	144	S-152.....	128	S-331.....	26	TR-001N.....	95
P-76275BU.....	144	S-170A.....	61	S-332.....	26	TR-002.....	94
P-7628B.....	144	S-170B.....	61	S-350A.....	19	TR-003N.....	93
P-7630B.....	144	S-170C.....	61	S-350B.....	25	TR-004.....	92
P-7630BU.....	144	S-171.....	61	S-351A.....	19	TR-005.....	92
P-7632B.....	144	S-174A.....	64	S-351B.....	25	TR-006.....	92
P-7639BR.....	148	S-180-12.....	111	S-360C.....	33	TR-007.....	91
P-7641BR.....	148	S-180-15.....	111	S-360S.....	33	TR-008.....	93
P-7651BR.....	148	S-180-18.....	111	S-361.....	33	TR-009.....	93
P-7657BR.....	148	S-180-20.....	111	S-381.....	24	TR-010.....	92
P-7726B.....	151	S-180-21.....	111	S-385.....	17	TR-070.....	95
P-7730B.....	151	S-180-22.....	111	S-386.....	17	TR-071.....	92
P-7926B.....	146	S-180-23.....	111	S-387.....	17	TR-072.....	94
P-7926BU.....	146	S-180SS.....	111	S-388.....	17	TR-073.....	93
PSS-0614BUC.....	142	S-184L.....	127	S-410.....	20	TR-077.....	91
PSS-0616BUC.....	142	S-184M.....	127	S-411.....	20	TR-077N.....	91
PSS-0618BUC.....	142	S-184S.....	127	S-413.....	20	TR-077N-ISB.....	91
PSS-0620BUC.....	142	S-185A.....	130	S-472.....	128	TR-078.....	91
PSS-0622BUC.....	142	S-185B.....	130	S-472-2.....	128	TR-078-ISB.....	91
PSS-0624BUC.....	142	S-185C.....	130	S-475L.....	62	VC-004.....	136
PSS-06275BUC.....	142	S-185D.....	130	S-475S.....	62	VC-005.....	136
PSS-0628BUC.....	142	S-185E.....	130	S-480L.....	128		
PSS-0630BUC.....	142	S-185F.....	130	S-480R.....	128		
PSS-0632BUC.....	142	S-185G.....	130	S-485L.....	123		
PSS-715.....	146	S-185H.....	130	S-485M.....	123		
PSS-722.....	146	S-185S.....	130	S-485S.....	123		
PSS-7610.....	143	S-186RL.....	130	S-489.....	124		
PSS-7641BR.....	148	S-186RM.....	130	S-490RL.....	123		
PSS-7926B.....	146	S-186RS.....	130	S-490RM.....	123		
PSS-7926BU.....	146	S-186S.....	130	S-490RS.....	123		
RB-40-2.....	96	S-189.....	129	S-495.....	125		
RB-700H-23N.....	96	S-200S.....	62	S-510CB.....	38		
RB-700H-25N.....	96	S-205.....	54	S-510CS.....	38		
S-3H.....	159	S-211.....	54	S-510SB.....	38		
S-5B.....	158	S-212A.....	54	S-510SS.....	38		
S-9A.....	25	S-213SH.....	54	S-511C.....	35		
S-9B.....	18	S-215-21.....	59	S-511CB.....	35		
S-9C.....	21	S-215-23.....	59	S-511CSB.....	35		
S-9D.....	19	S-216.....	55	S-511CSS.....	35		
S-9H.....	113	S-217AC.....	57	S-511S.....	35		
S-21D.....	117	S-217AC-4.....	57	S-515C.....	39		
S-21S.....	116	S-217AS.....	57	S-520B.....	39		
S-22.....	117	S-217AS-4.....	57	S-520S.....	39		
S-28.....	63	S-217C.....	57	S-552L.....	112		
S-76.....	122	S-217C-4.....	57	S-552R.....	112		
S-87L.....	106	S-218AC.....	58	S-613.....	36		
S-87R.....	106	S-218AC-4.....	58	S-615C.....	37		

Product Name

0 - 9

23G トロカールセット 2	95
23G マイクロカプシュロレクシス鑷子	71
23G マイクロカプシュロレクシス鑷子 ショートタイプ	71
25G トロカールセット	95
30G 針 アンクル型 鈍先	55

A - Z

DIA Battle ICL マニピュレーター	87
DIA ICL バキュームカニューラ	87
DIA ICL ローディング鑷子	87
E シリーズ ウィリアムソン トラペゾイド曲 1.2/1.5mm	139
E シリーズ ウィリアムソン トラペゾイド曲 1.5/1.8mm	139
E シリーズ ウィリアムソン トラペゾイド曲 1.9/2.2mm	139
E シリーズ ウィリアムソン トラペゾイド曲 1.9/2.5mm	139
E シリーズ ウィリアムソン トラペゾイド曲 2.4/2.7mm	139
E シリーズ ウィリアムソン トラペゾイド曲 2.5/2.9mm	139
E シリーズ ウィリアムソン トラペゾイド曲 2.7/3.0mm	139
E シリーズ ウィリアムソン トラペゾイド曲 2.7/3.2mm	139
ILM 鉗子ピックエンド 25G	89
ILM 鉗子ファイングリップ 25G	89
IOL カッター チタニウム	84
K.I. 式スリットランプ用 ノングレア睫毛鑷子	31
LRI&Groove Std ハンドル 20° Tri-Facet	140
LRI&Groove Std ハンドル Lance	140
LRI&Groove Std ハンドル Stat III	140
LRI&Groove Std ハンドル Std Tri-Facet	140
M.Q.A. 小箱 (10 個入 x25 袋)	158
M.Q.A. スティック スタウト 小箱 (5 ヶ入×20 袋)	158
M.Q.A. ホルダー	159
M.Q.A. ホルダー クロスアクション	159
M.Q.A. ホルダー及び焼出用モンジロー	159
MVR ナイフ 曲 (30°) バイベベル 20G アルミニウムハンドル	150
MVR ナイフ 曲 (30°) バイベベル 23G プラスチックハンドル	150
MVR ナイフ 直 バイベベル 19G プラスチックハンドル	150
MVR ナイフ 直 バイベベル 20G プラスチックハンドル	150
MVR ナイフ 直 バイベベル 23G プラスチックハンドル	150
Mフック核分割用フック	76
PDI ニードル	129
Xpand2 虹彩リング	66

ア

アクセンフェルド氏涙嚢摘出鉤 2爪 鋭	132
アクセンフェルド氏涙嚢摘出鉤 2爪 鈍	132
アクセンフェルド氏涙嚢摘出鉤 3爪 鋭	132
アクセンフェルド氏涙嚢摘出鉤 3爪 鈍	132
朝顔型受水器	137
アスカビュア (4kG × 4本) 弱アルカリ酵素洗剤	135
アスピレーティングスパーテル	104
アトキンソン氏球後注射針 曲 (12本入)	57
アトキンソン氏球後注射針 曲 (4本入)	57
アトキンソン氏球後注射針 直 (12本入)	57
アトキンソン氏球後注射針 直 (4本入)	57
家鴨嘴型 ILM 鑷子	88
家鴨嘴型鑷子 細み	88
有田式マイボーム腺圧出鑷子	118
安藤氏眼球圧迫器	103
五十嵐氏未熟児鉤 小	103
五十嵐氏未熟児鉤 大	103
池田氏マイクロカプシュロレクシス鑷子 S-Model 23G	70
池田氏マイクロカプシュロレクシス鑷子 S-Model 25G	70
池田氏マイクロカプシュロレクシス鑷子 BEAK 23G ショートハンドル	70
イナミクリーン L (250ml)	134

イナミクリーン OR (250ml)	134
イナミクリーン P (4kG)	135
イナミクリーン R (250ml)	134
イナミクリーン S (500ml)	134
稲村氏 カプシュロレクシス鑷子 VI	72
稲村氏 カプシュロレクシス鑷子 ファイン チタニウム	72
稲村氏カプシュロレクシス鑷子 ファイン チタニウム スケール	71
イリゲーション輪匙	64
インサートインフュージョンカニューラ 23G	92
インサートインフュージョンカニューラ 25G	92
インフュージョンカニューラ	93
インフュージョンニードル 4.0 mm	99
インフュージョンニードル用シリコンチューブ 30cm1.4x2.5	81
インフュージョンライン	92
インプラントナイフ アンクル型 ベベルアップ 4.00mm	147
インプラントナイフ アンクル型 ベベルアップ 5.20mm	147
インプラントナイフ 曲 ベベルアップ 3.5mm アルミニウムハンドル	148
インプラントナイフ 曲 ベベルアップ 3.9mm プラスチックハンドル	148
インプラントナイフ 曲 ベベルアップ 4.1mm アルミニウムハンドル	148
インプラントナイフ 曲 ベベルアップ 4.1mm セーフシールドハンドル	148
インプラントナイフ 曲 ベベルアップ 4.1mm プラスチックハンドル	148
インプラントナイフ 曲 ベベルアップ 5.1mm プラスチックハンドル	148
インプラントナイフ 曲 ベベルアップ 5.7mm アルミニウムハンドル	148
インプラントナイフ 曲 ベベルアップ 5.7mm 替刃タイプ	148
インプラントナイフ 曲 ベベルアップ 5.7mm プラスチックハンドル	148
ヴァナス氏水晶嚢切開剪刀 直	37
ヴァナス氏水晶嚢切開剪刀 反	37
ヴィトレクトミーナイフ アンクル型 20G	149
ヴィトレクトミーナイフ 直型 19G	149
ヴィトレクトミーナイフ 直型 20G	149
ヴィトレクトミーナイフ 直型 23G	149
ヴィトレクトミーナイフ 直型 25G	149
ヴィルダー氏涙管拡張針 中	130
ヴィルダー氏涙管拡張針 太	130
ヴィルダー氏涙管拡張針 細	130
ウエストコット氏腱切除剪刀 反 鋭	39
ウエストコット氏腱切除剪刀 反 鈍	39
ウェッケル剪刀 デリケート型	36
上野式極細癒着分離針 左	106
上野式極細癒着分離針 右	106
上野式マイクロ持針器 止無	50
上野式マイクロ有鉤鑷子 段付 チタニウム	18
上村式眼球圧迫器 小	101
臼井式眼内マグネット 25G	105
エーゲル氏角板金属	124
江口氏未熟児用開瞼器 左	46
江口氏未熟児用開瞼器 右	46
近江氏テノン嚢下注入針 3ポート 24G	56
近江・ベレンス氏眼筋クランプ 小児用 II 型	128
大島式開瞼器 硝子体手術用	43
大島式開瞼器 硝子体手術用 小	43
大島式眼球圧迫器 大	102
大島式眼球圧迫器 未熟児用	102
太田式ハイドロダイセクションカニューラ 27G	73
大本式 DALK カニューラ	115
岡田氏網膜ブラシビットスウィーパー 替ブラシ	96
岡田氏網膜ブラシビットスウィーパー 23G 専用ハンドル	96
岡田氏網膜ブラシビットスウィーパー 25G 専用ハンドル	96
小川氏眼球摘出用球後注射針 曲 (12本入)	57
小川氏眼球摘出用球後注射針 曲 (4本入)	57
小川氏 睫毛鑷子	32

カ

ガードナイフ 0.25mm アルミニウムハンドル	146
ガードナイフ 0.30mm アルミニウムハンドル	146
ガードナイフ 0.35mm アルミニウムハンドル	146

ガードナイフ 0.40mm アルミニウムハンドル	146
ガードナイフ 0.55mm アルミニウムハンドル	146
開瞼器ノングレア 大 左	41
開瞼器ノングレア 大 右	41
ガイド付インプラントナイフ 曲 ベベルアップ 2.4mm アルミニウムハンドル	148
海谷式マルチフック	76
替刃専用ハンドル 16.5mm	152
下眼瞼挟眼器 大	123
核サスティナー	78
核分割スパーテル Kヴァージョン	74
核分割スパーテル ロングヴァージョン	74
核娩出用輪匙 逆溝付	64
角膜切片切除用剪刀 HAYATE 式	113
カストロヴィーホー型結紮鉗子 0.3mm	24
カストロヴィーホー氏角膜縫合鉗子 0.12mm ウルトラファイン	17
カストロヴィーホー氏角膜縫合鉗子 0.35mm エクストラデリケート	17
カストロヴィーホー氏角膜縫合鉗子 0.40mm デリケート	17
カストロヴィーホー氏角膜縫合鉗子 0.45mm	17
カストロヴィーホー氏カリパー 直	62
カストロヴィーホー氏持針器 曲	52
カストロヴィーホー氏持針器 直	52
片柄異物針	116
カッチン氏角膜移植用剪刀 左	112
カッチン氏角膜移植用剪刀 右	112
加藤式 CCC マーカー 5.5mm	69
河合氏 CCC 鉗子テーパード 23/25G	71
河合氏角膜縫合鉗子 0.12mm コリブリ型	28
河合氏虹彩剪刀テーパード 23/25G	68
河合氏万能鉗子	24
川野式上方皮質吸引針 吸引ポート 0.3mm	81
川野式前房灌流カニューラ 23G	81
眼球固定鉗子 曲	33
眼球固定鉗子 直	33
眼球固定用フリーリングリング 全サイズセット	111
眼球固定用フリーリングリング 12mm	111
眼球固定用フリーリングリング 15mm	111
眼球固定用フリーリングリング 18mm	111
眼球固定用フリーリングリング 20mm	111
眼球固定用フリーリングリング 21mm	111
眼球固定用フリーリングリング 22mm	111
眼球固定用フリーリングリング 23mm	111
眼内レンズ前囊用鉗子 ギャスキン型	84
眼内レンズ鉗子 ギャスキン ソフト型	84
眼内レンズ用プッシュアンドプル鉤 30° 曲	85
眼内レンズ用プッシュアンドプル鉤 曲	85
眼内レンズ用プッシュアンドプル鉤 直	85
眼内レンズ用プッシュアンドプル鉤 深溝式 アングル型	85
眼内レンズ用プッシュアンドプル鉤 深溝式 直	85
喜多式バックフラッシュハンドピース エクストルージョンハンドル付セット 23G	98
喜多式バックフラッシュハンドピース エクストルージョンハンドル付セット 25G	98
喜多式バックフラッシュハンドピース 本体	98
喜多式ブラッシュユニードル 23G (3 本入り)	98
喜多式ブラッシュユニードル 25G (3 本入り)	98
木村式線内障癒着剥離剪刀 曲 鈍“濾過泡再建剪刀 曲”	110
キモトリブシン注入針二段式	55
逆マチ式持針器 Hofner 止付	49
逆マチ式持針器 Hofner 止無	49
逆溝付デリケート輪匙	64
CA-01 キャタップ	160
AP-01 キャタップ固定具	160
吸引開瞼器用チューブのみ (Y 字型)	48
吸引開瞼器用ロック基のみ	48
吸引付パラレル開瞼器	48
狭瞼裂用ダブルリング開瞼器	111
ギル氏虹彩鉗子	20
国友氏替刃パンチ	63

グラドゥル氏睫毛鉗子	31
クリアアイシールド	161
クリアコーニアナイフ アングル型 ダブルベベル 目盛付 2.65mm	147
クリアコーニアナイフ アングル型 ダブルベベル 目盛付 2.75mm	147
クリアコーニアナイフ アングル型 ダブルベベル 目盛付 2.85mm	147
クリアコーニアナイフ アングル型 ダブルベベル 目盛付 3.00mm	147
クリアトラップ台形クリアコーニア / 移植ナイフ アングル型 ダブルベベル 目盛付 2.85mm-3.20mm	147
クリアトラップ台形クリアコーニア / 移植ナイフ アングル型 ダブルベベル 目盛付 2.85mm-3.75mm	147
クリアポートナイフ アングル型 23G	149
栗原式開創器Ⅱ三本平鉤	126
栗原式開創器Ⅱ四本平鉤	126
クレセント ダイヤモンドナイフ 曲 1.0mm	140
クレセント ダイヤモンドナイフ 曲 1.5mm	140
クレセント ダイヤモンドナイフ 曲 2.0mm	140
クレセントナイフ アングル型 ダブルベベル 2.00mm	145
クレセントナイフ アングル型 ベベルアップ 2.00mm	145
クレセントナイフ アングル型 ベベルアップ 替刃 2.00mm	145
クレセントナイフ 曲 バイベベル 2.2mm アルミニウムハンドル	146
クレセントナイフ 曲 バイベベル 2.6mm アルミニウムハンドル	146
クレセントナイフ 曲 バイベベル 2.6mm 替刃タイプ	146
クレセントナイフ 曲 バイベベル 2.6mm セーフシールドハンドル	146
クレセントナイフ 曲 バイベベル 2.6mm プラスチックハンドル	146
クレセントナイフ 曲 ベベルアップ 2.6mm アルミニウムハンドル	146
クレセントナイフ 曲 ベベルアップ 2.6mm 替刃タイプ	146
クレセントナイフ 曲 ベベルアップ 2.6mm セーフシールドハンドル	146
クレセントナイフ 曲 ベベルアップ 2.6mm プラスチックハンドル	146
クレセントナイフ 直型 2.00mm	145
クレセントナイフ 直型 替刃 2.00mm	145
グレフェー氏固定鉗子 止付	33
クレンメ 小	62
クレンメ 大	62
クロージャールブ	92
クント氏挟眼器 小	123
クント氏挟眼器 大	123
クント氏挟眼器 中	123
結紮鉗子 直 0.3mm 段付	22
結紮・縫合用鉗子 曲	25
結紮・縫合用鉗子 直	24
結膜用・縫合鉗子デリケート	31
結膜用・縫合鉗子スタンダード	31
ケリー氏デスメ膜パンチ	110
交換用シリコンパーツ [M-550A-23B 用]	98
虹彩エキスパンダー	66
湖崎氏マイクロサージャリー用二段剪刀	36
湖崎氏マイクロサージャリー用持針器 止付	49
湖崎氏マイクロサージャリー用持針器 止無	49
後藤式剪刀付持針器	53
五嶋式ブジー型涙管洗浄針 30mm25G 乳児用	59
五嶋式ブジー型涙管洗浄針 32mm25G 乳児用	59
五嶋式ブジー型涙管洗浄針 34mm25G 乳児用	59
後藤氏固定式角板 左眼用	124
後藤氏固定式角板 右眼用	124
後藤・中村式2爪鉤針鉤型開創器 小	127
後藤・中村式2爪鉤針鉤型開創器 大	127
後藤・中村式2爪鉤針鉤型開創器 中	127
小林氏 DMEK 鉗子 SIDE 25G	114
小林氏 TCMT 用鉗子	125
小林氏結紮・睫毛鉗子	30
コブラシャフトフェコチョッパー	75
コリブリ鉗子 エクストラデリケート 0.25mm 段付	28
コリブリ鉗子 角膜・結膜縫合用	27
コリブリ・トラウトマン鉗子 エクストラデリケート 0.12mm 段付	27
ゴルフ刀	122
ゴルフ刀 アルミニウムハンドル	151
ゴルフ刀 替刃タイプ	151
ゴルペン結紮・睫毛鉗子	30

サ

ザウター氏空気注入針 曲	55
ザウター氏空気注入針 直	55
佐伯氏金属保護眼帯 大	161
佐伯氏金属保護眼帯 小	161
佐藤式前房洗浄針	54
霰粒腫用丸型鋭匙 大	119
霰粒腫用丸型鋭匙 中	119
霰粒腫用丸型鋭匙 小	119
霰粒腫切開術用鑷子 おとも君 小 チタニウム	118
霰粒腫切開術用鑷子 おとも君 小	118
シェパード MAC Ult.Control 曲 2.2mm	139
シェパード MAC Ult.Control 曲 2.4mm	139
シェパード MAC Ult.Control 曲 2.5mm	139
シェパード MAC Ult.Control 曲 2.65mm	139
シェパード MAC Ult.Control 曲 2.8mm	139
シェパード MAC Ult.Control 曲 3.0mm	139
シェパード MAC Ult.Control 曲 3.2mm	139
シェパード氏眼内レンズ鑷子	83
視神経剪刀 ストロングカーブ 強湾曲	39
慈大式マイクロサージャリー持針器 ライトカーブ ノングレア 止付	50
慈大式マイクロサージャリー持針器 ライトカーブ ノングレア 止無	50
柴式 FLACS I/A チップ	80
柴式 MIVS 用強膜圧迫子	102
島崎式 DSEK 用鑷子	114
清水努氏横スリット式吸引付開瞼器 バンガーター型 左	47
清水努氏横スリット式吸引付開瞼器 バンガーター型 右	47
シムコ吸引灌流力ニューラ オリジナルモデル 23G	80
シムコ吸引灌流力ニューラ オリジナルモデル コネクターのみ	80
シムコ吸引灌流力ニューラ オリジナルモデル シリコンチューブのみ	80
シムコ吸引灌流力ニューラ オリジナルモデル 23G 針のみ	80
斜視鉤 大	128
斜視鉤 中	128
斜視鉤 小	128
硝子体器具保護キャップ (白)	136
硝子体器具保護キャップ ロング (DS-2022 用)	136
小切開核分割用鑷子 クロスアクションハンドル	79
小切開核分割用鑷子 スプリングハンドル	79
睫毛鑷子 まつげのQ太郎	29
シンスキー氏型眼内レンズポジショニング用フック 曲	85
シンスキー氏型眼内レンズポジショニング用フック 直	85
榛村式 DALK 剪刀 曲 左	112
榛村式 DALK 剪刀 曲 右	112
榛村式 DALK 剪刀	112
水晶体皮質用軟質スパーテル	61
スキール氏霰粒腫用ギザ付鋭匙	120
杉田式挟瞼器上眼瞼手術用角膜プロテクター	124
スクレラルナイフ 直型	150
スケペンス・フリーマン型レトラクター	132
鈴木式 CCC マーカー 5.5mm	69
スタブナイフ 直型 15°	145
スタブナイフ 直型 22.5°	145
スタブナイフ 直型 30°	145
スタブナイフ 直型 45°	145
スタブナイフ 直型 替刃 15°	145
スタブナイフ 直型 替刃 22.5°	145
スタブナイフ 直型 替刃 30°	145
スタブナイフ 直型 替刃 45°	145
ストレートナイフ 0° アルミニウムハンドル	146
ストレートナイフ 0° 替刃タイプ	146
ストレートナイフ 0° プラスチックハンドル	146
ストレートナイフ 15° アルミニウムハンドル	146
ストレートナイフ 15° 替刃タイプ	146
ストレートナイフ 15° セーフシールドハンドル	146
ストレートナイフ 15° プラスチックハンドル	146

ストレートナイフ 22.5° アルミニウムハンドル	146
ストレートナイフ 22.5° 替刃タイプ	146
ストレートナイフ 22.5° セーフシールドハンドル	146
ストレートナイフ 22.5° プラスチックハンドル	146
ストレートナイフ 30° アルミニウムハンドル	146
ストレートナイフ 30° 替刃タイプ	146
ストレートナイフ 30° プラスチックハンドル	146
ストレートナイフ 45° アルミニウムハンドル	146
ストレートナイフ 45° 替刃タイプ	146
ストレートナイフ 45° プラスチックハンドル	146
スパーテル 1.0 mm	61
スパーテル 1.5 mm	61
スパーテル 2.0 mm	61
スプーンブレードナイフ アングル型 ダブルベベル 2.2mm	149
スプーンブレードナイフ アングル型 ダブルベベル 3.0mm	149
スプリングハンドル式剪刀 反 ショート 鋭	35
スプリングハンドル式剪刀 反 ショート 鈍	35
スプリングハンドル式剪刀 直	35
スプリングハンドル式剪刀 反 鋭	35
スプリングハンドル式剪刀 反 鈍	35
スライド式バックフラッシュニードル エクストルージョン	99
スリットナイフ 06 シリーズ 曲 ベベルアップ 1.4mm セーフシールドハンドル	142
スリットナイフ 06 シリーズ 曲 ベベルアップ 1.4mm プラスチックハンドル	142
スリットナイフ 06 シリーズ 曲 ベベルアップ 1.6mm セーフシールドハンドル	142
スリットナイフ 06 シリーズ 曲 ベベルアップ 1.6mm プラスチックハンドル	142
スリットナイフ 06 シリーズ 曲 ベベルアップ 1.8mm セーフシールドハンドル	142
スリットナイフ 06 シリーズ 曲 ベベルアップ 1.8mm プラスチックハンドル	142
スリットナイフ 06 シリーズ 曲 ベベルアップ 2.0mm セーフシールドハンドル	142
スリットナイフ 06 シリーズ 曲 ベベルアップ 2.0mm プラスチックハンドル	142
スリットナイフ 06 シリーズ 曲 ベベルアップ 2.2mm セーフシールドハンドル	142
スリットナイフ 06 シリーズ 曲 ベベルアップ 2.2mm プラスチックハンドル	142
スリットナイフ 06 シリーズ 曲 ベベルアップ 2.4mm セーフシールドハンドル	142
スリットナイフ 06 シリーズ 曲 ベベルアップ 2.4mm プラスチックハンドル	142
スリットナイフ 06 シリーズ 曲 ベベルアップ 2.75mm セーフシールドハンドル	142
スリットナイフ 06 シリーズ 曲 ベベルアップ 2.75mm プラスチックハンドル	142
スリットナイフ 06 シリーズ 曲 ベベルアップ 2.8mm セーフシールドハンドル	142
スリットナイフ 06 シリーズ 曲 ベベルアップ 2.8mm プラスチックハンドル	142
スリットナイフ 06 シリーズ 曲 ベベルアップ 3.0mm セーフシールドハンドル	142
スリットナイフ 06 シリーズ 曲 ベベルアップ 3.0mm プラスチックハンドル	142
スリットナイフ 06 シリーズ 曲 ベベルアップ 3.2mm セーフシールドハンドル	142
スリットナイフ 06 シリーズ 曲 ベベルアップ 3.2mm プラスチックハンドル	142
スリットナイフ 06 シリーズ ライン入り 曲 ベベルアップ 2.2mm プラスチックハンドル	143
スリットナイフ 06 シリーズ ライン入り 曲 ベベルアップ 2.4mm プラスチックハンドル	143
スリットナイフ アングル型 ダブルベベル 2.50mm	141
スリットナイフ アングル型 ダブルベベル 2.80mm	141
スリットナイフ アングル型 ダブルベベル 3.00mm	141
スリットナイフ アングル型 ダブルベベル 3.20mm	141
スリットナイフ アングル型 ベベルアップ 2.50mm	141
スリットナイフ アングル型 ベベルアップ 2.65mm	141
スリットナイフ アングル型 ベベルアップ 2.75mm	141
スリットナイフ アングル型 ベベルアップ 2.85mm	141
スリットナイフ アングル型 ベベルアップ 3.00mm	141
スリットナイフ アングル型 ベベルアップ 3.20mm	141
スリットナイフ アングル型 ベベルアップ 替刃 2.85mm	141
スリットナイフ 曲 バイベベル 2.5mm プラスチックハンドル	144
スリットナイフ 曲 バイベベル 2.8mm アルミニウムハンドル	144
スリットナイフ 曲 バイベベル 2.8mm 替刃タイプ	144
スリットナイフ 曲 バイベベル 2.8mm プラスチックハンドル	144
スリットナイフ 曲 バイベベル 3.0mm アルミニウムハンドル	144
スリットナイフ 曲 バイベベル 3.0mm 替刃タイプ	144
スリットナイフ 曲 バイベベル 3.0mm プラスチックハンドル	144
スリットナイフ 曲 バイベベル 3.2mm アルミニウムハンドル	144
スリットナイフ 曲 バイベベル 3.2mm 替刃タイプ	144
スリットナイフ 曲 バイベベル 3.2mm プラスチックハンドル	144
スリットナイフ 曲 ベベルアップ 2.75mm プラスチックハンドル	144
スリットナイフ 曲 ベベルアップ 3.0mm アルミニウムハンドル	144

スリットナイフ 曲 ベベルアップ 3.0mm 替刃タイプ	144
スリットナイフ 曲 ベベルアップ 3.0mm プラスチックハンドル	144
スリットナイフ 直型 2.85mm	141
スリットナイフ 直型 3.00mm	141
スリットナイフ 直 バイベベル 3.0mm 替刃タイプ	144
スリットナイフ パラレルサイド アングル型 ベベルアップ 3.00mm	141
スリットナイフパラレルサイド 曲 ベベルアップ 2.2mm プラスチックハンドル	144
スリットナイフパラレルサイド 曲 ベベルアップ 2.4mm アルミニウムハンドル	144
スリットナイフパラレルサイド 曲 ベベルアップ 2.4mm プラスチックハンドル	144
スリムタイプカリバー	62
センシテックシリンジ 1mL ロックタイプ (20 本入)	157
前囊下ワイパー	81
前房洗浄針 18G	54
前房メインテナー 23G	81
増殖膜剥離鉗子 25G	88
ソープ型結紮鉗子	23
ソープ氏角膜異物鉗子	26
ソープ氏角膜異物鉗子 段付	26
ソフトテーパードニードル (6 本入) 20G	99
ソリフィス	160

タ

ダイヤモンドックス バイマニユアル 灌流チップ	82
ダイヤモンドックス バイマニユアル 吸引チップ	82
高橋氏おたま型小異物鉗子 “すくい取り”	116
竹内式メンブレインピック 23G	96
竹内式メンブレインピック 25G	96
武田氏開瞼器	43
谷戸氏 GSL 用スパーテル	106
谷戸氏 ab interno トラベクトミーフック 3 種セット	107
谷戸氏 ab interno トラベクトミーフック 直	107
谷戸氏 ab interno トラベクトミーフック 左	107
谷戸氏 ab interno トラベクトミーフック 右	107
谷戸氏 トラベクトミーマイクロフック 庄司 e d. セット	108
谷戸氏 トラベクトミーマイクロフック 庄司 e d. 直	108
谷戸氏 トラベクトミーマイクロフック 庄司 e d. 左	108
谷戸氏 トラベクトミーマイクロフック 庄司 e d. 右	108
田野氏眼球圧迫器	102
千種式両頭異物針	117
チストーム用鉗子 ツイストヒンジ	69
チタニウムレンズフック	86
チタニウム製強膜プラグ (6 ケ入) 20G	100
千葉大式未熟児用開瞼器 左	46
千葉大式未熟児用開瞼器 右	46
千原氏 T-hook	109
中京式スパーテル	76
チュービンゲン型結紮鉗子 直 無鉤	23
チュービンゲン型結紮鉗子 直 無鉤 ファインチップ	23
直剪刀 鋭	38
直剪刀 鈍	38
デシャン 左	104
デシャン 右	104
鉄片異物鉗取用鋭匙	116
テノン囊下注入針 3 ポート 24G	56
テノン囊下注入針 3 ポート 25G	56
デマル氏開瞼鉤 大	126
デマル氏開瞼鉤 中	126
デマル氏開瞼鉤 小	126
デマル氏開瞼鉤 未熟児用	126
デマル氏挟瞼器 大	123
デマル氏挟瞼器 中	123
デマル氏挟瞼器 小	123
デマル氏霰粒腫用挟瞼器クロスアクション	124
デリケート型持針器 曲 12mm 止付	52
デリケート型持針器 曲 12mm 止無	52
ドイツ型無鉤鉗子	26

ドイツ型有鉤鉗子	19
東京女子医科大学式テーパードトロカール 23/25G	91
突起付ジュエラー鉗子	24
獨協医大式 滑車型マイボーム腺鉗子	119
トメ 1 (t o m e 1) フック	67
トメ 2 (t o m e 2) プッシュフック	67
トラウトマン氏マイクロ角膜剪刀 左	65
トラウトマン氏マイクロ角膜剪刀 右	65
ドルフィン型 マイクロ睫毛鉗子	31
トロカールカニューラ	91
トロカールカニューラ 27G	91
トロカールカニューラ 27G 用インサーター	91
トロカールカニューラ用フォーセップス	94

ナ

中内式骨膜剥離子	132
永田氏隅角癒着解離針 アングル型 左 22G	106
永田氏隅角癒着解離針 アングル型 左 25G	106
永田氏隅角癒着解離針 アングル型 右 22G	106
永田氏隅角癒着解離針 アングル型 右 25G	106
永田氏経結膜球後針 25G	57
永田氏トラベクトミーブローベ 13mm (2 ケ入)	109
永田氏トラベクトミーブローベ 15mm (2 ケ入)	109
永田氏トラベクトミーブローベ 17mm (2 ケ入)	109
永田氏マイクロサージャリー用デリケート剪刀	37
永田氏マイクロサージャリー用デリケート剪刀 ファインタイプ	37
永原式テンポラルアプローチ開瞼器 オープン型	45
永原式テンポラルアプローチ開瞼器 クローズ型	45
永原式 テンポラルアプローチ開瞼器 プレート型	45
永原式フェコチョッパー	75
永原式フェコチョッパー 左利き術者用	75
中村式涙管洗浄用一段針 曲 (12 本入)	58
中村式涙管洗浄用一段針 曲 (4 本入)	58
中村式涙管洗浄用一段針 直 (12 本入)	58
中村式涙管洗浄用一段針 直 (4 本入)	58
中村式涙管洗浄用二段針 曲 (12 本入)	58
中村式涙管洗浄用二段針 曲 (4 本入)	58
中村式涙管洗浄用二段針 直 (12 本入)	58
中村式涙管洗浄用二段針 直 (4 本入)	58
中村氏釣針型開創鉤 大 (2 本組)	127
中村氏釣針型開創鉤 中 (2 本組)	127
中村氏釣針型開創鉤 小 (2 本組)	127
新潟大学マイクロショート持針器 止無 逆マチ式	50
ニードルスパーテル アングル型	61
ニードルブレード 直型 4.00mm	150
西氏エンドカブスラー剪刀 反	37
西・ユトラータ氏 サーキュラーカプシュロレクシス用鉗子	72
ニ刀流チョッパー (加藤式核分割チョッパー)	75
ニプロディスボーザブル 30G メッシュワークシェーバー針	155
ニプロディスボーザブルオブタルミック針 涙洗針	155
ニプロディスボーザブルオブタルミック針 (直 /25G)	153
ニプロディスボーザブルオブタルミック針 (ビスコ針 /25G/ 直)	153
ニプロディスボーザブルオブタルミック針 (ビスコ針 /27G/ 曲)	153
ニプロディスボーザブルオブタルミック針 (ビスコ針 /27G/ 直)	153
ニプロディスボーザブルオブタルミック針 (ビスコ針 /30G/ 直)	153
ニプロディスボーザブル オブタルミック針 20Gx40 柔軟管	153
ニプロディスボーザブル眼内注射針 (30G)	153
ニプロディスボーザブル眼内注射針 32G	153
ニプロディスボーザブル眼内レンズムーバー	155
ニプロディスボーザブル球後麻酔針 (曲 /23G)	154
ニプロディスボーザブル球後麻酔針 (直 /23G)	154
ニプロディスボーザブルサイドポート針	154
ニプロディスボーザブルサイドポート針 (テノン麻酔針 /27G)	154
ニプロディスボーザブルサイドポート針 (テノン麻酔針 /25G)	154
ニプロディスボーザブルチストーム (25G)	155
ニプロディスボーザブルハイドロダイセクション針	154

ニプロディスプレイザブル房水ビペット	156
ネスコデルマーク中字 (10 本入)	161
ネスコデルマーク細字 (10 本入)	161
ノーホールレンズ用フック	86
野口氏 IOL 把持鑷子 19G Lens Grabber II L	83
野口氏 IOL 把持鑷子 19G Lens Grabber II S	83

ハ

ハイドロカニューラ 23G	73
パイプシャフト用洗浄器	136
バイマニュアルハンドピース 灌流チップ用 チタン Blue	82
バイマニュアルハンドピース 吸引チップ用 チタン Gold	82
パイロットチップインプラントナイフ アングル型 ベベルアップ 3.20mm	147
パイロットチップインプラントナイフ アングル型 ベベルアップ 5.20mm	147
パイロットチップインプラントナイフ アングル型 ベベルアップ 5.50mm	147
パターマン氏眼筋クランプ	125
畑氏斜視鑷子 左	128
畑氏斜視鑷子 右	128
バックフラッシュハンドピース エクストルージョン 交換用シリコンパーツ 5ヶ	97
バックフラッシュハンドピース エクストルージョン ブラッシュタイプ ハンドル付セット 23G	97
バックフラッシュハンドピース エクストルージョン ブラッシュタイプ ハンドル付セット 25G	97
バックフラッシュハンドピース エクストルージョン ブラッシュタイプ ハンドル付セット 27G	97
バックフラッシュハンドピース エクストルージョン 本体	97
バックフラッシュハンドピース 交換用シリコンパーツ 5ヶ	97
バックフラッシュハンドピース ブラッシュタイプ ハンドル付セット 23G	97
バックフラッシュハンドピース ブラッシュタイプ ハンドル付セット 25G	97
バックフラッシュハンドピース ブラッシュタイプ ハンドル付セット 27G	97
バックフラッシュハンドピース 本体	97
服部式滑車型眼球圧迫器 極小	101
バラッカー氏開瞼器 小	43
バラッカー氏角膜持針器 止付	51
バラッカー氏角膜持針器 止無	51
バラッカー氏角膜縫合用持針器 止付	51
バラッカー氏角膜縫合用持針器 止無	51
バラッカー氏持針器 ショートモデル 止付	50
バラッカー氏持針器 ショートモデル 止無	50
バラッカー氏持針器 止付 ストロングカーブ	49
バラッカー氏持針器 ファインチップモデル 曲 止付	51
バラッカー氏持針器 ファインチップモデル 曲 止無	51
バラッカー氏睫毛鑷子	30
バラッカー氏スライディング開瞼器 オープンリング型 ストッパー付	44
バラッカー氏マイクロ持針器 止無	51
バンガーター氏開瞼器 大 左	41
バンガーター氏開瞼器 大 右	41
バンガーター氏開瞼器 小 左	41
バンガーター氏開瞼器 小 右	41
バンガーター氏開瞼器 オープン型 小 左	42
バンガーター氏開瞼器 オープン型 小 右	42
バンガーター氏開瞼器 オープン型 大 左	41
バンガーター氏開瞼器 オープン型 大 右	41
バンガーター氏開瞼器細目用 大 左	42
バンガーター氏開瞼器細目用 大 右	42
バンガーター氏開瞼器細目用 小 左	42
バンガーター氏開瞼器細目用 小 右	42
バンガーター氏ブジー型涙管洗浄針 21G	59
バンガーター氏ブジー型涙管洗浄針 23G	59
反剪刀 鋭	38
反剪刀 鈍	38
ハンド式マイクロモーターチャックカッター (6 本入)	117
ハンド式マイクロモーターチャック (本体のみ)	117
ビショップ・ハーモン氏薄片組織鑷子 デリケート型 無鉤	25
ビショップ・ハーモン氏前房洗浄器 シリコンバルブ	54
ビショップ・ハーモン氏薄片組織鑷子 デリケート型 有鉤	19
ビショップ・ハーモン氏薄片組織鑷子 無鉤	25
ビショップ・ハーモン氏薄片組織鑷子 有鉤	19
ファイングリップ ILM 鑷子 23G	90

フィンク氏霰粒腫用ギザ付鋭匙	120
フェザー眼科用カミソリ 100 枚入	63
フェザー微細手術用替刃メスハンドル 100mm	152
フェザー微細手術用替刃メスハンドル 130mm	152
フェザー微細手術用替刃メスハンドル 130mm	152
フォークナー氏 I.O.L. 挿入用鑷子	84
深作式スナップアンドスプリットフック核分割用	77
深作式ピンポイント注入針 24G	56
深作氏トラベクロトミープローベ保持用鑷子	109
深水式エンサークリング・プラグ鑷子	104
深水式マルチ剪刀	36
福島医大式オルビタ用腫瘍把持鑷子	131
福山・吉富式核分割コブラシャフトスパーテル	74
プラグフォーセップス	100
ブラッシュユニードル 23G 3 本入 (交換用)	97
ブラッシュユニードル 25G 3 本入 (交換用)	97
ブラッシュユニードル 27G 3 本入 (交換用)	97
フラット洗浄針 アングル型	54
フラッパー結紮鑷子 段付	23
フラッパー縫合鑷子 前方突出型 有鉤 0.1mm 段付	16
フラッパー縫合鑷子 直角型有鉤 0.1mm 段付	18
フラッパーマイクロコリプリ鑷子	27
フラッパーマイクロコリプリ鑷子チタニウム	27
プラントインサーター	92
フルートハンドピース	60
ブレードプレショッパー	78
プレッシャープレートダブルサーキュラーセレーション付	93
分割君 (徳田式核分割フック)	74
ペレンス氏眼筋クランプ	128
縫合針 No.1	62
縫合針 No.2	62
縫合針 No.3	62
縫合鑷子 前方突出型 (80 度) 段付	16
縫合鑷子 直 P-H 型 0.3mm 段付	21
縫合鑷子 直 前方突出型 有鉤 0.1mm 段付	16
縫合鑷子 直 前方突出型 有鉤 0.12mm 段付	16
縫合鑷子 直角型有鉤 0.10mm 段付	18
縫合鑷子 直角型有鉤 0.12mm 段付	18
ポーブル氏睫毛鑷子	29
ポーブル氏睫毛鑷子チタニウム	29
ポーブル氏睫毛鑷子ツイストヒンジ	30
ポーブル氏睫毛鑷子マイクロファイン	29
ポーマン氏涙管消息子 0-01	130
ポーマン氏涙管消息子 02-03	130
ポーマン氏涙管消息子 04-05	130
ポーマン氏涙管消息子 06-07	130
ポーマン氏涙管消息子 08-09	130
ポーマン氏涙管消息子 1-2	130
ポーマン氏涙管消息子 3-4	130
ポーマン氏涙管消息子 5-6	130
ポーマン氏涙管消息子 全サイズセット	130
ホナンバルーン	138
ホナンバルーン ヘッドバンド	138
ホナンバルーン ベローズ	138
ホナンバルーン ラバーチュービング	138
ポリエステル洗眼瓶 100cc	137
ポリエステル洗眼瓶 250cc	137
堀尾式トロカール鑷子	94
堀尾式半月型プレッシャープレート	93
堀尾・田中式テーパードトロカール 23/25G	91
堀尾・田中式テーパードトロカール用インサーター	91
ボン大学式 虹彩鑷子 曲	20
ボン大学式 虹彩鑷子 直	20
ボン大学式 虹彩鑷子 直 段付	20
ボン大学式デリケート剪刀 直	39
ボン大学式デリケート剪刀 反	39

マ

マイクロ ウエストコット剪刀 反 鈍	35
マイクロ開瞼器 オープンリング型	40
マイクロ開瞼器 オープンワイヤー型	40
マイクロ開瞼器 吸引付	48
マイクロ開瞼器 オープンリング型 小	40
マイクロ開瞼器 プレート型	40
マイクロ開瞼器 横スリットタイプ 吸引付	47
マイクロ角膜縫合鑷子 C 型 ウルトラファイン 0.12mm	16
マイクロ角膜縫合鑷子 C 型 エクストラデリケート 0.15mm	17
マイクロ角膜・縫合鑷子 P-H 型	21
マイクロ結紮鑷子 M 型	22
マイクロ結紮鑷子 T 型	22
マイクロ結紮鑷子 ウルトラファイン	23
マイクロ結紮鑷子 エクストラデリケート	23
マイクロ結紮鑷子 ワイドハンドル	22
マイクロサージャリー剪刀 反 鋭	36
マイクロサージャリー用替刃パンチ 直	63
マイクロサージャリー用替刃パンチ 直	63
マイクロ止血鉗子 小 直・無鉤	34
マイクロ止血鉗子 直・無鉤	34
マイクロ持針器 スパイラルピーク 止無	49
マイクロスリットナイフ 曲 ベベルアップ 1.0mm プラスチックハンドル	143
マイクロスリットナイフ 直 片面刃付 1.0mm アルミニウムハンドル	143
マイクロスリットナイフ 直 片面刃付 1.0mm 替刃タイプ	143
マイクロスリットナイフ 直 片面刃付 1.0mm セーフシールドハンドル	143
マイクロスリットナイフ 直 片面刃付 1.0mm プラスチックハンドル	143
マイクロ剪刀付持針器 止付 曲	53
マイクロフェザー スリットナイフ 06 シリーズ<リブ&アール> 1.4mm (5 本入)	142
マイクロフェザー スリットナイフ 06 シリーズ<リブ&アール> 1.6mm (5 本入)	142
マイクロフェザー スリットナイフ 06 シリーズ<リブ&アール> 1.8mm (5 本入)	142
マイクロフェザー スリットナイフ 06 シリーズ<リブ&アール> 2.0mm (5 本入)	142
マイクロフェザー スリットナイフ 06 シリーズ<リブ&アール> 2.2mm (5 本入)	142
マイクロフェザー スリットナイフ 06 シリーズ<リブ&アール> 2.4mm (5 本入)	142
マイクロフェザー スリットナイフ 06 シリーズ<リブ&アール> 2.75mm (5 本入)	142
マイクロフェザー スリットナイフ 06 シリーズ<リブ&アール> 2.8mm (5 本入)	142
マイクロフェザー スリットナイフ 06 シリーズ<リブ&アール> 3.0mm (5 本入)	142
マイクロブレチョッパー	78
マイヤー・シュビッケラート氏口カリゼーター	104
前田式 DLK スパーテル	115
前田式翼状片スパーテル	122
松島式皮質吸引針 23G	80
松村・大高式涙道手術用拡張針	129
三島式角膜鑷子 P-H 型	21
三島式角膜鑷子 オリジナルモデル	18
三島式角膜剪刀 鈍 (刃のカーブ 20R)	113
三島式 結膜鑷子	25
三島式有鉤鑷子	19
未熟児鉤	103
未熟児用ワイヤー開瞼器 6mm	46
未熟児用ワイヤー開瞼器 8mm	46
ミニクレセントナイフ 直型 ダブルベベル 1.25mm	145
三村氏涙点形成パンチ 23G	129
三宅式ブジー 0-01	130
三宅式ブジー 02-03	130
三宅式ブジー 04-05	130
三宅式ブジー 06-07	130
三宅式ブジー 08-09	130
三宅式ブジー 全サイズセット	130
三好氏チョッパー	76
三好氏・藤本氏 CCC マーカー	69
無鉤鑷子 直	26
目黒式 DCR ケリソンロンジャー直 Herclues ヘラクレス	131
滅菌ケース	93
滅菌トレー 器具 1 本用スロットタイプ 6inch	133

滅菌トレー 器具 1 本用スロットタイプ 7.5inch	133
滅菌トレー 器具 1 ～ 3 本用マットタイプ 6inch	133
滅菌トレー 器具 5 本用	133
滅菌トレー 器具 1 ～ 2 本用スロットタイプ 7.5inch	133
滅菌トレー 器具 1 ～ 3 本用マットタイプ 7.5inch	133
滅菌トレー 器具 10 本用	133
滅菌トレー 器具 10 本 X 2 段タイプ	133
滅菌トレー 器具 20 本用	133
滅菌トレー ミニタイプ	133
目盛付スパーテル	61
森井式 ILM 鑷子 25G “かおりのノンセレーション”	89
森井式眼内レンズフック’ かおりの逆フック’	86
森氏 CCC 鑷子 25G	70

ヤ


八重剪刀	68
八重剪刀 ショートハンドル	68
有鉤鑷子 直	19
ユトラータ氏サーキュラーカブシュロレクシス用鑷子	72
幼児用拡張針	130
横井氏カレシス剪刀 エボリューション	121
横井氏カレシスマーカー エボリューション	121
吉富式マイボーム腺鉗子 ワイドハンドル	119
米田式眼球圧迫器	101

ラ

ラウンドディバイダー	77
ラウンドナイフ 曲 バイベベル 2.2mm アルミニウムハンドル	151
ラウンドナイフ 曲 バイベベル 2.6mm アルミニウムハンドル	151
ラウンドナイフ 曲 バイベベル 2.6mm 替刃タイプ	151
ラウンドナイフ 曲 バイベベル 2.6mm プラスチックハンドル	151
ラウンドナイフ 曲 バイベベル 3.0mm アルミニウムハンドル	151
ラウンドナイフ 曲 バイベベル 3.0mm 替刃タイプ	151
ラウンドナイフ 曲 バイベベル 3.0mm プラスチックハンドル	151
ラウンドナイフ 直 バイベベル 3.0mm アルミニウムハンドル	151
ラウンドナイフ 直 バイベベル 3.0mm 替刃タイプ	151
ラメラナイフ アングル型 ベベルアップ 2.30mm	150
両頭異物針	117
両頭角膜鋭匙 大	116
両頭角膜鋭匙 中	116
両頭角膜鋭匙 小	116
両頭角膜鋭匙 極小	116
緑内障ナイフ 0.20mm アルミニウムハンドル	151
緑内障ナイフ 0.30mm アルミニウムハンドル	151
輪匙及び金属匙	64
涙管洗浄針 45° アングル型 23G	59
ロストラル ILM 鑷子 23G	90
ロストラル ILM 鑷子 25G ロングタイプ	89

ワ

ワイヤー開瞼器 オープン型	44
ワイヤー開瞼器 プレート型	44

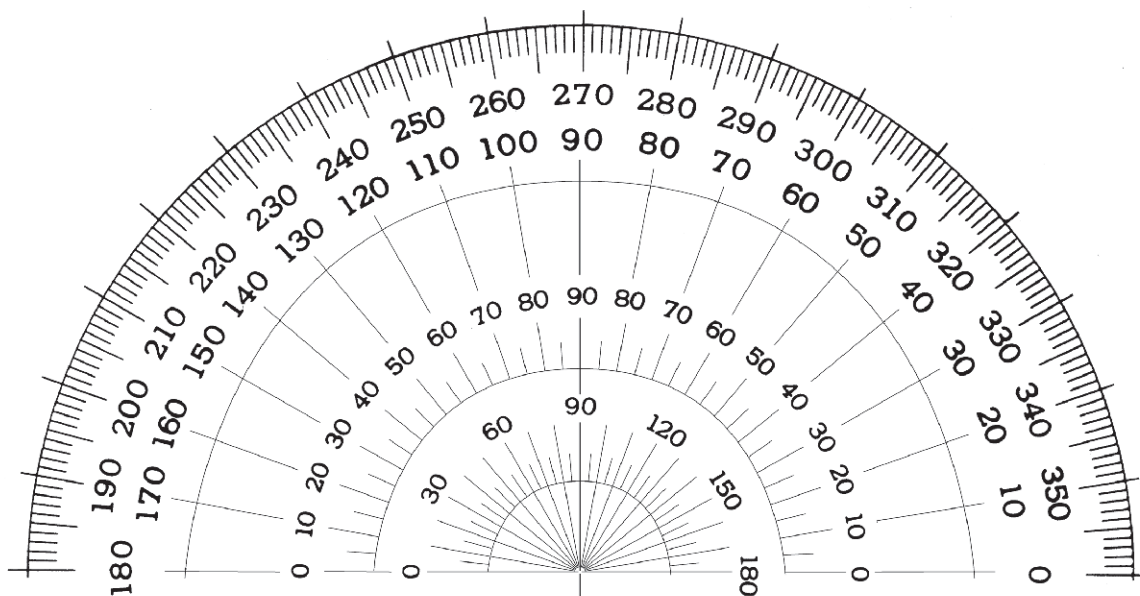

注射針、洗浄針、吸引針等用パイプ 規格寸法表

Standard size chart for pipes of injection needle, cleaning needle and aspirating needle

外 径 OD	1.2mm	1.0mm	0.9mm	0.8mm	0.7mm	0.6mm	0.55mm	0.5mm	0.45mm	0.4mm	0.35mm	0.3mm
内 径 ID	0.8mm	0.7mm	0.6mm	0.5mm	0.4mm	0.3mm	0.25mm	0.2mm	0.18mm	0.15mm	0.12mm	0.11mm
ゲージ Gauge	# 18	# 19	# 20	# 21	# 22	# 23	# 24	# 25	# 26	# 27	# 28	# 30

●規格外の寸法の場合は、すべて特注品です。

Sizes that are not on this chart have to be custom-made.

医療機器の添付文書は医薬品医療機器総合機構（PMDA）サイトより検索いただけます。

<https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/kikiSearch/>



製造販売業許可番号 13B1X00048



株式会社 イ ナ ミ

本 社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2
TEL: 03-3814-1731 FAX: 03-3814-3334
Website: <http://www.inami.co.jp>
Email: corpinfo@inami.co.jp



Inami & Co., Ltd.

No.24-2, Hongo 3-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0033, Japan
Tel: +81 (3) 3814-5916 Fax: +81 (3) 5684-2126
E-mail: inamifd@inami.co.jp
URL: www.inami.co.jp/english

※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更することがあります。

※本カタログ中の製品の写真は、色や形状を含め印刷物であるために実際と異なる場合があります。

※製品サイズには公差があるため、実際の製品はカタログ記載サイズと若干前後する場合があります。

※製品の使用に際しては、取扱説明書・添付文書などをよくお読みになった上で行って下さい。

※本カタログの情報は 2023 年 9 月現在のものです。

※本カタログに掲載されている価格は2023 年 9 月現在の税別標準小売価格です。

