




もっと、みんなの、診療空間



600
C.O.S. SCENTES
C.O.S. センテス



www.inami.co.jp

 Find us on Facebook!
www.facebook.com/inami.co.jp

センテスではじめる ユニバーサルな 診療空間設計。



オーバーハング構造によるゆとりのオフセットデザイン



最低高600mmのユニバーサル仕様

腰や背中を患っているご高齢の患者さま、または小さなお子様などにも、少しでも負担なく診察を受けていただけるよう、テーブルの最低高を600mmまで調節することが可能になりました。

足元すっきり

車椅子がより近づけるよう、脚部の形状をよりスッキリさせました。また、天板の厚みを従来比約13%薄くしたことで、足元のクリアランスが広くなり、より圧迫感のない診察が可能になりました。

*K-1483/K-1487と比較



二次感染予防に効果的な抗菌仕様

二次感染予防を目的として、使用頻度の高い操作部に抗菌パネルを採用しました。イナミは患者様にも病院で働くドクターやスタッフ様にも安心していただける設備づくりを目指しています。

集中コントロール

スライディングテーブルの操作はもちろん、倒像鏡、直像鏡、双眼倒像鏡の操作、イナミ製患者椅子の操作を手元で行うことが可能です。



安心・安全対策

テーブルスライド時に患者様や物に接触すると即座にスライドを停止するセーフティスイッチは、咄嗟の操作にも対応可能な設計になっています。また、テーブルトップ裏のセーフティスイッチが患者様の膝に触れるとテーブルの下降が停止します。



シームレスな診察を実現する オールインワンパッケージ

ご使用の機器(倒像鏡、直像鏡、双眼倒像鏡)のシステムデスクへの取付をオプションでサポートしております。取り付け箇所はお好みに合わせてお選びいただけます。

取付可能箇所
天板下、ワークデスク背面パネル、モニターポール

ドクターの診察における作業効率を最適化し、なおかつ施設を美しくデザインするために、デスクの選択は重要です。

イナミはコクヨとオカムラという2大デスクメーカーとのコラボを実現し、デスクワークとスライディングテーブルを使用した診察の双方でストレスのないシームレスな動きを可能にしました。

また、デスク自体の種類や天板の色も選択可能なため、高品質なインテリアとしての機能も持ち合わせています。



オカムラデスクモデル

【推奨組み合わせ例 ※左イメージ】

K-1489-L	スライディングテーブル左引き	¥1,250,000
LT39AD	診察デスク ラウンドモデル 1600W×780D	¥107,600
LT37FD	アッパーユニットロータイプ 350H	¥41,800
LT33HD	配線カバー(アッパーユニット設置用)	¥6,300
DP892Y	中央引出し(鍵なし)	¥10,300

写真のセット価格 ¥1,416,000

- K-1489スライディングテーブルは右引き、左引きが選べます。
 - K-1700 スライディングテーブルタクスとの組み合わせも可能です。
 - 診察デスクはその他各種カスタマイズが可能です。
- 詳しくは別途お問い合わせ下さい。
(天板形状、天板サイズ、バックパネル、配線カバーパネル、ブックシェルフ等)

診察デスク天板



診察デスクパネル (ピンナップボード)



※カスタマイズの内容により金額が異なります。
※イメージの検眼鏡ユニット、モニター、モニターアームは別売です。



コクヨデスクモデル

【推奨組み合わせ例 ※左イメージ】

K-1489-L	スライディングテーブル左引き	¥1,250,000
HP-DDLV149LS81P1M	診察デスク(ラウンドタイプ) W1400	¥121,000
SDC-LV4F5	診察デスク用引出 W1400用	¥7,700
HP-SW121	サービウォール(ハイタイプ)	¥139,000
HPP-SWF11GDNQ1	フロントパネル ホワイトグリーン	¥27,600
HPP-SWM11GDNQ1	ミドルパネル ホワイトグリーン	¥25,600
HPP-SWH11GDNQ1	ハイパネル ホワイトグリーン	¥18,700
LAC-V42P81	サービウォール用棚	¥5,900
SDA-LEDKL10N	LEDタクスライト 棚下タイプ	¥55,700


写真のセット価格 ¥1,651,200

- K-1489スライディングテーブルは右引き、左引きが選べます。
 - K-1700 スライディングテーブルタクスとの組み合わせも可能です。
 - 診察デスクはその他各種カスタマイズが可能です。
- 詳しくは別途お問い合わせ下さい。
(天板形状、天板サイズ、バックパネル、配線カバーパネル、ブックシェルフ等)

診察デスク天板



診察デスクパネル

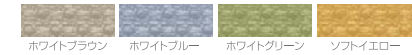


※カスタマイズの内容により金額が異なります。
※イメージの検眼鏡ユニット、モニター、モニターアームは別売です。

K-1489 仕様

上下ストローク	600~780mm
スライドストローク	470mm
上昇動作速度	23mm/S
下降動作速度	28mm/S
スライド動作時間	3.5±0.5S
許容搭載荷重	30kg
モニターボール耐荷重	10kg
室内照明用スイッチ	反転動作4路スイッチ
背景照明コンセント	スライディングのみ連動
使用電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	70W
重量	約100kg

外形寸法図

K-1489

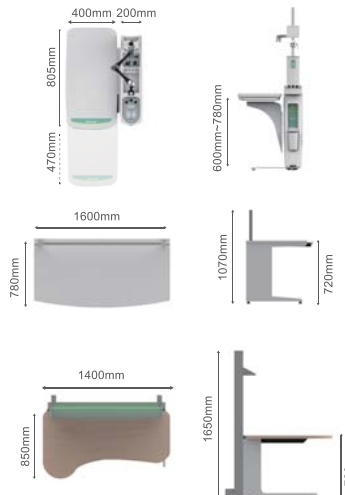

オカムラ製デスク

LT39AD 診察デスク ラウンドモデル
LT37FD アッパーユニットロータイプ

※仕様により異なります。

コクヨ製デスク

HP-DDLV149LS81P1M 診察デスク(ラウンドタイプ)
HP-SW121 サービウォール(ハイタイプ)

※仕様により異なります。

検眼鏡オプション



もっと、みんなの、診療空間



年齢、性別、国籍など今後ますます多様化する患者様だれにも快適さや安心を感じてもらえる。そんな診療空間をコーディネートするため、また、ドクターやスタッフの方々により働きやすい環境をご提案するために、私たちイナミは眼科をトータルに知るメーカーならではのさまざまな工夫を診療設備のものづくりに取り入れています。



Hospitable Design [ホスピタブルデザイン]とは

ドクター、スタッフ、そして患者様、診療空間におけるすべての人に快適と安心を提供するため、イナミが培った経験をベースに診療設備にプラスした機能を総称して「Hospitable Design (ホスピタブルデザイン)」と呼びます。
「Hospitable」とは歓待やおもてなしの心がある状態、または住環境などが快適であることを意味する言葉。
イナミの診療設備が「もっと、みんなの」診療室をつくるお手伝いをします。



株式会社 **イナミ**

A Passion for a Nice View

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2 TEL: 03-3814-1731 FAX: 03-3814-3334
Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp

名古屋ベース：〒465-0094 愛知県名古屋市名東区亀の井3-208 TEL: 052-704-2173 FAX: 052-704-2174
大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18ユミール TEL: 0798-37-2880 FAX: 0798-37-2881
九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17 TEL: 092-504-1734 FAX: 092-504-5355

※本カタログ記載価格は、すべて2015年10月現在の税別標準小売価格となっております。
※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものとは異なる場合があります。

製造販売業許可番号 13B1X00048