



近づく、広がる、デンタルフィールド



EASIO

ease & sensitivity in operation **イージオ**



www.inami.co.jp

EASIO smart

L-0950D

歯科用ズームコンパクト手術顕微鏡 イージオ・スマート

マニュアル
上下
スライダー

接眼
15x

ZOOM変倍
6x -18x

フィルター
オレンジ・ブルー・防熱・1/2ND

操作性、拡張性に富んだコンパクトモデル。

省スペース設計ながら様々なシーンに対応する機能と、観察を容易にする明るい光学系を搭載したイージオスマートは、段階的なアップグレードが可能のため、導入期としてもより本格的な使用にも適したモデルです。



3Dview



標準小売 1,250,000(税別)


Make it visible for your patients.

みえる、だから、わかりあえる。

横方向の鏡頭駆動



縦方向の鏡頭駆動

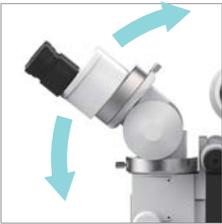

インクライナブルアダプタ

インクライナブルアダプタにより、接眼部を固定したまま変倍部及び対物レンズユニットを縦方向に駆動させることが可能です。



フォーカシングスライダ

手術中にフォーカスの微細な調整を行えるフォーカシングスライダは、滅菌可能なシリコンカバーのついた大型のノブによってスムーズかつ迅速に操作することができます。



フォーカス付き対物レンズ OPTION

オプションのフォーカシング機能付対物レンズは観察対象へのよりファインなフォーカス調整を行う際に便利です。標準レンズから簡単に交換することができます。

3CMOSフルハイビジョンカメラ OPTION

多彩な機能、映像出力を可能とするフルハイビジョンカメラ。取り付けにはビームスプリッターが必要です。



L-0541

ビームスプリッター (MS-4)



L-0541DF

ビームスプリッター
(フリップアップP=24 MS=57A)



L-0574 (F=38mm)


L-0564 (F=50mm)

L-0544 (F=100mm)

CマウントTVカメラアダプター

SPECIFICATIONS

顕微鏡・照明部	形式	カム式ズーム顕微鏡	
	変倍形式	1 : 3倍ズーム	
	接眼レンズ	15倍	
	総合倍率	6 ~ 18倍	
	視野径	Φ35~Φ10	
	眼福調整	50~70mm	
	焦点距離	250mm	
	視度調整	±6D	
	照野径	Φ45	
	照度	80,000Lux (最大)	
	フィルター	オレンジ、ブルー、防熱、1/2ND	
	ティルティング角度	前後	-30 ~ +30
		左右	-70 ~ +70
	焦点調整上下微動	手動式 微動量30mm	
アーム部	ベーススタンド	可搬型 フラットベースキャスター付	
	設置方式	キャスターストップバー式	
電源部	照明電球	ハロゲン電球 21V150W	
	入力電圧	AC100V 50/60Hz	
	消費電力	200VA	
	ヒューズ	3.0A 250V	
形状	形状寸法	600 (W) × 1500 (D) × 1425 (H)	
	本体重量	38kg	

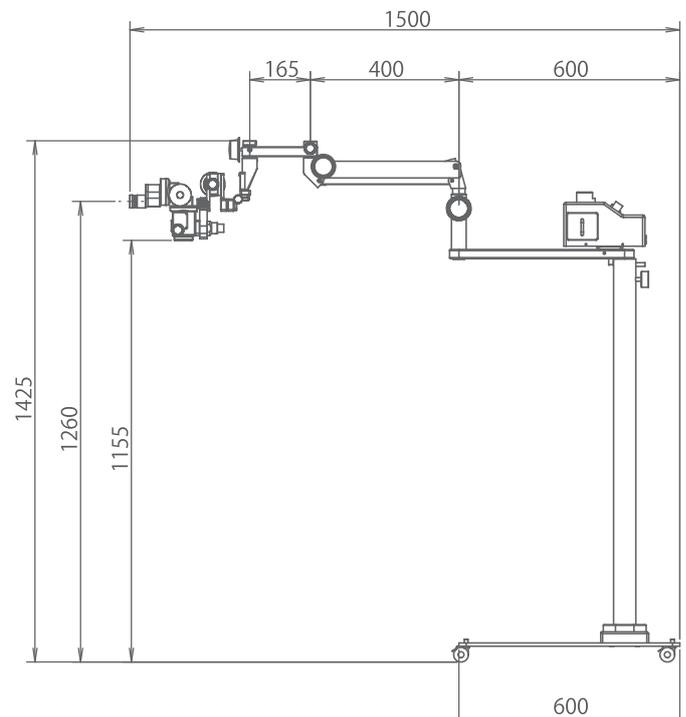

近づく、広がる、デンタルフィールド



A Passion for a Nice View

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2
名古屋ベース：〒452-0807 愛知県名古屋市西区歌里町2 アルテリーベ1号室
大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18コムール
九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17
Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp

TEL: 03-3814-1731 FAX: 03-3814-3334
TEL: 052-934-7489 FAX: 052-934-7490
TEL: 0798-37-2880 FAX: 0798-37-2881
TEL: 092-504-1734 FAX: 092-504-5355

official web site



※本カタログ記載価格は、すべて2018年4月現在の税別標準小売価格となっております。
※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものとは異なる場合があります。

製造販売業許可番号 13B1X00048
v1.0