

INAMI News

March-May 2024



Products

野口氏 Fornix ウォッシャー
鈴木式ボールチップ鑷子
小型 3CMOS フル HD カメラ
INC Washer
M,Q,A,
セミナー関連製品

Seminar and Webinar

SPA

小瞳孔アプローチ [Small Pupil Approach]
-Small Pupil Approach- リングラボ


最新緑内障 デバイスを学ぼう！

-Exploring the Latest Glaucoma Surgical Devices-

Aesthetic Ophthalmology

眼科美容

目の周りのエイジングと眼科でも出来るﾌｴ美容治療

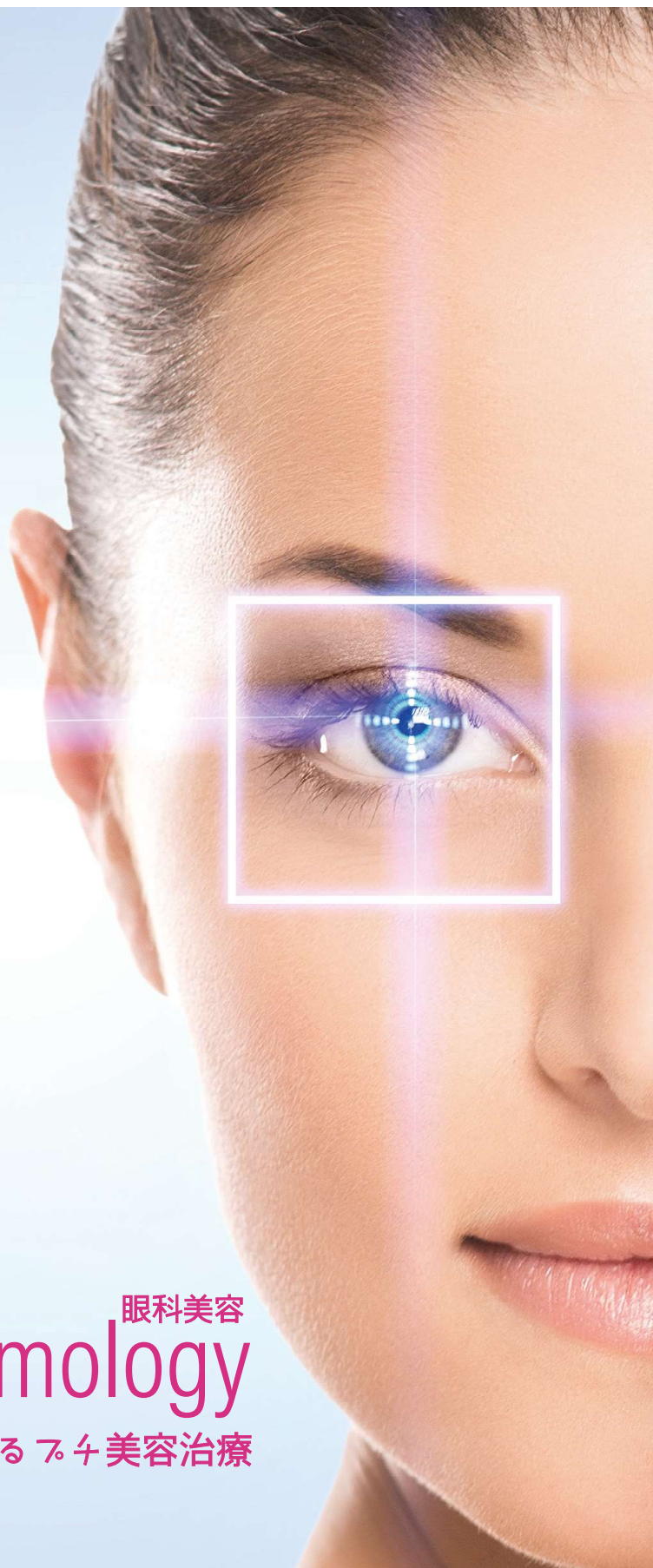

野口氏 Fornix ウォッシャー

M-2260

全長 13.2mm / 直径 19mm 標準小売 95,000 円（税抜）JAN:4547451337560

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34630000 届 13B1X00048002502 入 1



考案者

野口 三太郎 先生

ASUCA アイクリニック 仙台マークワン（仙台市）
ツカザキ病院 眼科（兵庫県 姫路市）


「術中に眼表面をイソジンやオゾン水で洗い流すことは眼内炎の予防に重要である。しかし、しっかり洗い流したにもかかわらず、すぐに眼表面が油膜などで汚染されることを経験する。結膜は深くフォルニックスで回転する。眼脂や睫毛などが迷入しやすく菌の増殖の場となりやすい。フォルニックスは 15 ミリほどあり、通常の眼洗では洗うことは不可能である。しかし、今回開発されたフォルニックスウォッシャーはフォルニックスまでも洗浄できるデバイスで術中の眼表面を可能な限り清潔に保つことができる。眼内炎予防には必須のデバイスになるに違いない。」

鈴木式ボールチップ鑷子

DS-004

全長 88mm / 鉤幅 0.15mm / 先端（球状時）φ0.8mm 標準小売 62,000 円（税抜）JAN:4547451337010

材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048002504 入 1

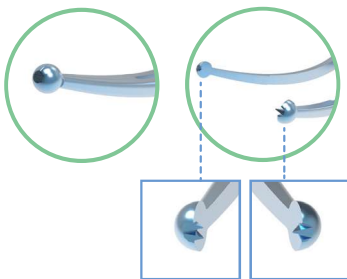

考案者

鈴木 久晴 先生

善行すすき眼科（神奈川県藤沢市）

「ボールチップ鑷子は、先端を球状にすることによって、有鉤鑷子と無鉤鑷子の二つの性質をもっています。有鉤鑷子は鉤により鑷子を閉じていても不用意に結膜を傷つけて出血をきたしてしまうことがありますが、本鑷子はそのようなことを防ぐために設計されました。

切開創作成時のカウンター、CCC 作成時の眼球固定、更に硝子体手術の時のトロカール抜去時の自己閉鎖の介助、そして周辺部処理時の圧迫などにも使えます。先端のボール部分は組織侵襲が少なく、固定やマッサージに有効です。

更に、内側がサンドブラスト加工になっていることによって縫合にも使えます。広く汎用性がある鑷子です。」



L-0850HD



小型 3CMOS フル HD カメラ

小型・軽量カメラヘッド

カメラヘッドの小型(W34XH40XD40mm)・軽量化(約100g)

高画質・高感度

撮像素子には、200万画素1/2.8型CMOSを採用。限界解像度1000本・S/N 63dBの高画質、感度2000lx/F13の高感度を実現。

多彩な映像出力

映像出力はデジタルハイビジョン信号(3G/HD-SDI)を2系統、HDMI出力を1系統装備す。

電子シャッター(シャッターアイリス)

被写体の光量の変化に応じて、常に最適な映像レベルを保つことができる電子シャッター(シャッターアイリス)機能を装備。

フルオレセインモード機能

眼科スリットランプ等によるフルオレセイン検査でも、前面パネルスイッチを押すだけで鮮明な蛍光箇所を捉えることができるフルオレセインモード機能を搭載。オプションのフットスイッチからリモート制御が行えます。

シーンファイル機能

各補正・各機能の設定を4ポジションまで記憶・選択ができるシーンファイル機能を装備。撮影条件に合わせた設定を簡単に呼び出すことができます。

電子ズーム機能

映像の中心部を4倍まで拡大表示できる電子ズーム機能を装備しています。

IH-500S INC Washer

眼科器具専用ウォッシャー・ディスインフェクター


極小先端・極細管空状の器具に対応

ハイレベルの洗浄～中水準消毒、乾燥までが全自動



屋内の様子がわかるガラスドア

洗浄・滅菌中の様子を一目で確認できるガラスドアを採用しています。

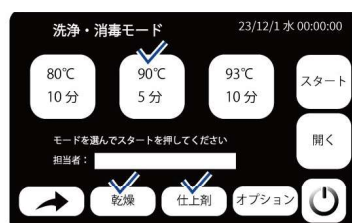

日本語表示のタッチパネル

タッチパネルのディスプレイは全て日本語表示。コース選択はもちろんエラーも一目で確認いただけます。



オートオフ機能

洗浄・消毒。乾燥工程終了後 1～60 分後に自動的に電源がオフになります。(任意で設定可能)



洗剤は自動計量 & 自動投入

専用の洗剤ボトルを本体側面にセットしチューブで接続すると、自動で必要量を軽量し投入します。



静音設計

診療時間中や夜間も音が気になりにくい静音設計です。

洗浄～乾燥までの工程を色で確認



洗浄・すすぎ



消毒・仕上



乾燥



終了

簡単！便利！新しい
M.Q.A.のパッケージ

M.Q.A. リニューアル大作戦

10個
入ってるのが
パッと見て
わかる！

M.Q.A.
が変わった！

数えるのが
とっても楽〜！

実は
パッケージが
新しく
なったよ！

START▶

4 開く

2 ブリスターパックを
取り出す

1 タイベックの
中袋を開ける

3 中のカバーを
スライドして外す

1回
開封したら
使い切ってね！

めちやくちや
便利だわ〜！

正しい使い方で
どんどん
使いこなしてね！

Inami



INAMI Webinar [ZOOM]

SPA

小瞳孔アプローチ [Small Pupil Approach]

3.16^{Sat}
19:00-20:00

参加登録は
こちらから

[https://
bit.ly/4bKJZar](https://bit.ly/4bKJZar)



イナミ器具を用いた、
小瞳孔ありのままアプローチ

徳田 芳浩 先生

井上眼科病院 副院長

Xpand 2 虹彩リングを
用いた小瞳孔アプローチ

留守 良太 先生

トメモリ眼科・形成外科 院長





INAMI ドライラボ

SPA

-Small Pupil Approach- リングラボ

3.17 SUN
am 9:00-11:30

参加登録は
こちらから
[https://
bit.ly/48kXdYr](https://bit.ly/48kXdYr)



先着 8 名限定

【開催場所】

東京ミッドタウン八重洲
カンファレンス4F 会議室 A
東京都中央区八重洲二丁目 2 番 1 号



【参加費用】 148,000 円 (税抜)

【参加特典】

- ・シミルアイ小瞳孔用 1 セット
- ・XPAND2 (2 ケ入り)

※ドライラボ使用後お持ち帰りいただけます (ドライラボ用 ×1・実践用 ×1)

- ・参加者限定フォローアップ
(継続フォローアップ相談・解説動画提供)



【講義+ドライラボ】

Xpand2 虹彩リングによる
シミルアイを用いた
瞳孔拡張スキルトレーニング


留守 良太 先生
トメモリ眼科・形成外科 院長



SPA Small Pupil Approach

関連商品

Xpand2 虹彩リング

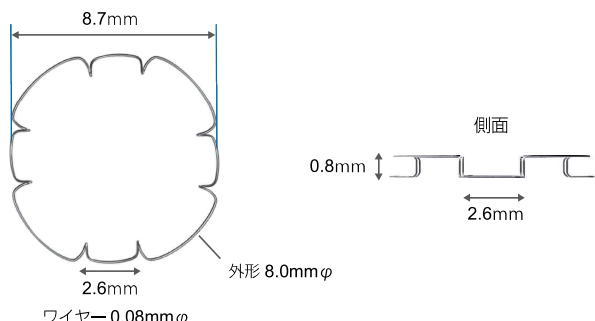

マルチユース：使用限度 2 回

DIAX2-MUINS 寸法：図参照 ￥100,000 JAN:4547451336440

材 Ti 形状記憶合金 薬 クラス I JMDN 13381001 届 13B1X00048002442 入 1

【構成品】

- ・ XpandNT2 虹彩リング（本体）
- ・ インジェクター
- ・ 滅菌用本体収納ケース
- ・ インジェクターを洗浄するためのチューブとルアーロック

【素材】

リング部：ニチノール（チタン合金）ASTM F 2063-18
インサーター（カニューレ管部）：樹脂
インサーター（ハンドル部）：ポリオキシメチレン POMC

トメ1・トメ2フック

2本のフックで瞳孔拡張操作を安全、
確実にコントロール。

ご考案者 留守 良太 先生
(和歌山県橋本市 トメモリ眼科・形成外科)



トメ1 (tome1) フック

M-127T 全長 97mm / 先端 0.15X1.05mm ￥30,000 JAN:4547451334842

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 届 13B1X00048002359 入 1

トメ2 (tome2) プッシュフック

M-128T 全長 109mm / 先端 0.9X1.5mm ￥30,000 JAN:4547451334873

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 届 13B1X00048002358 入 1

八重剪刀®

虹彩切開からダブル CCC まで！
縦にハサミが動く八重剪刀®



八重剪刀®

DS-088 全長 137mm / 刃先 2mm / 径 23G ￥176,000 JAN:4547451320869

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 35327001 届 13B1X00048002479 入 1

八重剪刀®ショートハンドル

DS-088SH 全長 119mm / 刃先 2mm / 径 23G ￥176,000 JAN:4547451332060

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 35327001 届 13B1X00048002479 入 1

シミルアイ 小瞳孔

様々な瞳孔拡張器具の
挿入・抜きのトレーニングに最適

品番：EYE-SP1
標準価格 ￥28,600

Starter Kit

品番：EYE-SP1-SET
シミルアイ 小瞳孔セット
標準価格 ￥47,800



Small Pupil

Set-up & Cleaning

EYE-SP1	シミルアイ小瞳孔 / 1 眼
EYE-ElevatedBase	シミルアイ 固定ベース
EYE-BT	シミルアイ 固定ベース用トレイ
EYE-Cohes5cc	粘性粘弾性代替材 / 5cc シリンジ
EYE-Dispers5cc	分散性粘弾性代替材 / 5cc シリンジ

最新緑内障 デバイスを学ぼう！

-Exploring the Latest Glaucoma Surgical Devices-

4/19 Fri. **MS4**
07:45-08:45

東京国際フォーラム 5F / 第5会場 ホール B5(2)



島根大学医学部眼科学講座 教授
Prof. Masaki Tanito

座長

谷戸 正樹 先生



TMH デバイスのバリエーション -TMH Devices' Variation-

埼玉医科大学病院 眼科 客員教授
小江戸眼科内科白内障・緑内障・糖尿病クリニック 院長

Dr. Takuhei Shoji

庄司 拓平 先生

T-Hook とシミルアイ -T-Hook & SimulEYE-

千原眼科医院 副院長

Dr. Tomoyuki Chihara

千原 智之 先生



Twisted GATT スーチャー -Twisted GATT Suture-

バプテスト眼科長岡京クリニック 院長
京都府立医科大学 客員教授

Dr. Kazuhiko Mori

森 和彦 先生



最新緑内障 デバイスを学ぼう！

関連商品

TANITO MICRO HOOK
TMH®
Original-ed.

谷戸氏 ab interno トラベクトミー マイクロフック

ご考案者
谷戸 正樹 先生
島根大学医学部眼科学講座 教授

谷戸マイクロフックのオリジナルエディション！




M-2215S



M-2215L



M-2215R

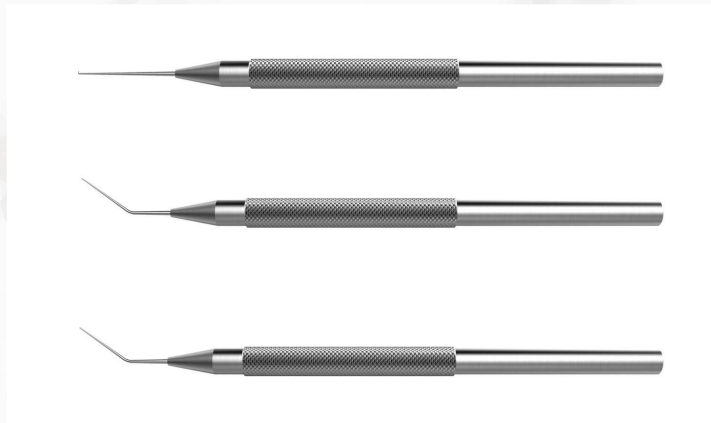

TANITO MICRO HOOK
TMH®
庄司 ed.

谷戸氏 ab interno トラベクトミー マイクロフック 庄司 ed.

ご考案者
庄司 拓平 先生
埼玉県川越市 小江戸眼科内科
埼玉医科大学病院 眼科

新たな MIGS 用フック。より広く・より薄く切開。




M-2220S



M-2220L



M-2220R

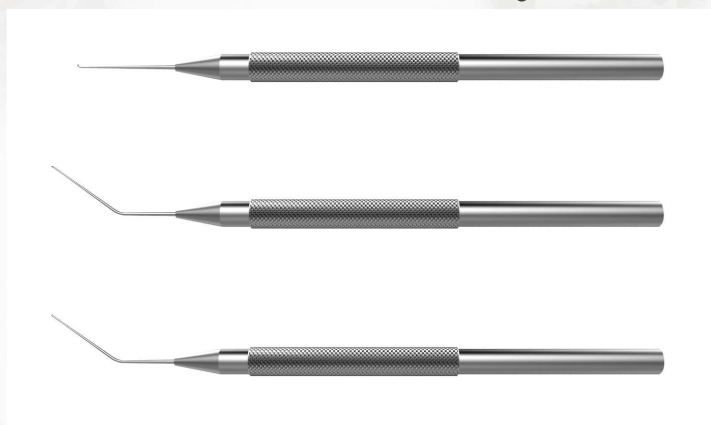

谷戸氏 ab interno トラベクトミーマイクロフック

M-2215S	直	全長 101mm	¥36,000	JAN:4547451332404
M-2215L	左	全長 100mm	¥36,000	JAN:4547451332398
M-2215R	右	全長 100mm	¥36,000	JAN:4547451332381
M-2215SS	3種セット		¥105,000	

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32761000 届 13B1X00048002217 入 1

谷戸氏 ab interno トラベクトミーマイクロフック 庄司 ed.

M-2220S	直	全長 101mm	¥38,000	JAN:4547451335337
M-2220L	左	全長 105mm	¥38,000	JAN:4547451335344
M-2220R	右	全長 105mm	¥38,000	JAN:4547451335351
M-2220SS	3種セット		¥111,000	


材 SUS 薬 クラス I JMDN 32761000 届 13B1X00048002397 入 1

千原氏 T-hook

MIGS に “T-hook” という新しい提案



ご考案者
千原 智之・千原 悦夫 先生
京都府 宇治市 千原眼科医院

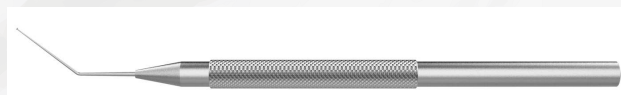

千原氏 T-hook

M-2225 全長 104mm / 先端 0.2×0.85×0.25mm ¥42,000 JAN:4547451336808

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32761000 届 13B1X00048002465 入 1

シミルアイ MIGS



品番：EYE-MM1

標準価格 ¥32,400

Starter Kit

品番：EYE-MM1-SET

シミルアイ MIGS セット

標準価格 ¥63,100



マイクロフック トレーニングに 最適

EYE-MM1	シミルアイ MIGS/1 眼
EYE-MIGSKit2.0	スタンド & ベースホルダー
EYE-Cohes5cc	粘性粘弾性代替材 /5cc シリンジ
EYE-Dispers5cc	分散性粘弾性代替材 /5cc シリンジ

Aesthetic Ophthalmology

5.18

19:30-20:30

参加登録は
こちらから

[https://
bit.ly/3STdQoy](https://bit.ly/3STdQoy)


佐藤香 先生

だんのうえ眼科 亀有院 院長
株式会社 EyeMed Innovations 代表取締役

私たち眼科医は、普段目のスペシャリストとしてスリットランプで眼瞼縁・角膜・結膜・水晶体・網膜を丁寧に観察し、治療を行なっているが、目の周り、顔の全体像まで観察が出来るだろうか？目の周りの変化やエイジングに関しては皮膚科医や美容皮膚科医に任せてしまっているのが現状である。

目の周りの皮膚は薄いため、エイジングのサインが表れやすく、私たちが普段処方している目薬の副作用も表れやすい場所でもある。その目の周りのエイジングのサインに私たち眼科医が改めて向き合い、目の局所だけではなく、目の周りや顔全体のバランスを見ながらの治療を患者様に提供したいと、このセミナーを立ち上げることとなった。

第1回

目の周りのエイジングと 眼科でも出来るプチ美容治療

Aesthetic Ophthalmology 第1回目のセミナーは、「目の周りのエイジングと眼科でも出来るプチ美容治療」をテーマに MGD 治療用として眼科で広く普及している IPL などの施術について眼科・皮膚科・美容皮膚科のそれぞれのプロフェッショナルにお話していただきます。

目の周りのエイジングとはどのような原因でどのような変化をするか、さらに皮膚科でよく遭遇する目の周りの病気や治療法について、メディアでも大活躍で皮膚科のクリニックを3院経営されている皮膚科専門医の玉城有紀先生にご解説頂き、美容皮膚科部門ではまたまたメディアでも大活躍で美 ST の第13回 2023 年美容医療ドクターグランプリで第3位を受賞された美容皮膚科医の長尾沙也加先生に、眼科医でも出来る目の周りのエイジングに対するプチ美容治療について、伝授して頂きたいと思う。最後に見た目の美しさにこだわった眼瞼下垂の手術で定評のある檀之上和彦先生と、多焦点眼内レンズや屈折矯正手術を得意としながらも目の周りの美容にも力を入れている佐藤香先生の4人で、目の周りの美容の基本についてのディスカッションを行いたい。


自由が丘ファミリー皮膚科
二子玉川ファミリー皮膚科
溝の口駅前皮膚科
総院長

玉城有紀 先生


THE ROPPONGI CLINIC
恵比寿院 院長

長尾沙也加 先生


栄和会理事長
だんのうえ眼科クリニック院長

檀之上和彦 先生

目の周りのエイジングと 眼科でも出来るプチ美容治療

関連商品



Mybo shampoo
Lidhygiene for My beauty operation.
TeaTree 1.0



眼科医が本気で監修した
ティーツリーオイル 配合の
プレミアムなリッドハイジーン用シャンプー。
1.0%



洗い方動画



リッドハイジーンの効果



洗顔や歯磨きと同じように、目やまぶたのトラブルを予防するために毎日の生活にとり入れたいのが、目もとの洗浄（リッドハイジーン）。目もとやまつ毛は、空気中を浮遊するホコリや花粉がついたり、メイクや皮脂汚れなどの汚れが溜まりやすい場所です。まつ毛の根元の汚れをしっかりと落とし『リッドハイジーン』を習慣にして、トラブル知らずな目もとを目指しましょう。

マイボシャンプー® TeaTree1.0

注文コード：MS-TT1.0-12

税込価格：26,400 円（1 箱：12 本入り）※1 本あたり 2,200 円

内容量：50ml 種類別名称：洗顔料

【監修】 有田 玲子 医師（LIME研究会代表・伊藤医院 副院長）
松本 玲 医師（医療法人社団医新会 レイククリニック 院長）
高橋 研一 医師（医療法人 高橋眼科 院長）

✓ あらゆるお肌の悩みに対応する多彩なモード

✓ トーニングモード・フォトシャワー搭載

✓ 安心温度センサー＋強力冷却機能搭載


IPL [Intense Pulsed Light]

AQUA CEL

標準小売 5,400,000 円（税抜）

医療機器認証番号：303ADBZX00049000

製造元 **Jeisys** 製造販売元 **TECHNOPIA** 販売元 **Inami** OPTHEMIC INSTRUMENTS

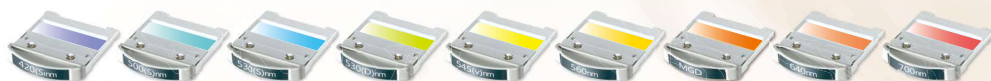



official web site



株式会社 **イナミ**

A Passion for a Nice View

製造販売業許可番号 13B1X00048

※本カタログ記載価格は、すべて2024年3月現在の税別標準小売価格となっております。
※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※製品サイズには公差があるため、実際の製品は本カタログ記載サイズと若干前後する場合があります。
※本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のもものと異なる場合があります。
※本カタログ中のQRコードのリンク先は予告なく閉鎖、または変更する場合があります。
※本カタログ中のQRコードは印字の状態によりリンク先が正しく表示されない場合がございます。

v1.0