





剪刀

開驗器

湖崎氏マイクロサージャリー用持針器

KI-45 止付 全長 105mm / 先端 6mm ¥ 64,800 JAN:4547451041207 KI-46 止無 全長 105mm / 先端 6mm ¥ 60,000 JAN:4547451041214

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 届 13B1X00048001143 入 1

ロングセラーのマイクロ持針器定番モデル。

発売以来多くのユーザーから愛用されるマイクロ持針器の定番モデル。先端は8-0~ 11-0 などの細めの縫合糸、針に適したファインタイプとなっております。また、小振り なフォルムがマイクロサージャリーでの微細なコントロールを可能にします。

持針器

カニュ 一ラ

スパー テル

その他





逆マチ式持針器 Höfner

止付 全長 104mm / 先端 6mm ¥ 62,000 JAN:4547451320012 M-2062

M-2062N 止無 全長 104mm / 先端 6mm ¥ 59,000 JAN:4547451320272

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 届 13B1X00048000577(M-2062) 13B1X00048000668(M-2062N)

結紮時の引っかかりを解消するボックスヒンジ(逆マチ)モデル。

従来型では、一針縫合の結び作成時、持針器先端上の糸の輪から鑷子などで糸の片側を引 き抜く際に、ヒンジ部に糸が絡まり、切れてしまうというリスクがありました。当モデルでは、ヒンジ部をボックスヒンジ(逆マチ)タイプに改良し、糸のひっかかりのリスクの解消に成 功し、スムーズでストレスのない縫合作業を行うことが可能です。

屈折 矯正

白内障

網膜 硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連 用品

サージ カル ナイフ

ディス ポー ザブル

AtoZ





マイクロ持針器 スパイラルビーク 止無

受 M-2078 止無 全長 102mm / 先端 7mm ¥80,000 JAN:4547451320296

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 届 13B1X00048001330 入 1

細い針から太い針まで、オールマイティーなハイエンドモデル。

ヒンジ部にひねりを加えたツイスト構造にすることで、耐久性の強化に成功しました。ファ インな先端は、顕微鏡下での視認性と細い針の把持、操作性に優れております。また、 太めの針を把持した際にも、高強度ヒンジ構造によりしっかりと把持することが可能です。 耐久性があり、マルチに活躍する1本です。



奥目に便利な強湾先端モデル。

バラッケー氏持針器 止付 ストロングカーブ

S-725A 止付 全長 130mm / 先端 7mm ¥ **50,000** JAN:4547451044215

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 届 13B1X00048001145 入 1

患者眼が奥目の場合、通常の曲タイプを使用していると、持針器の角度が保てないことや、 針が垂直に保てないなどのケースが報告されております。当モデルでは、先端が強めの カーブ形状をしており、奥目の場合もスムーズに縫合することが可能です。

D-01 持針器

鑷子

剪刀

開臉器

持針器

カニュ

スパー テル

その他

白内障

屈折 矯正

網膜 硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連 用品

サージ カル ナイフ

ディス ボー ザブル

AtoZ

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 届 13B1X00048001333 入 1



上野式マイクロ持針器 止無

図 IM-2087N 止無 全長 119mm / 先端 7mm ¥72,000 JAN:4547451321583

材 Ti 薬 クラス I JMDN 12726010 届 13B1X00048001242 入 1

微細な操作性を重視した万能持針器。

微細な先端が顕微鏡下における視認性と、 $8-0\sim11-0$ などの細めの縫合糸、針の把持、 操作に優れております。また先端には独自のタングステンカーバイド加工を施しており、 ファインな糸をより優しく滑らずに把持することが可能です。板ハンドルは、不快なく握 れるように部分的にやや丸みを持たせております。



慈大式マイクロサージャリー持針器 ライトカーブ ノングレア

M-73 止付 全長 110mm / 先端 7mm ¥62,000 JAN:4547451042587

M-74 止無 全長 110mm / 先端 7mm ¥60,000 JAN:4547451042631 材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 届 13B1X00048001153 入 1

先端が弱湾曲のマイクロサージャリー用持針器。

先端が通常の曲タイプと比べ、やや弱湾曲のマイクロサージャリー用持針器です。8-0 \sim 11-0 の細い縫合糸、針の把持、操作に優れた微細な先端サイズとなっております。



新潟大学マイクロショート持針器 止無 逆マチ式

M-301R 止無 全長 98mm / 先端 8mm ¥45,000 JAN:4547451320142

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 届 13B1X00048001156 入 1

結紮時の引っかかりを解消するボックスヒンジ(逆マチ)モデル。

結紮の際に、ヒンジ部での糸のひっかかりのリスクを解消したボックスヒンジ(逆マチ) モデル。板ハンドル構造のため、ラウンドハンドルではやや操作しにくいというユーザーに適しております。またショートハンドルにより小回りの利く操作性も特長です。



バラッケー氏持針器 ショートモデル

M-739R 止付 全長 100mm / 先端 8mm ¥ 61,000 JAN:4547451042624 M-738R 止無 全長 102mm / 先端 8mm ¥ 56,000 JAN:4547451042617

操作性のよいバランスのとれた持針器。

小回りの効くやや小振りなハンドルと、ファインな先端は、マイクロサージャリーに適し たバランスのとれた形状となっております。

剪刀

開驗器

スリムなファインチップが特長のマルチな持針器。

先端は9mmとややミドルなサイズでありながら、スリムなファインチップ形状となって いるため、顕微鏡下での視認性や、8-0~11-0 などの細めの縫合糸、針にも適しております。ハンドルもやや長めとなっているため、用途を選ばずマルチにご使用いただけま す。

持針器

カニュ 一ラ

> スパー テル

その他

白内障

屈折 矯正

網膜 硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連 用品

サージ カル ナイフ

ディス ポー ザブル

AtoZ

バラッケー氏持針器 ファインチップモデル 曲

S-727 止付 全長 120mm / 先端 9mm ¥ 52,000 JAN:4547451044222 **\$-728** 止無 全長 120mm / 先端 9mm ¥46,000 JAN:4547451044239

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 届 13B1X00048001148 入 1

知のviev



バラッケー氏角膜持針器

KI-41 止付 全長 130mm / 先端 9mm ¥ 52,000 JAN:4547451041191 KI-42 止無 全長 130mm / 先端 9mm ¥46,000 JAN:4547451321927

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 届 13B1X00048001142 入 1

スタンダードなマイクロサージャリー用持針器。

ロングハンドルでありながら先端は $8-0\sim 11-0$ などの細めの縫合糸、針に適したファイ ンタイプとなっております。ボディ全体に反射防止加工を施しております。





バラッケー氏角膜縫合用持針器

S-725 止付 全長 127mm / 先端 9mm ¥ **52,000** JAN:4547451044208 **S-726** 止無 全長 127mm / 先端 9mm ¥46,000 JAN:4547451321934

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 届 13B1X00048001146(S-725) 入 1 13B1X00048001147(S-726

スタンダードなマイクロサージャリー用持針器。

ロングハンドルでありながら先端は8-0~11-0などの細めの縫合糸、針に適したファイ ンタイプとなっております。KI-41 や KI-42 とは異なり先端のみにノングレア加工(反射 防止)を施しております。









マルチに使用できるミドルサイズ持針器。

バラッケー氏マイクロ持針器 止無

BM-560 止無 全長 116mm / 先端 9mm ¥44,000 JAN:4547451040446

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 届 13B1X00048001140 入 1

先端 9mm、全長 116mmといずれも持針器のサイズとしては中間サイズとなっているた め、用途を選ばずマルチに使用することが可能です。先端はファインでありながらこしが強 く、やわらかな操作性と強さを兼ね備えております。

剪刀

開瞼器

持針器

カニュ

スパー テル

その他

白内障

屈折 矯正

網膜 硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連 用品

サージ カル

ディス ポー ザブル

AtoZ





デリケート型持針器 曲 12mm

MB-030 止付 全長 124mm / 先端 12mm ¥78,000 JAN:4547451045656 MB-029 止無 全長 124mm / 先端 12mm ¥74,000 JAN:4547451045649

材 Ti 薬 クラス I JMDN 12726010 届 13B1X00048001136 入 1

先端タングステンカーバイド加工によるノンスリップ縫合。

先端に独自のタングステンカーバイド加工を施しており、縫合糸を滑らずに把持すること が可能です。またスリムチップのため、顕微鏡下での視認性や 8-0 ~ 11-0 の細い針、 糸の把持、操作性に優れております。チタニウムによる軽量化も特長です。









カストロヴィーホー氏持針器 曲

S-730 止付 全長 140mm / 先端 10mm ¥ 52,000 JAN:4547451044260

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 届 13B1X00048001150 入 1

太めの針、糸の操作に便利な大型持針器。

外眼部手術やバックリングなど、 $4-0\sim7-0$ などの太めの針や糸を使用する際にも便利な 大型持針器のスタンダードモデル。先端のみノングレア加工を施しております。





memo



カストロヴィーホー氏持針器 直

S-729 止付 全長 137mm / 先端 10mm ¥ **50,000** JAN:4547451044246

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 届 13B1X00048001150 入 1

バックリング術などに便利な大型持針器の直モデル。

大きなハンドルと先端は、主に $4-0\sim7-0$ などの太めの針や糸を使用する際にも便利な 構造となっております。先端は特に眼球深部のバックリング術などで使いやすい直タイプ を採用しております。先端のみノングレア加工を施しております。

PICK







後藤式剪刀付持針器

M-1901A 止無 全長 133mm / 先端 3.5mm / 刃 4mm ¥65,000 JAN:4547451334231

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 届 13B1X00048002334 入 1

糸を切る、縫うをこの一本でこなすハイブリット製品。

先端部が把持する部分と糸を切る部分に分かれているため、縫合時に器具を持ち替える必要がなく、この一本で行うことが可能です。先端は汎用性のある $5-0\sim7-0$ に適したサイズとなっており、結膜や眼瞼皮膚の縫合、外眼部手術に最適です。





マイクロ剪刀付持針器 止付 曲

受 M-1900 止付 全長 139mm / 先端 3mm / 刃 2mm ¥ 65,000 JAN:4547451031932

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 届 13B1X00048001494 入 1

剪刀と持針器の機能を兼ね備えるハイブリットアイテム。

縫合操作中、剪刀に持ち替える煩わしさから開放されるよう縫合針把持部の手前が剪刀となっております。

memo

鑷子

剪刀

開臉器

持針器

カニュ 一ラ

スパー テル

その他

白内障

屈折 矯正

網膜 硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連 用品

サージ カル ナイフ

ディス ポー ザブル

洗浄針・点滴針 E-01

鑷子

剪刀

灌流用のバルブ。

灌流用の針を取り付けて使用します。





持針器

開瞼器

ビショップ・ハーモン氏前房洗浄器

¥ 13,000 全長 68mm JAN:4547451043300 S-213SH 材 シリコン 薬 クラス I JMDN 34630000 届 13B1X00048001341 入 1

カニュ

テル

その他

白内障

矯正

網膜

屈折

硝子体

緑内障

外眼部

角膜

関連 用品

サージ

カル ナイフ

ディス ポー ザブル

スパー

デリケートで灌流量に優れた扁平先端タイプ。

ややロングで、デリケートに設計されております。創口より挿入 しやすいよう先端が扁平となっております。







フラット洗浄針 アングル型

\$-205 全長 42.5mm / シャフト 26.5mm / 先端 1.2mm / 径 19G ¥ 9,000 JAN:4547451034124

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 届 13B1X00048001512 入 1

より容易な挿入と3つのポートからの 効率良い灌流が魅力。

先端は、創口より挿入しやすいよう扁平となっております。また、 ポートを3つ設けることにより効率良くストレスのない洗浄、還流 が可能となっております。







佐藤式前房洗浄針

\$-211 全長 46mm / シャフト 30mm / 先端 1.5mm / 径 18G ¥ **11,000** JAN:4547451034179

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 届 13B1X00048001513 入 1

スタンダードな前房洗浄針。

最もスタンダードな前房洗浄針。発売以来根強い人気を誇ります。







前房洗浄針 18G

S-212A 全長 45.5mm / シャフト 30mm / 先端 1.5mm / 径 18G ¥ 11,000 JAN:4547451034186

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 届 13B1X00048001571 入 1

矯正

白内障

AtoZ

ベストセラーで使いやすい注入用力ニューラ。

結膜下や内眼部など、多目的で使いやすい注入用力ニューラ。30Gの 細針による圧力により粘弾性物質滞留中においてもストレスなく注入が 可能です。







30G 針 アングル型 鈍 M-88C 全長 30mm / シャフト 14mm / 径 30G ¥ 6,000 JAN:4547451033035

チン小帯の溶解用カニューラ。

水晶体摘出時など、チン小帯との離断を行う際に使用します。

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 届 13B1X00048001528 入 1







キモトリプシン注入針二段式

\$-216 全長 47mm / シャフト 31mm / 先端 1.85mm / 径 25G ¥ **10,000** JAN:4547451034261

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 届 13B1X00048000087 入 1

Best Selle

ベストセラーの空気置換用カニューラ。

発売以来根強い人気を誇る使いやすい扁平加工の空気置換用カニューラ。







ザウター氏空気注入針 直

M-32ES 全長 40mm / シャフト 24mm / 径 27G ¥6,500 JAN:4547451032267

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 届 13B1X00048000185 入 1

ベストセラーの空気置換用カニューラ。

発売以来根強い人気を誇る使いやすい扁平加工の空気置換用力ニュー ラ。M-32ES の曲タイプです。







ザウター氏空気注入針 曲

M-32EC 全長 38mm / シャフト 22mm / 径 27G ¥7,000 JAN:4547451032250

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 届 13B1X00048000185 入 1

剪刀

スムーズな薬液注入が可能な3ポートタイプ。

先端と側面二ヶ所の計三ヶ所に開口部があるため、テノン嚢下に針を挿入した際、先端開口部が組織にふさがれた場合でも薬液を注入することが可能 です。







持針器

開瞼器

近江氏テノン嚢下注入針 3 ポート 24G

M-1508 全長 37mm / シャフト 21mm / 径 24G ¥ 12,000 JAN:4547451031659

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 届 13B1X00048001537 入 1

カニュ

スパー テル

テノン嚢下への薬液注入に最適化されたカニューラ

薬液を注入する際に注入ポートの一つがふさがってしまった場合に他の ポートを補助的に使用できることなどを目的として、三つ穴式となってい ます。また、先端が鈍先のため、組織をより傷つけにくくなっております。 24G と 25G の二種類からお選びいただけます。







その他

白内障

屈折 矯正

テノン嚢下注入針 3ポート

M-2056-24 全長 42mm / シャフト 26mm / 径 24G ¥ 15,000 JAN:4547451320043 M-2056-25 JAN:4547451320050 全長 42mm / シャフト 26mm / 径 25G ¥ 15,000

材 SUS 薬 クラス I JMDN 30890000 届 13B1X00048000955 入 1

網膜 硝子体

ピンポイントでテノン嚢下へアプローチ。

絶妙に設計されたシャフトの長さ、カーブにより、テノン嚢下のピンポイ ントに素早く、容易にアプローチすることが可能です。また、コストパフォー マンスにも優れております。







角膜

緑内障

深作式ピンポイント注入針

M-838 全長 37.5mm / シャフト 21.5mm / 径 24G ¥ 6,000 JAN:4547451032991

memo

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 届 13B1X00048001491 入 1

外眼部

関連 用品

サージ カル

ディス ポー ザブル

経結膜球後注射用アイテム。

球後注射を、経皮ではなく、経結膜にて行うために開発された製品です。 先端は鈍針で安全に強膜上を押し進めることが可能です。また薬液注入 用ポートは側面のため、挿入時により詰まらないように工夫されており ます。







剪刀

開臉器

持針器

永田氏経結膜球後針 25G

M-1512 全長 42mm / シャフト 26mm / 径 25G ¥ 12,000 JAN:4547451031666

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 届 13B1X00048001506 入 1



カニュ 一ラ

スパー テル

安全設計の鋭針が特徴の球後針。

スタンダードな球後針。先端は血管などを損傷しないよう、鋭針ながら、 やや鈍先に設計されております。





その他

アトキンスン氏球後注射針 直

アトキンスン氏球後注射針 曲

\$-217AC-4 4本入 全長 45mm / シャフト 29mm / 径 23G

材 SUS 薬 クラス I JMDN 30890000 届 13B1X00048001483

S-217AC

\$-217A\$ 12 本入 全長 51.5mm / シャフト 35.5mm / 径 23G ¥ 20,000 JAN:4547451034285

\$-217A\$-4 4本入 全長 51.5mm / シャフト 35.5mm / 径 23G ¥6,700 JAN:4547451334958

材 SUS 薬 クラス I JMDN 30890000 届 13B1X00048001483





白内障

網膜

硝子体

安全設計の鋭針が特徴のベストセラー球後針。

スタンダードな球後針。先端は血管などを損傷しないよう、鋭針ながら、 やや鈍先に設計されております。

12 本入 全長 45mm / シャフト 29mm / 径 23G ¥ 21,000 JAN:4547451034278



¥7,000 JAN:4547451334941



∌© view



緑内障

角膜

外眼部

関連

用品

サージ カル ナイフ

ディス ボー ザブル

小川氏眼球摘出用球後注射針 曲

\$-217C 12 本入 全長 51mm / シャフト 35mm / 径 23G ¥ 21,000 JAN:4547451034308 **\$-217C-4** 4本入 全長 51mm / シャフト 35mm / 径 23G ¥7.000

材 SUS 薬 クラス I JMDN 30890000 届 13B1X00048001482

シャープな鋭針のスタンダード球後針。

スタンダードな球後針。先端は非常にシャープな鋭針となっております。

JAN:4547451334965

E-05 涙管洗浄針

鑷子

剪刀

テーパード構造によりファインで 安定した操作性を実現。

スタンダードな涙管洗浄針。先端は **27G** とファインでありながら、シャ フトの剛性を高めるため、根元に太いパイプを用いることにより耐久性と 剛性を高めております。直と曲の 2 タイプからお選びいただけます。





開驗器

持針器

中村式涙管洗浄用二段針 直

12 本入 全長 50mm / シャフト 37mm / 径 27G ¥20,000 JAN:4547451034353 S-218S-4 4本入 全長 50mm / シャフト 37mm / 径 27G ¥6,700 JAN:4547451335009

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 届 13B1X00048001119

カニュ

スパー テル

テーパード構造によりファインで 安定した操作性を実現。

スタンダードな涙管洗浄針。先端は27Gとファインでありながら、シャ フトの剛性を高めるため、根元に太いパイプを用いることにより耐久性と 剛性を高めております。直と曲の2タイプからお選びいただけます。







その他

白内障

中村式涙管洗浄用二段針 曲

12 本入 全長 49mm / シャフト 33mm / 径 27G ¥ 21,000 JAN:4547451034346 **S-218C-4** 4本入 全長49mm/シャフト33mm/径27G ¥7,000 JAN:4547451334996

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 届 13B1X00048001119

屈折 矯正

網膜 硝子体

緑内障

直・先端ポートタイプのスタンダードな涙管洗浄針。

スタンダードな涙管洗浄針。直と曲の2タイプからお選びいただけます。





角膜

中村式涙管洗浄用一段針 直

\$-218A\$ 12 本入 全長 53mm / シャフト 37mm / 径 23G ¥ 20,000 JAN:4547451034339 **\$-218AS-4** 4本入 全長 53mm / シャフト 37mm / 径 23G ¥6,700 JAN:4547451334989

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 届 13B1X00048001120

外眼部

関連 用品

サージ カル

ナイフ

ディス ポー ザブル

曲・先端ポートタイプのスタンダードな涙管洗浄針

スタンダードな涙管洗浄針。直と曲の2タイプからお選びいただけます。







中村式涙管洗浄用一段針 曲

S-218AC 12 本入 全長 49mm / シャフト 33mm / 径 23G ¥ 21,000 JAN:4547451034322 **\$-218AC-4** 4本入 全長 49mm / シャフト 33mm / 径 23G ¥7,000 JAN:4547451334972

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 届 13B1X00048001120

側面ポートタイプの涙管洗浄針。

先端は、鈍先で挿入のしやすさと鼻側の涙嚢に 対して安全を考慮しております。ポートは側面と なっているため、洗浄水は鼻涙管に向かってしっ







剪刀

開臉器

持針器

カニュ ーラ

スパー テル

その他

白内障

屈折 矯正

網膜 硝子体

角膜

M-2058-34

M-2058-30

緑内障

外眼部

関連 用品

サージ カル ナイフ

ディス

ボー ザブル

AtoZ

かりと放出されます。





涙管洗浄針 45° アングル型 23G

M-88G 全長 38mm / シャフト 22mm / 径 23G ¥ 6,000 JAN:4547451033073

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 届 13B1X00048001492 入 1

涙管洗浄とブジーの一人二役のハイブリットアイテム。

先端は鈍先で、側面ポートタイプとなっており、涙嚢より鼻 涙管へしっかりと洗浄水が放出されます。更にロングの針を立てて鈍先で鼻涙管へ挿入することでブジーと同様の作業 が安全に行うことが可能です。その際、加圧通水しながら の穿破が可能です。





バンガーター氏ブジー型涙管洗浄針

S-215-21 全長 76mm / シャフト 60mm / 径 21G ¥6,000 JAN:4547451034247 S-215-23 全長 76mm / シャフト 60mm / 径 23G ¥6 000 JAN:4547451034254

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 届 13B1X00048001574 入 1



涙道への挿入長を確認できる乳幼児用 目安付きブジー型洗浄針。

ご考案者 五嶋 摩理 先生 (東京女子医科大学東医療センター 眼科)コメント

「針先が鈍で涙道粘膜を傷つけにくく、側面に通水孔があり、加 圧通水しながらの穿破が可能です。先端より 10mm から 15mm の間が無光沢になっており、挿入長の目安になります。 種々の長さを選択できます。従来の乳児用ブジー型洗浄針に 比べ短いため、針先を進めながらの通水が行いやすく、腰が強 いので折れにくく、深く挿入し過ぎる危険性が少なくなります。 また、より細いブジーに比べて仮道をきたしにくい上、涙点拡 張もほとんど必要ありません。生後6ヶ月未満では30mm、生 後6ヶ月以上では34mmがお薦めです。





五嶋式ブジー型涙管洗浄針

M-2058-34 全長 50mm / シャフト 34mm / 径 25G A 10mm / B 5mm / C 19mm ¥11,000 JAN:4547451313151 M-2058-32 全長 48mm / シャフト 32mm / 径 25G A 10mm / B 5mm / C 17mm ¥11,000 JAN:4547451313144 M-2058-30 全長 46mm / シャフト 30mm / 径 25G A 10mm / B 5mm / C 15mm ¥11,000 JAN:4547451313137

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 届 13B1X00048000554 入 1



剪刀



開瞼器

持針器

カニュ 一ラ

スパー テル

その他

白内障

屈折 矯正

網膜 硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連 用品

サージ カル ナイフ

ディス ポー ザブル



剪刀

鑷子

開臉器

持針器

カニュ 一ラ

その他

スパー テル

白内障

屈折 矯正

網膜 硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連 用品

サージ カル ナイフ

ディス ポー ザブル

AtoZ

スパーテル

S-170A 全長 129mm / シャフト 35mm / 先端幅 1.0mm ¥9.500 JAN:4547451033660 S-170B 全長 129mm / シャフト 35mm / 先端幅 1.5mm ¥9,500 IAN:4547451033677 S-170C 全長 129mm / シャフト 35mm / 先端幅 2.0mm ¥9.500 JAN:4547451033684

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32754001 届 13B1X00048000384 入 1

スパーテルのスタンダードモデル。

汎用性のあるスタンダードなスパーテル。シャフトはしなりのある弱湾形状となっ ております。3種類のサイズからお選びいただけます。

水晶体皮質用軟質スパーテル

M-126 全長 100mm / シャフト 30mm / 先端幅 0.5mm ¥ 15 000 JAN:4547451031000

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32754001 届 13B1X00048000255 入 1

水晶体皮質の剥離に便利なスパーテル。

水晶体皮質の剥離が容易に行えるよう、適度なしなりのある操作性、またスパー テルの角度を調節できるよう軟質シャフトとなっております。先端幅も極細なた め、ピンポイントのオペレーションが可能です。ハンドルは、器具の回転操作と 小回りの効く操作性を重視し、ラウンドハンドル、ショートサイズに設計しており ます。

目盛付スパーテル

JAN:4547451033714 **\$-171** 全長 129mm / シャフト 35mm / 先端幅 2.0mm ¥ 15.000

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32754001 届 13B1X00048000385 入 1

目盛が便利なスパーテル。

目盛り付きのため、長さや深さなど、計測しながらの操作が可能です。

ニードルスパーテル アングル型

M-126A 全長 110mm / シャフト 26mm / 先端幅 0.3mm ¥20,000 JAN:4547451031017

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32754001 届 13B1X00048000097 入 1

先端が針先に近い極細幅 (0.3mm) となっており、シャフトは長めのアングル型 となっております。特に、虹彩後癒着剥離などに有効なデザインであるとともに、 ECCE のダブルフック法による核の脱臼時に核分割フック(M-136 等)と併用 しての使用などにも活躍します。

虹彩後癒着剥離や水晶体核の脱臼などに便利。

カリパー・クレンメ・縫合針 G-01

鑷子

剪刀

ベストセラーの定番カリパー。

切開創の幅や、ポートの位置など、マルチに活躍する定番カリパーです。





持針器

開瞼器

カストロヴィーホー氏カリパー 直

\$-200\$ 全長 85mm / 測定範囲 0-20mm / 目盛間隔 1mm

JAN:4547451043270

カニュ

スパー テル

その他

白内障

屈折 矯正

網膜 硝子体

緑内障

角膜

クレンメ S-475L

S-475S

関連

用品

外眼部

サージ カル

ディス ポー ザブル

AtoZ

縫合針(10本入)

S-640A ¥11,000 JAN:4547451035190 No.1 9mm S-640B ¥ 10,800 JAN:4547451035206 No.2 S-640C ¥9,600 JAN:4547451035237

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32763000 届 13B1X00048000014 入 10

全長 47mm

全長 36mm

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35801000 届 13B1X00048001220 入 1

¥8,000

¥8,000

JAN:4547451043935

¥40,000

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35788000 届 13B1X00048001154 入 1

ワンハンドでスムーズに操作が行えるスリムタイプ。

厚さが 1.5mmの超薄型カリバー。ワンハンドでの操作が可能なように、 調節用ハンドルを、目盛部の内側に取り付けました。さらに目盛間隔が 0.5mmとなっているため、より細かい測定が可能です。

スリムタイプカリパー

受 M-2200 全長 87mm / 測定範囲 0-20mm / 目盛間隔 0.5mm

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35788000 届 13B1X00048001331 入 1







円滑な手術をサポートする必需品

点滴の速度と量の調整や、制御糸の固定など、手術のサポートアイテムです。

No.1 No.2 No.3 三角形 三角形 逆三角形

眼科処置に最適な縫合針。

眼球のカーブや、縫合操作など総合的に研究した結果生まれた眼科処置用縫合針となっ ております。3種類のサイズよりお選びいただけます。





鑷子

剪刀

開臉器

持針器

カニュ 一ラ

スパー テル

その他

白内障

屈折 矯正

網膜 硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連 用品

サージ カル ナイフ

ディス ポー ザブル

AtoZ

マイクロサージャリー用替刃パンチ 直

M-40RS 全長 96mm / 先端 9mm ¥48,000 JAN:4547451041962

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32764001 届 13B1X00048001169 入 1

ベストセラーの定番替刃パンチ。(バネありタイプ)

発売以来ベストセラーを誇る替刃パンチの定番商品です。マイクロサージャリーに最適 な刃を意のままにデザインすることが可能です。バネありタイプのため、刃の把持が容 易に行えます。





マイクロサージャリー用替刃パンチ 直

M-41R 全長 119mm / 先端 17mm ¥48,000 JAN:4547451041986

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32764001 届 13B1X00048001169 入 1


大きめの刃のデザインが容易なノンスリップ替刃パンチ。

ラージサイズの先端のため、大きめの刃のデザインに適しております。先端の片側にはセレーションが施してあり、刃を滑らずにしっかりと把持することが可能です。また、ロングハンドルのため、軽い力で刃を割ることも可能になっております。







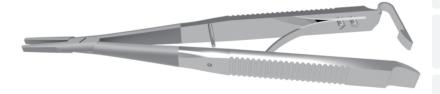

国友氏替刃パンチ

全長 105mm / 先端 11mm

¥40,000 JAN:4547451043676

ワンハンドで固定解除が可能な替刃パンチ。(バネありタイプ) ハンドルの固定解除をワンハンドで行うことが可能なため、操作性に優れております。先 端は小サイズのため、マイクロサージャリーに適したサイズに替刃を割ることが可能です。 バネありタイプのため、刃の把持が容易に行えます。

フェザー眼科用カミソリ 100 枚入

M-150G 全長 10×56mm / 刃厚 0.1mm ¥ 5,000 JAN:4902470066097

材 C 薬 クラス I JMDN 32764002 認 219AABZX00216000 入 100

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32764001 届 13B1X00048000760 入 1

マイクロサージャリーの必須カミソリ。

外眼手術、麦粒腫、内眼反症顔面形成術、白内障手術その他マイクロサージャリーの必 需品です。刃はカーボン製となっております。