



3D view



3D view



S-511C



S-511CB

スプリングハンドル式剪刀 反


S-511C 鋭 全長 105mm / 刃先 8mm ￥46,000 JAN:4547451044055

S-511CB 鈍 全長 105mm / 刃先 8mm ￥46,000 JAN:4547451327059

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048001319 入 1

Quick Service

Best Seller

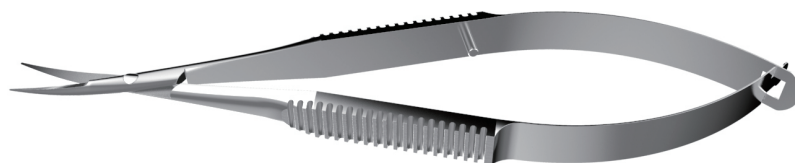

ベストセラーのユーティリティーマイクロ剪刀。

汎用性の高さと使い勝手の良さで圧倒的な人気を誇るマイクロ剪刀の代名詞的商品。組織の切開から、抜糸、ドレープや給水スポンジ、ガーゼなどの消耗品の切開まで、マイクロサージャリーにおいてなくてはならない存在です。鋭と鈍の2種類からお選びいただけます。

鉗子

剪刀

開眼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品


サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ



S-511CSS

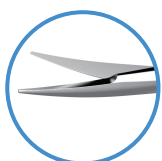

S-511CSB


スプリングハンドル式剪刀 反 ショート

S-511CSS 鋭 全長 102mm / 刃先 7mm ￥47,000 JAN:4547451327066

S-511CSB 鈍 全長 102mm / 刃先 7mm ￥47,000 JAN:4547451327073


材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048001885 入 1

Best Seller

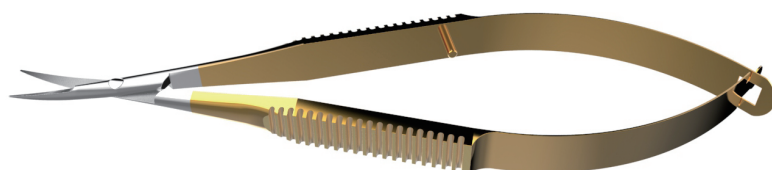


マイクロ手術における最適なバランスにて設計された剪刀。

現在のマイクロ手術において、あらゆる組織の切開をより微細に確実に操作できるよう、刃先のサイズを研究しました。S-511Cの汎用性は保ちつつ、より細かい操作性に特化したマイクロ剪刀です。

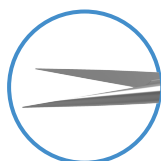

Quick Service

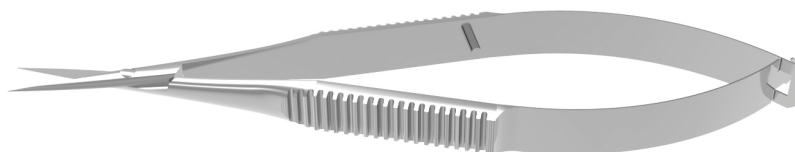

スプリングハンドル式剪刀 直

S-511S 鋭 全長 105mm / 刃先 8mm ￥44,000 JAN:4547451044062


材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048001319 入 1

ベストセラー S-511C の直タイプ。

ベストセラー S-511C の直タイプ。汎用性の高さと使い勝手の良さで人気を誇ります。組織の切開から、抜糸、ドレープや給水スポンジ、ガーゼなどの消耗品の切開まで、マイクロサージャリーにおいてなくてはならない存在です。



Quick Service

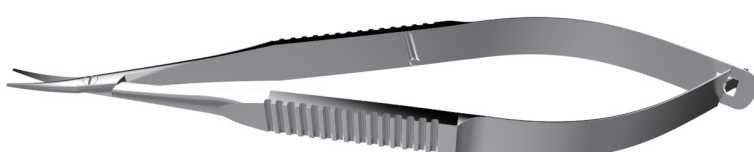

マイクロウエストコット剪刀 反 鈍

M-520 鈍 全長 100mm / 刃先 5mm ￥38,000 JAN:4547451320166

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048001566 入 1

腱切除にも適した肉厚刃先のスタンダード剪刀。

コストパフォーマンスに優れた汎用性の高いスタンダード剪刀。肉厚に設計された刃先が腱切除においても安定した切れ味と操作性を発揮致します。先端は周囲の組織に対して安全な鈍先タイプを採用しております。

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル


AtoZ

Quick
Service

Best
Seller



view

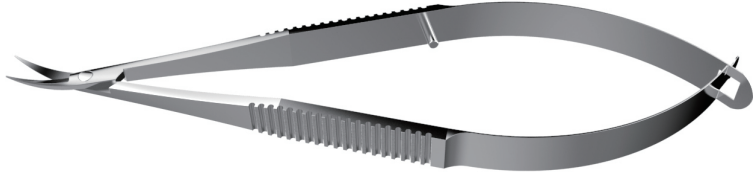


マイクロサージャリー剪刀 反 鋭

M-54RC 鋭 全長 100mm / 刃先 5mm ￥52,000 JAN:4547451042075

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 届 13B1X00048001298 入 1

シャープな強湾曲刃が特長のマイクロ剪刀。

シャープな強湾曲刃が特長のマイクロ剪刀。顕微鏡下における視認性に優れるとともに、より微細なオペレーションを可能にします。

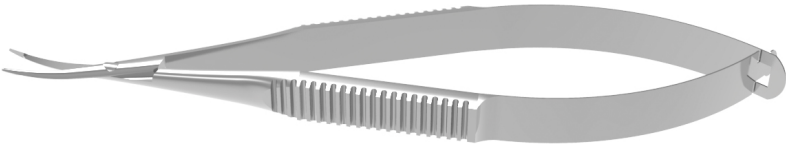


深水式マルチ剪刀

受 **M-2191** 全長 104mm / 刃先 5mm / 把持面 2mm ￥48,000 JAN:4547451325147

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 届 13B1X00048001772 入 1

1人2役で助手要らずの剪刀・鑷子が複合したハイブリット商品。

先端に剪刀と鑷子2つの要素を併せ持つ複合型器具。糸を切る(剪刀)、結紮する(鑷子)などの作業をこの1本でこなせるため、非常に効率的です。助手無しの手術においては特に重宝します。

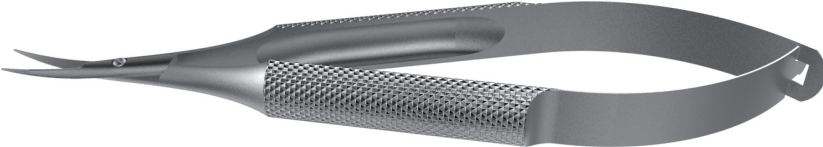

Quick
Service



湖崎氏マイクロサージャリー用二段剪刀

KI-50 鋭 全長 110mm / 刃先 5mm ￥47,000 JAN:4547451036333

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 届 13B1X00048001504 入 1

薄い刃と厚い刃を併せ持つハイブリット商品。

一本で薄い組織と厚い組織の両方を切ることができます。刃の先端は薄くなっており、結膜・虹彩などのデリケートな組織や糸の切断に適しています。刃の根部は切断力が強く、角膜・強膜などを容易に切断することが可能です。

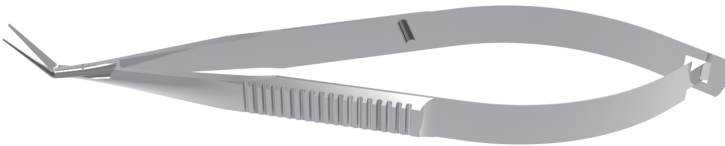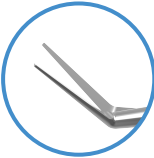

Quick
Service

ウェッケル剪刀 デリケート型

S-613 鈍 全長 96mm / 刃先 7mm ￥48,000 JAN:4547451044192

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 届 13B1X00048001309 入 1

よりファインな虹彩切除が可能な鈍先・アングル剪刀。

脱出した虹彩の切除に便利な剪刀。安全面を考慮し鈍先となっております。ファインな刃先がより繊細なオペレーションを可能とします。

Quick Service

Best Seller

M-50R M-50R

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜


外眼病

関連用品

サージカルナイフ

ディスボーズ

AtoZ

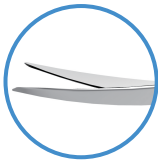

永田氏マイクロサージャリー用デリケート剪刀

M-50R	-	鋭	全長 80mm / 刃先 6mm	¥ 50,000	JAN:4547451037453
受 M-50RF	ファイン	鋭	全長 80mm / 刃先 6mm	¥ 55,000	JAN:4547451313168
材 SUS	薬	クラス I	JMDN 35327001	屈 13B1X00048000133(M-50R) 13B1X00048000569(M-50RF)	入 1



シュレム氏管切開に最適化された通常モデルと小切開創からの内眼部切開に適したスリムヒンジタイプ。

M-50R の刃先とヒンジ部は、線維柱帯切開術（トラベクトミー）におけるシュレム氏管切開時の安全性と操作性を研究しデザインされました。ファインタイプの M-50RF は、小切開創からもよりスムーズな内眼部操作が可能となるように、ヒンジ部を更にスリムにしております。



view

ヴァナス氏水晶嚢切開剪刀 反

S-615C	鋭	全長 79mm / 刃先 3mm	¥ 36,000	JAN:4547451320180
材 SUS	薬	クラス I	JMDN 35327001	屈 13B1X00048001502




小切開創対応の操作性に優れたベストセラーマイクロ剪刀。

前眼部の眼内組織用のマイクロサージャリー剪刀です。微細な部位の切除に使用できます。スリムヒンジ設計のため、小切開創からのアプローチが可能です。水晶嚢切開の他に虹彩、結膜、強膜の切開にもご使用いただけます。またヒンジ部のくびれを切開創に固定することによって、創の拡大を防ぐことが期待できます。



ヴァナス氏水晶嚢切開剪刀 直

S-615S	鋭	全長 86mm / 刃先 7mm	¥ 38,500	JAN:4547451031864
材 SUS	薬	クラス I	JMDN 35327001	屈 13B1X00048000129

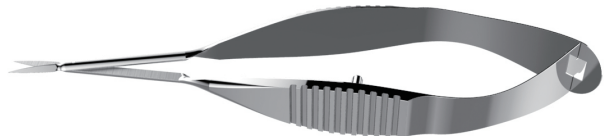

小切開創対応の直型マイクロ剪刀。

ベストセラーの S-615C の直刃タイプ。



西氏エンドカプスラー剪刀 反

受 M-167C	鋭	全長 86mm / 刃先 7mm	¥ 38,500	JAN:4547451031864
材 SUS	薬	クラス I	JMDN 35327001	屈 13B1X00048000129




CCC のきっかけづくりに適した刃先が特長の小切開創対応剪刀。

小切開創対応の内眼部切開に適したスリムヒンジ型マイクロ剪刀です。先端は水晶体嚢切開時のきっかけづくりが容易となるよう、刃先頭部にピック感覚で使用できる反りを加えております。

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスパーザブル
- AtoZ

Quick Service Best Seller

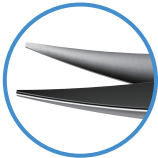

S-510CS



S-510CB



SD view



反剪刀

S-510CS 鋭 全長 110mm / 刃先 21mm ￥9,000 JAN:4547451048770

S-510CB 鈍 全長 110mm / 刃先 21mm ￥9,000 JAN:4547451048763

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048000159 入 1

コストパフォーマンスに優れたシンプルで使いやすい反剪刀。

コストパフォーマンスに優れた板状ヒンジ構造のシンプルな反剪刀。あらゆる用途にお使いいただける汎用性が魅力です。先端が鋭タイプと鈍タイプの 2 種類からお選びいただけます。

Quick Service Best Seller

S-510SS



S-510SS



S-510SB



SD view



直剪刀

S-510SS 鋭 全長 110mm / 刃先 21mm ￥9,000 JAN:4547451048794

S-510SB 鈍 全長 110mm / 刃先 21mm ￥9,000 JAN:4547451048787

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048000160 入 1

コストパフォーマンスに優れたシンプルで使いやすい直剪刀。

コストパフォーマンスに優れた板状ヒンジ構造のシンプルな直剪刀。あらゆる用途にお使いいただける汎用性が魅力です。先端が鋭タイプと鈍タイプの 2 種類からお選びいただけます。

Quick
Service
M-59RC

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユ
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体


緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

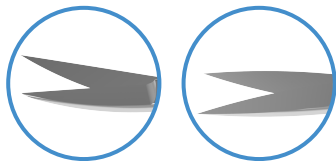


M-59RC

M-59RS

ボン大学式デリケート剪刀


M-59RC 反・鋭 全長 90mm / 刃先 8mm ￥19,000 JAN:4547451042174**M-59RS** 直・鋭 全長 90mm / 刃先 8mm ￥17,600 JAN:4547451042181

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048001304 入 1

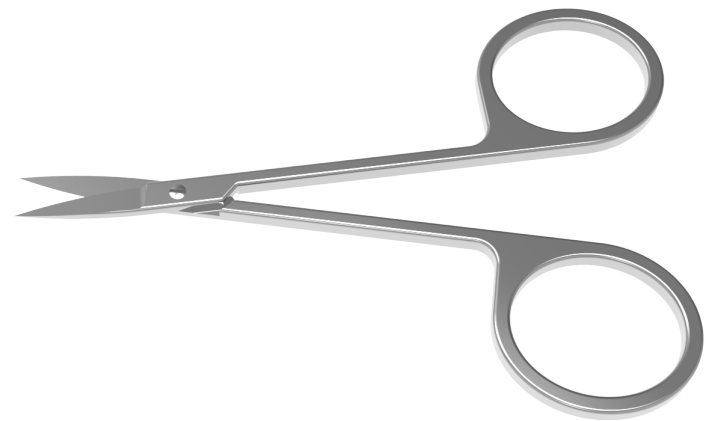

小回りの効くコンパクトサイズのマイクロ剪刀。

マイクロサージャリー用剪刀として全体的に小型化されております。直と反タイプからお選びいただけます。

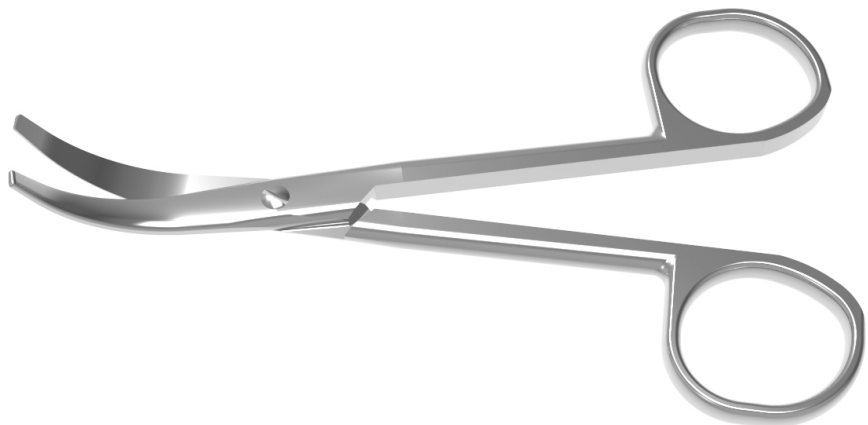


視神経剪刀 ストロングカーブ（強湾曲）

S-515C 鈍 全長 115mm / 刃先 21mm ￥35,000 JAN:4547451044093

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048001270 入 1

眼球のカーブに沿うように設計された刃で視神経切断がスムーズ。

先端のカーブは、眼球のカーブに沿うようにデザインされました。そのため、眼球摘出術の際に、視神経切断がよりスムーズに行うことが可能です。

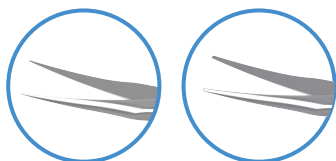


S-520S

S-520B

ウェストコット氏腱切除剪刀 反

S-520S 鋭 全長 110mm / 刃先 10mm ￥53,000 JAN:4547451044116**S-520B** 鈍 全長 110mm / 刃先 10mm ￥53,000 JAN:4547451044109

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35327001 屈 13B1X00048001107 入 1

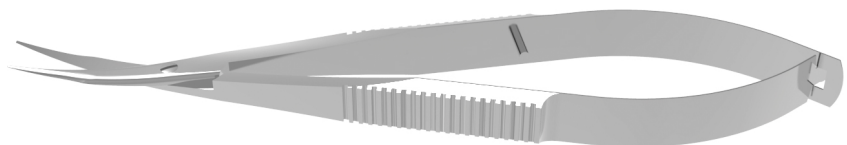

腱切除に最適化された肉厚で切断力のある剪刀。

先端は細くデザインされていますが刃は肉厚なため強い切断力があり、眼筋の切断などに適しています。また刃の峰にあたる部分は丸みを帯びた形状になっています。先端は鋭と鈍の2種類からお選びいただけます。鈍先は眼球と眼筋の間に刃を挿入する際に安全です。