

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ



DIA ICL ローディング鑷子

受 **F24999** 全長 116mm / 把持面 15mm ￥118,000 JAN:4547451336983

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048002463 入 1




DIA ICL バキュームカニユーラ

受 **CW1146** 全長 131mm / 先端 1mmφ (内径 0.42×0.28mm) ￥120,000 JAN:4547451336976

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 34899031 届 13B1X00048002462 入 1



MOVIE

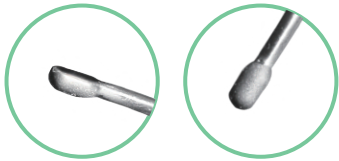

DIA Battle ICL マニピュレーター

受 **M06836** 全長 119mm / 先端 1.2mm(長)×0.7mm(幅)×0.6mm(厚) ￥56,000 JAN:4547451336952

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 届 13B1X00048002460 入 1

memo

J-01硝子体鑷子・剪刀（MIVS）

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜


外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

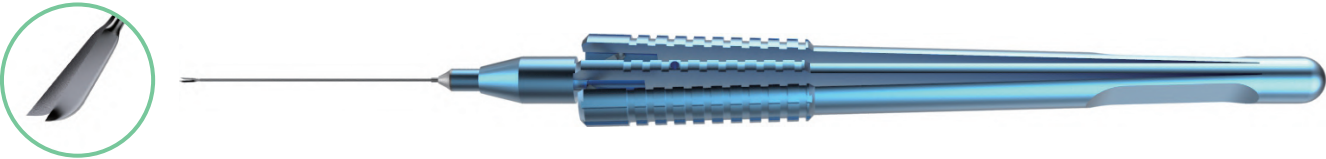

家鴨嘴型鑷子 細み

DS-900 全長 147mm / シャフト 28mm / 径 27G ￥240,000 JAN:4547451332657

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002240 入 1




“つかめる” “やぶれない” を両立した 27G 鑷子。

ご考案者 岡田 和久 先生（大分市 おかだ眼科）コメント

「既存の ILM27G 鑷子はゲージ数が小さい鑷子に比べ把持部の面積が小さくなってしまいうため、しっかり把持できない（すぐに破れてしまう）ことが多く、操作に注意を払う必要がありました。この鑷子は網膜の接触部の面積を大きく、形状をなだらかにすることにより、把持力を増加させ、さらに ILM が破れにくくなっています。また、先端を鋭角にすることで“きっかけ”づくりが可能です。」

専用
シリンジ
付属

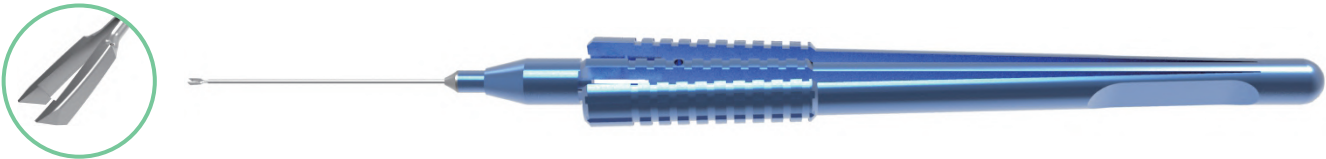

家鴨嘴型 ILM 鑷子

DS-800 全長 151.8mm / シャフト 34.6mm / 径 25G ￥230,000 JAN:4547451329084

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002002 入 1



ILM をしっかりと把持することが可能な家鴨嘴型の ILM 鑷子。

ご考案者 岡田 和久 先生（大分市 おかだ眼科）コメント

「既存の 25G ILM 鑷子は、ILM に接する面積が小さく把持力が弱く、また把持した ILM が破れやすかった。この鑷子は ILM を把持する面を大きくし、丸みをもたすことで破れにくくしています。把持力が増しているのでも網膜を把持すると危険ですので注意を。」

専用
シリンジ
付属 PICK
UP



増殖膜剥離鉗子 25G “メンブレンストリッパー W”

DS-029 全長 151.5mm / シャフト 32.5mm / 径 25G ￥242,000 JAN:4547451329282

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 10861001 屈 13B1X00048002033 入 1



双手法にて安全に効率よく膜処理を行うための眼内鉗子。

ご考案者 高須 逸平 先生（岡山市 北区 高須眼科）コメント

「MIVS を用いて複雑な網膜剥離（PVR）を手術するスペシャリスト向けの眼内鉗子です。双手法を用いる際に、カッターとこの鉗子、もしくは両手にこの鉗子をもって、安全に効率よく膜処理をするために考案しました。」

特徴

- ① 25G reusable forceps：MIVS 対応かつ経済的
- ② チタン製：高剛性で、難症例やハードな使用に耐える
- ③ 大きく平坦なプラットフォーム：柔らかい膜が千切れになりにくい
- ④ 尖った部分がなく、表裏がない head design：剥離網膜に対して安全
- ⑤ 0.2 mm の間隙のある大きなヘッド：剥離網膜を押さえやすい
- ⑥ 2 本使用（bimanual use）により、片方で膜を把持し、他方で網膜を押さえる。開いた間隙から strand を引き出す。
- ⑦ 小児、若年者症例にも適応。


複雑な網膜剥離症例に対する双手法


【鉗子とカッターを用いた硝子体切除】

- ・鉗子で剥離網膜を押さえつつ、カッターで硝子体を切除する。
- ・開いた鉗子の間や、サイドからはみ出してくる硝子体を切除する。
- ・鉗子で剥離網膜を押さえつつ、カッター吸引で PVD を進める。

【鉗子と鉗子を用いた膜処理】

- ・片方の鉗子で剥離網膜を押さえながら、他方の鉗子で近くの膜をはがす。
- ・両方の鉗子ではがしつつある膜を把持し、中から外方向にテンションをかけて、膜を分割剥離する。
- ・両方の鉗子を用いて、交互に引っ張って subretinal strand を抜き出す。」

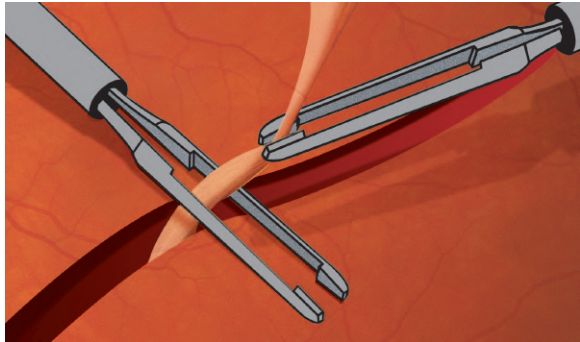

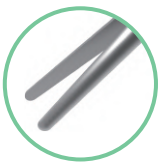

森井式 ILM 鑷子 25G “かおりのノンセレーション”



MV-091 全長 148.5mm / シャフト 31.7mm / 径 25G ￥240,000 JAN:4547451329275

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002016 入 1

専用
シリンジ
付属

PICK
UP

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

初心者でも安全に ILM 剥離が可能なノンセレーション鑷子。

先端部が無鉤・扁平にデザインされた新しいタイプの ILM 鑷子です。

ご考案者 森井 香織 先生（兵庫県 明石市 あさざり病院 眼科）コメント

「他の ILM 鑷子とは異なり、先端を無鉤にしていますが、先端に特殊なサンドブラストコーティングが施されており、ILM のみを簡単に把持することが可能です。鑷子の先端が、把持によっても位置が変わらないため（ひっこまないということ）、目標 ILM の把持を確実にしています。また、シャフト（先端部含む）が 31.7mm と長いいため、長眼軸眼にも対応できます。無鉤であることで他の組織を傷めるリスクも低く、初心者にも安全に ILM 剥離を行うことができる鑷子であると考えます。」



ロストラル ILM 鑷子 25G ロングタイプ



DS-805 全長 156mm / シャフト 37.5mm / 径 25G ￥260,000 JAN:4547451331308

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002146 入 1

PICK
UP

長眼軸にも対応可能な 25G ILM 鑷子。

シャフトを長くデザインしているため、長眼軸の場合においてもより処置がしやすくなっております。また先端にはサンドブラスト加工を施しているため、ILM を滑らずしっかりと把持することが可能です。



ILM 鉗子ファイングリップ 25G



DS-028 全長 151.0mm / シャフト 32.0mm / 径 25G ￥231,000 JAN:4547451320432

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 10861001 屈 13B1X00048000795 入 1

専用
シリンジ
付属

PICK
UP

ファインなピックと視認性が魅力の ILM 鑷子の定番モデル。

エッカードタイプのファインな先端サンドブラスト加工が容易に ILM 剥離のきっかけをつくり、つまむように組織をしっかりと把持することが可能です。動作中の視認性にも優れた定番モデルです。



ILM 鉗子ピックエンド 25G



DS-802 全長 151mm / シャフト 32.5mm / 径 25G ￥230,000 JAN:4547451320432

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 10861001 屈 13B1X00048000796 入 1

専用
シリンジ
付属

PICK
UP

使いやすい ILM 鑷子の定番モデル。

チップの先端を眼球の曲面に合わせることで、より安全で精細な ILM の繊細なきっかけづくり及び把持を実現します。

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜


外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

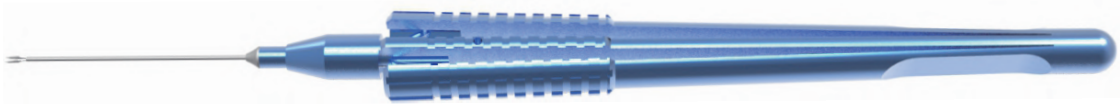

専用
シリンジ
付属



ロストラル ILM 鑷子 23G

DS-001 全長 148mm / シャフト 29mm / 径 23G ￥200,000 JAN:4547451320357

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048000807 入 1

view

使いやすい ILM 鑷子の定番モデル。

チップの先端を眼球の曲面に合わせることで、より安全で繊細な ILM のきっかけづくり及び把持を実現します。また、ブロックパターンのハンドルの採用により、グリップ力が向上しております。



専用
シリンジ
付属



ファイングリップ ILM 鑷子 23G

MV-071 全長 149.5mm / シャフト 32.5mm / 径 23G ￥190,000 JAN:4547451320395

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048000803 入 1

view

ファインなピックと視認性が魅力の ILM 鑷子の定番モデル。

エッカードタイプのファインな先端サンドブラスト加工が容易に I L M 剥離のきっかけをつくり、つまむように組織をしっかりと把持することが可能です。動作中の視認性にも優れた定番モデルです。

memo

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜


外眼器

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

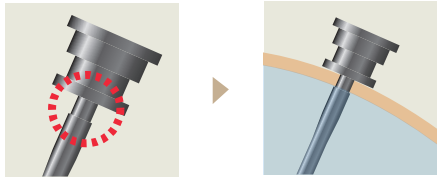

抜け防止加工（適度な窪み）

トロカールカニユーラ 27G

受	TR-078	全長 5.9mm / 径 27G	¥ 27,500	JAN:4547451327868
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 12989001 届 13B1X00048001928 入 1

トロカールカニユーラ 27G 用インサーター

受	TR-078-ISB	2ステップ用 全長 45mm	¥ 15,400	JAN:4547451327851
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 12989001 届 13B1X00048001928 入 1



TR-078



◀4mm▶

TR-078-ISB



専用インサーター（2ステップ用）

27G 極小切開硝子体手術に対応するトロカールカニユーラ。

27G 硝子体手術の際に、器具の出し入れ用のガイドとしてポートに留置して使用します。左図のように装着時の抜け防止加工を施しているため、安定した操作を行うことが可能です。



堀尾・田中式テーパーードトロカール 23/25G

TR-077N	全長 5.8mm / 径 23/25G	¥ 27,000	JAN:4547451323303					
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 12989001	届	13B1X00048001480	入	1

堀尾・田中式テーパーードトロカール用インサーター

TR-077N-ISB					23/25G 用	全長 45mm	¥ 15,400	JAN:4547451323310
材	SUS	薬	クラス I	JMDN	12989001	届	13B1X00048001648	入 1

TR-077N



◀4mm▶

TR-077N-ISB




専用インサーター（2ステップ用）

クロージャールブの装着が可能な 25G トロカール。

当社 TR-077 テーパーードトロカールのニードル部分を 4mm とし、先端部をより挿入抵抗の少ない形状にモディファイさせ、6 本のラインを設ける事により抜け防止に有効な形状となりました。

ご考案者 堀尾 直市 先生（岐阜市 岐阜ほりお眼科）コメント

「クロージャールブの装着により術中の眼圧が安定し、挿入部の形状はすり鉢状なので、器具の挿入が容易です。カニユーラ根部の滑り止めを加え、強膜創口を变形することなく、トロカールが抜ける危険性が少くなりました。カニユーラの長さは 4mm で、成人の硝子体手術にも使用できます。」

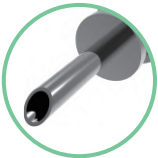

東京女子医科大学式 テーパーードトロカール 23/25G

受	TR-077	全長 4.8mm / 径 23/25G	¥ 22,000	JAN:4547451321156
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 12989001 届 13B1X00048001361 入 1



◀3mm▶

1 ポート硝子体手術が可能な 25G トロカール。

当社 TR-006 クロージャールブ（別売）の装着が可能であり、25G 硝子体手術器具のクロージャールブを通しての眼内への挿入が可能となります。また、インフュージョンニードルのチューブに、本器具を装着することにより、瞼裂の狭い新生児などの one-port 硝子体手術が可能となります。

ご考案者 田中 住美 先生（名古屋市 中村区 アイケア名古屋）コメント

「23G Closure Valve が装着可能な 25G 硝子体手術用の TrocarCannula です。通常の 25G Trocar Cannula と異なり、器具の挿入部分が撚鉢状の形状をしていますので、Closure Valve を通しても容易に 25G 硝子体手術器具を挿入する事ができます。Closure Valve の装着により、器具の抜去時の眼圧の変動を抑制することが可能です。」



トロカールカニユーラ

TR-007	全長 6mm / 径 23G	¥ 17,600	JAN:4547451320548					
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 12989001	届	13B1X00048001365	入	1



◀4mm▶

23G 小切開硝子体手術用トロカール。

23G 硝子体手術の際に、器具の出し入れ用のガイドとしてポートに留置して使用します。筒の部分に抜け防止の加工を施しております。

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスプレイ
- AtoZ

クロージャールバルブ

TR-006	全長 3.4mm	¥ 3,600	JAN:4547451320531
材	シリコン	薬	クラス I
	JMDN	12989001	届
	13B1X00048001365	入	1

トロカールカニューラに被せて使用する必需品。

小切開硝子体手術の際に、トロカールカニューラに被せて使用する必需品です。眼内液の漏れを防ぐための弁の役割を果たします。シリコン製のため器具の出し入れが容易に行えます。

プラントインサーター

TR-004	2 ステップ用	全長 45mm	¥ 15,400	JAN:4547451320500
材	SUS	薬	クラス I	JMDN
	12989001	届	13B1X00048001365	入
				1

2 ステップアプローチのインサーター。

23G トロカールをポートに装着する際に、ガイドとして使用いたします。

インサートインフュージョンカニューラ 23G

TR-010	先端 6mm / チューブ 300mm	¥ 14,300	JAN:4547451320883
材	SUS、シリコン	薬	クラス I
	JMDN	12989001	届
	13B1X00048001365	入	1

トロカール用インフュージョンカニューラ。

インサートタイプのインフュージョンカニューラ。ポートの差し替えが容易に行えます。

インサートインフュージョンカニューラ 25G

TR-071	先端 6mm / チューブ 300mm	¥ 15,000	JAN:4547451329091
材	SUS、シリコン	薬	クラス I
	JMDN	34899021	届
	13B1X00048001999	入	1

インフュージョンカニューラ専用チューブ。

TR-008 インフュージョンカニューラと接続して使用します。

インフュージョンライン

TR-005	全長 29.5mm	¥ 2,400	JAN:4547451320517
材	シリコン	薬	クラス I
	JMDN	12989001	届
	13B1X00048001364	入	1

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連用品

サージカルナイフ

ディスボザブル

AtoZ



インフュージョンカニユーラ

TR-008	23G 用	全長 7mm	¥ 15,400	JAN:4547451320555
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 12989001 屈 13B1X00048001364 入 1

23G トロカール用インフュージョンカニユーラ。
TR-005 インフュージョンラインと接続して使用します。




堀尾式半月型プレッシャープレート

TR-073	全長 83.5mm	¥69,120	JAN:4547451329114						
材	SUS	薬	クラス I	JMDN	13381001	屈	13B1X00048002001	入	1

あらゆる課題を解決する半月型プレッシャープレート。

ご考案者 堀尾 直市 先生（岐阜市 岐阜ほりお眼科）コメント

「形状を半月型にすることによって、瞼裂が小さい人にも容易に使用できます。眼球保持も良好で、結膜と強膜の圧迫がしっかりと行なえるため、2ステップ法でも創口を見失うことなくトロカールの挿入が行なえます。3.5mmの半円状なので、輪部からの距離が容易に測定できます。また、プレートの先端部分で刺入すれば、輪部から4mmになります。」

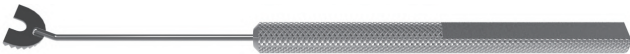

プレッシャープレート ダブルサーキュラーセレーション付

TR-003N	全長 83.5mm	¥ 69,000	JAN:4547451320524						
材	SUS	薬	クラス I	JMDN	12989001	屈	13B1X00048001365	入	1

結膜隆起を防いで的確な挿入をサポート。


ダブルサーキュラーセレーションの内刃が内径部の結膜隆起を防ぎ、的確な挿入を可能にします。



トロカール関連商品収納滅菌ケース。
トロカール関連商品を収納することが可能な滅菌ケースです。

滅菌ケース

TR-009	サイズ 166×72mm	¥ 22,000	JAN:4547451320562
薬	クラス I	JMDN 12989001 屈 13B1X00048001365 入 1	

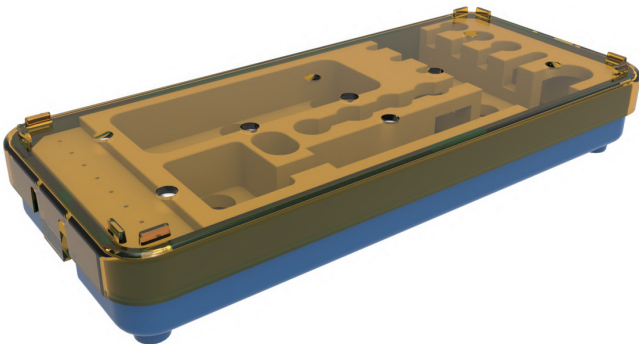

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニユーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスパーザブル
- AtoZ




トロカールを自在にしっかり保持できる優れもの。

ご考案者 堀尾 直市 先生（岐阜市 岐阜ほりお眼科）コメント

「先端の鉤が4つあるため、トロカールの側面からカラー部分を挟み込むようにしっかりと保持できます。また、クロージャールプの上からでも、カニユーラの円形部分を上下から挟み込むことができます。しっかりとした保持力により、抜去したトロカールが滑ったり、飛んだりすることがありません。また、鉤の先端が通常より大きいので、創口が閉じにくいときは、先端で抑えて閉鎖を計ることが可能です。」

堀尾式トロカール鑷子

受	TR-072	全長 110mm	¥ 41,800	JAN:4547451329107
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 16209001
届	13B1X00048002000	入	1	

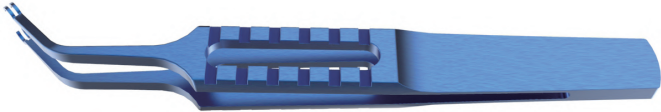

トロカールカニユーラをぴったり把持する専用鑷子。

先端の湾曲はトロカールカニユーラをぴったり把持することが可能です。スムーズなオペレーションをサポートします。

トロカールカニユーラ用フォーセプス

受	TR-002	全長 87.5mm	¥ 46,200	JAN:4547451320494
材	Ti	薬	クラス I	JMDN 12989001
届	13B1X00048001365	入	1	

memo

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ュ
ー
ラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜


外眼
部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

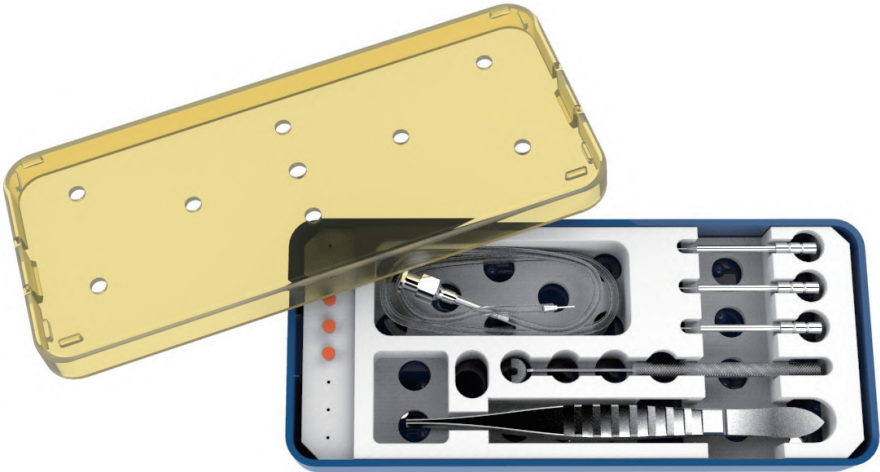


25G トロカールセット

セットコード	セット価格	セット内容	入数
TR-070	¥ 210,000	TR-072 堀尾式トロカール鉗子	1
		TR-073 堀尾式半月型プレッシャープレート	1
		TR-077N 堀尾・田中式テーパーードトロカール 23/25G	3
		TR-077N-ISB 堀尾・田中式テーパーードトロカール用インサーター	3
		TR-006 クロージャーバルブ	3
		TR-071 インサートインフュージョンカニユーラ 25G (ライン付)	1
		TR-009 滅菌ケース	1

薬 クラス I 入 1

術中のポートの差し替えが可能な
25G トローカルセット。

25G 小切開硝子体手術時に器具の出し入れを行うためのガイド
セットです。インフュージョンカニユーラがインサート用であるため、
カニユーラのポートの差し替えが容易に行えます。

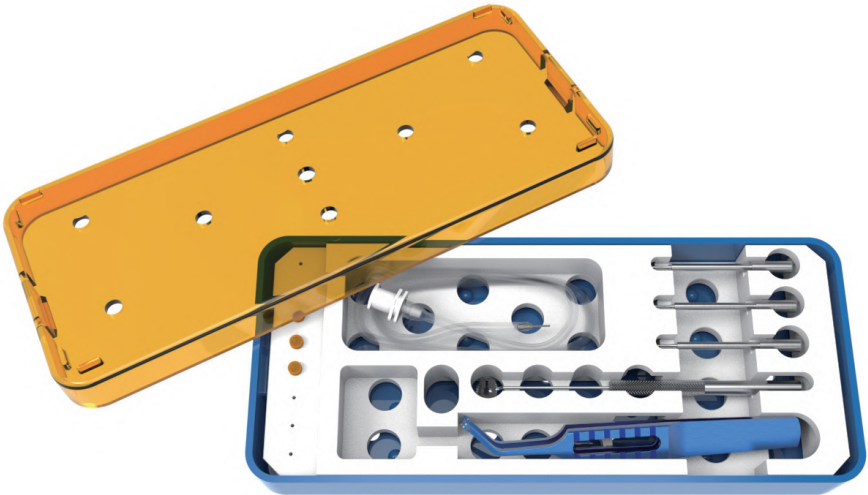

23G トロカールセット 2


セットコード	セット価格	セット内容	入数
TR-001N	¥ 189,000	TR-002 トロカールカニユーラ用フォーセップス	1
		TR-003N プレッシュャープレート ダブルサーキュラーセレーション付	1
		TR-004 ブラントインサーター	3
		TR-006 クロージャーバルブ	3
		TR-007 トロカールカニユーラ	3
		TR-010 インサートインフュージョンカニユーラ 23G (ライン付)	1
		TR-009 滅菌ケース	1

薬 クラス I JMDN 12989001 届 13B1X00048001365 入 1 JAN:4547451321460

術中のポートの差し替えが可能な
23G トローカルセット。

23G 小切開硝子体手術時に器具の出し入れを行うためのガイド
セットです。インフュージョンカニユーラがインサート用であるため、
カニユーラのポートの差し替えが容易に行えます。

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスプレイ
- AtoZ

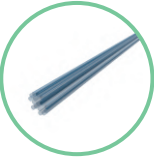

単Best Seller

RB-40-2

岡田氏網膜ブラシ ビットスウィーパー

25G	受	RB-700H-25N	専用ハンドル	108mm	¥ 82,000	JAN:4547451321606
		RB-40-2	替ブラシ	15mm / 全長 95mm	¥ 12,100	JAN:4946585278761
23G	受	RB-700H-23N	専用ハンドル	108mm	¥ 86,400	JAN:4547451321170
		RB-40-2	替ブラシ	15mm / 全長 95mm	¥ 12,100	JAN:4946585278761

材

SUS

薬

クラス I

JMDN

34880000

屈

13B1X00048001229(RB-700H-25N)
13B1X00048001229(RB-700H-23N)
12B1X00005000012(RB-40-2)

入

1

より安全に硝子体皮質を除去できるイノベーションアイテム。

硝子体手術において、カッターで硝子体切除後、可視化した残存硝子体を掃くように除去することができます。レバー部の操作により、ブラシの長さを無段階に調節することが可能です。このため、ブラシのコシの強さを自在に変えることができ、網膜に対する影響を最小限に抑えられます。トロカール挿入時は、ブラシをシャフトに収納することで、ブラシのけばだちの防止、そしてストレスのない挿入操作を行うことが可能です。



竹内式メンブレインピック

M-579-25	25G	全長 117mm	¥ 36,300	JAN:4547451321200
----------	-----	----------	----------	-------------------

受M-579-2323G全長 117mm¥ 38,000JAN:4547451321194

材

SUS

薬

クラス I

JMDN

32754001

屈

13B1X00048001227

入

1

きっかりづくりに有用な硝子体ピック。

内境界膜剥離、網膜下増殖の手術に有用なピックです。小切開硝子体手術におけるトロカール対応の 23G、25G 用をラインナップしております。

memo

R3

PICK
UP

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ュ
ー
ラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体


緑内障

角膜

外眼病

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

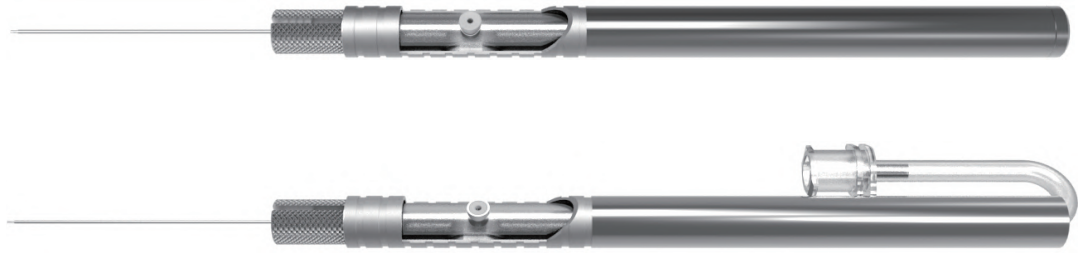

エクストルージョンタイプ

バリエーション豊かなバックフラッシュハンドピース。

眼内液や血液の確実な受動または能動吸引が可能です。また、先端のシリコンチップが、網膜を安全に擦過し、残存硝子体皮質を効率的に除去します。その他には後部硝子体剥離のきっかけづくりにも活用できます。3回までのリユースが可能なコストパフォーマンスに優れている点も魅力です。

バックフラッシュハンドピース ハンドル付きセット

M-562A-27B	27G	全長 145mm / 先端 1mm	¥ 50,000	JAN:4547451327899
M-562A-25B	25G	全長 141mm / 先端 1mm	¥ 48,000	JAN:4547451321798
M-562A-23B	23G	全長 141mm / 先端 1mm	¥ 48,000	JAN:4547451321781
材 SUS 薬 クラス I JMDN 38749000 届 13B1X00048001448 入 1				

バックフラッシュハンドピース ハンドル付きセット
エクストルージョンタイプ

M-562C-27B	27G	全長 145mm / 先端 1mm	¥ 52,000	JAN:4547451327882
M-562C-25B	25G	全長 141mm / 先端 1mm	¥ 50,000	JAN:4547451321811
M-562C-23B	23G	全長 141mm / 先端 1mm	¥ 50,000	JAN:4547451321804
材 SUS 薬 クラス I JMDN 38749000 届 13B1X00048001448 入 1				



M-562AH



M-562CH

【交換用バックフラッシュハンドピース 本体】

M-562AH	全長 105mm	¥ 33,000	JAN:4547451032458
材 SUS 薬 クラス I JMDN 38749000 届 13B1X00048001448 入 1			

【交換用バックフラッシュハンドピース エクストルージョン本体】

M-562CH	全長 105mm	¥ 33,000	JAN:4547451032489
材 SUS 薬 クラス I JMDN 38749000 届 13B1X00048001448 入 1			

【交換用ニードル】

R3



【交換用シリコンパーツ】



M-562B

M-562D

ブラッシュニードル 3 本入（交換用）

M-562E-27B	27G	全長 49mm / 先端 1mm	¥ 33,000	JAN:4547451327875
M-562E-25B	25G	全長 49mm / 先端 1mm	¥ 29,700	JAN:4547451321835
M-562E-23B	23G	全長 49mm / 先端 1mm	¥ 29,700	JAN:4547451321828
材 SUS、シリコン 薬 クラス I JMDN 38749000 届 13B1X00048001448 入 3				

シリコンパーツ 5 ケ入（交換用）

M-562B	-	全長 35mm	¥ 8,160	JAN:4547451032465
M-562D	エクストルージョン用	全長 150mm	¥ 11,000	JAN:4547451032496
材 シリコン 薬 クラス I JMDN 38749000 届 13B1X00048001448 入 5				

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

R3

PICK
UP




硝子体手術の広角観察システムに対応するバックフラッシュ。

網膜・硝子体手術における広角眼底観察装置のアダプター部分への接触を防ぐことなどを目的に、ハンドルと先端部の接続部が、ペンシル形（円錐状）に設計されました。また、強度近視眼に対する操作を行ないやすくなることなどを目的に、先端部のブラッシュユニットは従来タイプより長くなっております。ペンシル形（円錐状）の接続部は、従来タイプの接続部（円柱状）に比べ、より先端部へ向けて長くなっております。ペンシル形接続部の先端から吸引・バックフラッシュ用ポートへの距離を従来タイプと同一にするために、シリコンパーツ（M-550D）の先端側（装着部）をカットすることにより、吸引・バックフラッシュ用ポートの位置を、従来品より先端部へ近付けました。

喜多式バックフラッシュハンドピース
エクストルージョン ハンドル付きセット

M-550A-25B	25G	全長 151mm / 先端 0.8mm	¥ 50,000	JAN:4547451325802
M-550A-23B	23G	全長 151mm / 先端 0.8mm	¥ 50,000	JAN:4547451325291
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 38749000 屈 13B1X00048001776 入 1

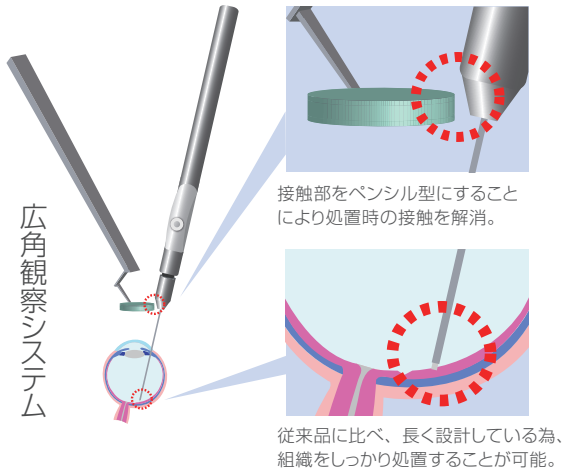

【交換用 喜多式バックフラッシュハンドピース 本体】

M-550AH	全長 109mm	¥ 35,200	JAN:4547451325833
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 38749000	屈 13B1X00048001776 入 1

【交換用ニードル】

R3

【交換用シリコンパーツ】




喜多式ブラッシュニードル 3 本入（交換用）

M-550E-25B	25G	全長 53mm / 先端 0.8mm	¥ 33,000	JAN:4547451325819
M-550E-23B	23G	全長 53mm / 先端 0.8mm	¥ 33,000	JAN:4547451325307
材	SUS、シリコン	薬	クラス I	JMDN 38749000 屈 13B1X00048001776 入 3

シリコンパーツ 5 ケ入（交換用）

M-550D	エクストルージョンタイプ	全長 146mm	¥ 11,000	JAN:4547451325314
材	シリコン	薬	クラス I	JMDN 38749000 屈 13B1X00048001776 入 5

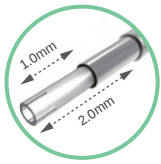

R3

PICK UP

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

眼内挿入時



操作時



スライド式バックフラッシュニードルエクストルージョン


M-555 25G 全長 132mm / 先端 1mm ￥52,000 JAN:4547451327202

材 SUS 薬 クラス I JMDN 38749000 屈 13B1X00048001889 入 1

先端が IN/OUT 可能なバックフラッシュ。

先端のシリコンブラシを挿入時にパイプ内に収納できるため、安全、そしてスムーズに操作することが可能です。

眼内液や血液の確実な受動または能動吸引が可能です。また、先端のシリコンチップが、網膜を安全に擦過し、残存硝子体皮質を効率的に除去します。その他には後部硝子体剥離のきっかけづくりにも活用できます。3 回までのリユースが可能なコストパフォーマンスに優れている点も魅力です。

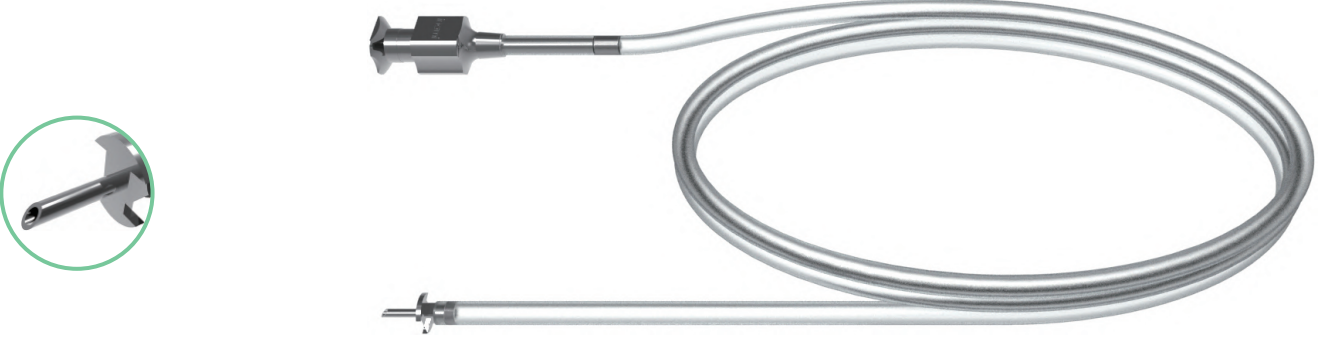

インフュージョンニードル

M-571 20G 先端 4mm ￥12,100 JAN:4547451037514

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899021 屈 13B1X00048001245 入 1

【交換用 インフュージョンニードル用シリコンチューブ】

M-570-3 全長 30cm 内 1.4mm × 外 2.5mm ￥720 JAN:4547451323884

材 シリコン 薬 クラス I JMDN 34899021 屈 13B1X00048001245 入 1

スタンダードな灌流用ニードル。

強膜ポートに達着固定して使用する灌流用ニードル。



R3

ソフトテーパードニードル (6 本入)

M-563S 20G 全長 53mm / シャフト 35mm ￥25,000 JAN:4547451032533

材 SUS、シリコン 薬 クラス I JMDN 34899031 屈 13B1X00048001177 入 6

組織に対する安全面を考慮したシリコンチップ。

網膜下液の吸引などに使用します。先端がシリコンチップになっているため、網膜に対して安全に操作することが可能です。

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜


外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

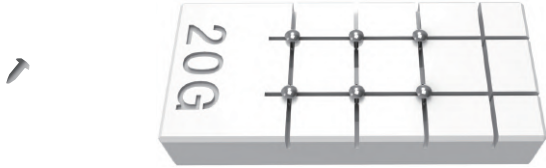

チタニウム製強膜プラグ（6 ヶ入）

M-575A 20G 全長 3.55mm ￥25,000 JAN:4547451313793
材 Ti 薬 クラス I JMDN 70945000 屈 13B1X00048000370 入 6

強膜ポートの一時的遮蔽に使用する必需品。
使用していない強膜ポートを一時的に遮蔽するために使用する強膜プラグ。



Best
Seller

プラグフォーセップス

M-560 全長 110mm ￥40,000 JAN:4547451042099
材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000427 入 1

強膜プラグを確実に把持する専用鑷子。
器具の挿入口を一時的に遮蔽するプラグの着脱に便利な鑷子です。プラグを確実につかむために鑷子の先端にはプラグの頭部に合致する凹面がつけられています。

memo

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜


外眼病

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ボ
ーザ
ブル

AtoZ

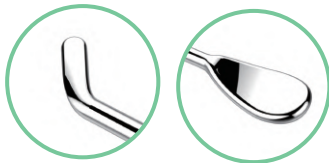

ワイドビューイングシステムに干渉せず、あらゆる場面で使い分けられる両頭圧迫器。



米田式眼球圧迫器

M-141Y 全長 122mm / 先端 3×8.2mm / 6×10.5mm / ￥32,000 JAN:4547451336327
材 SUS 薬 クラスⅠ JMDN 33804000 屈 13B1X00048002438 入 1

ご考案者 米田 一仁 先生（郡会アイセンター / さくら眼科グループ）コメント
「曲がりの方は、斜視鉤やプラグ鉗子のように圧迫器の持ち手の回旋による圧迫が可能のため、ワイドビューイングシステムと干渉せず圧迫が可能です。また、表面を可能な限りスムーズにしたため、結膜上を滑るように移動出来、一度の圧迫で広い範囲をインデント可能です。面になっている方は、一ヶ所の圧迫で広い範囲を視認したい場合に有効であり、裂孔の光凝固や汎網膜光凝固を眼内レーザーで行う時に有効です。」



小切開硝子体手術対応の課題解決型 360° ローラー圧迫器。

ご考案者 服部 隆幸 先生（駿河台日本大学病院 眼科）コメント
「硝子体手術は 25G・23G システムの導入で、より一層の低侵襲化が進んでいます。しかしながら、実際の手技は 20G システムと何ら変わることがなく、特に眼球圧迫下での周辺硝子体切除は、wide viewing システムの有無にかかわらず重要な手技です。眼球圧迫に用いる圧迫器具に共通する欠点として、『ビットとよばれる医源性結膜裂傷を生じる』『術野を移動する際に、スムーズに移動できない』などが挙げられます。このような問題点を解決するために、先端部に 360 度回転可能な滑車を取り付け、その滑車部分を結膜や強膜上で転がしながら、眼球の圧迫を行うことが可能な器具を開発しました。特に 25G・23G システムでの硝子体手術においては、結膜を切開せず、直接結膜上から眼球の圧迫を行うため、ローラー効果により、結膜へのビットを回避する点において大変有用です。また、圧迫したまま術野の移動が可能であり、周辺硝子体の処理時間の短縮に貢献するだけでなく、移動時の眼圧変動を最小限にすることが可能になることから、硝子体の創口への陥頓に起因する合併症を防止することに繋がります。」

服部式滑車型眼球圧迫器 極小

M-2061SS 全長 109mm / 滑車 2mmφ / 6.5mm ￥50,000 JAN:4547451321217
材 SUS 薬 クラスⅠ JMDN 33804000 屈 13B1X00048000555 入 1



状況に応じて使い分けられる万能圧迫器。

ご考案者 上村 昭典 先生（鹿児島市立病院 眼科）コメント
「強膜圧迫によく使われている斜視鉤と強膜プラグ鉗子の中間の形を採用し、柄の部分と先端部に 120 度の角度をつけた単純な構造です。先端部は均一の丸みを帯びた棒状としました。結膜上あるいは部分的結膜切開創から結膜下に潜り込ませて使用することで、結膜全周切開することなくほぼ 360 度の眼底周辺部、赤道部の圧迫・観察が可能です。また先端部を子午線方向に向けると後極部に近い部分まで圧迫できます。先端は小型なため、小さい眼球、瞼裂のせまい例、あるいは小切開硝子体手術用として使用できます。小切開硝子体手術では結膜上からの使用が基本ですが、必要に応じて小さな結膜切開創から結膜下に潜り込ませ、下方や鼻側道部の圧迫が可能です。先端部が丸みを帯びた形状のため結膜下での移動も容易で、眼球周辺部赤道部を連続的に圧迫できます。」

上村式眼球圧迫器 小

M-2067S 全長 101mm / 径 1.5mmφ ￥35,000 JAN:4547451320265
材 SUS 薬 クラスⅠ JMDN 33804000 屈 13B1X00048000706 入 1

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスプレイ
- AtoZ



小切開硝子体手術におけるスムーズな圧迫を実現。


三角状の圧迫子を両端に取り付け、片方は直型のため、真直ぐに圧迫が可能であり、反対側には 20 度の傾斜の付いた同サイズの圧迫子を取り付け、圧迫部位により両頭を使い分けることにより、小切開硝子体手術におけるスムーズな圧迫を行うことを目的に開発されました。

ご考案者 柴 宏治 先生（大阪市 旭区 柴眼科医院）コメント

「小切開硝子体手術（MIVS）を行う際、従来の 20G による硝子体手術と同じ手術操作を行う上で、もっとも術者が手術操作を行い辛く感じる操作のひとつに強膜圧迫操作があると思います。
強膜圧迫は圧迫子が結膜上から強膜を圧迫する際に、結膜と圧迫子の接触面積が大きければ大きいほど圧迫を行い辛く感じるものと思われます。
そこで、新しく開発した MIVS 用強膜圧迫子は、結膜をできるだけ巻き込まずに、また、強度を持たせ、視認性をよくするためにワイヤーループの形状を採用しました。
20 度の角度がついた側の形状は、上方または下方を圧迫する際に圧迫しやすいように設計されています。
三角の底辺または頂点部分を結膜円蓋部に滑り込ませることにより、結膜嚢の小さい圧迫困難症例に対してもスムーズな圧迫操作が可能です。」

柴式 MIVS 用強膜圧迫子

受	M-2081	全長 128mm / 先端 0.5mmφ / 5mm	¥ 35,000	JAN:4547451321163
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 33804000 屈 13B1X00048001077 入 1

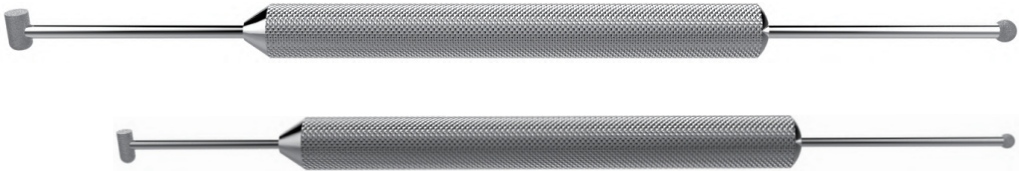

大島式眼球圧迫器

M-141L	大	全長 135mm 円柱 5.5mm 球 3mm	¥ 28,000	JAN:4547451320104
M-141P	未熟児用	全長 120mm 円柱 4.5mm 球 2mm	¥ 25,000	JAN:4547451320098
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 33804000 屈 13B1X00048001559 入 1

両頭、滑りどめ加工の眼球圧迫器。

先端に滑りどめの加工が施してある両頭の眼球圧迫器。面による圧迫と点による圧迫を、用途、状況により使い分けることが可能です。2 種類のサイズよりお選びいただけます。

Best Seller




田野氏眼球圧迫器

M-141T	全長 105mm 左側 12.4mm×4mm 右側 3mm×7mm			¥ 28,000	JAN:4547451320111	
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 33804000	屈 13B1X00048000356	入 1

綿棒の形状が使いやすいベストセラーの眼球圧迫器。

ベストセラーの両頭眼球圧迫器。片側は綿棒形状、滑り止め加工で操作性に優れております。面による圧迫と点による圧迫を、用途、状況により使い分けることが可能です。

memo

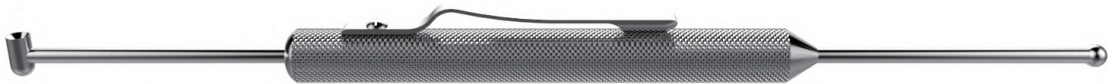

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

安藤氏眼球圧迫器

M-141	全長 147mm 円柱 5.5mm 球 3mm	¥ 30,000	JAN:4547451320197
-------	-------------------------	----------	-------------------

材 SUS 薬 クラス I JMDN 33804000 屈 13B1X00048001318 入 1

ロングサイズの両頭圧迫器。

クラシックでロングサイズの眼球圧迫器。面による圧迫と点による圧迫を、用途、状況により使い分けることが可能です。



五十嵐氏未熟児鉤

M-1135	大 全長 78mm / 先端 7×7.5mm	¥ 20,000	JAN:4547451030867
M-1136	小 全長 78mm / 先端 5×5.5mm	¥ 20,000	JAN:4547451030874

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048001484 入 1

安全でスムーズな操作が可能なショートタイプ未熟児鉤。

未熟児の眼底検査を行う際、未熟児の眼球を操作し、固定するために使用します。鉤を押し込んだ方向に、眼球が回転するため、眼底周辺まで容易に観察することが可能です。シャフトの角度と長さは、器具の柄の部分が、顔面などに衝突してしまうことがないように設計しております。



未熟児鉤

M-112	全長 120mm / 先端 7.5×8mm	¥ 17,000	JAN:4547451320159
-------	-----------------------	----------	-------------------

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048000343 入 1

未熟児鉤のスタンダード。

未熟児の眼底検査を行う際、未熟児の眼球を操作し、固定するために使用します。鉤を押し込んだ方向に、眼球が回転するため、眼底周辺まで容易に観察することが可能です。

memo

J-07 経強膜術用器具（バックリング・凝固術）

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ



デシャン

材	SUS	薬	クラス I	JMDN	32767000	届	13B1X00048001581	入	1
---	-----	---	-------	------	----------	---	------------------	---	---

スムーズな通糸が可能な穴あき鉤。

眼筋にひっかけ、先端の穴を利用して眼筋の裏にスムーズに通糸することが可能です。



マイヤー・シュビッケラート氏ロカリゼーター

材	SUS	薬	クラス I	JMDN	32767000	届	13B1X00048001420	入	1
---	-----	---	-------	------	----------	---	------------------	---	---

網膜裂孔部位を圧迫、マーキングする必需品。

裂孔位置と推測される部位に、強膜面から先端の球を利用して圧迫します。隆起部位と裂孔部の位置関係が確認された際に、先端の突起を利用し、マーキングすることが可能です。網膜下液の廃液にも使用できます。



PICK
UP



術野の展開と液体の除去を同時に 1 本で行える優れモノ。

裂孔原性網膜剥離に対する強膜バックリング術において、良好な術野の視認性を得るために、術野の展開、術野に貯留する液体の除去などを適切に行なう必要があり、この術野の展開と液体の除去（吸引）を別々の作業として従来は行なわれていたが、本器具は、術野の展開に用いるスパーテルに吸引機能を付加し、術野の展開と液体の吸引を片手で同時に行なえることを目的として開発されました。把持部にある調節ポートを指で開閉操作することにより、吸引機能を調節・停止できるように設計されています。調節ポートから指を離してフルオープンにすれば、瞬時に吸引を停止させることが可能となります。

アスピレーティングスパーテル

受	M-2057	全長 139mm	¥ 82,000	JAN:4547451313281
---	--------	----------	----------	-------------------

材	SUS	薬	クラス I	JMDN	32754001	届	13B1X00048000055	入	1
---	-----	---	-------	------	----------	---	------------------	---	---

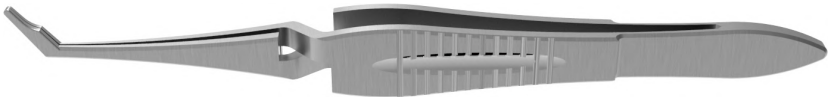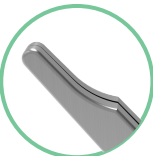

シリコンスリーブへの挿入を容易にこなす優れモノ。


ご考案者 深水 真 先生（千葉県 流山市 千葉愛友会記念病院 眼科）コメント

「バックリングは勿論、硝子体手術においてもしばしば輪状締結術を追加する機会がありますが、その際バンドの両端をシリコンスリーブに挿入するのに難渋した経験は誰しもお持ちではないでしょうか。このプラグ鑷子の根元の太い部分までスリーブに挿入し、鑷子を開くことでスリーブが長方形に開き、術者一人でも容易にバンドを挿入することが可能です。」

深水式エンサークリング・プラグ鑷子

受	M-2198	全長 109mm	¥ 48,000	JAN:4547451327219
---	--------	----------	----------	-------------------

材	SUS	薬	クラス I	JMDN	16209001	届	13B1X00048001890	入	1
---	-----	---	-------	------	----------	---	------------------	---	---

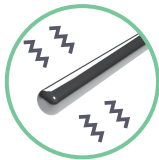

臼井式眼内マグネット 25G

M-582 全長 119mm / 磁石部：先端 2mm ￥42,000 JAN:4547451333418

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35495000 屈 13B1X00048002430 入 1

眼内異物を簡単吸着・除去。

先端にマグネットを内蔵しており、眼内異物を簡単に吸着・除去することが可能です。

memo

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ