



EGG LED

SLIT LAMP MICROSCOPE



www.inami.co.jp

 www.facebook.com/inami.co.jp

医療現場の声をカタチに。

毎日使うものだからこそその創意工夫。

患者様の大切な眼をケアするための高いクオリティ。

イナミのスリットランプエッグは、そんな現場の声をカタチにしています。

高品質な光学系による見やすさと操作性を追及した有機的デザイン。

そして独自に開発された諸機能は、先進的な診療をサポートする

イナミならではのプレミアムソリューションです。




view

EGG LED

L-0296E S.I. Grande II EGG LED

税別標準小売価格：1,700,000円

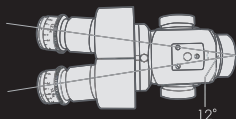

同光源背景照明内蔵



カスタム・ファンクション・スイッチ



S.I. Grande
(光学口径拡大機能)




光学品質はそのままに、コストパフォーマンスに
優れたハロゲン光源モデル。

EGG Halogen

L-0229-E S.I. Grande II EGG Halogen

税別標準小売価格：1,200,000円

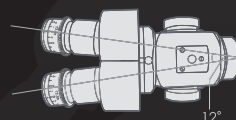

カスタム・ファンクション・スイッチ




S.I. Grande
(光学口径拡大機能)



LED Light Source

独自の光学技術とLEDのマッチングによる光の理想形

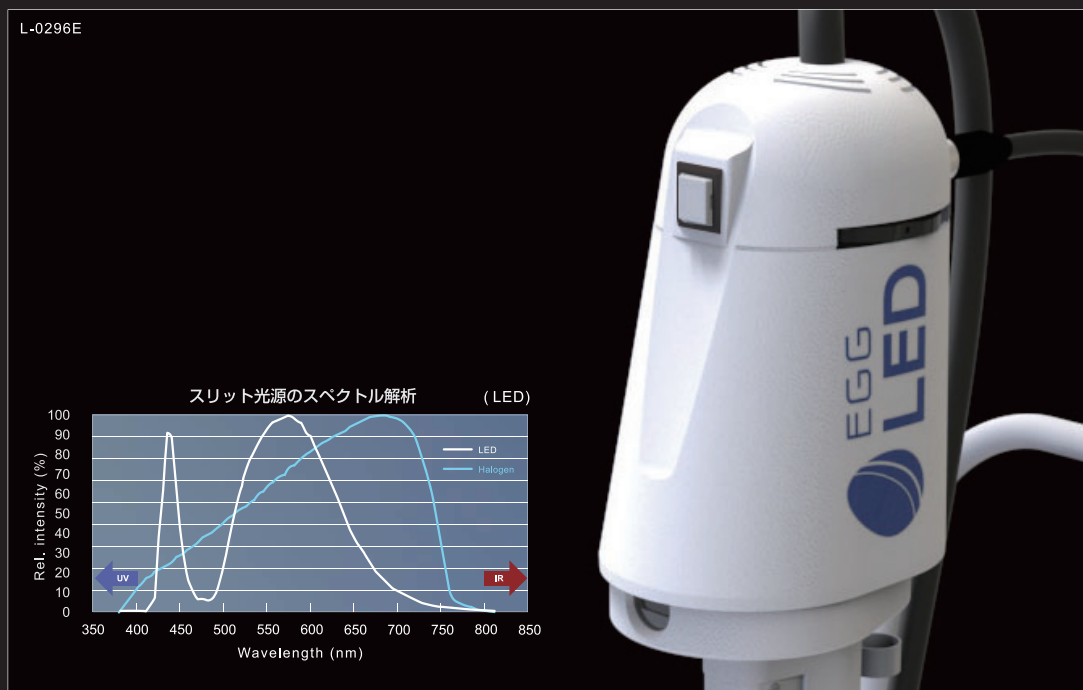

新技術による光の理想形

独自の光学技術とLEDのマッチングにより、これまでにないシャープで均一なスリット光を実現しました。明るく自然な昼白色光が眼本来の色調をあざやかにとらえます。

「やさしさ」がコンセプト

省電力、低発熱性はもちろん、紫外線などの有害光線を限りなくゼロに抑えるLED光源及びフィルターを採用。患者さまにも環境へも「やさしさ」を追求しています。

ストレスフリー

LED光源は長寿命なため交換の必要がほとんどなく、診察途中で電球が切れる心配や、煩雑な予備電球管理の手間から開放されます。

電球色をサポート


専用のフィルターを搭載しているため、状況に応じて従来の電球色に近い光と、LED特有のハイコントラストで鮮やかな昼白色光を切り替えることが可能です。

同一光源による背景照明

背景照明とスリット光を単一ランプハウスの同光源とした設計は、色温度の差異を発生させず、鮮明かつ自然なイメージングを可能にします。また、背景照明にも調光機能を設けていることで、自由度の高い画作りが行えます。

S.I. Grande


8mm径のシャープなスリット光を光学機構で14mmまで拡大

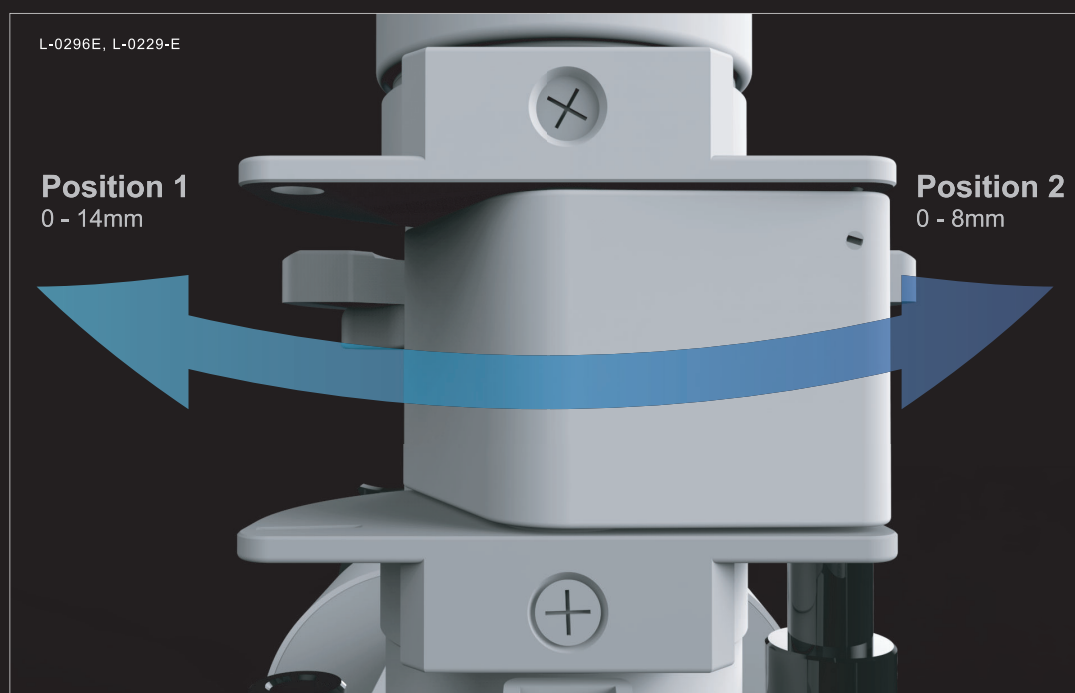


「S.I.Grande」は外眼部の広域観察と内眼部のシャープなスリット検査を1台のスリットランプで実現するイナミ独自の変倍機構です。ワンタッチで切替可能な8φ標準高倍率口径と14φ外眼部広域観察用口径が幅広い診療シーンに対応します。

※ S.I. Grandeは特許を取得しております。

従来のスリットランプ

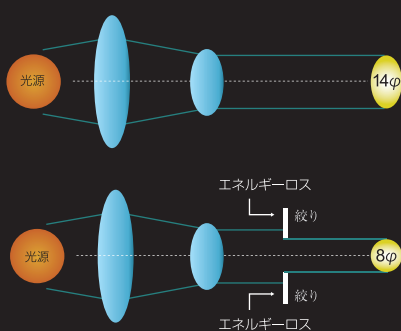


EGG S.I.Grande

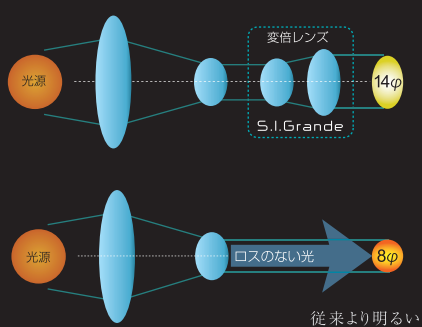

Custom Function Switch

手元のスイッチにお好みの機能を自由に設定


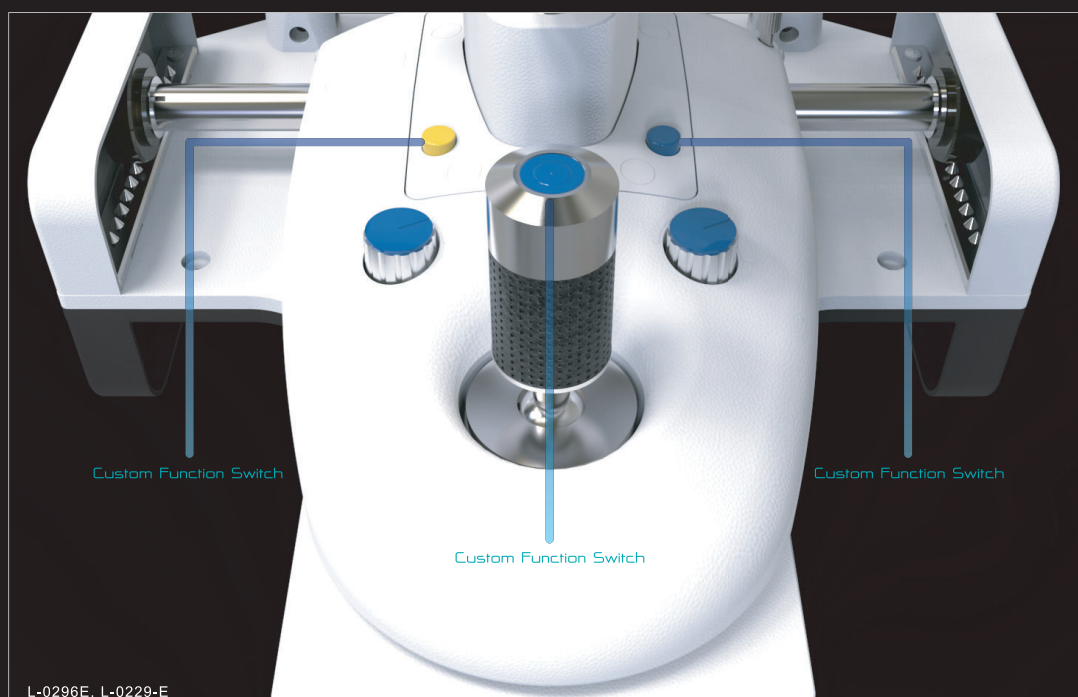


スリットを使用した一連の診察をもっと便利に、というコンセプトのもと設計された架台部にある3つの「カスタム・ファンクション・スイッチ」。

ユーザーの診察環境、周辺機器の使用状況などに応じて、各スイッチにカメラのシャッター、ファインディングソフトや電子カルテの操作など様々な機能を自由に割り当てることが可能です。標準では、フルハイビジョンカメラ(L-0850HD)の使用を想定した各種機能を設定しています。カメラの操作が全てベースの上で行えるため、スムーズな診療と撮影を行うことができます。

Dual Dimmer

自由な光量調節が可能なデュアル調光ダイヤル

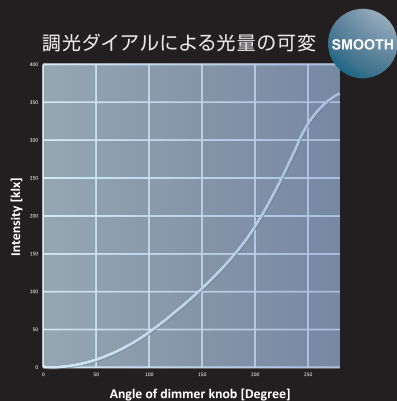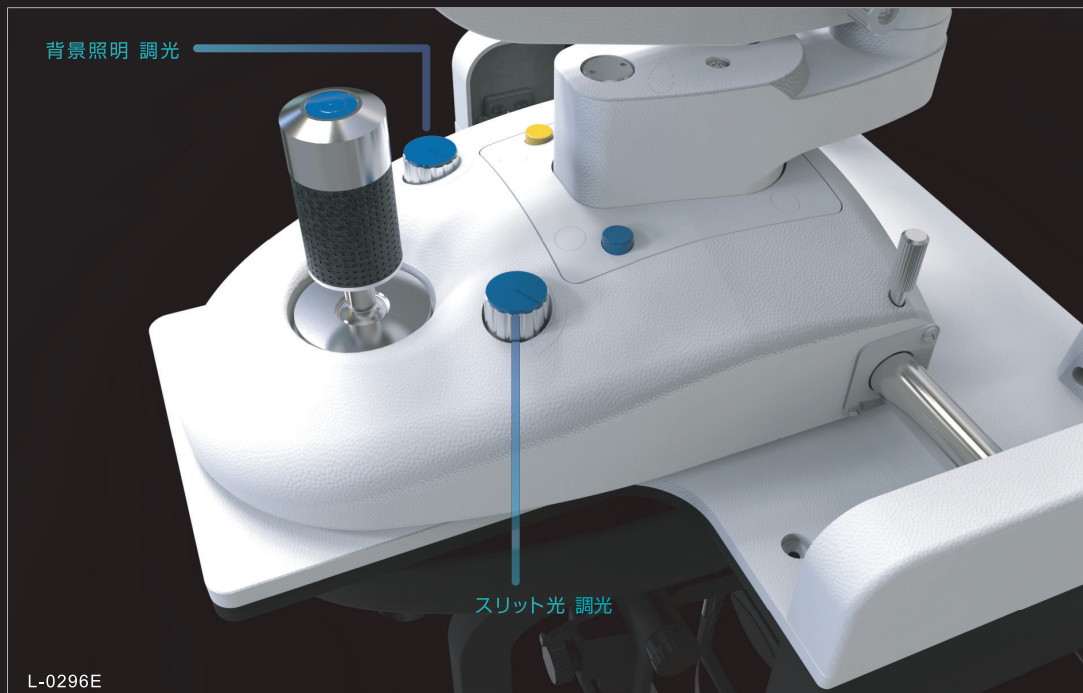

EGGベースに搭載された2つの調光ダイヤルで、同一光源であるスリット光と背景照明の調光を別々に行うことが可能です。

この自由なライティングが、観察の種類や部位を選ばない鮮明かつ自然なイメージングを実現します。

また、難しいとされるLED光量の制御を研究し、急激な明るさの変化を防ぎ、低光量レンジでもスムーズかつ細微な調光ができる基盤を完成させました。

Accessories

IMAGING



L-0574(F=38mm)
CマウントTVカメラアダプター
250,000円



L-0541
ビームスプリッター
150,000円



L-0850HD
小型3CMOSフルHDカメラ
1,250,000円

OTHER



L-5110
アブラネーションノメーター
190,000円



YF-57
イエローフィルター
50,000円




L-01R2
ユニバーサル両視灯
35,000円



L-02LM
ラクミエール α
340,000円

スリットランプの長時間使用が検者の首や肩に負担をかけるケースが報告されています。ラクミエールは鏡頭の角度を調節することで検者のベストな姿勢を保ち、リラックスした状態で診察を可能にします。

L-0160-H1
スリットランプハロゲン球12V4.2A
13,500円

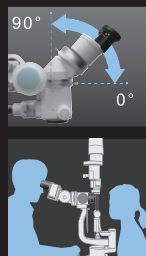

光学台「マルチパーパステーブル」オプション



L-01AB
スリットランプ アクセサリーボックス(レール付)
14,700円



スライディングテーブル「タクトス」取付キット

K-1750-PH21-A EGG Halogen
K-1750専用L-0229-E取付キット L-0229-E用
30,000円

K-1750-PH24-A EGG LED
K-1750専用L-0296-E取付キット L-0296-E用
30,000円



Hospitable
Design



もっと、みんなの、診療空間

年齢、性別、国籍など今後ますます多様化する患者様だれにも快適さや安心を感じてもらえる。そんな診療空間をコーディネートするため、また、ドクターやスタッフの方々により働きやすい環境をご提案するために、私たちイナミは眼科をトータルに知るメーカーならではのさまざまな工夫をものづくりに取り入れています。

Hospitable Design [ホスピタブルデザイン] とは

ドクター、スタッフ、そして患者様、診療空間におけるすべての人に快適と安心を提供するため、イナミが培った経験をベースに製品にプラスした機能を総称して「Hospitable Design(ホスピタブルデザイン)」と呼びます。「Hospitable」とは歓待やおもてなしの心がある状態、または住環境などが快適であることを意味する言葉。イナミの製品が「もっと、みんなの」診療室をつくるお手伝いをします。

Specifications

	商品コード	L-0296E	L-0229-E
顕微鏡部	形式	ガリレオ式双眼実体顕微鏡	
	変倍形式	ドラム回転式5変倍	
	接眼レンズ	12.5倍ハイアイポイント	
	総合倍率	6・10・16・25・40倍	
スリット部	スリット幅	0～14mm(Position1) / 0～8mm(Position2)	
	スリット回転	±90°	
	フィルター	コバルト・防熱・レッドフリー・電球色	コバルト・防熱・レッドフリー・ND50%
	光源	LED	ハロゲン電球 12V 50W
背景照明部	フィルター	昼白色/電球色(フィルター使用時)	なし
	光源	LED	なし
架台部 (作動範囲)	上下	30mm	
	前後	100mm	
	左右	102mm	
	微動	半径10mm ジョイスティック操作	
顎台部	上下移動	75mm	
形状	寸法	450(W)×320(D)×720(H)	450(W)×320(D)×690(H)
	重量(スリット本体)	10.5kg	9.5kg
電源部	入力電圧	AC100V	
	消費電力	60VA	80VA



株式会社 **イナミ**

A Passion for a Nice View

※ 本カタログ記載価格は、すべて2024年3月現在の税別標準小売価格となっております。
※ 製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※ 本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものとは異なる場合があります。

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2
名古屋ベース：〒462-0064 愛知県名古屋市中区大冨町285 A1
大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18ユミール
九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17
Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp

TEL: 03-3814-1731 FAX: 03-3814-3334
TEL: 052-934-7489 FAX: 052-934-7490
TEL: 0798-37-2880 FAX: 0798-37-2881
TEL: 092-504-1734 FAX: 092-504-5355



official web site

製造販売業許可番号 13B1X00048

202403/v2.4