

感染症対策 TOTAL SOLUTION

空気から、表面から、床から、器具から
菌・ウイルスをシャットアウト

もっと、みんなの、診療空間

Hospitable
Design



イナミでは、より安全な医療を提供するために
菌・ウイルスのさまざまな感染経路に対応可能な
商品ラインナップをご用意しました。

診療空間に携わるすべての人に
快適と安心を提供するため、イナミが培った経験をベースに
ご提案するコンセプトを
「Hospitable Design（ホスピタブルデザイン）」と呼びます。

患者さまによる
「感染管理対策」への関心は、
年々高まっています。
この機会に、
お使いの設備を
見直してみませんか？



01

コードレス電動患者椅子リバティス
Libertis

次世代の制菌加工カバーを採用

「より清潔に」、そして感染症予防を追求し、制菌加工カバーを採用しました。「制菌」とは、通産省の厳しいガイドラインの基準をクリアした、これまでの「抗菌」を遥かに凌ぐ次世代のスタンダードです。標準のカバー以外に、オプションの制菌カバー25色からお好みのカラーをお選びいただけます。



制菌加工

(特定用途)

(繊維上の細菌の増殖を抑制します)

認証番号 050SB05

一般社団法人繊維評価技術協議会

剤名:有機(イミダゾール系)・無機(銀系・亜鉛系)複合体

コーキンマスター™

02

eZ-100

オゾンエアクリア




人がいるとき:「空気吸引清浄機能」運転

部屋の空気を機械が吸引し、オゾンと高性能多重フィルタで除菌し、脱臭、除塵します。フィルタで捉えた細菌もオゾンで分解・除去させ、機械内部をクリーンにし二次汚染の防止をしています。処理が終わった空気中のオゾンは機械内部で酸素になり、クリーンになった空気が機械から部屋に戻ります。この循環をくりかえして、部屋の空気を清浄にします。


人がいないとき:「オゾンくん蒸機能」運転

機械からオゾンを放出し、室内の隅々までオゾンを充満させ、浮遊菌や壁・天井の付着菌・付着臭を強力に除菌、脱臭し部屋空間をまるごと清浄にします。オゾンくん蒸後はセットしたタイマにより自動的にオゾン分解機能が働くので、入退室時に人がオゾンに触れることはありません。

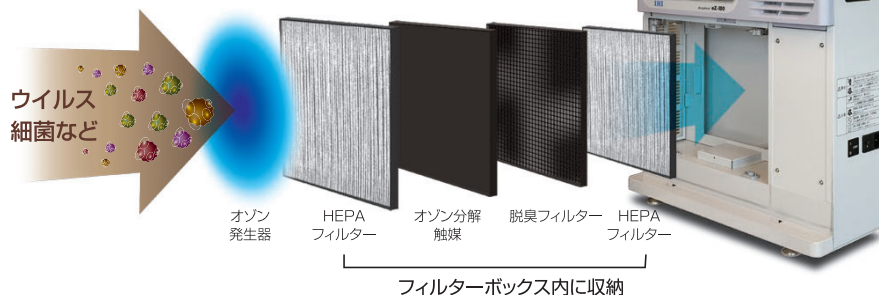


脱臭力が違う

オゾン・触媒・脱臭フィルター・マイナスイオンで強力脱臭。

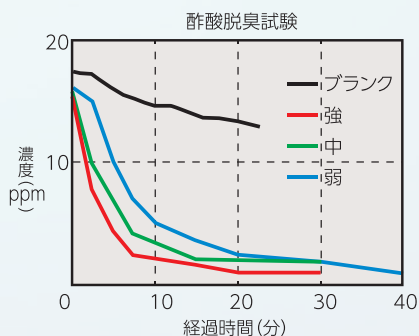


集塵力が違う

大容量静電式HEPAフィルターで強力集塵。

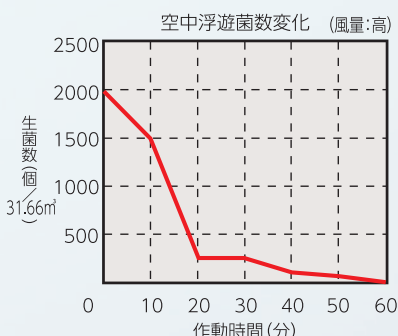

飛沫感染対策

空中に浮遊するウイルスは大容量静電式HEPAフィルターに捕捉され除去。

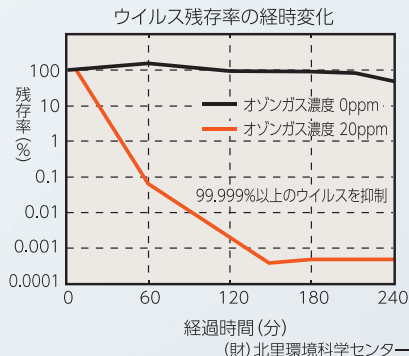

03

スリッパ殺菌ディスペンサー SSDX

清潔

光陪食加工の専用防臭スリッパを紫外線で殺菌し、清潔な状態を保ちます

コンパクト

10足収納でコンパクト設計なので置き場所を選びません。

「高さ1207×幅341×奥行445mm」

■使用法


使用済のスリッパを本体上部の返却口に置くと返却口が開き、専用スリッパがボックス内に収納されます



紫外線がスリッパの裏側、内側とも均一に殺菌します

ボックス内に収納されている間中、殺菌されています

ボタンを押すと、ボックスの下から一足ずつスリッパが出てきます

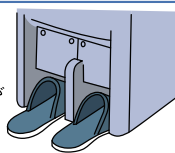

※本体ご購入時に専用スリッパが10足付属しております。



※スリッパを正しく返却しないと詰まりの原因となりますのでご注意ください

04 ヨーロッパ基準に準じた、 ハイレベルな滅菌を提供します。

医療先進国であるヨーロッパの基準 EN13060のクラスB規格を満たしたオートクレーブです。

減圧によって残留空気を排出し真空状態となったチャンバー内部に飽和蒸気を充満させることで、従来のオートクレーブでは滅菌が難しいとされる中空製品や、多孔性材料(包装品・ガーゼ・ドレープ)の内部まで確実に滅菌します。



INC Washer
ウォッシャーディスインフェクター



INC Clave
クラスBオートクレーブ

洗浄

1

洗浄の均一化、2次感染リスクの軽減、時間の有効活用が可能です。

消毒

2

熱水消毒のため、消毒剤のような残留毒性がなく、安全です。

乾燥

3

HEPAフィルターを通したクリーンなエアード乾燥します。

滅菌

4

ヨーロッパ規格のクラスB基準で管空内も確実に滅菌が可能です。

保管

5

05 システムシンク

イナミのシステムシンクは汚染器具の発生から、安全で効率的な洗浄滅菌のフローを診療施設のニーズに沿って最適化いたします。各ユニットの組み合わせやサイズはスペースに応じて自由に構成できます。



恒温槽システムシンクで手間を省いて、時間を有効に!

槽内の温度をコントロールする



洗剤の効力を最大限引き出す為の温度は約40度から45度程度と言われております。本装置では温度調節機能により最適な温度を保つことが可能です。

槽内の洗浄濃度を均一にする



洗浄効果を均一にするため、槽内の洗剤の濃度を均一にする必要があります。本装置では槽内の循環機能により洗剤のばらつきを抑え、均一の洗浄効果を得ることが可能です。

Water Gun System

ウォーターガンセットは、洗浄の必用アイテムです。システムシンクに設置することが可能なオプション品です。洗浄する物に応じて、ノズル先端を付け替えることができます。(RO水使用を除く)

ウォーターガン本体 / ノズルスタンド / レギュレーターノズル / シャワーノズル / 拡散ロングノズル / フレキシブルノズル / スリムノズル×2

※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。

※製品サイズには公差があるため、実際の製品は本カタログ記載サイズと若干前後する場合があります。

※本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものと異なる場合があります。

Inami 株式会社 **イナミ**

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2
名古屋ベース：〒462-0064 愛知県名古屋市中区大我町285 A1
大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18ユミール
九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17
Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp

TEL: 03-3814-1731 FAX: 03-3814-3334
TEL: 052-934-7489 FAX: 052-934-7490
TEL: 0798-37-2880 FAX: 0798-37-2881
TEL: 092-504-1734 FAX: 092-504-5355

official web site



製造販売業許可番号 13B1X00048

v1.0

01

KK-100 / KK-110 電動患者椅子リバティス

検査室、診察室

制菌加工カバーを採用。「制菌」とは、通産省の厳しいガイドラインの基準をクリアした、これまでの「抗菌」を遥かに凌ぐ次世代のスタンダードです。

制菌カバー 25 色からお好みのカラーを選択可能



05

システムシンク

洗浄・滅菌室

汚染器具の発生から、安全で効率的な洗浄滅菌のフローを診療施設のニーズに沿ってカスタマイズ設計します。

耐食性・耐薬性・剛性の高い SUS304 を厚み 1.0t (mm) にて使用。信頼の素材で安心安全の洗浄をサポートします。

恒温槽シンクが、洗剤の効果を最大限に引き出し、槽内の洗浄効果を均一に保ちます。



04

クラス B オートクレープ INC Clave

洗浄・滅菌室

従来のオートクレープに比べ、滅菌効率がアップしました。

医療先進国であるヨーロッパの滅菌器の基準 (EN13060) に適合しています。

真空引きと蒸気注入を繰り返す事で、パイプシャフト器材の内部まで確実に滅菌できます。



ウォッシャーディスインフェクター INC Washer

洗浄・滅菌室

一台で、器具の「洗浄～消毒～乾燥」が完結します。

消毒剤を使用しない（熱水で消毒をおこないます）ため、残留毒性がなく、低リスクでの消毒作業が可能です。

全自動のため、人件費を減らすことができます。



02

ez100 オゾンエアクリア

待合室、検査室、診察室、リカバリールームなど

一台三役！
施設内の浮遊菌・付着菌を確実に減らします。

高性能 HEPA フィルタで、0.3μm の菌・ウイルスを 99.97% 以上捕集。

夜間のオゾンくん蒸で、付着菌・浮遊菌を除菌

有事の際には簡易陰圧テント（オプション）を用いて、感染患者の隔離がおこなえます。



03

SSDX / SSDX-V スリッパ殺菌ディスペンサー

待合室

先入れ先出し方式で、全てのスリッパを均一に殺菌。

3 方向から紫外線を照射することで、スリッパの内部・裏面まで確実に殺菌をおこないます。

真菌・水虫菌に対しても、99.99% 以上の殺菌効果が認められています。

