

OPHTHALMIC MICROSCOPE

外来処置用顕微鏡



www.inami.co.jp



Find us on Facebook!

www.facebook.com/inami.co.jp

L-0951

SDP

ベストセラーのコンパクト外来処置顕微鏡が
接眼12.5倍の新仕様にバージョンアップ。

マニュアル
上下
スライダー

ハイ
アイポイント
12.5x

ドラム変倍
2.8x 4.2x 7x 11.2x 17.5x

フィルター
コバルト・防熱・ブルー・1/2ND



L-0951

SD



クランプタイプ

FEATURES

Flexibleチェンジャー

3箇所のフレキシブルアームが連動し、きわめて簡単、そして自由自在に最適なポジションを得ることが可能です。
また、軽量設計であるため、アームのコントロールも軽々こなせます。



マニュアル上下スライダー

術中の微妙な焦点距離を直感的に微調整することを可能にするため、手動の上下スライダーを採用しました。軽量設計の為、ストレスのないオペレーションが可能です。



ビームスプリッター

ビームスプリッターを使用することで、カメラ、双眼側視鏡を取り付けることができます。




可動式鏡頭<ラクミエールα>

可動式鏡頭ラクミエールαを利用すれば、通常傾斜45°の鏡頭を0~90°において無段階角度調節することが可能です。「ベッドの高さ調節ではベストポジションが得られない」、「姿勢を変えて処置を行いたい」などの場合に大変便利です。



L-0951SDP-FB フラットベース

フラットベースを使用すれば、処置用ベッドの下に収納することも可能です。更なる省スペース化を実現します。

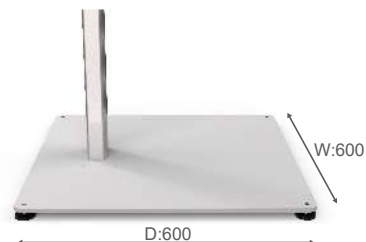

双眼側視鏡

取り付けにはビームスプリッターが必要となります。



本体価格


L-0951SDP	ドラム式ポータブル手術顕微鏡	¥ 840,000
JAN:4547451336648 JMDN:36354020 届出番号:13B1X00048002455		
L-0951SDP-FB	ドラム式ポータブル手術顕微鏡 フラットベース仕様	¥ 900,000
JAN:4547451336655 JMDN:36354020 届出番号:13B1X00048002455		
L-0951SD	ドラム式ポータブル手術顕微鏡 クランプタイプ	¥ 720,000
JAN:4547451336631 JMDN:36354020 届出番号:13B1X00048002455		

オプション・関連商品

L-02LM	可動式鏡頭ラクミエールα	¥ 340,000
JAN:4547451329305 JMDN:37294000 届出番号:13B1X00048002019		
L-0542CB	双眼側視鏡	¥ 420,000
JAN:4547451328803 JMDN:37294000 届出番号:13B1X00048001795		
L-0541	ビームスプリッター	¥ 150,000
JAN:4547451081777 JMDN:37294000 届出番号:13B1X00048001867		
L-0950-H1	KLSハロゲンランプ 21V150W	¥ 15,500

SPECIFICATIONS

顕微鏡・照明部	形式	ガリレオ式双眼実体顕微鏡
	変倍形式	ドラム回転式5変倍ズーム
	接眼レンズ	12.5 倍 ハイアイポイント
	総合倍率	2.8, 4.2, 7, 11.2, 17.5 倍
	視野径	Φ80, 52, 31, 19.5, 12.5
	眼幅調整	55~75 mm
	焦点距離	200 mm
	視度調整	±6D
	照野径	Φ60
	照度	60,000Lux (最大)
	フィルター	コバルト、ブルー、防熱、1/2 N D
	ティルティング角度	-10~20°
	焦点調整上下微動	手動式 微動量30mm
顕微鏡・照明部	ベーススタンド	可搬式 H形ベーススタンド(キャスター付)
	設置方式	キャスターストップバー式
電源部	照明電球	ハロゲン電球 21V150W
	入力電圧	AC100V 50/60Hz
	消費電力	210VA
	ヒューズ	3.15A 250V
形状	形状寸法	540(W)×1212(D)×1320(H) ※アーム水平時
	本体重量	約30kg

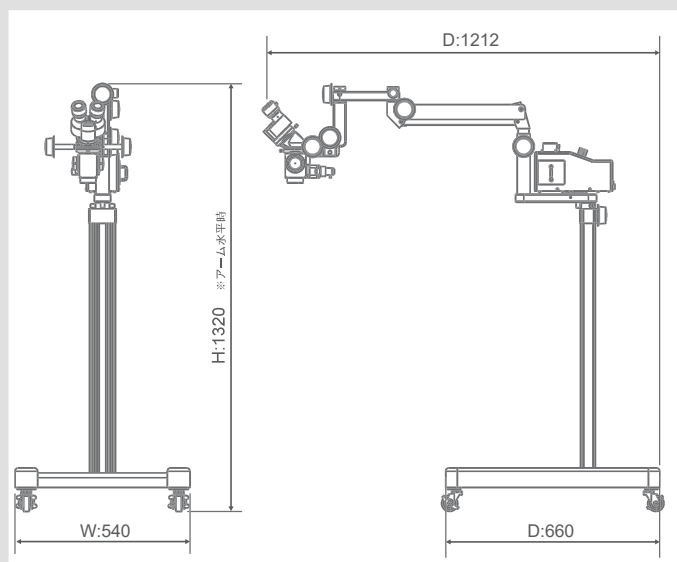

L-0951

XDP

オート上下スライダーを搭載した
コンパクト外来処置顕微鏡。

オート
上下
スライダー

ハイ
アイポイント
12.5x

ドラム変倍
2.8x 4.2x 7x 11.2x 17.5x

フィルター
コバルト・防熱・ブルー・1/2ND



L-0951

XD



クランプタイプ



FEATURES

Flexibleチェンジャー

3箇所のフレキシブルアームが連動し、きわめて簡単、そして自由自在に最適なポジションを得ることが可能です。
また、軽量設計であるため、アームのコントロールも軽々こなせます。



オート上下スライダー

オートマチックの上下スライダーを採用することにより、術中の微妙な焦点距離を直感的に微調整することが可能です。フットペダルによる操作の為、手元は常に患者さまに集中できます。



ビームスプリッター

ビームスプリッターを使用することで、カメラ、双眼側視鏡を取り付けることができます。




可動式鏡頭<ラクミエールα>

可動式鏡頭ラクミエールαを利用すれば、通常傾斜 45° の鏡頭を 0 ~ 90° において無段階角度調節することが可能です。「ベッドの高さ調節ではベストポジションが得られない」、「姿勢を変えて処置を行いたい」などの場合に大変便利です。



L-0951XDP-FB フラットベース

フラットベースを使用すれば、処置用ベッドの下に収納することも可能です。更なる省スペース化を実現します。

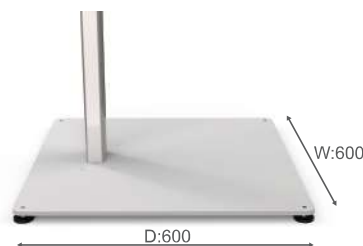

双眼側視鏡

取り付けにはビームスプリッターが必要となります。



本体価格


L-0951XDP	ポータブル手術顕微鏡(電動フォーカス)	¥1,040,000
JAN:4547451336761 JMDN:36354020 届出番号:13B1X00048002457		
L-0951XDP-FB	ポータブル手術顕微鏡(電動フォーカス) フラットベース仕様	¥1,100,000
JAN:4547451336778 JMDN:36354020 届出番号:13B1X00048002457		
L-0951XD	ポータブル手術顕微鏡(電動フォーカス)クランプタイプ	¥ 920,000
JAN:4547451336754 JMDN:36354020 届出番号:13B1X00048002457		

オプション・関連商品

L-02LM	可動式鏡頭ラクミエールα	¥ 340,000
JAN:4547451329305 JMDN:37294000 届出番号:13B1X00048002019		
L-0542CB	双眼側視鏡	¥ 420,000
JAN:4547451328803 JMDN:37294000 届出番号:13B1X00048001795		
L-0541	ビームスプリッター	¥ 150,000
JAN:4547451081777 JMDN:37294000 届出番号:13B1X00048001867		
L-0950-H1	KLSハロゲンランプ 21V150W	¥ 15,500

SPECIFICATIONS

顕微鏡・照明部	形式	ガリレオ式双眼実体顕微鏡
	変倍形式	ドラム回転式5変倍ズーム
	接眼レンズ	12.5 倍 ハイアイポイント
	総合倍率	2.8, 4.2, 7, 11.2, 17.5 倍
	視野径	Φ80, 52, 31, 19.5, 12.5
	眼幅調整	55~75 mm
	焦点距離	200 mm
	視度調整	±6D
	照野径	Φ60
	照度	60,000Lux (最大)
顕微鏡・照明部	フィルター	コバルト、ブルー、防熱、1/2 N D
	テールディング角度	-2.5~27.5°
	焦点調整上下微動	電動式 微動量40mm
	ベーススタンド	可搬型 H形ベーススタンド(キャスター付)
	設置方式	キャスターストップ方式
	電源部	照明電球
	入力電圧	AC100V 50/60Hz
	消費電力	225VA
	ヒューズ	3.15A 250V
	形状寸法	540(W)×1160(D)×1320(H) ※アーム水平時
形状	本体重量	約33kg

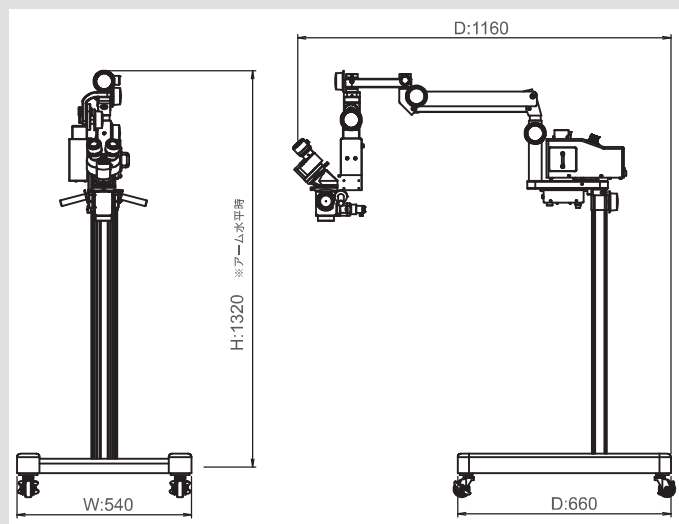

L-0990 クーポラ

CUPOLA

オート
上下
スライダー

ハイ
アイポイント
12.5x

コラム変倍
3.2x 4.8x 8x 12.8x 20x

フィルター
コバルト・防熱・ブルー・1/2ND

「安定感」・「安心感」を追求した
ワンランク上の処置用顕微鏡。



FEATURES

オート上下スライダー

オートマチックの上下スライダーを採用することにより、術中の微妙な焦点距離を直感的に微調整することが可能です。フットペダルによる操作の為、手元は常に患者さまに集中できます。



ランプチェンジャー

予備電球の装備が可能で、緊急時には、ケーブルの抜き差しをみの簡単操作で電球の切り替えが可能です。



L-0990FB フラットベース仕様

フラットベースを使用すれば、処置用ベッドの下に収納することも可能です。更なる省スペース化を実現します。



可動式鏡頭<ラクミエールα>

可動式鏡頭ラクミエールαを利用すれば、通常傾斜 45° の鏡頭を 0 ~ 90° において無段階角度調節することが可能です。「ベッドの高さ調節ではベストポジションが得られない」、「姿勢を変えて処置を行いたい」などの場合に大変便利です。



3CMOSフルハイビジョンカメラ

多彩な機能、映像出力を可能とするフルハイビジョンカメラ。取り付けにはビームスプリッターが必要です。



L-0541
ビームスプリッター



L-0574(F=38mm)

CマウントTVカメラアダプター

双眼側視鏡



取り付けにはビームスプリッターが必要となります。

本体価格


L-0990	外来処置用顕微鏡 クーボラ	¥ 1,200,000
JAN:4547451321644 JMDN:36354020 届出番号:13B1X00048001426		
L-0990FB	フラットベース仕様 受注生産品	¥ 1,350,000
JAN:4547451322139 JMDN:36354020 届出番号:13B1X00048001989		
L-0960-H1	手術顕微鏡電球ハロゲン15V 150W	¥ 13,500

オプション・関連商品

L-02LM	可動式鏡頭ラクミエールα	¥ 340,000
JAN:4547451329305 JMDN:37294000 届出番号:13B1X00048002019		
L-0542CB	双眼側視鏡	¥ 420,000
JAN:4547451328803 JMDN:37294000 届出番号:13B1X00048001795		
L-0541	ビームスプリッター	¥ 150,000
JAN:4547451081777 JMDN:37294000 届出番号:13B1X00048001867		
L-0574	CマウントTVカメラアダプター(F=38mm)	¥ 250,000
JAN:4547451331193 JMDN:37294000 届出番号:13B1X00048002130		
L-0800HD	3CMOSフルハイビジョンカメラ	¥ 1,250,000
JAN:4547451326939		

SPECIFICATIONS

顕微鏡・照明部	形式	ガリレオ式双眼実体顕微鏡
	変倍形式	ドラム回転式 5 変倍
	接眼レンズ	12.5 倍 ハイアイポイント
	総合倍率	3.2、4.8、8、12.8、20 倍
	視野径	Φ66 ~ Φ11
	眼幅調整	50~75 mm
	焦点距離	175 mm
	視度調整	±6D
	照野径	Φ45
	照度	70,000Lux(最大)
	フィルター	コバルト、ブルー、防熱、1/2 ND
	ティルティング角度	-7° ~ +18°
	焦点調整上下微動	電動式 微動量40 mm
	ベーススタンド	可搬型 H 形ベーススタンド(キャスター付)
顕微鏡・照明部	設置方式	キャスターストップパー式
	照明電球	ハロゲン電球 15V150W
電源部	入力電圧	AC100V 50/60Hz
	消費電力	210VA
	主電源	3.15A 250V
	電源スイッチ	2.0A 250V
形状	本体重量	約62kg
	本体寸法	697(W)×1450(D)×1700(H)

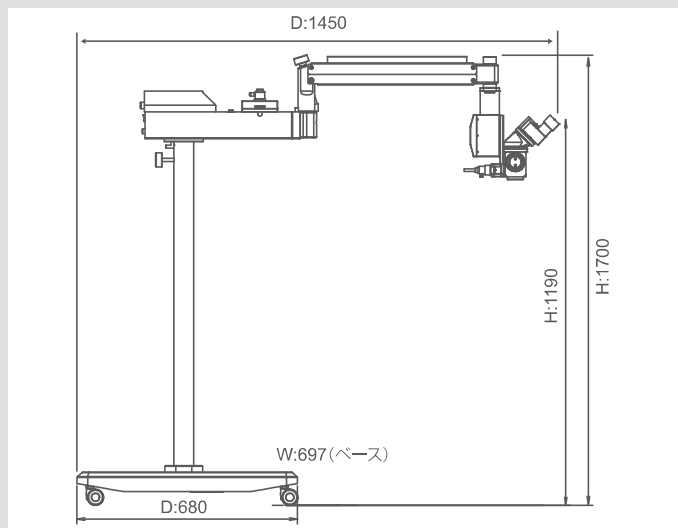


イナミのコンパクト外来処置顕微鏡と
タカノのコンパクト移動式リクライニングベッドが
コラボしました。

コンバー i EV

Conver i EV

外来処置顕微鏡 / 眼科診療・処置用椅子





設置型では出来ない自由なレイアウト/運用を～
1台4役：検査・処置・搬送・リカバリ

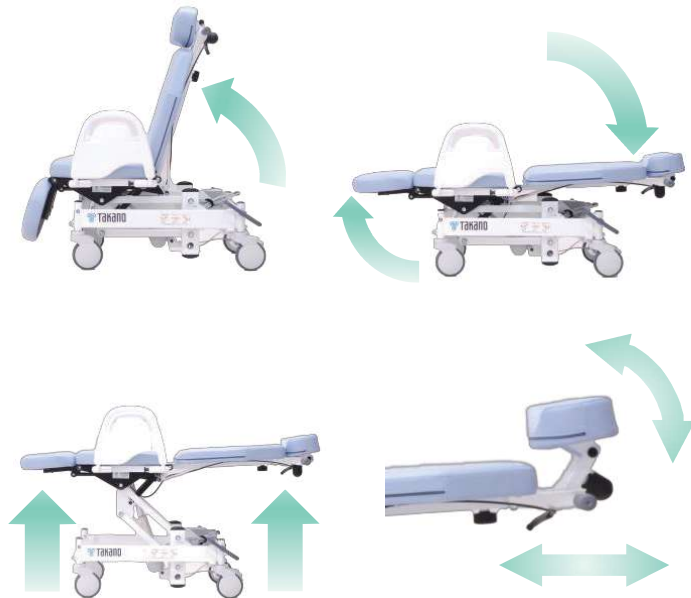

■ 寸法図

移動式の為、自由なレイアウトが可能です。

使用後はコンパクトに折りたたむため、スッキリとスペースを保てます。

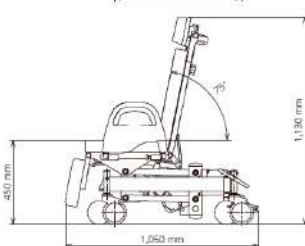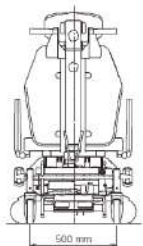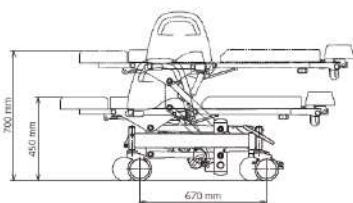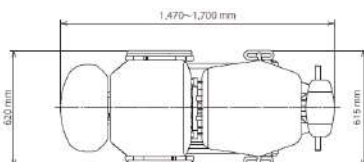

マニュアル
上下
スライダー

ハイ
アイポイント
12.5x

ドラム変倍
2.8x 4.2x 7x 11.2x 17.5x

フィルター
コバルト・防熱・ブルー・1/2ND

セット価格 ￥ 1,670,000

TB-602 コンバー i EV (眼科診療・処置用椅子)

TB-650 顕微鏡取付支柱

L-0951SD ドラム式ポータブル手術顕微鏡



製造販売届出番号 20B2X10007THW003 コンバー i (眼科診療・処置用椅子) タカノ株式会社

株式会社 イナミ

A Passion for a Nice View

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2
名古屋ベース：〒462-0064 愛知県名古屋市中区大我町285 A1
大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18ユミール
九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17
Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp

TEL: 03-3814-1731 FAX: 03-3814-3334
TEL: 052-934-7489 FAX: 052-934-7490
TEL: 0798-37-2880 FAX: 0798-37-2881
TEL: 092-504-1734 FAX: 092-504-5355

official web site



製造販売業許可番号 13B1X00048
v2.1

※製品の価格は全て2023年2月現在の税別標準小売価格となっております。
※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものと異なる場合があります。
※本カタログ中のQRコードのリンク先は予告なく変更、閉鎖する場合があります。