

L-0850HD

小型3CMOSフルHDカメラ



小型・軽量カメラヘッド

カメラヘッドの小型(W34XH40XD40mm)・軽量化(約100g)を実現しました。

高画質・高感度

撮像素子には、200万画素1/2.8型CMOSを採用。限界解像度1000本・S/N 63dBの高画質、感度2000lx/F13の高感度を実現しています。

多彩な映像出力

映像出力はデジタルハイビジョン信号(3G/HD-SDI)を2系統、HDMI出力を1系統装備しています。

電子シャッター(シャッターアイリス)

被写体の光量の変化に応じて、常に最適な映像レベルを保つことができる電子シャッター(シャッターアイリス)機能を装備しています。

フリーズ機能

CCUパネルのスイッチを押すだけで、映像をフリーズ、状態に保つことが可能。動きのある被写体を高画質な静止画で詳細に観察することができます。CCUの前面パネルのスイッチ操作のほか、オプションのフットスイッチ等からの外部制御も可能です。

フルオレセインモード機能

眼科スリットランプ等によるフルオレセイン検査でも、前面パネルスイッチを押すだけで鮮明な蛍光箇所を捉えることができるフルオレセインモード機能を搭載。オプションのフットスイッチからリモート制御が行えます。

シーンファイル機能

各補正・各機能の設定を4ポジションまで記憶・選択ができるシーンファイル機能を装備。撮影条件に合わせた設定を簡単に呼び出すことができます。

画像上下左右反転機能

光学機器による光学反転(リバース)に対して、デジタル処理にてテレビ映像を正像に合わせる上下・左右映像反転機能を搭載しています。オプションのフットスイッチ等、外部制御が行えます。

電子ズーム機能

映像の中心部を4倍まで拡大表示できる電子ズーム機能を装備しています。

抗菌塗装処理

カメラヘッド、CCUには、抗菌塗装処理を実施。衛生面に配慮しています。

静止画・動画記録、再生機能(オプション)

カメラから出力される信号を記録します。動画や静止画の同時記録および再生が可能なメディカルビデオレコーダ。

※メディカルデジタルビデオレコーダ(MDR-600HD)

L-0850HD

小型3CMOSフルHDカメラ



主な仕様


光学系	RGBプリズム方式
レンズマウント	Cマウント方式
撮像素子	1/2.8インチCMOSセンサー×3
有効画素数	1920(H) × 1080(V)
S/N	63dB
感度	F13(2000lx)
消費電力	カメラヘッド:4W以下 CCU:40W以下
動作温度/湿度	0℃～+40℃ / 30～90%
外形寸法	カメラヘッド:W34xH40xD40mm/100g以下 CCU:W210xH58xD270mm/2kg以下
カメラケーブル	ケーブル標準5m(延長用ケーブル10m※オプション) ※L-0850HD用延長用カメラケーブル10m(MCCMCJP-100)

L-0850HD用2連フットスイッチ

静止画取込み、映像反転、シーンファイル切替などの操作が可能です。



外観図

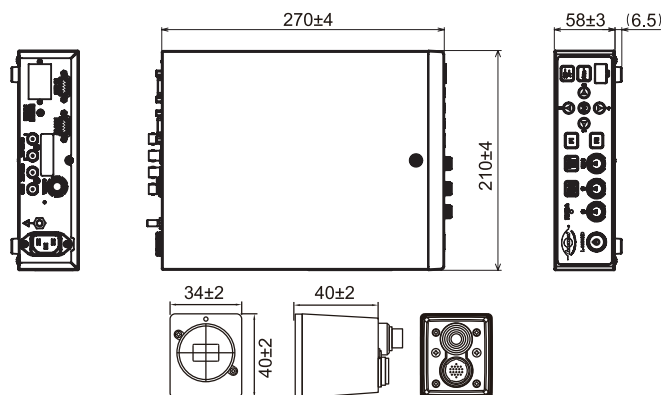

価格 (税別標準小売価格)

L-0850HD	小型3CMOSフルHDカメラ	¥1,250,000
HDM02AE	L-0850HD用ハイスピードHDMIケーブル 2m	¥4,000
HDM05AE	L-0850HD用ハイスピードHDMIケーブル 5m	¥5,500
OFL-TV-SP	L-0850HD用2連フットスイッチ	¥35,000



A Passion for a Nice View

※本カタログ記載価格は、すべて2023年10月現在の税別標準小売価格となっております。

※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。

※製品サイズには公差があるため、実際の製品は本カタログ記載サイズと若干前後する場合があります。

※本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものと異なる場合があります。

Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2
名古屋ベース：〒462-0064 愛知県名古屋市中区大我町285 A1
大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18ユミール
九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17

TEL: 03-3814-1731 FAX: 03-3814-3334
TEL: 052-934-7489 FAX: 052-934-7490
TEL: 0798-37-2880 FAX: 0798-37-2881
TEL: 092-504-1734 FAX: 092-504-5355

official web site



202310/V1.0