




Ophthalmic Surgical Training Models



PRODUCT CATALOG

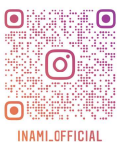

Follow me on
Instagram



Find us on Facebook!
www.facebook.com/inami.co.jp

SimulEYE® Iris Suturing & IOL Fixation (ISIF) — for Yamane Technique



Double Needle Fixation ISHF
Yamane Technique
(山根ダブルニードル法)



品番：EYE-ISIF1

シミルアイ ISIF 虹彩縫合 & IOL 固定 (山根テクニック)

標準価格 ¥28,600

虹彩縫合トレーニングと、IOL 固定トレーニングに適したハイブリッドモデル。
虹彩縫合では、虹彩を自由に切除し、様々な縫合技術をトレーニングすることができます。IOL 固定においては、Yamane 法を含む強膜内固定や毛様溝縫着術など、様々な眼内レンズ固定法を練習することが可能です。
また、IOL の切断や交換のトレーニング用としても活用できます。

Starter Kit

品番：EYE-ISIF1-SET

シミルアイ ISIF 虹彩縫合 & IOL 固定 (山根テクニック) セット

EYE-ISIF1	シミルアイ ISIF (虹彩縫合 & IOL 固定) / 1 眼
EYE-ElevatedBase	シミルアイ 固定ベース
EYE-BT	シミルアイ 固定ベース用トレイ
EYE-Cohes5cc	粘性粘弾性代替材 / 5cc シリンジ
EYE-Dispers5cc	分散性粘弾性代替材 / 5cc シリンジ

セット価格 ¥47,800

Iris fixation of IOL
- Siepser Technique



Iridodialysis Repair



Iris fixation of IOL
- McCannel Technique

SimulEYE® Small Pupil



SimulEYE Small Pupil



品番：EYE-SP1

シミルアイ 小瞳孔

標準価格 ¥28,600

様々な瞳孔拡張器具の挿入・抜去のトレーニングを行うために開発されました。
また、虹彩フックのセットや、前房内の眼内レンズの切開・抜去の練習にも使用することができます。
適切なケアと手術手技により、何度も再使用できるように設計されています。

Starter Kit

品番：EYE-SP1-SET

シミルアイ 小瞳孔セット

EYE-SP1	シミルアイ小瞳孔 / 1 眼
EYE-ElevatedBase	シミルアイ 固定ベース
EYE-BT	シミルアイ 固定ベース用トレイ
EYE-Cohes5cc	粘性粘弾性代替材 / 5cc シリンジ
EYE-Dispers5cc	分散性粘弾性代替材 / 5cc シリンジ

セット価格 ¥47,800

Small Pupil Set-up & Cleaning

SimulEYE® Capsule Support



Capsule Support
with Capsule Hook



品番：EYE-CS1

シミルアイ カプセルサポート

標準価格 ¥36,200

このモデルは、後囊と虹彩が半分の状態となっております。エキスパンドや APX などの CTR、その他不安定なカプセルを支えるために使用するデバイスを扱うのに理想的なモデルです。ハーフアイリスは、CTR の適切な挿入角度を理解し、これらのデバイスを使用する際に、カプセルを視覚化することができます。
また、組織のリアリズムに優れたハーフアイリスに虹彩フックをセットすることも可能です。このモデルでは、フルアイリスが必要となる他の瞳孔拡張デバイスを使用することはできません。

Starter Kit

品番：EYE-CS1-SET

シミルアイ カプセルサポートセット

EYE-CS1	シミルアイカプセルサポート / 1 眼
EYE-ElevatedBase	シミルアイ 固定ベース
EYE-BT	シミルアイ 固定ベース用トレイ
EYE-Dispers5cc	分散性粘弾性代替材 / 5cc シリンジ

セット価格 ¥54,100

Capsule Support
with CTR



Capsule Support
with Iris Hook

SimuloRhexis®



SimuloRhexis Model



品番：EYE-SR10

シミルアイ CCC 作成キット(前囊フィルム 10 枚付)

標準価格 ¥32,400

前囊切開に特化したモデル。合計 5～10 回のトレーニングが可能です。角膜切開を行い、前房を粘弾性で満たし、CCC の作成をトレーニングします。
難易度の高い CCC として、例えばカプセルの後ろの圧力を高くすることができます。前囊は前方に反り、前房が浅い状態を作り出し、レスキュー操作のトレーニングを行うことも可能です。

Starter Kit

品番：EYE-SR10-SET

シミルアイ CCC 作成キット(前囊フィルム 10 枚付) セット

EYE-SR10	シミルアイ CCC 作成キット (前囊フィルム 10 枚付)/1 眼
EYE-ElevatedBase	シミルアイ 固定ベース
EYE-BT	シミルアイ 固定ベース用トレイ
EYE-Cohes5cc	粘性粘弾性代替材 /5cc シリンジ
EYE-Dispers5cc	分散性粘弾性代替材 /5cc シリンジ

セット価格 ¥51,600

品番：EYE-AP1

シミルアイ IOL 挿入用（無水晶体）

標準価格 ¥36,200

あらかじめ 5.5mm の前囊切開を施した無水晶体眼モデル。眼内レンズの挿入や、CTR、レンズフックなどのトレーニングに最適です。適切なケアと手術手技により、何度でも再使用できるように設計されています。

Starter Kit

品番：EYE-AP1-SET

シミルアイ IOL 挿入用（無水晶体）セット

EYE-AP1	シミルアイ IOL 挿入用 (無水晶体) /1 眼
EYE-ElevatedBase	シミルアイ 固定ベース
EYE-BT	シミルアイ 固定ベース用トレイ
EYE-Dispers5cc	分散性粘弾性代替材 /5cc シリンジ

標準価格 ¥54,100

SimulEYE® Aphakia



Aphakia IOL Insertion

SimulEYE® ACIOL



品番：EYE-ACIOL1

シミルアイ前房 IOL 挿入用（有水晶体）

標準価格 ¥28,600

直径 12.5mm の前房レンズに最適なサイズとなっています。適切な切開サイズで前房レンズを挿入し、所定の位置に回転させ、取り外す方法についてトレーニングします。前房レンズを見るときは必ずミラーゴニオレンズを使用し、ハプティックが角度にうまく配置されていることを確認してください。適切なケアと手術手技により、何度でも再使用できるように設計されています。

Starter Kit

品番：EYE-ACIOL1-SET

シミルアイ前房 IOL 挿入用（有水晶体）セット

EYE-ACIOL1	シミルアイ前房 IOL 挿入用 /1 眼
EYE-ElevatedBase	シミルアイ 固定ベース
EYE-BT	シミルアイ 固定ベース用トレイ
EYE-Dispers5cc	分散性粘弾性代替材 /5cc シリンジ

標準価格 ¥46,500



SimulEYE ACIOL

SimulEYE® Multi-MIGS



品番：EYE-MM1

シミルアイ MIGS

標準価格 ¥32,400

このモデルは、様々な MIGS デバイス用として開発されました。TMH（谷戸マイクロフック法）のトレーニングに最適です。



シミルアイ
MIGS セット

Starter Kit

品番：EYE-MM1-SET

シミルアイ MIGS セット

EYE-MM1	シミルアイ MIGS / 1 眼
EYE-MIGSKit2,0	シミルアイ MIGS キット（スタンド & ベースホルダー）
EYE-Cohes5cc	粘性粘弾性代替材 /5cc シリンジ
EYE-Dispers5cc	分散性粘弾性代替材 /5cc シリンジ

標準価格 ¥63,100

SimulEYE® Xpand



品番：EYE-Xpand1

シミルアイ Xpand

標準価格 ¥36,200

シミルアイ IOL 挿入用（無水晶体）モデルを元に、Diamatrix 社 Xpand2 虹彩リングのトレーニング用に開発されました。瞳孔部分が小さく、Xpand2 虹彩リングを前囊の縁にひっかけ、カプセルと虹彩を同時にサポートできます。適切なケアと手術手技により、何度も再使用できるように設計されています。

Starter Kit

品番：EYE-XpandKit

シミルアイ Xpand キット

EYE-Xpand2	シミルアイ Xpand / 2 眼
EYE-ElevatedBase	シミルアイ 固定ベース
EYE-Cohes5cc	粘性粘弾性代替材 /5cc シリンジ / 2 個
EYE-Dispers5cc	分散性粘弾性代替材 /5cc シリンジ / 2 個

セット価格 ¥90,800

SimulEYE® ICL



品番：EYE-ICL-EF2CP

シミルアイ ICL

標準価格 ¥37,700

このモデルは、後囊と虹彩が半分の状態となっております。エクスパンドや APX などの CTR、その他不安定なカプセルを支えるために使用するデバイスを扱うのに理想的なモデルです。ハーフアイリスは、CTR の適切な挿入角度を理解し、これらのデバイスを使用する際に、カプセルを視覚化することができます。また、組織のリアリズムに優れたハーフアイリスに虹彩フックをセットすることも可能です。このモデルでは、フルアイリスが必要となる他の瞳孔拡張デバイスを使用することはできません。

Starter Kit

品番：EYE-ICLKit

シミルアイ ICL キット

EYE-ICL-BU1	ベースユニット
EYE-ICL-EF2CP	STAAR ICL（オープンスカイ + 全角膜） / 2 コンボバック
EYE-ElevatedBase	シミルアイ 固定ベース
EYE-Cohes5cc	粘性粘弾性代替材 /5cc シリンジ / 1 個
EYE-Dispers5cc	分散性粘弾性代替材 /5cc シリンジ / 1 個
EYE-Cohes1cc4	粘性粘弾性代替材 /1cc シリンジ / 4 個
EYE-Dispers1cc4	分散性粘弾性代替材 /1cc シリンジ / 4 個

セット価格 ¥125,100

SimulEYE® Pars Plana Vitrectomy



品番：EYE-PPV1

シミルアイ PPV（毛様体扁平部硝子体切除術）

標準価格 ¥24,800

このモデルは、PPV（毛様体扁平部硝子体切除術）用モデルです。
人工硝子体と非常によく再現された網膜を備えており、最先端のカッターによる硝子体切除術を視覚的に体験できます。
PPV モデルは気泡が侵入しないよう気密性が高く設計されており、適切な還流を実現できるように設計されています。

Starter Kit

品番：EYE-PPV-SET

シミルアイ PPV（毛様体扁平部硝子体切除術）キット

EYE-PPV1	シミルアイ PPV（毛様体扁平部硝子体切除術）/1 眼
EYE-ElevatedBase	シミルアイ 固定ベース
EYE-BT	シミルアイ固定ベース用トレイ
EYE-Cohes5cc	粘性粘弾性代替材 /5cc シリンジ /1 個
EYE-Dispers5cc	分散性粘弾性代替材 /5cc シリンジ /1 個

セット価格 ¥44,800

SimulEYE® A-Vit



品番：EYE-AVKit

シミルアイ A-Vit（前部硝子体切除術）キット

標準価格 ¥59,600

このモデルは毛様体扁平部アプローチにおいて、両手による前部硝子体切除術のトレーニングが可能です。術者は粘弾性物質を確認しながら、切除や吸引のタイミングをトレーニングすることができます。

EYE-AV1	シミルアイ A-Vit（前部硝子体切除術用）/2 眼
EYE-ElevatedBase	シミルアイ 固定ベース
EYE-BT	シミルアイ固定ベース用トレイ
EYE-Cohes5cc	粘性粘弾性代替材 /5cc シリンジ /1 個
EYE-Dispers5cc	分散性粘弾性代替材 /5cc シリンジ /1 個

SimulEYE® Membrane Peeling Kit Essential



品番：EYE-MPKitEss

シミルアイ 網膜剥離キット Essential

標準価格 ¥205,600

このキットは網膜膜剥離のトレーニングに必要な素材が揃っています。
硝子体鑷子や3D ビジュアライゼーションシステムのトレーニングにもご活用いただけます。
視認性に優れたガラス光学角膜が採用されており、膜を作成するためにゲルを塗布して乾燥させる必要もないため簡単にご使用いただけます。

EYE-MP1	シミルアイ MP(網膜剥離用, 網膜+膜付) / 1 眼
EYE-MPR4	シミルアイ MP(網膜剥離用) レフィル /4 個入り 1 パック
EYE-FOLS	光ファイバー光源 /1 個
EYE-BL	照明付きベース

SimulEYE®SLT LASER



品番：EYE-SLT1

シミルアイ SLT レーザー / 1 パック

標準価格 ¥19,000

内部には虹彩と色素沈着した隅角構造を有しており SLT レーザー治療を適用すると脱色素失します。

パルスや照射エネルギーを増加させると発生する気泡の「シャンパン バブル」も増加していきます。

SimulEYE®PRP



品番：EYE-PRP1

シミルアイ PRP Argon トリートメント / 1 パック

標準価格 ¥19,000

網膜のレーザートレーニングに使用できます。

黄斑の焦点治療、網膜裂孔の周辺部などのトレーニングに使用できます。

このモデルはオープンスカイ（角膜なし）となっており、レーザーのスポットサイズやパワー、持続時間などのパラメーターを調整しながらご使用下さい。

SimulEYE® LPI



品番：EYE- LPI1

シミルアイ LPI トリートメント / 1 パック

標準価格 ¥19,000

内部には4つの治療エリアを備えた虹彩になっています。

虹彩にPI（虹彩切開）を作成するためには、複数のレーザースポットを正確に照射する必要があります。PIを作成すると赤色反射が確認できるモデルとなっております。実際のレーザー出力の設定で利用可能です。

Accessories



品番：EYE-ElevatedBase
シミルアイ 固定ベース

標準価格 ¥7,600

前眼部モデルに付属する専用固定ベースは、吸着力に優れ、シミルアイを安全に保持するための、安定した再利用可能なプラットフォームです。



品番：EYE-BT
シミルアイ
固定ベース用トレイ

標準価格 ¥7,600

固定ベースと組み合わせて使用するトレイ。トレーニング中に発生する液体を受け止めることが可能です。



品番：EYE-Cohes5cc
粘性粘弾性代替材
/5cc シリンジ

標準価格 ¥2,400

カニューレ付き 5cc シリンジの粘弾性剤。



品番：EYE-Dispers5cc
分散性粘弾性代替材
/5cc シリンジ

標準価格 ¥2,700

カニューレ付き 5cc シリンジの表面コーティング用ジェル。



品番：EYE-MIGSKit2.0
シミルアイ MIGS キット
(スタンド&ベースホルダー)

標準価格 ¥26,700

MIGS モデルの取付キット。しっかりと吸着し、頭の傾きや目の位置の調整をしながらの実践的トレーニングが可能です。



品番：EYE-C-clips
シミルアイ C クリップ
(MIGS 用) / 2ヶ入り

標準価格 ¥2,000

C-クリップは、SimulEYE® Eye Front を再使用可能なベースユニットにしっかりと固定するために開発されました。Eye Front は通常、圧入により取り付けられますが、手術操作によりずれることがあります。C-クリップを使用すると、Eye Front をベースユニットにしっかりと固定することができます。C-クリップは多くのキットに含まれていますが、必要に応じて別途注文することもできます。取り付けの際は、Eye Front の位置を合わせ、C-Clip の平らな面を下にしてください。



品番：EYE-SR10R
シミルアイ CCC 作成用
前嚢フィルム 10枚+角膜1個

標準価格 ¥26,700

CCC 作成用の交換用フィルム。



品番：EYE-MM1
シミルアイ MIGS / 1 眼

標準価格 ¥32,400

MIGS デバイス用の半球モデル。



品番：EYE-SLStand
シミルアイ
スリットランプスタンド

標準価格 ¥38,100

レーザー用のスリットランプにスタンドを固定。アイポイントにあたる部分に合わせて設置上下の高さや角度などの変更も可能です。スリットに装着したら、使用したい模擬眼をつけてください。



A Passion for a Nice View

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2
名古屋ベース：〒462-0064 愛知県名古屋市北区大我麻町285 A1
大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18ユミール
九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17
Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp

TEL: 03-3814-1731 FAX: 03-3814-3334
TEL: 052-934-7489 FAX: 052-934-7490
TEL: 0798-37-2880 FAX: 0798-37-2881
TEL: 092-504-1734 FAX: 092-504-5355

official web site



製造販売業許可番号 13B1X00048

2024/11/v1.0

※本カタログ記載価格は、すべて2024年11月現在の税別標準小売価格となっております。
※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※製品サイズには公差があるため、実際の製品は本カタログ記載サイズと若干前後する場合があります。
※本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものとは異なる場合があります。
※本カタログ中のQRコードのリンク先は予告なく閉鎖、または変更する場合があります。
※本カタログ中のQRコードは印字の状態によりリンク先が正しく表示されない場合がございます。