

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体


緑内障

角膜

外眼病

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

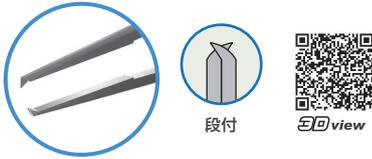Quick
Service Best
Seller


マイクロ角膜縫合鑷子 C 型 ウルトラファイン 0.12mm

M-5R 全長 85mm / 鉤幅 0.12mm ¥54,000 JAN:4547451042198

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001205 入 1

マイクロ有鉤鑷子の代名詞的アイテム。

発売以来、絶大な人気を誇るベストセラー。マイクロサージャリー用最も基本的な器具として愛用されています。

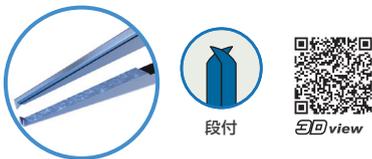Quick
Service PICK
UP

縫合鑷子 前方突出型 (80度) 段付

DS-003 全長 90mm / 鉤幅 0.12mm ¥62,000 JAN:45474510420890

材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001660 入 1

使い易さを徹底的に追求した定番スタイルのチタニウムモデル。

長年の経験と研究により先端の爪の角度を改良。前方突出の「つまみ易さ」と直角型の「がっちりした把持力」を両立しました。先端は、鉤のサイズ、角度にこだわり、タングステンカーバイド加工を施しております。また、操作感を追求し、滑り止めハンドル機構の採用や、吸いつくような把持感を生み出す最適なテンションを採用しております。

Quick
Service Best
Seller

MB-012 MB-012



縫合鑷子 前方突出型有鉤 段付


MB-012 全長 88mm / 鉤幅 0.12mm ¥62,000 JAN:4547451045571

MB-012F 全長 88mm / 鉤幅 0.10mm ¥62,000 JAN:4547451045588

材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001258 入 1

ソフトなテンションとタングステンの把持力がコラボ。

ソフトなテンションと、微細な鉤が組織に対するダメージを軽減しつつ、タングステンによるしっかりとした把持を可能とした、絶妙な使い勝手が魅力です。

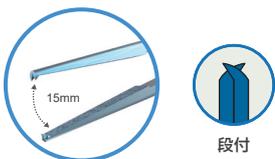

フラッパー縫合鑷子 前方突出型 有鉤 0.1mm 段付

DS-012FFL 全長 90mm / 鉤幅 0.10mm ¥69,000 JAN:4547451320654


材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000858 入 1

人気のフラッパー（15mmの開き）を採用。

MB-012F をベースとした、人気のフラッパーシリーズ。把持する際、まるで指でつまんでいるかのようなフィーリングが得られます。

Quick Service

鑷子

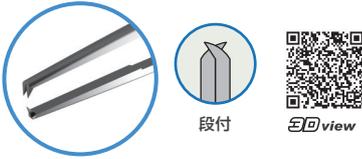

マイクロ角膜縫合鑷子 C 型
エクストラデリケート 0.15mm

M-4R 全長 85mm / 鉤幅 0.15mm ¥46,000 JAN:4547451042037
材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001205 入 1

スタンダードなマイクロサージャリー用有鉤鑷子。

マイクロサージャリーに適したデリケートな前方突出型有鉤鑷子。鉤幅は 0.15mm となっております。

剪刀

開險器

持針器


Quick Service

Best Seller

カニューーラ

S-388
S-387

スパーテル

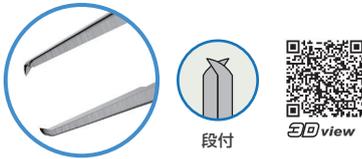

カストロヴィーホー氏角膜縫合鑷子

S-388 ウルトラファイン 全長 105mm / 鉤幅 0.12mm ¥54,000 JAN:4547451043881
S-387 エクストラデリケート 全長 105mm / 鉤幅 0.35mm ¥50,000 JAN:4547451043874
S-386 デリケート 全長 105mm / 鉤幅 0.40mm ¥40,000 JAN:4547451043867
受 **S-385** - 全長 105mm / 鉤幅 0.45mm ¥40,000 JAN:4547451043850

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001204 入 1



ロングハンドルの定番。

ロングハンドルが好みの方、または手の大きな方から絶大な人気を誇ります。先端はマイクロタイプから各サイズとり揃えております。S-388 の先端 0.12mm マイクロタイプは発売以来のベストセラー商品です。

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイ

AtoZ

memo

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体


緑内障

角膜

外眼病

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

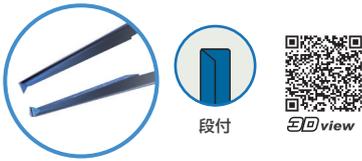Quick
Service

段付

ED view



縫合鑷子 直角型有鉤 段付


MB-011 全長 88mm / 鉤幅 0.12mm ￥60,000 JAN:4547451045557

MB-011F 全長 88mm / 鉤幅 0.10mm ￥62,000 JAN:4547451045564


材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001258 入 1

ソフトなテンションとタングステンの把持力がコラボ。

ソフトなテンションと、微細な鉤が組織に対するダメージを軽減しつつ、タングステンによるしっかりとした把持を可能とした、絶妙な使い勝手が魅力です。

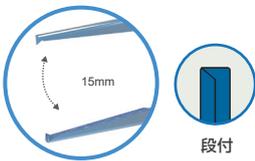

段付

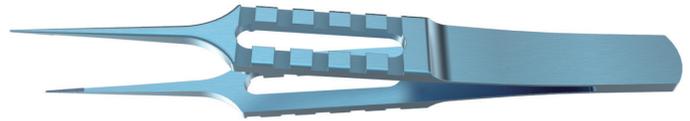


フラッパー縫合鑷子 直角型有鉤 0.1mm 段付

薬 DS-011FFL 全長 90mm / 鉤幅 0.10mm ￥66,000 JAN:4547451320647

材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048000857 入 1

人気のフラッパー（15 mmの開き）を採用。

MB-011Fをベースとした、人気のフラッパーシリーズ。把持する際、まるで指でつまんでいるかのようなフィーリングが得られます。

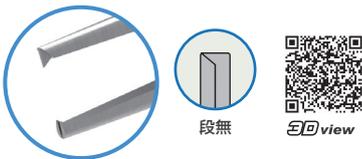Quick
ServiceBest
Seller

段無

ED view




三島式角膜鑷子 オリジナルモデル

S-9B 全長 76mm / 鉤幅 0.12mm ￥51,000 JAN:4547451044314

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001058 入 1

把持部と先端の近接設計により微細なコントロールを実現。

マイクロ直角型有鉤鑷子の定番。把持部と先端の距離が近接していることで、より繊細な作業が可能です。鉤幅も使いやすい0.12mm設計となっております。

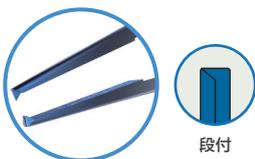PICK
UP

段付




上野式マイクロ有鉤鑷子 段付 チタニウム

DS-20R 全長 80mm / 鉤幅 0.12mm ￥64,800 JAN:4547451320838

材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048000846 入 1

あらゆる手術の微細な操作をこなす万能タイプ。

グリップ位置と把持部が近接したことで操作性が飛躍的に向上しました。また軽量のチタニウム素材を採用したことで、術者の手の動きをそのまま反映する操作性を実現しました。更に先端タングステンカーバイド加工が組織・糸をより確実に把持します。

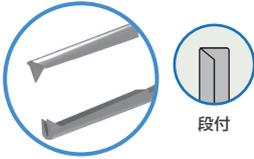

段付




三島式有鉤鑷子

S-9D 全長 100mm / 鉤幅 0.15mm ¥30,000 JAN:4547451312987

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048000656 入 1

マイクロ直角型有鉤鑷子の廉価モデル。

コストパフォーマンスに優れたマイクロタイプ。段付きの設計で結紮もスムーズにこなすことが可能です。

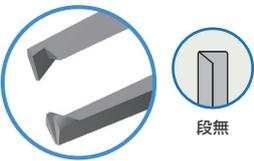

段無



ビショップ・ハーモン氏薄片組織鑷子 有鉤


S-350A - 全長 85mm / 鉤幅 0.35mm ¥30,000 JAN:4547451043775

S-351A デリケート型 全長 85mm / 鉤幅 0.25mm ¥30,000 JAN:4547451043799

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001201(S-350A) 入 1
13B1X00048001202(S-351A)

指のポジショニングが便利な丸窓ハンドルを採用。

ハンドルに丸窓を3箇所用意する事により、グリップ時の指のポジショニングを常に一定に保つことが可能です。

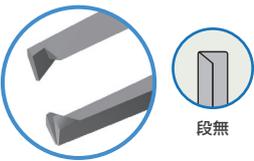

段無




ドイツ型有鉤鑷子

S-316 全長 100mm / 鉤幅 0.40mm ¥13,200 JAN:4547451043713

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001278 入 1

診察室・外来処置での使用を目的に設計された定番タイプ。


診察室や外来処置において、ユーティリティーに使用することを目的に開発されました。

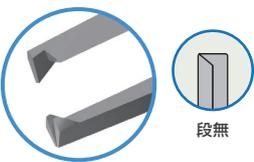

段無



EDview

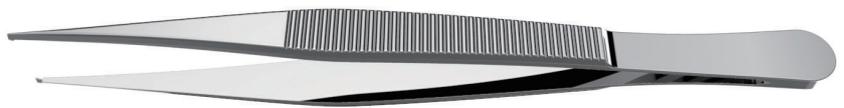

有鉤鑷子 直

S-310A 全長 110mm / 鉤幅 0.50mm ¥9,500 JAN:4547451327295

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001895 入 1

診察室や外来処置でマルチに活躍する定番モデル。

診察室や外来処置において、ユーティリティーに使用することを目的に開発されました。

鑷子

剪刀

開險器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

Quick Service

関連用品

サージカルナイフ


ディスプレイ

AtoZ

鑷子

Quick Service

剪刀

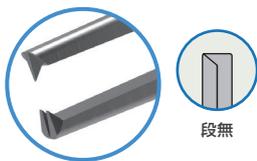

ボン大学式虹彩鑷子 直

S-410 全長 73mm / 鉤幅 0.12mm ¥41,000 JAN:4547451043898

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001290 入 1

虹彩操作に最適な設計を施した定番モデル。

先端は虹彩をつかみやすく、傷つけにくい微細な直角型有鉤を採用。また小振りなフォルムとスリムなシャフトによる柔軟なしなりが、虹彩に余計な負荷を与えずに安全かつ優れた操作性を実現します。


開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

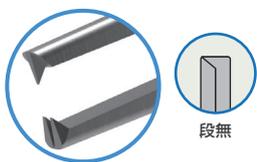

ボン大学式虹彩鑷子 曲

S-411 全長 73mm / 鉤幅 0.12mm ¥44,000 JAN:4547451043904

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001290 入 1

定番虹彩鑷子の曲タイプ。


定番虹彩鑷子 S-410 の曲ユーザーモデル。直ユーザーにおいても角度的に操作が困難な状況などスポット的な使用にも適しております。

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

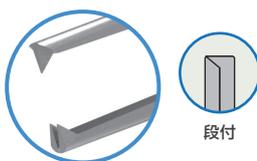

ボン大学式 虹彩鑷子 直 段付

M-20R 全長 76mm / 鉤幅 0.12mm ¥50,000 JAN:4547451041740

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001291 入 1

ユーティリティーな使用が可能な段付き虹彩鑷子。

虹彩鑷子の定番形状（S-410）にプラットフォームをプラスしました。把持の際に面と面が合わさる特長により得られる安定した把持力が魅力です。結膜・強膜の把持や結紮などのユーティリティーな使用も可能です。


角膜

外眼病

Quick Service

関連用品

サージカルナイフ

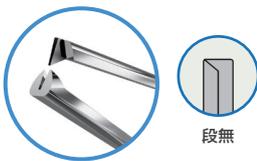

ギル氏虹彩鑷子

S-413 全長 76mm / 鉤幅 0.12mm ¥28,000 JAN:4547451034834


材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048000119 入 1

視認性としなりに優れた曲タイプ。

スリムな湾曲シャフトが、虹彩操作時の視認性と最適なしなりを生み出します。曲ユーザーやコプリタイプのハンドルをお好みの方にお勧めです。また、角度的に直では操作が困難な状況下や、より視認性が要求される状況などスポット的な使用にも適しております。

ディスプレイ

AtoZ

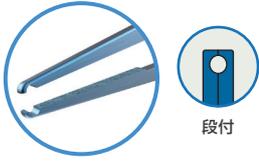

段付

縫合鑷子 直 P-H 型 0.3mm 段付


MB-013 全長 88mm / 鉤幅 0.30mm ¥55,000 JAN:4547451045595

材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001258 入 1



組織のダメージを最小限に抑える技術を惜しみなく搭載。

組織をホールドする感覚でつまめる P-H 型の特性に、優しいテンション、タングステンカーバイド加工、段付き加工をプラスしました。組織へのダメージを更に軽減しつつ、より確実な把持を実現しました。結紮もこなせる汎用性も魅力です。

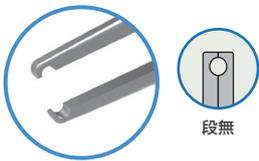

段無



view

三島式角膜鑷子 P-H 型


S-9C 全長 80mm / 鉤幅 0.40mm ¥30,000 JAN:4547451312932

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000442 入 1



結膜を優しくホールドするようにつまめる P-H 型の定番。

先端で結膜をホールドするように把持できる P-H 型の初期モデル。組織のダメージを最小限に抑えることが可能です。

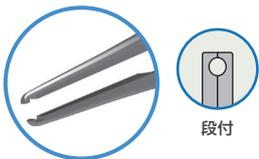


段付

マイクロ角膜・縫合鑷子 P-H 型

M-3R 全長 83mm / 鉤幅 0.40mm ¥32,000 JAN:4547451312918

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000439 入 1

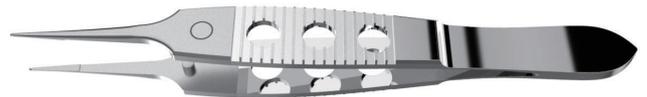

段付き P-H 型の定番。

段付設計により、把持の際に、面と面が合わざるため、先端のかみ合わせと把持力が安定しました。また、プラットホームを利用し、結紮も行うことが可能です。指のポジション用丸窓式ハンドルも人気です。

memo

鑷子

剪刀

開險器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイ

AtoZ

Quick Service

Quick Service

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体


緑内障

角膜

外眼病

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

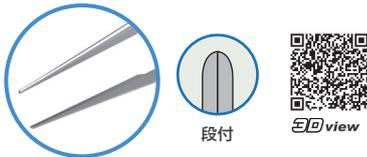Quick
ServiceBest
Seller

段付

Eto view




面がほぼ同時に閉じて、糸や組織が滑らない絶対推奨の無鉤鑷子。

通常の鑷子は、把持の際先端から徐々に閉鎖していく機構となっておりますが、M-1Rは把持面が同時に近い感覚で閉じるように設計されております。これにより把持面全体にほぼ均一な力が作用するため、結紮糸をどの面で捉えても、より滑らずに安定した操作が可能です。また、この特性により、結膜などの組織を把持する際も、優しく、確実な把持を実現します。圧倒的なユーザーを誇る人気の商品です。

マイクロ結紮鑷子 M型

M-1R 全長 83mm / 先端 0.30mm ¥38,000 JAN:4547451049418

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001164 入 1

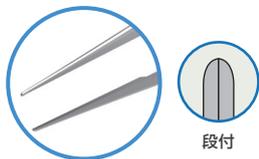Best
Seller

段付

Eto view




絶対推奨のベストセラー M-1R ワイドハンドル。

絶対推奨のベストセラー M-1R のワイドハンドル。手の大きな方やワイドハンドルユーザーから絶大な人気を誇ります。

マイクロ結紮鑷子 ワイドハンドル

M-1RW 全長 87mm / 先端 0.30mm ¥39,000 JAN:45474510412901

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001164 入 1

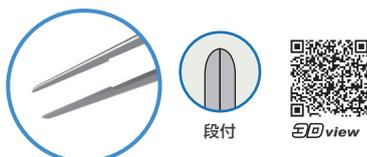Quick
ServiceBest
Seller

段付

Eto view




使いやすいファインで定番の無鉤鑷子。

先端から徐々に閉鎖していく通常タイプの無鉤鑷子。段付き設計のため、安定した結紮が可能です。また組織をつまむようなアプローチにもファインな操作性を発揮します。

マイクロ結紮鑷子 T型

M-2R 全長 83mm / 先端 0.30mm ¥40,000 JAN:4547451041931

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001164 入 1

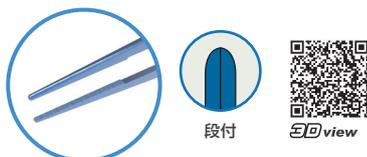Quick
ServiceBest
Seller

段付

Eto view




タングステン加工の把持力が自慢のチタニウムの定番無鉤鑷子。

使いやすい段付きタイプ。先端にはイナミ独自のタングステンカーバイド加工を施しており、糸や組織が面に吸いつくような把持を実現することに成功しました。また、チタニウム製による軽量化と、軽めに設定したテンションが術者の疲労を軽減するとともに、手元での微細な操作を可能とします。

結紮鑷子 直 0.3mm 段付

MB-010 全長 88mm / 先端 0.30mm ¥54,000 JAN:4547451045540

材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001164 入 1

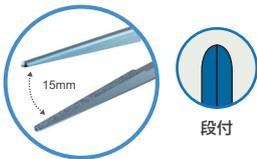
PICK
UP

段付

フラッパー結紮鑷子 段付


DS-010FL 全長 90mm / 先端 0.30mm ¥56,000 JAN:4547451320630

材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000856 入 1

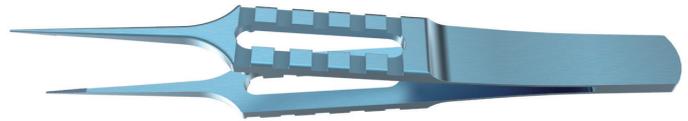

指でつまむようなアプローチが人気のフラッパーモデル。

先端の開きが把持の際にまるで指でつまんでいるかのようなアプローチを実現します。先端には、イナミ独自のタングステンカーバイド加工による把持力を有し、更に「ファイリング」という視点を追加した一歩上の使い心地を目指した上位モデルです。

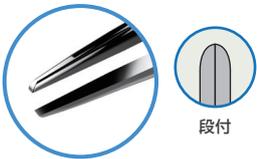

段付

チュービンゲン型結紮鑷子 直 無鉤

M-19R - 全長 100mm / 先端 0.60mm ¥30,000 JAN:4547451041719


受 M-19RD ファインチップ 全長 100mm / 先端 0.30mm ¥36,000 JAN:4547451041726

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001163 入 1



ミドルサイズのハンドルを採用。先端は選べる2サイズ。

マイクロ鑷子のスタンダードサイズより若干大きめのミドルサイズを採用しました。通常タイプでは若干小さいと感じる方には最適なサイズとなっております。先端は、太めの糸でもしっかりと握める0.6mmモデルと、汎用性の高い0.3mmモデルの2タイプからお選びいただけます。

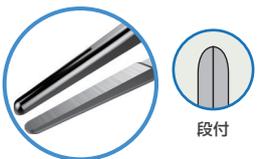

段付

マイクロ結紮鑷子

M-170R エクストラデリケート 全長 85mm / 先端 0.35mm ¥30,000 JAN:4547451041573


M-171R ウルトラファイン 全長 85mm / 先端 0.30mm ¥37,400 JAN:4547451041580

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001162 入 1



ベストセラー M-5R、M-4Rの無鉤タイプ。

前方突出型有鉤鑷子のベストセラー M-5R、M-4Rの無鉤タイプ。M-170RはM-4Rを、M-171RはM-5Rを基準にしております。

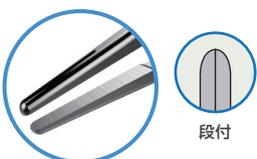


段付

ソーブ型結紮鑷子

M-165R 全長 105mm / 先端 0.30mm ¥28,000 JAN:4547451312963

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000108 入 1

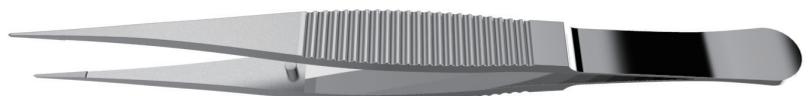

コストパフォーマンスに優れたマイクロ無鉤鑷子。

マイクロ無鉤鑷子のロングハンドルユーザーモデル。ややスレンダーな形状をしており、コストパフォーマンスにも優れた商品です。

鑷子

剪刀

開險器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体


緑内障

角膜

外眼病

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

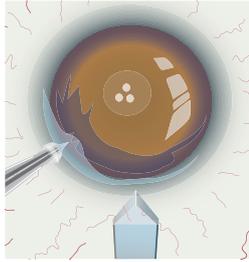Quick
ServicePICK
UP


突起付ジュエラー鑷子

M-2190 全長 110mm / 先端 0.2mm / 突起部 (閉じた状態) 2.0×1.3mm
¥30,000 JAN:4547451325109

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001770 入 1

経結膜・強角膜一面切開法から眼球固定まで、
ユーティリティーな活用が魅力。

経結膜・強角膜一面切開法において、先端のふくらみを利用し、サイドポートからの粘弾性物質の流出を防ぎ、前房圧を保つ役割を果たします。また、眼球固定など、ユーティリティーに活躍する非常に利便性の高い鑷子となっております。

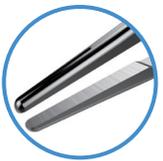

段付



カストロヴィーホー型結紮鑷子

S-381 全長 108mm / 先端 0.30mm ¥36,000 JAN:4547451326304

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001832 入 1

定番カストロハンドルタイプの無鉤がご要望に応えラインナップ。

大きなハンドルで定番のカストロハンドル鑷子に無鉤タイプがラインナップ。カストロハンドルユーザーのニーズにお応えした待望の商品です。



段付



EDview



河合氏万能鑷子

M-1631 全長 107mm / 先端 0.3mm ¥51,000 JAN:4547451332593

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048002311 入 1

先端部にアングルがついてるので、顕微鏡下での視認性に優れており、鑷子全体に厚みを持たせた製品になっているため、先端が細くても把持力が高く、太い糸から細い糸まで安定した操作が可能です。また結膜や強膜の把持、トロカールの把持などにも使え用途が幅広くユーティリティーな鑷子となっているのが特徴です。



段付

Quick
Service


結紮・縫合用鑷子 直

KI-9 全長 93mm / 先端 0.50mm ¥24,000 JAN:4547451312888

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001521 入 1

段付きで使いやすいシンプルで伝統の湖崎ハンドル。

シンプルで伝統の湖崎ハンドルにプラットフォームを搭載しました。太い針もしっかりと握めるやや幅広い先端サイズを採用しております。

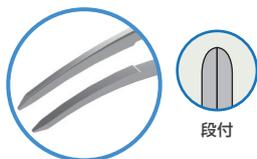

段付

結紮・縫合用鑷子 曲

KI-8 全長 87mm / 鉤幅 0.50mm ￥25,000 JAN:4547451312871

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001521 入 1



KI-9 の曲タイプ。

シンプルで伝統の湖崎ハンドルの曲ユーザーモデル。太い針もしっかりと掴めるやや幅広い先端サイズを採用しております。



段無

三島式結膜鑷子


S-9A 全長 80mm / 先端 0.65mm ￥32,000 JAN:4547451312925

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001203 入 1



優しくも、しっかりとした結膜の把持が可能なセレーション鑷子。

先端にデザインされた浅いセレーションが、結膜を優しく、且つしっかりと把持することが可能です。

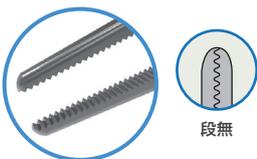

段無

ビショップ・ハーモン氏薄片組織鑷子 無鉤

S-350B - 全長 87mm / 先端 0.85mm ￥30,000 JAN:4547451043782

S-351B デリケート型 全長 87mm / 先端 0.50mm ￥30,000 JAN:4547451043805

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001201(S-350B) 入 1
13B1X00048001202(S-351B)



ユーティリティーに使用できるセレーションタイプ。

先端の幅広セレーションが、組織や消耗品の把持など、ユーティリティーに活用することが可能です。また指のポジショニングが便利な丸窓式のハンドルも特長です。

memo

鑷子

剪刀

開眼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイ

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体


緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

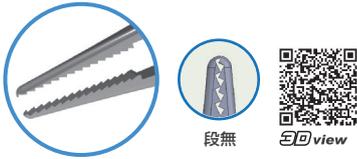Quick
ServiceBest
Seller

段無

Eto view




ソープ氏角膜異物鑷子

S-331 全長 108mm / 先端 0.50mm ￥20,000 JAN:4547451049432

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001478 入 1

ユーティリティーに使用できる高性能マイクロセレーション鑷子。

マイクロな高性能セレーション鑷子。組織の把持はもちろん、異物除去や、霰粒腫の残渣除去に至るまで、幅広く活用できる汎用性が魅力です。ハンドルはロングサイズでありながら、グリップ位置は先端に近接しているため、手元での細かい操作も可能です。

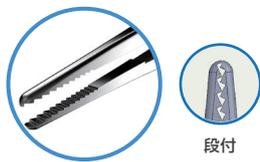

段付




ソープ氏角膜異物鑷子 段付

S-312 全長 100mm / 先端 0.50mm ￥20,900 JAN:4547451043720


材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048000289 入 1

人気の S-331 をベースに開発された段付きセレーション鑷子。

S-331 をベースにより結紮を便利に行うことなどを目的に段付きとして開発されました。ハンドルはミドルサイズを採用しております。

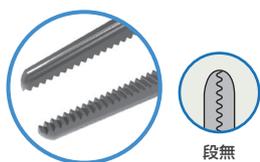

段無

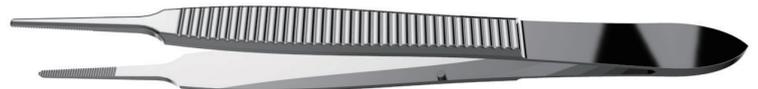


ドイツ型無鉤鑷子

S-317 全長 98mm / 先端 1.00mm ￥16,000 JAN:4547451043720

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001279 入 1


診察室・外来処置での使用を目的に設計された定番タイプ。

診察室や外来処置においてユーティリティーに使用することを目的に開発されました。

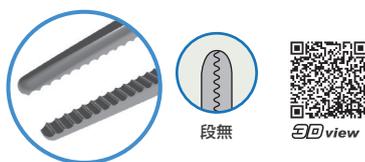

段無

Eto view

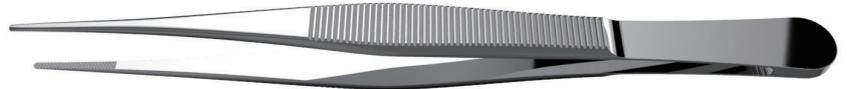Quick
Service

無鉤鑷子 直


S-313A 全長 110mm / 先端 1.00mm ￥9,000 JAN:4547451043701

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001896 入 1

診察室や外来処置でマルチに活躍する定番モデル。

診察室や外来処置においてユーティリティーに使用することを目的に開発されました。

Best Seller

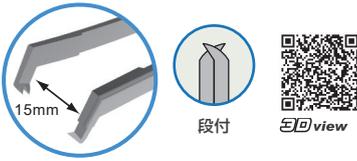



フラッパーマイクロコリブリ鑷子

M-177CN 全長 76mm / 鉤幅 0.12mm ¥72,000 JAN:4547451320289
 材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001931 入 1

かつてないフィット感と指先のようなフィーリングを実現。

先端の開きをやや広めの 15mm に設定しました。コリブリ型独特のハンドル形状との相乗効果により、手にぴったりと吸い付くようなかつてないフィット感と安定感を実現しました。また、15mm の開きから生まれるテンションとアプローチは、まるで指先のような操作性を体感することが可能です。先端の鉤は、あらゆる組織の把持が容易になるよう、高精度のくちばし型デザインとなっております。

PICK UP

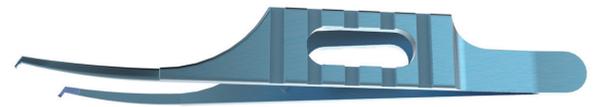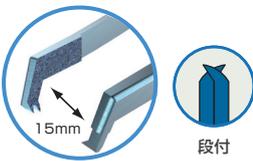


フラッパーマイクロコリブリ鑷子
チタニウム

DS-177CN 全長 76mm / 鉤幅 0.30mm ¥89,000 JAN:4547451330261
 材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001659 入 1

M-177CN のハイグレードモデル。

かつてないフィット感とまるで指先のようなフィーリングを実現する M-177CN にチタニウムによる軽量化と、イナミ独自のタングステン加工による把持力がプラスされました。最高の操作性を実現するハイグレード鑷子です。

Quick Service Best Seller

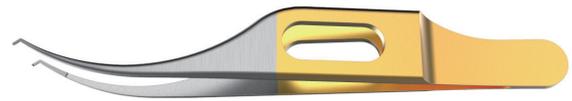


コリブリ鑷子 角膜結膜縫合用

M-180A 全長 74mm / 鉤幅 0.12mm ¥55,000 JAN:4547451334668
 材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002349 入 1

フィット感が魅力の人気のコリブリ鑷子定番モデル。

先端は段付きで、マイクロサージャリーに適した 0.12mm の前方突出型を採用。また、ハンドルはグリップ時のフィット感を高める窓式を採用しております。コリブリ型ユーザーからは定番モデルとして愛用されております。

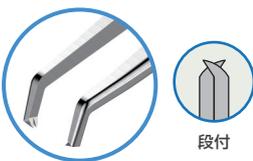

コリブリ・トラウトマン鑷子
エクストラデリケート 0.12mm 段付

M-177A 全長 78mm / 鉤幅 0.12mm ¥46,000 JAN:4547451041627
 材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001289 入 1

汎用性の高い段付きのシンプルで使いやすいコリブリ鑷子。

シンプルなコリブリ鑷子。マイクロサージャリーに適した 0.12mm の前方突出型を採用しております。段付きのため、結紮も便利に行えます。

鑷子

剪刀

開險器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイ

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル


AtoZ



EIB/view



段付

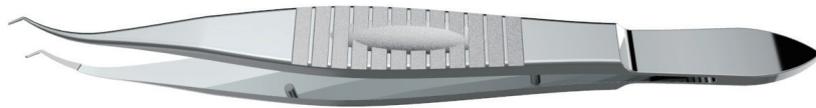

河合氏角膜縫合鑷子 0.12mm コリブリ型


M-1630A 全長 107mm / 鉤幅 0.12mm ￥55,000 JAN:4547451333586

材 SUS 薬 クラスI JMDN 16209001 届 13B1X00048002310 入 1

先端部にアングルがついてるので、顕微鏡下の視認性に優れており、鑷子全体に厚みを持たせた製品になっているため、先端が細くても把持力が高く、太い糸から細い糸まで安定した操作が可能です。また結膜や強膜の把持、トロカールの把持などにも使用用途が幅広くコーティティな鑷子となっているのが特徴です。



段付

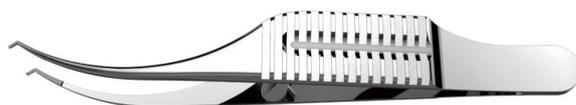

コリブリ鑷子

エクストラデリケート 0.25mm 段付

M-175A 全長 78mm / 鉤幅 0.25mm ￥41,800 JAN:4547451041603

材 SUS 薬 クラスI JMDN 16209001 届 13B1X00048001287 入 1

汎用性の高いやや幅広の直角型有鉤コリブリ鑷子。

シンプルなコリブリ鑷子。先端はやや幅広の直角型有鉤を採用しております。段付きのため、結紮も便利に行えます。

memo

PICK UP

鑷子

剪刀

開險器

持針器

カニユ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ



ED view



まぶたに優しく押し当て根元から確実に睫毛除去できる決定版。その名も「まつげのQ太郎」

先端に設けたセレーションが、涙液を逃がしつつ、睫毛をしっかりと挟みこむため、滑りやすい細い睫毛も、滑らずに簡単に除去することが可能です。また、こだわりの丸みを帯びた先端をまぶたに優しく押し当てることで、根元から確実に除去することも可能です。術者にも患者さまにおいても、ストレスの無い除去をサポートする睫毛鑷子の決定版です。

ご考案者 田島 康弘 先生（埼玉県 吉川市 たじま眼科・形成外科）コメント

「逆さ睫毛が抜けなくて、イライラしていませんか?あなたのイライラ解消します!スリットから見える逆さまつげは毛が3本。掴んで抜けば、ドロンパとなります。新発想の睫毛抜きです。一度に複数の睫毛を掴めます。先端に睫毛を挟んでも切れ難いギザを先端方向に取り付けました。(固定概念を打ち破ります。)眉間や指の細い毛を挟んでみてください。このギザの良さが実感できます。

【使用方法】

本体の滑り止め部分を持ちます。睫毛に対して横並行に使用し、いつものように引っ張り抜きます。

【特徴】

- ① 先端に丸みをもたせる事により、頬に押し付けても痛みがでません。
- ② 先端を下にして立てても、ギザは先端までありませんので、長期使用でも噛み合わせが悪くなりやすいです。
- ③ 一度に複数の睫毛が抜けます。

是非、霰粒腫ピンセット（おともくん）と共に外来診療にお役立てください。」




睫毛鑷子 まつげのQ太郎

M-2211 全長 103.0mm / 先端 4.5mm ￥40,000 JAN:4547451328520

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001965 入 1



ED view

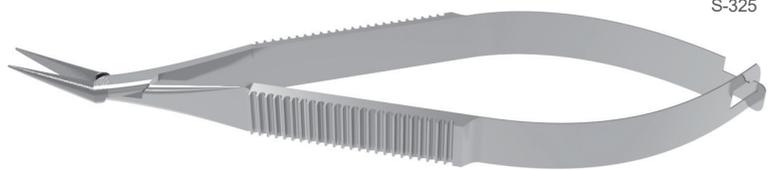

Quick Service Best Seller S-325

ポーブル氏睫毛鑷子

S-325 全長 100mm / 先端 0.5mm ￥45,000 JAN:4547451043744

S-325F ミクロファイブ 全長 100mm / 先端 0.3mm ￥50,000 JAN:4547451048367

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048001196 入 1

圧倒的な人気を誇る睫毛鑷子の代名詞的商品。

発売以来圧倒的な人気を誇るバナネ式の睫毛鑷子。テンポラルアプローチスタイルでの把持に適した形状をしているため、操作時の視認性にも優れ、患者さまの余計な不安感を軽減することが可能です。把持の際は面でぴったりと捉えるため、軽い力でもノンスリップの把持が可能であり、抜去時の痛みも最小限に抑えることが可能です。



Quick Service

ポーブル氏睫毛鑷子 チタニウム

DS-325TC 全長 110mm / 先端 0.5mm ￥66,000 JAN:4547451320845

材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 届 13B1X00048000952 入 1

大人気ポーブル氏睫毛鑷子のハイエンドモデル。

圧倒的な人気を誇る S-325 ポーブル氏睫毛鑷子のチタニウムモデル。テンポラルアプローチスタイルの使い勝手は勿論、先端にはイナミ独自のタングステンカーバイド加工が施されており、よりノンスリップな睫毛除去を実現することに成功しました。患者さまの負担もより軽減され、ハイエンドモデルとしての性能を発揮いたします。

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ



view




低価格とタフネスが魅力のボーブル氏睫毛鑷子。

先端開閉部根元のヒンジ部にひねりを加え、ツイスト型にデザインしました。このツイストヒンジは、長期間継続的に使用した際に懸念されるヒンジ部の緩みによる先端のスレなどのかみ合わせ不良を予防する優れた耐久性を発揮いたします。

ボーブル氏睫毛鑷子ツイストヒンジ

S-325TH 全長 100mm / 先端 0.5mm ¥36,000 JAN:4547451312819

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001501 入 1

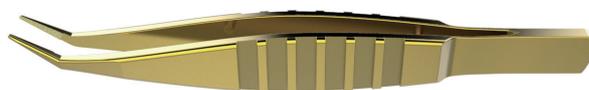

小さな動作で微細な操作も簡単にこなすスマートな睫毛鑷子。

操作時の手ブレを防止するため、器具の開きを最小限に抑え、最小の動作での把持が出来るよう設計しました。また、イナミオリジナルのタングステンカーバイド加工により、より一層滑らない先端も実現しております。素早くそして微細な操作性、力強さを併せ持つ、ゴールドのチタニウムボディの存在感に負けないスマートな睫毛鑷子です。

ゴルペン結紮・睫毛鑷子

DS-008GO 全長 78mm / 先端 0.5mm ¥44,000 JAN:4547451325185

材 Ti 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000997 入 1

Quick
Service

コストパフォーマンスが魅力のシンプルで使いやすい睫毛鑷子。

ご考案者 小林 茂樹 先生 (仙台市 青葉区 小林眼科医院) コメント

「昭和初期にトラコーマ治療に使用された越智式魚皮結膜擦過器に発想を得て、把持部内面全体にタングステンカーバイド加工を施すとともに把持部全体が同時に閉じることに、脂肪や涙液による滑りを解消し、細く、短い睫毛もストレスなく、容易に除去可能とした。また、結紮や抜糸に対しても有効にした。」

小林氏結紮・睫毛鑷子

M-008 全長 85mm / 先端 0.5mm ¥20,000 JAN:4547451043751

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001771 入 1



使いやすくシンプルで低価格な睫毛鑷子。

先端はテンポラルアプローチスタイルで、面で把持することが可能な理想的な睫毛鑷子。シンプルな操作性が人気のコストパフォーマンスモデルです。

バラッカー氏睫毛鑷子

S-327 全長 105mm / 先端 0.5mm ¥26,000 JAN:4547451043751

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001059 入 1

Quick Service



ドルフィン型 マイクロ睫毛鑷子

M-1615 全長 105mm / 先端 0.5mm ¥26,000 JAN:4547451320128

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000455 入 1

指のポジショニングが便利なシンプルな睫毛鑷子。

先端はテンポラルアプローチスタイルで面で把持することが可能な理想的な睫毛鑷子。ハンドルは指のポジショニングが便利な丸窓式を採用しております。

Quick Service

Best Seller



ED view



結膜用・縫合鑷子

K1-21 スタンダード 全長 100mm / 先端 0.5mm ¥25,000 JAN:4547451041177

K1-22 デリケート 全長 100mm / 先端 0.3mm ¥26,000 JAN:4547451041184


材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001281 入 1

伝統的な湖崎ハンドル式のロングセラー睫毛鑷子。

シンプルで伝統的な湖崎ハンドル式の睫毛鑷子。睫毛除去以外にも結膜把持などユーティリティーに活躍します。発売以来根強い人気を誇るロングセラーモデルです。

Quick Service

Best Seller

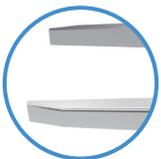

ED view



K.I. 式スリットランプ用 ノングレア睫毛鑷子

K1-13 全長 93mm / 先端 0.8mm ¥23,000 JAN:4547451041160

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001959 入 1

微細なオペレーションを実現するマイクロピックタイプ。

先端はピックスタイルの睫毛鑷子としては非常に微細なサイズ設計となっております。よりピンポイントの微細なオペレーションが可能となります。ハンドルは、グリップ時の指に吸いつくようなフィット感を重視したデザインを採用しております。

Quick Service



グラドゥール氏睫毛鑷子

S-324 全長 97mm / 先端 1.5mm ¥33,000 JAN:4547451034612

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000402 入 1

軽い力でしっかりと把持できるピックスタイルの睫毛鑷子。

バネ式、ピックタイプの睫毛鑷子。軽い力で強い把持力を生む構造となっております。やや正面から、指でつまみにいくようなアプローチのスタイルです。

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイ

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ



view



小川氏睫毛鑷子

S-320 全長 97mm / 先端 2.0mm ￥8,000 JAN:4547451043737

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000158 入 1

指先でつまむ感覚で操作できる睫毛鑷子。

指先操作を表現する睫毛鑷子。折り曲げ型の構造によって生まれる独特のテンションとピック型の先端により、まさに指先でつまむかのようなフィーリングで操作することが可能です。

memo

Quick Service



3D view



眼球固定鑷子 直

S-360S 止付 全長 110mm ¥32,000 JAN:4547451043829

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001282 入 1

眼球固定はもちろん、給水スポンジなどの固定にも最適。

3本の爪でしっかりと固定することが可能なユーティリティー固定鑷子。給水スポンジなどの消耗品の固定用としても便利な汎用性の高いベストセラー商品です。



3D view




眼球固定鑷子 曲

受 **S-360C** 止付 全長 110mm ¥33,000 JAN:4547451043812

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001282 入 1

S-360S の曲ユーザーモデル。

ユーティリティー固定鑷子として人気の高い S-360S の曲ユーザーモデルです。

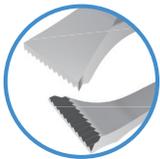

Quick Service



グレフェー氏固定鑷子

S-361 止付 全長 110mm ¥25,000 JAN:4547451043836

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001283 入 1

幅広の先端と細かいセレーションで確実に固定。

先端は幅広で細かい爪で把持する構造となっております。

memo

鑷子

剪刀

開眼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイ

AtoZ

A-09 止血鉗子

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイ



マイクロ止血鉗子

MH-108 無鉤 直 全長 125mm ¥13,200 JAN:4547451042709

材 SUS 薬 クラス I JMDN 10861001 屈 13B1X00048001135 入 1

幅広く活躍する便利な万能鉗子。

診察室や手術室において、あらゆる用途にて活用できる万能鉗子。



マイクロ止血鉗子 小

MH-108D 無鉤 直 全長 98mm ¥13,500 JAN:4547451042716

材 SUS 薬 クラス I JMDN 10861001 屈 13B1X00048001135 入 1

小回りの利く小サイズ万能鉗子。

小サイズの万能鉗子。小回りが利いて便利です。

AtoZ