

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイ

AtoZ


患者さまと術者の視点に基づいた「マイクロ開瞼器シリーズ」

コンパクトで軽量、そして平行開瞼を追求したマイクロ開瞼器シリーズ。患者様においてはより優しく、術者においてはよりスムーズで安定的な術野の確保が可能となりました。

オープンリング型では、弛緩した皮膚などをしっかりと固定することが可能なため、手術野を確保するのに非常に有用です。また、12 時方向からの手術操作にも妨げにならないデザインとなっております。

マイクロ開瞼器 オープンリング型 小

受	M-901S	両眼用	開瞼部 10mm	¥45,000	JAN:4547451325154
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 35349001	屈 13B1X00048001777 入 1

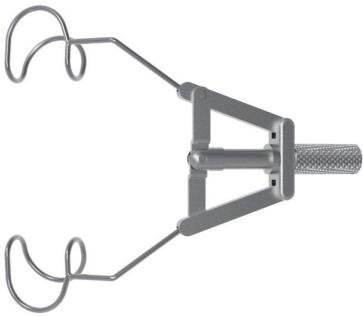


患者さまと術者の視点に基づいた「マイクロ開瞼器シリーズ」

コンパクトで軽量、そして平行開瞼を追求したマイクロ開瞼器シリーズ。患者様においてはより優しく、術者においてはよりスムーズで安定的な術野の確保が可能となりました。

オープンリング型では、弛緩した皮膚などをしっかりと固定することが可能なため、手術野を確保するのに非常に有用です。また、12 時方向からの手術操作にも妨げにならないデザインとなっております。

マイクロ開瞼器 オープンリング型

M-901	両眼用	開瞼部 14mm	¥48,000	JAN:4547451327080
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 35349001 屈 13B1X00048001777 入 1

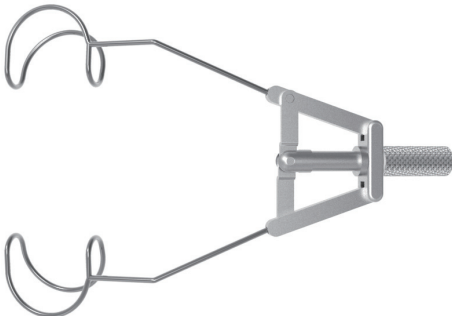


患者さまと術者の視点に基づいた「マイクロ開瞼器シリーズ」

コンパクトで軽量、そして平行開瞼を追求したマイクロ開瞼器シリーズ。患者様においてはより優しく、術者においてはよりスムーズで安定的な術野の確保が可能となりました。

オープンワイヤー型は、2点支持のワイヤータイプであるため、12 時方向の手術操作に最も妨げにならないデザインとなっております。

マイクロ開瞼器 オープンワイヤー型

M-905	両眼用	開瞼部 13mm	¥46,000	JAN:4547451327097
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 35349001 屈 13B1X00048001777 入 1

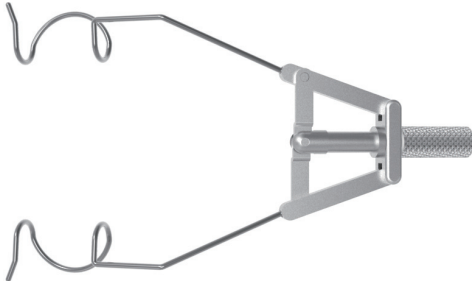


患者さまと術者の視点に基づいた「マイクロ開瞼器シリーズ」

コンパクトで軽量、そして平行開瞼を追求したマイクロ開瞼器シリーズ。患者様においてはより優しく、術者においてはよりスムーズで安定的な術野の確保が可能となりました。

プレート型は、睫毛や弛緩した皮膚などをしっかりと巻きこむことが可能です。眼瞼縁と手術野の接触がプレートで遮蔽されるため、感染予防効果も期待できます。硝子体注射や外眼部の外来小手術等にお勧めです。

マイクロ開瞼器 プレート型

M-910	両眼用	開瞼部 13.5mm	¥48,000	JAN:4547451327103
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 35349001 屈 13B1X00048001777 入 1

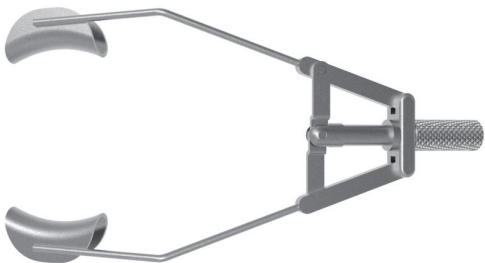

開瞼力と広い術野の確保が可能なプレートタイプ。

スライディング方式で開閉し、横のネジで任意に開瞼幅を調節できます。開瞼力が強く術野を広く確保できるのが特長です。斜視手術や強膜内陥術などの眼球深部の手術には特に有用と評価されています。

開瞼部は、プレートタイプで、睫毛や弛緩した皮膚などをしっかりと巻きこむことが可能です。眼瞼縁と手術野の接触がプレートで遮蔽されるため、感染予防効果も期待できます。外眼部の外来小手術等にお勧めです。

バンガーター氏開瞼器 大

S-813R	右眼用	開瞼部 14mm	¥ 25,000	JAN:4547451035671
S-813L	左眼用	開瞼部 14mm	¥ 25,000	JAN:4547451035664

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35349001 屈 13B1X00048001682 入 1

小児や狭い眼瞼幅に適した小サイズプレートタイプ。

S-813 の小サイズ。

バンガーター氏開瞼器 小

S-814R	右眼用	開瞼部 11mm	¥ 25,000	JAN:4547451035695
S-814L	左眼用	開瞼部 11mm	¥ 25,000	JAN:4547451035688

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35349001 屈 13B1X00048001682 入 1

顕微鏡下での反射防止効果で良好な視界を確保。

スライディング方式で開閉し、横のネジで任意に開瞼幅を調節できます。開瞼力が強く術野を広く確保できるのが特長です。斜視手術や強膜内陥術などの眼球深部の手術には特に有用と評価されています。

開瞼部は、睫毛や弛緩した皮膚などもしっかりと巻きこめるプレートタイプを採用し、顕微鏡下でも良好な視界を確保できるよう反射防止処理を施しております。

開瞼器 ノングレア 大

KI-60	右眼用	開瞼部 14mm	¥ 25,000	JAN:4547451030164
KI-61	左眼用	開瞼部 14mm	¥ 25,000	JAN:4547451030171

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35349001 屈 13B1X00048001490 入 1

開瞼力と広い術野の確保が可能なオープンワイヤータイプ。

スライディング方式で開閉し、横のネジで任意に開瞼幅を調節できます。開瞼力が強く術野を広く確保できるのが特長です。斜視手術や強膜内陥術などの眼球深部の手術には特に有用と評価されています。

開瞼部は、オープンワイヤー型で、特に 12 時方向での引っかかりが少なく、スムーズなオペレーションが可能です。





バンガーター氏開瞼器 オープン型 大

M-813R	右眼用	開瞼部 14mm	¥ 26,000	JAN:4547451032960
M-813L	左眼用	開瞼部 14mm	¥ 26,000	JAN:4547451032953

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35349001 屈 13B1X00048001682 入 1



Best Seller

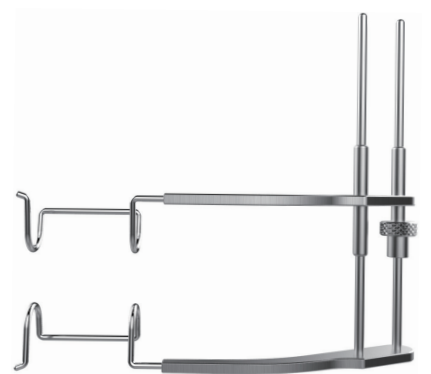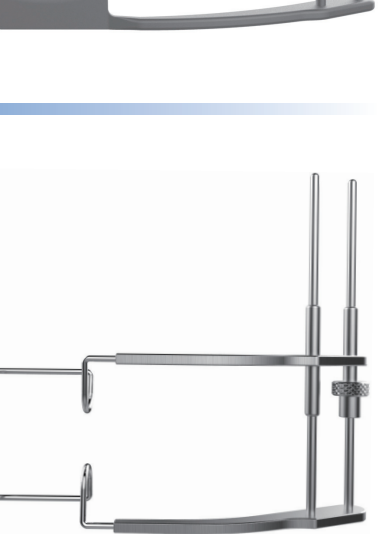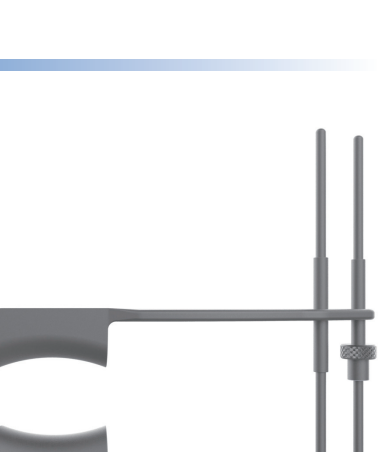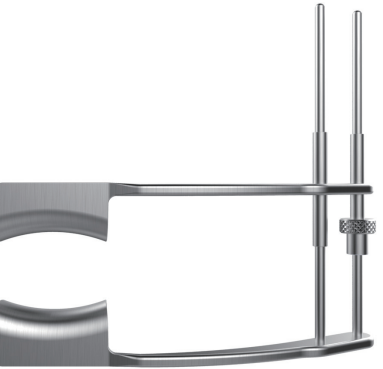

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

C-02 ネジ止め式開瞼器

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ


ディス
ポー
ザブル

AtoZ

小児や狭い瞼幅に適した
小サイズオープンワイヤータイプ。


バンガーター氏開瞼器 オープン型 小

M-814R	右眼用	開瞼部 10.5mm	¥ 30,000	JAN:4547451032984
M-814L	左眼用	開瞼部 10.5mm	¥ 30,000	JAN:4547451032977
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 35349001	屈 13B1X00048001682	入 1

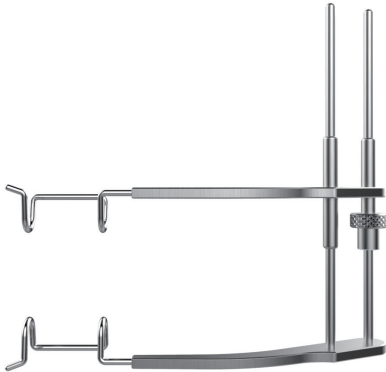


細目の患者さまへの装着が簡単、スムーズ。

細目の患者さまへの着用がスムーズに行えることを目的に開発した商品です。着用前に、上下の開瞼部が重なり合うまでクローズさせることが可能です。そのため、細目の方にも無理せず簡単に装着ができるため、患者さまの不安やストレスを少しでも軽減させることが可能です。

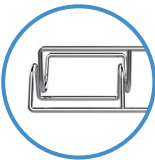


バンガーター氏開瞼器細目用 大

M-813NR	右眼用	開瞼部 14mm	¥ 31,000	JAN:4547451045386
M-813NL	左眼用	開瞼部 14mm	¥ 31,000	JAN:4547451045359
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 35349001	屈 13B1X00048001682	入 1

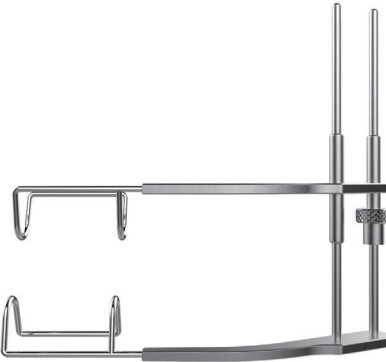


細目の患者さまへの装着が簡単、スムーズ。

M-813N の小サイズ。

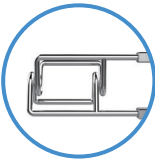

バンガーター氏開瞼器細目用 小

M-814NR	右眼用	開瞼部 10mm	¥ 31,000	JAN:4547451045380
M-814NL	左眼用	開瞼部 10mm	¥ 31,000	JAN:4547451045373
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 35349001	屈 13B1X00048001682	入 1

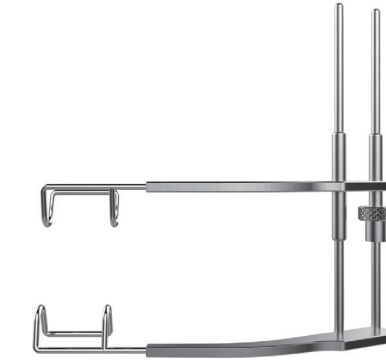

memo

Best
Seller

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル


AtoZ

軽量でシンプルな開瞼器。

軽量で、眼球への圧迫も少ないスプリングで開閉するタイプの開瞼器です。使いやすく汎用性の高さも特長です。開瞼部はクロースドタイプで、ワイヤー形状は非常にシンプルなデザインとなっております。



EDview

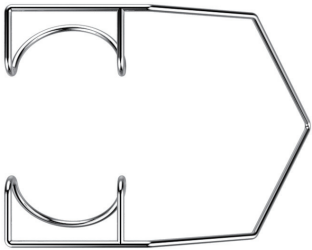


バラッケー氏開瞼器 小

M-135S	両眼用	開瞼部 13mm	¥ 6,500	JAN:4547451041436
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 35349001	屈 13B1X00048000597	入 1

長時間着用にも安定した
開瞼力を発揮する強度ワイヤータイプ。

軽量で、眼球への圧迫も少ないスプリングで開閉するタイプの開瞼器です。使いやすく汎用性の高さも特長です。開瞼部はクロースドタイプで、ワイヤー形状は非常にシンプルなデザインとなっております。硝子体手術などで長時間装着する場合にも、安定した開瞼力を発揮するよう、通常のバネ式開瞼器と比較して太いワイヤーを採用しております。

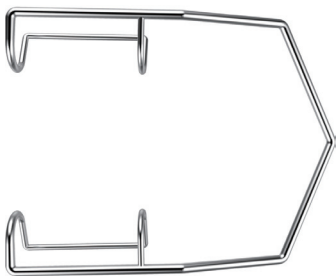


大島式開瞼器 硝子体手術用

受 M-135S	両眼用	開瞼部 16.5mm	¥ 11,500	JAN:4547451031321
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 35349001	屈 13B1X00048000153	入 1

長時間着用にも安定した
開瞼力を発揮する強度ワイヤーの小タイプ。

M-135Sの小タイプ。

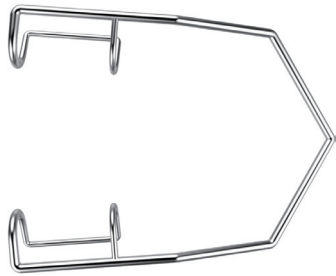

大島式開瞼器 硝子体手術用 小

M-135SS	両眼用	開瞼部 13.5mm	¥ 11,500	JAN:4547451031338
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 35349001	屈 13B1X00048000153	入 1

開瞼抵抗に対応する
小児などに適した強度ワイヤータイプ。

軽量で、眼球への圧迫も少ないスプリングで開閉するタイプの開瞼器です。使いやすく汎用性の高さも特長です。開瞼部はクロースドタイプで、ワイヤー形状は非常にシンプルなデザインとなっております。ワイヤーにひねりを加えることにより、強度を高めております。小児や未熟児などの手術において、開瞼に抵抗する場合などに優れたパフォーマンスを発揮します。



EDview



武田氏開瞼器

M-135T	両眼用	開瞼部 9mm	¥ 6,500	JAN:4547451031345
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 35349001	屈 13B1X00048000237	入 1

C-03 ワイヤー（バネ式）開瞼器

鑷子

剪刀

開驗器

持針器

カニユ
ーラ

スパー
テル

その他

白內障

屈折
矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ


フェイス操作がスムーズなオープンワイヤータイプ。

軽量で、眼球への圧迫も少ないスプリングで開閉するタイプの開瞼器です。使いやすく汎用性の高さも特長です。開瞼部はオープンワイヤータイプで、12時方向からの操作において全く影響されない形状となっております。

ワイヤー開瞼器 オープン型

M-135A	両眼用	開眼部 12mm	¥ 6,500	JAN:4547451031208
--------	-----	----------	---------	-------------------

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35349001 届 13B1X00048001524 入 1

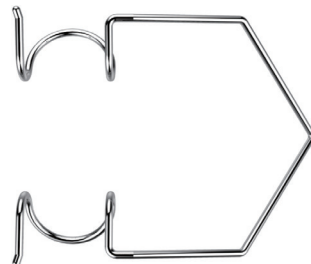


スタンダードなバネ式プレートタイプ。

パネ式プレートタイプの開眼器。睫毛や不潔部位を広範囲にプレートでカバーします。また、通常のパネ式開眼器と比較しやや太めのワイヤーを採用しているため、ややハードなテンションの開眼力を生み出します。外来小手術はもちろん、外来における硝子体注射の開眼にも最適です。

ワイヤー開瞼器 プレート型

M-135W	両眼用	開瞼部 13.5mm	¥ 11,000	JAN:4547451327226
--------	-----	------------	----------	-------------------

材 SUS 葉 クラス I JMDN 35349001 屑 13B1X00048001891 入 1

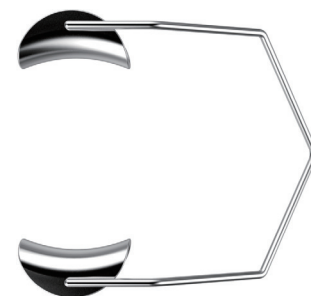

ベストセラーのストッパー付き
スライディング開眼器。

スライディング方式で開瞼幅を調整でき、やや強めの開瞼力が特長です。開瞼部はオーブンリングタイプで、弛緩した皮膚などをしっかりと固定することが可能なため、手術野を確保するのに非常に有用です。また、12 時方向からの手術操作にも妨げにならないデザインとなっております。


開瞼操作時の器具の分離などの防止や、開瞼力を維持するためのストッパーを設けております。

バラッケー氏スライディング開瞼器
オープンリング型 ストッパー付き

M-2021	両眼用	開瞼部 14.5mm	¥ 19,500	JAN:4547451032083
--------	-----	------------	----------	-------------------

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35349001 屈 13B1X00048001507 入 1

**Best
Seller**

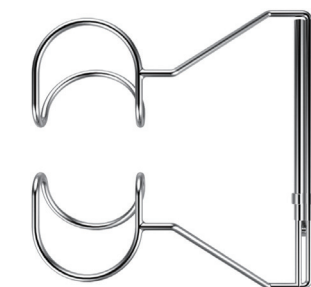


memo

耳側アプローチは勿論、12 時方向からも便利。

着用時はアーム部が鼻側になり、耳側がオープンとなるタイプです。軽量で、眼球への圧迫も少ないスプリングでの開閉式で使いやすい汎用性の高さが特長です。
開瞼部はオープンワイヤータイプで、12 時方向からの操作において影響されない形状となっております。

永原式テンポラルアプローチ開瞼器 オープン型

受	M-236A	両眼用	開瞼部 13mm	¥ 9,500	JAN:4547451032144
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 35349001	屈 13B1X00048000308 入 1

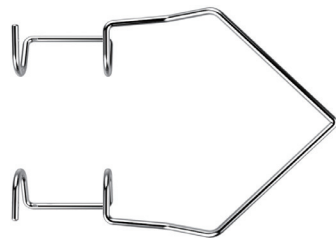

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼薬

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイザブル


AtoZ

クローズワイヤータイプの耳側切開用開瞼器。

着用時はアーム部が鼻側になり、耳側がオープンとなるタイプです。軽量で、眼球への圧迫も少ないスプリングでの開閉式で使いやすい汎用性の高さが特長です。
開瞼部はクローズタイプとなっております。

永原式テンポラルアプローチ開瞼器 クローズ型

受	M-236B	両眼用	開瞼部 13mm	¥ 11,000	JAN:4547451032151
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 35349001	屈 13B1X00048000309 入 1

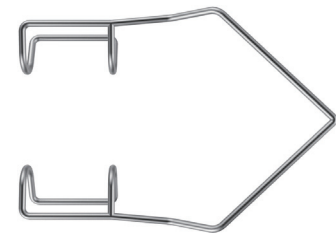

プレートタイプの耳側切開用開瞼器。

着用時はアーム部が鼻側になり、耳側がオープンとなるタイプです。軽量で、眼球への圧迫も少ないスプリングでの開閉式で使いやすい汎用性の高さが特長です。
開瞼部はプレートタイプで、眼瞼縁と手術野の接触がプレートで遮蔽されるため、感染予防効果が期待できると同時に、視認性も優れております。


永原式テンポラルアプローチ開瞼器 プレート型

受	M-236C	両眼用	開瞼部 13.5mm	¥ 12,400	JAN:4547451032168
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 35349001	屈 13B1X00048000310 入 1



テンポラルアプローチ（耳側切開）用開瞼器

耳側切開時などテンポラルアプローチにて操作を行う際に、アーム部が操作の妨げにならないように耳側をオープンにするための開瞼器です。そのため、アーム部が通常の開瞼器とは異なり逆側に反りかえており、着用時はアーム部が鼻側に固定されることになります。

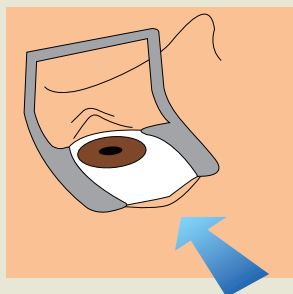

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスポーザブル
- AtoZ

左右でサイズの異なる未熟児用開瞼器。

未熟児検査など瞬目抵抗力を高めるため、開瞼力の強いスライドネジ固定タイプを採用しました。
開瞼鉤のサイズは右眼用と左眼用で異なるサイズを採用しております。非常に小型設計のため、反転させて使用することも可能ですので、両眼用として使用できます。

千葉大式未熟児用開瞼器

M-130R	右眼用	開瞼部 8mm	¥ 25,000	JAN:4547451031123
M-130L	左眼用	開瞼部 6mm	¥ 25,000	JAN:4547451031116
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 35349001
屈	13B1X00048000098	入	1	




Best Seller

左右でサイズの異なる未熟児用開瞼器。

未熟児検査など瞬目抵抗力を高めるため、開瞼力の強いスライドネジ固定タイプを採用しました。
開瞼鉤のサイズは右眼用と左眼用で異なるサイズを採用しております。非常に小型設計のため、反転させて使用することも可能ですので、両眼用として使用できます。


江口氏未熟児用開瞼器

M-130AR	右眼用	開瞼部 7.5mm	¥ 25,000	JAN:4547451031109
M-130AL	左眼用	開瞼部 10mm	¥ 25,000	JAN:4547451031093
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 35349001
屈	13B1X00048000182	入	1	

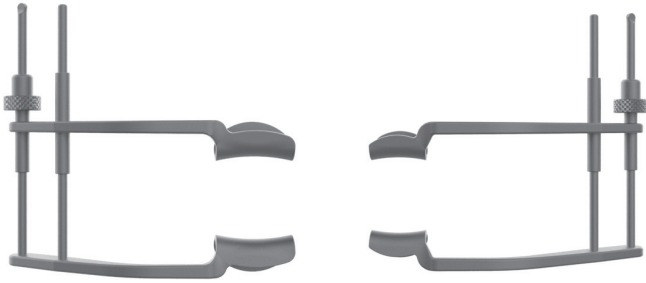

瞬目抵抗が強く、ストレスフリーな未熟児用開瞼器。

未熟児の開瞼中のストレスを少しでも軽減するため、軽量・コンパクト設計のワイヤー式を採用しました。また、通常タイプより太めのワイヤーを使用することにより、未熟児検査など瞬目抵抗力を高めております。

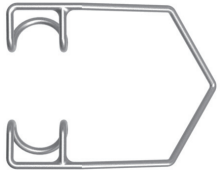


未熟児用ワイヤー開瞼器 8mm

M-751	両眼用	開瞼部 8mm	¥ 7,500	JAN:4547451032847
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 35349001
屈	13B1X00048000223	入	1	

瞬目抵抗が強く、ストレスフリーな未熟児用開瞼器。

未熟児の開瞼中のストレスを少しでも軽減するため、軽量・コンパクト設計のワイヤー式を採用しました。また、通常タイプより太めのワイヤーを使用することにより、未熟児検査など瞬目抵抗力を高めております。

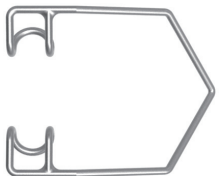

未熟児用ワイヤー開瞼器 6mm

M-752	両眼用	開瞼部 6mm	¥ 7,500	JAN:4547451032854
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 35349001
屈	13B1X00048000223	入	1	

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜


外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

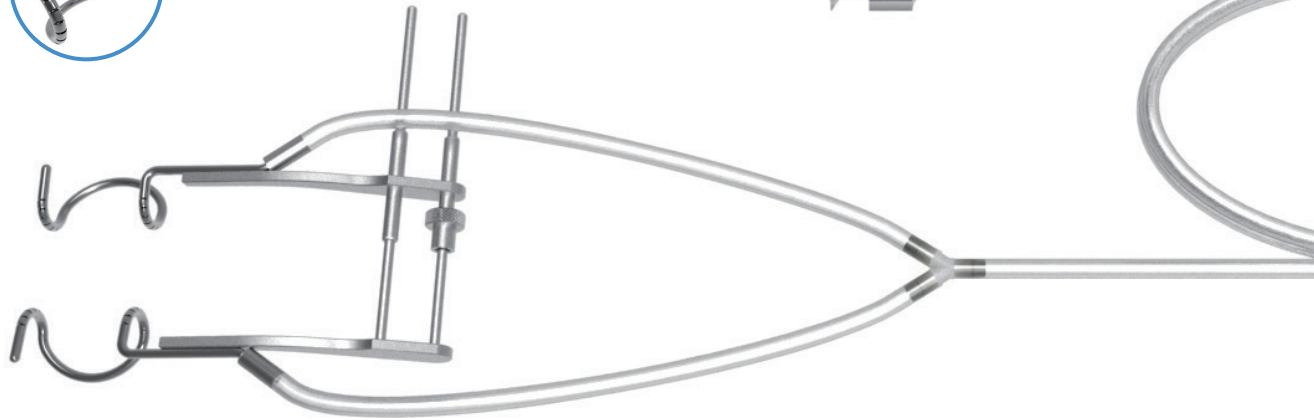

清水努氏 横スリット式吸引付開瞼器
バンガーター型

M-2900R	右眼用	開瞼部 14.5mm	¥ 83,000	JAN:4547451327127
M-2900L	左眼用	開瞼部 14.5mm	¥ 83,000	JAN:4547451327134

材 SUS 薬 クラスⅠ JMDN 35349001 屈 13B1X00048001775 入 1


交換用パーツ

B-01-1	吸引開瞼器用チューブのみ（Y 字型）	¥ 4,200	JAN:4547451337218
B-02-1	吸引開瞼器用ロック基のみ	¥ 4,200	JAN:4547451337225

薬 クラスⅠ JMDN 35349001 屈 13B1X00048001886 入 1

結膜の吸引を最小限に抑える横スリット吸引孔付開瞼器。

ご考案者 清水 努 先生 コメント
「白内障手術時、結膜を従来品よりかなり吸わなくなり、結膜へのダメージを最小限に抑えることができます。」

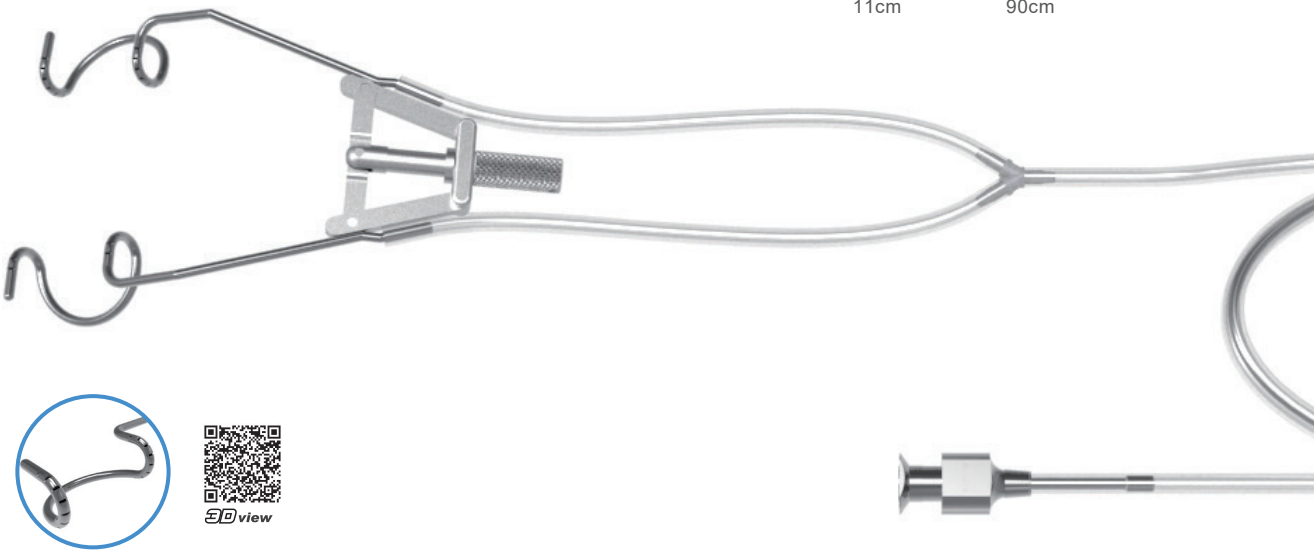

マイクロ開瞼器 横スリットタイプ 吸引付

M-951	両眼用	開瞼部 14.5mm	¥ 86,000	JAN:4547451327110
-------	-----	------------	----------	-------------------

材 SUS 薬 クラスⅠ JMDN 35349001 屈 13B1X00048001886 入 1

交換用パーツ

B-01-1	吸引開瞼器用チューブのみ（Y 字型）	¥ 4,200	JAN:4547451337218
B-02-1	吸引開瞼器用ロック基のみ	¥ 4,200	JAN:4547451337225


薬 クラスⅠ JMDN 35349001 屈 13B1X00048001886 入 1

結膜の吸引を最小限に抑える横スリット吸引孔付マイクロ開瞼器。

清水 努 先生ご考案の結膜の吸引を最小限に抑える横スリット吸引孔タイプを、人気の「マイクロ開瞼器」に採用いたしました。

C-06 吸引付開瞼器


- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスプレイ
- AtoZ

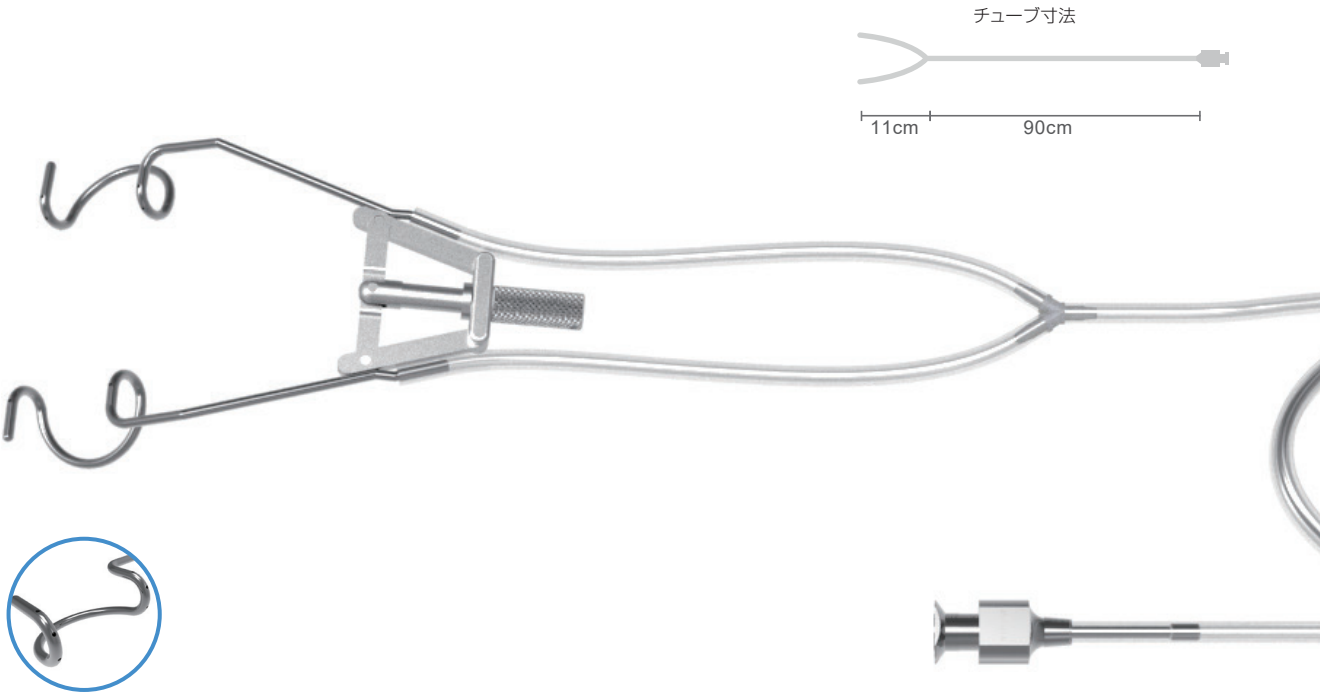

マイクロ開瞼器 吸引付

M-950	両眼用	開瞼部 14.5mm	¥ 76,000	JAN:4547451325161
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 35349001	屈 13B1X00048001886	入 1
交換用パーツ				
B-01-1	吸引開瞼器用チューブのみ (Y 字型)	¥ 4,200	JAN:4547451337218	
B-02-1	吸引開瞼器用ロック基のみ	¥ 4,200	JAN:4547451337225	
薬 クラス I	JMDN 35349001	屈 13B1X00048001886	入 1	

人気の「マイクロ開瞼器シリーズ」の吸引付き。
調節機能付きのネジ式タイプでありながら、軽量・コンパクトを徹底的に追求したハイブリッドな開瞼器「マイクロ開瞼器シリーズ」の吸引付きタイプです。強い開瞼力と患者眼へのストレス軽減、そして術中の操作の妨げにならないコンパクト設計が魅力です。開瞼鉤に設けた 3 点の吸引ポートは、灌流液などを効率良く吸引し、常に視認性の良い手術をサポートします。

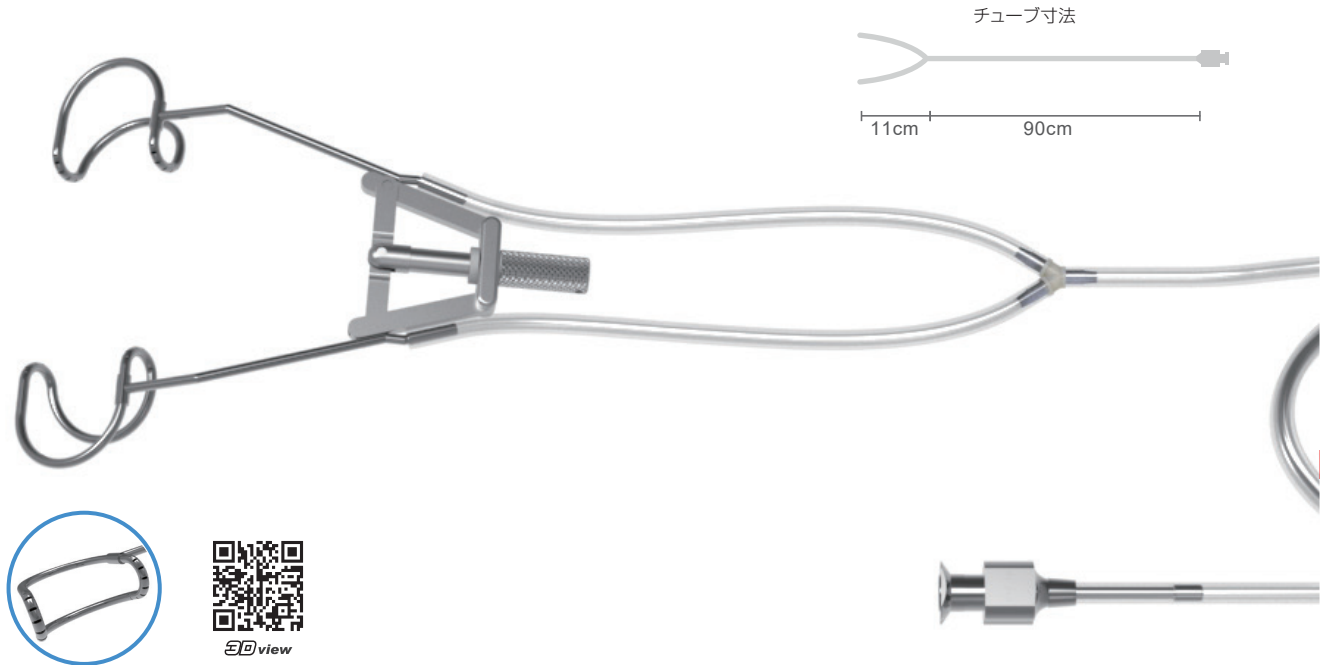

マイクロ開瞼器 オープンリング型 吸引付

M-953	両眼用	開瞼部 14mm	¥ 86,000	JAN:4547451338925
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 35349001	屈 13B1X00048002571	入 1
交換用パーツ				
B-01-1	吸引開瞼器用チューブのみ (Y 字型)	¥ 4,200	JAN:4547451337218	
B-02-1	吸引開瞼器用ロック基のみ	¥ 4,200	JAN:4547451337225	
薬 クラス I	JMDN 35349001	屈 13B1X00048001886	入 1	

軽量・コンパクトを迫及した、横スリット吸引孔付き開瞼器。
開瞼機能付きのネジ式タイプでありながら、軽量・コンパクトを徹底的に迫及したハイブリッドな開瞼器の横スリット吸引孔付きタイプです。横スリット吸引孔を採用することで結膜の吸引を最小限に抑えることができます。また、開瞼鉤は 12 時方向からの操作や弛緩した皮膚などもしっかりと固定できるオープンリングタイプを採用しております。