

Quick Service


Best Seller



view

湖崎氏マイクロサージャリー用持針器

KI-45	止付	全長 105mm / 先端 6mm	¥70,000	JAN:4547451041207
KI-46	止無	全長 105mm / 先端 6mm	¥62,000	JAN:4547451041214
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 12726010 届 13B1X00048001143 入 1

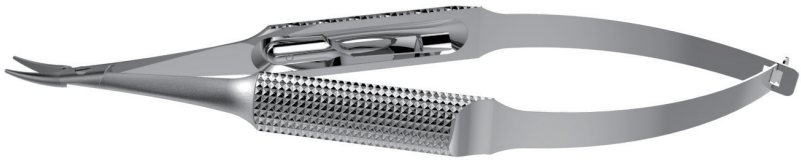

ロングセラーのマイクロ持針器定番モデル。

発売以来多くのユーザーから愛用されるマイクロ持針器の定番モデル。先端は 8-0 ～ 11-0 などの細めの縫合糸、針に適したファインタイプとなっております。また、小振りなフォルムがマイクロサージャリーでの微細なコントロールを可能にします。

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

バラッケー氏持針器 ショートモデル

M-739R	止付	全長 100mm / 先端 8mm	¥72,000	JAN:4547451042624
M-738R	止無	全長 102mm / 先端 8mm	¥68,000	JAN:4547451042617
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 12726010 届 13B1X00048001333 入 1



操作性のよいバランスのとれた持針器。


小回りの効くやや小振りなハンドルと、ファインな先端は、マイクロサージャリーに適したバランスのとれた形状となっております。




view



MOVIE

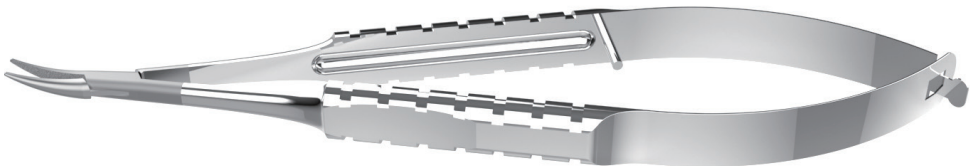

M-2173

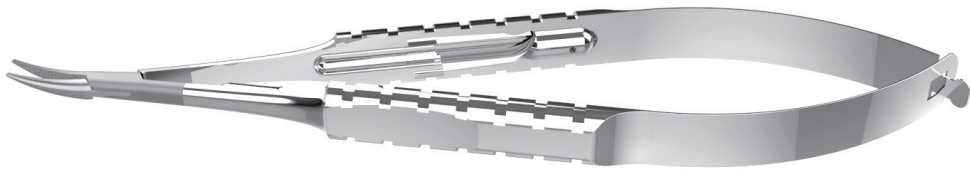

M-2173R

ユニバーサル持針器 Pro ダイヤモンドグリップ

M-2173	止無	全長 128mm / 先端 10mm	¥67,000	JAN:4547451337461
M-2173R	止付	全長 128mm / 先端 10mm	¥69,000	JAN:4547451338727
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 12726010 届 13B1X00048002564 入 1

これからの“持針器”の新定番。 その一針に圧倒的な汎用性と保持力を。

- ① ダイヤモンドブラスト加工による高い把持性能
先端把持面に微細加工を施すことで、針を滑らず確実に保持。摩擦にも強く、長期間使用しても安定したパフォーマンスを発揮。
- ② 逆マチ式（ボックスヒンジ）の採用
締結時の糸切れストレスを最小限に。精密かつ安心して操作できます。
- ③ ラウンド × フラットのハイブリッドハンドル
回転動作のしやすさと保持安定性を両立する独自形状。さらに、先端側に施した“くびれ”が手に自然にフィットし、細かな操作性を向上。
- ④ 高剛性 × 軽量設計
強度を確保しながらも軽量化を実現。長時間の処置でも術者の疲労を大幅に軽減。

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニユーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスプレイ
- AtoZ



Quick Service
S-727

バラック氏持針器 ファインチップモデル 曲

S-727	止付	全長 120mm / 先端 9mm	¥70,000	JAN:4547451044222
S-728	止無	全長 120mm / 先端 9mm	¥65,000	JAN:4547451044239

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 屈 13B1X00048001148 入 1

スリムなファインチップが特長のマルチな持針器。

先端は 9mm とややミドルなサイズでありながら、スリムなファインチップ形状となっているため、顕微鏡下での視認性や、8-0 ～ 11-0 などの細めの縫合糸、針にも適しております。ハンドルもやや長めとなっているため、用途を選ばずマルチにご使用いただけます。



Quick Service Best Seller

バラック氏角膜持針器

KI-41	止付	全長 130mm / 先端 9mm	¥70,000	JAN:4547451044191
KI-42	止無	全長 130mm / 先端 9mm	¥65,000	JAN:4547451321937

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 屈 13B1X00048001142 入 1

スタンダードなマイクロサージャリー用持針器。

ロングハンドルでありながら先端は 8-0 ～ 11-0 などの細めの縫合糸、針に適したファインタイプとなっております。ボディ全体に反射防止加工を施しております。



Quick Service Best Seller
S-725

バラック氏角膜縫合用持針器

S-725	止付	全長 127mm / 先端 9mm	¥70,000	JAN:4547451044208
S-726	止無	全長 127mm / 先端 9mm	¥65,000	JAN:4547451321934

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 屈 13B1X00048001146(S-725) 13B1X00048001147(S-726) 入 1

スタンダードなマイクロサージャリー用持針器。

ロングハンドルでありながら先端は 8-0 ～ 11-0 などの細めの縫合糸、針に適したファインタイプとなっております。KI-41 や KI-42 とは異なり先端のみにノングレア加工(反射防止)を施しております。



バラック氏持針器 止付 ストロングカーブ

S-725A	止付	全長 130mm / 先端 7mm	¥70,000	JAN:4547451044215
--------	----	-------------------	---------	-------------------

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 屈 13B1X00048001145 入 1

奥目に便利な強湾先端モデル。

患者眼が奥目の場合通常の曲タイプを使用していると、持針器の角度が保てないことや、針が垂直に保てないなどのケースが報告されております。当モデルでは、先端が強めのカーブ形状をしており、奥目の場合もスムーズに縫合することが可能です。

Quick Service

Best Seller

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜


外眼薬

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイザブル


AtoZ

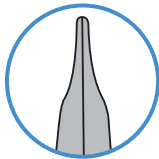

バラッケー氏マイクロ持針器 止無

BM-560 止無 全長 116mm / 先端 9mm ¥68,000 JAN:4547451040446

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 屈 13B1X00048001140 入 1

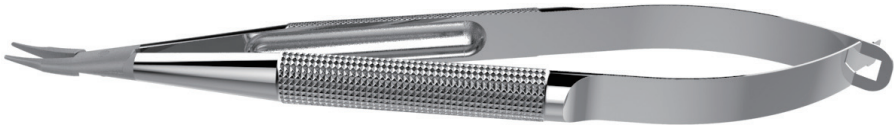

マルチに使用できるミドルサイズ持針器。

先端 9mm、全長 116mmといずれも持針器のサイズとしては中間サイズとなっているため、用途を選ばずマルチに使用することが可能です。先端はファインでありながらこしが強く、やわらかな操作性と強さを兼ね備えております。

Quick Service

M-73

慈大式マイクロサージャリー持針器 ライトカーブ ノングレア

M-73 止付 全長 110mm / 先端 7mm ¥72,000 JAN:4547451042587


M-74 止無 全長 110mm / 先端 7mm ¥67,000 JAN:4547451042631

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 屈 13B1X00048001153 入 1



先端が弱湾曲のマイクロサージャリー用持針器。

先端が通常の曲タイプと比べ、やや弱湾曲のマイクロサージャリー用持針器です。8-0～11-0の細い縫合糸、針の把持、操作に優れた微細な先端サイズとなっております。

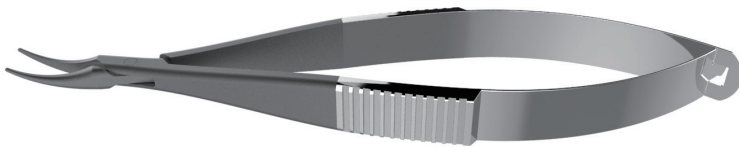

新潟大学マイクロショート持針器 止無 逆マチ式

M-301R 止無 全長 98mm / 先端 8mm ¥50,000 JAN:4547451320142

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 屈 13B1X00048001156 入 1

結紮時の引っかかりを解消するボックスヒンジ（逆マチ）モデル。

結紮の際に、ヒンジ部での糸の引っかかりのリスクを解消したボックスヒンジ（逆マチ）モデル。板ハンドル構造のため、ラウンドハンドルではやや操作しにくいというユーザーに適しております。またショートハンドルにより小回りの利く操作性も特長です。

memo

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜


外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

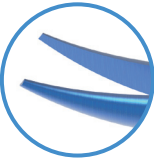

デリケート型持針器 曲 12mm


MB-030 止付 全長 124mm / 先端 12mm ￥85,000 JAN:4547451045656

MB-029 止無 全長 124mm / 先端 12mm ￥82,000 JAN:4547451045649

材 Ti 薬 クラス I JMDN 12726010 屈 13B1X00048001136 入 1

先端タングステンカーバイド加工によるノンスリップ縫合。

先端に独自のタングステンカーバイド加工を施しており、縫合糸を滑らずに把持することが可能です。またスリムチップのため、顕微鏡下での視認性や 8-0 ～ 11-0 の細い針、糸の把持、操作性に優れております。チタニウムによる軽量化も特長です。

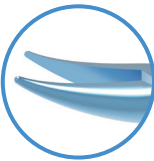

上野式マイクロ持針器 止無

IM-2087N 止無 全長 119mm / 先端 7mm ￥83,000 JAN:4547451321583

材 Ti 薬 クラス I JMDN 12726010 屈 13B1X00048001242 入 1

微細な操作性を重視した万能持針器。

微細な先端が顕微鏡下における視認性と、8-0 ～ 11-0 などの細めの縫合糸、針の把持、操作に優れております。また先端には独自のタングステンカーバイド加工を施しており、ファインな糸をより優しく滑らずに把持することが可能です。板ハンドルは、不快感なく握れるように部分的にやや丸みを持たせております。

memo

Quick
ServiceBest
Seller

ED view




カストロヴィーホー氏持針器 曲

S-730 止付 全長 140mm / 先端 10mm ￥65,000 JAN:4547451044260

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 屈 13B1X00048001150 入 1

太めの針、糸の操作に便利な大型持針器。

外眼手術やバックリングなど、4-0 ～ 7-0 などの太めの針や糸を使用する際にも便利な大型持針器のスタンダードモデル。先端のみノンブレード加工を施しております。

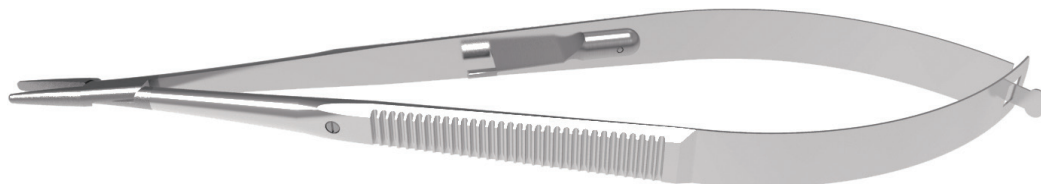Quick
Service

カストロヴィーホー氏持針器 直

S-729 止付 全長 137mm / 先端 10mm ￥63,000 JAN:4547451044246


材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 屈 13B1X00048001150 入 1

バックリング術などに便利な大型持針器の直モデル。

大きなハンドルと先端は、主に 4-0 ～ 7-0 などの太めの針や糸を使用する際にも便利な構造となっております。先端は特に眼球深部のバックリング術などで使いやすい直タイプを採用しております。先端のみノンブレード加工を施しております。



ED view

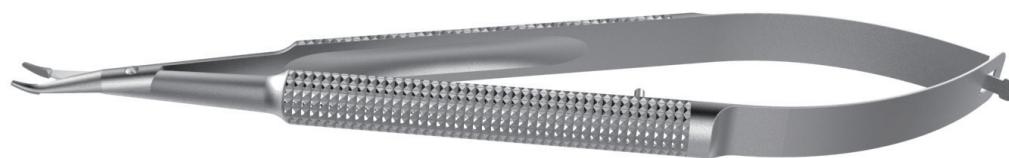


後藤式剪刀付持針器

M-1901A 止無 全長 133mm / 先端 3.5mm / 刃 4mm ￥75,000 JAN:4547451334231

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 屈 13B1X00048002334 入 1

糸を切る、縫うをこの一本でこなすハイブリッド製品。

先端部が把持する部分と糸を切る部分に分かれているため、縫合時に器具を持ち替える必要がなく、この一本で行うことが可能です。先端は汎用性のある 5-0 ～ 7-0 に適したサイズとなっており、結膜や眼瞼皮膚の縫合、外眼手術に最適です。

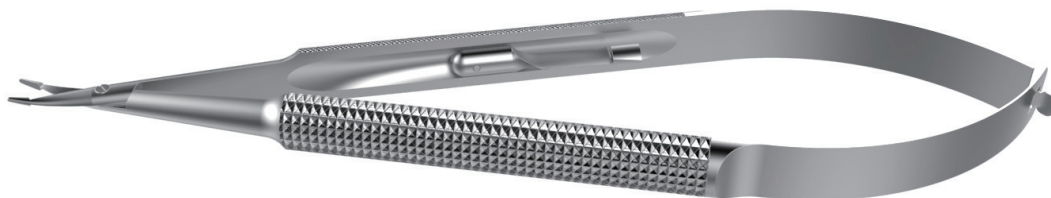

マイクロ剪刀付持針器 止付 曲

受 M-1900 止付 全長 139mm / 先端 3mm / 刃 2mm ￥75,000 JAN:4547451031932

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12726010 屈 13B1X00048001494 入 1

剪刀と持針器の機能を兼ね備えるハイブリッドアイテム。

縫合操作中、剪刀に持ち替える煩わしさから開放されるよう縫合針把持部の手前が剪刀となっております。

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユ
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼病


関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスポーザブル
- AtoZ

灌流用のバルブ。


灌流用の針を取り付けて使用します。

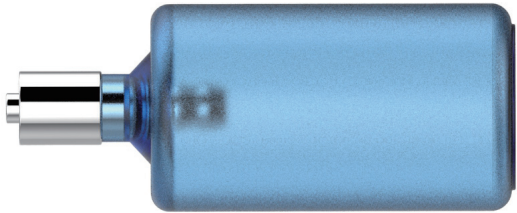

ビショップ・ハーモン氏前房洗淨器

S-213SH	全長 68mm	¥ 15,000	JAN:4547451043300
材 シリコン	薬 クラス I	JMDN 34630000	屈 13B1X00048001341 入 1

デリケートで灌流量に優れた扁平先端タイプ。
ややロングで、デリケートに設計されております。創口より挿入し
やすいよう先端が扁平となっております。

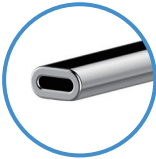

フラット洗淨針 アングル型

S-205	全長 42.5mm / シャフト 26.5mm / 先端 1.2mm / 径 19G	¥ 10,000	JAN:4547451034124
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 70459000	屈 13B1X00048001512 入 1

スタンダードな前房洗淨針。
最もスタンダードな前房洗淨針。発売以来根強い人気を誇ります。



Best
Seller

前房洗淨針 18G

S-212A	全長 45.5mm / シャフト 30mm / 先端 1.5mm / 径 18G	¥ 13,000	JAN:4547451034186
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 70459000	屈 13B1X00048001571 入 1

memo

Best
Seller

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ュ
ー
ラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼病

Best
Seller

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

ベストセラーで使いやすい注入用力ニューラ。

結膜下や内眼部など、多目的で使いやすい注入用力ニューラ。30Gの細針による圧力により粘弾性物質滞留中においてもストレスなく注入が可能です。



SD view



30G 針 アングル型 鈍

M-88C 全長 30mm / シャフト 14mm / 径 30G ￥9,000 JAN:4547451033035

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 届 13B1X00048001528 入 1

チン小帯の溶解用力ニューラ。

水晶体摘出時など、チン小帯との離断を行う際に使用します。



SD view



キモトリブシン注入針二段式

S-216 全長 47mm / シャフト 31mm / 先端 1.85mm / 径 25G ￥15,000 JAN:4547451034261

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 届 13B1X00048000087 入 1

Best
Seller

ベストセラーの空気置換用力ニューラ。

発売以来根強い人気を誇る使いやすい扁平加工の空気置換用力ニューラ。



SD view



ザウター氏空気注入針 直


M-32ES 全長 40mm / シャフト 24mm / 径 27G ￥9,000 JAN:4547451032267

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 届 13B1X00048000185 入 1

Best
Seller

ベストセラーの空気置換用力ニューラ。

発売以来根強い人気を誇る使いやすい扁平加工の空気置換用力ニューラ。M-32ESの曲タイプです。

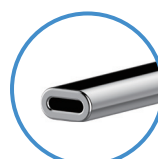

SD view



ザウター氏空気注入針 曲

M-32EC 全長 38mm / シャフト 22mm / 径 27G ￥9,000 JAN:4547451032250

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 届 13B1X00048000185 入 1

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスポーザブル
- AtoZ

Best
Seller

スムーズな薬液注入が可能な 3 ポートタイプ。

先端と側面二ヶ所の計三ヶ所に開口部があるため、テノン嚢下に針を挿入した際、先端開口部が組織にふさがれた場合でも薬液を注入することが可能です。



ED view



近江氏テノン嚢下注入針 3 ポート 24G

M-1508 全長 37mm / シャフト 21mm / 径 24G ￥13,800 JAN:4547451031659

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 屈 13B1X00048001537 入 1

テノン嚢下への薬液注入に最適化されたカニューーラ

薬液を注入する際に注入ポートの一つがふさがってしまった場合に他のポートを補助的に使用できることなどを目的として、三つ穴式となっています。また、先端が鈍先のため、組織をより傷つけにくくなっております。24G と 25G の二種類からお選びいただけます。



ED view



テノン嚢下注入針 3 ポート


M-2056-24 全長 42mm / シャフト 26mm / 径 24G ￥18,000 JAN:4547451320043

M-2056-25 全長 42mm / シャフト 26mm / 径 25G ￥18,000 JAN:4547451320050

材 SUS 薬 クラス I JMDN 30890000 屈 13B1X00048000955 入 1

ピンポイントでテノン嚢下へアプローチ。

絶妙に設計されたシャフトの長さ、カーブにより、テノン嚢下のピンポイントに素早く、容易にアプローチすることが可能です。また、コストパフォーマンスにも優れております。

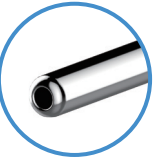

ED view



Best
Seller

深作式ピンポイント注入針


M-838 全長 37.5mm / シャフト 21.5mm / 径 24G ￥8,000 JAN:4547451032991

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 屈 13B1X00048001491 入 1

memo

経結膜球後注射用アイテム。

球後注射を、経皮ではなく、経結膜にて行うために開発された製品です。先端は鈍針で安全に強膜上を押し進めることが可能です。また薬液注入用ポートは側面のため、挿入時により詰まらないように工夫されております。

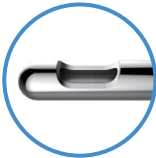

SD view



永田氏経結膜球後針 25G

M-1512 全長 42mm / シャフト 26mm / 径 25G ￥14,000 JAN:4547451031666

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34899031 届 13B1X00048001506 入 1

安全設計の鋭針が特徴の球後針。

スタンダードな球後針。先端は血管などを損傷しないよう、鋭針ながら、やや鈍先に設計されております。



アトキンソン氏球後注射針 直

S-217AS 12 本入 全長 51.5mm / シャフト 35.5mm / 径 23G ￥23,000 JAN:4547451034285

S-217AS-4 4 本入 全長 51.5mm / シャフト 35.5mm / 径 23G ￥7,700 JAN:4547451334958

材 SUS 薬 クラス I JMDN 30890000 届 13B1X00048001483

安全設計の鋭針が特徴のベストセラー球後針。

スタンダードな球後針。先端は血管などを損傷しないよう、鋭針ながら、やや鈍先に設計されております。



SD view



アトキンソン氏球後注射針 曲


S-217AC 12 本入 全長 45mm / シャフト 29mm / 径 23G ￥24,000 JAN:4547451034278

S-217AC-4 4 本入 全長 45mm / シャフト 29mm / 径 23G ￥8,000 JAN:4547451334941

材 SUS 薬 クラス I JMDN 30890000 届 13B1X00048001483

シャープな鋭針のスタンダード球後針。

スタンダードな球後針。先端は非常にシャープな鋭針となっております。

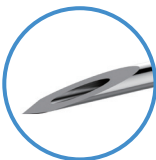

SD view



小川氏眼球摘出用球後注射針 曲

S-217C 12 本入 全長 51mm / シャフト 35mm / 径 23G ￥24,000 JAN:4547451034308

S-217C-4 4 本入 全長 51mm / シャフト 35mm / 径 23G ￥8,000 JAN:4547451334965

材 SUS 薬 クラス I JMDN 30890000 届 13B1X00048001482

Best Seller

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

Best Seller

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

Best Seller

関連用品

サージカルナイフ

ディスボーズザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品


サージカルナイフ

ディスプレイ

AtoZ

テーパード構造によりファインで安定した操作性を実現。

スタンダードな涙管洗浄針。先端は 27G とファインでありながら、シャフトの剛性を高めるため、根元に太いパイプを用いることにより耐久性と剛性を高めております。直と曲の 2 タイプからお選びいただけます。

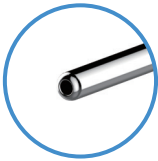

中村式涙管洗浄用二段針 直

S-218S	12 本入	全長 50mm / シャフト 37mm / 径 27G	¥ 23,000	JAN:4547451034353
S-218S-4	4 本入	全長 50mm / シャフト 37mm / 径 27G	¥ 7,700	JAN:4547451335009

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 屈 13B1X00048001119

Best Seller

テーパード構造によりファインで安定した操作性を実現。

スタンダードな涙管洗浄針。先端は 27G とファインでありながら、シャフトの剛性を高めるため、根元に太いパイプを用いることにより耐久性と剛性を高めております。直と曲の 2 タイプからお選びいただけます。



中村式涙管洗浄用二段針 曲

S-218C	12 本入	全長 49mm / シャフト 33mm / 径 27G	¥ 24,000	JAN:4547451034346
S-218C-4	4 本入	全長 49mm / シャフト 33mm / 径 27G	¥ 8,000	JAN:4547451334996

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 屈 13B1X00048001119

Best Seller

直・先端ポートタイプのスタンダードな涙管洗浄針。

スタンダードな涙管洗浄針。直と曲の 2 タイプからお選びいただけます。



中村式涙管洗浄用一段針 直

S-218AS	12 本入	全長 53mm / シャフト 37mm / 径 23G	¥ 23,000	JAN:4547451034339
S-218AS-4	4 本入	全長 53mm / シャフト 37mm / 径 23G	¥ 7,700	JAN:4547451334989

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 屈 13B1X00048001120

曲・先端ポートタイプのスタンダードな涙管洗浄針

スタンダードな涙管洗浄針。直と曲の 2 タイプからお選びいただけます。





中村式涙管洗浄用一段針 曲

S-218AC	12 本入	全長 49mm / シャフト 33mm / 径 23G	¥ 24,000	JAN:4547451034322
S-218AC-4	4 本入	全長 49mm / シャフト 33mm / 径 23G	¥ 8,000	JAN:4547451334972

材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 屈 13B1X00048001120

側面ポートタイプの涙管洗浄針。

先端は、鈍先で挿入のしやすさと鼻側の涙嚢に対して安全を考慮しております。ポートは側面となっているため、洗浄水は鼻涙管に向かってしっかりと放出されます。

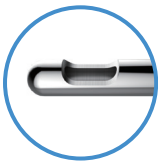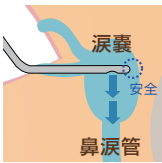


涙管洗浄針 45° アングル型 23G

M-88G	全長 38mm / シャフト 22mm / 径 23G	¥ 6,900	JAN:4547451033073
材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 屈 13B1X00048001492 入 1			

涙管洗浄とブジーの一人二役のハイブリッドアイテム。

先端は鈍先で、側面ポートタイプとなっており、涙嚢より鼻涙管へしっかりと洗浄水が放出されます。更にロングの針を立てて鈍先で鼻涙管へ挿入することでブジーと同様の作業を安全に行うことが可能です。その際、加圧通水しながらの穿破が可能です。

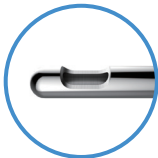

バンガーター氏ブジー型涙管洗浄針

S-215-21	全長 76mm / シャフト 60mm / 径 21G	¥ 8,000	JAN:4547451034247
S-215-23	全長 76mm / シャフト 60mm / 径 23G	¥ 8,000	JAN:4547451034254
材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 屈 13B1X00048001574 入 1			



ED view

涙道への挿入長を確認できる
乳幼児用目安付きブジー型洗浄針。

ご考案者 五嶋 摩理 先生
(東京都立駒込病院 眼科)コメント

「針先が鈍で涙道粘膜を傷つけにくく、側面に通水孔があり、加圧通水しながらの穿破が可能です。先端より 10mm から 15mm の間が無光沢になっており、挿入長の目安になります。種々の長さを選択できます。従来の乳児用ブジー型洗浄針に比べ短いため、針先を進めながらの通水が行いやすく、腰が強いのので折れにくく、深く挿入し過ぎる危険性が少なくなります。また、より細いブジーに比べて仮道をきたしにくい上、涙点拡張もほとんど必要ありません。生後 6 ヶ月未満では 30mm、生後 6 ヶ月以上では 34mm がお勧めです。」



M-2058-34



M-2058-32



M-2058-30

五嶋式ブジー型涙管洗浄針

M-2058-34	全長 50mm / シャフト 34mm / 径 25G	A 10mm / B 5mm / C 19mm	¥ 13,000	JAN:4547451313151
M-2058-32	全長 48mm / シャフト 32mm / 径 25G	A 10mm / B 5mm / C 17mm	¥ 13,000	JAN:4547451313144
M-2058-30	全長 46mm / シャフト 30mm / 径 25G	A 10mm / B 5mm / C 15mm	¥ 13,000	JAN:4547451313137
材 SUS 薬 クラス I JMDN 70459000 屈 13B1X00048000554 入 1				



鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスポーザブル
- AtoZ



フルートハンドピース

吸引用ハンドピースのスタンダードタイプ。

M-569	吸引用	全長 80mm	¥ 25,600	JAN:4547451326694
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 35384000	屈 13B1X00048001857	入 1

memo

Best
Seller

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ュ
ー
ラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼
部

関連
用品

サー
ジ
カ
ル
ナイフ

ディ
ス
ボー
ザブル

AtoZ



スパーテル

S-170A	全長 129mm / シャフト 35mm / 先端幅 1.0mm	¥ 11,000	JAN:4547451033660
S-170B	全長 129mm / シャフト 35mm / 先端幅 1.5mm	¥ 11,000	JAN:4547451033677
S-170C	全長 129mm / シャフト 35mm / 先端幅 2.0mm	¥ 11,000	JAN:4547451033684

材 SUS薬クラス IJMDN 32754001届 13B1X00048000384入 1

スパーテルのスタンダードモデル。

汎用性のあるスタンダードなスパーテル。シャフトはしなりのある弱湾形状となっております。3種類のサイズからお選びいただけます。



水晶体皮質用軟質スパーテル

M-126	全長 100mm / シャフト 30mm / 先端幅 0.5mm	¥ 16,000	JAN:4547451031000
-------	----------------------------------	----------	-------------------

材 SUS薬クラス IJMDN 32754001届 13B1X00048000255入 1

水晶体皮質の剥離に便利なスパーテル。

水晶体皮質の剥離が容易に行えるよう、適度なしなりのある操作性、またスパーテルの角度を調節できるよう軟質シャフトとなっております。先端幅も極細なため、ピンポイントのオペレーションが可能です。ハンドルは、器具の回転操作と小回りの効く操作性を重視し、ラウンドハンドル、ショートサイズに設計しております。



目盛付スパーテル

S-171	全長 129mm / シャフト 35mm / 先端幅 2.0mm	¥ 17,500	JAN:4547451033714
-------	----------------------------------	----------	-------------------

材 SUS薬クラス IJMDN 32754001届 13B1X00048000385入 1

目盛が便利なスパーテル。

目盛り付きのため、長さや深さなど、計測しながらの操作が可能です。



ニードルスパーテル アングル型

M-126A	全長 110mm / シャフト 26mm / 先端幅 0.3mm	¥ 23,000	JAN:4547451031017
--------	----------------------------------	----------	-------------------

材 SUS薬クラス IJMDN 32754001届 13B1X00048000097入 1

虹彩後癒着剥離や水晶体核の脱臼などに便利。

先端が針先に近い極細幅（0.3mm）となっており、シャフトは長めのアングル型となっております。特に、虹彩後癒着剥離などに有効なデザインであるとともに、ECCE のダブルフック法による核の脱臼時に核分割フック（M-136 等）と併用しての使用などにも活躍します。

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

Quick
Service

Best
Seller

ベストセラーの定番カリパー。

切開創の幅や、ポートの位置など、マルチに活躍する定番カリパーです。



view




カストロヴィーホー氏カリパー 直

S-200S 全長 85mm / 測定範囲 0-20mm / 目盛間隔 1mm ￥50,000 JAN:4547451043270

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35788000 屈 13B1X00048001154 入 1

ワンハンドでスムーズに操作が行えるスリムタイプ。

厚さが 1.5mmの超薄型カリパー。ワンハンドでの操作が可能なように、調節用ハンドルを、目盛部の内側に取り付けました。さらに目盛間隔が 0.5mmとなっているため、より細かい測定が可能です。

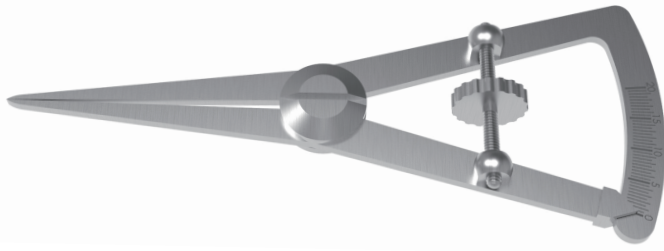


スリムタイプカリパー


受 **M-2200** 全長 87mm / 測定範囲 0-20mm / 目盛間隔 0.5mm ￥48,000 JAN:4547451320302

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35788000 屈 13B1X00048001331 入 1

Best
Seller

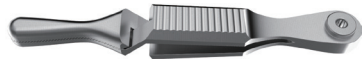

S-475L

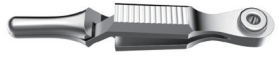

S-475S

クレンメ

S-475L 大 全長 47mm ￥12,000 JAN:4547451043935

S-475S 小 全長 36mm ￥12,000 JAN:4547451043942

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35801000 屈 13B1X00048001220 入 1

円滑な手術をサポートする必需品

点滴の速度と量の調整や、制御糸の固定など、手術のサポートアイテムです。

No.1

No.2

No.3



三角形

三角形

逆三角形

縫合針（10 本入）

S-640A No.1 9mm ￥12,600 JAN:4547451035190

S-640B No.2 10mm ￥12,000 JAN:4547451035206

S-640C No.3 13mm ￥11,000 JAN:4547451035237

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32763000 屈 13B1X00048000014 入 10

眼科処置に最適な縫合針。

眼球のカーブや、縫合操作など総合的に研究した結果生まれた眼科処置用縫合針となっております。3 種類のサイズよりお選びいただけます。

Quick Service

Best Seller





マイクロサージャリー用替刃パンチ 直

M-40RS	全長 96mm / 先端 9mm	¥ 55,000	JAN:4547451041962
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 32764001	届 13B1X00048001169 入 1

ベストセラーの定番替刃パンチ。（バネありタイプ）

発売以来ベストセラーを誇る替刃パンチの定番商品です。マイクロサージャリーに最適な刃を意のままにデザインすることが可能です。バネありタイプのため、刃の把持が容易に行えます。

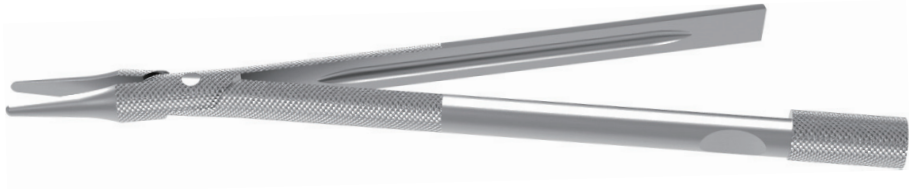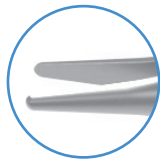

Quick Service

マイクロサージャリー用替刃パンチ 直


M-41R	全長 119mm / 先端 17mm	¥ 55,000	JAN:4547451041986
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 32764001	届 13B1X00048001169 入 1

大きめの刃のデザインが容易なノンスリップ替刃パンチ。

ラージサイズの先端のため、大きめの刃のデザインに適しております。先端の片側にはセレーションが施してあり、刃を滑らずにしっかりと把持することが可能です。また、ロングハンドルのため、軽い力で刃を割ることも可能になっております。

Quick Service

Best Seller

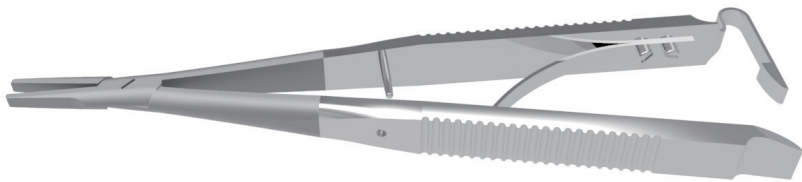

view

国友氏替刃パンチ

S-28	全長 105mm / 先端 11mm	¥ 55,000	JAN:4547451043676
材 SUS	薬 クラス I	JMDN 32764001	届 13B1X00048000760 入 1

ワンハンドで固定解除が可能な替刃パンチ。（バネありタイプ）

ハンドルの固定解除をワンハンドで行うことが可能なため、操作性に優れております。先端は小サイズのため、マイクロサージャリーに適したサイズに替刃を割ることが可能です。バネありタイプのため、刃の把持が容易に行えます。

フェザー眼科用カミソリ 100 枚入

M-150G	全長 10×56mm / 刃厚 0.1mm	¥ 5,000	JAN:4902470066097
材 C	薬 クラス II	JMDN 32764002	認 219AABZX00216000 入 100

眼形成手術に幅広く活躍する皮膚切開用カミソリ。

眼瞼下垂手術、腫瘍摘出術、DCR など、眼形成領域を中心とした皮膚切開に適しております。



鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ



【付属品】
M-2260-3 シリコンチューブ
K-1972 ポリエステル洗眼瓶 250cc



〈アフターパーツ〉
M-2260-3 シリコンチューブ*
(内径 3mm 外径 6mm) 50cm
標準小売価格 ¥800
※オートクレーブ可



〈アフターパーツ〉
K-1972 ポリエステル洗眼瓶 250cc
標準小売価格 ¥430
※オートクレーブ不可 (EOG 滅菌推奨)



フォルニックスまで洗浄できる眼内炎予防に必須のデバイス

ご考案者 野口 三太郎 先生 コメント
(ASUCA アイクリニック 仙台マークワン (仙台市) / ツカザキ病院 眼科 (兵庫県 姫路市))

「術中に眼表面をイソジンやオゾン水で洗い流すことは眼内炎の予防に重要である。しかし、しっかり洗い流したにもかかわらず、すぐに眼表面が油膜などで汚染されることを経験する。結膜は深くフォルニックスで翻転する。眼脂や睫毛などが迷入しやすく菌の増殖の場となりやすい。フォルニックスは 15 ミリほどあり、通常の眼洗では洗うことは不可能である。しかし、今回開発されたフォルニックスウォッシャーはフォルニックスまでも洗浄できるデバイスで術中の眼表面を可能な限り清潔に保つことができる。眼内炎予防には必須のデバイスになるに違いない。」



5D view



MOVIE

野口氏 Fornix ウォッシャー

M-2260A 全長 15.6mm / 直径 20mm ￥95,000 JAN:4547451339649

材 SUS 薬 クラス I JMDN 34630000 届 13B1X00048002502 入 1

memo