

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体


緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

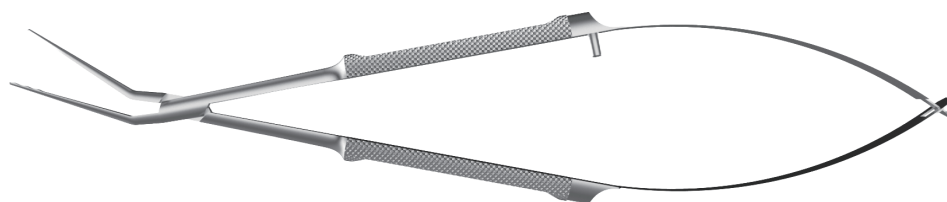

3D view

セッティング～
ローディング

MOVIE

ICL 手術全編



MOVIE

ICL 手術全編
+ 摘出

MOVIE

北澤氏セッティング&抜去用鑷子


M-2282 全長 125mm / 把持部: 17mm ￥130,000 JAN: 4547451339151

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002589 入 1

ICL のカートリッジセッティングと摘出を
1本でこなすハイブリッド鑷子。

ご考案者 北澤 世志博 先生 (千代田区 アイクリニック東京) コメント

「ICL でも重要なカートリッジへのセッティングの際に、先端部がとても細くなっている内側には波状のセレーションがはいっており、レンズを優しく掴むことが可能。また摘出の際も、レンズの支持部を把持してゆっくりと引いてくればレンズが取り出せるので非常に便利で且つセッティングと摘出両方に使える最適な鑷子です。」

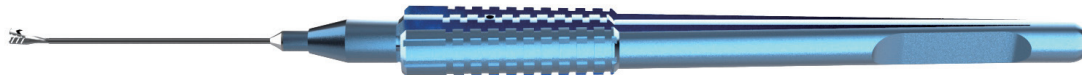専用
シリンジ
付属

3D view

セッティング～
ローディング

MOVIE

ICL 手術全編



MOVIE

北澤氏 ICL ローディング鑷子

DS-050 全長 156mm / シャフト 37.5mm / 径 20G ￥245,000 JAN: 4547451338765

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002575 入 1

滑り止め、把持力、操作性が向上した
ICL ローディングの新スタンダード。

ご考案者 北澤 世志博 先生 (千代田区 アイクリニック東京) コメント

「本製品は、先端部内側に施したブロック状のセレーションと滑り止め加工により、ICL を装填する際に滑りにくく、確実な把持力を実現します。さらに先端部にわずかに上向きの角度を設けることで、ICL をカートリッジに引き込む際にレンズ先端を把持しやすくし、カートリッジ内での操作を簡便にしています。」



3D view

マニピュレート



MOVIE

ICL 手術全編



MOVIE

北澤氏 ICL マニピレーター

M-2280 全長 109mm / 先端 1mm×0.7mm ￥56,000 JAN: 4547451337799

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048002516 入 1

ICL マニピレーターのスタンダード。

ご考案者 北澤 世志博 先生 (千代田区 アイクリニック東京) コメント

「先端部は従来品よりもややシャープに設計されており、1mm 以下の小さなサイドポートから挿入可能です。さらにマニピレーター裏面には、レンズを傷つけにくく、かつ滑りにくい加工を施しているため、レンズの回転や固定をスムーズに行えます。加えて細長い形状により、ICL を毛様溝へ確実に設置することが可能です。」

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部


関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

※掲載画像はイメージの為、実際のサイズとは異なります。

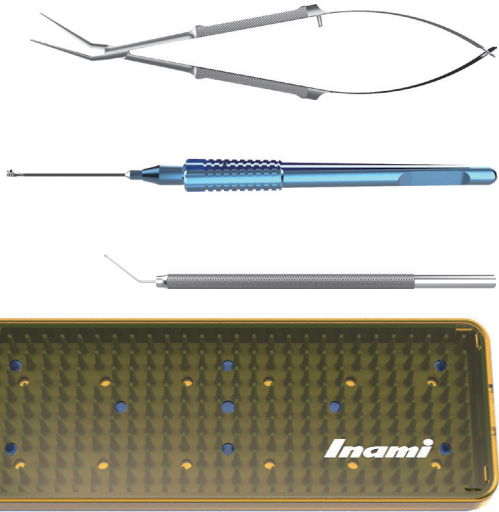

北澤先生監修 ICL 手術「三種の神器」。

ICL 手術をすでに実施されている先生はもちろん、これから導入を検討されている先生にとってもスターターセットとしてご検討いただけるラインアップです。

北澤氏 ICL セット

セットコード	セット価格	セット内容	入数
ICL-SET1	¥ 429,000	M-2282 北澤氏セッティング&抜去用鑷子	1
		DS-050 北澤氏 ICL ローディング鑷子	1
		M-2280 北澤氏 ICL マニピュレーター	1
		M-2700A 滅菌トレー 1～3 本用 マット	1

入 1 このセットの詳細は、本カタログの 174 ページでご確認ください。



M-2285A



M-2285S



MOVIE



MOVIE

ICL マニピュレーター 三好・塚本

M-2285A	アングル	全長 104mm / 先端 0.7×1.0mm 突起φ0.15mm	¥ 56,000	JAN:4547451337928
M-2285S	ストレート	全長 104mm / 先端 0.7×1.0mm 突起φ0.15mm	¥ 56,000	JAN:4547451337935


材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048002529 入 1

一瞬で ICL を正しい位置（虹彩下水晶体前囊上）に挿入するために。

ご考案者 三好眼科 院長 三好 輝行 先生 / 塚本 秀樹 先生

三好 輝行 先生（福山市 三好眼科）コメント

「従来のマニピュレーターにはノッチがなくて、線状に荒く削られた裏面と ICL 表面の摩擦力のみで ICL をマニピュレートしていたが、表面を滑る事が多く慣れるまで時間を要していた。新しいマニピュレーターには ICL の hole にノッチを挿入しても良いが、しなくても滑る事なく前囊を穿刺する事なく意図した部分に速やかに安全に ICL を挿入出来る。」

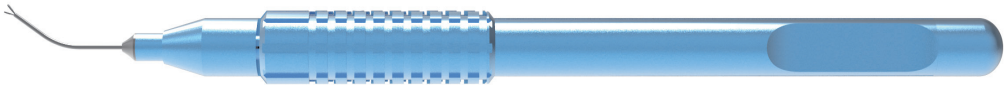

ED view



MOVIE

五十嵐氏 ICL 摘出鑷子

DS-055	全長 135mm / シャフト 16mm / 径 25G	¥ 230,000	JAN:4547451339724
--------	------------------------------	-----------	-------------------

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002604 入 1

前房の安定性に配慮した ICL 摘出鉗子。

ご考案者 五十嵐 章史 先生（渋谷区 代官山アイクリニック 代官山院）コメント

「本製品は、ICL の摘出において、25G の短い弯曲シャフトにより粘弾性の流出を最小限に抑え、前房の安定性を維持しながら摘出することができます。ICL レンズを傷つけずしっかり把持できるようにダイヤモンドブラスト加工が施されており、レンズを安全かつスムーズに眼外へ引き抜くことが可能です。」

専用
シリンジ
付属

専用
シリンジ
付属

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユ
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体


緑内障

角膜

外眼部分

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

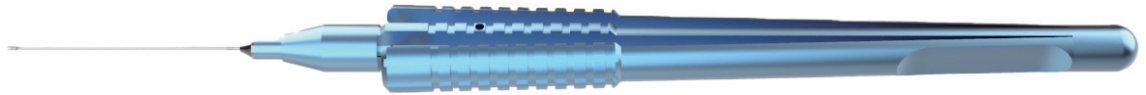大澤氏ファイングリップ
ILM 鉗子 27G


DS-901 全長 150mm / シャフト 31mm / 27G ￥260,000 JAN:4547451337423

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 10861001 屈 13B1X00048002487 入 1

27G エンドグリップタイプの新スタンダード。

ご考案者 大澤 俊介 先生（三重県四日市市 MIE 眼科四日市）コメント

「従来のエンドグリップタイプの 27G ILM 鉗子ではきっかけは作りやすい反面、把持面積が小さいため ILM が裂けて把持が難しい傾向がありました。この鉗子はエンドグリップ部の把持面積を通常の 4 倍ほど大きくとっているため ILM が破れにくく、しっかりと把持することが可能な上に先端のエッジを巧みにわずかに面取りすることで感覚網膜を傷つけることなく膜剥離のきっかけを行う事が可能です。高剛性なシャフト素材を使用することによって先端からのシャフト長は 31mm あるので強度近視眼にも対応できます。」

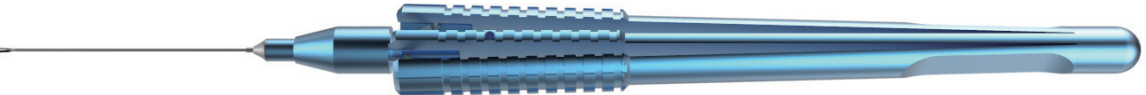専用
シリンジ
付属

家鴨嘴型鉗子 細み




DS-900 全長 147mm / シャフト 28mm / 径 27G ￥260,000 JAN:4547451332657

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002240 入 1

“つかめる” “やぶれない” を両立した 27G 鉗子。

ご考案者 岡田 和久 先生（大分市 おかだ眼科）コメント

「既存の ILM27G 鉗子はゲージ数が小さい鉗子に比べ把持部の面積が小さくなってしまうため、しっかり把持できない（すぐに破れてしまう）ことが多く、操作に注意を払う必要がありました。この鉗子は網膜の接触部の面積を大きく、形状をなだらかにすることにより、把持力を増加させ、さらに ILM が破れにくくなっています。また、先端を鋭角にすることで“きっかけ” づくりが可能です。」

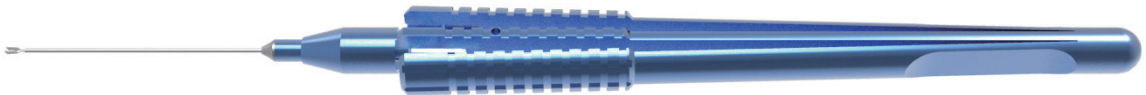専用
シリンジ
付属

家鴨嘴型 ILM 鉗子



DS-800 全長 151.8mm / シャフト 34.6mm / 径 25G ￥250,000 JAN:4547451329084

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002002 入 1

ILM をしっかりと把持することが可能な家鴨嘴型の ILM 鉗子。

ご考案者 岡田 和久 先生（大分市 おかだ眼科）コメント

「既存の 25GILM 鉗子は、ILM に接する面積が小さく把持力が弱く、また把持した ILM が破れやすかった。この鉗子は ILM を把持する面を大きくし、丸みをもたすことで破れにくくしています。把持力が増えているので網膜を把持すると危険ですので注意を。」

memo

J-01 硝子体鑷子・剪刀 (MIVS)

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部



関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

専用
シリンジ
付属

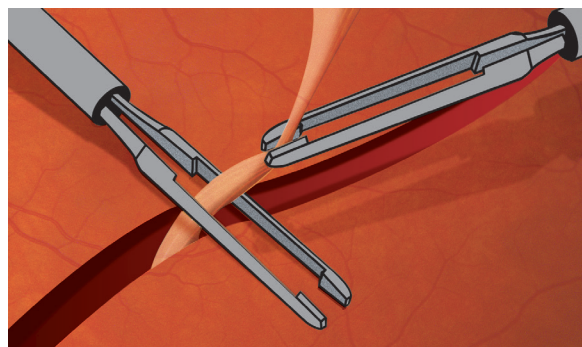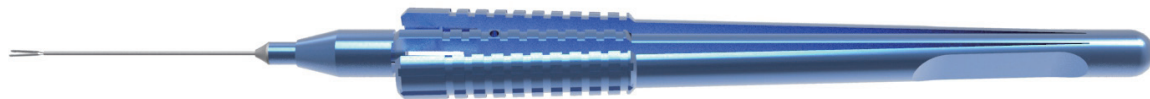

双手法にて安全に効率よく膜処理を行うための眼内鉗子。

ご考案者 高須 逸平 先生 (岡山市 北区 高須眼科) コメント

「MIVS を用いて複雑な網膜剥離 (PVR) を手術するスペシャリスト向けの眼内鉗子です。双手法を用いる際に、カッターとこの鉗子、もしくは両手にこの鉗子をもって、安全に効率よく膜処理をするために考案しました。

特徴

- ① 25G reusable forceps : MIVS 対応かつ経済的
- ② チタン製 : 高剛性で、難症例やハードな使用に耐える
- ③ 大きく平坦なプラットフォーム : 柔らかい膜が干切れになりにくい
- ④ 尖った部分がなく、表裏がない head design : 剥離網膜に対して安全
- ⑤ 0.2 mm の間隙のある大きなヘッド : 剥離網膜を押さえやすい
- ⑥ 2 本使用 (bimanual use) により、片方で膜を把持し、他方で網膜を押さえる。開いた間隙から strand を引き出す。
- ⑦ 小児、若年者症例にも適応。

複雑な網膜剥離症例に対する双手法

【鉗子とカッターを用いた硝子体切除】

- ・鉗子で剥離網膜を押さえつつ、カッターで硝子体を切除する。
- ・開いた鉗子の間や、サイドからはみ出してくる硝子体を切除する。
- ・鉗子で剥離網膜を押さえつつ、カッター吸引で PVD を進める。

【鉗子と鉗子を用いた膜処理】


- ・片方の鉗子で剥離網膜を押さえながら、他方の鉗子で近くの膜をはがす。
- ・両方の鉗子ではがしつつある膜を把持し、中から外方向にテンションをかけて、膜を分割剥離する。
- ・両方の鉗子を用いて、交互に引っ張って subretinal strand を抜き出す。」

増殖膜剥離鉗子 25G “メンブレンストリッパー W”

DS-029 全長 151.5mm / シャフト 32.5mm / 径 25G ¥262,000 JAN:4547451329282

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 10861001 屈 13B1X00048002033 入 1

専用
シリンジ
付属

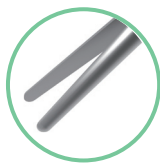

森井式 ILM 鉗子 25G “かおりのノンセレーション”

MV-091 全長 148.5mm / シャフト 31.7mm / 径 25G ¥260,000 JAN:4547451329255

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002016 入 1

初心者でも安全に ILM 剥離が可能なノンセレーション鉗子。

先端部が無鉤・扁平にデザインされた新しいタイプの ILM 鉗子です。

ご考案者 森井 香織 先生 (兵庫県 神戸市 森井眼科クリニック) コメント

「他の ILM 鉗子とは異なり、先端が無鉤にしていますが、先端に特殊なサンドブラストコーティングが施されており、ILM のみを簡単に把持することが可能です。鉗子の先端が、把持によっても位置が変わらないため (ひっこまないということ)、目標 ILM の把持を確実にしています。また、シャフト (先端部含む) が 31.7mm と長いので、長眼軸眼にも対応できます。無鉤であることで他の組織を傷めるリスクも低く、初心者にも安全に ILM 剥離を行うことができる鉗子であると考えます。」

専用
シリンジ
付属



ロストラル ILM 鉗子 25G ロングタイプ


DS-805 全長 156mm / シャフト 37.5mm / 径 25G ¥260,000 JAN:4547451331308

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048002146 入 1



長眼軸にも対応可能な 25G ILM 鉗子。

シャフトを長くデザインしているため、長眼軸の場合においてもより処置がしやすくなっております。また先端にはサンドブラスト加工を施しているため、ILM を滑らずしっかりと把持することが可能です。

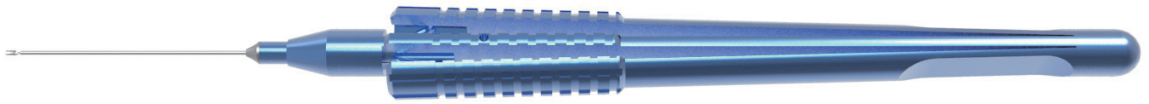専用
シリンジ
付属

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユ
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

ILM 鉗子ファイングリップ 25G



EIDview

DS-028 全長 151.0mm / シャフト 32.0mm / 径 25G ￥250,000 JAN:4547451320425

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 10861001 屈 13B1X00048000795 入 1

ファインなピックと視認性が魅力の ILM 鉗子の定番モデル。

エッカードタイプのファインな先端サンドブラスト加工が容易に ILM 剥離のきっかけをつくり、つまむように組織をしっかりと把持することが可能です。動作中の視認性にも優れた定番モデルです。

専用
シリンジ
付属

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

ILM 鉗子ピックエンド 25G



EIDview

DS-802 全長 151mm / シャフト 32.5mm / 径 25G ￥250,000 JAN:4547451320432

材 Ti (先端 SUS) 薬 クラス I JMDN 10861001 屈 13B1X00048000796 入 1

使いやすい ILM 鉗子の定番モデル。

チップの先端を眼球の曲面に合わせることで、より安全で精細な ILM の繊細なきっかけづくり及び把持を実現します。

memo

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜


外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

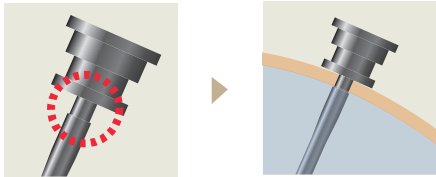

抜け防止加工（適度な窪み）



トロカールカニユーラ 27G

受 **TR-078** 全長 5.9mm / 径 27G ￥31,500 JAN:4547451327868

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12989001 届 13B1X00048001928 入 1

トロカールカニユーラ 27G 用インサーター

受 **TR-078-ISB** 2ステップ用 全長 45mm ￥18,000 JAN:4547451327851

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12989001 届 13B1X00048001928 入 1

27G 極小切開硝子体手術に対応するトロカールカニユーラ。

27G 硝子体手術の際に、器具の出し入れ用のガイドとしてポートに留置して使用します。左図のように装着時の抜け防止加工を施しているため、安定した操作を行うことが可能です。



堀尾・田中式テーパードトロカール 23/25G

TR-077N 全長 5.8mm / 径 23/25G ￥31,000 JAN:4547451323303

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12989001 届 13B1X00048001480 入 1

堀尾・田中式テーパードトロカール用インサーター

TR-077N-ISB 23/25G 用 全長 45mm ￥18,000 JAN:4547451323310

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12989001 届 13B1X00048001648 入 1

クロージャーバルブの装着が可能な 25G トロカール。

当社 TR-077 テーパードトロカールのニードル部分を 4mm とし、先端部をより挿入抵抗の少ない形状にモディファイさせ、6 本のラインを設ける事により抜け防止に有効な形状となりました。

ご考案者 堀尾 直市 先生（岐阜市 岐阜ほり眼科）コメント

「クロージャーバルブの装着により術中の眼圧が安定し、挿入部の形状はすり鉢状なので、器具の挿入が容易です。カニユーラ根部の滑り止めを加え、強膜創口を変形することなく、トロカールが抜ける危険性が少なくなりました。カニユーラの長さは 4mm で、成人の硝子体手術にも使用できます。」



1 ポート硝子体手術が可能な 25G トロカール。

当社 TR-006 クロージャーバルブ（別売）の装着が可能であり、25G 硝子体手術器具のクロージャーバルブを通しての眼内への挿入が可能となります。また、インフュージョンニードルのチューブに、本器具を装着することにより、瞼裂の狭い新生児などの one-port 硝子体手術が可能となります。

ご考案者 田中 住美 先生（名古屋市 中村区 アイケア名古屋）コメント

「23G Closure Valve が装着可能な 25G 硝子体手術用の TrocarCannula です。通常の 25G Trocar Cannula と異なり、器具の挿入部分が掘鉢状の形状をしていますので、Closure Valve を通しても容易に 25G 硝子体手術器具を挿入する事ができます。Closure Valve の装着により、器具の抜去時の眼圧の変動を抑制することが可能です。」

東京女子医科大学式テーパードトロカール 23/25G

受 **TR-077** 全長 4.8mm / 径 23/25G ￥25,300 JAN:4547451321156

材 SUS 薬 クラス I JMDN 12989001 届 13B1X00048001481 入 1

memo

トロカール用インフュージョンカニューラ。

インサートタイプのインフュージョンカニューラ。ポートの差し替えが容易に行えます。



インサートインフュージョンカニューラ 25G

TR-071 先端 6mm / チューブ 300mm ￥17,250 JAN:4547451329091

材 SUS、シリコン 薬 クラス I JMDN 34899021 届 13B1X00048001999 入 1

memo

鉏子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部


関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスプレイ
- AtoZ

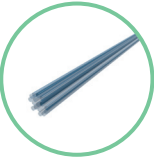



単

Best Seller

RB-40-2

より安全に硝子体皮質を除去できるイノベーションアイテム。

硝子体手術において、カッターで硝子体切除後、可視化した残存硝子体を掃くように除去することができます。レバー部の操作により、ブラシの長さを無段階に調節することが可能です。このため、ブラシのコシの強さを自在に変えることができ、網膜に対する影響を最小限に抑えられます。トロカール挿入時は、ブラシをシャフトに収納することで、ブラシのけばだちの防止、そしてストレスのない挿入操作を行うことが可能です。

岡田氏網膜ブラシ ビットスウィーパー

25G	受	RB-700H-25N	専用ハンドル	108mm	¥ 94,000	JAN:4547451321606			
		RB-40-2	替ブラシ	15mm / 全長 95mm	¥ 14,000	JAN:4946585278761			
材	SUS	薬	クラス I	JMDN	34880000	屈	13B1X00048001229(RB-700H-25N)	入	1
							12B1X00005000012(RB-40-2)		





きっかけづくりに有用な硝子体ピック。

内境界膜剥離、網膜下増殖の手術に有用なピックです。
小切開硝子体手術におけるトロカール対応の 23G、25G 用をラインナップしております。

竹内式メンブレインピック

M-579-25	25G	全長 117mm	¥ 41,000	JAN:4547451321200					
材	SUS	薬	クラス I	JMDN	32754001	屈	13B1X00048001227	入	1

memo

R3

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ



エクストルージョンタイプ

バリエーション豊かなバックフラッシュハンドピース。

眼内液や血液の確実な受動または能動吸引が可能です。また、先端のシリコンチップが、網膜を安全に擦過し、残存硝子体皮質を効率的に除去します。その他には後部硝子体剥離のきっかけづくりにも活用できます。3回までのリユースが可能なコストパフォーマンスに優れている点も魅力です。

バックフラッシュハンドピース ハンドル付きセット

M-562A-27B	27G	全長 145mm / 先端 1mm	¥ 57,500	JAN:4547451327899
M-562A-25B	25G	全長 141mm / 先端 1mm	¥ 56,000	JAN:4547451321798

材 SUS 薬 クラス I JMDN 38749000 屈 13B1X00048001448 入 1

バックフラッシュハンドピース ハンドル付きセット
エクストルージョンタイプ

M-562C-27B	27G	全長 145mm / 先端 1mm	¥ 60,000	JAN:4547451327882
M-562C-25B	25G	全長 141mm / 先端 1mm	¥ 57,500	JAN:4547451321811

材 SUS 薬 クラス I JMDN 38749000 屈 13B1X00048001448 入 1



M-562AH



M-562CH

【交換用バックフラッシュハンドピース 本体】

M-562AH	全長 105mm	¥ 38,000	JAN:4547451032458
----------------	----------	----------	-------------------

材 SUS 薬 クラス I JMDN 38749000 屈 13B1X00048001448 入 1

【交換用バックフラッシュハンドピース エクストルージョン本体】

M-562CH	全長 105mm	¥ 38,000	JAN:4547451032489
----------------	----------	----------	-------------------

材 SUS 薬 クラス I JMDN 38749000 屈 13B1X00048001448 入 1

【交換用ニードル】

R3



ブラッシュニードル 3 本入（交換用）

M-562E-27B	27G	全長 49mm / 先端 1mm	¥ 38,000	JAN:4547451327875
M-562E-25B	25G	全長 49mm / 先端 1mm	¥ 35,000	JAN:4547451321835

材 SUS、シリコン 薬 クラス I JMDN 38749000 屈 13B1X00048001448 入 3

【交換用シリコンパーツ】



M-562B

M-562D

シリコンパーツ 5 ケ入（交換用）

M-562B	-	全長 35mm	¥ 9,500	JAN:4547451032465
M-562D	エクストルージョン用	全長 150mm	¥ 12,650	JAN:4547451032496

材 シリコン 薬 クラス I JMDN 38749000 屈 13B1X00048001448 入 5

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

R3



硝子体手術の広角観察システムに対応するバックフラッシュ。


網膜・硝子体手術における広角眼底観察装置のアダプター部分への接触を防ぐことなどを目的に、ハンドルと先端部の接続部がペンシル形（円錐状）に設計されました。また、強度近視眼に対する操作を行ないやすくすることなどを目的に、先端部のブラッシュユニットは従来タイプより長くなっております。

ペンシル形（円錐状）の接続部は、従来タイプの接続部（円柱状）に比べ、より先端部へ向けて長くなっております。ペンシル形接続部の先端から吸引・バックフラッシュ用ポートへの距離を従来タイプと同一にするために、シリコンパーツ（M-550D）の先端側（装着部）をカットすることにより、吸引・バックフラッシュ用ポートの位置を、従来品より先端部へ近付けました。

喜多式バックフラッシュハンドピース
エクストルージョン ハンドル付きセット

M-550A-25B 25G 全長 151mm / 先端 0.8mm ￥57,500 JAN:4547451325802

材 SUS 薬 クラス I JMDN 38749000 屈 13B1X00048001776 入 1

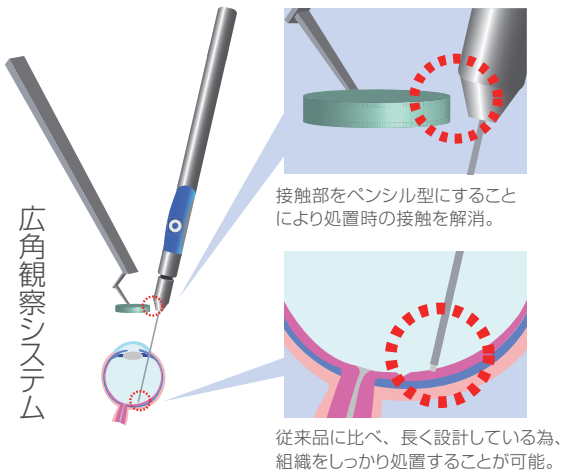

【交換用 喜多式バックフラッシュハンドピース 本体】

M-550AH 全長 109mm ￥40,500 JAN:4547451325833

材 SUS 薬 クラス I JMDN 38749000 屈 13B1X00048001776 入 1

【交換用ニードル】

R3

【交換用シリコンパーツ】



喜多式ブラッシュニードル 3 本入（交換用）

M-550E-25B 25G 全長 53mm / 先端 0.8mm ￥38,000 JAN:4547451325819

材 SUS、シリコン 薬 クラス I JMDN 38749000 屈 13B1X00048001776 入 3

シリコンパーツ 5 ケ入（交換用）

M-550D エクストルージョンタイプ 全長 146mm ￥12,500 JAN:4547451325314

材 シリコン 薬 クラス I JMDN 38749000 屈 13B1X00048001776 入 5

Best
Seller

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ



SD view



プラグフォーセップス

M-560 全長 110mm ￥46,000 JAN:4547451042099

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000427 入 1

強膜プラグを確実に把持する専用鑷子。

器具の挿入口を一時的に遮蔽するプラグの着脱に便利な鑷子です。プラグを確実につかむために鑷子の先端にはプラグの頭部に合致する凹面がつけられています。

memo

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ー

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜



外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

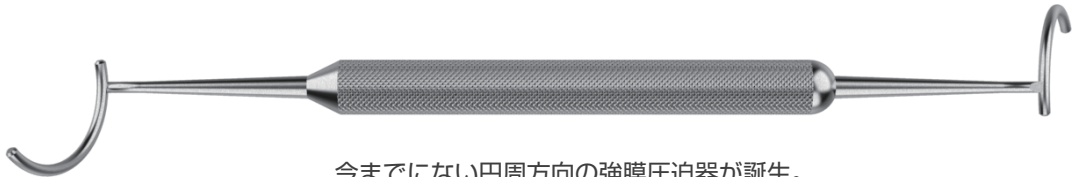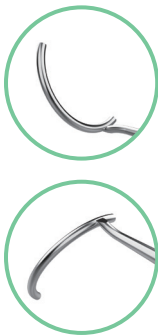

今までにない円周方向の強膜圧迫器が誕生。

ご考案者 野田 雄己 先生（松江市 野田眼科医院）コメント

硝子体手術において、両手法を行う局面が時としてあります。その際、周辺網膜の処理を行う場合は助手に強膜圧迫をしてもらいますが、従来の圧迫器では安定して強膜圧迫を行うことが難しいときがありました。そこで、助手がより安定して強膜圧迫のできる器具が作れないかを考え、円周方向に強膜を圧迫する円弧状の形をした圧迫器を考案しました。この圧迫器を使用することで主に以下の利点がありました。

1. 助手の強膜圧迫が安定することで、両手法での増殖膜処理を安全に行うことができた。
 2. 助手の強膜圧迫が安定しているため、シャンデリア照明を設置しなくても広角観察装置下で、ライトとカッターのみで周辺硝子体の郭清が可能だった。
 3. シャンデリア照明下で術者自身が強膜圧迫する場合も、少ない圧迫回数で広角での強膜圧迫が可能になった。
- 今回考案した圧迫器を使用することで広範かつ安定した強膜圧迫が可能になりました。



野田式強膜圧迫器

M-2301 全長 141mm / 径Φ1.5mm / 幅 22mm ￥48,000 JAN:4547451338963

材 SUS 薬 クラス I JMDN 33804000 屈 13B1X00048002574 入 1

view

MOVIE

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ



ワイドビューイングシステムに干渉せず、あらゆる場面で使い分けられる両頭圧迫器。

ご考案者 米田 一仁 先生（昴会アイセンター / さくら眼科グループ）コメント

「曲がりの方は、斜視鉤やプラグ鑷子のように圧迫器の持ち手の回旋による圧迫が可能のため、ワイドビューイングシステムと干渉せず圧迫が可能です。また、表面を可能な限りスムーズにしたため、結膜上を滑るように移動出来、一度の圧迫で広い範囲をインデント可能です。面になっている方は、一ヶ所の圧迫で広い範囲を視認したい場合に有効であり、裂孔の光凝固や汎網膜光凝固を眼内レーザーで行う時に有効です。」



米田式眼球圧迫器

M-141Y 全長 122mm / 先端 3×8.2mm / 6×10.5mm ￥38,000 JAN:4547451336327

材 SUS 薬 クラス I JMDN 33804000 屈 13B1X00048002438 入 1

view



状況に応じて使い分けられる万能圧迫器。


ご考案者 上村 昭典 先生（鹿児島市立病院 眼科）コメント

「強膜圧迫によく使われている斜視鉤と強膜プラグ鑷子の中間の形を採用し、柄の部分と先端部に 120 度の角度をつけた単純な構造です。先端部は均一の丸みを帯びた棒状としました。結膜上あるいは部分的結膜切開創から結膜下に潜り込ませて使用することで、結膜全周切開することなくほぼ 360 度の眼底周辺部、赤道部の圧迫・観察が可能です。また先端部を子午線方向に向けると後極部に近い部分まで圧迫できます。先端は小型なため、小さい眼球、瞼裂のせまい例、あるいは小切開硝子体手術用として使用できます。小切開硝子体手術では結膜上からの使用が基本ですが、必要に応じて小さな結膜切開創から結膜下に潜り込ませ、下方や鼻側道部の圧迫が可能です。先端部が丸みを帯びた形状のため結膜下での移動も容易で、眼球周辺部赤道部を連続的に圧迫できます。」

上村式眼球圧迫器 小

M-2067S 全長 101mm / 径 1.5mmφ ￥40,000 JAN:4547451320265

材 SUS 薬 クラス I JMDN 33804000 屈 13B1X00048000706 入 1

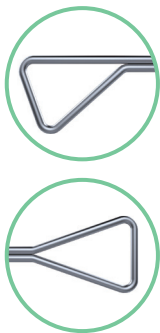

小切開硝子体手術におけるスムーズな圧迫を実現。

三角状の圧迫子を両端に取り付け、片方は直型のため、真直ぐに圧迫が可能であり、反対側には 20 度の傾斜の付いた同サイズの圧迫子を取り付け、圧迫部位により両頭を使い分けることにより、小切開硝子体手術におけるスムーズな圧迫を行うことを目的に開発されました。

ご考案者 柴 宏治 先生（大阪市 旭区 柴眼科医院）コメント

「小切開硝子体手術（MIVS）を行う際、従来の 20G による硝子体手術と同じ手術操作を行う上で、もっとも術者が手術操作を行い辛く感じる操作のひとつに強膜圧迫操作があると思います。
強膜圧迫は圧迫子が結膜上から強膜を圧迫する際に、結膜と圧迫子の接触面積が大きければ大きいほど圧迫を行い辛く感じるものと思われます。
そこで、新しく開発した MIVS 用強膜圧迫子は、結膜をできるだけ巻き込まずに、また、強度を持たせ、視認性をよくするためにワイヤループの形状を採用しました。
20 度の角度がついた側の形状は、上方または下方を圧迫する際に圧迫しやすいように設計されています。
三角の底辺または頂点部分を結膜円蓋部に滑り込ませることにより、結膜嚢の小さい圧迫困難症例に対してもスムーズな圧迫操作が可能です。」

柴式 MIVS 用強膜圧迫子

受	M-2081	全長 128mm / 先端 0.5mmφ / 5mm	¥ 40,000	JAN:4547451321163
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 33804000 届 13B1X00048001077 入 1



大島式眼球圧迫器

M-141L	大	全長 135mm 円柱 5.5mm 球 3mm	¥ 32,000	JAN:4547451320104
M-141P	未熟児用	全長 120mm 円柱 4.5mm 球 2mm	¥ 29,000	JAN:4547451320098
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 33804000 届 13B1X00048001559 入 1

両頭、滑りどめ加工の眼球圧迫器。

先端に滑りどめの加工が施してある両頭の眼球圧迫器。面による圧迫と点による圧迫を、用途、状況により使い分けることが可能です。2 種類のサイズよりお選びいただけます。

Best Seller



田野氏眼球圧迫器

M-141T	全長 105mm 左側 12.4mm×4mm 右側 3mm×7mm			¥ 35,000	JAN:4547451320111
材	SUS	薬	クラス I	JMDN 33804000 届 13B1X00048000356	入 1

綿棒の形状が使いやすいベストセラーの眼球圧迫器。

ベストセラーの両頭眼球圧迫器。片側は綿棒形状、滑り止め加工で操作性に優れております。面による圧迫と点による圧迫を、用途、状況により使い分けることが可能です。

鉏子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスプレイ
- AtoZ



安藤氏眼球圧迫器

M-141	全長 147mm 円柱 5.5mm 球 3mm	¥ 36,000	JAN:4547451320197
-------	-------------------------	----------	-------------------

材 SUS 薬 クラス I JMDN 33804000 屈 13B1X00048001318 入 1

ロングサイズの両頭圧迫器。

クラシックでロングサイズの眼球圧迫器。
面による圧迫と点による圧迫を、用途、状況により使い分けることが可能です。



五十嵐氏未熟児鉤

M-1135	大 全長 78mm / 先端 7×7.5mm	¥ 23,000	JAN:4547451030867
M-1136	小 全長 78mm / 先端 5×5.5mm	¥ 23,000	JAN:4547451030874

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048001484 入 1

安全でスムーズな操作が可能なショートタイプ未熟児鉤。

未熟児の眼底検査を行う際、未熟児の眼球を操作し、固定するために使用します。
鉤を押し込んだ方向に、眼球が回転するため、眼底周辺まで容易に観察することが可能です。シャフトの角度と長さは、器具の柄の部分が、顔面などに衝突してしまうことがないように設計しております。



SD view



未熟児鉤

M-112	全長 120mm / 先端 7.5×8mm	¥ 20,000	JAN:4547451320159
-------	-----------------------	----------	-------------------

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048000343 入 1

未熟児鉤のスタンダード。

未熟児の眼底検査を行う際、未熟児の眼球を操作し、固定するために使用します。
鉤を押し込んだ方向に、眼球が回転するため、眼底周辺まで容易に観察することが可能です。

memo



デシャン

KI-80A	右	全長 131mm	¥ 23,000	JAN:4547451030256
KI-80B	左	全長 131mm	¥ 23,000	JAN:4547451030263

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048001581 入 1

スムーズな通糸が可能な穴あき鉤。

眼筋にひっかけ、先端の穴を利用して眼筋の裏にスムーズに通糸することが可能です。



マイヤー・シュビッケラート氏ロカリゼーター

M-115R	全長 125mm	¥ 23,000	JAN:4547451041382
--------	----------	----------	-------------------

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048001420 入 1

網膜裂孔部位を圧迫、マーキングする必需品。

裂孔位置と推測される部位に、強膜面から先端の球を利用して圧迫します。隆起部位と裂孔部の位置関係が確認された際に、先端の突起を利用し、マーキングすることが可能です。網膜下液の廃液にも使用できます。




アスピレーティングスパーテル

M-2057	全長 139mm	¥ 95,000	JAN:4547451313218
--------	----------	----------	-------------------

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32754001 屈 13B1X00048000055 入 1

術野の展開と液体の除去を同時に 1 本で行える優れモノ。

裂孔原性網膜剥離に対する強膜バックリング術において、良好な術野の視認性を得るために、術野の展開、術野に貯留する液体の除去などを適切に行なう必要があります。この術野の展開と液体の除去（吸引）を別々の作業として従来は行なわれていたが、本器具は、術野の展開に用いるスパーテルに吸引機能を付加し、術野の展開と液体の吸引を片手で同時に行なえることを目的として開発されました。把持部にある調節ポートを指で開閉操作することにより、吸引機能を調節・停止できるように設計されています。調節ポートから指を離してフルオープンにすれば、瞬時に吸引を停止させることが可能となります。

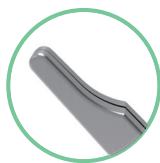

深水式エンサークリング・プラグ鉗子

M-2198	全長 109mm	¥ 56,000	JAN:4547451327219
--------	----------	----------	-------------------

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048001890 入 1

シリコンスリーブへの挿入を容易にこなす優れモノ。

ご考案者 深水 真 先生（岡山県 小山眼科医院）コメント

「バックリングは勿論、硝子体手術においてももしばしば輪状締結術を追加する機会がありますが、その際バンドの両端をシリコンスリーブに挿入するのに難渋した経験は誰もをお持ちではないでしょうか。このプラグ鉗子の根元の太い部分までスリーブに挿入し、鉗子を開くことでスリーブが長方形に開き、術者一人でも容易にバンドを挿入することが可能です。」

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部


関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスポーザブル
- AtoZ

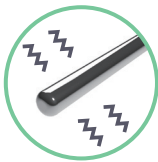

臼井式眼内マグネット 25G

M-582 全長 119mm / 磁石部 : 先端 2mm **¥48,000** JAN:4547451333418

材 SUS 薬 クラス I JMDN 35495000 屈 13B1X00048002430 入 1

眼内異物を簡単吸着・除去。

先端にマグネットを内蔵しており、眼内異物を簡単に吸着・除去することが可能です。

memo