

INAMI PICK-UP NEWS

Vol. 15
2026

ICL手術の「三種の神器」ここに集結。

NEW

セッティング&摘出



前房内操作

装填

ご考案者

アイクリニック東京 院長
北澤 世志博 先生




ICL（Implantable Contact Lens：眼内コンタクトレンズ）は、日本国内において認定医数が年々増加しており、屈折異常を矯正する手術として広く行われています。

白内障サージャンを中心に、現在ではさまざまな分野のサージャンによって実施されています。ICL手術においては、レンズのセッティングおよび前房内での操作が重要なポイントとなり、角膜や水晶体への侵襲を抑えつつ、スムーズな操作を行うことが求められます。今回、こうした手技を支え、より円滑な手術の実施を目的とした**3つの器具**が出揃いました。


ICL手術をすでに実施されている先生はもちろん、これから導入を検討されている先生にとってもスターターセットとしてご検討いただけるラインアップです。

Designed by
Dr. Kitazawa

滑らない&傷つけない ICL三種の神器

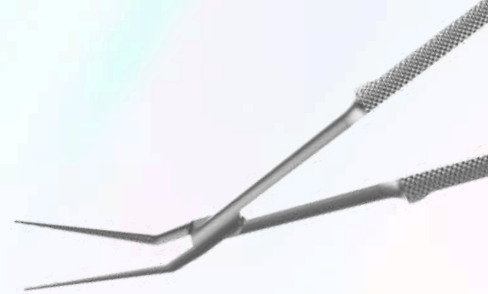

-セッティング&摘出を1本で-

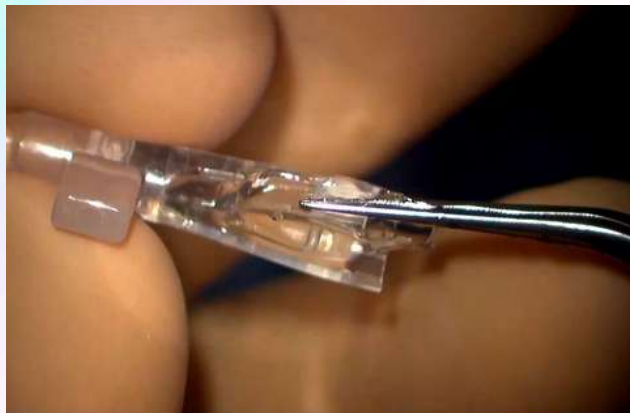

ICL手術におけるレンズ挿入時の回転は、レンズのセッティングミスが主な要因です。本製品は、レンズの把持からカートリッジへのセッティングまで安定して行えるよう設計されています。

- 先端部が細く、レンズをやさしくつかんで折りたたみやすい形状
- 先端部の長さが絶妙。レンズの把持や保存瓶からの取り出しが容易
- レンズのカートリッジへのセッティングがスムーズ
- レンズ回転時や、将来的な近視進行に伴うレンズ交換、白内障手術時のICLレンズ抜去にも有効

型番	商品名	販売単位	標準小売価格(税別)
M-2282	北澤氏セッティング&抜去用鑷子	1個	¥130,000

※矢印マークは天側を示しています


-滑らないが、傷つけない-



先端部分は微妙な上向きの角度がついており、ICLの端をスムーズに把持することができます。さらに、先端部内側にはブロック調のセレーションと滑り止め加工を施しているため、ICLをしっかり把持して滑らずカートリッジを先端までスムーズに引き込むことが可能です。

型番	商品名	販売単位	標準小売価格(税別)
DS-050	北澤氏ICLローディング鑷子	1個	¥245,000

-レンズの回転・固定に-

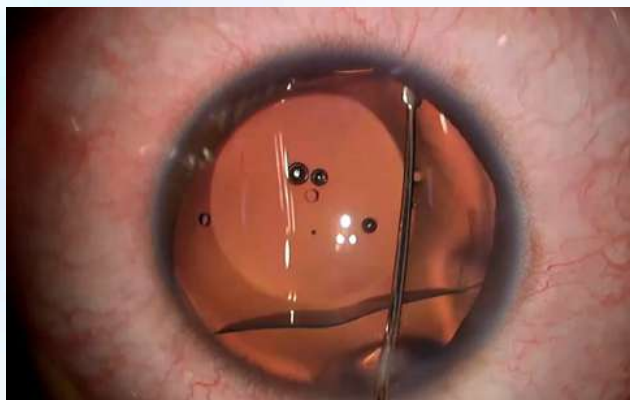

先端部はややシャープな形状で、1mm以下の小さなサイドポートから挿入が可能です。細長い構造により、ICLを虹彩下の毛様溝へ確実に挿入できます。また、マニピレーターの裏面には滑りにくい特殊ブラスト加工が施されており、レンズの回転や固定が容易に行えます。

型番	商品名	販売単位	標準小売価格(税別)
M-2280	北澤氏ICLマニピレーター	1個	¥56,000

日本眼科手術学会

第49回 日本眼科手術学会学術総会学会にて、出展いたします。
北澤 世志博 先生ご考案の新商品に加え、最新の製品ラインアップを展示いたします。ぜひイナミブースでリアルな操作感をお確かめください。
皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

 株式会社 **イナミ**
A Passion for a Nice View

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2 TEL:03-3814-1731 FAX:03-3814-3334
名古屋ベース：〒462-0064 愛知県名古屋市中区大須町285A1 TEL:052-934-7489 FAX:052-934-7490
大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18コミール TEL:0798-37-2880 FAX:0798-37-2881
九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17 TEL:092-504-1734 FAX:092-504-5355

Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp

SCAN ME



新製品カタログ
New Products は
こちらのQRから

※本カタログ記載価格は、すべて2026年1月現在の税別価格となっております。
※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※製品画像は実寸ではございません。本カタログ記載サイズにてご確認ください。
※本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものと異なる場合があります。
※本カタログ中のQRコードのリンク先は予告なく閉鎖、または変更する場合があります。
※本カタログ中のQRコードは印字の状態によりリンク先が正しく表示されない場合がございます。

official web site



2026/1/v1.0

製造販売業許可番号 13B1X00048