



診療空間におけるすべての人に快適と安心を提供するため、
イナミの経験をベースに診療設備にプラスした機能を
「Hospitable Design (ホスピタブルデザイン)」と呼びます。
イナミの診療設備が「もっと、みんなの」診療室をつくる
お手伝いをします。

イナミ 電動患者椅子シリーズ

Patient Chair



「オールコードレス」という発想

これからの診療施設を思い描くとき、そこには何があるべきでしょうか。
この答えを探し、実現するため、私たちは患者椅子の在り方に注目しました。

そしてたどり着いた「オールコードレス化」がもたらすのは、
より美しく、安全で、フレキシブルな診療スペース。

コードから自由になった電動患者椅子が、
診療施設の未来をつくるお手伝いをします。



診療空間におけるすべての人に快適と安心を提供するため、
イナミの経験をベースに診療設備にプラスした機能を
「Hospitable Design（ホスピタブルデザイン）」と呼びます。
イナミの診療設備が「もっと、みんなの」診療室をつくる
お手伝いをします。



KK-110

電動患者椅子リバティスAC

標準小売価格 230,000- (税抜)

JAN:4547451331766 届出番号:13B1X00048002179

AC
電源

最低
地上高
395mm

最高
地上高
535mm



KK-100

電動患者椅子リバティス

標準小売価格 270,000- (税抜)

JAN:4547451331681 届出番号:13B1X00048002174

リチウム
イオン
バッテリー

AC
電源

最低
地上高
395mm

最高
地上高
535mm





清潔で美しい施設。

フロアからわずらわしいコードがなくなることで、患者様にクリーンな印象を与えられることはもちろん、清掃がしやすくなるため、診療空間を清潔に保つことがより容易になります。

安心・安全な空間。

足もとにコードが這っている状態は、つまずきや転倒など、患者様やドクターにとってのリスクを高めます。「オールコードレス化」はこれらを未然に防ぐことができます。また車椅子のスムーズな移動にも有効です。

自由なレイアウト。

「リバティス」はコンセント位置の制約を受けず、またコードのためのスペース確保の必要がないため、設置場所にとらわれることなく、自由に診療施設のレイアウトを行うことができます。



分かりやすい「導線」をテーマにしたコーディネート。

豊富なバリエーションから診療設備のカラーリングを選ぶことができるサービス、COORDINA（コルディナ）。これを利用した施設内の検査機器の識別や、エリアの区分け、色による患者様の案内は検査の効率化や、特に小さなお子様に対する誘導の手段として大変効果的です。

これからの診療施設設計にぜひお役立てください。



座板の前後スライド機能

オプションである座板の前後スライド（70mm）は、お年寄りや体の不自由な方が楽な姿勢のまま受診できるよう開発されました。



座板回転機能

標準では座板の回転90度ごとにクリックを設けているため、患者様が診察の際に確実にドクターと向き合うことができます。

※丸座タイプには、クリック機能は搭載されておりません。



超高感度リモート操作

超高感度の無線通信

医療機器に最適な電波による無線通信規格を採用。従来の赤外線通信と比較し、超高感度の遠隔操作が可能となりました。リモート送受信間の障害物にほぼ全く干渉されないため、フットスイッチの場所を選ぶこともありません。更にフットスイッチ操作と昇降の時間差もないため、スムーズでストレスのない診察が可能です。

※ 国内電波法認証取得済み、海外電波法対応（FCC/CE認証取得済み）

操作性抜群のフットスイッチ

「疲れにくさ」「操作しやすさ」を徹底的に追求しました。かかとを軸に最小限のターンでUP/DOWNの操作を行い、且つ誤操作を防止する為、扇形状のデザインとなりました。

※ 単3電池 2ヶ使用

複数送信コードで誤作動防止

「リバティス」は送信コードをほぼ制限なく持つことが可能なため、複数台を同時に使用する場合でも誤作動を起こすことなく、安全に操作することができます。送信コードはあらかじめそれぞれの椅子とフットスイッチを関連付けます。





「より安心感を」をテーマにしたコーディネート。
パステルグリーンと、ナチュラルな木目を基調としたアースカラーでコーディネート。丸みを帯びた天板形状を選択し、心理的にも優しい安心感を表現しています。

リチウムイオンバッテリー搭載

ハイパワーで耐久性も向上

リチウムイオンバッテリー搭載により、待機時間無しの連続昇降動作約500往復のハイパワーを実現しました。待機時間5秒で自動節電モードに切替わるため、無駄な電力消費を最小限に抑えることが可能です。また、バッテリーの耐久性にも優れており大変経済的です。

充電がなくなっても安心

バッテリー交換がとっても簡単になりました。診察中でも患者様をお待たせすることなくワンタッチでバッテリー交換を行えます。また、予備バッテリーがない場合にも、AC電源を利用して操作することが可能ですので安心です。

ハイスピード充電でストレスフリー

たったの120分でフル充電となる急速充電が可能です。時間がない場合にも、実用充電完了お知らせ機能を利用することで、フル充電を待たなくても問題なく使用できます。また、バッテリーの劣化診断機能により、バッテリーの交換時期を知らせてくれるので、大変便利です。



Specifications

外観

ベース寸法 (mm)	φ420
座面寸法 (mm)	標準角座：430(W)×400(D)×60(H) 標準丸座：φ400×60(H)
質量 (kg)	14kg

電気性能

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	120VA
充電時間	120分

機能

昇降方式	電動駆動
昇降ストローク(mm)	140
最低 / 最高 シート高さ	395 / 535
昇降スピード (mm / s)	30 (定格荷重60kg)
上下位置検出	リミットスイッチ (マイクロスイッチ)
送受信方式	電波方式
送受信コード	ペアリング
作動距離(m)	5m
作動範囲(°)	360°
最大荷重(kg)	120kg
前方スライド (オプション)	70mm

JMDN:15723000 眼科診療・処置用椅子

Design variation

KK-100

電動患者椅子リバティス

リチウム
イオン
バッテリー

AC
電源

Libertis

コード	標準価格	販売区分	座面形状	座面厚	前方スライド	背当て
KK-100	270,000	標準品	角座	標準		○
KK-100-1	260,000	標準品	丸座	標準		
KK-100S	300,000	標準品	角座	標準	○	○
KK-100-11	270,000	受注生産	丸座	標準		○

※充電器は別売りです。(バッテリーは1ヶ含まれております)

コード	オプション名	標準価格
BPL-2540A	リチウムイオンバッテリー(交換用)	50,000
BC2075MX	充電器	45,000
K-1750-DB-P	スライディングテーブル専用患者椅子無線キット	32,000

JAN:4547451334439



交換用バッテリー

専用充電器

KK-110

電動患者椅子リバティスAC

AC
電源

Libertis


コード	標準価格	販売区分	座面形状	座面厚	前方スライド	背当て
KK-110	230,000	標準品	角座	標準		○
KK-110-1	220,000	標準品	丸座	標準		
KK-110S	260,000	標準品	角座	標準	○	○
KK-110-11	230,000	受注生産	丸座	標準		○

オプションカラー

コード	オプション名	標準価格
C-12	患者椅子座板・背当付カラーUP	25,000
C-13	患者椅子座板カラーUP	12,500
C-14	患者椅子背当カラーUP	12,500

Options

角座(標準厚)

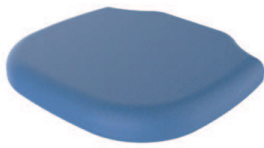

丸座(標準厚)



前方スライド機構



背当て



Part of variation



KK-100-1

販売名: KK-100-1 電動患者椅子 リバティス 丸座
JAN:4547451331865
届出番号:13B1X00048002185



KK-100S

販売名: KK-100S 電動患者椅子 リバティス スライドタイプ
JAN:4547451331780
届出番号:13B1X00048002176



KK-100-11

販売名: KK-100-11 電動患者椅子 リバティス 丸座背当付
JAN:4547451331797
届出番号:13B1X00048002181



KK-110-1

販売名: KK-110-1 電動患者椅子 リバティスAC 丸座
JAN:4547451331964
届出番号:13B1X00048002177



KK-110S

販売名: KK-110S 電動患者椅子 リバティスAC スライドタイプ
JAN:4547451331858
届出番号:13B1X00048002184



KK-110-11

販売名: KK-110-11 電動患者椅子 リバティスAC 丸座背当付
JAN:4547451331841
届出番号:13B1X00048002183



ドクターと患者様のコミュニケーションの場である診療空間に

イナミの「コルディナ」で彩りをプラスしてみませんか？

次世代の「制菌加工」28色を含む計53色の個性豊かなカラーバリエーション

からイメージに合わせた自由な組み合わせが可能です。

一歩先を行く空間マネジメントへ。

私たちイナミがお手伝いします。



制菌加工

(特定用途)

(繊維上の細菌の増殖を抑制します)

認証番号 050SB05

一般社団法人 繊維評価技術協議会

剤名:有機(イミダゾール系)・無機(銀系・亜鉛系)複合体

コーキンマスター™

制菌加工カバーを採用

「より清潔に」、そして感染症予防を追求し、制菌加工

カバーを採用しました。「制菌」とは、通産省の厳

しいガイドラインの基準をクリアした、これまでの

「抗菌」を遥かに凌ぐ次世代のスタンダードです。

標準のカバー以外に、オプションの制菌カバー28色

からお好みのカラーをお選びいただけます。

色見本 全53色 (内 制菌28色)

※色見本は印刷物のため実際の色とは異なる場合があります。



大人な空間を演出

ダークブラウンでまとめたコーディネート。スライディングテーブルはタクトスの同系色をチョイス。シンプルながら高級感と落ち着きを表現し、信頼感を演出しました。



COLOR SIMULATOR

イナミオフィシャルWEBサイトにおいて、お好みの空間をシュミレーションできるカラーシュミレーターをお試しいただけます。
製品や色、インテリアを個別に選べるシュミレーターに加え、完成されたテーマから選べるシュミレーターをお試しいただけます。


※イメージは印刷物のため実際の色とは異なる場合があります。



もっと、みんなの、診療空間



年齢、性別、国籍など今後ますます多様化する患者様だれにも快適さや安心を感じてもらえる。そんな診療空間をコーディネートするため、また、ドクターやスタッフの方々により働きやすい環境をご提案するために、私たちイナミは眼科をトータルに知るメーカーならではのさまざまな工夫を診療設備のものづくりに取り入れています。

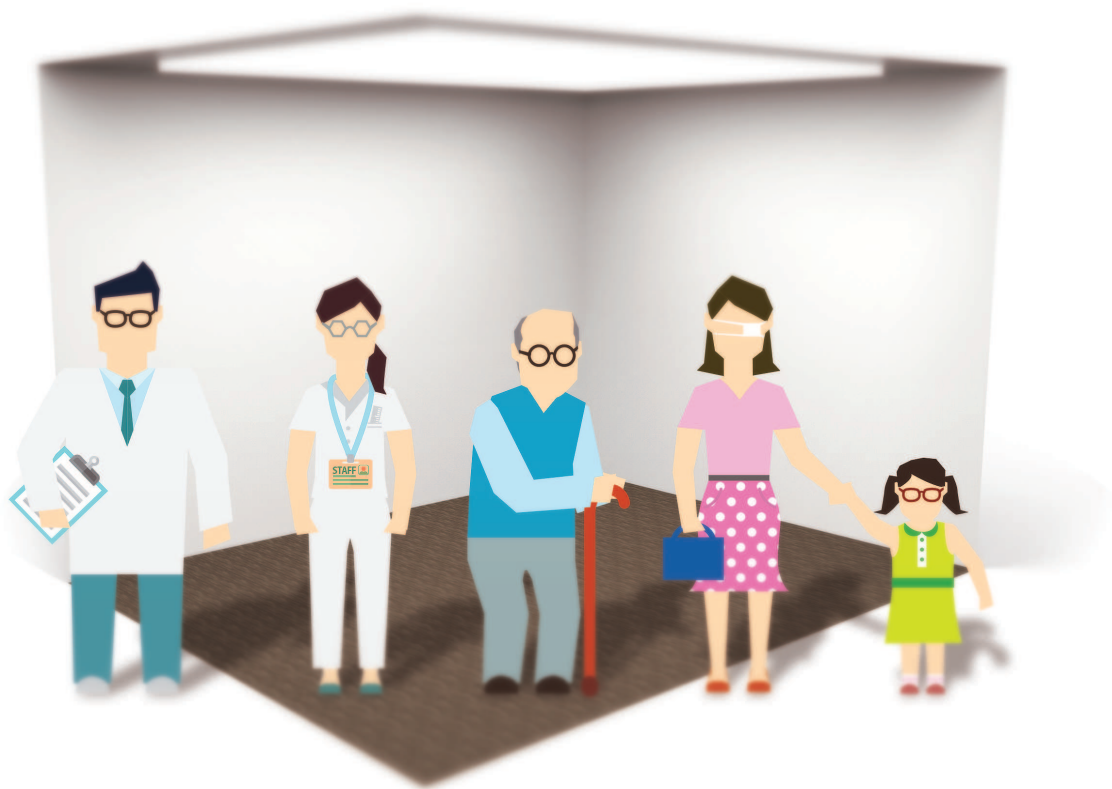

Hospitable Design [ホスピタブルデザイン]とは

ドクター、スタッフ、そして患者様、診療空間におけるすべての人に快適と安心を提供するため、イナミが培った経験をベースに診療設備にプラスした機能を総称して「Hospitable Design (ホスピタブルデザイン)」と呼びます。
「Hospitable」とは歓待やおもてなしの心がある状態、または住環境などが快適であることを意味する言葉。
イナミの診療設備が「もっと、みんなの」診療室をつくるお手伝いをします。



A Passion for a Nice View

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2
名古屋ベース：〒462-0064 愛知県名古屋市北区大我麻町285 A1
大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18ユミール
九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17
Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp

TEL: 03-3814-1731 FAX: 03-3814-3334
TEL: 052-934-7489 FAX: 052-934-7490
TEL: 0798-37-2880 FAX: 0798-37-2881
TEL: 092-504-1734 FAX: 092-504-5355

※本カタログ記載価格は、全て2025年10月現在の税別標準小売価格となっております。
※製品の仕様・デザインは改良のため、予告なく変更する場合があります。
※本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のもものと異なる場合があります。

official web site



製造販売業許可番号 13B1X00048

202510/v3.2