

STOCK ONLY



VINTAGE CATALOG

時を超えた名品たち、今再び。

Updated Edition①

Inami

A Passion for a Nice View



創業100年の歴史が育んだ医療器具の伝統と技術。

時代とともに、医療の現場で愛され続けてきた名品が、今ここに甦ります。進化する医療の中で一度はその役目を終えたかのように思われた器具たち。

その精密さと機能美は、今もなお、現代の医療に新たな可能性を示しています。過去の名品が持つ価値を、もう一度見つめ直し、新たな命を吹き込んでみませんか？



Category Overview

A	鑷子	● ● ● ● ● ● ● ● ●	1～4
B	開瞼器	● ● ● ● ● ● ● ● ●	5～6
C	持針器	● ● ● ● ● ● ● ● ●	7
D	剪刀・ナイフ関連・スパーテル・針	● ● ● ● ● ● ● ● ●	8～9
E	白内障	● ● ● ● ● ● ● ● ●	10～15
F	緑内障	● ● ● ● ● ● ● ● ●	16～17
G	網膜硝子体	● ● ● ● ● ● ● ● ●	18～21
H	外眼部	● ● ● ● ● ● ● ● ●	22～24
I	角膜	● ● ● ● ● ● ● ● ●	25～26



鑷子

A

数量限定 特別価格



マイクロ角膜・縫合鑷子P-H型 ミクロファイン

M-3RF 全長85mm / 鉤幅0.3mm ￥24,800

数量限定 特別価格



マイクロ角膜縫合鑷子 0.1 ミクロファイン

M-5RF 全長85mm / 鉤幅0.1mm ￥34,800

数量限定 特別価格



マクファーソン氏角膜縫合鑷子 角度付

M-7R 全長86mm / 鉤幅0.25mm ￥29,800

数量限定 特別価格



順天堂大学式角膜鑷子 P-H型 ミクロファイン

S-9CF 全長80mm / 鉤幅0.3mm ￥24,800

数量限定 特別価格



ギル・ヘス氏虹彩鑷子

S-412 全長76mm / 鉤幅0.2mm ￥9,800

数量限定 特別価格



有鉤鑷子 強湾曲

S-311 全長109mm / 鉤幅0.4mm ￥6,900

数量限定 特別価格



有鉤鑷子 弱湾曲

S-312 全長111mm / 鉤幅0.4mm ￥6,900

数量限定 特別価格



マイクロ結紮鑷子

D-1012 全長151mm / 先端0.6mm ￥24,800

数量限定 特別価格



ティッシュ鑷子

D-1013 全長150mm / 先端1mm

¥24,800

数量限定 特別価格



マクファーソン氏結紮鑷子 無鉤 角度付

M-9R 全長85mm / 先端0.5mm

¥14,800

数量限定 特別価格



10-0,11-0ファイン縫合糸用結紮鑷子 無鉤

S-9M 全長84mm / 鉤幅0.3mm

¥12,800

数量限定 特別価格



ノンスリップ無鉤鑷子 ショート

IS-315 全長102mm / 鉤幅0.8mm

¥4,900

数量限定 特別価格



無鉤鑷子 強湾曲

S-315 全長111mm / 先端0.8mm

¥4,980

数量限定 特別価格



結紮鑷子 ロングハンドル iタイプ 0.3mm

MB-045 全長110mm / 鉤幅0.3mm

¥39,800

数量限定 特別価格



コリブリ鑷子 0.4mm

M-176B 全長72mm / 鉤幅0.3mm

¥24,800

数量限定 特別価格



縫合鑷子 コリブリ型 0.3mm 段付

MB-008 全長87mm / 鉤幅0.35mm

¥49,800



鑷子

A

数量限定 特別価格



縫合鑷子 直 ノッチ付 0.3mm 段付 カストロ型

MB-019 全長112mm / 鉤幅0.35mm **¥49,800**

数量限定 特別価格



角膜鑷子 デリケート

KI-2 全長88mm / 鉤幅0.2mm **¥14,800**

数量限定 特別価格



結紮鑷子 コリブリ型 ウルトラファインチップ段付

MB-007 全長86mm / 先端0.2mm **¥48,000**

数量限定 特別価格



結紮鑷子 アングル型 11mm 段付

MB-022 全長110mm / 先端0.4mm **¥39,800**

数量限定 特別価格



角膜固定鑷子 アングル型 止付

M-717 全長110mm / 先端0.12mm **¥44,900**

数量限定 特別価格



角膜固定鑷子 直 止付

M-718 全長108mm / 先端0.12mm **¥44,900**

数量限定 特別価格



角膜固定鑷子 直 止無

M-720 全長110mm / 鉤幅0.12mm **¥44,900**

数量限定 特別価格



グレフェー氏固定鑷子 止無

S-362 全長110mm / 先端4.5mm **¥9,800**

数量限定 特別価格



止血鉗子 直 有鉤 小

MH-118D 全長98mm / 先端0.8mm

¥9,800

数量限定 特別価格



止血鉗子 曲 有鉤 小

MH-119D 全長98mm / 先端0.8mm

¥9,800



memo

Next category!



開瞼器

B


数量限定 特別価格



開瞼器 小 左

KI-63 開瞼部11mm ￥14,800

数量限定 特別価格

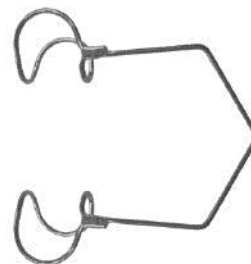

江口氏ワイヤー開瞼器

M-135C 開瞼部11.5mm ￥5,000

数量限定 特別価格



深作式テンポラルアプローチ開瞼器 プレート

M-2000 開瞼部15mm ￥7,900

数量限定 特別価格




永田式開瞼器 大

M-2002 左 開瞼部14mm ￥8,900

M-2003 右 開瞼部14mm ￥8,900

数量限定 特別価格

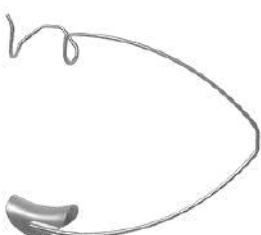

永田式開瞼器 中

M-2002/M 左 開瞼部12.5mm ￥8,900

M-2003/M 右 開瞼部12.5mm ￥8,900

数量限定 特別価格




永田式開瞼器 小

M-2002/S 左 開瞼部10.5mm ￥8,900

M-2003/S 右 開瞼部10.5mm ￥8,900

数量限定 特別価格

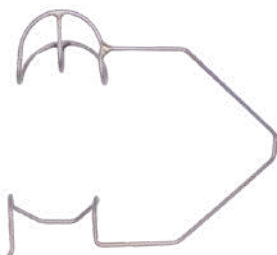

大野式開瞼器 右

M-2006 開瞼部14mm ￥8,900

数量限定 特別価格




深作氏テンポラルアプローチ開瞼器 クローズ型

M-2020 開瞼部17mm ￥6,900



数量限定 特別価格

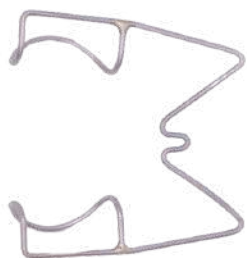


太田式耳側開瞼器 クローズ型

M-235 開瞼部13mm

¥4,900

数量限定 特別価格

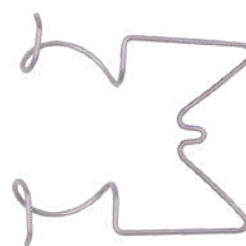

太田式耳側開瞼器 オープン型

M-235A 開瞼部12.5mm

¥4,900

数量限定 特別価格




硝子体注射用開瞼器 目盛付

M-2180 開瞼部15.5mm

¥24,800

数量限定 特別価格

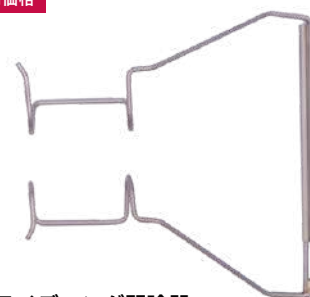

深作式スライディング開瞼器

M-2007 開瞼部14mm

¥9,000

数量限定 特別価格



リーバーマンS型開瞼器 オープンワイヤー型

M-2007K 開瞼部13.5mm

¥9,000

数量限定 特別価格




リーバーマンL型開瞼器 14.5mm

M-2030 開瞼部14.5mm

¥19,800

数量限定 特別価格

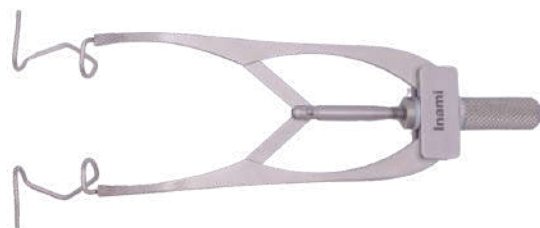

リーバーマンL型開瞼器 15.0mm

M-2035 開瞼部15mm

¥19,800

数量限定 特別価格



日谷氏軽量開瞼器

M-750 開瞼部10mm

¥5,000



持針器

C

数量限定 特別価格



逆マチ付マイクロ持針器 Hefner

D-1011 全長147mm / 先端6mm **¥ 30,000**

数量限定 特別価格



マイクロ持針器 直 8mm 止無

MB-031 全長118mm / 先端8mm **¥ 49,800**

数量限定 特別価格



バラッカー氏角膜縫合用持針器 止付

S-725S 全長130mm / 先端9mm **¥ 39,800**

数量限定 特別価格



エクストラデリケート持針器 直 8mm 止無

MB-035 全長118mm / 先端8mm **¥ 54,800**

数量限定 特別価格



チタン持針器 曲 8mm 止無

T-031 全長118mm / 先端8mm **¥ 44,900**

数量限定 特別価格



チタン持針器 曲 8mm 止付

T-032 全長117mm / 先端8mm **¥ 44,900**

数量限定 特別価格



後藤式剪刀付持針器

M-1901 全長134mm / 先端3.5mm / 刃先4mm **¥ 55,000**

Next
category!



D 剪刀・ナイフ関連・スパーテル・針



数量限定 特別価格



スプリングハンドル剪刀

D-1014 全長146mm / 刃先12.5mm ￥24,900

数量限定 特別価格



ウェストコット剪刀

D-1015 全長149mm / 刃先7.5mm ￥24,900

数量限定 特別価格



西氏エンドカプスラー剪刀 先端 直刃

M-167S 全長88mm / 刃先6.5mm ￥14,800

数量限定 特別価格



佐藤氏角膜刀 曲

S-91 全長127mm / 先端2.5mm ￥6,900

数量限定 特別価格



マイクロ替刃パンチ

D-1031 全長132mm / 先端12.5mm ￥24,800

数量限定 特別価格



マイクロ用替刃パンチ フラットアングル型

M-40RC 全長91mm / 先端9.5mm ￥19,800

数量限定 特別価格



深作式ホッカーナイフ

M-1005 全長120mm / 先端Φ6.5mm×3mm ￥8,000

数量限定 特別価格



湖崎氏スパーテル

KI-37A 1mm 全長119mm / 先端1.0mm / シャフト28mm ￥5,000

KI-37B 1.5mm 全長119mm / 先端1.5mm / シャフト28mm ￥5,000



剪刀・ナイフ関連・スパーテル・針

D

数量限定 特別価格



江口氏スパーテル 1mm

M-47A 全長131mm / 先端1mm **¥5,000**

数量限定 特別価格



バンガーター氏スパーテル 1.5mm

S-168A 全長127mm / 先端1.5mm **¥6,900**

数量限定 特別価格



古館式硝子体スパーテル

M-1118 全長113mm / 先端0.5mm / シャフト20mm **¥10,000**

数量限定 特別価格



小川氏球後注射針 直 12本

S-217S 全長58mm / シャフト42mm / 径23G **¥3,900**



memo

Next category!



数量限定 特別価格



カプシュロレクシス鑷子 COタイプ

DS-201 全長103mm ￥49,800

数量限定 特別価格



カプシュロレクシス鑷子テンポラルアプローチ

M-1610 全長100mm ￥39,800

数量限定 特別価格



CCC鑷子 23G 15mm Dタイプ

T-50102-D 全長133mm / シャフト17.5mm / 径23G ￥120,000

数量限定 特別価格



深作式核分割用水流スパーテル 23G

M-2053 全長48mm / 先端0.70mm / 径23G ￥9,800

数量限定 特別価格



カルドナ氏核分割用バイセクター

M-1003 全長117mm / 先端0.7mm×7mm ￥9,800

数量限定 特別価格



杉田式ジャンプフック

M-1120 全長110mm / 先端0.5mm×1mm ￥14,800


数量限定 特別価格



杉田式ジャンプフック スパーテル型

M-1121 全長110mm / 先端0.4mm×0.7mm ￥14,800

数量限定 特別価格

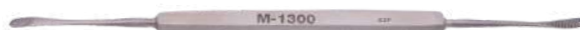

カルドナ氏核分割用ベクティス 両頭

M-1300 全長128mm / 先端3mm×8mm ￥9,800



白内障

E

数量限定 特別価格



川野式核分割スパーテル アイズピックグリップ付

M-136E 全長112mm / 先端0.3mm×0.4mm **¥8,900**

数量限定 特別価格



太田式核分割フック

M-1114 全長104mm / 先端0.7mm×1.5mm **¥19,800**

数量限定 特別価格



イリゲーションチョッパー

MF-808 全長123mm / 先端0.4mm×1.5mm **¥79,800**


数量限定 特別価格



水晶体核ローテーター

M-125A 全長102mm / 先端0.2mm×0.7mm **¥9,800**

数量限定 特別価格

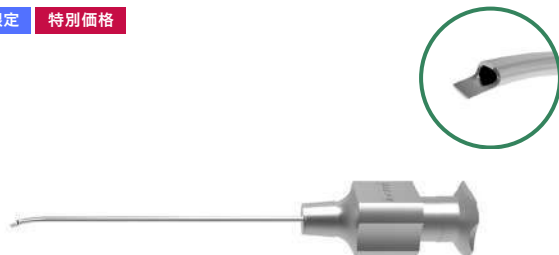

倉知式ハイドロニードル 22G

M-2080 全長44mm / 先端0.80 / シャフト30.5mm / 径22G **¥9,800**

数量限定 特別価格



シムコ吸引灌流カニューラ ダブルロック 23G

M-105W 全長34mm / シャフト17mm / 径23G **¥9,800**

数量限定 特別価格



岡本式リムーバー

M-2060-1 全長103mm / 先端0.6mm×0.8mm **¥14,800**

M-2060-2 全長103mm / 先端0.7mm×1mm **¥14,800**

数量限定 特別価格



ソフトIOLフォールディング鉗子

M-174 全長100mm / 先端1.5mm×6mm **¥45,000**



数量限定 特別価格



ユニヴァーサルIOLフォールディング鑷子

M-1602 全長110mm / 先端4mm×7.5mm ￥45,000

数量限定 特別価格



宮田式フォールディング鑷子

M-1605 全長106mm / 先端1.2mm×7mm ￥29,800

数量限定 特別価格



西氏眼内レンズ鑷子

M-164R 全長106mm / 先端0.2mm ￥17,800

数量限定 特別価格



西式ノーホール用眼内レンズ鑷子

M-164RA 全長110mm / 先端0.3mm ￥17,800

数量限定 特別価格



眼内レンズ折り曲げ用鑷子 114mm

MB-042 全長114mm / 先端0.7mm ￥52,000

数量限定 特別価格



保倉氏Yフック

M-1004 全長104mm / 先端0.6mm×1mm ￥14,800

数量限定 特別価格



クレーザー氏カフスボタン型鉤

M-124 全長126mm / 先端1mm×0.9mm ￥9,800

数量限定 特別価格



シンスキー氏型 眼内レンズフック 直 ライト

M-127SLH 全長103mm / 先端0.2mm×0.5mm ￥12,800



白内障

E

数量限定 特別価格



眼内レンズプッシュアンドプル鉤 直 ライト

M-128SLH 全長110mm / 先端0.7mm×0.7mm ￥12,800

数量限定 特別価格



眼内レンズ用プッシャー 曲

M-132C 全長109mm / 先端0.7mm×1.2mm ￥9,800


数量限定 特別価格



眼内レンズ用プッシャー 直

M-132S 全長109mm / 先端0.7mm×1.2mm ￥9,800

数量限定 特別価格

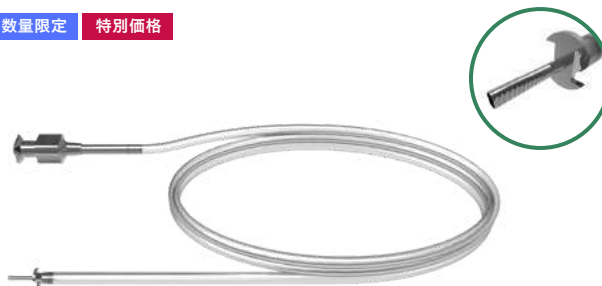

白井式眼内レンズ挿入用前房メインテナー

M-153 全長9mm / 先端1.1mm / シャフト6mm ￥8,900

数量限定 特別価格



塙本氏縫着用強角膜ポケットマーカ

M-2210 全長103mm ￥59,800

数量限定 特別価格



西氏核娩出用灌流針 20G

M-123A 全長31mm / シャフト15mm / 径20G ￥9,800

数量限定 特別価格



新型虹彩プロテクター 3mm

S-153L3 左 全長118mm / 先端3mm ￥8,900

S-153R3 右 全長118mm / 先端3mm ￥8,900

数量限定 特別価格



新型虹彩プロテクター 5mm

S-153L5 左 全長120mm / 先端5mm ￥8,900

S-153R5 右 全長120mm / 先端5mm ￥8,900



数量限定 特別価格



虹彩プロテクター

S-155A	3.5mm	全長128mm / 先端3.5mm	¥8,900
S-155B	5.0mm	全長130mm / 先端5mm	¥8,900

数量限定 特別価格



シムコ両頭水晶体輪匙

M-121	全長132mm / 先端5mm×17mm	¥5,900
-------	----------------------	--------

数量限定 特別価格



シムコ水晶体輪匙 針基付 左

M-122	全長30mm / 先端5mm×15mm	¥5,000
-------	---------------------	--------

数量限定 特別価格



ウェーベル氏輪匙 No.2

S-176R2	全長136mm / 先端5mm×8mm	¥8,900
---------	---------------------	--------

数量限定 特別価格



ソーントン氏C型眼球固定リング大

M-675	全長127mm / 外径17mm	¥29,000
-------	------------------	---------

数量限定 特別価格



大西氏尖刃刀

S-14	全長131mm / 先端10mm	¥4,900
------	------------------	--------

数量限定 特別価格



深作式無縫合白内障切開用マーカー

M-600	全長89mm / 先端6mm×4mm	¥19,800
-------	--------------------	---------

数量限定 特別価格



深作式ブリッジ切開用マーカー

M-601	全長91mm / 先端7mm×4.5mm	¥19,800
-------	----------------------	---------



白内障

E

数量限定 特別価格



マーカ 3mm 4mm 5mm 切開用

M-661 全長104mm / 先端5mm×2.5mm ￥39,800

数量限定 特別価格



ボアーズ氏アキシスマーカ

M-679 全長97mm / 先端11.5mm×3.0mm ￥16,800



Next category!

数量限定 特別価格



慶應大学式トラベクトミーブローベ鉗子

M-1607 全長76mm / 先端1mm **¥9,800**

数量限定 特別価格



永田式トラベクトミーブローベ取手付鉗子15mm

M-80T-15 全長15mm / 曲率7.5R / 径0.24φ **¥12,000**

数量限定 特別価格



上野式トラベクトミーマイクロ剪刀 屈曲

M-52RF 全長84mm / 刃先4mm **¥39,800**

数量限定 特別価格



上野式トラベクトミーマイクロ剪刀 左

M-52RL 全長81mm / 刃先5mm **¥39,800**

数量限定 特別価格



トラベクレクトミーマーカー 両頭

M-676 全長126mm / 先端4mm×4mm **¥39,800**

数量限定 特別価格



木村式緑内障癒着剥離剪刀 鈍

M-2055 全長137mm / 刃先3mm **¥98,000**

数量限定 特別価格



新家氏隅角癒着解離用スパーテル 右

M-1108 全長112mm / 先端0.4mm×0.8mm **¥9,800**

数量限定 特別価格



風間氏シュレム管分層スパーテル

M-1102 全長97mm / 先端3mm **¥14,800**



緑内障

F

数量限定 特別価格



青山氏シュレム管スパーテルEデリケート

M-1115 全長105mm / 先端0.8mm ￥9,600

数量限定 特別価格



新家氏隅角刀 保護キャップ付

M-1007 全長109mm / 刃先2.5mm ￥9,800

数量限定 特別価格



青山氏シュレム管鑷子

M-1620 全長110mm / 先端0.6mm ￥34,800

数量限定 特別価格



上野式マイクロトレパン

SOLD OUT	S-221A	径0.5mm	￥14,800
SOLD OUT	S-221B	径0.75mm	￥14,800
SOLD OUT	S-221C	径1mm	￥14,800

数量限定 特別価格



大西氏トレパン

S-221-1.75	径1.75mm	￥9,800
S-221-2.5	径2.5mm	￥9,800
S-221-4	径4mm	￥9,800



Next category!

数量限定 特別価格



ILM鉗子 ピックエンド 20G

MF-802 全長153mm / シャフト36mm / 径20G ￥90,000

数量限定 特別価格



ILM鉗子 ファイングリップ 20G

MV-028 全長154mm / シャフト37mm / 径20G ￥98,000

数量限定 特別価格



グリップ鑷子ファインタイプ

MV-029 全長153mm / シャフト36mm / 径20G ￥90,000

数量限定 特別価格



河合氏 ILM鑷子 23/25G テーパード

MF-803 全長151mm / シャフト34mm / 径23/25G ￥98,000

数量限定 特別価格



ショートセレーションILM鑷子 23G

MV-072 全長147.5mm / シャフト30.5mm / 径23G ￥90,000

数量限定 特別価格



セレーションILM鑷子 23G

MV-088 全長149mm / シャフト32mm / 径23G ￥90,000

数量限定 特別価格



河合氏 水平剪刀 曲 23/25G テーパード

MF-805 全長154mm / シャフト34mm / 径23/25G ￥90,000

数量限定 特別価格



水平剪刀 1.25mm 23G

MV-068 全長147.5mm / シャフト30.5mm / 径23G ￥90,000



網膜硝子体

G

数量限定 特別価格



垂直剪刀アングル 45°23G

MV-069 全長146mm / シャフト29mm / 径23G **¥90,000**

数量限定 特別価格



垂直剪刀 60°

MV-007 全長150mm / シャフト33mm / 径20G **¥98,000**

数量限定 特別価格



ダウシュ剪刀 垂直作動式 60°

23D-716 全長144mm / シャフト30mm / 径20G **¥90,000**

数量限定 特別価格



ダウシュ網膜・硝子体用剪刀スクープティップ60°

23D-717 全長144mm / シャフト31mm / 径20G **¥90,000**

数量限定 特別価格



ダウシュ網膜・硝子体用剪刀 60°

26D-716 全長144mm / シャフト30mm / 径20G **¥90,000**

数量限定 特別価格



ダウシュ網膜・硝子体用剪刀スクープティップ60°

26D-717 全長146mm / シャフト31mm / 径20G **¥90,000**


数量限定 特別価格



塙本氏 眼球圧迫器付プラグフォーセップス

M-2014 全長110mm / 先端1.5mm×5mm **¥29,800**

数量限定 特別価格

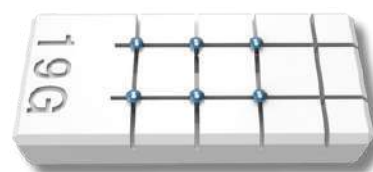

強膜プラグ 6ヶ入

M-575B 全長3.5mm / 径19G **¥6,900**

M-575C 全長3.5mm / 径18G **¥6,900**

数量限定 特別価格



メンブレインピック 先端強湾曲 ブルー

M-578A 全長100mm / 先端0.6mm ￥9,800

数量限定 特別価格



メンブレインピック 先端弱湾曲 シルバー

M-578B 全長100mm / 先端0.6mm ￥9,800

数量限定 特別価格



竹内式メンブレインピック

M-579 全長117mm / 径20G ￥9,800

数量限定 特別価格



竹内式ニューメンブレインピック ファインタイプ

M-579N 全長116mm / 径20G ￥12,800

数量限定 特別価格



ストレートニードル 20G 6本

M-562F 先端1mm / 径20G ￥5,000


数量限定 特別価格



テーパードニードル 20G/27G 1本

M-565 全長51mm / シャフト35mm / 径20/27G ￥3,000

数量限定 特別価格

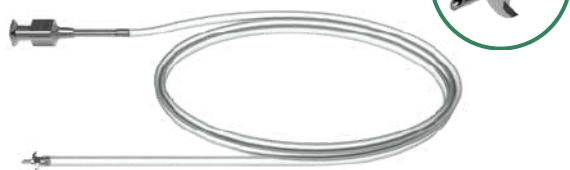

インフュージョンニードル

M-570 先端2.5mm / 径20G ￥6,900

M-572 先端6mm / 径20G ￥6,900

数量限定 特別価格



サイドインフュージョンニードル 1本

M-1525 先端5.5mm / 径20G ￥3,000



網膜硝子体

G

数量限定 特別価格



フルートハンドピース

M-561C 全長112mm ￥9,800

数量限定 特別価格



エクストルージョンハンドピース

M-561B 全長74mm ￥9,800

数量限定 特別価格



埴本氏ヴィスコスパチュラナイフ用ハンドル

M-1017 全長80mm ￥25,000

数量限定 特別価格




服部式滑車型眼球圧迫器

M-2061 全長109mm / 先端9mm / 径3.0φ ￥29,800

M-2061S 小 全長109mm / 先端8mm / 径2.5φ ￥29,800

M-2061X 1.5mm 全長109mm / 先端6.5mm / 径1.5φ ￥29,800

数量限定 特別価格

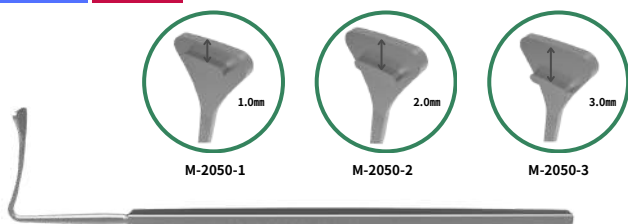

森實式未熟児鉤

M-2050-1 1mm 全長121mm / 先端7mm×8mm ￥23,800

M-2050-2 2mm 全長121mm / 先端7mm×8mm ￥23,800

M-2050-3 3mm 全長121mm / 先端7mm×8mm ￥23,800

数量限定 特別価格



鉤 90° 小

KI-80H 全長127mm ￥7,900



Next category!



数量限定 特別価格



ソフトマイボーム腺鑷子 大

T-2071L 全長96mm / 滑車径φ3.5mm / 先端11.5mm **¥42,000**

数量限定 特別価格



ソフトマイボーム腺鑷子 小

T-2071S 全長96mm / 滑車径φ3mm / 先端10mm **¥42,000**

数量限定 特別価格



ムルドゥーン氏涙管拡張針 段付

S-188R 全長100mm / 先端0.7mm×1.3mm **¥4,900**

数量限定 特別価格



ボーマン氏涙管消息子 玉付

S-185RG 3-4 (1.3/1.4) 全長130mm **¥3,900**S-185RH 4-5 (1.4/1.5) 全長130mm **¥3,900**

数量限定 特別価格



三宅式ブジー 10mmステップスケール付き

M-1130 04-05(0.65/0.70) 全長140mm **¥9,800**

数量限定 特別価格



涙点君

~~SOLD OUT~~ M-1130-30 全長125mm / 先端0.3mm

M-1130-60 全長125mm / 先端0.6mm

M-1130-40 全長125mm / 先端0.4mm

M-1130-65 全長125mm / 先端0.65mm

M-1130-45 全長125mm / 先端0.45mm

M-1130-70 全長125mm / 先端0.7mm

M-1130-50 全長125mm / 先端0.5mm

M-1130-80 全長125mm / 先端0.8mm

M-1130-55 全長125mm / 先端0.55mm

各¥5,900

数量限定 特別価格



涙点刀

S-30 全長130mm / 刃先3.5mm / シャフト31mm **¥9,800**

数量限定 特別価格



五嶋式ブジー型涙管洗浄針


M-2058-55 全長71.5mm / シャフト55mm / 径21G **¥9,800**M-2058-60 全長76mm / シャフト60mm / 径23G **¥9,800**



外眼部

H

数量限定 特別価格

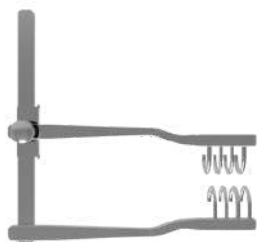

栗原式開創器 I 四本丸爪

M-2010 爪幅9.5mm ￥39,000

数量限定 特別価格



S-119A 上



S-119B 下

涙嚢鋭匙

S-119A 上 全長114mm / 先端4.0mm×2.5mm ￥7,900

S-119B 下 全長114mm / 先端4.0mm×2.5mm ￥7,900

数量限定 特別価格



エレバトリウム

S-109 全長133mm / 先端3mm×15mm / シャフト38mm ￥4,900

数量限定 特別価格



ラスパトリウム

S-110 全長130mm / 先端5mm×6mm ￥19,800

数量限定 特別価格



中村氏涙小管誘導子 直 小

S-184E 全長106.5mm ￥7,900

数量限定 特別価格



フィンク氏涙嚢摘出用四爪鉤

S-122 全長136mm / 鉤幅6mm / シャフト42mm ￥4,900

数量限定 特別価格



福島医大式オルビタ用万能鑷子

M-2102 全長165mm / 先端0.8mm ￥49,800

数量限定 特別価格



バーク氏眼瞼下垂手術用鑷子 大

S-465 全長108mm / 先端27mm ￥18,000

数量限定 特別価格



ウィーツ氏霰粒腫用挟眼器

M-1651 全長95mm / 先端15.5mm × 13.0mm ￥14,800

数量限定 特別価格



江口氏斜視鉤 90°

M-143A 全長142mm / 先端13mm / シャフト47mm ￥6,900

数量限定 特別価格



江口氏斜視鉤 120°

M-143B 全長140mm / 先端11mm / シャフト45mm ￥6,900

数量限定 特別価格



江口氏斜視鉤 60°

M-143C 全長137mm / 先端10mm / シャフト40mm ￥6,900

数量限定 特別価格



近江・ベレンス氏眼筋クランプ 小児用Ⅰ型

S-472-1 全長75mm ￥59,800

数量限定 特別価格



プリンス氏斜視鑷子 左

S-478RL 全長97mm ￥24,800

数量限定 特別価格



サトラー氏斜視鑷子 左

S-479RL 全長100mm ￥24,800

数量限定 特別価格



サトラー氏斜視鑷子 右

S-479RR 全長100mm ￥24,800



角膜

I

数量限定 特別価格



トラウトマン氏マイクロ角膜剪刀 ファインブレード 右

M-57XR 全長98mm / 先端5mm **¥39,800**

数量限定 特別価格



トラウトマン氏マイクロ角膜剪刀 止付

M-58RL 左 全長100mm / 先端4.5mm **¥39,800**

M-58RR 右 全長100mm / 先端4.5mm **¥39,800**

数量限定 特別価格



カストロ氏角膜切開剪刀 右 スタンダード

S-540R 全長110mm / 先端8.5mm **¥29,800**

数量限定 特別価格



カストロ氏角膜切開剪刀 エクストラデリケート

S-542L 左 全長100mm / 先端6mm **¥29,800**

S-542R 右 全長100mm / 先端6mm **¥29,800**

数量限定 特別価格



カストロ氏角膜移植トレパン ハンドル

S-219 全長45mm **¥9,800**

数量限定 特別価格



カストロ氏角膜移植用トレパン

S-220-5.5 全長47mm / 径5.5mm **¥24,800**

S-220-8 全長47mm / 径8.0mm **¥24,800**

S-220-9 全長47mm / 径9.0mm **¥24,800**

数量限定 特別価格



ホフファ氏ゾーンマーカー

M-700	全長103mm / 径3.0mm	M-706	全長103mm / 径4.5mm
M-702	全長103mm / 径3.5mm	M-707	全長103mm / 径4.75mm
M-703	全長103mm / 径3.75mm	M-708	全長103mm / 径5.0mm
M-704	全長103mm / 径4.0mm	M-711	全長103mm / 径7.0mm
M-705	全長103mm / 径4.25mm	各¥12,900	




未熟児用フリーリング 10mm

S-180S 内径φ10mm **¥1,000**



数量限定 特別価格

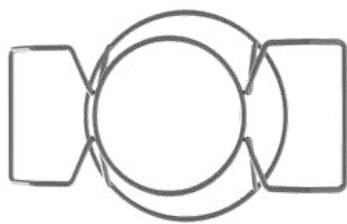

ダブル固定リング

S-180D 内円径14mm / 外円径23mm ￥4,200

数量限定 特別価格



深作式レーシックカニューラ 23G

M-1555 全長38mm / 幅0.7mm / 径23G ￥7,900



Custom-made instruments

～ 妥協なきパフォーマンスのために ～

サージカルのシーンにおいて、ドクターの指たる手術器具。

高品質であることはもちろん、

それはドクターの思いに繋がっていないくちはならない、私たちはそう考えます。


アイデアをカタチにするノウハウを持つイナミだからできるご提案。

カスタムメイドというもうひとつの選択肢が

さらに上のパフォーマンスの実現をお手伝いします。

■ カスタムメイド製品の分類と定義

セミオーダー

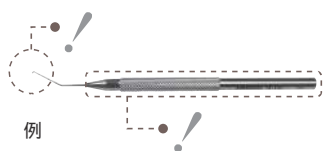

ご要望の仕様が、既製品の類似設計である場合など。
(例) ハンドルや先端のサイズや形状変更など。

フルオーダー



ご要望の仕様が、既製品の類似仕様ではなく、新規造形であること、または製造工程上の新技術を要する場合など。


■ オーダーの流れ

1. お問い合わせ	弊社もしくは販売業者様へお問い合わせ下さい。 お打合せ（ヒアリング）の日程調整をさせていただきます。
2. ヒアリング （仕様打合せ）	弊社営業担当が、ご希望の仕様等をヒアリングさせていただきます。
3. 設計図ご提出 ※概略図の場合あり	ヒアリング内容に基づき、設計図または概略図をご提出いたします。修正を要する場合は、後日修正図をご提出させていただきます。
4. お見積り	仕様に基づき、お見積りをご提出させていただきます。
5. 製作	仕様及びお見積りご承諾後、正式にご発注いただきましたら、製作工程に入ります。
6. ご納品	お納めさせていただいた製品をご確認いただきます。

※ 完成した製品の仕様が設計図と異なり、ご希望に沿わない場合、仕様を再確認させていただき、再度製作させていただきます。
※ 完成品確認後、事前にお打合せした仕様ではなく、仕様変更をご希望される場合は、一度ご検収いただき再度ご発注を頂きます。

※オーダーの仕様が、知的所有権に触れる可能性がある場合、お受けしかねる場合がございます。 ※オーダーの仕様が、安全性の保障や薬事法手続き上の諸問題がある場合、お受けしかねる場合がございます。 ※お客様にご満足いただけるよう製作させていただきますが、様々な要因によりご希望に沿えかねる場合がございます。 ※オーダーメイド製品は、弊社において製品化させていただく場合がございます。または後に類似品が製品化する場合がございます。 ※オーダーメイド製品は、事例紹介などとして公開させていただく場合がございますが、個人情報についてはご許可なしに公開はいたしません。 ※オーダーメイド製品は、他のお客様より同等の仕様のご要望（ご注文）を受けた場合、同一商品を製作販売する可能性があります。 ※オーダーの仕様やクラス分類によっては、高額、長納期になる場合がございます。 ※オーダーメイド製品の薬事申請登録用の名称については、弊社にて決定させていただきます。

理想的な器具の洗浄・滅菌

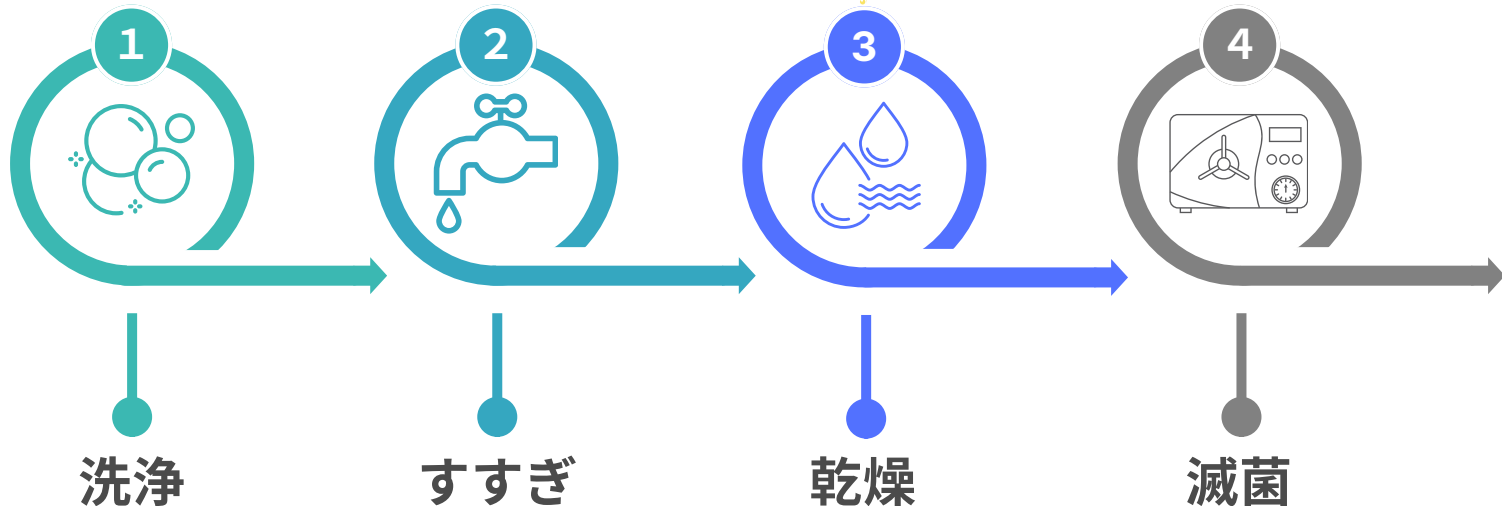

① 洗浄

使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに汚れを落とすように心がけて下さい。

眼科用手術器具は非常にデリケートであるため、こすり洗いや一般的な超音波洗浄器の使用は避けるようにして下さい。

基本的には**浸漬洗浄**が適しています。

※眼科用手術器具の先端部は非常に微細です。破損や摩耗リスク回避のため、先端部に関してはブラシやスポンジ等を用いた手作業によるこすり洗いは十分注意して行ってください。

予備洗浄スプレー

器具を使用後、すぐに洗浄できない場合に、汚れや血液・体液などの乾燥固着を防ぐため予備で行います。



AC-302 イナミクリーンS（器具用タンパク凝固防止剤）6本入
¥14,800(税別)



浸漬洗浄

器具に付着した血液やタンパク質を、洗浄液を使用して除去します。

器具先端・ヒンジ・関節式ジョイント部・ロック(止め)部は開いた状態で行ってください。

また、浸漬中は器具が重ならないようにして下さい。洗浄液が行き届かず汚れが落ちない部分が発生してしまいます。

落ちにくい汚れの場合は、流水での予備洗浄→洗浄液への浸漬洗浄→本洗浄の手順で行うとより効果的です。

器具に付着した血液、体液等の除去は**イナミクリーンP**への浸漬が効果的です。



イナミクリーンPとは、厳選された原料で組成された効力価タンパク分解酵素配合の中性タイプの血液溶解剤です。

血液・体液などの汚染物質を強力・確実に分解除去するとともに器材と自然環境にやさしさを演出します。

また、強力な金属腐食防止剤が配合されているため加温浸漬洗浄でもサビの発生を気にせずに安心にお使い頂けます。



AC-301 イナミクリーンP（洗浄剤 高力偏酵素配合）
4kg/1個入 ¥14,800(税別)



②すすぎ

洗浄後は、すすぎを十分に行ってください。洗浄液から引き上げた器具には、洗浄液と溶解した汚れが付着した状態です。

そのまま乾燥してしまうと汚れの固着にもつながり、関節のある器具は隙間に汚れが残留してしまいます。

器具のすすぎには不純物を完全に除去した純水（精製水）を推奨します。

水道水は飲料水にするため、主に塩素系の消毒液を含有しています。水道水を洗浄に用いた場合、水の中に含有される塩素により金属を腐食させる恐れがあります。

また、ミネラルなど微量の不純物が付着して残り、シミやサビの原因となります。

また、老朽化した水道管を通ってきた水に含まれるサビの粒子も金属に付着するとサビや腐食の原因になります。




③乾燥

洗浄後は速やかかつ完全に乾燥させてください。水分が残っているとサビや滅菌効果低下の原因となります。器具の乾燥に関しては、糸くずの出ない柔らかい織布、当社**MQA**、空気ガン等を使用しての乾燥が効果的です。

（繊維で引っ掛けて器具に損傷を与えることがある為、デリケートな先端部の拭き取りにはガーゼ、脱脂綿等の繊維質なものは使用しないでください。）

剪刀のヒンジ部のように金属が重なっている部分は水分が残りやすい為、ヒンジ部位を開放した状態で拭き取り・乾燥を行ってください。パイプ形状の器具も通気を行い、積極的に乾燥を行ってください。

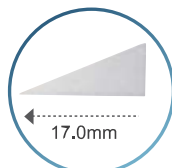

S-5B 吸水スポンジM.Q.A. 入数250ヶ(10個入×25袋)
¥7,600(税別)
最小出荷単位：6箱

吸水前

吸水後



吸水率は自重の20倍

パイプシャフト器具の洗浄方法



1

専用器具で予備通水

2

浸漬洗浄

3

器具表面の流水すすぎ

4

シャフト内の通水すすぎ

5

シャフト内の通気乾燥

6

器具表面の乾燥→滅菌



専用注射器による通水

パイプシャフト構造を有する器具はメンテナンスを怠ると、手術中に付着した生体組織や粘弾性物質等がパイプ内で固まり、稼働不良の原因となります。使用後はすぐに、付属の洗浄用注射器を用いて、器具先端から**1～3回程度通水**を行ってください。

●通水方法

注射器のシリコンチューブ部位に器具の先端を根元まで挿入し、**1～3回純水等**を通して汚れを押し流してください。注入時の圧力によりチューブが器具から抜けてしまうことがある為、接合部はしっかり抑えることが重要です。

●通気方法

通水と同様にシリコンチューブ部位に器具の先端を根元まで挿入し、**1～3回空気**を通してシャフト内に残留した水分を押し出してください。

通水



- ☒ パイプシャフト器具は先端が非常にデリケートな為、眼科手術器具の中でも最も破損リスクが高い種類の器具です。右記製品「MV-900」は破損リスクを減らし、より効率的に洗浄を行う事を目的に作られました。



MV-900 パイプシャフト用洗浄器 全長140mm
¥40,000(税別)

④滅菌

●滅菌前の除染と乾燥

器具の表面に汚れ・蛋白質・水分等が付着したまま滅菌を行わないようにして下さい。

●先端の保護

マイクロ鉗子やパイプシャフト系の器具は先端が非常にデリケートな為、滅菌の際は、ご購入頂いた際に付属している先端保護用チューブ（シリコン製）やキャップで保護し、シリコンマット式滅菌トレーや専用ケースにに入れて滅菌処理をされるようお願い致します。

オートクレーブ滅菌（高圧蒸気滅菌）

長所：短時間、安価、毒性がない 短所：高熱処理

オートクレーブ滅菌はチャンバー内で適当な温度と圧力の飽和水蒸気の中で加熱、発生した水分が細菌や微生物の蛋白質を変性させ死滅させる滅菌方法です。熱に耐えられるすべての器具（サビてしまうものは除く）の滅菌に適しています。

⚠ オートクレーブ滅菌を行う際の注意点

器具に水分が残ったまま高圧蒸気滅菌処理を行いますと、サビが発生する原因となります。ロック（止め）付器具に高圧蒸気滅菌を行う場合は金属膨張による破損を防止する為に、ロックを外した状態で滅菌処理を行ってください。＊ステンレス製・チタン製等のイナミ鋼製手術器具（一部シリコンを使用した製品を含む）は、基本的に高圧蒸気滅菌が可能です。

EOG（エチレンオキシドガス）滅菌

長所：低温、金属腐食性がない 短所：毒性が強い、時間がかかる

EOG滅菌はエチレンオキシドガスを直接流通させることによって微生物を殺滅する方法です。熱に耐えられない器具や、オートクレーブではサビてしまう器具の滅菌に適しています。

⚠ EOG滅菌を行う際の注意点

長い管空を有するパイプシャフト形状の器具は、ガスが十分に管空内に達しない場合も想定されるため、オートクレーブでの滅菌を推奨致します。

低温プラズマ滅菌

長所：低温、短時間、毒性がない 短所：長狹管腔構造物は不可

低温・低湿滅菌の為、広範囲な医療器材の滅菌が可能で、過酸化水素以外の化学物質を使用しないため、人にも環境にもやさしい滅菌方法です。

⚠ 低温プラズマ滅菌を行う際の注意点

- カニューレ・ニードル・パイプシャフト型器具の滅菌効果は検証していません。
- チタン合金製手術器具は過酸化水素により脱色される場合がありますが、品質には問題ありません。
- ステンレス製手術器具は部分的に変色する場合がありますが、品質には問題ありません。

サビ（腐食）

【よくあるサビの原因】

- ◆水分に含まれる塩素、ミネラル、老朽化した水道管からのサビの粒子等
- ◆サビた器具との接触放置。（もらいサビ）
- ◆液体またはガス状の薬品との反応（ハロゲンイオンの付着）
- ◆濃い酸性溶液への長時間の漬け込み→薬品の使用時間は最低限とし、消毒後はしっかりと水洗。
- ◆汚れた消毒剤への漬け込み
- ◆空気中の湿気
- ◆僅かなヒビからの腐食→ヒビ割れの内部は研磨されていないため錆びやすい。
- ◆異なる成分の金属製品との接触放置→水分がある状態では腐食を誘発します。
- ◆摩擦→剪り等の繰り返し摩擦される部位は、表面被膜が剥がれてサビが発生することがあります。

シミ・熱ヤケ

【シミの種類】

- ◆薄い色の輪状のシミ→水に含まれるミネラル・重金属イオン等が原因。洗浄・滅菌には純水を使用して下さい。
- ◆白いシミ→ある種の洗浄剤に含まれるリン酸塩により発生することがあります。
- ◆茶褐色の付着物→器具の金属表面に黄色がかった茶色から褐色の付着物が現れることがあります。これらは洗浄剤の残存成分が滅菌の過程で化学変化してシミとなったもので、洗浄中に手の届きにくい部位に多く発生します。他にも、脂質・オートクレーブ内の汚れ等に起因してシミが発生する場合もあります。シミの状態が軽度であればイナミクリーンRに浸せば除去できます。

イナミクリーンLの使用で軽度のサビを除去することができます。



AC-102 イナミクリーンL(錆び除去剤)
250ml/1本入 ¥740(税別)

イナミクリーンRの使用で軽度のシミを除去することができます。



AC-202 イナミクリーンR(熱ヤケ瞬間除去剤)
250ml/1本入 ¥740(税別)

情熱とアイデアをカタチに



株式会社 イ ナ ミ

A Passion for a Nice View

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2
名古屋ベース：〒462-0064 愛知県名古屋市中区大我麻町285A1
大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18ユミール
九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17

TEL:03-3814-1731 FAX:03-3814-3334
TEL:052-934-7489 FAX:052-934-7490
TEL:0798-37-2880 FAX:0798-37-2881
TEL:092-504-1734 FAX:092-504-5355

※本カタログ記載価格は、すべて2024年11月現在の税別価格となっております。
※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※製品サイズは実寸ではございません。本カタログ記載サイズにてご確認ください。
※本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものと異なる場合があります。
※本カタログ中のQRコードのリンク先は予告なく閉鎖、または変更する場合があります。
※本カタログ中のQRコードは印字の状態によりリンク先が正しく表示されない場合がございます。

Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp



製造販売許可番号 13B1X00048
2024/10/v3.0/0pro