

谷戸氏 ab interno

トラベクトロトミーマイクロフック

トラベクトロトミーを眼内アプローチで行う専用フック。



MOVIE



view



M-2215S



view



M-2215L



view




M-2215R

M-2215S	直	全長 101mm	¥30,000	JAN:4547451332404
M-2215L	左	全長 100mm	¥30,000	JAN:4547451332398
M-2215R	右	全長 100mm	¥30,000	JAN:4547451332381
M-2215SS	3種セット	-	¥88,000	JAN:4547451332411

材質:SUS 薬事分類:クラスI JMDM:32761000 入数:1

ご考案者 谷戸 正樹 先生（松江市 松江赤十字病院 眼科）コメント


「眼内アプローチでトラベクトロトミーを行うための専用フックである。耳側・上方からのアプローチに適したストレートタイプと鼻側からのアプローチに適した左右向きのアングルドタイプがある。隅角プリズム観察下に、フック先端を、線維柱帯色素帯に沿って滑らせるようにシュレム氏管内に刺入する事で、そのままトラベクトロトミーに移行できる。フック先端が線維柱帯に透けて見える深さが適切である。シュレム氏管外壁の損傷を避けるために、フック先端の刺入が深すぎる場合に線維柱帯切開時の抵抗を感じる先端デザインとなっており、その場合には、やや浅い位置にフック先端を引いて、抵抗の無い深さでトラベクトロトミーを行う。」

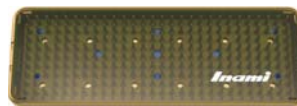

M-2215SS 3本セットは滅菌トレー付き

M-2700A

滅菌トレー 3本用（参考価格 25,500円）

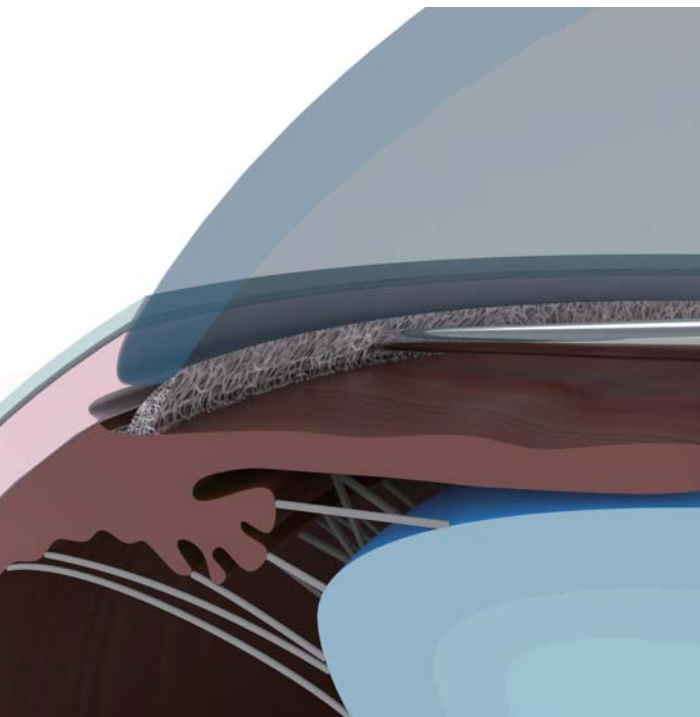

www.inami.co.jp



Find us on Facebook!

www.facebook.com/inami.co.jp