

# LACRIFAST





**FiberTech**  
Product & Technology Integrator



# 製品ラインアップ

## LACRIFAST

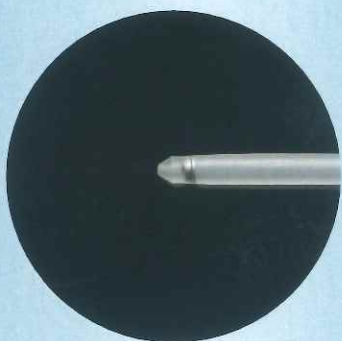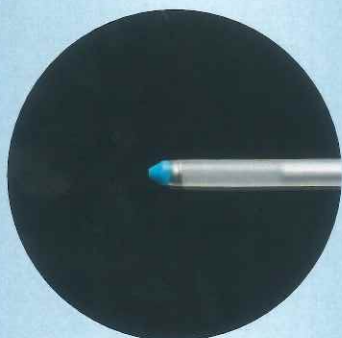

### LACRIFAST 特長

- ・潤滑性親水性コーティング付与により、挿入性に優れています。
- ・新素材 SIBS (スチレン・イソブチレン・スチレンブロック共重合体) を採用し、チューブの破断強度を向上させました。
- ・ブジーによる突き抜け防止対策として先端部にリングを配置しました。
- ・チューブ先端を開放端にしました。
- ・ブジーの挿入を容易にしました。

## LACRIFAST EX



チューブ本体を太径化しました。

### LACRIFAST EX 特長

- ・チューブ径 1.5mm タイプ
- ・潤滑性親水性コーティング付与により、挿入性に優れています。
- ・新素材 SIBS (スチレン・イソブチレン・スチレンブロック共重合体) を採用し、チューブの破断強度を向上させました。
- ・ブジーによる突き抜け防止対策として先端部にリングを配置しました。
- ・チューブ先端を開放端にしました。
- ・ブジーの挿入を容易にしました。

## LACRIFAST CL




新設計のチューブ先端盲端化により、リングをなくしました。

### LACRIFAST CL 特長

- ・潤滑性親水性コーティング付与により、挿入性に優れています。
- ・新素材 SIBS (スチレン・イソブチレン・スチレンブロック共重合体) を採用し、チューブの破断強度を向上させました。
- ・ブジーの挿入を容易にしました。
- ・新設計のチューブ先端盲端化により、リングをなくしました。

# 製品仕様

## LACRIFAST

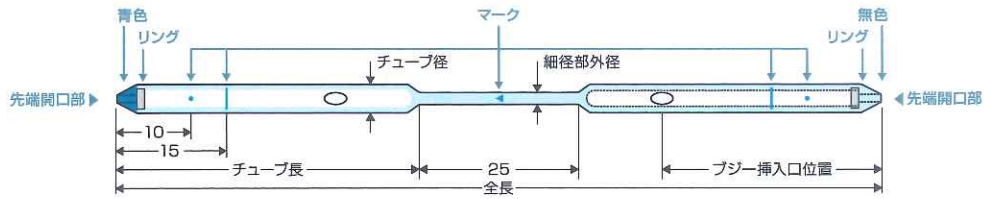


単位 mm

| 製品名                     | チューブ径    | 細径部外径 | 全長  | チューブ長 | プジー挿入口位置 |
|-------------------------|----------|-------|-----|-------|----------|
| LACRIFAST (スタンダード type) | 1.0      | 0.7   | 105 | 40    | 30       |
| LACRIFAST (ショート type)   | (内径 0.5) |       | 90  | 32.5  | 24       |

材質：ポリウレタン樹脂混合物 ステンレス鋼 (リング)

## LACRIFAST EX

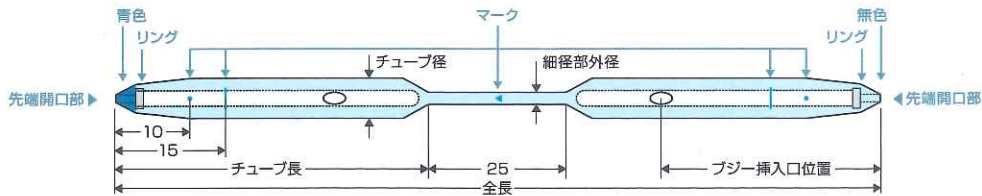


単位 mm

| 製品名                        | チューブ径    | 細径部外径 | 全長  | チューブ長 | プジー挿入口位置 |
|----------------------------|----------|-------|-----|-------|----------|
| LACRIFAST EX (スタンダード type) | 1.5      | 0.8   | 105 | 40    | 30       |
| LACRIFAST EX (ショート type)   | (内径 0.5) |       | 90  | 32.5  | 24       |

材質：ポリウレタン樹脂混合物 ステンレス鋼 (リング)

## LACRIFAST CL

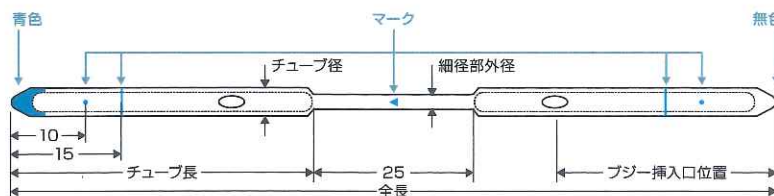


単位 mm

| 製品名                        | チューブ径    | 細径部外径 | 全長  | チューブ長 | プジー挿入口位置 |
|----------------------------|----------|-------|-----|-------|----------|
| LACRIFAST CL (スタンダード type) | 1.0      | 0.7   | 105 | 40    | 30       |
| LACRIFAST CL (ショート type)   | (内径 0.5) |       | 90  | 32.5  | 24       |

材質：ポリウレタン樹脂混合物

## プジー

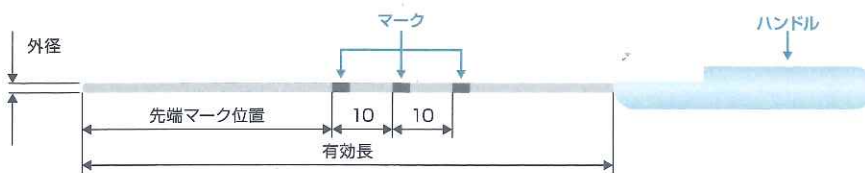

単位 mm

| 製品名   | 外径  | 有効長 | 先端マーク位置 |
|---|-----|-----|---------|
| LACRIFAST・LACRIFAST EX・LACRIFAST CL (スタンダード type) | 0.5 | 55  | 30      |
| LACRIFAST・LACRIFAST EX・LACRIFAST CL (ショート type)   |     |     | 24      |

材質：ステンレス鋼、ポリプロピレン (ハンドル)



# 製品情報

## LACRIFAST

| 製品名                     | カタログ番号   | 商品番号     | 概要         | 包装単位     | JANコード        |
|-------------------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| LACRIFAST (スタンダード type) | LF2-R105 | 303-3063 | 外径 : 1.0mm | 2セット / 箱 | 4540778147225 |
|                         |          |          | 全長 : 105mm |          |               |
|                         |          |          | 付属品 : プジ   |          |               |
| LACRIFAST (ショート type)   | LF2-R090 | 303-3064 | 外径 : 1.0mm | 2セット / 箱 | 4540778147232 |
|                         |          |          | 全長 : 90mm  |          |               |
|                         |          |          | 付属品 : プジ   |          |               |

## LACRIFAST EX

| 製品名                        | カタログ番号   | 商品番号     | 概要         | 包装単位     | JANコード        |
|----------------------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| LACRIFAST EX (スタンダード type) | LF2-X105 | 303-3065 | 外径 : 1.5mm | 2セット / 箱 | 4540778147249 |
|                            |          |          | 全長 : 105mm |          |               |
|                            |          |          | 付属品 : プジ   |          |               |
| LACRIFAST EX (ショート type)   | LF2-X090 | 303-3066 | 外径 : 1.5mm | 2セット / 箱 | 4540778147256 |
|                            |          |          | 全長 : 90mm  |          |               |
|                            |          |          | 付属品 : プジ   |          |               |

## LACRIFAST CL

| 製品名                        | カタログ番号    | 商品番号     | 概要         | 包装単位     | JANコード        |
|----------------------------|-----------|----------|------------|----------|---------------|
| LACRIFAST CL (スタンダード type) | LF2-CL105 | 303-3170 | 外径 : 1.0mm | 2セット / 箱 | 4540778166066 |
|                            |           |          | 全長 : 105mm |          |               |
|                            |           |          | 付属品 : プジ   |          |               |
| LACRIFAST CL (ショート type)   | LF2-CL090 | 303-3171 | 外径 : 1.0mm | 2セット / 箱 | 4540778166073 |
|                            |           |          | 全長 : 90mm  |          |               |
|                            |           |          | 付属品 : プジ   |          |               |

**STERILE** エチレンオキシドガス滅菌済



再使用、再滅菌しないでください。



使用上の注意:必ず添付文書をご覧ください。

販売名:カネカ涙道チューブ EY-N2  
医療機器認証番号:226ADBZX00221000  
保険医療材料請求区分:涙道チューブ

※「ラクリファースト\ Lacrifast」は(株)カネカの登録商標です。

製造販売元

株式会社 **カネカ**

〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18 TEL.06-6226-6256

販売元

株式会社 **カネカメディックス**

<http://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)

TEL.050-3181-4100

大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー)

TEL.050-3181-4060

## ■ 涙道チューブ専用鑷子 FT-LFT01 商品番号:303-3200

製造販売届出番号:13B1X00048002238



製造販売元 株式会社 **イナミ**

販売代理店

ファイバーテック株式会社 千葉県佐倉市西御門409-1

MD-KLF0001.02/201705A

[www.fibertech.jp](http://www.fibertech.jp)

問い合わせ先

ファイバーテック株式会社 マーケティング本部

東京都千代田区神田錦町3-23 TEL:03-5259-7601 FAX:03-5259-1155